

myRogerMic 1.0

Käyttöohje



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Käytön aloittaminen

myRogerMic-sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Hyödynnä kaikki sovelluksen mahdollisuudet tutustumalla huolellisesti käyttöohjeisiin.

Käyttötarkoitus

myRogerMic-sovellus on tarkoitettu nykyisten Roger On™ -toimintojen valitsemiseen, säätämiseen ja tallentamiseen sekä tilatietojen käyttämiseen langattomasti ja visuaalisesti.



Yhteensopivuustiedot:

myRogerMic-sovelluksen käyttäminen edellyttää Phonak Roger On™- tai Phonak Roger On™ iN -mikrofonia.

myRogerMic-sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on Bluetooth® Low-Energy (LE) -ominaisuus ja iOS-versio 13 tai uudempi. Sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2 -versiota ja Android™ OS 7.0 -versiota tai uudempia versioita.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

iPhone® on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.


Android™ on Google LLC:n tavaramerkki.

iOS on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.

Sisältö


Käytön aloittaminen	2
Yleiskatsaus	3
myRogerMic-sovelluksen asentaminen	4
Laiteparin muodostaminen Roger On -mikrofonin kanssa	5
Parituksen vianmääritys	6
Roger On -mikrofonin yhteysongelmien vianmääritys	7
Mikrofonimuodon toiminnot*	8
Suuntaaminen	9
Oman muodon luominen	10
MultiBeam 2.0 -teknologia	11
Roger On -mikrofonien lisääminen, valitseminen ja poistaminen	12
MultiTalker Network	13
Muut toiminnot	14
Tärkeitä turvallisuustietoja, Merkkien selitykset	15

Yleiskatsaus

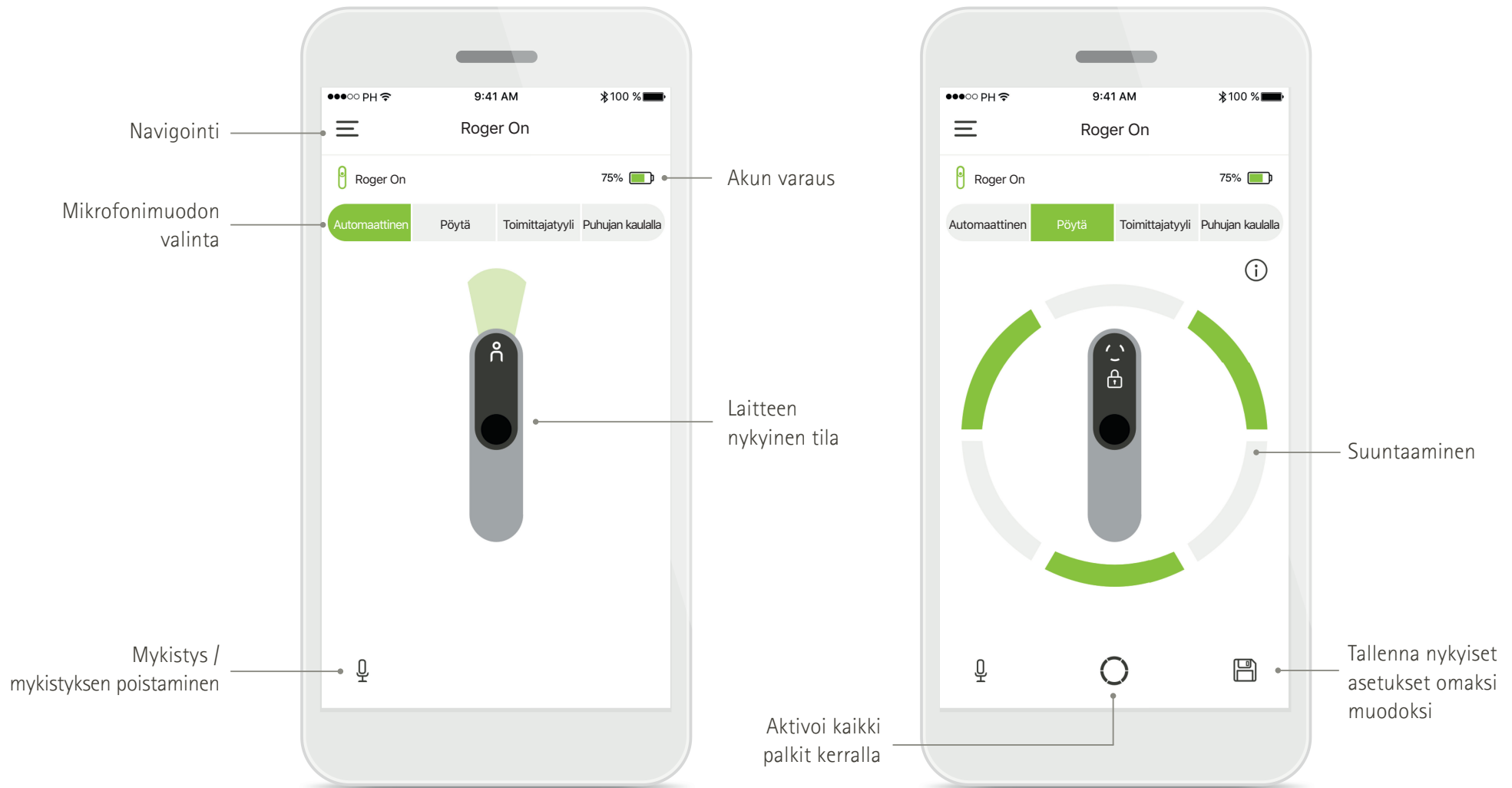


myRogerMic-sovelluksen asentaminen


- Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta
- Ota älypuhelimien Bluetooth® käyttöön

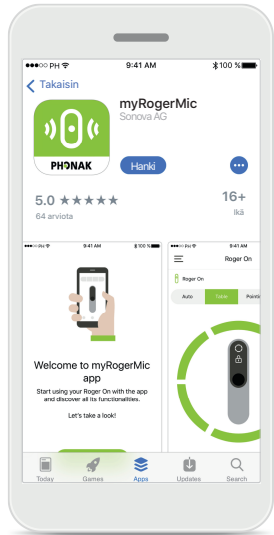


Lataa myRogerMic-sovellus
Lataa sovellus sovelluskaupasta.
Avaa myRogerMic-sovellus,
kun se on asennettu.

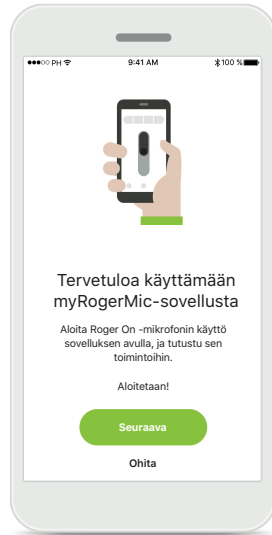

Avaa myRogerMic-sovellus
Avaa sovellus ja valitse
Seuraava tai **Ohita**
käyttöönotto-ohjeet.

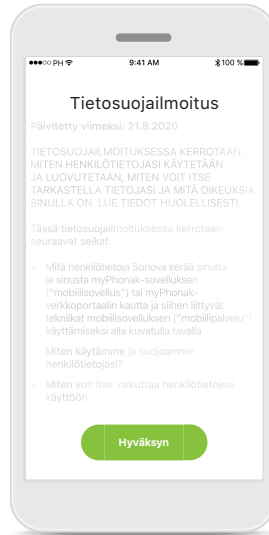

Tietosuojailmoitus
Jos haluat käyttää sovellusta,
sinun on hyväksyttävä
tietosuojailmoitus
valitsemalla **Hyväksyn**,
ennen kuin voit jatkaa.

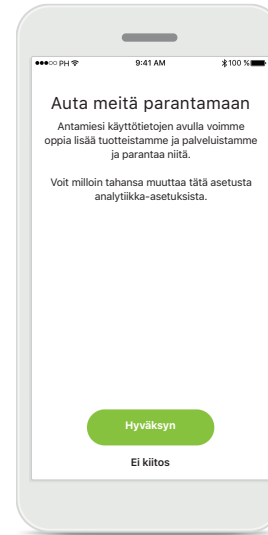

Tuotteen parannukset
Käyttötietoja jakamalla
voit auttaa meitä
parantamaan tuotteitamme.

Valitse **Hyväksyn**, jos
haluat jakaa anonymisoidut
käyttötiedot, tai valitse
Ei kiitos, jos et halua jakaa
tietoja.


Laiteparin muodostaminen Roger On -mikrofonin kanssa

Kun haluat yhdistää Roger On -mikrofonin myRogerMic-sovellukseen, seuraa sovelluksen ohjeita, jotka on kuvattu seuraavaksi. Voit yhdistää sovellukseen enintään kymmenen Roger On -mikrofonia. Lisätietoja laitteiden lisäämisestä on kohdassa Roger On -mikrofonien lisääminen, valitseminen ja poistaminen.




Paritusohjeet

Seuraa näytön ohjeita ja valitse **Jatka**.

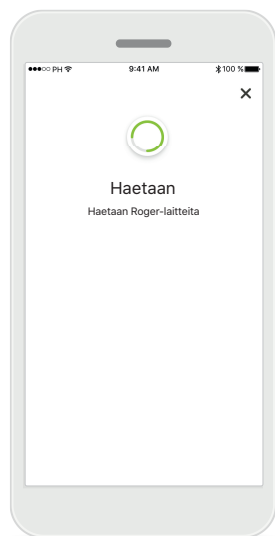


Haetaan

Sovellus etsii Roger On -mikrofoneja ja näyttää ne, kun ne havaitaan. Tämä voi kestää muutaman sekunnin.

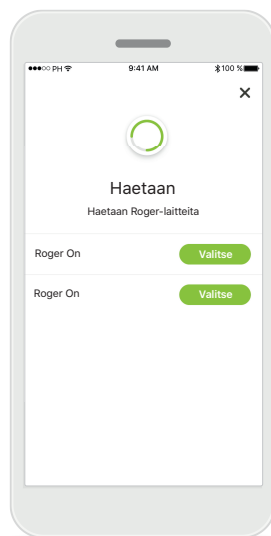


Valitse

Napauta **Valitse**-kohtaa, kun näet Roger On -mikrofonisi luettelossa. Et voi yhdistää useita Roger On -mikrofoneja samaan aikaan. Jokainen Roger On -mikrofoni on yhdistettävä erikseen.

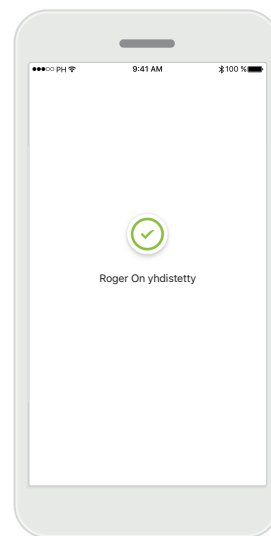

Parinmuodostus valmis

Roger On on nyt yhdistetty. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.

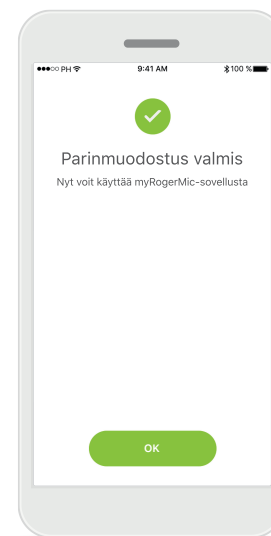


Asennus valmis

Nyt voit käyttää kaikkia myRogerMic-sovelluksen toimintoja. Siirry päänäyttöön valitsemalla **Ok**.


Parituksen vianmääritys

Mahdollisia virheitä parituksen aikana.

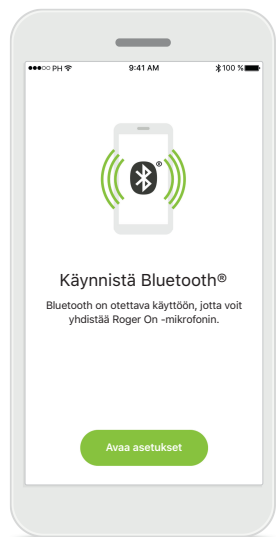


Bluetooth – iOS

Mobiililaitteesi Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää Roger On -mikrofonin. Jos sinulla on iPhone, voit ottaa sen käyttöön napauttamalla **Avaa asetukset** -painiketta.

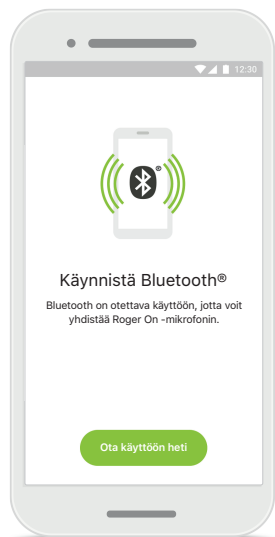


Bluetooth – Android

Mobiililaitteesi Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää Roger On -mikrofonin. Jos sinulla on Android-laite, voit ottaa sen käyttöön napauttamalla **Ota käyttöön heti** -painiketta.

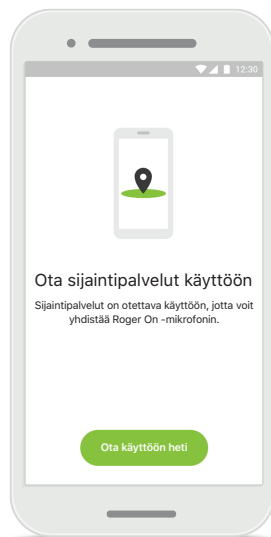

Sijainti

Android-laitteissa on otettava käyttöön Sijaintipalvelut, kun Bluetooth-laitteita paritetaan ensimmäisen kerran. Alkuasennuksen jälkeen voit ottaa Sijaintipalvelut taas pois käytöstä.

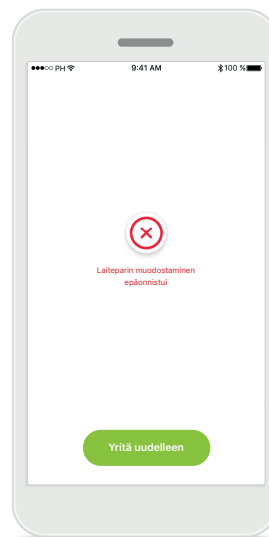


Laiteparin muodostaminen epäonnistuu

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, voit:

1. Käynnistää parituksen uudelleen valitsemalla **Yritä uudelleen**.
2. Sulkea sovelluksen ja aloittaa alusta.

Roger On -mikrofonin yhteysongelmien vianmääritys

Mahdollisia virheitä Roger On -mikrofonin yhdistämisen aikana.

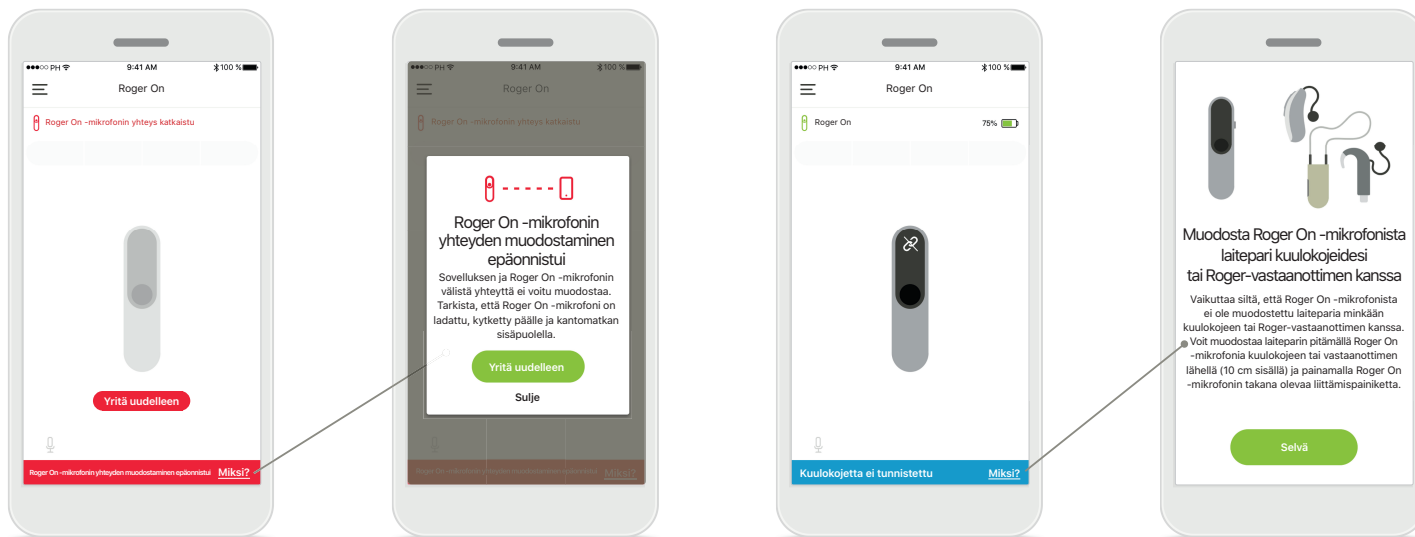

Yhteyden muodostaminen epäonnistuu

Jos yhteyden muodostaminen myRogerMic-sovelluksesta Roger On -mikrofoniin epäonnistuu, yritä muodostaa yhteys uudelleen, mutta tarkista ensin seuraavat:

- Roger On -mikrofoni on kytketty päälle, eikä sen akun varaus ole alhainen tai tyhjentyne.
- Roger On -mikrofoni on Bluetooth-mobiililaitteen kantamatkan sisäpuolella.


Yhteyden muodostaminen epäonnistuu – ohjeet

Napauta **Miksi**-painiketta, niin näet, miksi yhteyden muodostaminen epäonnistui, ja saat ohjeet siitä, miten voit muodostaa yhteyden uudelleen.

Kuulokojetta ei tunnistettu


Roger On -mikrofonia ei ole yhdistetty kuulokojeisiisi. Napauta **Miksi**-painiketta, niin saat ohjeet siitä, miten voit muodostaa Roger On -mikrofonista laiteparin kuulokojeidesi tai Roger-vastaanottimen kanssa.

Mikrofonimuodon toiminnot*

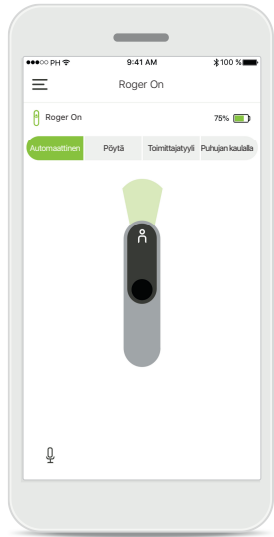


Automaattinen muoto

Kun Roger On -mikrofoni on automaattisessa muodossa, sen mikrofonimuoto riippuu sen asennosta. Mikrofonimuoto näkyy näytössä olevassa Roger On -mallissa.

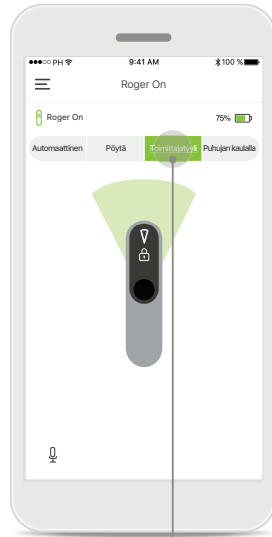

Lukitse mikrofonimuoto

Napauta haluamaasi mikrofonimuotoa. Roger On -mikrofoni on nyt lukittu valittuun mikrofonimuotoon.

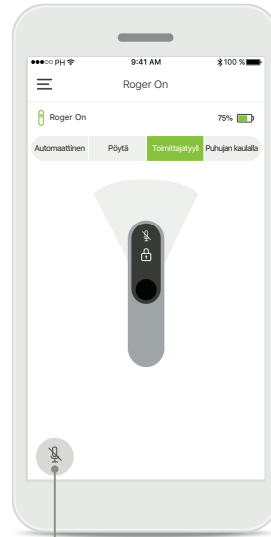


Mykistä / poista mykistys

Voit mykistää Roger On -mikrofonin ja poistaa mykistykseen painamalla mikrofonikuvaketta.

*Lisätietoja eri mikrofonimuotojen toiminnoista saat Roger On -käyttöohjeesta.

Suuntaaminen

Kun Roger On -mikrofoni on asetettu pöydälle, MultiBeam-teknologia voi parantaa puheenerotuskykyä hälyisissä tilanteissa.¹ Esimerkiksi ravintolassa käytävässä ryhmäkeskustelussa saatat kuulla sellaisen puhujan äänen, joka ei ole sinun näkökulmastasi kiinnostava puhuja. Näin voi käydä, jos samassa pöydässä käydään samaan aikaan toinenkin keskustelu. Tässä tapauksessa voit myRogerMic-sovelluksen avulla suunnata mikrofonin sitä puhujaa kohti, jonka puheen haluat kuulla.

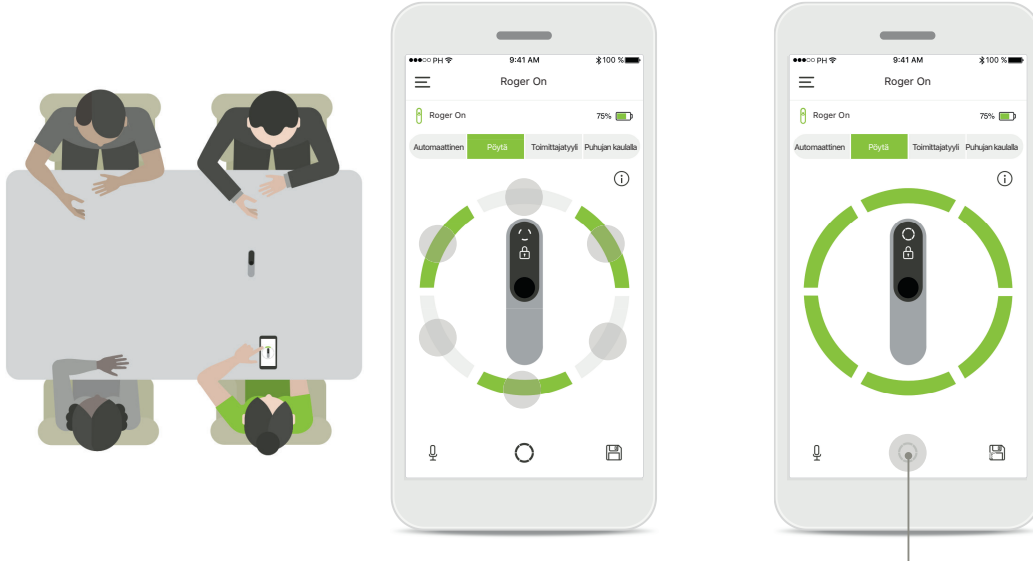

Pöytämuoto

Aseta Roger On keskelle pöytää. Paremman käyttökokemuksen varmistamiseksi aseta Roger On niin, että latausportti osoittaa sinua kohti, tai aseta se samaan asentoon kuin sovelluksessa.

Aktivoi palkit / poista palkit käytöstä

Aktivoi segmentti tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.


Aktivoi kaikki kuusi palkkia kerralla

Voit aktivoida kaikki kuusi palkkia napauttamalla näytössä näkyvää ympyräkuvaketta.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Oman muodon luominen


Jos käytät usein jotain tiettyä palkkikuviota, voit tallentaa sen omaksi muodoksi sovelluksen kautta. Tämän jälkeen voit käyttää tätä palkkikuviota suoraan Roger On -mikrofonista tai yhdellä napautuksella sovelluksessa. Voit tallentaa enintään kaksi omaa muotoa, ja käyttää ja poistaa niitä milloin tahansa.

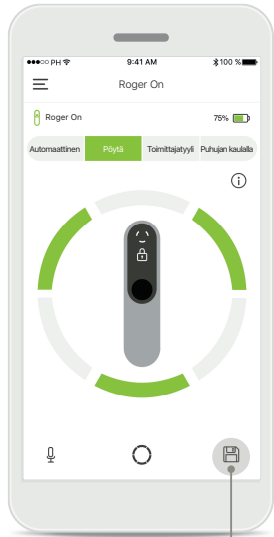


Tallenna oma muoto
Kun olet valinnut usein käyttämäsi palkkikuvion, tallenna se omaksi muodoksi napauttamalla tallennuskuvaketta. Voit tallentaa enintään kaksi omaa muotoa.



Nimeä oma muoto
Anna palkkikuvion haluamasi nimi ja valitse sen jälkeen **Tallenna**.

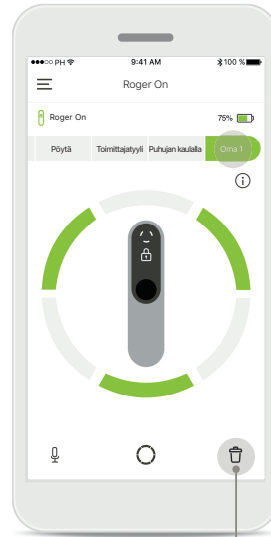


Käytä omaa muotoa ja poista se
Tallennettu oma muoto näkyy manuaalisena muotona mikrofonimuotojen luettelossa. Voit poistaa oman muodon napauttamalla poistokuvaketta.

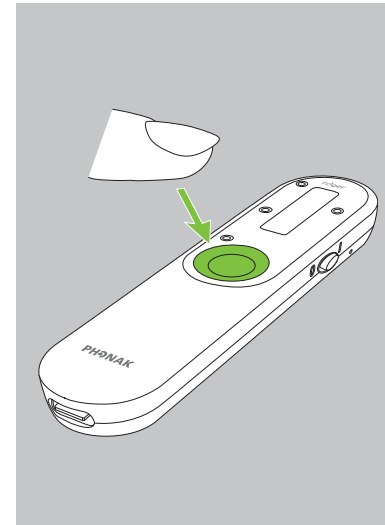


Oman muodon käyttäminen Roger On -mikrofonilla
Voit ottaa oman muodon käyttöön myös Roger On -mikrofonilla. Paina Roger On -mikrofonin toimintopainiketta toistuvasti, kunnes oma muoto on käytössä.

MultiBeam 2.0 -teknologia


Kun sinulla on Sonovan valmistamat, RogerDirect-teknologiaa hyödyntävät kuulokojeet, voit ottaa MultiBeam 2.0:n käyttöön. Kun asetat Roger On -mikrofonin keskelle pöytää, MultiBeam 2.0:n avulla kuulet, mistä suunnasta puhuja puhuu. Tätä toimintoa voi käyttää vain lukitussa pöytämuodossa.

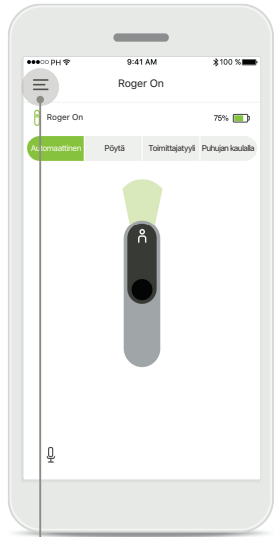


Avaa valikko
Avaa valikko napauttamalla kolmen palkin kuvaketta.

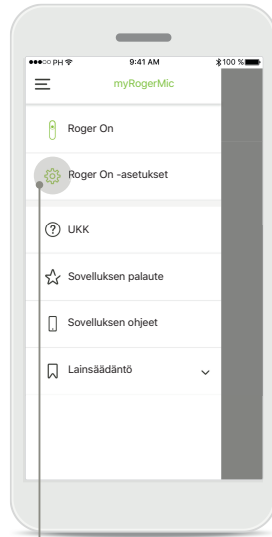


Käytä asetuksia
Napauta Roger On -asetuksia.

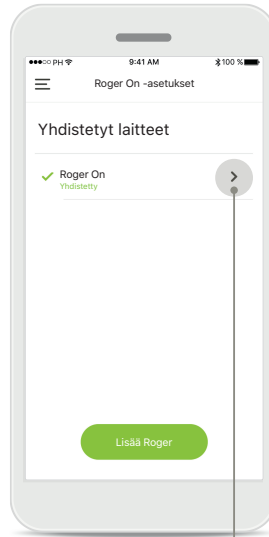

Valitse Roger On
Napauta oikean Roger On -mikrofonin vieressä olevaa nuolta.

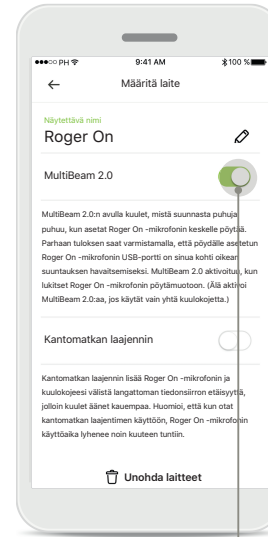


Ota käyttöön MultiBeam 2.0
Ota MultiBeam 2.0 käyttöön napauttamalla liukusäädintä. Asetus on nyt tallennettu, ja Roger On ottaa MultiBeam 2.0:n käyttöön aina, kun siirryt manuaalisesti pöytämuotoon.

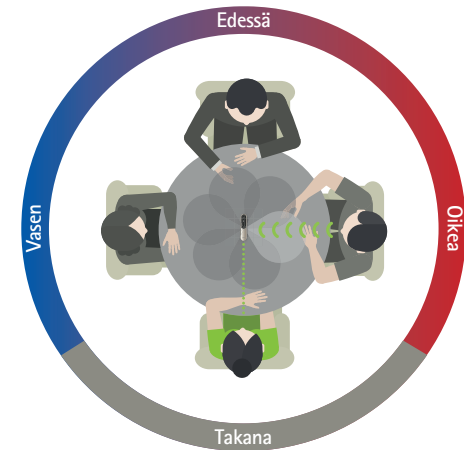


Käyttö pöydällä
Aseta Roger On keskelle pöytää ja varmista, että latausportti osoittaa sinua kohti. Lukitse sen jälkeen Roger On pöytämuotoon sovelluksen kautta tai painamalla toimintopainiketta.


Roger On -mikrofonien lisääminen, valitseminen ja poistaminen

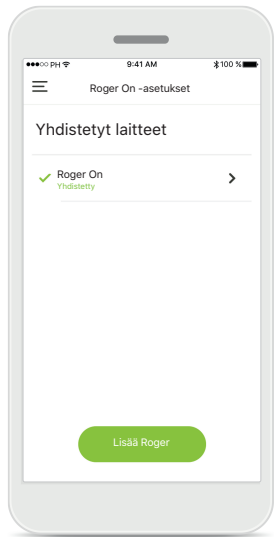


Lisää uusi Roger On
Siirry sovelluksen päänavigointipalkin kautta Roger On -asetuksiin ja napauta **Lisää Roger** -painiketta.

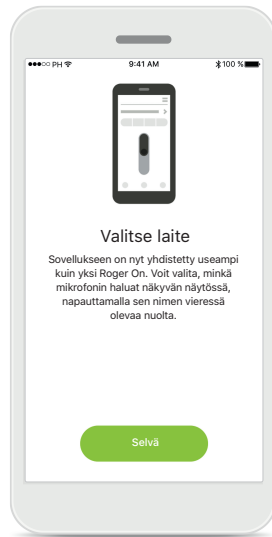


Valitse useista laitteista
Laiteparin muodostamisen jälkeen näytöllä näkyvät ohjeet siitä, miten voit valita haluamasi Roger On -mikrofonin.

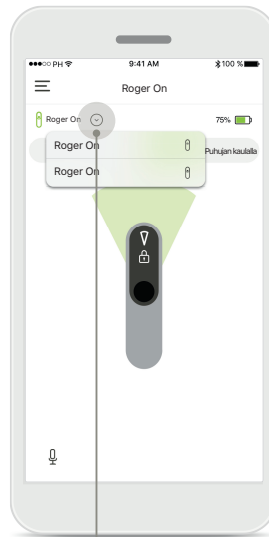

Valitse useista laitteista
Kun sovellukseen on yhdistetty useampi kuin yksi Roger On, aloitusnäytössä näkyy nuoli. Napauta nuolta ja valitse, mitä mikrofonia haluat hallita sovelluksella.

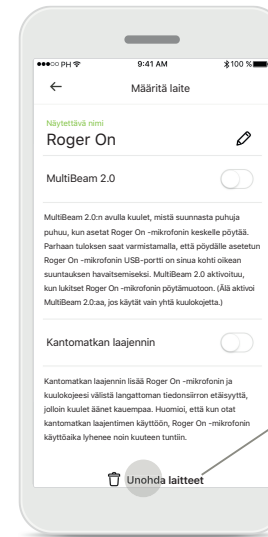

Poista Roger On
Siirry sovelluksen päänavigointipalkin kautta Roger-asetuksiin ja valitse poistettava Roger On. Napauta sivun alareunassa olevaa Unohda laitteet -kuvaketta.

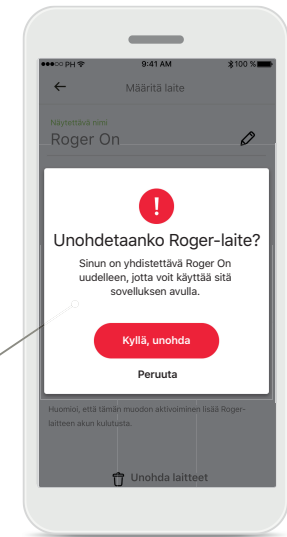


Vahvasta Roger On -mikrofonin poistaminen
Vahvasta, että haluat poistaa tämän Roger On -mikrofonin, napauttamalla **Kyllä, unohda** -painiketta.

MultiTalker Network

Roger On -mikrofoni voidaan yhdistää muihin Roger-mikrofoneihin (kuten Roger Table Mic II), jotta kuulisit paremmin suuren ryhmän jäsenten tai useiden kaukana olevien puhujien puhetta. Katso Roger On -käyttöohjeen luvusta 13 ohjeet toisen mikrofonin liittämiseen Roger On -mikrofoniin.

Kun Roger On -mikrofonia käytetään muiden mikrofonien kanssa MultiTalker Network -verkossa, se siirtyy automaattisesti puhujan kaulalla -muotoon (1). Kun asetat Roger On -mikrofonin pöydälle tai pidät sitä kädessä, se mykistyy automaattisesti. Sovelluksessa näkyy, että mikrofoni on mykistetty ja saat ohjeet mykistyksen poistamiseen (2).

Jos poistat Roger On -mikrofonin mykistyksen (painamalla pitkään mikrofonin keskellä olevaa toimintopainiketta), muut siihen yhdistetyt mikrofonit (jotka ovat samassa MultiTalker Network -verkossa) vaimenevat automaattisesti. Tämä näkyy myös myRogerMic-sovelluksessa (3).

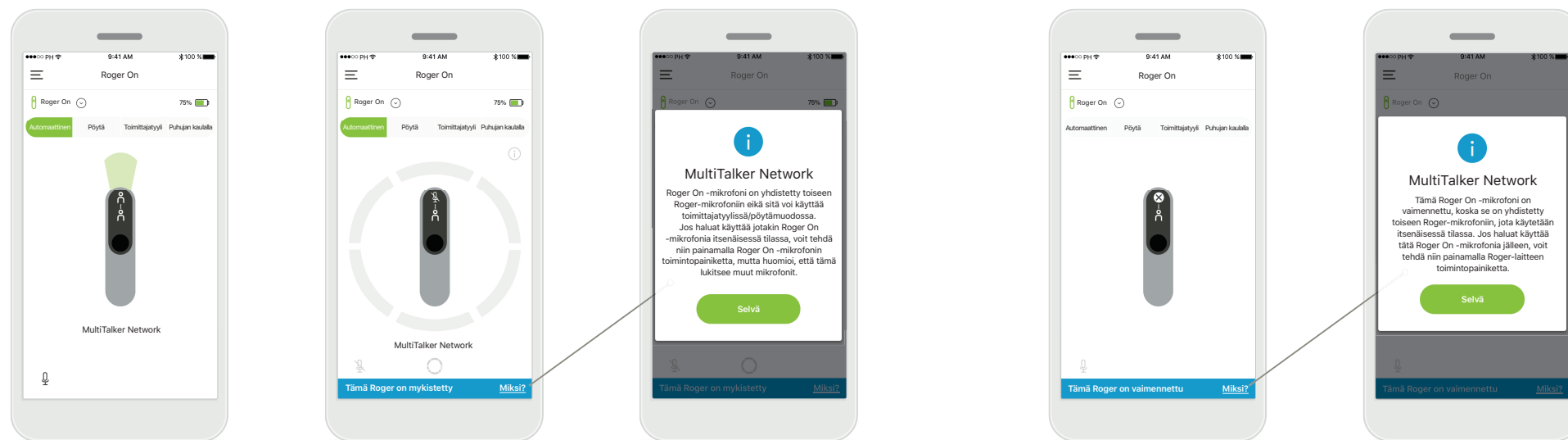

1. MultiTalker Network

Kun Roger On -mikrofoni on liitetty toiseen Roger-mikrofoniin, sovellus näyttää sen olevan puhujan kaulalla -muodossa.


2. Mykistetty Roger On

Mikrofoni on mykistetty, koska et käytä sitä puhujan kaulalla -muodossa. Napauta **Miksi?**-painiketta, niin saat lisätietoja ja ohjeet mykistyksen poistamiseen.


3. Vaimennettu Roger On

Mikrofonisi on vaimennettu, koska se on yhdistetty toiseen mikrofoniin, jota käytetään itsenäisessä tilassa (toimittajatyylillä tai pöytämuoto, MultiTalker Network -verkossa ja mykistys poistettu). Napauta **Miksi?**-painiketta, niin saat ohjeet vaimennuksen poistamiseen.


Muut toiminnot

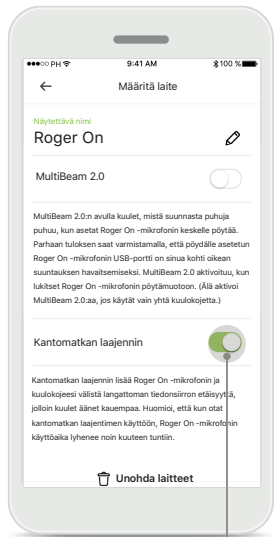

Kantomatkan laajennin
Voit ottaa Kantomatkan laajennin -ominaisuuden käyttöön siirtymällä sovelluksen päänavigointipalkin kautta Roger On -asetuksiin. Tämän ominaisuuden ansiosta kuulet äänet kauempaa, sillä se lisää Roger On -mikrofonin ja kuulokojeidesi välistä langattoman tiedonsiirron etäisyyttä.

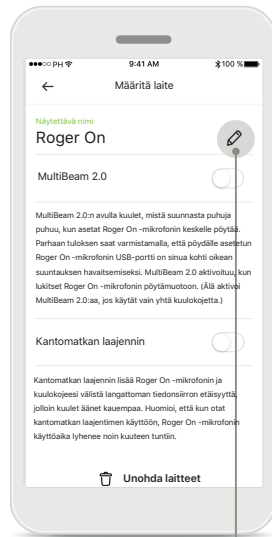

Nimeä Roger On -mikrofoni
Voit nimetä haluamasi Roger On -mikrofonin uudelleen valitsemalla sen ja napauttamalla muokkaukuvaketta (kynäkuvaketta).

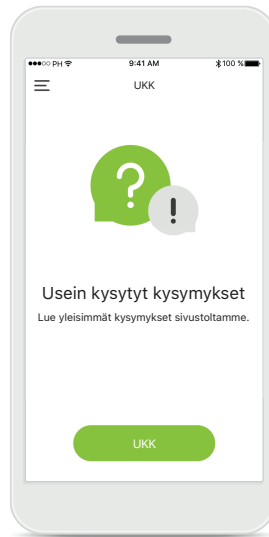

UKK
Voit siirtyä lukemaan usein kysytyjä kysymyksiä ulkoiselle sivustollemme.

Tärkeitä turvallisuustietoja



Olet itse vastuussa oman älypuhelimesi käytöstä. Käsittele älypuhelinia varovasti ja ole huolellinen sovelluksen käytössä.



Mikrofonimuodon vaihtaminen tai suuntaamisen käyttäminen voi heikentää varoitusten ja turvallisuussignaalien kuuluvuutta. Tämä voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.



Jos Roger On ei reagoi laitteeseen epätavallisten kenttähäiriöiden vuoksi, siirry pois häiritsevästä kentästä.



Jos Roger On ei reagoi, tarkista, onko Roger On kytketty päälle, onko akussa varausta jäljellä ja onko se Bluetooth LE:n kantaman sisällä.



Jos haluat ilmaisen paperiversion näistä käyttöohjeista, ota yhteys paikalliseen Sonova-edustajaan. Paperiversio lähetetään yleensä seitsemän päivän kuluessa.



Ota Bluetooth käyttöön. Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää Roger On -mikrofonin.



Älä aktivoi MultiBeam 2.0 -ominaisuutta, jos käytät vain yhtä kuulokojetta. Se voi heikentää kuulokojeesi suorituskykyä.

Merkkien selitykset



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.



Tämä symboli ilmoittaa, että käyttäjän on tärkeää kiinnittää huomiota tässä käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.



CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä Phonak-tuote täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset. CE-merkki otettu käyttöön 2020.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com