


myPhonak Junior 1.3

Betjeningsvejledning

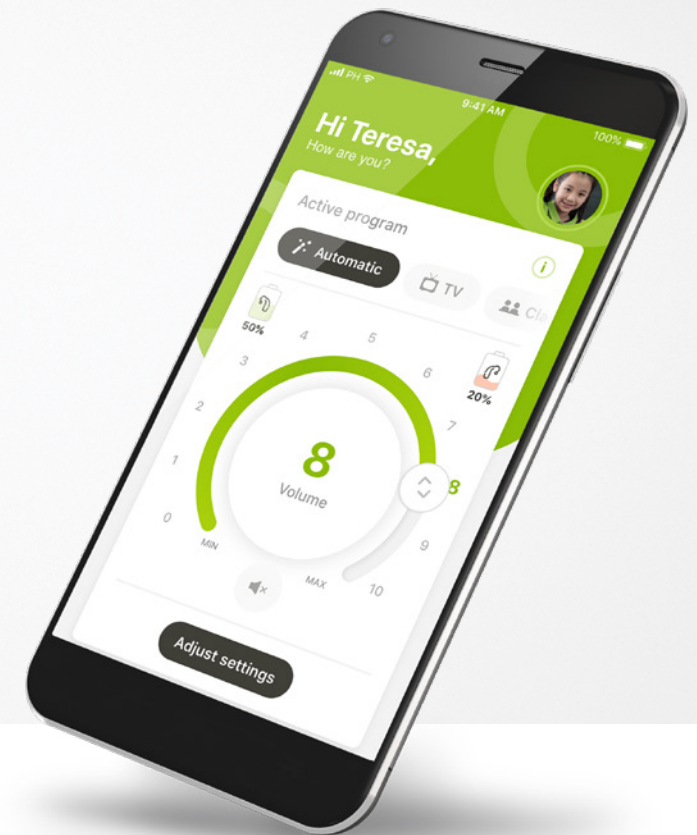

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Kom godt i gang

myPhonak Junior er en app, der er udviklet af Sonova, en af verdens førende virksomheder inden for høreløsninger, som har hovedsæde i Zürich i Schweiz. Læs betjeningsvejledningen grundigt, så du kan få glæde af alle de muligheder, appen giver.

Denne betjeningsvejledning beskriver funktionerne i myPhonak Junior, og hvordan brugeren kan benytte disse funktioner. Den beskriver også, hvordan visse funktioner kan spærres for børn med en forældrelås, så disse funktioner kun kan benyttes sammen med en voksen. Læs hele denne betjeningsvejledning, inden appen anvendes.

Den kognitive udvikling er forskellig hos børn, selv når de har samme alder. Graden af modenhed og opmærksomheden på risici skal evalueres individuelt for hvert enkelt barn for at vurdere, om barnet er egnet til at bruge myPhonak Junior.

For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises til kapitlet "Vigtige sikkerhedsoplysninger" på side 16. Følgende anbefalinger kan bruges som vejledning:

- Appen bør ikke anvendes til at foretage justeringer for børn under 6 år.
- Undlad at bruge appen til at foretage justeringer for et barn, medmindre barnet kan give pålidelig feedback om fordelene ved justeringen.
- Forskning har vist, at børn i alderen 10 år og derover er i stand til at bruge appen på hensigtsmæssig vis uden opsyn. Ved overvejelsen omkring, hvorvidt barnet er klar til uovervåget brug af appen, skal du sikre dig, at barnet kan træffe informerede beslutninger om, hvordan appindstillingerne vil påvirke hørelsen og bevidstheden om lyde omkring sig.
- Evnen til at kunne læse og forstå advarselsmeddelelsen er af største vigtighed.



Information om kompatibilitet:

Brug af myPhonak Junior forudsætter brug af Phonak høreapparater med Bluetooth® tilkoblingsmuligheder. myPhonak Junior kan anvendes på telefoner med Bluetooth® low energy (LE) funktion og er kompatibel med enheder med iOS® version 14.0 eller nyere. myPhonak Junior kan anvendes på Google Mobile Services (GMS) certificerede Android™ enheder, der understøtter Bluetooth® 4.2 og Android OS 8.0 og nyere.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker på licens.

iPhone® er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.


Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

iOS® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA og visse andre lande.


Indholdsfortegnelse

Lynoversigt	4
Installation af myPhonak Junior app	6
Parring med kompatible høreapparater	7
Forældrekontrol	9
Brugertilpasning	10
Fejlfinding af parringen	11
Fjernbetjening	12
Fjernsupportsession	13
Mine høreapparater	15
Vigtige sikkerhedsoplysninger	16
Symbolforklaring	20

Lynoversigt – fjernbetjening

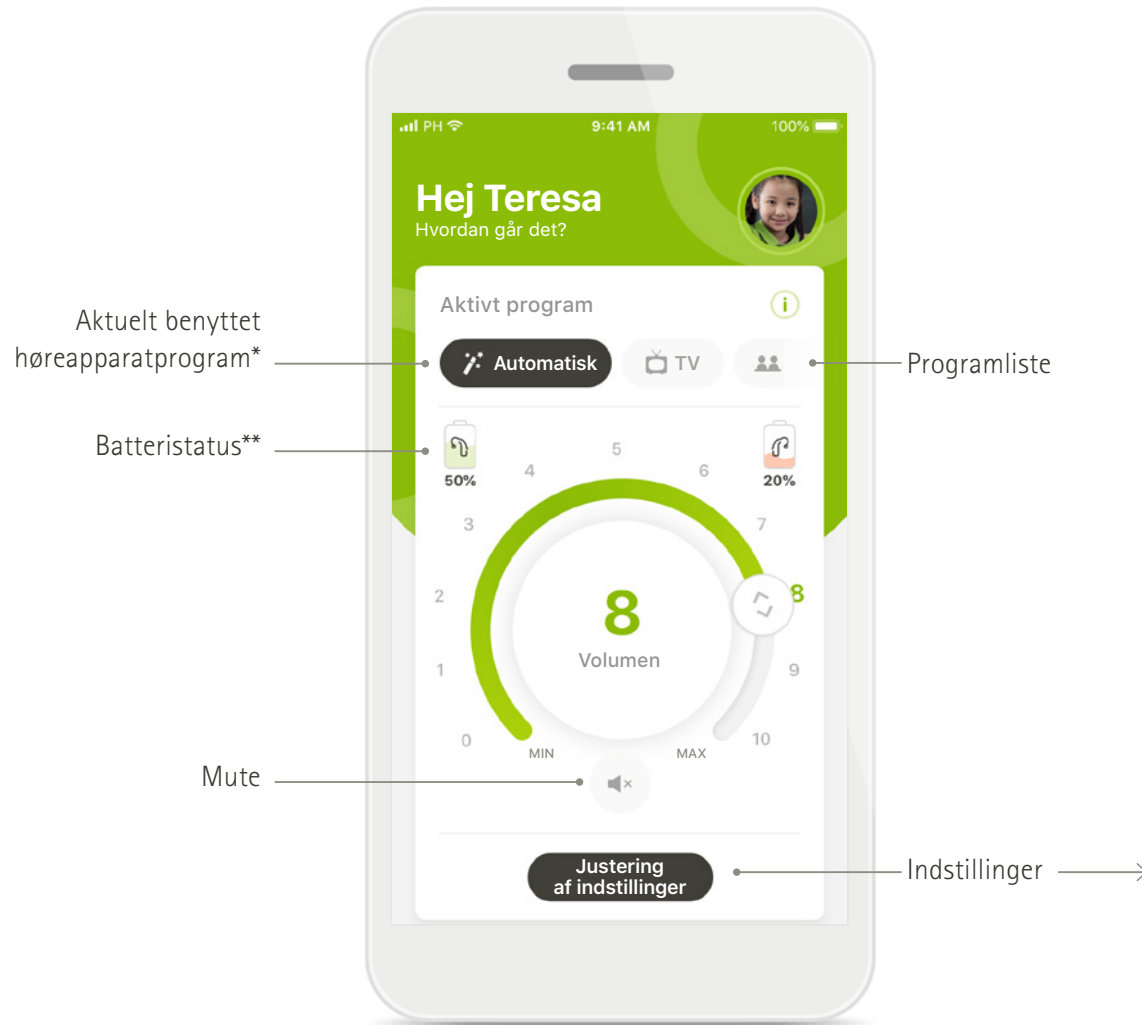

Fjernbetjening

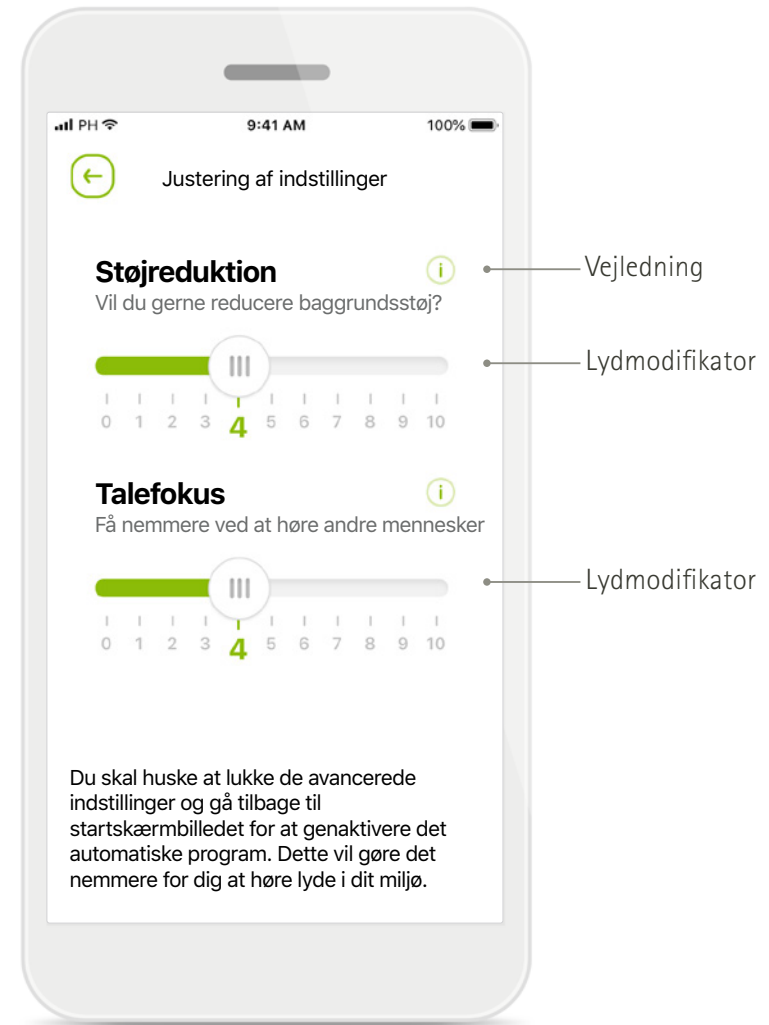


Justering af indstillinger

* AutoSense™ Sky OS til Sky høreapparater. AutoSense™ OS til Bolero, Naída og Audéo høreapparater.

**Kun tilgængeligt for genopladelige høreapparater.

Lynoversigt – fjernsupport*

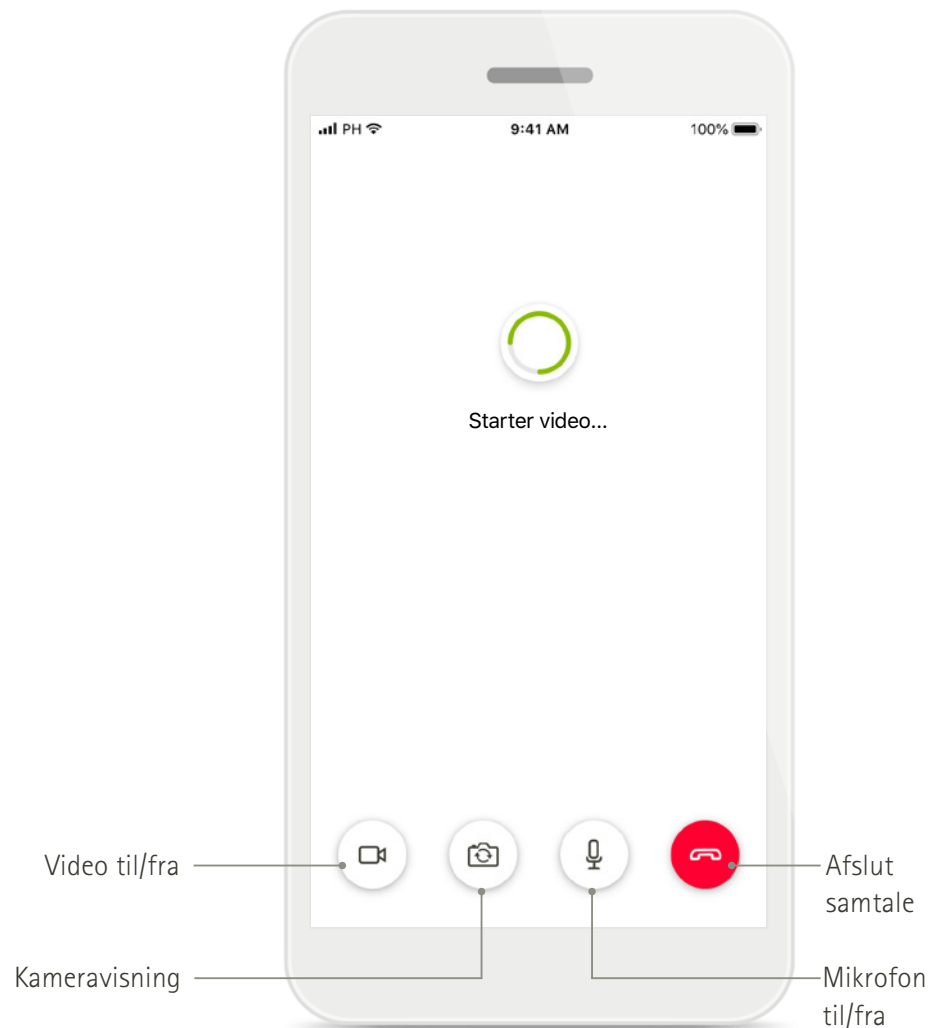

Fjernsupport opkald




Fjernsupport opkald

*Kun tilgængelig i udvalgte lande og via udvalgte hørespecialister

Installation af myPhonak Junior app

- Tilslut din smartphone til internettet via Wi-Fi eller mobildataforbindelse
- Aktiver Bluetooth på din smartphone

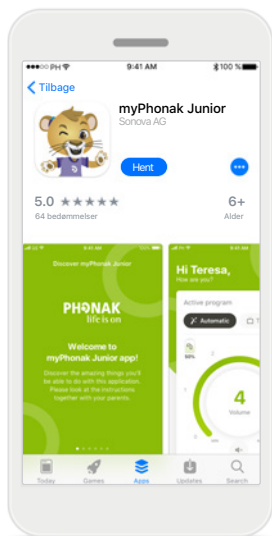

Download myPhonak Junior app

Download appen fra appbutikken. Åbn myPhonak Junior efter installationen




Åbn myPhonak Junior

Åbn appen, og klik på **Opdag**.




Fortrolighedserklæring

Du skal acceptere fortrolighedserklæringen ved at trykke på **Jeg accepterer** for at kunne bruge appen.

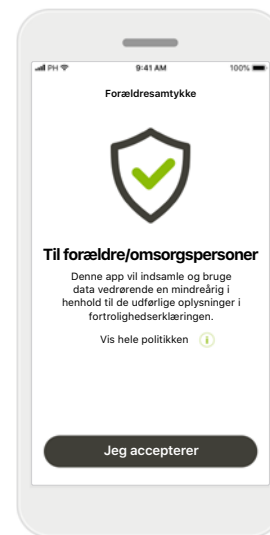

Forældresamtykke

Som forælder eller omsorgsperson skal du acceptere forældresamtykket for at kunne bruge appen. myPhonak Junior indsamler og bruger data vedrørende en mindreårig i overensstemmelse med oplysningerne i fortrolighedserklæringen.

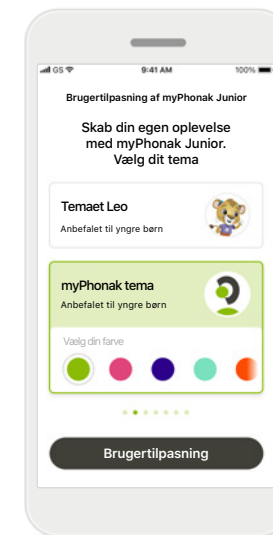

Vælg et tema

Forældre, omsorgspersoner eller brugere af appen kan vælge ud fra et "Leo" eller "myPhonak" tema. Begge temaer har de samme funktioner i appen. Temaet kan vælges under første opstart eller i Min profil.


Parring med kompatible høreapparater*

Følg nedenstående anvisninger for at slutte Bluetooth aktiverede høreapparater til myPhonak Junior.**




Vejlledning vedrørende parring

Tryk på **Fortsæt**, og følg vejledningen for dine høreapparater

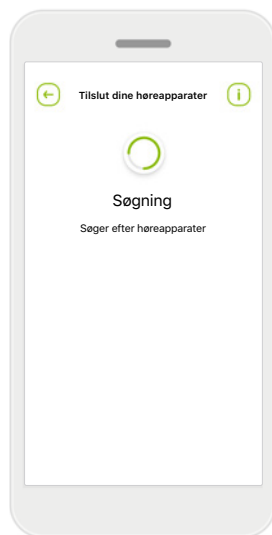


Søgning

Appen søger efter kompatible høreapparater og viser dem, når den finder dem. Dette kan tage nogle få minutter.

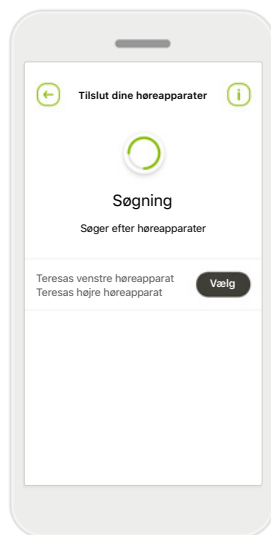


Valg

Tryk på **Vælg**, når dine høreapparater vises på listen.

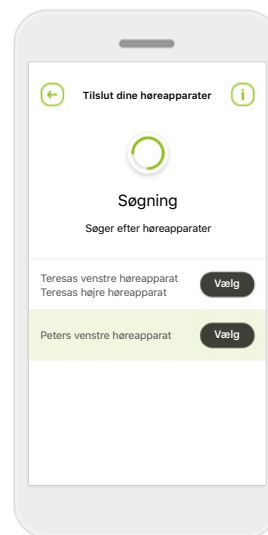

Flere høreapparater

Hvis der registreres flere høreapparater, vises de alle. For at fremhæve dit høreapparat skal du trykke på knappen på dit høreapparat.

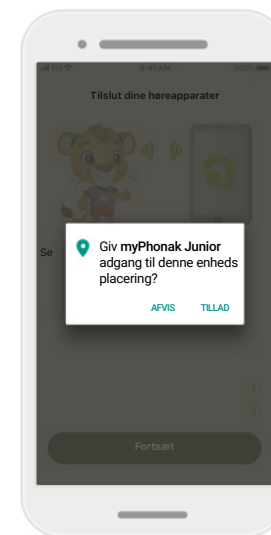

Lokalitet


På Android enheder skal du aktivere lokalitetstjenester, første gang du parrer Bluetooth enheder. Efter den første opsætning kan du deaktivere lokalitetstjenester igen.

*Kompatibel med Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P og Audéo P.

**Bluetooth streaming: For at streame musik eller modtage telefonopkald på dine høreapparater skal du gå til Indstillinger > Bluetooth og tilføje høreapparaterne på listen med dine tilsluttede enheder. Vend herefter tilbage til appen for at fortsætte parring.

Parring med kompatible høreapparater*

Følg nedenstående anvisninger for at slutte Bluetooth aktiverede høreapparater til myPhonak Junior.

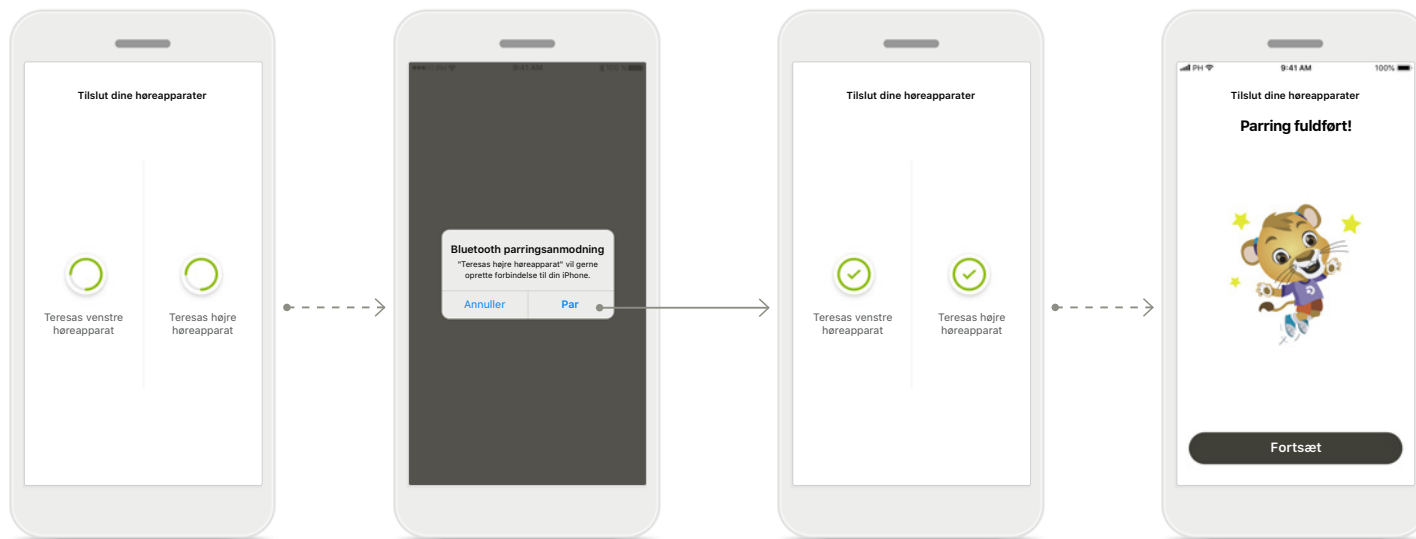

Parring af høreapparaterne
Appen opretter forbindelse til hvert høreapparat for sig.

Bekræft parring for alle høreapparater
Ved anmodning skal du bekræfte parring ved at trykke på **Par** i popup'en for hver individuelle enhed.


Parring fuldført
Begge høreapparater er nu parret. Der fortsættes automatisk til næste trin i appen.

Opsætning fuldført
Du er nu klar til at bruge alle kompatible funktioner i appen. Tryk på **Fortsæt** for at få adgang til hovedskærmen.

*Kompatibel med Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L og Audéo L.

Forældrekontrol

Følg nedenstående anvisninger til at aktivere forældrekontrollen med myPhonak Junior.

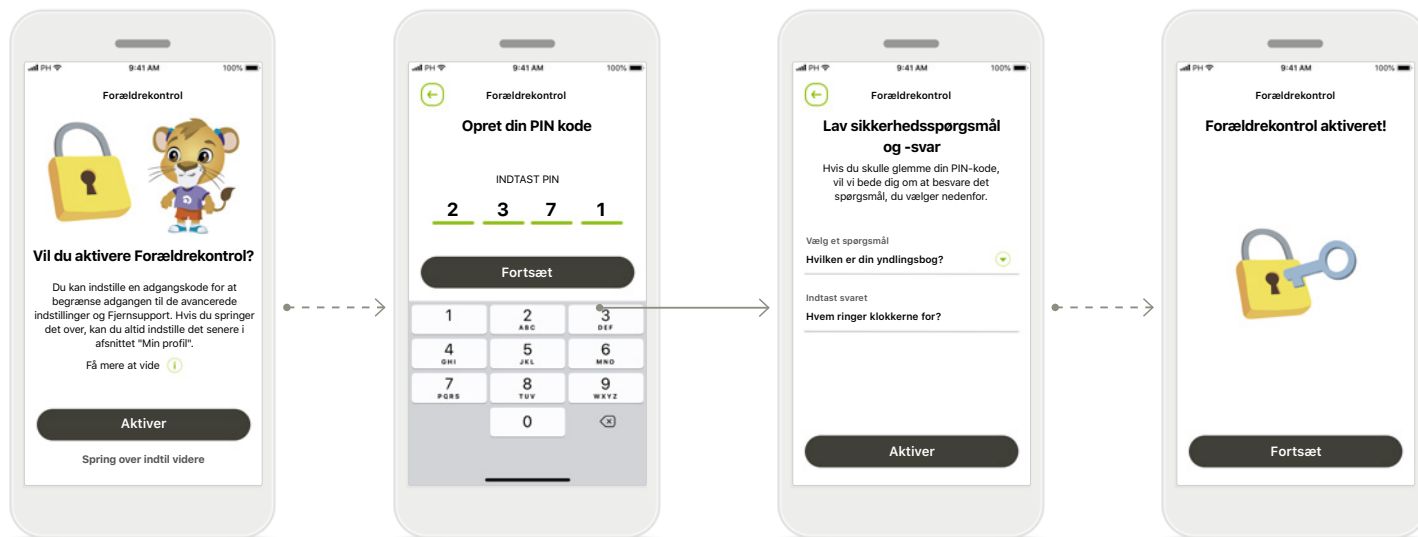

Aktivering af Forældrekontrol

Forældrekontrol kan aktiveres enten under den første opstart af appen eller i Din profil på et senere tidspunkt valgt af forældre/omsorgspersoner. Denne funktion hjælper med at begrænse adgangen til Fjernsupport, funktionen Tænd automatisk for genopladelige høreapparater samt valg af Bluetooth båndbredde til telefonopkald.

Opret din PIN kode

Definer en 4-cifret PIN-kode for at aktivere Forældrekontrol. Denne PIN-kode kan til enhver tid ændres eller nulstilles af forælderen/omsorgspersonen.

Sikkerhedsspørgsmål


Vælg et sikkerhedsspørgsmål, og indtast det rigtige svar. Dette spørgsmål bruges til at få adgang til begrænsede funktioner, hvis du glemmer din 4-cifrede PIN-kode.

Forældrekontrol aktiveret

Når du har valgt et sikkerhedsspørgsmål og skrevet svaret, kan du aktivere Forældrekontrol. Forældrekontrol kan også slås fra i app menuen, hvis der ikke er behov for det.


Brugertilpasning

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil anvende mulighederne for brugertilpasning i myPhonak Junior appen.

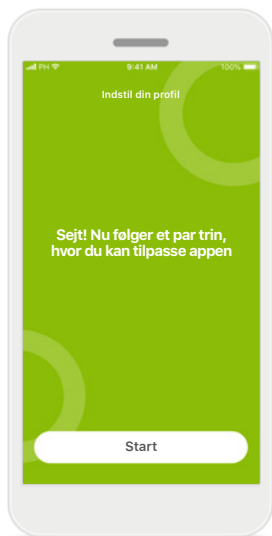


Start brugertilpasning

Du kan starte tilpasning enten under første opstart eller senere i afsnittet Din profil på startskærmen.

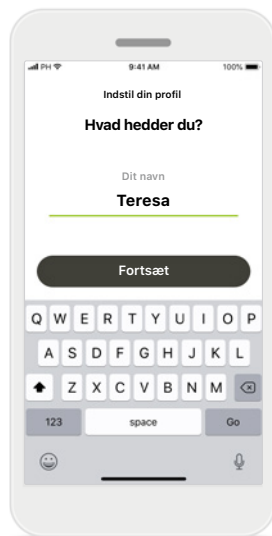


Brugerprofilnavn

Vælg et brugernavn.

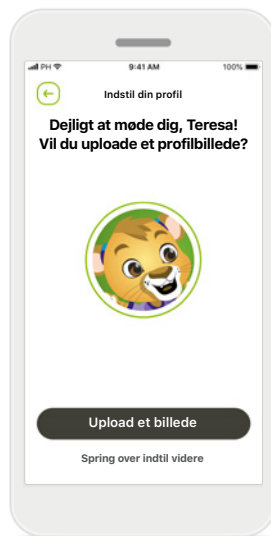

Brugerprofilbillede

Vælg et profilbillede. Dette kan springes over og opsættes på et senere tidspunkt i afsnittet Din profil.

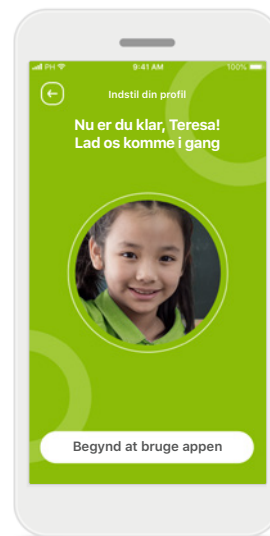


Yderligere muligheder

Andre muligheder for brugertilpasning omfatter ændring af appens baggrundsfarvetema og ændring af farven på de virtuelle høreapparater og hooken.

Fejlfinding af parringen


Mulige fejl under konfigurationen.

For flere oplysninger om fejlfinding henvises til Phonaks supportside.

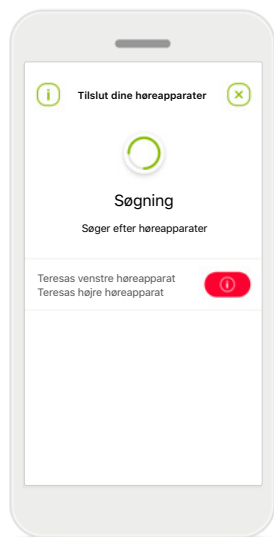

Inkompatible enheder


Appen kan ikke oprette forbindelse til enhederne, da de ikke er kompatible. Kontakt din høreapparatspecialist for at få flere oplysninger.

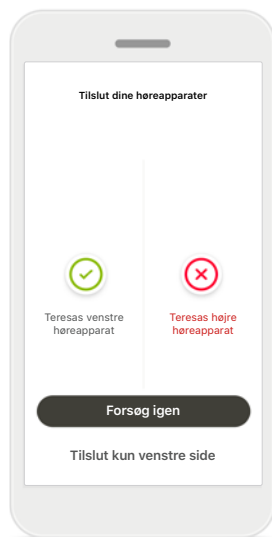

Fejl ved tilslutning af høreapparat

Hvis parringen af et af høreapparaterne mislykkes, kan du enten:

1. Trykke på **Forsøg igen** for at genstarte parringsprocessen.
2. Fortsætte med kun det ene af de to høreapparater.

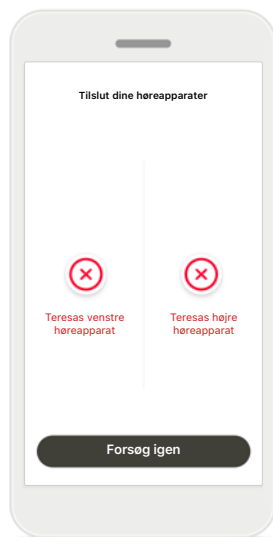


Der kunne ikke oprettes forbindelse til nogen af høreapparaterne

Tryk på **Forsøg igen** for at genstarte parringsprocessen, og følg anvisningerne.

Fjernbetjening – hovedvisning

Tilgængelige funktioner for alle høreapparater.

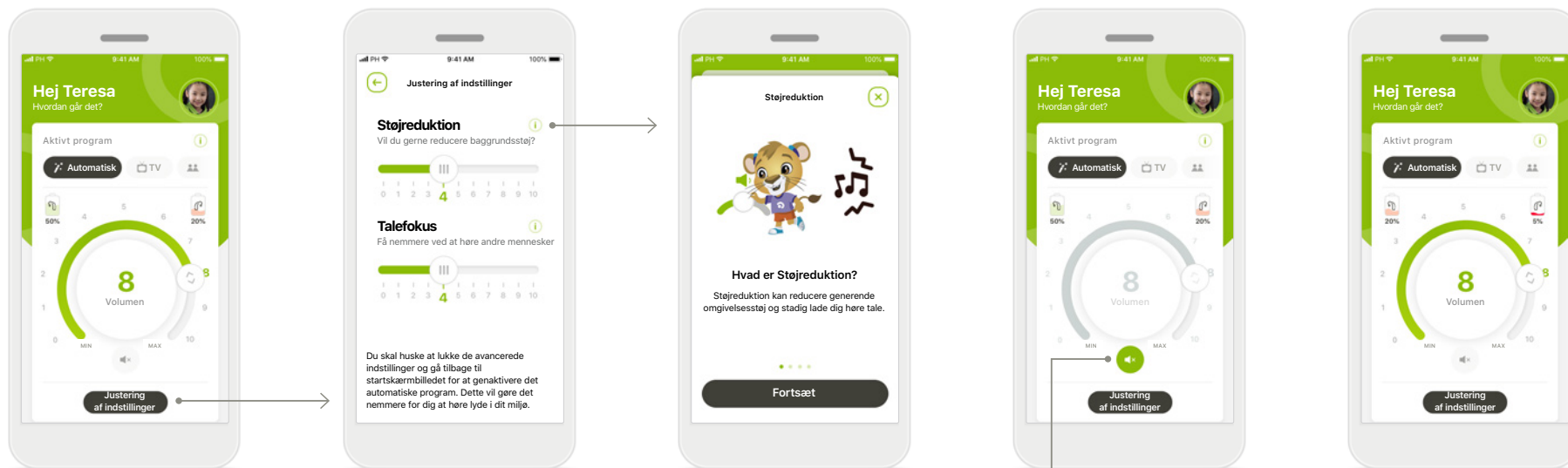

Juster høreapparatets lydstyrke

Drej på hjulet for at ændre lydstyrken.

Ændring af det aktive program

Tryk på de tilgængelige programmer for at tilpasse til et bestemt lyttemiljø. De tilgængelige programmer afhænger af, hvordan dine høreapparater er blevet konfigureret af dine hørespecialist.

Justering af indstillinger

Via visningen med indstillinger kan du få adgang til følgende funktioner:

- Støjreduktion
- Talefokus

Oplysninger

Du kan få flere oplysninger om forskellige funktioner ved at trykke på **i** ikonet.

Mute

Du kan slå lyden i høreapparaterne helt fra ved at trykke på ikonet **Slå lyd fra**.


Lavt batteriniveau

Hvis batteriniveauet er under 20 %, bliver ikonet rødt. Overvej at lade dine høreapparater op inden for kort tid.


Fjernsupportsession

Hvis du bruger mobildata, opkræver dit mobilsekskab muligvis et gebyr. Du bør tjekke dette hos mobilsekskabet, inden du starter en Phonak Fjernsupport session.


I en Fjernsupport session bruges der omkring 56 MB til en videosamtale på ti minutter, hvorimod der kun bruges omkring 30 MB til en samtale.

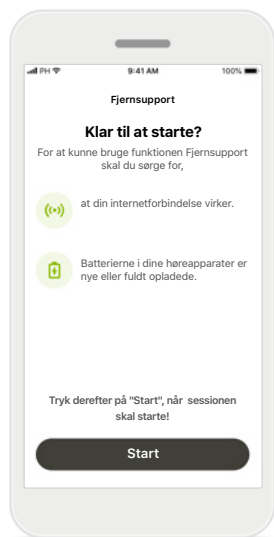


Start fjernsupport session
Når din aftale kan begynde, skal du åbne myPhonak Junior og trykke på **Start**, så din hørespecialist får besked om, at du er klar til din Phonak Fjernsupport aftale.

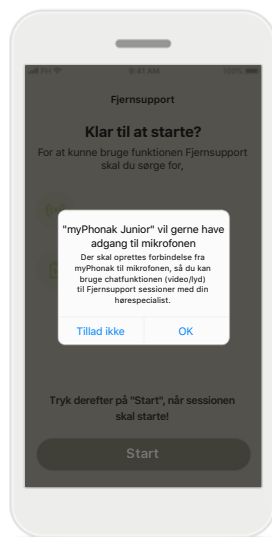

Adgang til kamera og mikrofon
Tryk på **OK** for at give myPhonak Junior adgang til dit kamera og din mikrofon.

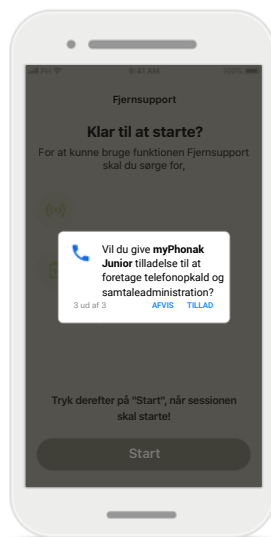


Adgang til myPhonak samtaler
Hvis du har en Android smartphone, skal du trykke på **TILLAD** for at give myPhonak Junior tilladelse til at foretage og styre telefonopkald.

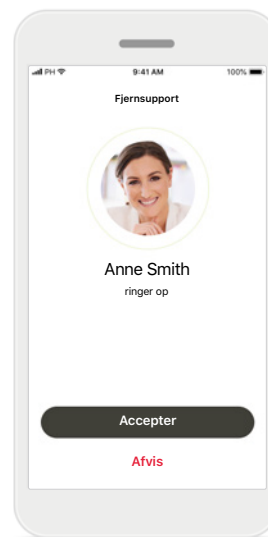

Besvar videoopkald
Appen opretter forbindelse til hørespecialisten. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet fra din hørespecialist.


Fjernsupportsession

Du kan vælge at tilpasse oplevelsen under Fjernsupport session, f.eks. ved at slå videovisningen eller lyden til eller fra.

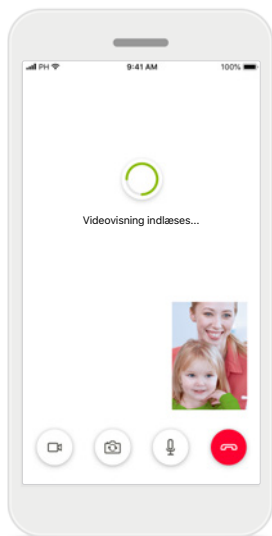


Videopkald startes

Efter et par sekunder indlæses videovisningen, så du kan se din hørespecialist.

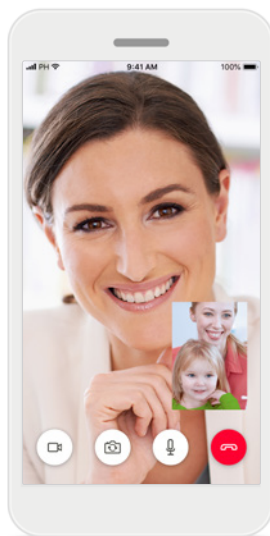


Samtale i gang

Der er nu oprettet forbindelse til hørespecialisten.

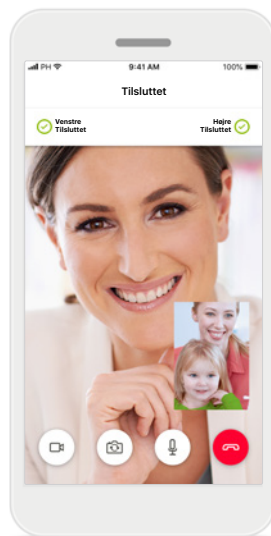


Tilsluttede høreapparater

Hvis hørespecialisten har behov for at oprette forbindelse til dine høreapparater, kan det gøres via din smartphone. Hørespecialisten giver dig besked om det, når der oprettes forbindelse til dine høreapparater.

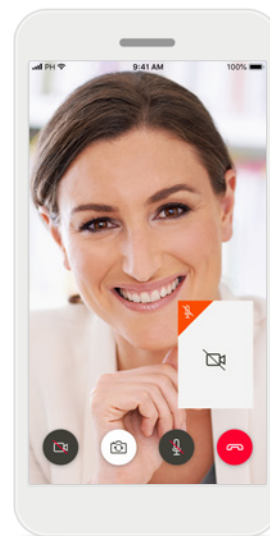

Deaktivering af video

Du kan skjule videooptagelsen af dig selv med et enkelt tryk på en knap.


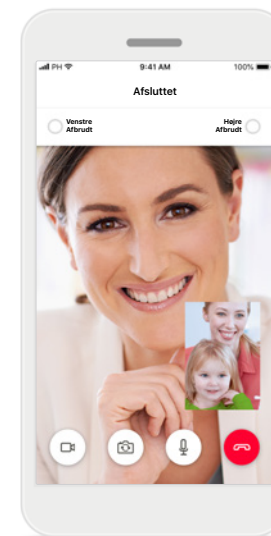


De nye indstillinger gemmes


Lyden i dine høreapparater slås kortvarigt fra under tilslutningsprocessen, og mens de nye indstillinger til dine høreapparater gemmes. Du kan se status på skærmen.

Mine høreapparater


Funktioner, der afhænger af programmeringen af høreapparaterne, og hvilket trådløst tilbehør du har.

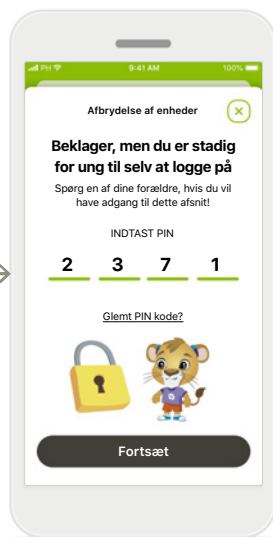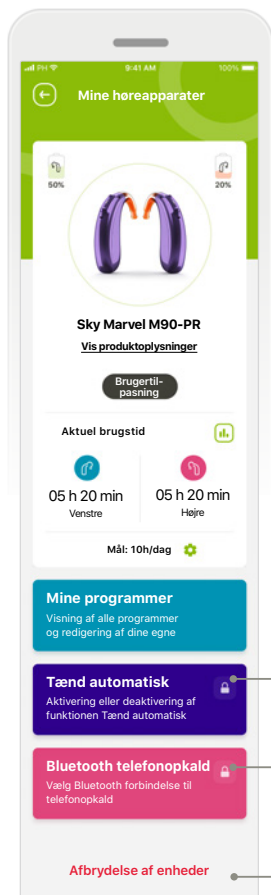


Forældre lås
Forældrekontrol kan beskytte små børn mod at komme til at afbryde deres høreapparater ved en fejl.

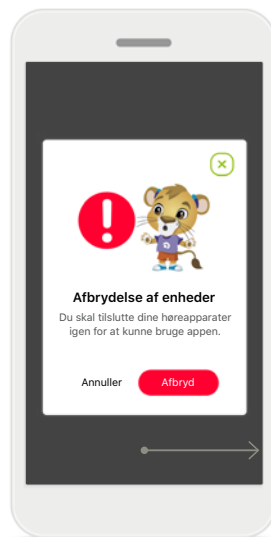

Afbrydelse af enheder
Du kan deaktivere registreringen af dine høreapparater ved at trykke på **Afbryd**. Bemærk! Hvis du gør det, skal du tilslutte høreapparaterne igen for at kunne bruge appen.

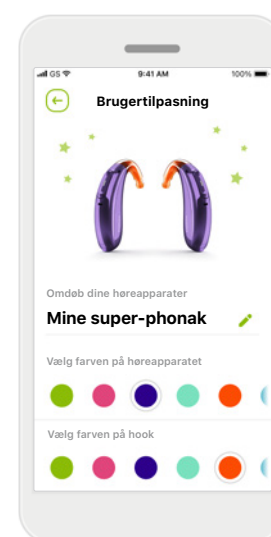

Brugertilpasning*
Farven på høreapparat, hook og apparatets registreringsnavn, der vises i appen, kan ændres

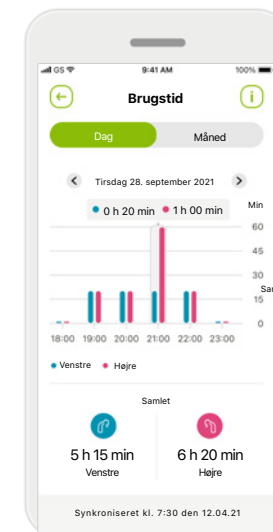

Brugstid*
Brugstiden giver et overblik over, hvor lang tid hvert høreapparat bruges dagligt og månedligt, og hvilken type omgivelser dit barn lytter i. Høreapparater med genopladelige batterier giver de fleste oplysninger.

Mine høreapparater

På skærmen "Mine høreapparater" får du nyttige oplysninger angående batteristatus (genopladelige apparater), din høreapparattype, installation af Roger licenser, Brugstid, Mine programmer, Tænd automatisk og Bluetooth telefonopkald. Udsendet på dine høreapparater kan også tilpasse her.

*Kun tilgængeligt i bestemte høreapparater

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs de relevante sikkerhedsoplysninger på de følgende sider, før appen anvendes.

Tilsigtet anvendelse:

Appen er selvstændig software til tilsigtede høreapparatbrugere, hvor disse kan vælge, konfigurere og gemme høreapparatindstillinger inden for det begrænsede område, der tillades af tilpasningssoftwaren. Appen gør det også muligt for tilsigtede høreapparatbrugere at oprette forbindelse til og kommunikere med hørespecialister med henblik på fjernjustering af høreapparater.

Tilsigtet patientgruppe:

Denne enhed er beregnet til patienter med unilateral og bilateral, mild til svær hørenedsættelse fra 6 års alderen.

Tilsigtet bruger:

Person med høretab, der bruger en kompatibel enhed, samt deres omsorgsperson.

Der er adgang til betjeningsvejledningen til alle appversioner på alle understøttede sprog i elektronisk form via websiden. Gør følgende for at få adgang til betjeningsvejledninger:

- Klik på <https://www.phonak.com/en-int/support>, og vælg det relevante land
- Gå til "Support"
- Gå til "Betjeningsvejledninger"
- Gå til "Apps"
- Vælg "myPhonak Junior app"

Som alternativ kan den aktuelle version af myPhonak Junior betjeningsvejledningen tilgås direkte fra appen ved at navigere til afsnittet Support og derefter trykke på kortet med navnet "Betjeningsvejledning". Betjeningsvejledningen vil derefter åbne i et eksternt browservindue.

Sikkerhedsbemærkning

Patientdata er personfølsomme oplysninger, og det er vigtigt at beskytte dem:

- Sørg for, at smartphones er opdateret med de nyeste sikkerhedsopdateringer til operativsystemet. Aktivér automatisk opdatering.
 - Sørg for, at din installerede app version er opdateret
 - Anvend kun originale Sonova apps fra de officielle butikker med dine høreapparater.
 - Installer kun velrenommerede apps fra officielle butikker
 - Sørg for at anvende stærke adgangskoder, og hold legitimationsoplysninger hemmelige
 - Lås telefonen med PIN-kode og/eller biometrisk (f.eks. fingeraftryk, ansigt), og indstil telefonen til at låse automatisk efter flere minutters inaktivitet.
 - Sørg for, at de installerede apps kun har de tilladelser, de har brug for
 - Undgå at oprette en Bluetooth pairing med dine høreapparater på et offentligt sted. Dette skyldes risikoen for uønsket interferens fra en 3. part. Vi anbefaler at udføre denne Bluetooth pairing derhjemme.
 - Brug IKKE en jailbroken eller rooted telefon
- Sørg for altid at beskytte dine data. Bemærk! Ovenstående liste er ikke udtømmende.
- Hvis der sendes data via usikre kanaler, skal du enten anonymisere dataene eller kryptere dem.
 - Beskyt sikkerhedskopierne af din smartphones data, ikke kun mod tab af data, men også mod tyveri.
 - Fjern alle data fra en smartphone, der ikke længere anvendes, eller som vil blive kasseret.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs de relevante sikkerhedsoplysninger på de følgende sider, før appen anvendes.

Vedligeholdelse af software:

Vi overvåger løbende feedback fra markedet. Hvis du oplever problemer med den nyeste appversion, kan du kontakte din lokale repræsentant og/eller give feedback i App Store eller på Google Play Store.

Indikationer

Bemærk, at indikationer ikke er en følge af appen, men de kompatible høreapparater. Generelle kliniske indikationer for brugen af høreapparater og Tinnitus balance:

- Tegn på hørenedsættelse
 - Unilateral eller bilateral
 - Konduktiv, sensorineural eller en blanding
 - Mild til meget svær
- Konstateret kronisk tinnitus (kun ved høreapparater, der er kompatible med Tinnitus balance)

Kontraindikationer

Bemærk, at kontraindikationer ikke er en følge af appen, men de kompatible høreapparater. Generelle kliniske kontraindikationer for brugen af høreapparater og Tinnitus balance:

- Hørenedsættelse ligger ikke inden for høreapparatets tilpasningsområde (dvs. gain, frekvensrespons)
- Akut tinnitus
- Øredeformitet (dvs. lukket ørekanal, fravær af det ydre øre)
- Neural hørenedsættelse (retrocochleære patologier såsom fravær af/ikke-levedygtig hørenerve)

Primære kriterier for henvisning af patient til medicinsk eller anden specialists vurdering og/eller behandling:

- Synlig medfødt eller traumatisk øredeformitet Aktivt dræn i øret inden for de seneste 90 dage
- Pludselig eller hastigt opstået hørenedsættelse på det ene eller begge ører inden for de seneste 90 dage
- Akut eller kronisk svimmelhed
- Audiometrisk air-bone gap lig med eller større end 15 dB ved 500 Hz, 1000 Hz og 2000 Hz
- Synlige tegn på betydelig ørevoksophobning eller et fremmedlegeme i øregangen
- Smerte eller ubehag i øret

- Unormalt udseende trommehinde og øregang, såsom:
 - Betændelse i den ydre øregang
 - Sprængt trommehinde
 - Andre abnormiteter, som hørespecialisten mener er af medicinsk interesse

Hørespecialisten kan beslutte, at henvisning ikke er hensigtsmæssigt eller i patientens bedste interesse, når følgende gør sig gældende:

- Når der er tilstrækkelig evidens for, at tilstanden er fuldt ud undersøgt af en speciallæge, og at enhver mulig behandling er givet.
- Tilstanden er ikke forværret eller har ikke ændret sig væsentligt siden den tidligere undersøgelse og/eller behandling
- Hvis patienten har truffet en informeret og kompetent beslutning om ikke at tage imod råd om at søge en lægeudtalelse, er det tilladt at fortsætte med at anbefale passende høreapparatsystemer med forbehold af følgende overvejelser:
 - Anbefalingen vil ikke have nogen negativ indvirkning på patientens helbred eller generelle velbefindende
 - Af journalerne fremgår det, at alle nødvendige overvejelser om, hvad der er i patientens interesse, er gjort. Såfremt det påkræves i henhold til gældende lovgivning, har patienten underskrevet en ansvarsfraskrivelse, der bekræfter, at henvisningen er afvist ud fra egen velinformerede beslutning.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs de relevante sikkerhedsoplysninger på de følgende sider, før appen anvendes.

Begrænsning af brug

Brug af appen begrænses til mulighederne for de(n) kompatible enhed(er).

Bivirkninger

Bemærk, at bivirkninger ikke er en følge af appen, men de kompatible høreapparater. Psykologiske bivirkninger pga. brug af høreapparater, såsom tinnitus, svimmelhed, ophobning af ørevoks, for højt tryk, perspiration eller fugtighed, vabler, kløe og/eller udslæt, tilstoppethed eller udfyldthed og dertilhørende ubehag, såsom hovedpine og/eller øresmerter, kan afhjælpes ved din hørespecialist. Konventionelle høreapparater kan potentielt udsætte brugeren for en større lydmenge, hvilket kan medføre forskydninger i frekvensområdets grænseværdier som følge af akustisk traume.

Klinisk fordel

Den kliniske fordel udledes ikke af appen, men af de kompatible høreapparater. Appen er en fordel for de tilsigtede brugere, da den giver dem mulighed for at foretage justeringer inden for grænserne, der blev fastlagt under førstegangstilpasningen.

Appen er en nem måde for de tilsigtede brugere at oprette forbindelse til deres hørespecialister og kommunikere med dem angående fjernjustering af høreapparatet.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted med relation til opladeren, skal rapporteres til producentens repræsentant og den relevante sundhedsfaglige myndighed. En alvorlig hændelse beskrives som enhver hændelse, som direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kan føre til følgende:

- a. død hos en patient, bruger eller anden person
- b. midlertidig eller permanent alvorlig svækkelse af en patient, brugers eller anden persons sundhedstilstand
- c. en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs de relevante sikkerhedsoplysninger på de følgende sider, før appen anvendes.



Reduceret lydforstærkning og kraftigere støjundertrykkelse kan gøre det vanskeligt at høre advarsels- og sikkerhedsrelaterede signaler. Dette kan føre til farlige situationer.



Hvis der ikke kan oprettes forbindelse fra appen til høreapparaterne, skal du tjekke, om du er uden for rækkevidde, eller om høreapparaterne er tændt, og om batteriet er opbrugt, og hvis der er forstyrrende felter, skal du bevæge dig væk fra de forstyrrende felter.



Aktivér Bluetooth funktionen. Bluetooth skal aktiveres for at tilslutte til dine høreapparater.



Du har selv ansvaret for brugen af din egen smartphone. Brug smartphonen og appen ansvarligt.

Symbolforklaring



Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.




Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.




Med CE-symbolet erklærer Sonova AG, at dette Phonak produkt opfylder kravene i Rådets direktiv nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. CE-mærke: 2021. Numrene efter CE-symbolet svarer til koden fra de konsulterede certificerede myndigheder i henhold til ovennævnte direktiver.

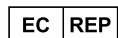

Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesmarked. Den autoriserede repræsentant i EU er også importør til EU.



Angiver enheden som medicinsk udstyr

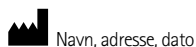

Det kombinerede symbol "producent af medicinsk udstyr" og "fremstillingsdato" som defineret i EU-direktiv 2017/745/EU.



En indikation af, at elektroniske vejledninger er tilgængelige. Vejledningerne kan hentes på webstedet phonak.com/junior/userguide



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

Phonak-repræsentant Danmark:

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Tyskland

Du kan få et gratis, fysisk eksemplar af denne betjeningsvejledning ved at kontakte din Sonova repræsentant. Vi afsender et eksemplar inden for syv dage.

V4.00/2023-11/NLG © 2021-2024 Sonova AG All rights reserved

Denne betjeningsvejledning gælder for myPhonak Junior 1.3 og senere underversioner af myPhonak Junior 1 app.

Kontakt din lokale repræsentant eller se på websitet for en tidligere version af en betjeningsvejledning til appen.

