



roger

# Telefonieren leicht gemacht – mit Roger™

Anleitung

# Alle Mikrofon-Optionen auf einen Blick



Roger On™  
(iN)

Roger Table Mic II™  
(iN)

Roger Select™

Roger Select™ iN

Zubehörteile

## Telefon-Option



Mobilgerät / PC/ Notebook für  
Telefongespräche über das  
Internet (drahtlos via Bluetooth®)




PC / Notebook für  
Telefongespräche über das  
Internet (via Kabel)



Stationäres Tischtelefon  
(via Kabel)




Call Center  
(via Bluetooth®)

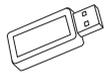


Optional: Bluetooth-  
USB-Adapter



Optional: Externes  
Headset-Mikrofon

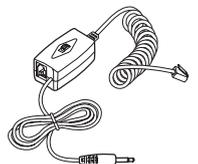

Telefon-  
Aufnahmeadapter

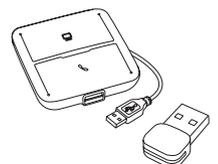

Kommunikationsanschluss  
für Headset und  
Bluetooth-USB-Adapter

Phonak bietet noch weitere Telefon-Optionen. Besuchen Sie uns unter [www.phonak.com/phone-solutions](http://www.phonak.com/phone-solutions).

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.


# Mobilgerät / PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet

(VoIP, z.B. Zoom, MS Teams) drahtlos via Bluetooth

## Erforderliche Geräte




Roger Select

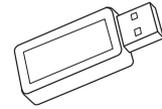

Optional: Bluetooth-USB-Adapter  
(Phonak-Artikelnummer: 076-0856)


## Verwenden von Bluetooth

Koppeln Sie Roger Select einfach mit Ihrem bluetoothfähigen Mobilgerät / PC / Notebook. Sie müssen Ihr Telefon zum Telefonieren nicht ans Ohr halten. Und das Allerbeste: Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

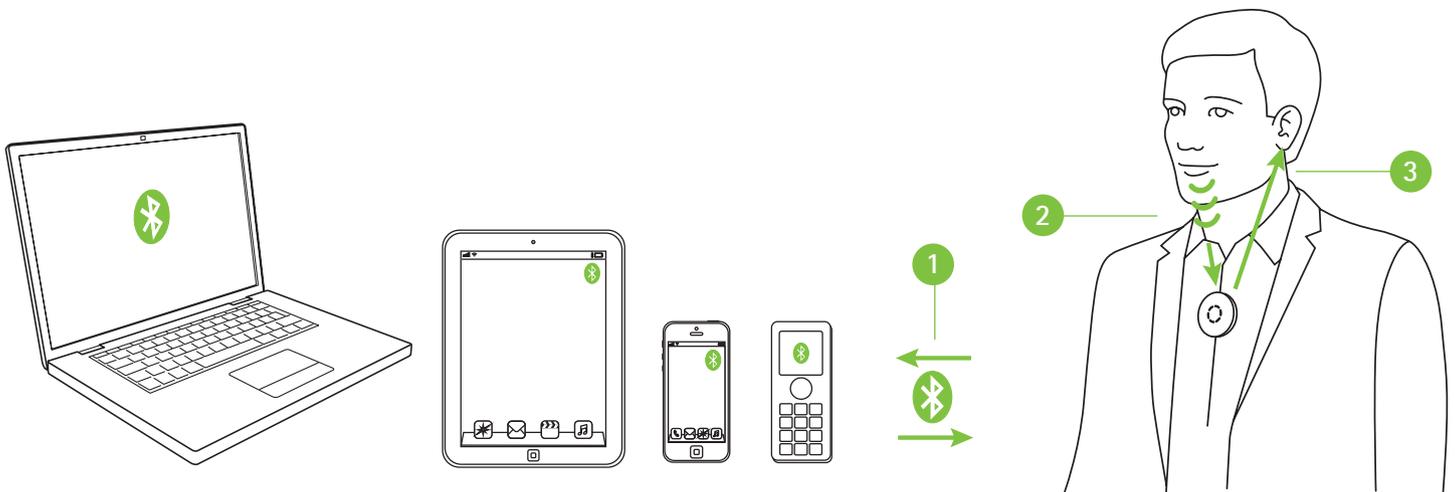

- 1 Koppeln Sie Ihr Mobilgerät / PC / Notebook mit Roger Select
- 2 Sprechen Sie während des Telefongesprächs einfach in das Roger Select
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

Sollte Ihr PC / Notebook nicht bluetoothfähig sein, stecken Sie den Bluetooth-USB-Adapter in eine freie USB-Anschlussbuchse an Ihrem PC / Notebook und koppeln Sie den Bluetooth-USB-Adapter mit Roger Select.

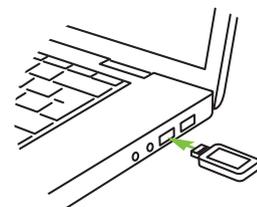

Hinweis: Diese Methode funktioniert nicht mit Hörgeräten mit RogerDirect™.

# PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet

(VoIP, z.B. Zoom, MS Teams) via Audiokabel

## Erforderliche Geräte (Optionen)



Roger Select  
Roger Select iN



Roger Table Mic II  
Roger Table Mic II iN



Roger On  
Roger On iN




Optional: Externes  
Headset-Mikrofon

## Verwenden eines integrierten Mikrofons am PC / Notebook

Dank dieser einfach einzurichtenden Option können Sie das Telefongespräch direkt auf beiden Ohren hören.

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörerausgang an Ihrem PC / Notebook mit dem Audioeingang an der Dockingstation oder direkt mit dem Audioeingang am Roger-Mikrofon
- 2 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das integrierte Mikrofon am PC / Notebook
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

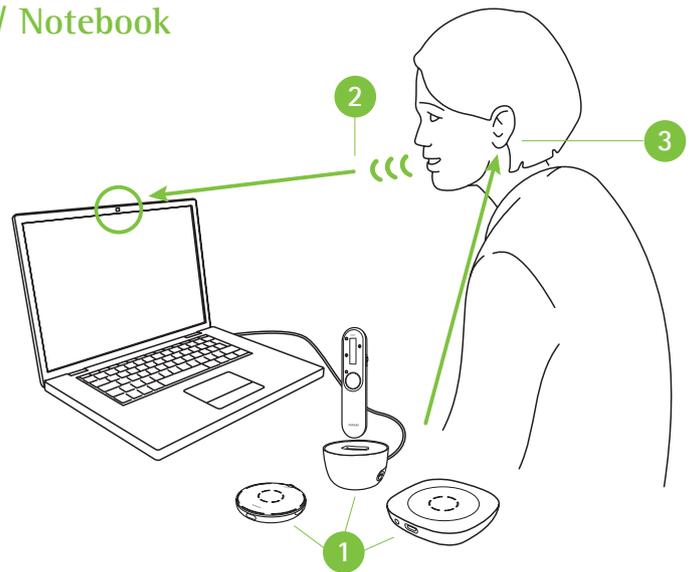


## Verwenden eines externen Headset-Mikrofons

Wenn Sie ein Headset-Mikrofon verwenden, hören Sie Ihre eigene Stimme in einer besseren Klangqualität.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Audioeinstellungen an Ihrem PC oder in Ihrer VoIP-Software anpassen, um die 3,5 mm-Buchse als Audioausgang und das USB-Mikrofon als Mikrofoneingang zu konfigurieren.

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörerausgang an Ihrem PC / Notebook mit dem Audioeingang an der Dockingstation oder direkt mit dem Audioeingang am Roger-Mikrofon
- 2 Verbinden Sie das Headset-Mikrofon mit dem Mikrofoneingang an Ihrem PC / Notebook. Wenn Sie ein USB-Headset verwenden, können Sie das Headset alternativ auch an eine USB-Anschlussbuchse anschließen
- 3 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das externe Mikrofon
- 4 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

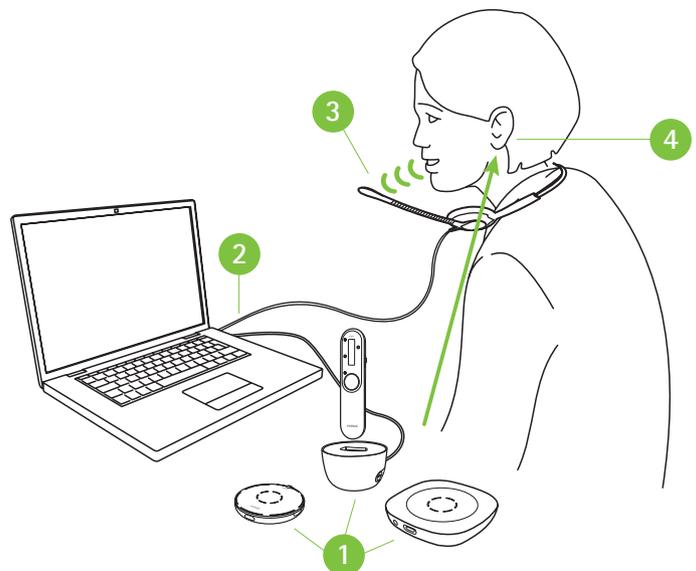

# PC / Notebook für Telefongespräche über das Internet

(VoIP, z.B. Zoom, MS Teams) via USB-Kabel


## Erforderliche Geräte



Roger On  
Roger On iN

## Verwenden des USB-Kabels

- 1 Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit Ihrem PC/Notebook und Roger On
- 2 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das integrierte Mikrofon am PC / Notebook oder verwenden Sie ein externes Mikrofon, wie auf der vorherigen Seite beschrieben
- 3 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

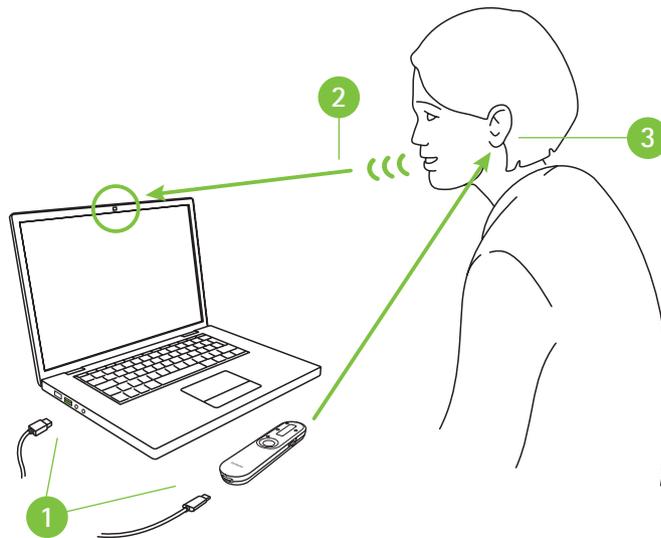

# Stationäre Tischtelefone

via Kabel

## Erforderliche Geräte (Optionen)




Roger Select  
Roger Select iN



Roger Table Mic II  
Roger Table Mic II iN



Roger On  
Roger On iN

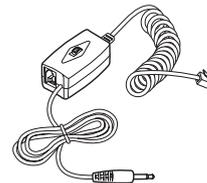


Telefon-Aufnahmadapter  
(z. B. Phone Kit 055-4064)

## Verwenden des Telefon-Aufnahmeters

Um das Telefongespräch anzunehmen, nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und halten Sie es an Ihren Mund, da Sie nach wie vor in das Mobilteil sprechen müssen.

Die Stimme des Anrufers wird dann jedoch direkt an beide Ohren übertragen.

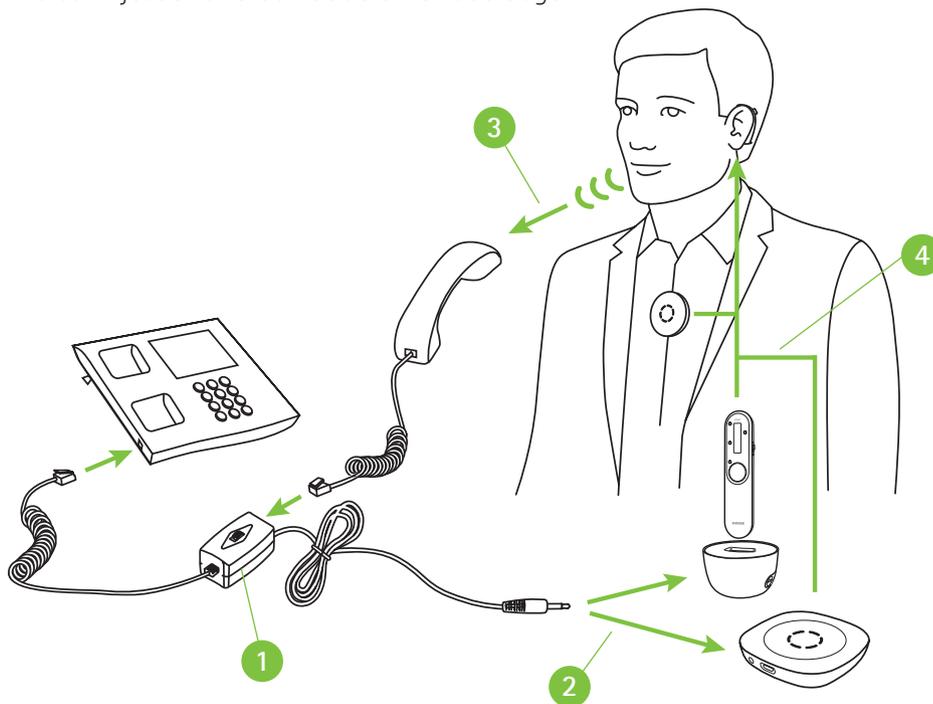

- 1 Verbinden Sie den Telefon-Aufnahmadapter mit dem Telefon und dem Mobilteil
- 2 Verbinden Sie den Audioausgang des Telefon-Aufnahmeters mit dem Audioeingang an der Dockingstation oder direkt mit dem Audioeingang am Roger-Mikrofon
- 3 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das Mobilteil des Telefons
- 4 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!


# Call Center

(PC / Notebook und Tischtelefon) drahtlos via Bluetooth

## Erforderliche Geräte




Roger Select

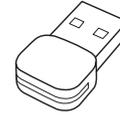

Kommunikationsanschluss für Headset (z. B. Poly MDA200),  
Bluetooth-USB-Adapter (z. B. Poly PLT-BT300)

## Verwenden von Bluetooth

Die modernste Lösung für Telefongespräche im Büro. Telefongespräche können zwischen PC und Bürotelefon hin und her geschaltet werden. In beiden Fällen wird das Telefongespräch an das Roger Select übertragen, das idealerweise um den Hals getragen wird und auf diese Weise dafür sorgt, dass Sie während des Telefongesprächs beide Hände frei haben.

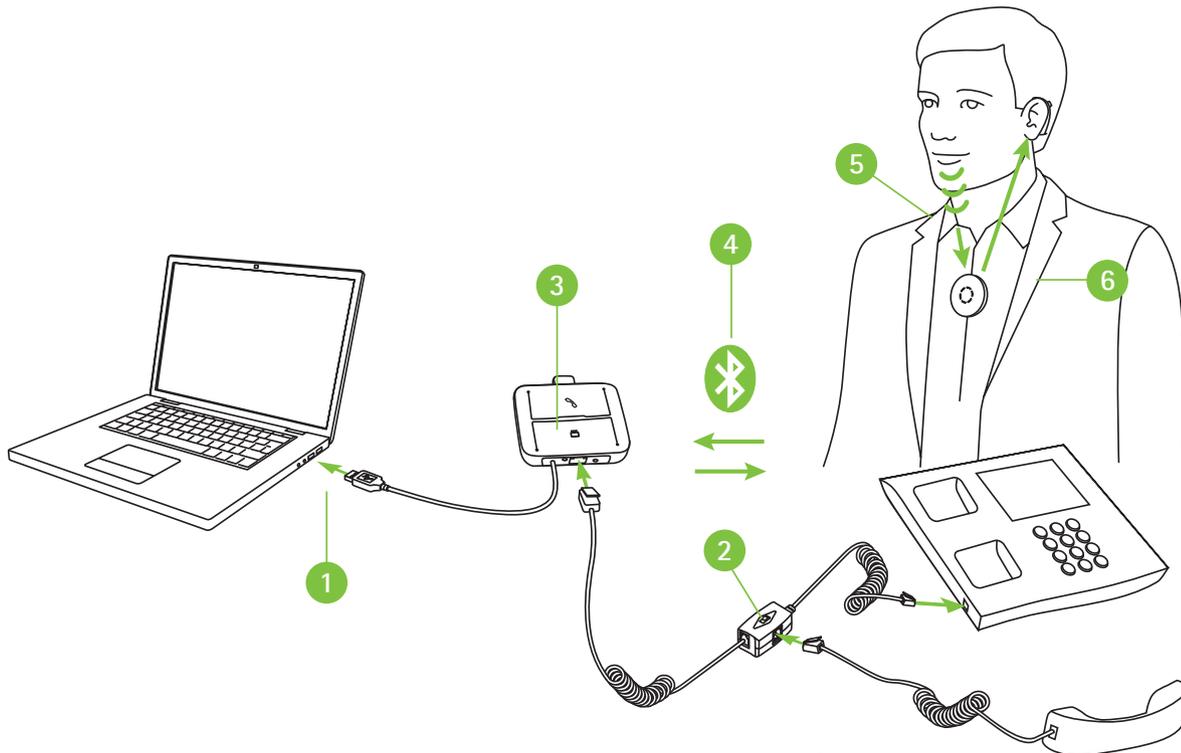

- 1 Verbinden Sie den Kommunikationsanschluss für das Headset mit Ihrem PC / Notebook
- 2 Verbinden Sie den Adapter des Kommunikationsanschlusses für das Headset mit dem Telefon und dem Mobilteil
- 3 Stecken Sie den Bluetooth-USB-Adapter am Kommunikationsanschluss für das Headset ein
- 4 Koppeln Sie den Bluetooth-USB-Adapter mit dem Roger Select
- 5 Sprechen Sie während des Telefongesprächs in das Roger Select
- 6 Sie hören das Telefongespräch auf beiden Ohren!

Hinweis: Diese Methode funktioniert nicht mit Hörgeräten mit RogerDirect™.

# Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen, in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörverlust konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

[www.phonakpro.de/roger](http://www.phonakpro.de/roger)