

# Anweisungen zur Reinigung und Pflege von ActiveVent™ Receiver

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Hörgeräte. Ihre Hörgeräte sind mit ActiveVent Hörern ausgestattet. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Hörgeräte pflegen und warten.

## Warum ist die Reinigung wichtig?

1. Sorgt für eine bessere tägliche Leistung
2. Verlängert die Lebensdauer der Geräte
3. Verhindert Reparaturprobleme, die durch Ablagerung von Cerumen und Feuchtigkeit entstehen können



# Reinigen

## 1. Hörgerät


Wischen Sie Ihr Hörgerät täglich mit einem feuchten Tuch ab.

## 2. Ohrpassstück


Wischen Sie das Ohrpassstück täglich mit einem feuchten Tuch ab.

## 3. Cerumen-Filter auswechseln

Es wird empfohlen, den Cerumen-Filter wöchentlich auszuwechseln. Ihr Hörakustiker wird Sie jedoch über das richtige Intervall für eine optimale Leistung beraten. Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter, wie man ihn auswechselt.

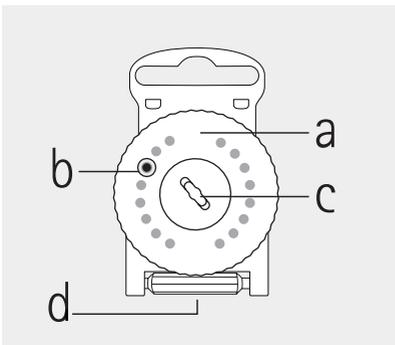

- a) Drehscheibe
- b) Neuer Filter
- c) Entsorgungsschlitz für gebrauchte Filter
- d) Wechselwerkzeug

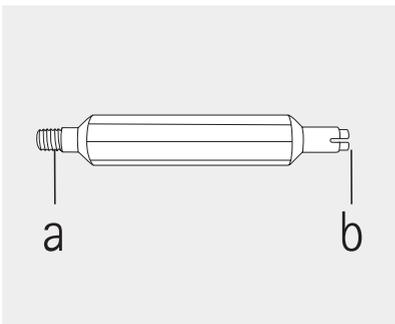


- a) Gewinde zum Entfernen des gebrauchten Filters
- b) Geschlitztes Ende zum Einsetzen eines neuen Filters


# Den Cerumen-Filter auswechseln

## Entfernen Sie Ihren gebrauchten Cerumen-Filter


1. Halten Sie das Ohrpassstück fest und sichern Sie die Rückseite des Hörers mit Ihrem Finger, damit er sich nicht aus dem Ohrpassstück löst. Führen Sie das Gewindeende des Wechselwerkzeugs in die Öffnung des Hörers ein, während Sie den Hörer mit dem Finger oder Daumen abstützen.

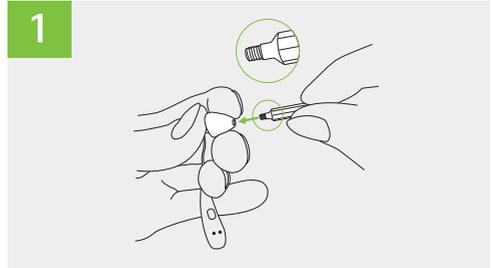

2. Drehen Sie das Wechselwerkzeug im Uhrzeigersinn, bis Sie einen leichten Widerstand spüren, und entfernen Sie dann den gebrauchten Cerumen-Filter, indem Sie das Wechselwerkzeug vom Sprecher abziehen.

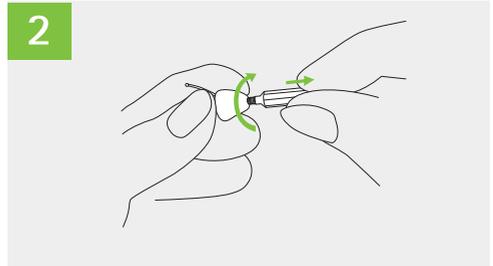


3. Entnehmen Sie den gebrauchten Cerumen-Filter, indem Sie das Wechselwerkzeug entlang des Schlitzes in der Mitte des Spenders schieben und das Wechselwerkzeug abheben.

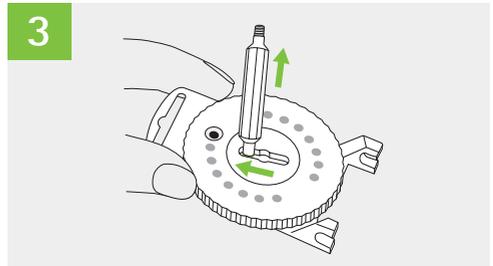


# Einen neuen Cerumen-Filter einsetzen


1. Drehen Sie die Scheibe des Spenders, bis ein neuer Cerumen-Filter in Fenster zu sehen ist.

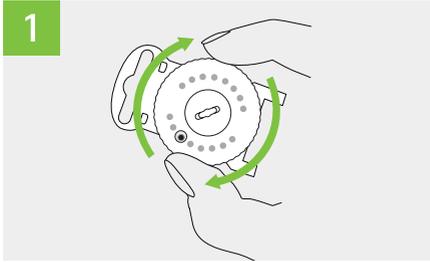


2. Nehmen Sie den neuen Cerumen-Filter auf, indem Sie das geschlitzte Ende des Wechselwerkzeugs einführen.

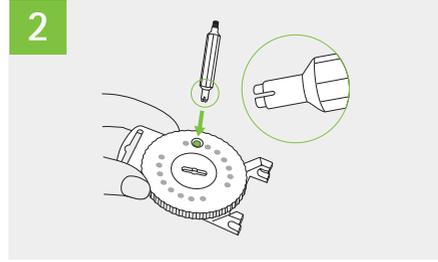

3. Halten Sie das Ohrpasstück fest und stützen Sie den Hörer an seinem Ende, an dem das Kabel befestigt ist. Setzen Sie den neuen Cerumen-Filter vorsichtig in die Öffnung des Hörers ein.

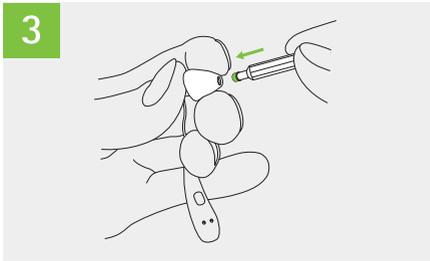

4. a) Neigen Sie das Wechselwerkzeug leicht an, wenn Sie es vom Hörer wegziehen.  
b) Bringen Sie das Wechselwerkzeug wieder am Cerumen-Filter-Spender an.

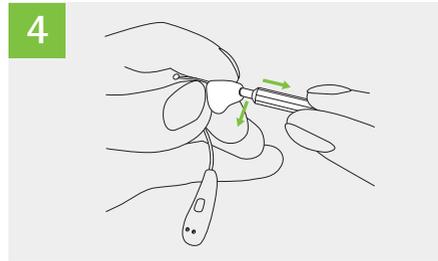

[www.phonak.de/activevent](http://www.phonak.de/activevent)

029-1153-01/V1.00/2020-08/Clean and Care ActiveVent Instruction  
© 2020 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz

EC REP

Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany



028-2296-01/V1.00/2021-07/NLG © 2021 Sonova AG. All rights reserved.