

Phonak Audéo™ E

Tekniske data


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)




S Receiver 2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Output lydtryksniveau

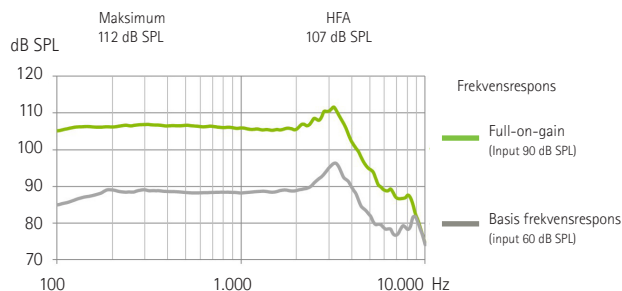

Akustisk gain

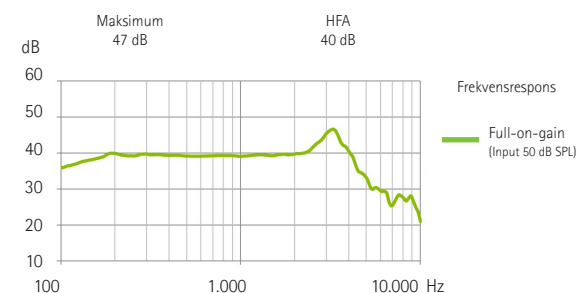

Frekvensområde	<100 Hz - 10 000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
forvrængning	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	22 t			
Maksimal brugstid	38 t			
Tilsvarende input noise niveau	19 dB SPL			


Advarsler

- ⚠ Ændringer eller modifikationer til høreapparatet, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. Ændringer af denne slags kan beskadige øret eller høreapparatet.
- ⚠ Den udviklede SPL i børns ører kan være betragteligt højere end gennemsnittet for voksne. Det anbefales at måle RECD for at korrigere target for tilpasset OSPL90.
- ⚠ Dette høreapparat har et output lydtryksniveau, der kan overskride 132 dB SPL. Udvis særlig stor forsigtighed ved tilpasning af dette høreapparat, da der er risiko for at skade brugerens resthørelse.
- ⓘ Værdierne på databladet blev målt med en standard receiver. Der kan være afvigelser fra disse værdier baseret på individuel koblingsmulighed med skal.


M Receiver 2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Output lydtryksniveau

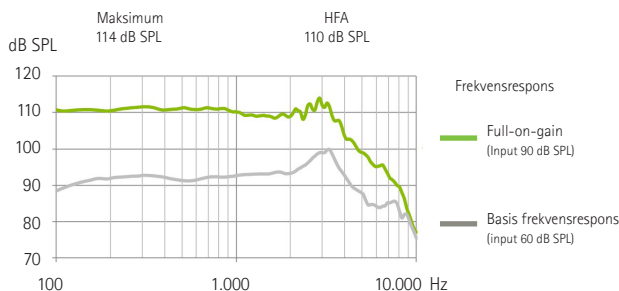

Akustisk gain

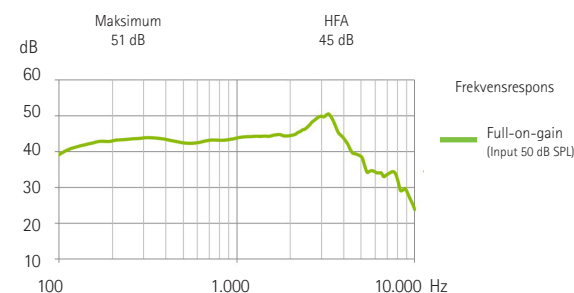

Frekvensområde	<100 Hz - 10 000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
forvrængning	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	22 t			
Maksimal brugstid	38 t			
Tilsvarende input noise niveau	19 dB SPL			

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreoprettelse, batteriets alder og lydmiljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


MAV Receiver 2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Output lydtryksniveau

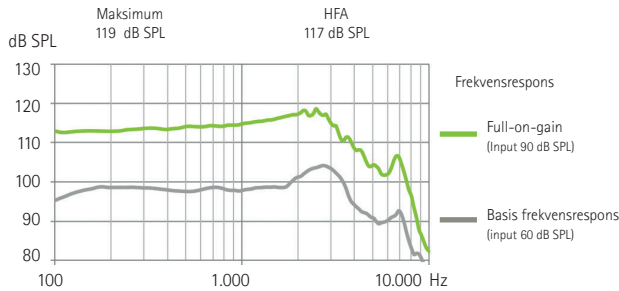

Akustisk gain

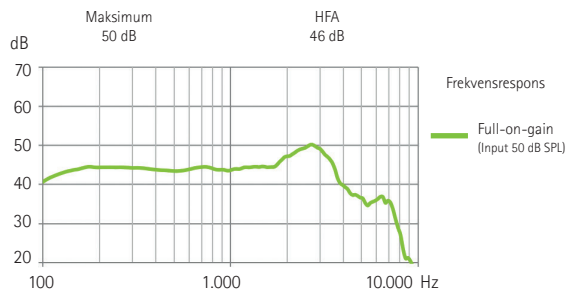

Frekvensområde	<100 Hz - 9000 Hz			
Total harmonisk	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
forvrængning	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	22 t			
Maksimal brugstid	38 t			
Tilsvarende input noise niveau	19 dB SPL			

Generelle testoplysninger


- Der anvendes specifikke indstillinger for målinger. RTS tilpasning med indstilling af volumen
- Enheden arbejder i lineær tilstand
- Begrænset udvidelse er aktiv
- Alle hentede data måles med indstillinger for Phonak Target måling
- Latensen for det fastslåede lydssignal er 6,2 ms i henhold til en intern standard

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreudsættelse, batteriets alder og lydmiljøet.


P Receiver 2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Output lydtryksniveau

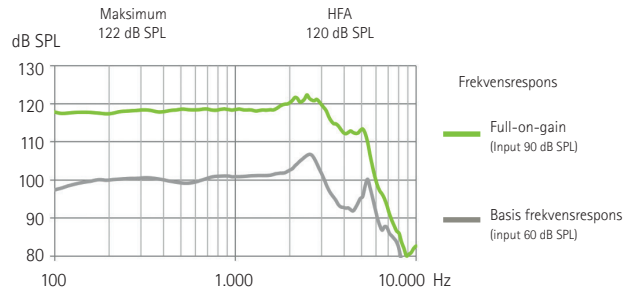

Akustisk gain

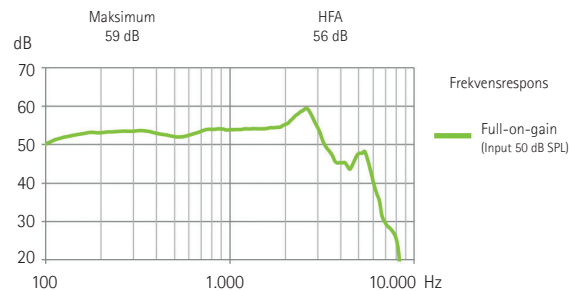

Frekvensområde	<100 Hz - 7500 Hz			
Total harmonisk	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
forvrængning	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	22 t			
Maksimal brugstid	38 t			
Tilsvarende input noise niveau	19 dB SPL			



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo™ E


Tekniske data

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


UP Receiver 2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Output lydtryksniveau

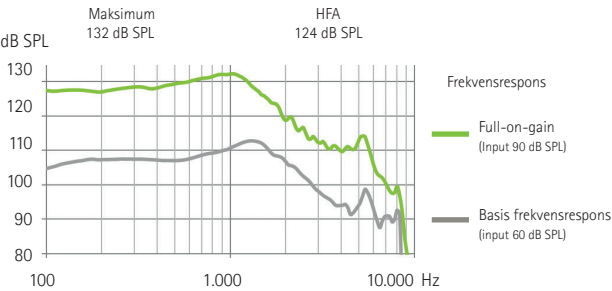

Akustisk gain

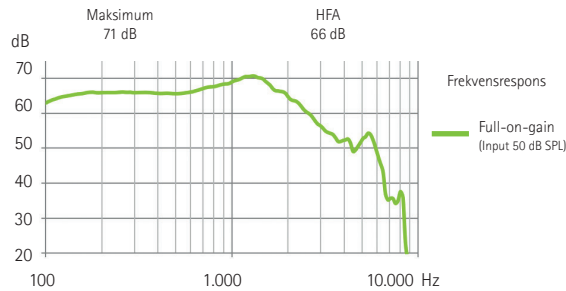

Frekvensområde	<100 Hz - 8 000 Hz			
Total harmonisk	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
forvrængning	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	22 t			
Maksimal brugstid	38 t			
Tilsvarende input noise niveau	19 dB SPL			

⚠ Værdierne på databladet blev målt med en standarddefineret skal. Der kan være afvigelser fra disse værdier baseret på individuel koblingsmulighed. Der skal udvises forsigtighed ved UP-modtagere, da individuel afvigelse kan medføre, at MPO overstiger 132 dB SPL.

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreindsættelse, batteriets alder og lydmiljøet.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./side 3/3 TPL-953 [2]



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

A Sonova brand

PHONAK
life is on