


PhonakPro Check.

Skrócona instrukcja obsługi

Dla protetyków słuchu

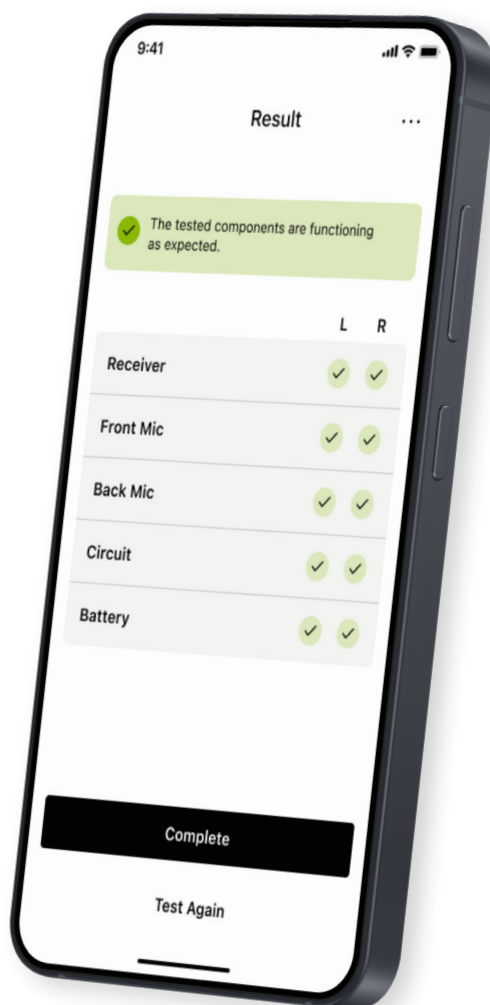

Instalacja PhonakPro Check

1. Połącz smartfon z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej transmisji danych.
2. Włącz funkcję Bluetooth® w smartfonie.
3. Pobierz aplikację PhonakPro Check ze sklepu i zainstaluj ją na swoim telefonie.
4. Otwórz aplikację.

← Privacy & Terms

Privacy Policy

Sonova processes your personal data for purposes such as making sure the PhonakPro Check app works correctly and securely. Your rights regarding the processing of your personal data include the right to access, rectify or request the deletion of your data, within the limits of the applicable law. Our Privacy Notice gives you more information about your personal data and how we use it.

[Read our Privacy Policy](#)

Terms & Conditions

Sonova offers PhonakPro Check in accordance with our Terms & Conditions.

[Read our Terms & Conditions](#)

I consent to the collection and processing of my personal data for the purpose of utilizing the PhonakPro Check software.

I understand that this app is intended to collect and process the personal information of my clients, and agree to collect their freely given and specific consent in line with the Client Privacy Notice, and applicable law.

Continue



1

Polityka prywatności

Aby korzystać z aplikacji, zaznacz pole wyboru po zapoznaniu się z Polityką prywatności i Regulaminem. Następnie wybierz **Kontynuuj**.

Dane pacjenta

Aby korzystać z aplikacji, upewnij się, że masz zgodę swojego pacjenta na udostępnianie danych firmie Sonova.


Zaloguj się na swoje konto PhonakPro

1

Zaloguj się do PhonakPro

Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło PhonakPro dostarczone przez Phonak, aby uzyskać dostęp do funkcji PhonakPro Check.

Skontaktuj się z przedstawicielem marki Phonak, jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji konta.

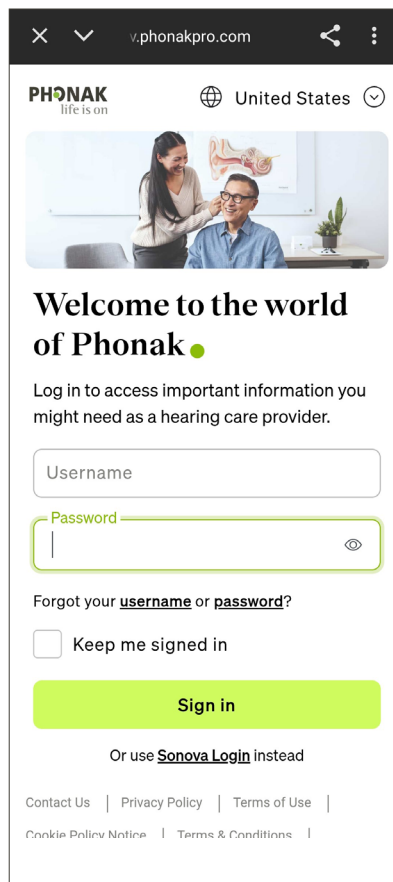

PHONAK
life is on

United States

Welcome to the world of Phonak

Log in to access important information you might need as a hearing care provider.

Username

Password

Forgot your [username](#) or [password](#)?

Keep me signed in

Sign in


Or use [Sonova Login](#) instead

[Contact Us](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#) | [Cookie Policy Notice](#) | [Terms & Conditions](#)

2

Dane osobowe

W Ustawieniach można wyświetlić swoje dane osobowe i informacje prawne, a także wylogować się z aplikacji.

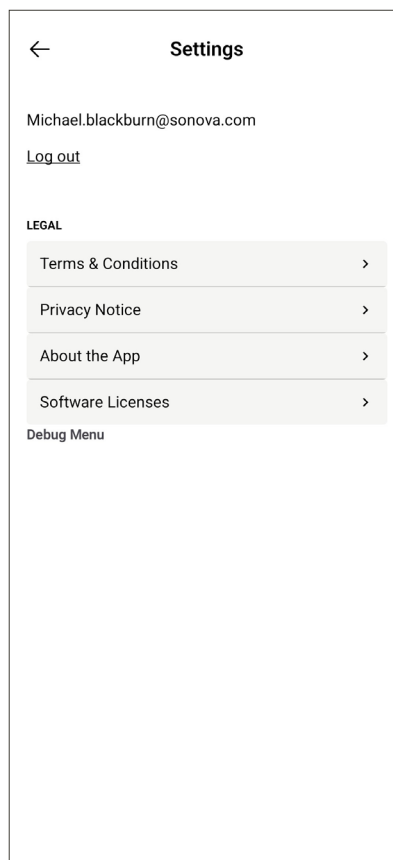

Settings

Michael.blackburn@sonova.com

[Log out](#)

LEGAL

[Terms & Conditions](#)

[Privacy Notice](#)




[About the App](#)

[Software Licenses](#)

Debug Menu

Zarządzanie parowaniem z aparatami słuchowymi marki Phonak

Aby połączyć aparaty słuchowe obsługujące technologię Bluetooth® z aplikacją PhonakPro Check, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

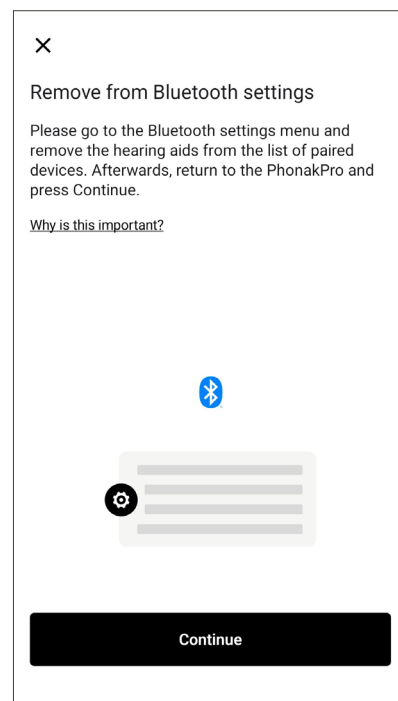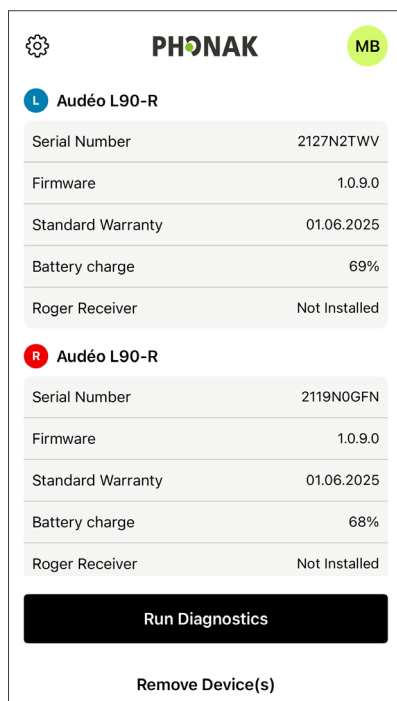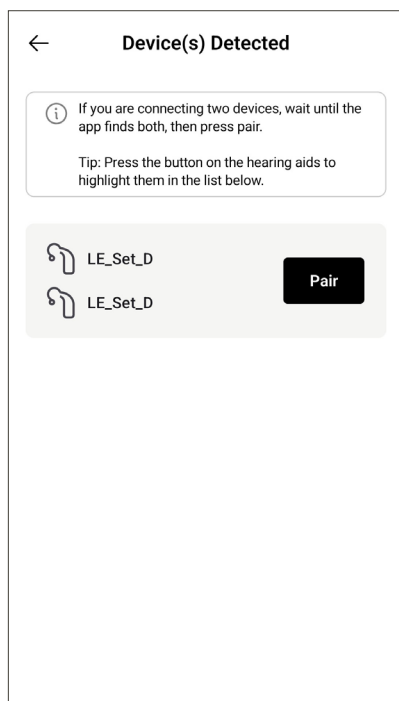

1

Wyszukiwanie

Aplikacja wyszukuje kompatybilne aparaty słuchowe. Może to potrwać kilka sekund. Następnie wyświetlane są wyniki. **Tap (Wybierz)** urządzenie, które chcesz połączyć. Aplikacja łączy się z każdym aparatem słuchowym osobno.

Potwierdź parowanie, dotykając przycisku **Pair (Paruj)** w wyskakującym okienku dla każdego aparatu słuchowego osobno.

2

Usuń z aplikacji

Przed sparowaniem z nowymi aparatami słuchowymi musisz usunąć aktualnie sparowane aparaty słuchowe z aplikacji.

3

Usuń z ustawień Bluetooth

Po każdej sesji usuń parowania z menu Bluetooth, aby zapobiec narastaniu połączeń. Jeśli masz problemy z połączeniem nowych urządzeń, sprawdź, czy stare parowania zostały usunięte.


W urządzeniach z systemem iOS przycisk „**Go to Bluetooth settings (Przejdź do ustawień łączności Bluetooth)**” powoduje przejście do ustawień aplikacji PhonakPro Check w systemie iOS. Naciśnij przycisk Wstecz, aby przejść do ustawień Bluetooth. System iOS nie zezwala na bezpośrednie połączenie z ustawieniami Bluetooth.




Jeśli aparaty słuchowe nie reagują, sprawdź, czy jesteś poza zasięgiem lub czy aparaty słuchowe są włączone i czy bateria nie jest rozładowana. Jeśli obecne są pola zakłócające, odsuń się od nich.

Wyniki diagnostyki PhonakPro Check

Ekran wyników testu

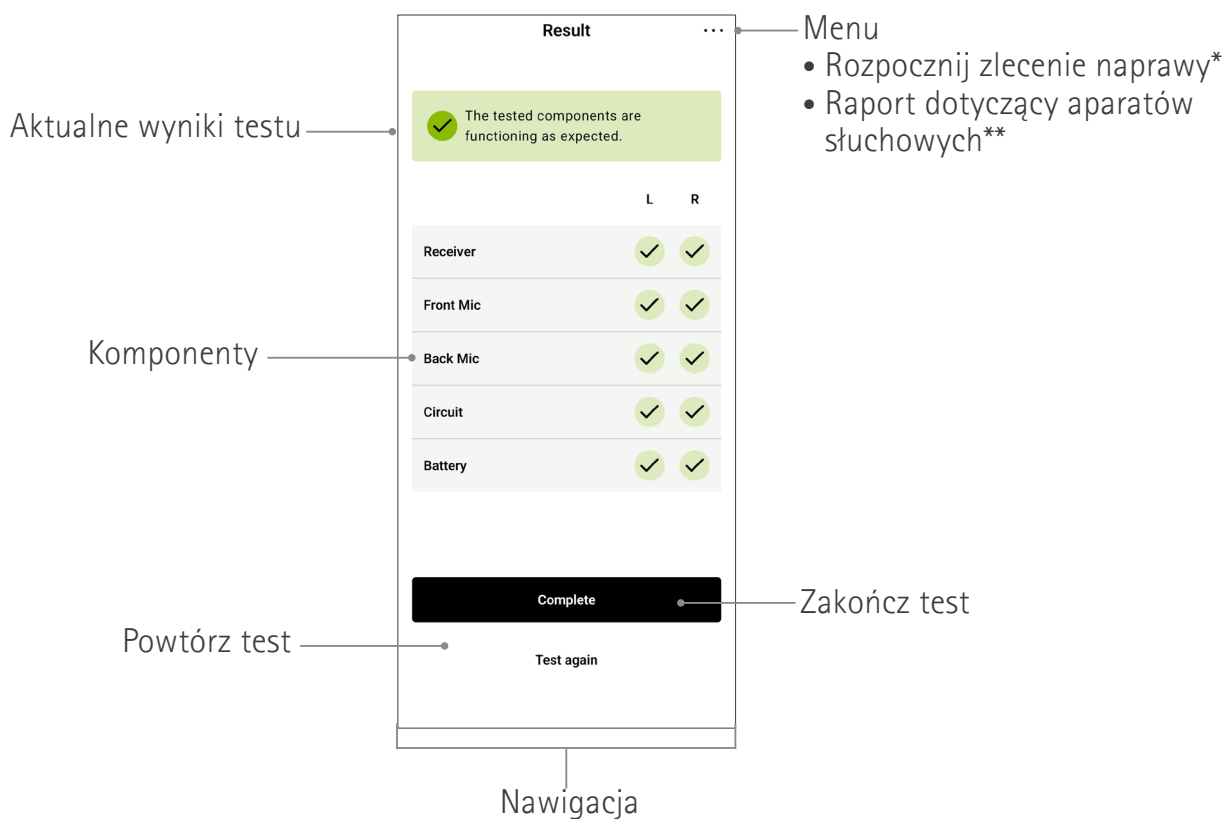




Ekran szczegółów akumulatora

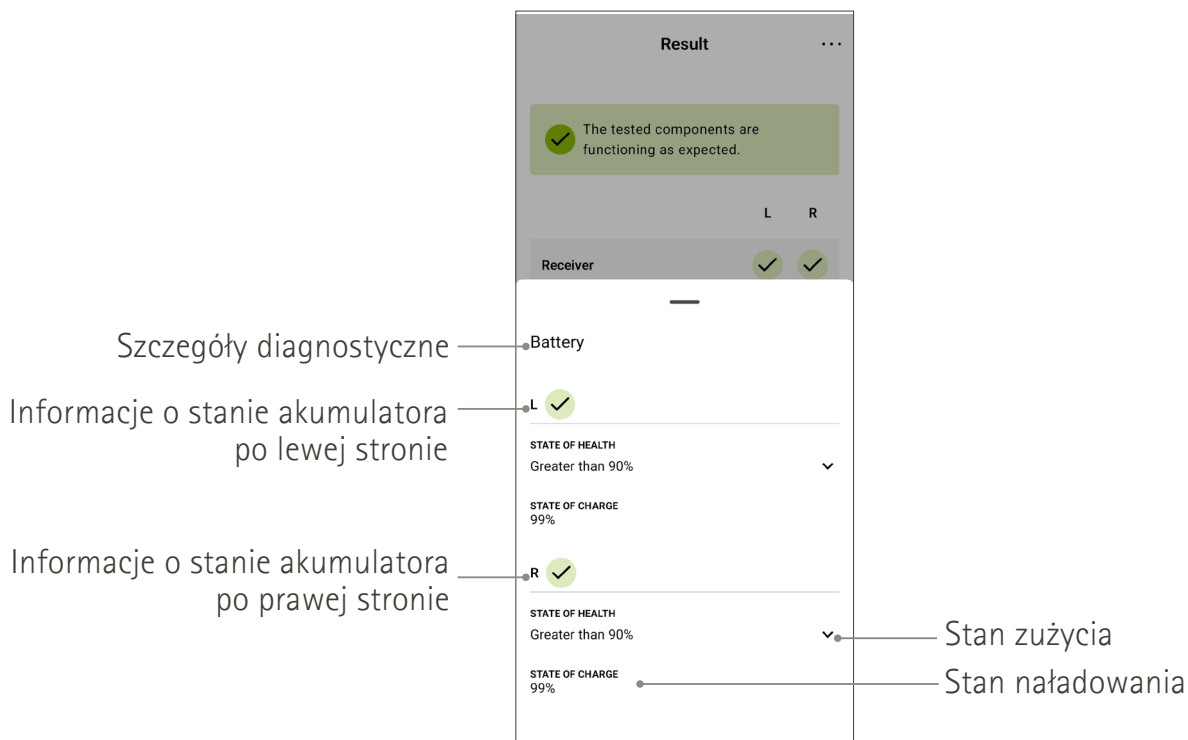

* Dostępne w wybranych krajach

** Dostępny tylko w urządzeniach z systemem Android

Diagnostyka PhonakPro Check nie powiodła się

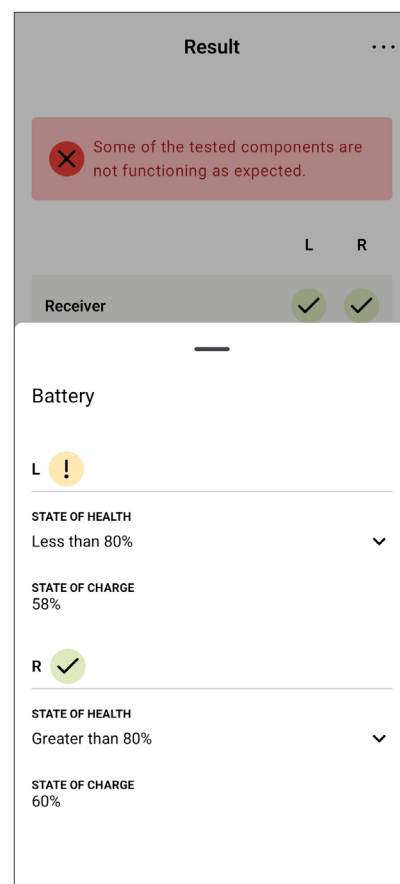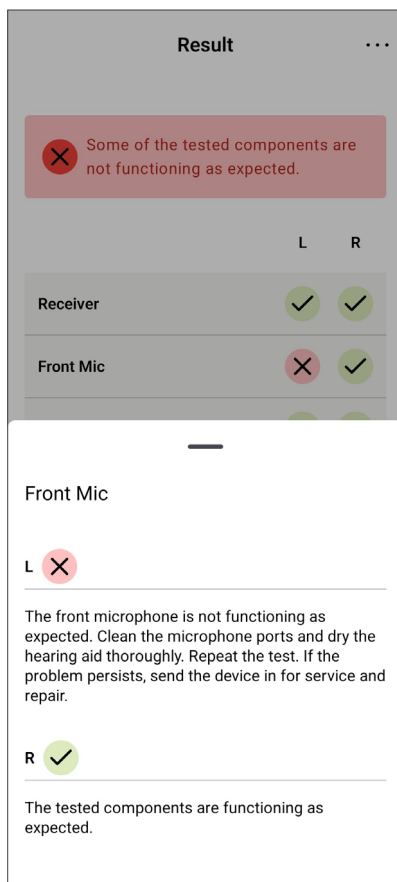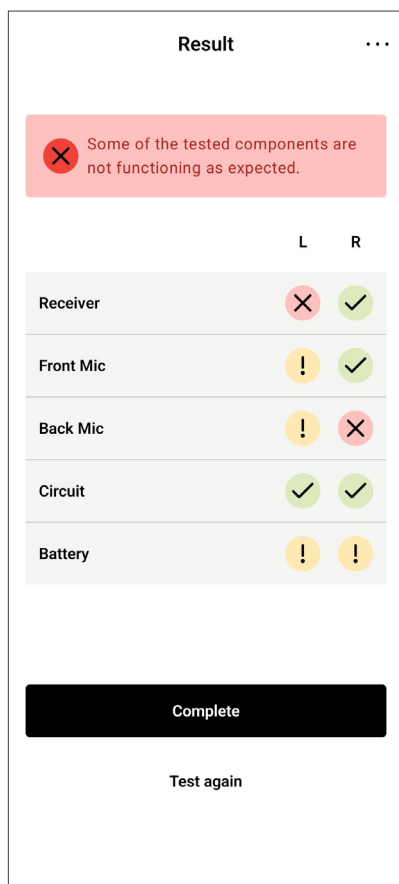

1

Test sprawdza działanie każdego komponentu, a następnie wyświetla przegląd wyników dla lewego i prawego aparatu słuchowego.

2

Aby sprawdzić diagnostykę nieudaną, **click (kliknij)** ikonę stanu i wykonaj kolejne kroki.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami diagnostycznymi dla każdego uszkodzonego elementu i przetestuj ponownie.

4

Aby rozpocząć zlecenie naprawy* lub utworzyć raport dotyczący aparatów słuchowych, **click (kliknij)** ikonę menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu.

	L	R
Front Mic	✗	✓
Back Mic	✓	✓
Receiver	✓	✓
Battery	✗	✗
Circuit	✓	✓

5

Wypełnij formularz zlecenia naprawy. Jeśli aplikacja wykryje problem, jego przyczyna zostanie wstępnie uzupełniona; w przeciwnym razie wybierz przyczynę.

Kopia formularza zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z Twoim kontem PhonakPro. Wydrukuj ten formularz i dołącz go do aparatu słuchowego podczas odsyłania go do Phonak.

SERIAL #	PRODUCT	REASON
2127N2TWW	Audeo L90-R	[Output resp Too weak, Rechargeable battery] Select...

PHONAK
life is on

Phonak Hearing Aid diagnostic report

	RIGHT	LEFT
Model	Audeo L90-RL	Audeo L90-RL
Serial number	2211H0C02	2211H0C03

	RIGHT	LEFT
Receiver	Pass	Pass
Front Microphone	Pass	Pass
Back Microphone	Pass	Pass
Battery	Battery Health within specifications	Battery Health within specifications

The tested components are functioning as expected.

Disclaimer: This report summarizes the results of a diagnostic assessment performed by PhonakPro Check on the connected hearing aids. It is intended for use by qualified hearing care professionals to support device evaluation and is not intended to provide information about the operational status of the device at the time of testing. The report does not constitute a medical diagnosis or assessment of the hearing aid wearer's hearing health. While the PhonakPro Check is designed to deliver accurate results, it may not detect all potential issues. Clinical judgment should be exercised, and further evaluation may be necessary.
© Sonova AG 2025

* Uruchoń funkcję aplikacji Zlecenie naprawy dostępną w wybranych krajach .



Aplikacja PhonakPro Check



Logo Apple App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Logo sklepu Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika. | Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung. | Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Manuels d'utilisation. | In de gebruiksaanwijzing vindt u meer gedetailleerde informatie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria

www.phonak.com/phonakpro-check

sonova
HEAR THE WORLD