


Roger™ Multimedia Hub.

Guía para profesores


1 Encender

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que empiece a parpadear una luz verde en el dispositivo.

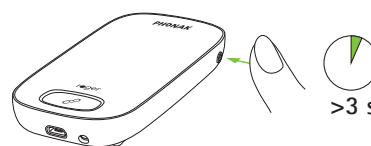

2 Conectar a una fuente de audio

- Establezca la conexión mediante un cable de audio de 3,5 mm enchufado a la toma de auriculares y a la fuente de salida de audio del dispositivo de audio (por ejemplo, portátil, teléfono, pantalla de TV).
- Asegúrese de que el audio se está reproduciendo y de que el volumen se haya subido.
- Dependiendo de la fuente de audio, puede ser necesario un adaptador.

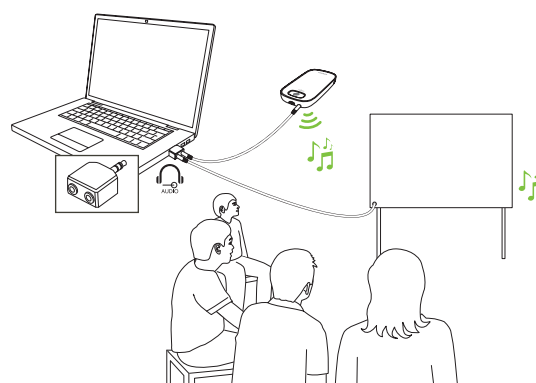

3 Conexión a una red Roger existente en el aula

- Utilice siempre el Roger Touchscreen Mic como dispositivo de red principal para conectarse al Roger Multimedia Hub (MMH).
- Coloque el Roger MMH a menos de 10 cm/4" del Roger Touchscreen Mic y pulse "Conectar".




No pulse el botón "Conectar" en el Roger MMH, porque creará una NewNet.



4 Conexión a audífonos sin otros dispositivos Roger

Mantenga el Roger MMH a menos de 10 cm/4" del audífono y pulse "Conectar". Asegúrese de que el audífono está encendido. El alumno oír un pitido para confirmar la conexión.

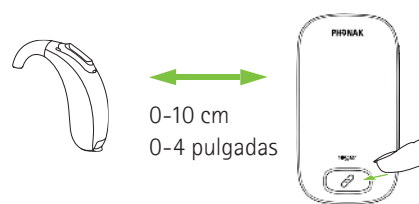

Consejos esenciales



Recuerde cargar el dispositivo al final de la jornada escolar.

- Compruebe que los cables están correctamente conectados al equipo mediante cables de 3,5 mm desde la fuente de audio (por ejemplo, pantalla de TV, proyector).
- Asegúrese de que el volumen está alto en todos los dispositivos que se estén utilizando.
- Utilice un divisor de audio para proporcionar acceso de voz a quienes no son usuarios de audífonos solo si Roger DigiMaster no está disponible.
- Tenga en cuenta que solo puede utilizarse un Roger Multimedia Hub en una red en un momento dado. El Roger Multimedia Hub no puede conectarse con el Roger WallPilot, a menos que se utilice un Roger Touchscreen Mic en la misma red.

Indicadores luminosos

● ● ●	Encendido/apagado
● 1s ● 1s ● 1s	Carga
■ ■ ■	Carga completa
● 1s ● 1s ● 1s	Transmisión de audio
● ● ● ● ● ●	Conectando
■ ■ ■	Conexión correcta
■ ■ ■	Error de conexión



● ● ●	Encendido/apagado
● 1s ● 1s ● 1s	Carga
■ ■ ■	Carga completa
■ ■ ■	Encendido
● ● ● ● ● ●	Dispositivo cargando



Roger Multimedia Hub = secundario

● 2s ● 2s ● 2s	Principal no disponible (asegúrese de que el micrófono principal "1" está dentro del alcance y no está en Modo grupo pequeño).
----------------	--