


Roger™ SoundField.

Guía para profesores

El Roger SoundField System incluye los siguientes altavoces: Roger DigiMaster 5000, DigiMaster 5000 V2, Roger DigiMaster 7000 y Roger DigiMaster 7000 V2.


1 Encender

- Conecte el altavoz Roger DigiMaster a una toma de corriente.
- Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte inferior de la unidad hasta que parpadee una luz azul en la parte superior del altavoz.

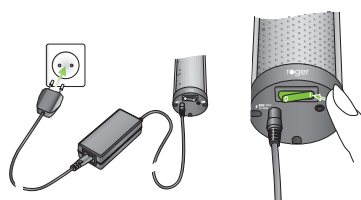

2 Conectar con el Roger Touchscreen Mic

- Encienda el Roger Touchscreen Mic (consulte la Guía para profesores del Roger Touchscreen Mic) y manténgalo a menos de 10 cm/4" del altavoz Roger DigiMaster.
- Pulse "Conectar" en la pantalla frontal del micrófono Roger. Cuando esté conectado, la luz del altavoz Roger DigiMaster será de color azul fijo.

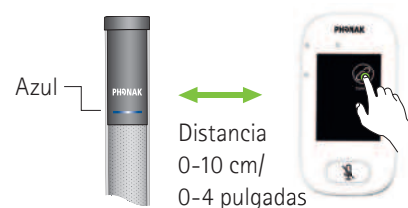

Para los altavoces Roger DigiMaster 7000 o 7000 V2:

Se pueden conectar varios altavoces Roger DigiMaster juntos. Realice el paso 2 uno tras otro.

3 Establezca la conexión con cualquier dispositivo de audio

Establezca la conexión con cualquier otro dispositivo para la entrada de audio directa, utilizando el cable de audio de 3,5 mm enchufado en la parte inferior de la unidad.



Para Roger DigiMaster 5000 V2 y 7000 V2, se puede emparejar un dispositivo Bluetooth® para la transmisión de audio.

- Pulsa el botón de Bluetooth de la parte inferior del altavoz para activar el modo de emparejamiento (parpadeo rápido en azul durante 60 segundos).
- Empareje los dispositivos en el menú de configuración de Bluetooth de la fuente de audio (por ejemplo, portátil o teléfono móvil). Una luz azul que parpadea dos veces en el altavoz Roger DigiMaster indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Para eliminar el emparejamiento Bluetooth, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 10 segundos.




(MP3, iPhone, TV, PC, etc.)

roger

Consejos esenciales

El altavoz Roger DigiMaster permanecerá conectado al Roger Touchscreen Mic a una distancia de hasta 25 metros/80 pies.

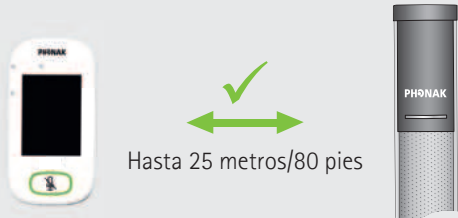

Se puede conectar un máximo de 20 altavoces Roger DigiMaster 7000 V2 en una red determinada en un momento dado.

Indicadores luminosos



- Roger DigiMaster apagado
- modo de funcionamiento estándar
- Micrófono Roger apagado/fuera de alcance
- Silenciado
- Volumen +/-
- Actualización del software
- Llamar al técnico

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.