


Roger™ Touchscreen Mic.

Guía para profesores



1 Encender

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee en verde.
- Deslice el dedo sobre la pantalla hacia la izquierda o la derecha para acceder al menú.

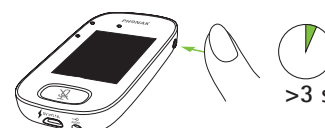

2 Conexión a audífonos o a varios micrófonos Roger

- Asegúrese de que los dispositivos correspondientes están encendidos.
- Mantenga el Roger Touchscreen Mic (TSM) a menos de 10 cm/4" del dispositivo.
- Toque "Conectar".




Para audífonos:

- El alumno oír un pitido para confirmar la conexión.
- Para volver a comprobarlo, seleccione "Lista de equipos" en la pantalla del Roger TSM. Se mostrarán todos los dispositivos que se encuentren a menos de 10 cm/4".



3 Llevar alrededor del cuello mientras se enseña/habla


- Sujete el Roger TSM al cordón y llévelo alrededor del cuello.
- Ajuste la correa de modo que el dispositivo quede a 20 cm/6" de su boca.
- Utilice el botón "Silenciar" para activar/desactivar el micrófono.

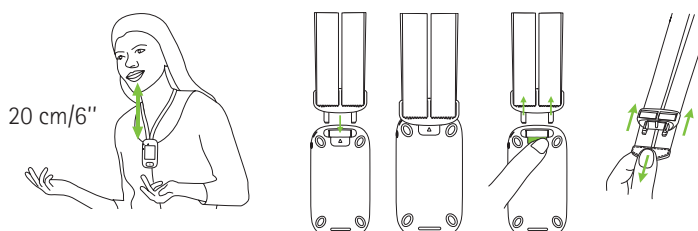

Evite frotar, golpear o tapar el micrófono, ya que estas acciones pueden amplificar los sonidos.

4 Establezca la conexión con un dispositivo de audio

- Utilice un cable de audio de 3,5 mm conectado a la toma de auriculares o a la fuente de salida de audio del dispositivo de audio.
- Dependiendo de la fuente de audio, puede ser necesario un adaptador.

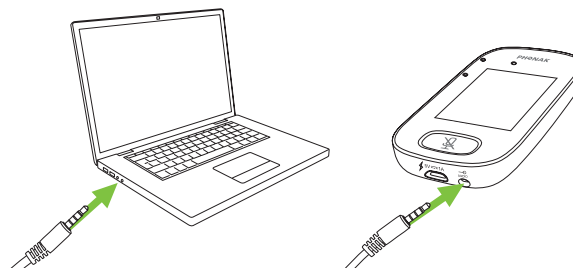


Consejos esenciales



Recuerde cargar el Roger al final de la jornada escolar.

El Roger TSM debe colocarse en posición vertical. Solo debe colocarse en posición horizontal cuando esté en modo grupo, como se indica a la derecha.

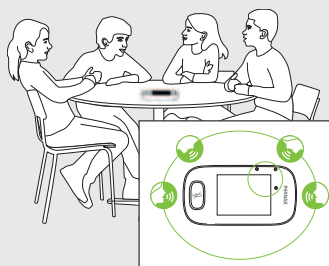


El Roger TSM permanecerá conectado a cualquier dispositivo compatible a una distancia de hasta 25 metros/80 pies.

Indicadores luminosos



Encendido/apagado
Carga
Carga completa

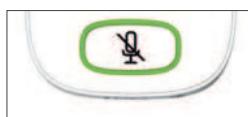

Silenciado



Principal no disponible (asegúrese de que el micrófono principal "1" está dentro del alcance y no está en Modo grupo pequeño).



Encendido/apagado
Carga
Carga completa



Encendido



Dispositivo cargando

Iconos de menú que aparecen en la pantalla

Icono	Función
	Abre el menú Ajustes del micrófono.
Ajustes	
	Conecta los dispositivos Roger a la red a la que está conectado el micrófono
Conectar	
	Comprueba de forma inalámbrica que otro dispositivo está conectado o funciona correctamente.
Check	
	Desconecta un dispositivo de la red de un micrófono.
Desconectar	
	Muestra los dispositivos Roger conectados al micrófono en la red de una clase.
Lista de equipos	
	Los ajustes de volumen de un altavoz DigiMaster Roger Dynamic SoundField
SoundField	

Icono	Función
	Contiene un número ilimitado de receptores Roger para audífonos con RogerDirect.
RogerDirect	
	Abre el menú Modo mic
Modo mic	
	Crea una subred temporal (se utiliza para hablar con uno o más alumnos sin distraer al resto).
SubNet	
	Regresa a la red del micrófono desde una SubNet.
Red	
	Une otra red existente de un micrófono o receptor.
JoinNet	
	Cancela la red del micrófono (incluidas las SubNets).
NewNet	