

Instrucciones de limpieza y mantenimiento del auricular ActiveVent™

Le felicitamos por haber adquirido los audífonos. Se ha realizado la adaptación de sus audífonos con los auriculares ActiveVent. Cuidar y realizar el mantenimiento de sus audífonos es muy importante.

¿Por qué es importante la limpieza?

1. Garantiza un mejor rendimiento diario
2. Extiende la vida útil de los dispositivos
3. Evita los problemas de reparación que pueden resultar de la acumulación de cerumen y humedad



Cómo realizar la limpieza

1. Audífono


Limpie el audífono a diario con un paño húmedo.

2. Auricular


Limpie el auricular a diario con un paño húmedo.

3 Sustituya el filtro anticerumen

Se recomienda sustituir el filtro anticerumen semanalmente. Sin embargo, el audióprotesista le indicará el intervalo adecuado para obtener el mejor rendimiento. Lea la página siguiente para ver información sobre la sustitución.

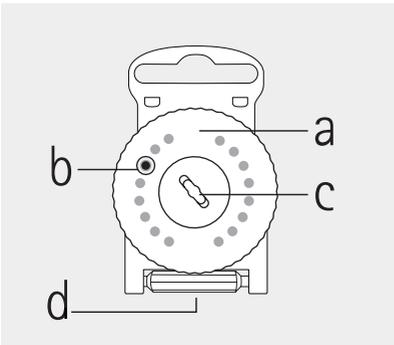

- a) disco giratorio
- b) nuevo filtro
- c) ranura para desechar los filtros usados
- d) herramienta de recambio

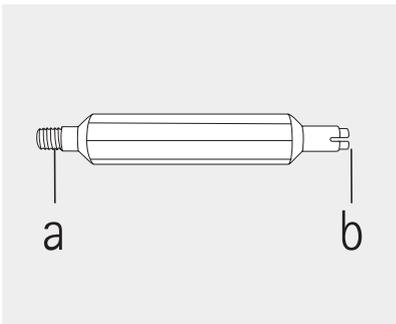


- a) extremo roscado para extraer el filtro usado
- b) extremo ranurado para insertar un filtro nuevo


Cómo sustituir el filtro anticerumen

Extraiga el filtro anticerumen usado


1. Sostenga el auricular con firmeza y asegure la parte posterior del audífono con el dedo para evitar que se desconecte del auricular. Inserte el extremo roscado de la herramienta de recambio en la abertura del auricular, mientras sostiene la cápsula con el pulgar u otro dedo.

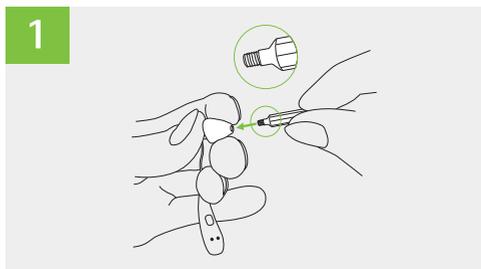

2. Gire la herramienta de recambio en sentido horario hasta que sienta algo de resistencia, luego extraiga el filtro anticerumen usado al tirar de la herramienta de recambio en dirección opuesta a la cápsula.

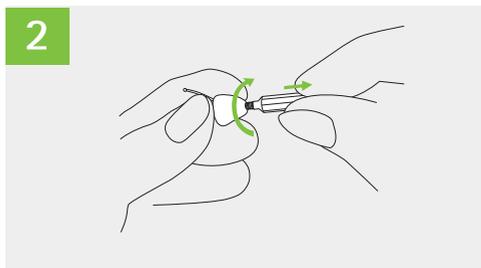


3. Elimine el filtro anticerumen usado deslizando la herramienta de recambio a lo largo de la ranura que se encuentra en el centro de la rueda y levantando la herramienta.

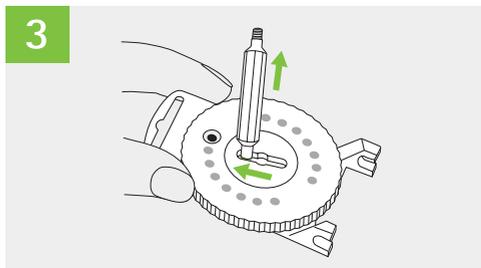


Inserte un filtro anticerumen nuevo


1. Gire el disco hasta ver un nuevo filtro anticerumen en la ventana.

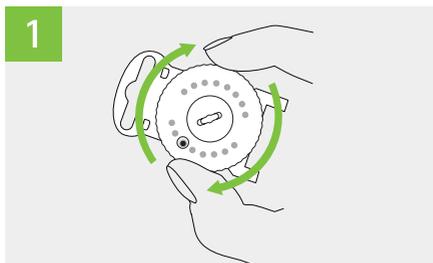


2. Tome el nuevo filtro anticerumen al insertar el extremo ranurado de la herramienta de recambio.

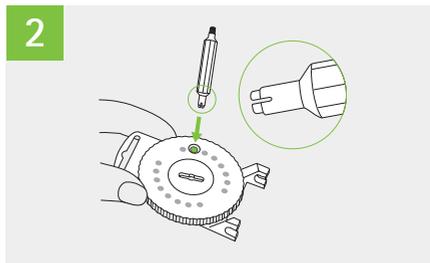

3. Sostenga el auricular con firmeza y sujete la cápsula por el extremo en el que se conecta el cable. Inserte el nuevo filtro anticerumen con suavidad en la abertura de la cápsula.

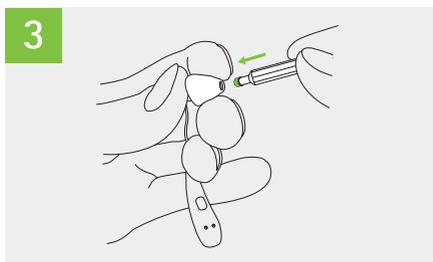

4 a) Inclíne ligeramente la herramienta de recambio al retirarla de la cápsula.
b) Vuelva a conectar la herramienta de recambio a la rueda de filtros anticerumen.

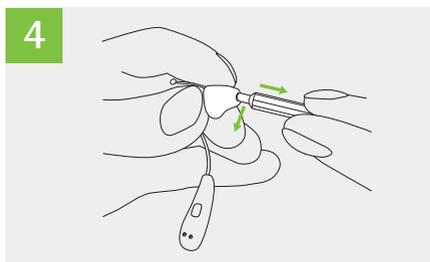

www.phonak.com/activevent

029-1153-06/V1.00/2020-08/Instrucciones de limpieza y mantenimiento de ActiveVent © 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

EC REP

Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Alemania



0459



7 613389 152025

028-2296-06/V1.00/2021-07/NLIG © 2021 Sonova AG. All rights reserved.