

Roger Table Mic.

Käyttöohje



roger

Sisältö

1. Tervetuloa	4
2. Opi tuntemaan Roger Table Mic	5
2.1 Kuinka Roger Table Mic toimii	5
2.2 Tuotteiden kuvaus	6
2.3 Tarvikkeet	8
3. Aloitusopas	10
3.1 Lataaminen	10
3.2 Virran kytkeminen	12
3.3 Roger-vastaanottimen yhdistäminen	13
3.4 Kaukosäätimen yhdistäminen	16
4. Roger Table Mic –kokousmikrofonin käyttö	17
4.1 Kuuleminen paremmin kokouksissa	17
4.2 Liittäminen audiolaitteisiin	18
5. Lisämikrofonien lisääminen	20
5.1 Lisämikrofonien lisääminen	20
5.2 Lisämikrofonien käyttö	22
6. Erikoistoiminnot	24
6.1 Mikrofonin mykistäminen	24
6.2 Poimintaetäisyyden muuttaminen	25
6.3 Yhteyksien katkaiseminen (NewNet)	26
7. Vianetsintä	28

8. Huolto ja takuu	32
8.1 Takuu	32
8.2 Kansainvälinen takuu	32
8.3 Rajoitukset	33
9. Vaatimustenmukaisuustiedot	34
10. Merkkien selitykset	34
11. Tietoa turvallisuudesta	41
11.1 Varoitukset	41
11.2 Tuoteturvallisuus	43
11.3 Muuta tärkeää tietoa	45

1. Tervetuloa

Roger Table Mic on maailman johtavan kuuloalan yrityksen, sveitsiläisen Phonakin, suunnittelema ja rakentama laite.

Tämä ensiluokkainen tuote on vuosikymmenien tutkimuksen ja asiantuntemuksen tulos. Se on suunniteltu, jotta kuulet kaikki kauniit äänet! Kiitämme erinomaisesta valinnasta ja toivotamme useiden vuosien kuuntelunautintoa.

Lue käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että ymmärrät uuden Roger-mikrofonisi™ ja saat siitä parhaan hyödyn. Lisätietoja ominaisuuksista ja eduista saat kuuloalan ammattilaiselta.

Phonak – life is on
www.phonak.com


Tämä käyttöohje koskee seuraavia:

Roger Table Mic 3 CE-merkki otettu käyttöön 2024

2. Opi tuntemaan Roger Table Mic

2.1 Kuinka Roger Table Mic toimii


Roger -mikrofoni lähettää kokouksen osallistujien äänen suoraan kuulijan korviin. Järjestelmä muodostuu kolmesta osasta: kuulokojeista, Roger-vastaanottimista ja yhdestä tai useammasta Roger-mikrofonista.

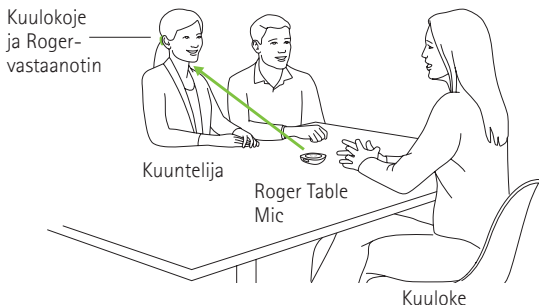

- i** Roger-mikrofoni toimii yleensä jopa 40 metrin / 130 jalan etäisyydellä kuulokojeistasi. On kuitenkin huomioitavaa, että suoraan laitteiden välissä olevat ihmiset ja seinät saattavat heikentää signaalin kantomatkaa. Pisin kantomatka on mahdollista silloin, kun kuuntelijan ja Roger Table Mic -kokousmikrofonin välillä on näköyhteys.


2.2 Tuotteiden kuvaus

Roger Table Mic

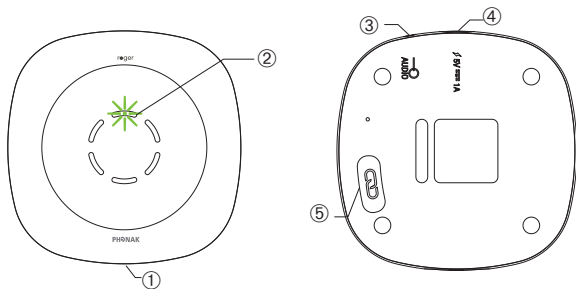


- ① Virtakytkin/mykistys
- ② Mikrofonit ja merkkivalo
- ③ Audioliitin
- ④ Latausliitin
- ⑤ Yhdistämisnäppäin

Kaukosäädin

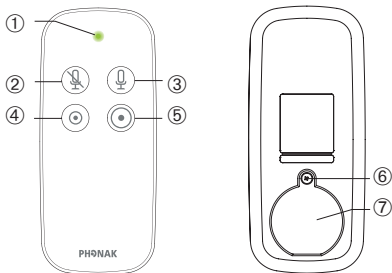


- ① Merkkivalo
- ② Mykistys päälle
- ③ Mykistys pois
- ④ Lyhyt poimintaetäisyys
- ⑤ Pitkä poimintaetäisyys
- ⑥ Ruuvi
- ⑦ Paristokotelo


2.3 Tarvikkeet

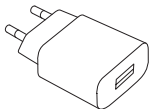


Virtalähde

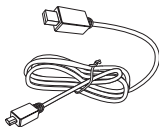


USB-kaapeli

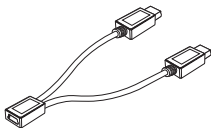

Micro-USB-
haarajohto

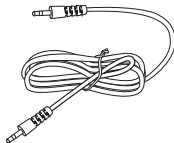


Audiojohto

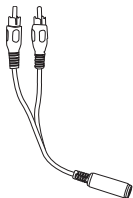

RCA-adapteri



Kaukosäädin

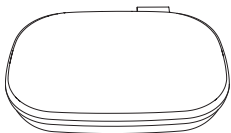


Säilytyskotelo


3. Käytön aloittaminen

3.1 Lataaminen

Ladataksesi Roger Table Mic -kokousmikrofonin, liitä toimitussisältöön kuuluva laturi laitteen latausliittimeen. Mikrofonin merkkivalo välkkyyy ladattaessa vihreänä ja muuttuu jatkuvasti palavaksi vihreäksi, kun akku on täynnä.

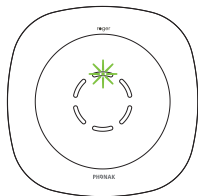

Tyhjän akun lataaminen kestää n. 4 tun. Lataus on valmis, kun merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

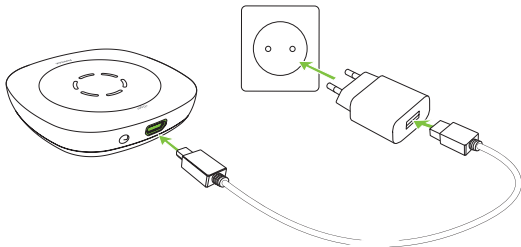

1. Kytke latausjohdon pienempi pää (micro-USB) Roger -mikrofoniin.

2. Kytke latausjohdon isompi pää (USB) virtalähteeseen.
3. Kytke virtalähde pistorasiaan.

Ladataksesi kahta mikrofonia yhdellä virtalähteellä, käytä toimitussisältöön kuuluvaa haarajohtoa.

- ① Käytä haarajohtoa ainoastaan toimitussisältöön kuuluvan virtalähteen kanssa. Kahden laitteen lataamista tietokoneen USB -liitännästä ei tueta.

Merkkivalo antaa seuraavaa tietoa mikrofonia ladatassa:

Merkkivalo (latauksen tila)




Lataus käynnissä



Lataus valmis

3.2 Virran kytkeminen

Roger Table Mic käynnistetään painamalla  virtakytkintä sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.

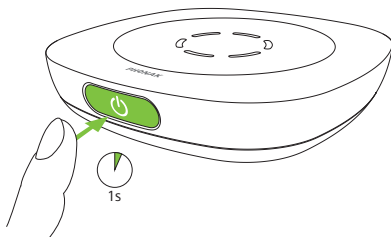

Kun Roger Table Mic on päällä, merkkivalo vilkkuu rauhalliseen tahtiin. Vihreä valo merkitsee, että akku on täynnä ja oranssi, että akku on puolillaan. Oranssi valo tarkoittaa, että akku on puoliksi täynnä. Mikäli valo alkaa vilkkua punaisena, tulisi akku ladata mahdollisimman pian.




Lataa Roger-mikrofoni

3.3 Roger-vastaanottimen yhdistäminen


Varmista, että olet hankkinut Roger-vastaanottimen kuuloalan ammattilaiselta. Saatavilla on useita vastaanotinvaihtoehtoja.

Kuuloalan ammattilainen on ehkä jo liittänyt Roger-mikrofonin kuulokojeisiisi. Jos näin ei ole, liitä vastaanottimet Roger-mikrofoniin seuraavasti:

1. Varmista, että sekä Roger-mikrofonin että -vastaanottimen virta on päällä.
Pidä Roger-mikrofonia enintään 10 cm:n päässä Roger-vastaanottimesta tai kuulokojeesta.

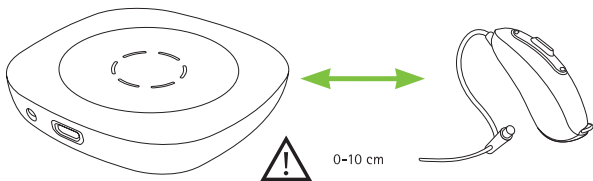

2. Paina Roger-mikrofonin  yhdistämisnäppäintä.

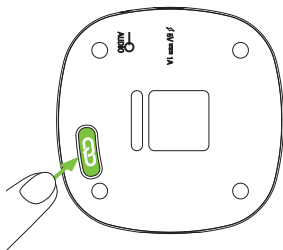

Merkkivalo palaa vihreänä kahden sekunnin ajan, kun yhdistäminen onnistuu. Tämän lisäksi kuulokojeista kuuluu merkkiäni.

-  Roger-mikrofoniin voidaan yhdistää rajaton määrä Roger-vastaanottimia

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Yhdistämisnäppäimen  painamisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:



Sininen vilkkuu: Yhdistäminen käynnissä



Vihreä palaa: Yhdistäminen onnistui – Roger-vastaanotin on yhdistetty Roger-mikrofoniin



Punainen vilkkuu nopeasti pari kertaa: Roger-mikrofoni ei löytänyt yhtään Roger-vastaanotinta. Siirrä se lähemmäksi Roger-vastaanotinta ja varmista, että vastaanotin on päällä. Tämän jälkeen yritä yhdistää uudelleen.



Punainen vilkkuu hitaasti muutaman kerran: Roger-vastaanotin ei ole yhteensopiva Roger-mikrofonin kanssa

3.4 Kaukosäätimen yhdistäminen

Kaukosäädin on yhdistetty Roger Table Mic -kokousmikrofoniin jo tehtaalla. Tarvittaessa kaukosäätimen voi yhdistää myös useampaan mikrofoniin.

1. Paina kaukosäätimen mitä tahansa näppäintä ja pidä sitä painettuna.
2. Käynnistä Roger Table Mic painamalla sen virtakytkintä . Mikrofonin merkkivalo välähtää neljästi violettina merkiksi onnistuneesta yhdistämisestä.
3. Vapauta painettuna oleva kaukosäätimen näppäin.

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Kaukosäätimen yhdistämisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:




Violetti välähtää neljästi:
Kaukosäätimen yhdistäminen
onnistui.

4. Roger Table Mic -kokousmikrofonin käyttö

Roger Table Mic on monipuolinen ja älykäs laite. Se tunnistaa missä tilanteessa käyttäjä on ja säättää toimintaansa automaattisesti, tarjoten näin parasta mahdollista puheen ymmärtämistä kokoustilanteessa.

4.1 Kuuleminen paremmin kokouksissa

Mikrofoni asetetaan keskelle pöytää, jolloin kuullaan eri puolilla pöytää istuvien ihmisten puhe.

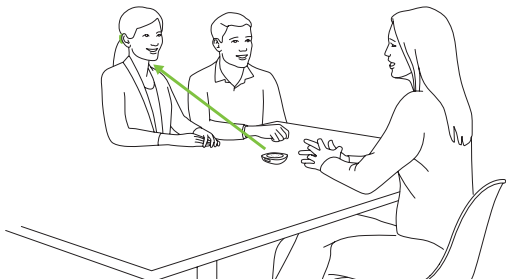


- ❶ Parhaan mahdollisen puheen ymmärtämisen saavuttamiseksi, pidä mikrofoni kaukana taustahälyn lähteistä kuten projektori tai (kannettava)tietokone ja aseta se mahdollisimman lähelle puhujaa/puhujia.

4.2 Liittäminen audiolaitteisiin

Roger Table Mic voidaan liittää mihin tahansa äänilähteeseen, kuten konferenssipuhelimeen tai tietokoneeseen.

1. Näin kyseisten laitteiden ääni kuullaan suoraan kuulokojeilla.
2. Kytke toinen pää äänilähteen.

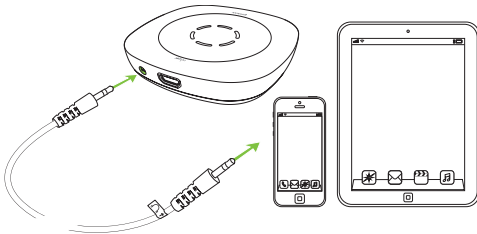

- ① Kun äänilähde laitetaan päälle, Roger Table Mic huomaa tämän ja mykistää oman mikrofoninsa automaattisesti.


5. Lisämikrofonien lisääminen

Roger-teknologia mahdollistaa useiden mikrofonien käyttämisen samanaikaisesti. Tämä tapahtuu yhdistämällä useita Roger-mikrofoneja keskenään.

5.1 Lisämikrofonien yhdistäminen

Toisen mikrofonin yhdistäminen Roger Table Mic -kokousmikrofoniin:

1. Kytke molempiin mikrofoneihin virta.
2. Aseta mikrofonit lähelle toisiaan (enintään 10 cm:n etäisyydelle).

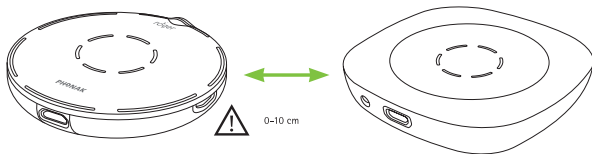

3. Paina kokousmikrofonin  yhdistämisnäppäintä.

Molempien mikrofonien merkkivalo palaa vihreänä kahden sekunnin ajan merkinä onnistuneesta yhdistämisestä.

- ① Jos halutaan yhdistää Roger Select ja Roger Table Mic, tulee painaa Roger Selectin yhdistämisnäppäintä.

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Yhdistämisnäppäimen  painamisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:



Vihreä palaa: Yhdistäminen onnistui – Roger-mikrofonit on yhdistetty toisiinsa.



Punainen vilkkuu nopeasti pari kertaa: Roger-mikrofoni ei löytänyt toista mikrofonia. Siirrä mikrofonit lähemmäksi toisiaan ja varmista, että ne ovat päällä. Tämän jälkeen yritä yhdistää uudelleen.




Punainen vilkkuu hitaasti muutaman kerran: Roger-mikrofoni ei ole yhteensopiva Roger Table Mic -kokousmikrofonin kanssa. Päivitä mikrofonin ohjelmisto Roger Upgrader -ohjelmalla tai ole yhteydessä kuuloalan ammattilaiseen.

5.2 Lisämikrofonien käyttö

Roger Table Mic -kokousmikrofonit asetetaan pöydälle, jotta sen ympärillä istuvien henkilöiden puhe kuullaan mahdollisimman hyvin. Muita Roger-mikrofoneja voidaan antaa puhujille, joita halutaan kuunnella. On tärkeää varmistaa, että mikrofonit asetetaan riittävän lähelle (enintään 20 cm) puhujan suuta.

Roger-mikrofonit tunnistavat automaattisesti, koska niitä käyttävä henkilö puhuu ja lähettävät puheen välittömästi kuulijan kuulokojeisiin.

Jos joku puhujista haluaa hetkellisesti poistua ryhmästä, hän voi mykistää mikrofoninsa painamalla lyhyesti virtakytkintä.

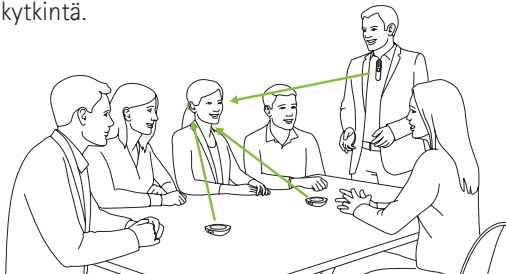

- ① Jos yhteydessä on ongelmia, tulee painaa jonkun mikrofonin yhdistämisnäppäintä  , että verkko saadaan uudelleen käyttöön.

Merkkivalo (lisämikrofonien tila)

Useita Roger-mikrofoneja käytettäessä merkkivalot antavat seuraavia tietoja:



Jatkuva violetti valo: Roger-mikrofoni on mykistetty. Poista mykistys painamalla virtakytkintä  tai kaukosäätimen mykistysten poisto-näppäintä.




Vilkkuva sininen valo: Roger-mikrofoni ei löydä toisia mikrofoneja. mikrofoneja. Paina yhdistämisnäppäintä  ottaaksesi yhteyden uudelleen käyttöön.

6. Erikoistoiminnot

6.1 Mikrofonin mykistäminen

Mikrofonin mykistäminen on hyödyllistä etenkin taukojen aikana tai jos halutaan keskittyä vain yhteen puhujaan.

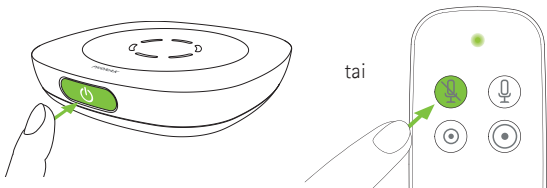

1.

Paina lyhyesti virtakytkintä  tai kaukosäätimen mykistys päälle -näppäintä mykistääksesi Rogermikrofonin. Kun laite on mykistetty, merkkivalo palaa violettina.


2. Poista mykistys painamalla uudestaan virtakytkintä tai kaukosäätimen mykistys pois -näppäintä.

i Kaukosäädin mykistää kaikki kokousmikrofonit, jotka siihen on yhdistetty.

6.2 Poimintaetäisyyden muuttaminen

Mikäli vaimeat ja/tai etäältä tulevat äänet häiritsevät, voidaan mikrofonin poimintaetäisyyttä pienentää kaukosäätimellä.

Paina etäisyys -näppäimiä vaihtaaksesi laajan ja pienen poimintaetäisyyden välillä.

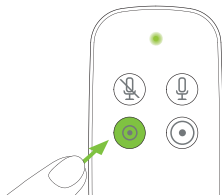


- ❶ Poimintaetäisyys palautuu aina laajaksi, kun mikrofoni on sammutettu ja käynnistetään uudelleen.

6.3 Roger -laitteiden yhteyden katkaiseminen (NewNet)

Roger Table Mic

-kokousmikrofonin yhteys mihin tahansa Roger-vastaanottoimeen tai -mikrofoniin voidaan katkaista painamalla yhdistämisnäppäintä  7 sekunnin ajan.

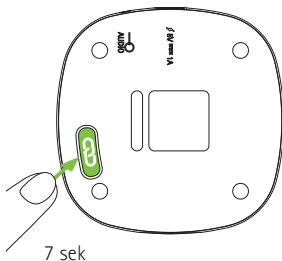

Kun yhteys kaikkiin laitteisiin on katkaistu, merkkivalo muuttuu oranssiksi.

Tämän jälkeen voidaan taas yhdistää Roger-vastaanottimia ja -mikrofoneja käytössä olevaan Roger-mikrofoniin.

Nollaus

Jos Roger Table Mic lakkaa toimimasta, eikä reagoi näppäinten painamiseen, se voidaan "nollata" painamalla virtakytkintä  ja yhdistämisnäppäintä  samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

7. Vianmääritys

Ongelma

Roger Table Mic ei käynnisty

Puhe ei erotu kunnolla

Puhujan ääntä ei kuulu, vaikka Roger Table Mic on päällä

Ääni häviää toistuvasti

Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian matala

Syyt

Akku on tyhjä

Mikrofoni on asetettu väärin

Mikrofoniaukot on peitetty

Mikrofoni on mykistetty

Kuulokoje ei ole oikealla ohjelmalla

Roger-vastaanottimia ei ole yhdistetty Roger-mikrofoniin

Roger Table Mic oli osana verkkoa

Roger-mikrofonin ja -vastaanottimen välinen etäisyys on liian suuri

Roger-mikrofonin ja -vastaanottimen välissä on esteitä

Äänenvoimakkuus on säädetty väärin

Korjaava toimenpide

Lataa mikroфонia vähintään neljä tuntia

Siirrä mikroфoni lähemmäs puhujaa

Varmista, että mikroфонiaukkoja ei ole peitetty eikä niissä ole likaa

Tarkista merkkivalo – jos se on violetti, paina virtakytkintä lyhyesti poistaaksesi mykistys

Tarkista, että kuulokoje on päällä ja käyttää oikeaa ohjelmaa

Vie Roger-mikroфoni yksitellen jokaisen vastaanottimen viereen ja paina yhdistämisnäppäintä

Paina yhdistämisnäppäintä

Siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan

Varmista, että laitteiden välillä on näköyhteys

Lisää äänilähteen äänenvoimakkuutta

Ongelma

Ulkoisen äänilähteen ääni ei kuulu lainkaan

Roger Table Mic on päällä, mutta sen merkkivalo vilkkuu sinisenä

Roger Table Mic –merkkivalo vilkkuu punaisena (kaksi välähdystä)

Roger Table Mic ei toimi

Kaukosäädin ei toimi

Syyt

Äänilähde on mykistetty

Roger Table Mic on mykistetty

Roger Table Mic on yhdistetty äänilähteeseen audiojohdolla, mutta se ei ole päällä

Roger Table Mic oli osana verkkoa

Akku on lähes tyhjä

Ohjelmisto-ongelma

Mikrofoni ei ole päällä

Mikrofoni on liian kaukana

Mikrofoni on liian kaukana

Mikrofonien verkko on "hajonnut"

Paristo on tyhjä

Korjaava toimenpide

Poista äänilähteen mykistys

Poista mikrofonin mykistys

Käynnistä mikrofoni kuunnellaksesi äänilähteen ääntä

Paina yhdistämisnäppäintä

Lataa mikrofoni mahdollisimman pian

"Nollaa" mikrofoni painamalla samanaikaisesti virtakytkintä ja yhdistämisnäppäintä 10 sekunnin ajan

Päivitä kaikki Roger-mikrofonit Roger Upgrader -ohjelmalla

Varmista, että molemmat laitteet ovat päällä

Siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan

Paina jonkin mikrofonin yhdistämisnäppäintä verkon uudelleen käyttöön ottamiseksi

Vaihda paristo (CR2032)

8. Huolto ja takuu

8.1 Paikallinen takuu

Kysy paikallisista takuuuehdoista kuuloalan ammattilaiselta, jolta ostit laitteen.

8.2 Kansainvälinen takuu

Phonak tarjoaa rajoitetun kansainvälisen takuun, jonka kesto on yksi vuosi ostopäivästä alkaen. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliveitteen. Takuu on voimassa ainoastaan, jos laitteen ostosta esitetään tosite.

Kansainvälinen takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, jotka sinulla on kuluttajatuotteiden myyntiä koskevien kansallisten lakien mukaisesti.

8.3 Takuun rajoitukset

Takuu ei kata laitteen väärästä käsittelystä tai kunnossapidosta tai sen kemikaaleille, veteen upottamiselle tai kohtuuttomalle rasitukselle altistumisesta aiheutuvia vaurioita. Kolmannen osapuolen tai valtuuttamattoman huoltoliikkeen aiheuttama vaurio johtaa takuun raukeamiseen. Takuu ei myöskään kata kuuloalan ammattilaisen toimipaikassaan suorittamia huoltotöitä.

Sarjanumero:

Ostopäivä:

Valtuutettu kuuloalan ammattilainen
(leima/allekirjoitus):



9. Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova Communications AG vakuuttaa, että tämä tuote täyttää radiolaitteille asetetut direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavissa valmistajalta, paikalliselta Phonak-edustajalta tai sivulta www.phonak.com.

Toimintataajuus: 2400 – 2483.5 MHz

Tehokkuus: < 100 mW

Australia/Uusi-Seelanti:



R-NZ

Ilmaisee laitteen yhteensopivuuden sovellettavien radiotaajuuksien hallinnan (RSM) ja Australian viestintä- ja mediaviranomaisen (ACMA) sääntöjen kanssa laitteen myymiseksi laillisesti Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Yhteensopivuustunnus R-NZ on tarkoitettu Uuden-Seelannin markkinoille toimitetuille, vaatimustenmukaisuustason A1 radiotaajuustuotteille.

Huomautus 1:

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15 ja Industry Canadian RSS-normeja.

Käyttö on seuraavien kahden ehdon alasta:

- 1) laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja
- 2) laitteen on kestävä kaikki häiriöt, mukaan lukien laitteen tahattomia toimintoja aiheuttavat häiriöt.

Huomautus 2:

Tämän laitteen muutokset tai muokkaukset, joita Sonova Communications AG ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat saada FCC:n tälle laitteelle myöntämän käyttövaltuutuksen raukeamaan.

Huomautus 3:

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC-sääntöjen osan 15 ja Industry Canadian ICES-003:n mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinympäristöasennuksessa. Laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei

asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Siitä ei kuitenkaan ole takeita, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden korjaamista jollakin seuraavista toimista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite vastaanottimen kanssa eri virtapiiriin kuuluvaan pistorasiaan.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioteknikolta.

Huomautus 4:

Japanin radiolain noudattaminen. Yrityslainsäädännön vaatimustenmukaisuus. Tämä laite noudattaa Japanin radiolakia (電波法) ja Japanin televiestinnän yrityslainsäädäntöä (電気通信事業法) Laitetta ei saa muokata (muutoin sille myönnetty määritysnumero ei enää kelpaa).

Huomautus 5:

FCC/Industry Canadan lausunto radiotaajuussäteilystä. Tämä laite noudattaa FCC:n määrittämiä raja-arvoja radiotaajuussäteilylle hallitsemattomassa ympäristössä. Tämän radiolähtetimen tulee olla aina vähintään 20 cm:n etäisyydellä muista ihmisistä eikä sitä saa muokata tai yhdistää toiseen antenniin tai lähettimeen.

10. Merkkien selitykset



CE-merkillä Sonova Communications AG vahvistaa, että tämä tuote täyttää kaikki direktiivin 2014/53/EU - vaatimukset.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja huomioida tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.



Kertoo laitteen valmistajan.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoakäsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite on suunniteltu niin ,että se toimii ongelmitta, kun sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti, ellei tässä ohjeessa toisin mainita.



Australian sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja radioviestinnän yhteensopivuustunnus.



Käyttölämpötilarajat: 0 ° - +45 ° C
Varastointilämpötilarajat:
-10 ° - +60 ° C



Ilmankosteusrajat kuljetukseen:
Enintään 90 %
Ilmankosteusrajat säilytykseen: Enintään
70%, jos sitä ei käytetä.



Ilmanpainerajat: 500 hPA -
1100 hPA.



Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vastuullasi on hävittää laite erillään tavallisesta yhdyskuntajätteestä. Hävittämällä vanhan laitteesi asianmukaisesti autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tässä tuotteessa on kiinteä akku, jota ei voi vaihtaa. Älä yritä avata tuotetta tai vaihtaa akkua, sillä se voi aiheuttaa vammoja ja vaurioittaa laitetta. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen akun irrottamista varten.



Rajoittamaton kuvake osoittaa, että tämä tuote sisältää rajoittamattoman määrän Roger-vastaanottimia RogerDirect-kuulokojeille.



Pakkauksen ja käyttöohjeen voi kierrättää.

11. Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt tiedot ennen kuin käytät Roger-laitteita.

11.1 Varoitukset

-  Pidä tämä laite pienten lasten ulottumattomissa.
-  Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltokeskus. Tähän laitteeseen tehtävät muutokset tai muokkaukset, joita Phonak ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, eivät ole sallittuja.
-  Hävitä sähkökomponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
-  Älä käytä laitetta alueilla, joilla sähkölaitteet ovat kiellettyjä. Jos olet epävarma, kysy vastuuhenkilöltä.
-  Laitetta ei saa käyttää lentokoneessa, ellei ohjaamohenkilökunta ole sitä nimenomaisesti sallinut.

- ⚠ Muut kuin Sonova Communications AG:n nimenomaisesti hyväksymät laitteiden muutokset tai muunnokset eivät ole sallittuja.
- ⚠ Käytä vain Sonova Communications AG:n hyväksymiä lisävarusteita.
- ⚠ Käytä turvallisuussyistä vain Sonova Communications AG:n toimittamia latureita tai vakiintuneita latureita (5 VDC, vähintään 500 mA).
- ⚠ Älä käytä laitetta räjähdysherkissä tiloissa (kaivoksissa tai teollisuusalueilla, joissa on räjähdysvaara, runsashappisissa ympäristöissä tai paikoissa, joissa käsitellään herkästi syttyviä anestesia-aineita) tai paikoissa, joissa sähkölaitteiden käyttö on kielletty.
- ⚠ Laitteen avaaminen voi vaurioittaa sitä. Jos ilmenee ongelmia, joita ei voida ratkaista noudattamalla tämän käyttöoppaan Vianmääritys-osion ohjeita, ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

11.2 Tietoa tuoteturvallisuudesta

- ① Suojaa laitetta liiallisilta iskuilta ja tärinältä.
- ① Älä altista laitetta sellaisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka ylittävät tässä käyttöohjeessa annetut käyttöolosuhderajat.
- ① Älä käytä mikroaaltouunia tai muita lämmityslaitteita laitteen kuivaamiseen.
- ① Puhdista laite kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita (pesupulveria, saippuaa tms.) tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
- ① Älä kytke laitteeseen yli kolme metriä pitkää USB- tai audiojohtoa.
- ① Kun laitetta ei käytetä, pidä se sammutettuna ja turvallisessa paikassa.

- ① Suojaa laite liialliselta kosteudelta (kylpeminen, uiminen), kuumuudelta (patteri, auton kojelauta) ja suoralta ihokosketukselta hikoiltaessa (kuntoilu, urheilu).
- ① Röntgensäteily, magneettikuvaus tai tietokonetomografia voivat vaurioittaa laitetta.
- ① Älä käytä liiallista voimaa kytkiessäsi laitteen eri johtoja.
- ① Suojaa laitteen kaikki liittimet ja mikrofoniaukot pölyltä ja liialta.
- ① Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut esimerkiksi putoamisen yhteydessä, ylikuumentunut latauksessa, kastunut tai sen johto/liitin on vaurioitunut.
- ① Laitteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Se voidaan ladata ja käyttää tyhjäksi satoja kertoja, mutta ajan mittaan se kuitenkin kuluu. Akun voi vaihtaa ainoastaan Phonakin valtuuttama henkilö.

11.3 Muuta tärkeää tietoa

- Sydämentahdistinta tai muuta lääkinnällistä laitetta käyttävien henkilöiden tulee AINA neuvotella lääkäriinsä tai laitteensa valmistajan kanssa ENNEN laitteen käyttöä. Laitetta sydämentahdistimen tai muiden lääkinnällisten laitteiden kanssa käytettäessä on AINA noudatettava sydämentahdistimesta vastaavan lääkärin tai sydämentahdistimen valmistajan turvallisuussuosituksia.
- Laite kerää ja tallentaa sisäisiä teknisiä tietoja. Kuuloalan ammattilainen voi lukea nämä tiedot laitteen tarkistamiseksi ja auttaakseen sinua käyttämään laitetta oikein.
- Roger-laitteiden digitaalinen signaali on salattu, eikä sitä voida kuunnella muilla, kuin verkkoon yhdistetyillä laitteilla.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Sveitsi

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1381-11/V1.00/2024-05/cz © 2024 Sonova AG All rights reserved

