

Roger Table Mic II

Käyttöohje



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Sisällysluettelo

1. Tervetuloa	4
2. Opi tuntemaan Roger Table Mic II	5
2.1 Kuinka Roger Table Mic II toimii	5
2.2 Tuotteiden kuvaus	6
2.3 Tarvikkeet	8
3. Aloitusopas	10
3.1 Lataaminen	10
3.2 Virran kytkeminen	12
3.3 Roger-vastaanottimen yhdistäminen	13
3.4 Kaukosäätimen yhdistäminen	16
4. Roger Table Mic II –kokousmikrofonin käyttö	17
4.1 Kuuleminen paremmin kokouksissa	17
4.2 Liittäminen audiolaitteisiin	18
5. Lisämikrofonien lisääminen	20
5.1 Lisämikrofonien lisääminen	20
5.2 Lisämikrofonien käyttö	22
6. Erikoistoiminnot	24
6.1 Mikrofonin mykistäminen	24
6.2 Poimintaetäisyyden muuttaminen	25
6.3 Yhteyksien katkaiseminen (NewNet)	26
7. Vianetsintä	28
8. Huolto ja takuu	32

8.1 Takuu	32
8.2 Rajoitukset	33
9. Vaatimustenmukaisuustiedot	34
10. Merkkien selitykset	38
11. Tietoa turvallisuudesta	41
11.1 Varoitukset	41
11.2 Tuoteturvallisuus	43
11.3 Muuta tärkeää tietoa	45

1. Tervetuloa

Haluamme kiittää sinua Phonakin Roger Table Mic II -kokousmikrofonin valinnasta ja toivomme sinulle kuuntelunautintoa useiksi vuosiksi.

Roger Table Mic II on maailman johtavan kuuloalan yrityksen, sveitsiläisen Phonakin, suunnittelema ja rakentama laite.


Saadaksesi täyden hyödyn laitteestasi, suosittelemme lukemaan tämän käyttöohjeen läpi huolellisesti. Mikäli sinulla on mitä tahansa laitteeseen liittyvää kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä laitteen myöntäneeseen tahoon tai suoraan Phonakin edustajaan.

Phonak – life is on
www.phonak.fi

2. Opi tuntemaan Roger Table Mic II

2.1 Kuinka Roger Table Mic II toimii


Roger -mikrofoni lähettää kokouksen osallistujien äänen suoraan kuulijan korviin. Järjestelmä muodostuu kolmesta osasta: kuulokojeista, Roger-vastaanottimista ja yhdestä tai useammasta Roger-mikrofonista.

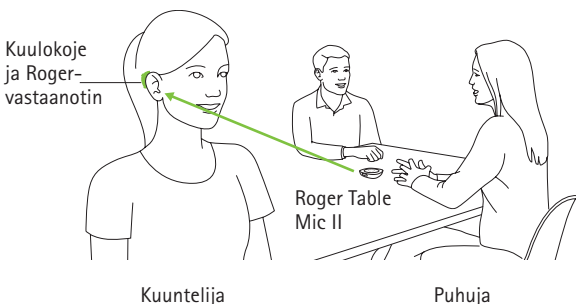

❗ Roger Table Mic II ja kuulokojeet toimivat normaalisti n. 20 metrin säteellä. On kuitenkin huomioitavaa, että suoraan laitteiden välissä olevat ihmiset ja seinät saattavat heikentää signaalin kantomatkaa. Pisin kantomatka on mahdollista silloin, kun kuuntelijan ja Roger Table Mic II -kokousmikrofonin välillä on näköyhteys.


2.2 Tuotteiden kuvaus

Roger Table Mic II

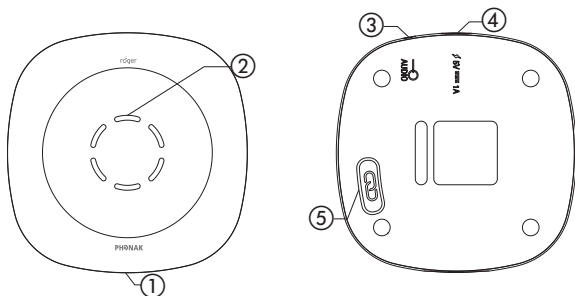


- ① Virtakytkin/mykistys
- ② Mikrofonit ja merkkivalo
- ③ Audioliitin
- ④ Latausliitin
- ⑤ Yhdistämisnäppäin

Kaukosäädin

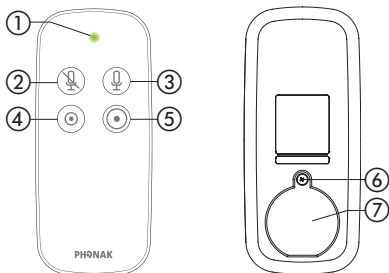


- ① Merkkivalo
- ② Mykistys päälle
- ③ Mykistys pois
- ④ Lyhyt poimintaetäisyys
- ⑤ Pitkä poimintaetäisyys
- ⑥ Ruuvi
- ⑦ Paristokotelo


2.3 Tarvikkeet

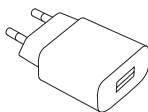


Virtalähde

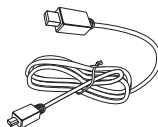


USB-johto

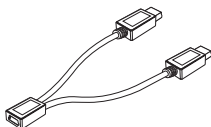


Micro-USB-
haarajohto

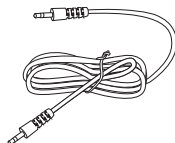


Audiojohto

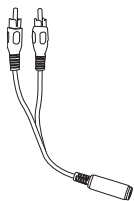

RCA-adapteri

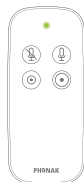

Kaukosäädin


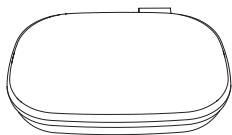


Säilytyskotelo

3. Aloitusopas

3.1 Lataaminen

Ladataksesi Roger Table Mic II -kokousmikrofonin, liitä toimitussisältöön kuuluva laturi laitteen latausliittimeen. Mikrofonin merkkivalo välkkyi ladattaessa vihreänä ja muuttuu jatkuvasti palavaksi vihreäksi, kun akku on täynnä. Tyhjän akun lataaminen kestää n. 4 tuntia.

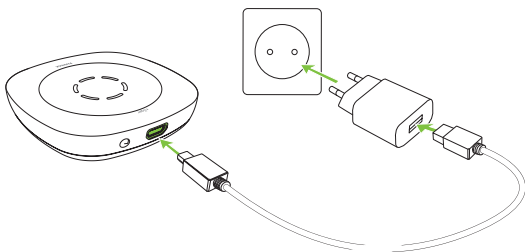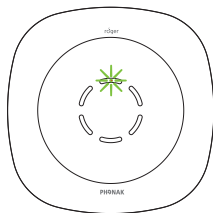

1. Kytke latausjohdon pienempi pää Roger -mikrofoniin.

2. Kytke latausjohdon isompi pää virtalähteeseen.

3. Kytke virtalähde pistorasiaan.

Ladataksesi kahta mikrofonia yhdellä virtalähteellä, käytä toimitussisältöön kuuluvaa haarajohtoa.

i Käytä haarajohtoa ainoastaan toimitussisältöön kuuluvan virtalähteen kanssa. Kahden laitteen lataamista tietokoneen USB -liitännästä ei tueta.

Merkkivalo antaa seuraavaa tietoa mikrofonia ladatessa:

Merkkivalo (latauksen tila)




Lataus käynnissä



Lataus valmis

3.2 Virran kytkeminen

Roger Table Mic II käynnistetään painamalla  virtakytkintä sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.

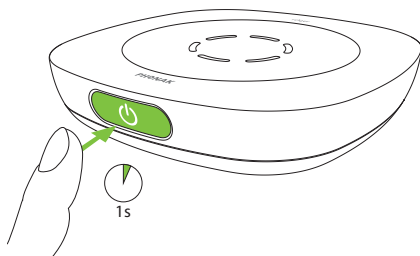

Kun Roger Table Mic II on päällä, merkkivalo vilkkuu rauhalliseen tahtiin. Vihreä valo merkitsee, että akku on täynnä ja oranssi, että akku on puolillaan. Mikäli valo alkaa vilkkua punaisena, tulisi akku ladata mahdollisimman pian.




Lataa Roger-mikrofoni.


3.3 Roger-vastaanottimien yhdistäminen

Roger Table Mic II saattaa olla jo yhdistetty vastaanottiin, mutta mikäli näin ei ole, toimitaan seuraavan ohjeen mukaan:

1. Varmista, että sekä Roger-mikrofonin että -vastaanottimen virta on päällä. Pidä Roger-mikrofonia enintään 10 cm:n päässä Roger-vastaanottimesta.

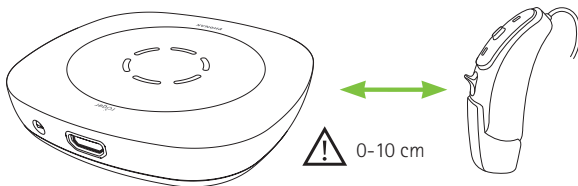

2. Paina Roger-mikrofonin  yhdistämisnäppäintä.

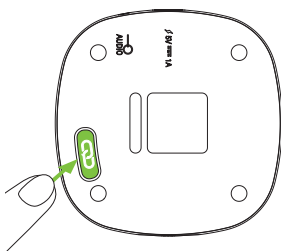

Merkkivalo palaa vihreänä kahden sekunnin ajan, kun yhdistäminen onnistuu. Tämän lisäksi kuulokojeista kuuluu merkkiäni.

i Roger-mikrofoniin voidaan yhdistää rajaton määrä Roger-vastaanottimia.

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Yhdistämisnäppäimen  painamisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:

	Sininen vilkkuu: Yhdistäminen käynnissä
	Vihreä palaa: Yhdistäminen onnistui – Roger-vastaanotin on yhdistetty Roger-mikrofoniin.
	Punainen vilkkuu nopeasti pari kertaa: Roger-mikrofoni ei löytänyt yhtään Roger-vastaanotinta. Siirrä se lähemmäksi Roger-vastaanotinta ja varmista, että vastaanotin on päällä. Tämän jälkeen yritä yhdistää uudelleen.
	Punainen vilkkuu hitaasti muutaman kerran: Roger-vastaanotin ei ole yhteensopiva Roger-mikrofonin kanssa.

3.4 Kaukosäätimen yhdistäminen

Kaukosäädin on yhdistetty Roger Table Mic II -kokousmikrofoniin jo tehtaalla. Tarvittaessa kaukosäätimen voi yhdistää myös useampaan mikrofoniin.

1. Paina kaukosäätimen mitä tahansa näppäintä ja pidä sitä painettuna.
2. Käynnistä Roger Table Mic II painamalla sen virta-kytkintä . Mikrofonin merkkivalo välähtää neljästi violettina merkiksi onnistuneesta yhdistämisestä.
3. Vapauta painettuna oleva kaukosäätimen näppäin.

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Kaukosäätimen yhdistämisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:




Violetti välähtää neljästi:
Kaukosäätimen yhdistäminen
onnistui.

4. Roger Table Mic II -kokousmikrofonin käyttö

Roger Table Mic II on monipuolinen ja älykäs laite. Se tunnistaa missä tilanteessa käyttäjä on ja säätää toimintaansa automaattisesti, tarjoten näin parasta mahdollista puheen ymmärtämistä kokoustilanteessa.

4.1 Kuuleminen paremmin kokouksissa

Mikrofoni asetetaan keskelle pöytää, jolloin kuullaan eri puolilla pöytää istuvien ihmisten puhe.

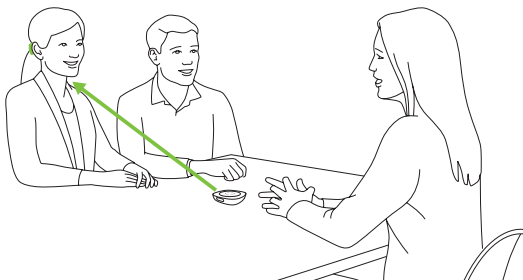


- ❗ Parhaan mahdollisen puheen ymmärtämisen saavuttamiseksi, on vältettävä asettamasta mikrofonia esimerkiksi videoprojektorin tai tietokoneen läheisyyteen.

4.2 Liittäminen audiolaitteisiin

Roger Table Mic II voidaan liittää mihin tahansa äänilähteeseen, kuten konferenssipuhelimeen tai tietokoneeseen. Näin kyseisten laitteiden ääni kuullaan suoraan kuulokojeilla.

1. Kytke audiojohdon toinen pää mikrofonin audioliittimeen.
2. Kytke toinen pää äänilähteen.

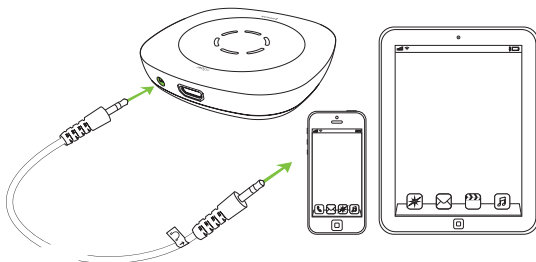

① Kun äänilähde laitetaan päälle, Roger Table Mic II huomaa tämän ja mykistää oman mikrofoninsa automaattisesti.


5. Lisämikrofonien lisääminen

Roger-teknologia mahdollistaa useiden mikrofonien käyttämisen samanaikaisesti. Tämä tapahtuu yhdistämällä useita Roger-mikrofoneja keskenään.

5.1 Lisämikrofonien yhdistäminen

Toisen mikrofonin yhdistäminen Roger Table Mic II -kokousmikrofoniin:

1. Kytke molempiin mikrofoneihin virta.
2. Aseta mikrofonit lähelle toisiaan (enintään 10 cm:n etäisyydelle).

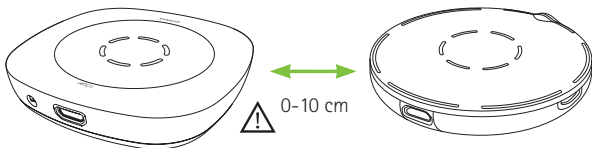

3. Paina kokousmikrofonin  yhdistämisnäppäintä. Molempien mikrofonien merkkivalo palaa vihreänä kahden sekunnin ajan merkinä onnistuneesta yhdistämisestä.

① Jos halutaan yhdistää Roger Select ja Roger Table Mic II, tulee painaa Roger Selectin yhdistämisnäppäintä.

Merkkivalo (yhdistämisen tila)

Yhdistämisnäppäimen  painamisen jälkeen merkkivalo ilmaisee seuraavat asiat:



Vihreä palaa: Yhdistäminen onnistui – Roger-mikrofonit on yhdistetty toisiinsa.



Punainen vilkkuu nopeasti pari kertaa: Roger-mikrofoni ei löytänyt toista mikrofonia. Siirrä mikrofonit lähemmäksi toisiaan ja varmista, että ne ovat päällä. Tämän jälkeen yritä yhdistää uudelleen.




Punainen vilkkuu hitaasti muutaman kerran: Roger-mikrofoni ei ole yhteensopiva Roger Table Mic II -kokousmikrofonin kanssa. Päivitä mikrofonin ohjelmisto Roger Upgrader -ohjelmalla tai ole yhteydessä kuuloalan ammattilaiseen.

5.2 Lisämikrofonien käyttö

Roger Table Mic II -kokousmikrofonit asetetaan pöydälle, jotta sen ympärillä istuvien henkilöiden puhe kuullaan mahdollisimman hyvin. Muita Roger-mikrofoneja voidaan antaa puhujille, joita halutaan kuunnella. On tärkeää varmistaa, että mikrofonit asetetaan riittävän lähelle (enintään 20 cm) puhujan suuta.

Roger-mikrofonit tunnistavat automaattisesti, koska niitä käyttävä henkilö puhuu ja lähettävät puheen välittömästi kuulijan kuulokojeisiin.

Jos joku puhujista haluaa hetkellisesti poistua ryhmästä, hän voi mykistää mikrofoninsa painamalla lyhyesti virtakytkintä.

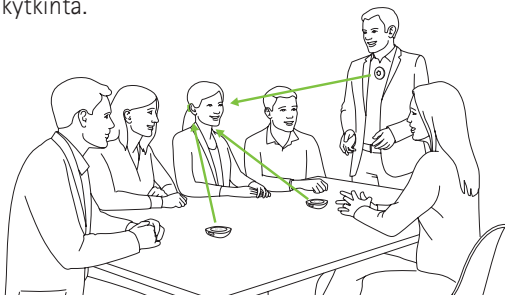

❗ Jos yhteydessä on ongelmia, tulee painaa jonkun mikrofonin yhdistämisnäppäintä  , että verkko saadaan uudelleen käyttöön.

Merkkivalo (lisämikrofonien tila)

Useita Roger-mikrofoneja käytettäessä merkkivalot antavat seuraavia tietoja:



Jatkuva violetti valo: Roger-mikrofoni on mykistetty. Poista mykistys painamalla virtakytkintä  tai kaukosäätimen mykistyksen poisto-näppäintä.




Vilkkuva sininen valo: Roger-mikrofoni ei löydä toisia mikrofoneja. Paina yhdistämisnäppäintä  ottaaksesi yhteyden uudelleen käyttöön.

6. Erikoistoiminnot

6.1 Mikrofonin mykistäminen

Mikrofonin mykistäminen on hyödyllistä etenkin taukojen aikana tai jos halutaan keskittyä vain yhteen puhujaan.

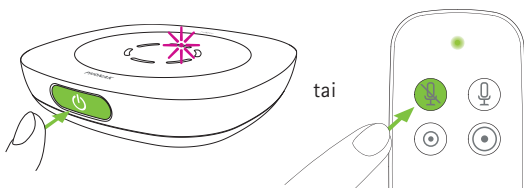

1. Paina lyhyesti virtakytkintä  tai kaukosäätimen mykistys päälle -näppäintä mykistääksesi Roger-mikrofonin. Kun laite on mykistetty, merkkivalo palaa violettina.
2. Poista mykistys painamalla uudestaan virtakytkintä tai kaukosäätimen mykistys pois -näppäintä.

❶ Kaukosäädin mykistää kaikki kokousmikrofonit, jotka siihen on yhdistetty.

6.2 Poimintaetäisyyden muuttaminen


Mikäli vaimeat ja/tai etäältä tulevat äänet häiritsevät, voidaan mikrofoniin poimintaetäisyyttä pienentää kaukosäätimellä.

Paina etäisyys -näppäimiä vaihtaaksesi laajan ja pienen poimintaetäisyyden välillä.

i Poimintaetäisyys palautuu aina laajaksi, kun mikrofoni on sammutettu ja käynnistetään uudelleen.

6.3 Roger -laitteiden yhteyden katkaiseminen (NewNet)

Roger Table Mic II -kokousmikrofonin yhteys mihin tahansa Roger-vastaanottimeen tai -mikrofoniin voidaan katkaista painamalla yhdistämisnäppäintä  7 sekunnin ajan.

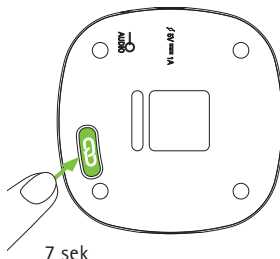

Kun yhteys kaikkiin laitteisiin on katkaistu, merkkivalo muuttuu oranssiksi. Tämän jälkeen voidaan taas yhdistää Roger-vastaanottimia ja -mikrofoneja käytössä olevaan Roger-mikrofoniin.

Nollaus

Jos Roger Table Mic II lakkaa toimimasta, eikä reagoi näppäinten painamiseen, se voidaan "nollata" painamalla virtakytkintä  ja yhdistämisnäppäintä  samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

7. Vian etsintä

Ongelma	Todennäköisin syy
Roger Table Mic II ei käynnisty.	Akku on tyhjä.
Puhe ei erotu kunnolla.	Mikrofoni on asetettu väärin. Mikrofoniaukot on peitetty.
Puhujan ääntä ei kuulu, vaikka Roger Table Mic II on päällä.	Mikrofoni on mykistetty. Kuulokoje ei ole oikealla ohjelmalla. Roger-vastaanottimia ei ole yhdistetty Roger-mikrofoniin. Roger Table Mic II oli osana verkkoa.
Ääni häviää toistuvasti.	Roger-mikrofonin ja -vastaanottimen välinen etäisyys on liian suuri. Roger-mikrofonin ja -vastaanottimen välissä on esteitä.
Ulkoisen äänilähteen äänen-voimakkuus on liian matala.	Äänenvoimakkuus on säädetty väärin.

Ratkaisu

Lataa mikrofonia vähintään neljä tuntia.

Siirrä mikrofoni lähemmäs puhujaa.

Varmista, että mikrofoniauukkoja ei ole peitetty eikä niissä ole likaa.

Tarkista merkkivalo – jos se on violetti, paina virtakytkintä lyhyesti poistaaksesi mykistys.

Tarkista, että kuulokoje on päällä ja käyttää oikeaa ohjelmaa.

Vie Roger-mikrofoni yksitellen jokaisen vastaanottimen viereen ja paina yhdistämisnäppäintä.

Paina yhdistämisnäppäintä.

Siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan.

Varmista, että laitteiden välillä on näköyhteys.

Lisää äänilähteen äänenvoimakkuutta.

Ongelma

Ulkoisen äänilähteen ääni ei kuulu lainkaan.

Roger Table Mic II on päällä, mutta sen merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Roger Table Mic II –merkkivalo vilkkuu punaisena (kaksi välähdystä).

Roger Table Mic II ei toimi.

Roger Table Mic II ei yhdisty toisiin Roger-mikrofoneihin.

Kaukosäädin ei toimi.

Todennäköisin syy

Äänilähde on mykistetty.

Roger Table Mic II on mykistetty.

Roger Table Mic II on yhdistetty äänilähteeseen audiojohdolla, mutta se ei ole päällä.

Roger Table Mic II oli osana verkkoa.

Akku on lähes tyhjä.

Ohjelmisto-ongelma.

Laitteiden ohjelmistot eivät ole yhteensopivia.

Mikrofoni ei ole päällä.

Mikrofoni on liian kaukana.

Mikrofonien verkko on "hajonnut".

Paristo on tyhjä.

Ratkaisu

Poista äänilähteen mykistys.

Poista mikrofonin mykistys.

Käynnistä mikrofoni kuunnellaksesi äänilähteen ääntä.

Paina yhdistämisnäppäintä.

Lataa mikrofoni mahdollisimman pian.

"Nollaa" mikrofoni painamalla samanaikaisesti virtakytkintä ja yhdistämisnäppäintä 10 sekunnin ajan.

Päivitä kaikki Roger-mikrofonit Roger Upgrader -ohjelmalla.

Varmista, että molemmat laitteet ovat päällä.

Siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan.

Paina jonkin mikrofonin yhdistämisnäppäintä verkon uudelleen käyttöön ottamiseksi.

Vaihda paristo (CR2032).

8. Huolto ja takuu

8.1 Takuu

Phonak antaa Roger-laitteille valmistajan rajoitetun kahden vuoden takuun. Tämä takuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaaliviat ja se on voimassa laitteen ostopäivästä alkaen.

8.2 Rajoitukset

Takuu ei kata huolimattomasta käsittelystä, altistuksesta kemikaaleille tai kastumisesta johtuvia vikoja. Mikäli Roger-laitteita vaurioitetaan huollon yhteydessä Phonakin valtuuttamattomassa huoltopisteessä, takuu raukeaa kokonaan.

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

Valtuutettu kuuloalan ammattilainen (leima/allekirjoitus):



9. Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova Communications AG vakuuttaa, että tämä tuote täyttää radiolaitteille asetetut direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavissa valmistajalta, paikalliselta Phonak-edustajalta tai sivulta www.phonak.com.

Toimintataajuus: 2400 – 2483.5 MHz

Tehokkuus: < 100 mW

Australia/Uusi-Seelanti:



R-NZ

Ilmaisee laitteen yhteensopivuuden sovellettavien radiotaajuuksien hallinnan (RSM) ja Australian viestintä- ja mediaviranomaisen (ACMA) sääntöjen kanssa laitteen myymiseksi laillisesti Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Yhteensopivuustunnus R-NZ on tarkoitettu Uuden-Seelannin markkinoille toimitetuille, vaatimustenmukaisuustason A1 radiotaajuuslaitteille.

Huomautus 1:

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15 ja Industry Canadan RSS-normeja. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

- 1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- 2) Laitteen on kestettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien tahattomia toimintoja aiheuttavat häiriöt.

Huomautus 2:

Tämän laitteen muutokset tai muokkaukset, joita Phonak ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat saada FCC:n tälle laitteelle myöntämän käyttövaltuutuksen raukeamaan.

Huomautus 3:

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC-sääntöjen osan 15 ja Industry Canadan ICES-003:n mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan asuinympäristöasennuksessa. Tämä laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa

haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Siitä ei kuitenkaan ole takeita, ettei häiriöitä esiinny tietyissä tapauksissa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetyksen vastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudestaan, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden korjaamista seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja radio-/televisiovastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite eri pistorasiaan, kuin mihin radio-/televisiovastaanotin on kytketty.
- Ole yhteydessä radion/television jälleenmyyjään tai huoltoon.

Huomautus 4:

Japanin radiolain ja Japanin televiestinnän yrityslainsäädännön vaatimustenmukaisuus. Tämä laite noudattaa Japanin radiolakia (電波法) ja Japanin televiestinnän yrityslainsäädäntöä (電気通信事業法). Laitetta ei saa muokata (muutoin sille myönnetty määritysnumero ei enää kelpaa).

Huomautus 5:

FCC/Industry Canadan lausunto radiotaajuussäteilystä. Tämä laite noudattaa FCC:n määrittämiä raja-arvoja radiotaajuussäteilylle hallitsemattomassa ympäristössä. Tämän radiolähtetimen tulee olla aina vähintään 20 cm:n etäisyydellä muista ihmisistä eikä sitä saa muokata tai yhdistää toiseen antenniin tai lähettimeen.

10. Merkkien selitykset



CE-merkillä Sonova Communications AG vahvistaa, että tämä tuote täyttää kaikki direktiivin 2014/53/EU -vaatimukset.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja huomioida tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.



Kertoo laitteen valmistajan.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.

Käyttö- olosuhteet

Tämä laite on suunniteltu niin, että se toimii ongelmitta, kun sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti, ellei tässä ohjeessa toisin mainita.



Australian sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja radioviestinnän yhteensopivuustunnus.



Käyttölämpötilarajat: 0°C ... +45°C. Varastointilämpötilarajat: -10°C ... +60°C.



Ilmankosteusrajat kuljetukseen: Enintään 90%. Ilmankosteusrajat säilytykseen: Enintään 70%.



Ilmanpainerajat: 500 – 1100 hPA.



Roskakori, jonka yli on vedetty rasti, merkitsee ettei tätä laitetta saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Käyttämätön tai käytetty laite tulee palauttaa luovuttajalleen hävitettäväksi tai kuntien elektronisten laitteiden kierrätys-/hävityspisteeseen. Käytetyn Roger-laitteen oikeanlainen hävittäminen suojaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

11. Tärkeitä turvallisuustietoja

-  Lue seuraavilla sivuilla esitetyt tiedot ennen kuin käytät Roger-laitteita.

11.1 Varoitukset

-  Pidä tämä laite pienten lasten ulottumattomissa.
-  Kaikki muutokset, joita ei ole hyväksytty Phonakin toimesta, ovat kiellettyjä.
-  Hävitä laite paikallisen jätelain määräysten mukaisesti.
-  Älä käytä laitteita paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttö on kielletty. Mikäli olet epävarma, ole hyvä ja kysy asiaa kyseisen paikan henkilökunnalta.
-  Laitteen käyttäminen lentokoneessa on aina kielletty, ellei koneen henkilökunta erikseen sitä salli.

⚠ Käytä vain Sonova Communications AG:n hyväksymiä tarvikkeita.

⚠ Käytä turvallisuussyistä vain Phonakin latureita tai muita tutkitusti 5 VDC ja väh. 500 mA latureita.

⚠ Älä käytä laitetta räjähdysriskissä tiloissa (kaivoksissa tai teollisuusalueilla, joissa on räjähdysvaara, runsashappisissa ympäristöissä tai paikoissa, joissa käsitellään herkästi syttyviä anestesia-aineita).

⚠ Laitteen avaaminen voi vaurioittaa sitä. Jos kohtaat ongelmia, joita tämän oppaan vian määrittämis -osiossa annetut ohjeet eivät korjaa, ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

11.2 Tietoa tuoteturvallisuudesta

- ① Suojaa laite toistuvilta iskuilta ja tärinältä.
- ① Älä altista laitetta sellaisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka ylittävät tässä käyttöohjeessa annetut käyttöolosuhderajat.
- ① Älä koskaan käytä mikroaaltouunia tai muuta lämmityslaitetta laitteen kuivaamiseen.
- ① Puhdista laite nihkeällä liinalla. Älä koskaan käytä vettä, pesuaineita tai alkoholia tähän tarkoitukseen.
- ① Älä kytke laitteeseen yli kolme metriä pitkää USB- tai audiojohtoa.
- ① Kun laitetta ei käytetä, pidä se sammutettuna ja turvallisessa paikassa.

- ① Suojaa laite liialliselta kosteudelta (kylpeminen, uiminen), kuumuudelta (patteri, auton kojelauta) ja suoralta ihokosketukselta hikoiltaessa (kuntoilu, urheilu).
- ① Röntgensäteily, magneettikuvaus tai tietokonetomografia voivat vaurioittaa laitetta.
- ① Älä käytä liiallista voimaa kytkiessäsi laitteen eri johtoja.
- ① Suojaa laitteen kaikki liittimet ja mikrofoniaukot pölyltä ja lialta.
- ① Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut esimerkiksi putoamisen yhteydessä, ylikuumentunut latauksessa, kastunut tai sen johto/liitin on vaurioitunut.
- ① Laitteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Se voidaan ladata ja käyttää tyhjäksi satoja kertoja, mutta ajan mittaan se kuitenkin kuluu. Akun voi vaihtaa ainoastaan Phonakin valtuuttama henkilö.

11.3 Muuta tärkeää tietoa

- Sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta käyttävien henkilöiden tulee AINA varmistaa omalta lääkäriltään, tai kyseisen laitteen valmistajalta, ENNEN Roger-laitteiden käyttöä, onko niiden käyttö sallittua.
- Laite kerää ja tallentaa sisäistä teknistä tietoa. Kuuloalan ammattilainen voi tarkistaa nämä tiedot laitteiden tarkistamiseksi, mutta niistä on myös hyötyä laitteen optimaalisen käytön opastamisessa.
- Roger-laitteiden digitaalinen signaali on salattu, eikä sitä voida kuunnella muilla, kuin verkkoon yhdistetyillä laitteilla.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-0589-11/V3.00/2021-06/pg © 2018 Sonova AG All rights reserved