


myPhonak Junior 1.3

Käyttöohje

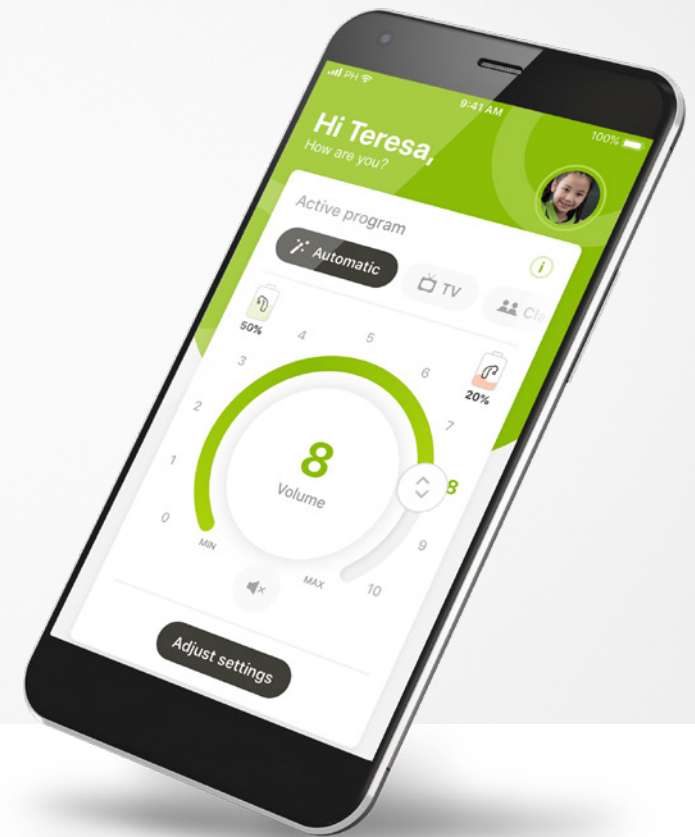

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Käytön aloittaminen

myPhonak Junior -sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Hyödynnä kaikki sovelluksen mahdollisuudet tutustumalla huolellisesti käyttöohjeisiin.

Tässä käyttöohjeessa esitellään myPhonak Junior -sovelluksen ominaisuudet ja niiden käyttötapa. Lisäksi kerrotaan, miten tiettyjen ominaisuuksien käytön voi estää lapsilta lapsilukon avulla, niin että vain vanhemmat voivat käyttää kyseisiä ominaisuuksia. Lue tämä käyttöohje ennen kuin aloitat sovelluksen käytön.

Kognitiivisten kykyjen kehitystaso vaihtelee jopa samanikäisillä lapsilla. Jokaisen lapsen kypsyystaso ja riskitietoisuus on arvioitava yksilöllisesti sen varmistamiseksi, voiko lapsi käyttää myPhonak Junior -sovellusta.

Lisää turvallisuustietoja on luvussa "Tärkeitä turvallisuustietoja" sivulla 16.

Seuraavia suosituksia voidaan käyttää ohjenuorana:

- Sovellusta ei tule käyttää säätöjen tekemiseen alle 6-vuotiaille lapsille.
- Sovellusta ei tule käyttää säätöjen tekemiseen lapselle, ellei lapsi pysty antamaan selkeää palautetta tehdyn muutoksen hyödyistä.
- Tutkimukset ovat osoittaneet, että yli 10-vuotiaat lapset osaavat käyttää sovellusta ilman valvontaa. Kun harkitaan, onko tietty lapsi valmis käyttämään sovellusta ilman valvontaa, on varmistettava, että lapsi pystyy tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kuinka sovelluksen asetukset vaikuttavat hänen kuuloonsa ja tietoisuuteensa ympäristön äänistä.
- Kyky lukea ja ymmärtää varoitusviestejä on olennaisen tärkeä.



Yhteensopivuustiedot:

myPhonak Junior -sovelluksen käyttö vaatii Phonak-kuulokojeita, joissa on Bluetooth®-yhteys.

myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on Bluetooth® low energy (LE) -ominaisuus, ja se on yhteensopiva laitteiden kanssa, joissa on iOS®-versio 14.0 tai sitä uudempi versio. myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2 -versiota ja Android OS 8.0 -versiota tai uudempia versioita.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sonova AG käyttää lisenssillä.

iPhone® on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.


Android on Google LLC:n tavaramerkki.

iOS® on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.

Sisältö

Yleiskatsaus	4
myPhonak Junior -sovelluksen asentaminen	6
Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa	7
Lapsilukko	9
Mukauttaminen	10
Parinmuodostuksen vianmääritys	11
Kaukosäädin	12
Etätuki-istunto	13
Minun kuulokojeeni	15
Tärkeitä turvallisuustietoja	16
Merkkien selitykset	20


Yleiskatsaus – kaukosäädin

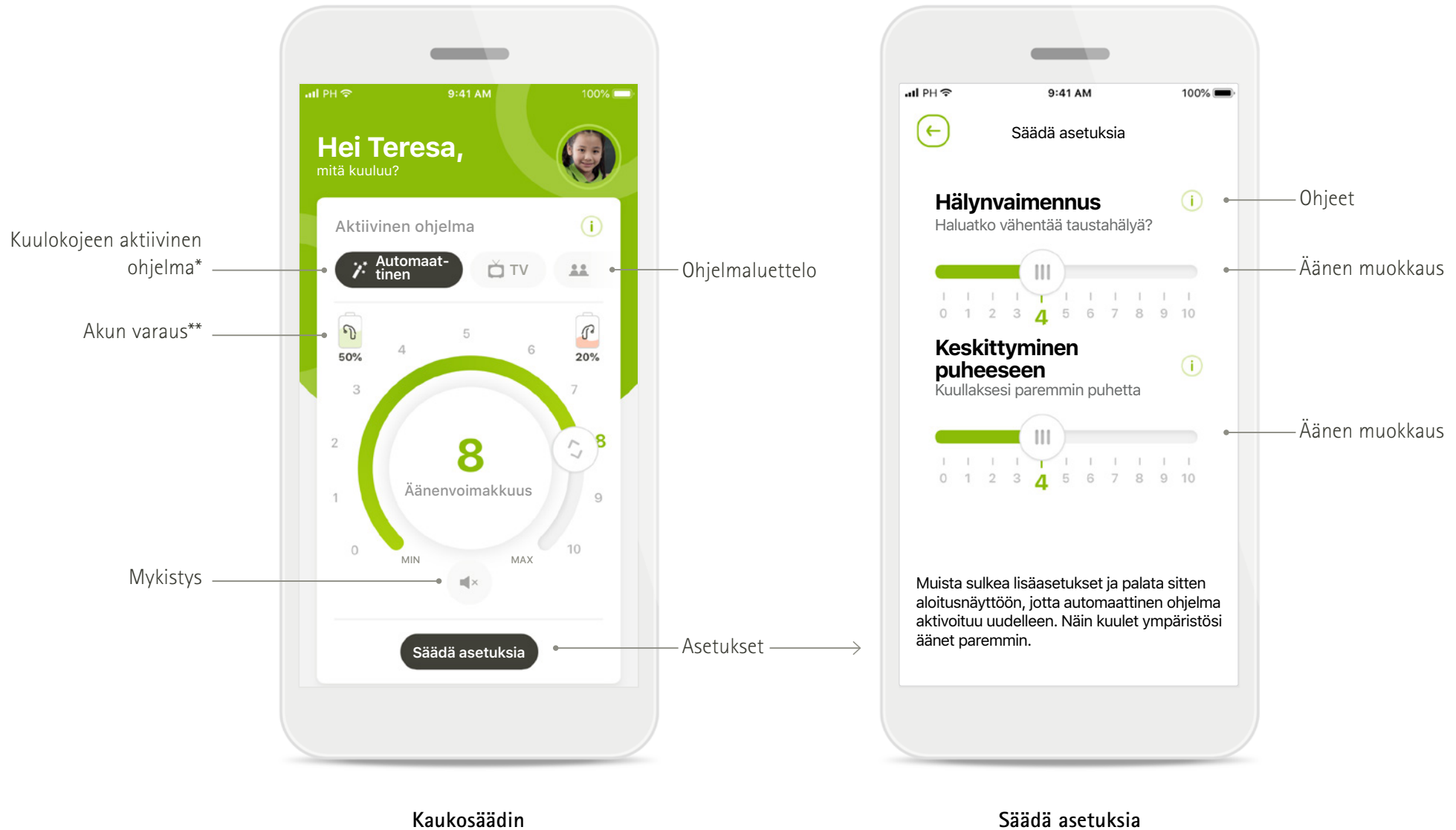


* AutoSense™ Sky OS Sky-kuulokojeille. AutoSense™ OS Bolero-, Naida- ja Audéo-kuulokojeille.

**Vain ladattavissa kuulokojeissa

Yleiskatsaus – etätuki*

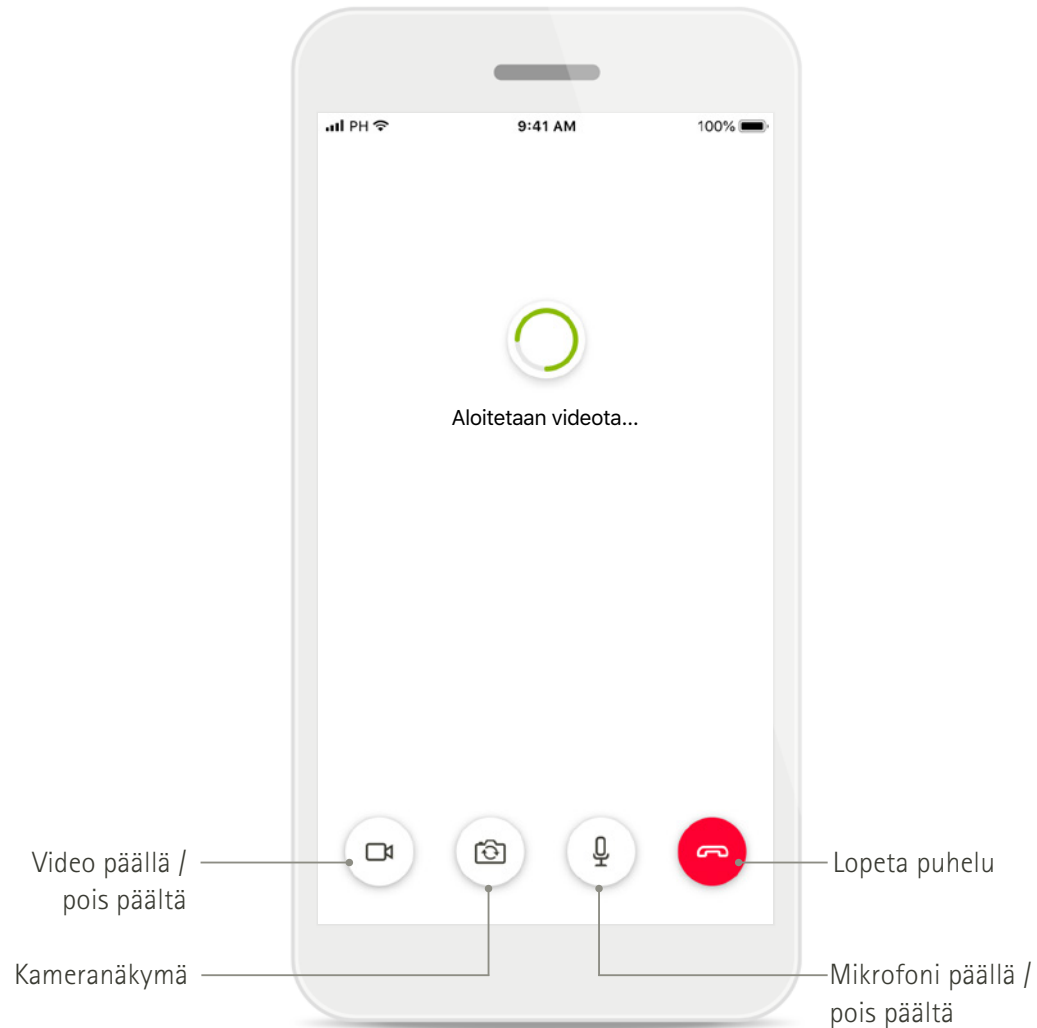

Etätukipuhelu

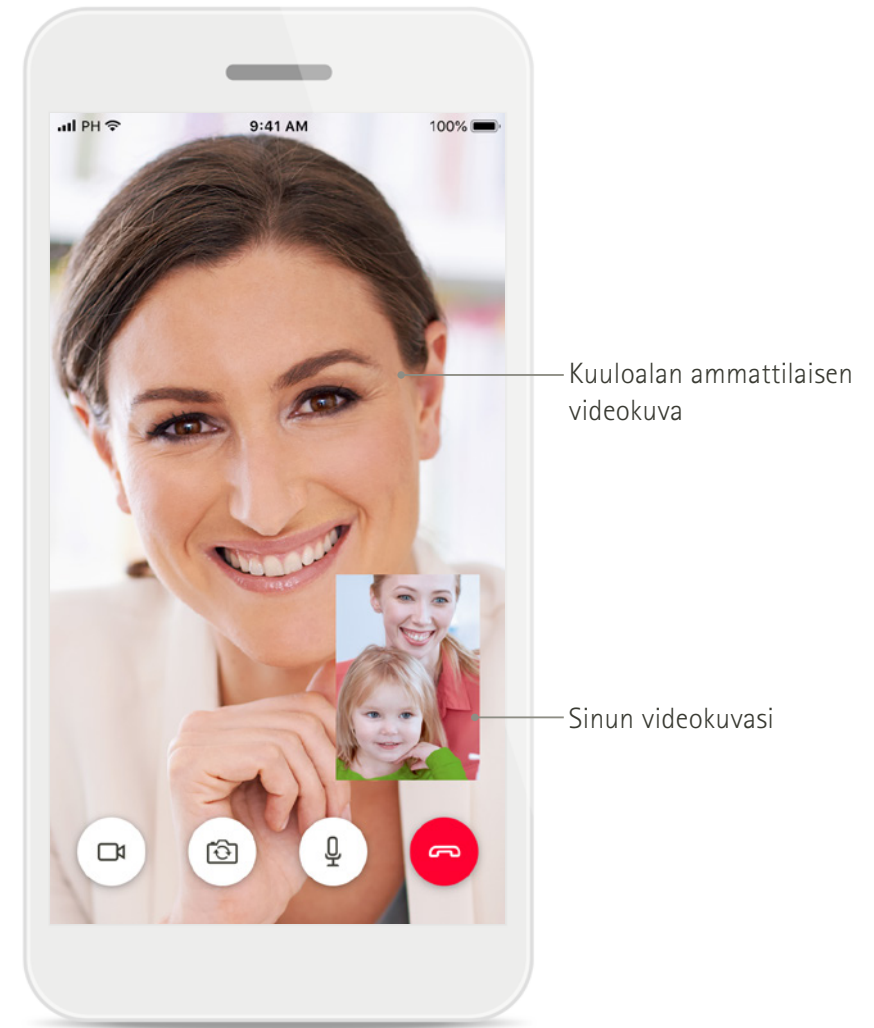


Etätukipuhelu

*Saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta

myPhonak Junior -sovelluksen asentaminen

- Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta
- Ota älypuhelimien Bluetooth käyttöön

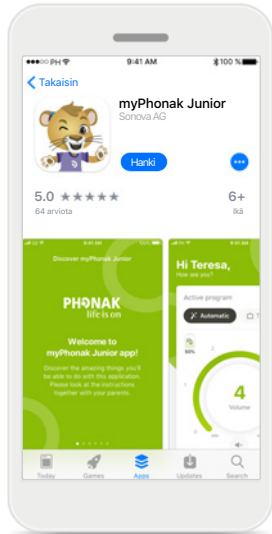

Lataa myPhonak Junior -sovellus

Lataa sovellus sovelluskaupasta. Asennuksen jälkeen avaa myPhonak Junior




Avaa myPhonak Junior

Avaa sovellus ja valitse **Tutustu**.




Tietosuojailmoitus

Jos haluat käyttää sovellusta, sinun on hyväksyttävä Tietosuojailmoitus valitsemalla **Hyväksyn** ennen kuin voit jatkaa.

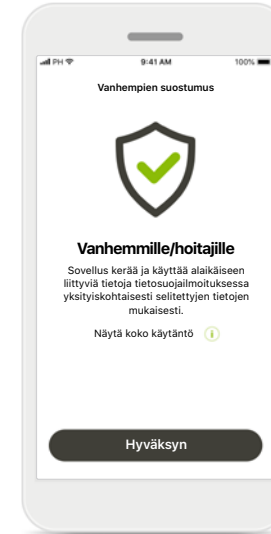

Vanhempien suostumus

Vanhemman tai huoltajan on annettava suostumuksensa sovelluksen käyttöön. myPhonak Junior -sovellus kerää ja käyttää alaikäiseen liittyviä tietoja tietosuojailmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti.

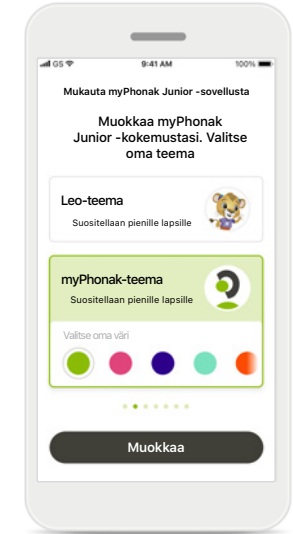


Valitse teema

Vanhemmat, hoitajat tai sovelluksen käyttäjät voivat valita joko Leo- tai myPhonak-teeman. Sovelluksen toiminnot ovat samat molemmissa teemoissa. Teema voidaan valita käyttöönoton aikana tai Oma profiilisi -osiossa.


Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.**

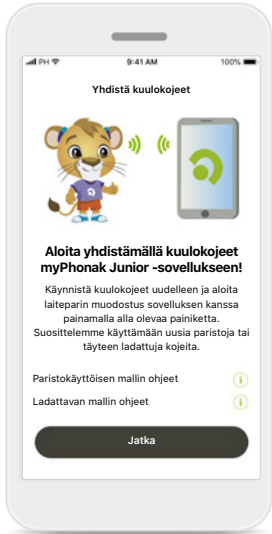


Laiteparin muodostusohjeet

Valitse **Jatka** ja noudata kuulokojeitasi koskevia ohjeita.

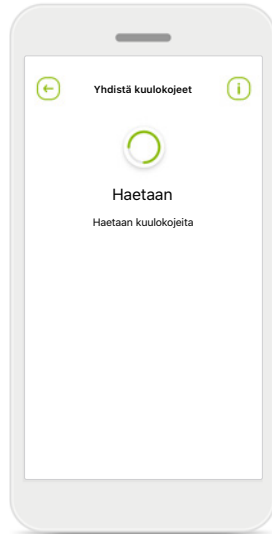


Haetaan

Sovellus hakee yhteensopivia kuulokojeita ja näyttää ne, kun kojeet on havaittu. Tähän saattaa kulua muutama minuutti.

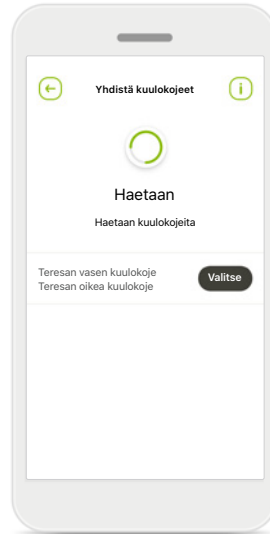


Valitseminen

Napauta **Valitse**-kohtaa, kun kuulokojeesi näkyvät luettelossa.

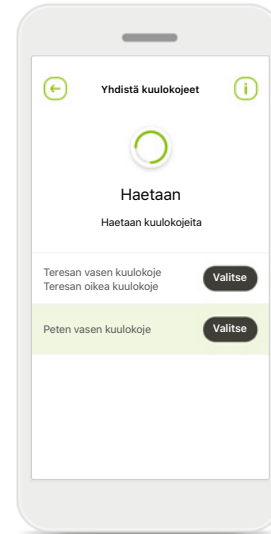

Useita

Jos sovellus havaitsee useita yhteensopivia kuulokojeita, ne näkyvät vastaavasti. Kuulokojeesi näkyy korostettuna, kun painat kuulokojeen painiketta.

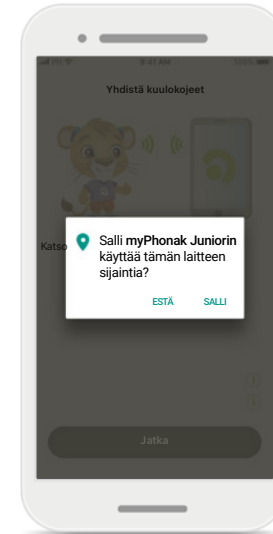

Sijainti


Android-laitteissa on otettava käyttöön Sijaintipalvelut, kun Bluetooth-laitteista muodostetaan laitepari ensimmäisen kerran. Alkuasennuksen jälkeen voit taas poistaa sijaintipalvelut käytöstä.

*Yhteensopiva Sky M-, Sky Link M-, Naida M-, Bolero M-, Audéo M-, Naida P- ja Audéo P -kuulokojeiden kanssa.

**Bluetooth-suoratoisto: Voit suoratoistaa musiikkia tai vastaanottaa puheluita kuulokojeisiin valitsemalla Asetukset > Bluetooth ja lisäämällä kuulokojeet liitettyjen laitteiden luetteloon. Jatka sen jälkeen laiteparin muodostusta palaamalla sovellukseen.

Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.

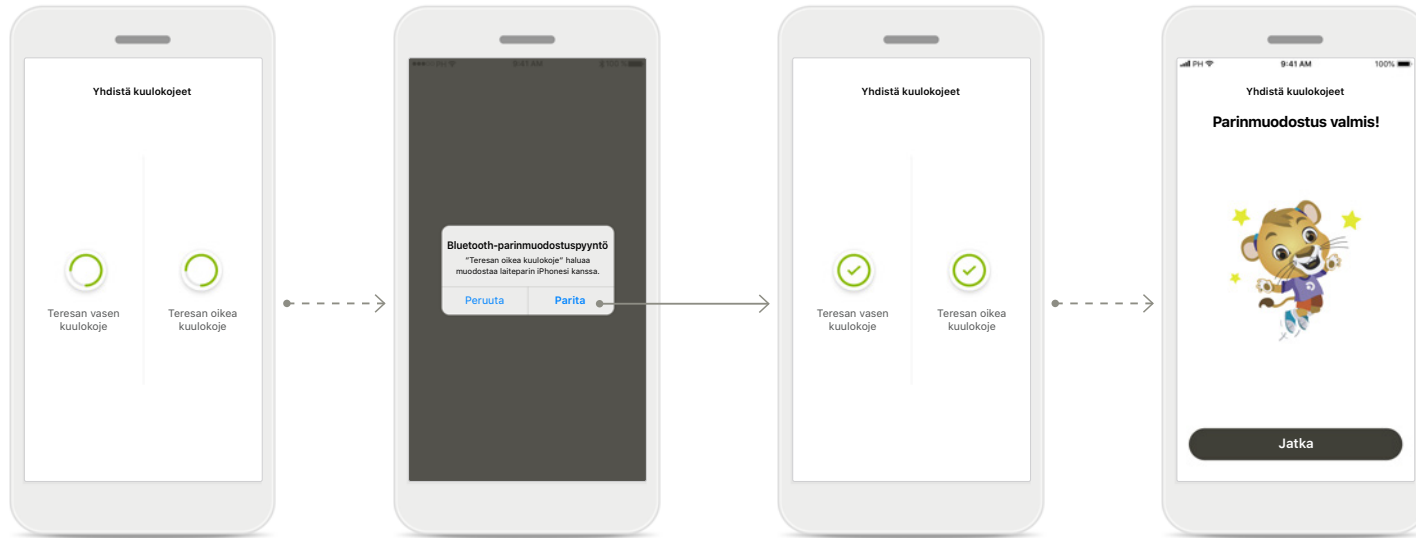

Kuulokojeiden parinmuodostus

Sovellus muodostaa yhteyden kumpaankin kuulokojeeseen erikseen.

Vahvista kaikki kuulokojeet

Kun näet kehotteen, vahvista laiteparin muodostus napauttamalla valintaikkunassa **Parita** erikseen kummankin laitteen kohdalla.

Parinmuodostus valmis

Molemmista kuulokojeista on nyt muodostettu laitepari sovelluksen kanssa. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.


Asennus valmis

Nyt voit käyttää kaikkia sovelluksen yhteensopivia toimintoja. Siirry päänäyttöön valitsemalla **Jatka**.

*Yhteensopiva seuraavien kuulokojeiden kanssa: Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L ja Audéo L.

Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön myPhonak Junior -sovelluksessa noudattamalla alla olevia ohjeita.

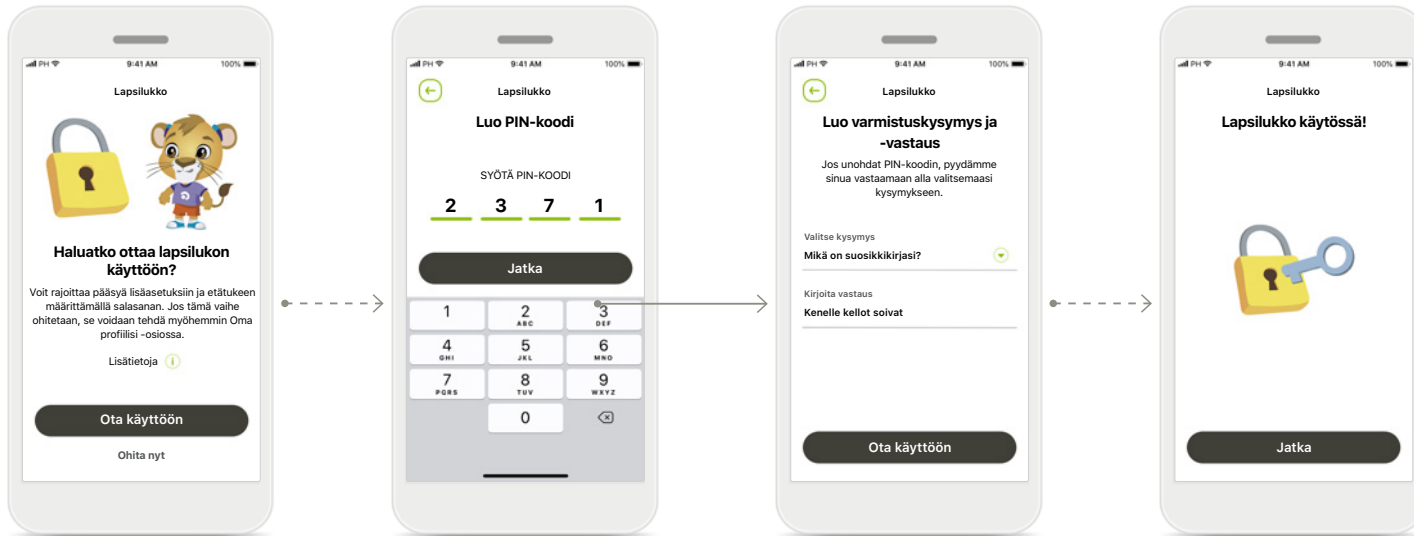

Lapsilukon käyttöönotto

Lapsilukon voi ottaa käyttöön joko sovelluksen käyttöönoton aikana tai myöhemmin vanhemman/ huoltajan valitsemana aikana Oma profiilisi -osiossa. Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa etätuen käyttöä, ladattavien kuulokojen automaattisen käynnistystoiminnon käyttöä ja puheluiden Bluetooth-kaistanleveyden valintaa.

Luo PIN-koodi

Määritä 4-numeroinen PIN-koodi lapsilukon ottamiseksi käyttöön. PIN-koodin voi vaihtaa tai palauttaa milloin tahansa vanhemman/huoltajan valitsemana ajankohtana.

Varmistuskysymys


Valitse varmistuskysymys ja kirjoita siihen oikea vastaus. Jos unohdat 4-numeroinen PIN-koodisi, pääset rajoitettuihin toimintoihin vastaamalla tähän kysymykseen.

Lapsilukko käytössä

Kun olet valinnut varmistuskysymyksen ja kirjoittanut vastauksen siihen, voit ottaa lapsilukon käyttöön. Lapsilukko voidaan myös poistaa käytöstä sovelluksen valikossa, jos sitä ei tarvita.


Mukauttaminen

Jos haluat käyttää myPhonak Junior -sovelluksen mukautusasetuksia, noudata alla olevia ohjeita.

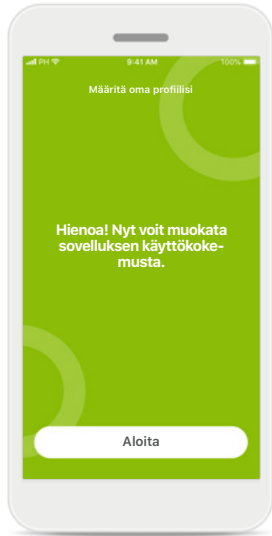


Aloita mukauttaminen

Voit aloittaa mukauttamisen joko käyttöönoton aikana tai myöhemmin aloitusnäytön Oma profiilisi -osiesta.

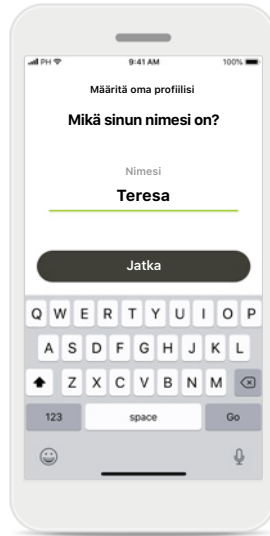


Käyttäjaprofiilin nimi

Valitse käyttäjänimi.

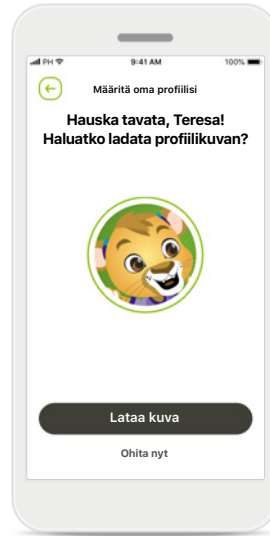

Käyttäjaprofiilin kuva

Valitse profiilikuva. Tämä vaihe voidaan ohittaa ja tehdä myöhemmin Oma profiilisi -osiossa.

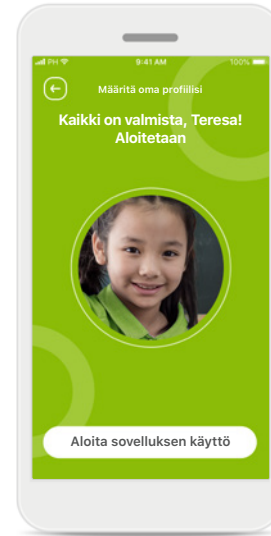


Lisäasetukset

Mukautusasetuksiin kuuluvat myös sovelluksen taustaväriteeman vaihtaminen sekä virtuaalisten kuulokojeiden ja kourun värin vaihtaminen.

Parinmuodostuksen vianmääritys


Mahdollisia virheitä laiteparin muodostusprosessin aikana. Lisätietoja vianmäärityksestä saat Phonakin tukisivulta.

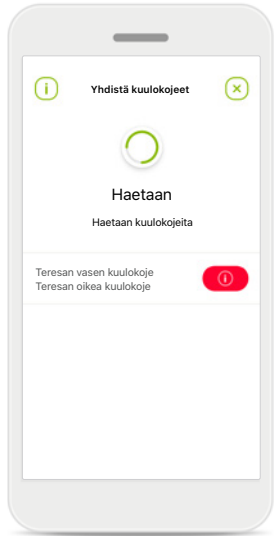

Laitteet eivät ole yhteensopivat.

Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä laitteisiin, koska ne eivät ole yhteensopivia sovelluksen kanssa.


Pyydä kuuloalan ammattilaiselta lisätietoja.

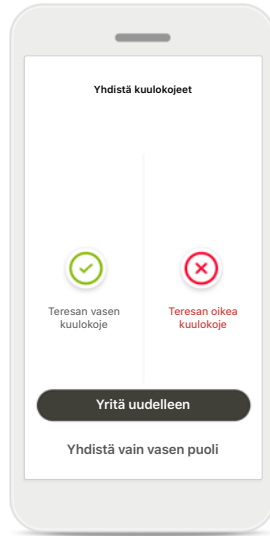

Kuulokojeen yhteysvirhe

Jos laiteparin muodostaminen toisen kuulokojeista kanssa epäonnistuu, voit toimia toisella seuraavista tavoista:

1. Napauta **Yritä uudelleen** parinmuodostusprosessin käynnistämiseksi uudelleen.
2. Jatka vain toisen kuulokojeen kanssa.

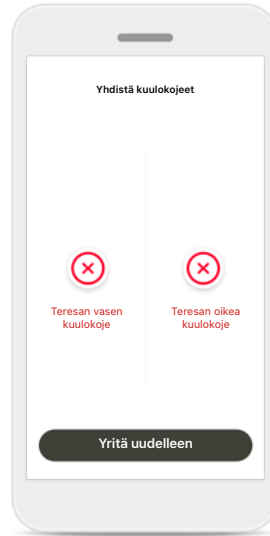


Yhteyden muodostus molempiin kuulokojeisiin epäonnistuu

Napauta **Yritä uudelleen** parinmuodostusprosessin käynnistämiseksi uudelleen ja noudata ohjeita.

Kaukosäätimen päänäyttö

Toiminnot, joita voi käyttää kaikille kuulokojeille.

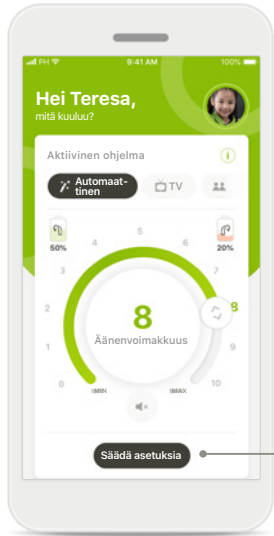


Kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pyöräliukusäätimellä.

Aktiivisen ohjelman vaihtaminen


Napauttamalla jotain käytettävissä olevista ohjelmista voit säätää kuulemistä tietyn kuunteluympäristön mukaan. Käytettävissä olevat ohjelmat riippuvat siitä, miten kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeet.

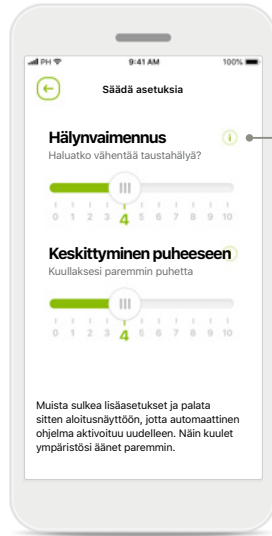


Säädä asetuksia


Asetusnäelmästä pääset seuraaviin toimintoihin:

- Hälynvaimennus
- Keskittyminen puheeseen

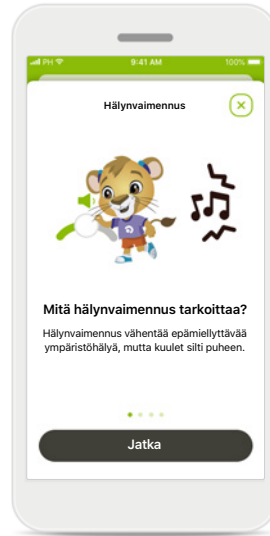

Tietoja

Saat enemmän tietoja eri toiminnoista painamalla .

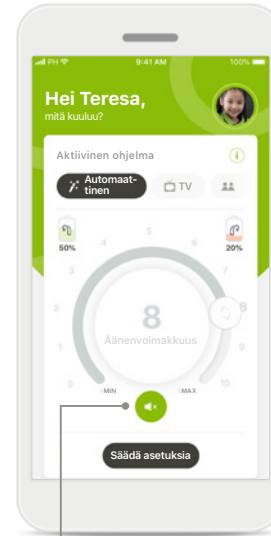

Mykistys

Voit mykistää kuulokojeet painamalla **Mykistys**-kuvaketta.




Akun alhainen varaustila

Jos akun varaustila on alle 20 %, kuvake muuttuu punaiseksi. Lataa kuulokojeesi pian.


Etätuki-istunto

Jos käytät mobiilidataa, operaattorisi saattaa laskuttaa siitä. Tarkista asia operaattoriltasi ennen Phonak-etätukipuhelun aloittamista. 10 minuutin etätukivideopuhelu kuluttaa noin 56 Mt dataa, kun taas pelkkään äänipuheluun kuluu noin 30 Mt.

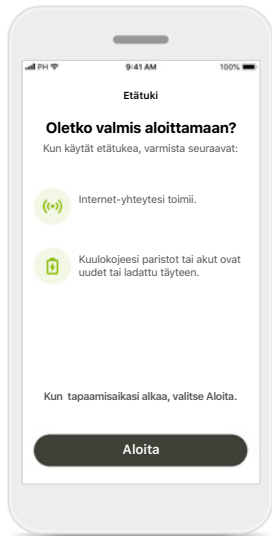


Etätukipuhelun aloittaminen

Kun tapaamisaikasi alkaa, avaa myPhonak Junior -sovellus ja valitse **Aloita**, niin kuuloalan ammattilainen saa tiedon siitä, että olet valmiina Phonak-etätukipuheluun.

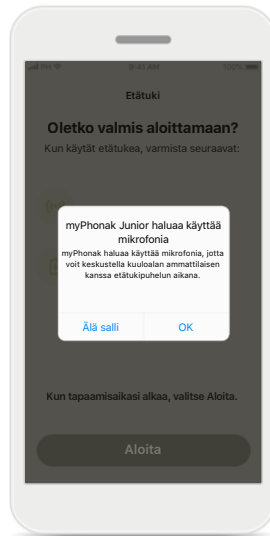


Kameran ja mikrofonin käyttäminen

Salli myPhonak Junior -sovelluksen käyttää kameraasi ja mikrofoniasi valitsemalla **OK**.

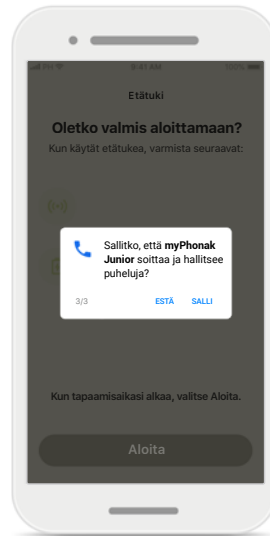

myPhonak-puhelujen salliminen

Jos sinulla on Android-älypuhelin, salli myPhonak Junior -sovellukselle puhelujen soittaminen ja hallintavalitsemalla **SALLI**.

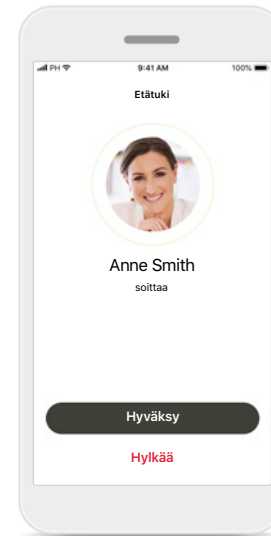


Videopuhelujen hyväksyminen


Sovellus muodostaa yhteyden kuuloalan ammattilaiseen. Hyväksy kuuloalan ammattilaisen puhelu valitsemalla **Hyväksy**.

Etätuki-istunto


Voit halutessasi tehdä etätukipuhelustasi yksilöllisemmän ottamalla videokuvan tai äänen käyttöön tai poistamalla sen käytöstä.

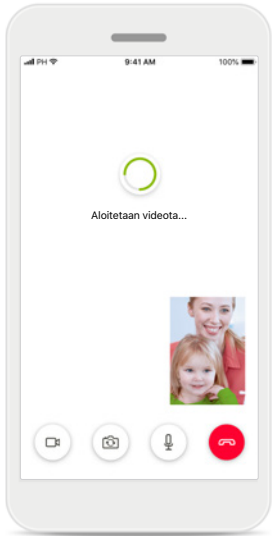


Videopuhelun aloittaminen
Muutaman sekunnin kuluttua videoyhteys on määritetty ja näet kuuloalan ammattilaisen.

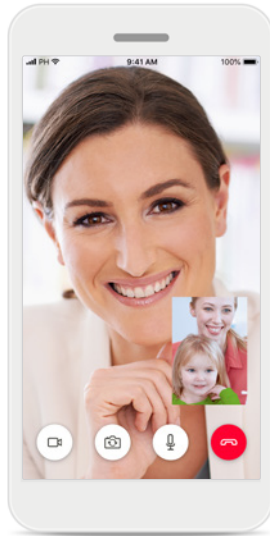


Käynnissä oleva puhelu
Sinulla on nyt yhteys kuuloalan ammattilaiseen.

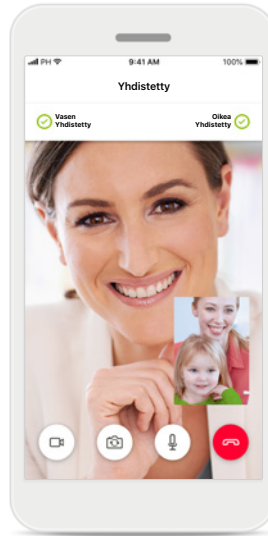

Yhdistetyt kuulokojeet
Jos kuuloalan ammattilaisen on muodostettava yhteys kuulokojeisiisi, se voidaan tehdä etänä älypuhelimesi avulla.
Kuuloalan ammattilainen kertoo sinulle, kun hän muodostaa yhteyden kuulokojeisiisi.

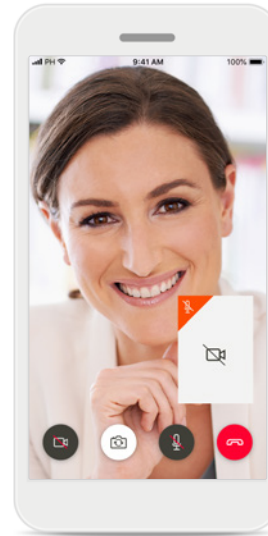



Ei videokuvaa
Jos haluat piilottaa oman videokuvasi, voit ottaa videokuvan pois käytöstä yhdellä napautuksella.

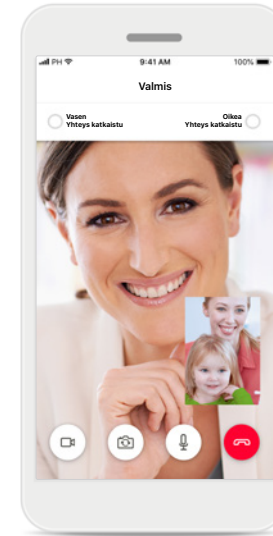


Uudet asetukset tallennettu
Kuulokojeesi mykistetään hetkeksi yhteyden muodostamisen aikana ja kun kuulokojeesi asetuksia tallennetaan. Näet prosessin tilan näytöllä.

Minun kuulokojeeni


Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

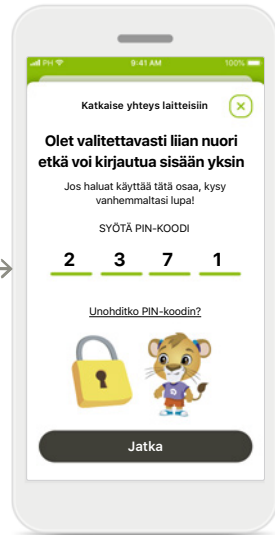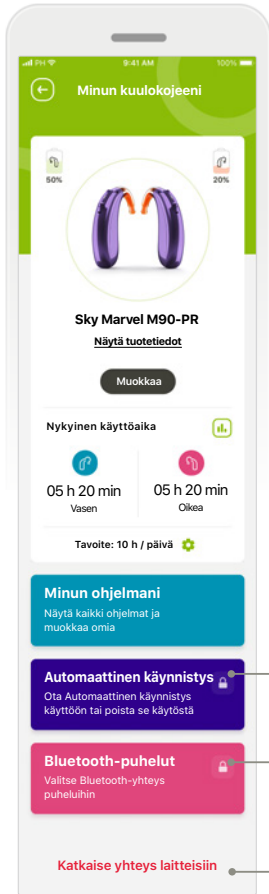


Lapsilukko
Lapsilukko estää pieniä lapsia katkaisemasta kuulokojeidensa yhteyttä vahingossa.

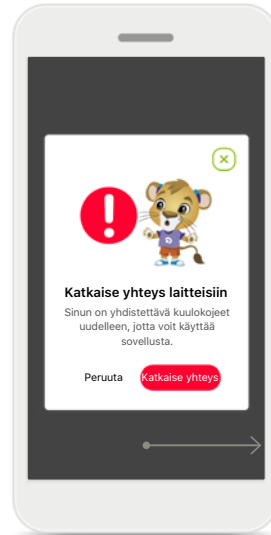

Katkaise yhteys laitteisiin
Voit katkaista kuulokojeidesi yhteyden valitsemalla **Katkaise yhteys**. Huomioi, että jos teet niin, sinun on muodostettava kuulokojeistasi laitepari uudelleen, jotta voit käyttää sovellusta.

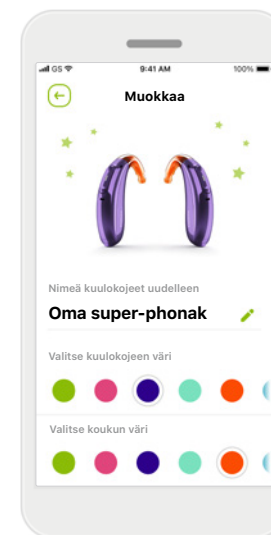

Mukauttaminen*
Kuulokojeen ja koulun väriä sekä sovelluksessa näkyvää laitteen nimeä voidaan muuttaa.

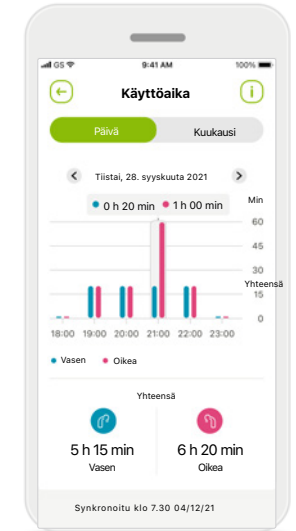

Käyttöaika*
Käyttöaika näyttää yhteenvedon kummankin kuulokojeen päivittäisestä ja kuukausittaisesta käyttöajasta sekä lapsesi kuunteluympäristöjen tyypeistä. Kuulokojeet, joissa on ladattavat akut, antavat eniten tietoja.

Minun kuulokojeeni

Minun kuulokojeeni -näyttö sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat akun tilaa (akuilla varustettujen kuulokojeiden tapauksessa), kuulokojetyyppiä, Roger-lisenssien asennusta, käyttöaikaa, omia ohjelmia, automaattista käynnistystä ja Bluetooth-puheluita. Voit myös mukauttaa kuulokojeiden ulkomuotoa tässä näytössä.

*Vain tietyissä kuulokojeissa

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

Käyttötarkoitus:

Sovellus on erillinen ohjelma, joka on tarkoitettu kuulokojeen asetusten valitsemiseen, määrittämiseen ja tallentamiseen sovitusohjelman alueen sallimissa rajoissa. Sovelluksen avulla kuulokojeiden käyttäjät voivat myös olla yhteydessä ja kommunikoida kuuloalan ammattilaisten kanssa kuulokojeen etäsäättöjä varten.

Tarkoitettu potilasryhmä:

Tämä laite on tarkoitettu vähintään 6-vuotiaille potilaille, joilla on toisessa korvassa tai molemmissa korvissa kuulonalenema, jonka aste voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan.

Tarkoitettu käyttäjä:

Yhteensopivaa kuulokojetta käyttävä henkilö, jolla on kuulonalenema, sekä hänen huoltajansa tai hoitajansa.

Kaikkien sovellusversioiden käyttöohje kaikilla saatavilla kielillä on luettavissa sähköisessä muodossa verkkosivustolla. Voit lukea käyttöohjeet toimimalla seuraavasti:

- Napsauta linkkiä <https://www.phonak.com/en-int/support> ja valitse haluamasi maa
- Valitse kohta "Support" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "User Guides" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "Apps" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse "myPhonak Junior app"

myPhonak Junior -sovelluksen käyttöohjeen uusin versio on mahdollista avata myös suoraan sovelluksesta siirtymällä Tuki-osioon ja napauttamalla Käyttöohje-korttia. Käyttöohje avautuu ulkoiseen selainikkunaan.

Tietoturvailmoitus:

Potilastiedot ovat yksityisiä, ja niiden suojaaminen on tärkeää:

- Varmista, että älypuhelimien käyttöjärjestelmään on päivitetty uusimmat turvallisuuspäivitykset. Ota automaattiset päivitykset käyttöön.
- Varmista, että asennettu sovelluksen versio on ajan tasalla.
- Käytä kuulokojeiden kanssa vain virallisista sovelluskaupoista ladattuja aitoja Sonova-sovelluksia.
- Asenna vain luotettavia sovelluksia virallisista sovelluskaupoista.
- Varmista, että käytät vahvoja salasanoja ja pidät tunnistetietosi salaisina
- Lukitse puhelimesi PIN-koodilla ja/tai biometrisellä tunnisteella (esim. sormenjälki- tai kasvotunnistuksella) ja aseta puhelin lukittumaan automaattisesti muutaman minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Varmista, että asennetuilla sovelluksilla on vain tarvittavat käyttöoikeudet.
- Vältä Bluetooth-laiteparin muodostamista kuulokojeiden kanssa julkisella paikalla. Näin vältetään ulkopuolisten tahojen aiheuttamat epätoivotut häiriöt. Bluetooth-laiteparin muodostaminen on suositeltavaa tehdä kotona.
- ÄLÄ käytä puhelinta, johon on tehty luvattomia muutoksia (jailbreikkaus tai roottaus).

Varmista, että tiedot ovat aina turvassa. Huomioi, että tämä luettelo ei ole täydellinen.

- Kun siirrät tietoja riskialttiiden kanavien kautta, lähetä tiedot nimettömästi tai salaa ne.
- Suojaa älypuhelimien tietojen varmuuskopiot paitsi tietojen menetyksen, myös varkauden varalta.
- Poista kaikki tiedot älypuhelimesta, jota et enää käytä tai joka hävitetään.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

Ohjelman ylläpito:

Seuraamme jatkuvasti palautetta, jota saamme markkinoilta. Jos havaitset ongelmia uusimmassa sovellusversiossa, ota yhteyttä paikalliseen valmistajan edustajaan ja/tai anna palautetta App Storessa tai Google Play -kaupassa.

Käyttöaiheet

Huomaa, että käyttöaiheet eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuulokojeiden ja tinnituksen tasapainotuksen yleisiä kliinisiä käyttöaihteita ovat seuraavat:

- kuulonalenema
 - toispuoleinen tai molemminpuolinen
 - konduktiivinen, sensorineuraalinen tai niiden yhdistelmä
 - lievistä erittäin vaikeaan
- krooninen tinnitus (vain kuulokojeet, joissa on Tinnitus Balance -ominaisuus).

Vasta-aiheet

Huomaa, että vasta-aiheet eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuulokojeiden käytön ja Tinnitus Balance -ominaisuuden yleisiä kliinisiä vasta-aihteita ovat seuraavat:

- kuulonalenema ei ole kuulokojeen sovitusalueella (esim. vahvistuksen tai taajuusvasteen osalta)
- akuutti tinnitus
- korvan epämuodostuma (eli umpinainen korvakäytävä, korvalehteä ei ole)
- neuraalinen kuulonalenema (retrokokleaariset patologiat, kuten kuulohieron puuttuminen tai toimimaton kuulohermo)

Ensisijaiset kriteerit potilaan lähettämiseen lääketieteellisen tai muun asiantuntijan vastaanotolle ja/tai hoitoon ovat seuraavat:

- näkyvä synnynnäinen tai trauman aiheuttama korvan epämuodostuma tai aktiivinen neste- tai valuminen korvasta viimeisen 90 päivän aikana
- äkillinen tai nopeasti etenevä kuulonalenema joko toisessa tai molemmissa korvissa viimeisen 90 päivän aikana
- akuutti tai krooninen huimaus
- audiometrinen luu-ilmaväli vähintään 15 dB 500 Hz:n, 1 000 Hz:n ja 2 000 Hz:n taajuuksilla
- näkyviä merkkejä merkittävästä korvavahan kerääntymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä
- kipu tai epämukava tunne korvassa

- tärykalvon ja korvakäytävän poikkeava ulkoasu, kuten
 - ulkoisen kuulokanavan tulehdus
 - reikä tärykalvossa
 - muut poikkeamat, joiden kuuloalan ammattilainen uskoo olevan lääketieteellisesti merkityksellisiä

Kuuloalan ammattilainen voi päättää, että lähete ei sovellu potilaalle tai että se ei ole potilaan parhaan edun mukaista, jos jokin seuraavista pitää paikkansa:

- Kun on olemassa riittävästi näyttöä siitä, että lääketieteen ammattilainen on tutkinut potilaan tilan perusteellisesti ja kaikki mahdollinen hoito on annettu.
- Tila ei ole huonontunut tai muuttunut merkittävästi edellisen tutkimuksen ja/tai hoidon jälkeen.
- Jos potilas on tehnyt tietoisesti ja kykenevästi päätöksen olla kysymättä lääketieteellistä mielipidettä siihen neuvomisesta huolimatta, potilaalle on sallittua suositella asianmukaisia kuulokojejärjestelmiä seuraavien ehtojen mukaisesti:
 - Suositus ei aiheuta mitään haittavaikutuksia potilaan terveydelle tai yleiselle hyvinvoinnille.
 - Rekisteröityjen tietojen mukaan potilaan paras etu on otettu huomioon kaikin mahdollisin tavoin. Jos se on oikeudellisesti tarpeen, potilas on allekirjoittanut vastuuvapauslausekkeen, josta käy ilmi, että hän ei ole noudattanut neuvoa hakea lääketieteellistä mielipidettä ja että kyseessä on tietoinen päätös.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

Käytön rajoitukset

Sovellusta voi käyttää vain yhteensopivien laitteiden mahdollistamiin toimintoihin.

Haittavaikutukset

Huomaa, että haittavaikutukset eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa kuulokojeiden fysiologisten haittavaikutusten, kuten tinnituksen, huimauksen, korvavahan kerääntymisen, liiallisen paineen, hikoilun tai kosteuden, rakkuloiden, kutinan ja/tai ihottumien, tukkoisuuden tai täysinäisyyden ja sen seurausten, kuten päänsäryn ja/tai korvakivun, hoitamisessa tai lieventämisessä. Perinteiset kuulokojeet voivat altistaa potilaat suuremmille äänitasoille, jotka voivat siirtää taajuusvasteen kynnsarvoja, joihin akustinen trauma on vaikuttanut.

Kliininen hyöty

Kliinistä hyötyä ei saada sovelluksesta, vaan yhteensopivista kuulokojeista. Sovellus hyödyttää kohdekäyttäjiä tarjoamalla mahdollisuuden säätää kuulokojeen asetuksia ensisovituksen sallimissa rajoissa.

Sovelluksen avulla kohdekäyttäjät voivat olla kätevästi yhteydessä ja kommunikoida kuuloalan ammattilaisten kanssa kuulokojeen etäsäätöjä varten.

Sovellukseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajan edustajalle ja asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka on suoraan tai välillisesti johtanut tai saattanut johtaa johonkin seuraavista:

- a. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- b. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- c. vakava kansanterveydellinen uhka

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.



Vahvistuksen vähentäminen tai hälynvaimennuksen lisääminen voi heikentää varoitus- tai turvallisuussignaalien kuuluvuutta. Tämä voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.



Jos kuulokojeet eivät vastaa, tarkista, oletko kantamatkan sisällä, ovatko kuulokojeet päällä ja onko paristoissa tai akuissa virtaa. Jos voimakas sähkömagneettinen kenttä saattaa aiheuttaa häiriöitä yhteyteen, siirry pois häiritsevästä kentästä.



Ota Bluetooth käyttöön. Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää kuulokojeet.



Olet itse vastuussa oman älypuhelimesi käytöstä. Käsittele älypuhelimta varovasti ja ole huolellinen sovelluksen käytössä.

Merkkien selitykset



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.




Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää kiinnittää huomiota tässä käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.



CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä Phonak-tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-merkki otettu käyttöön 2021. CE-symbolin perässä olevat numerot vastaavat niiden sertifioitujen laitosten koodia, joita konsultoitin yllä mainittujen direktiivien mukaisesti.

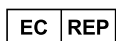

Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä. EY-edustaja on myös Euroopan unionin maahantuoja.



Ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite.



Nimi, osoite, päiväys

Yhdistetty symboli, joka ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan ja valmistuspäivämäärän EU:n asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti.



Ilmaisee, että sähköiset käyttöohjeet ovat saatavissa. Ohjeet ovat saatavissa osoitteesta phonak.com/junior/userguide.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Saksa

Jos haluat ilmaisen paperiversion näistä käyttöohjeista, ota yhteys paikalliseen Sonova-edustajaan. Paperiversio lähetetään seitsemän päivän kuluessa.

V4.00/2023-11/NLG © 2021-2024 Sonova AG All rights reserved

Tämä käyttöohje koskee myPhonak Junior 1.3 -versiota ja myPhonak Junior 1 -sovelluksen myöhempiä versioita.

Sovelluksen käyttöohjeen aiemman version saat ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan tai etsimällä verkkosivulta.

