


# myPhonak Junior 1.2

Käyttöohje

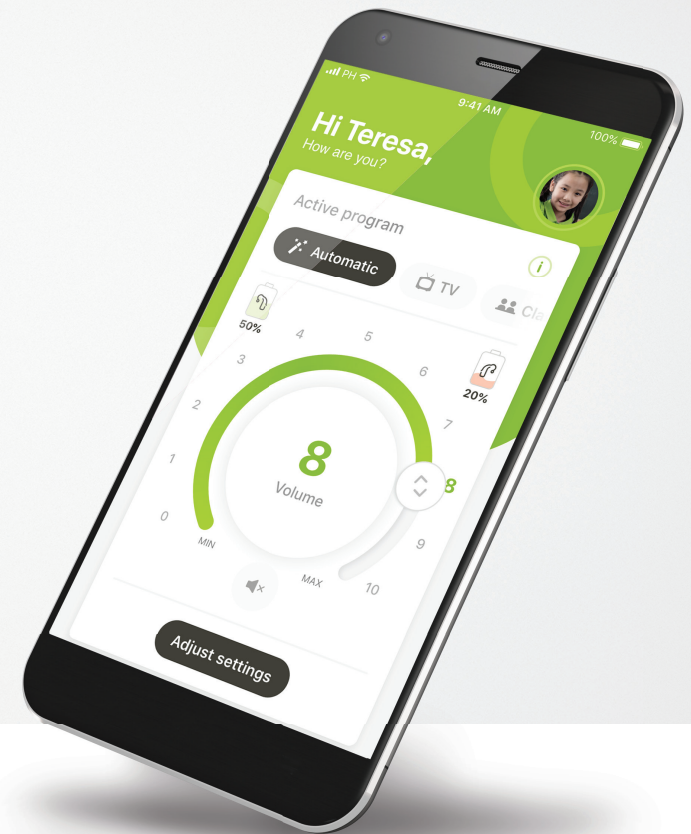

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# Käytön aloittaminen

myPhonak Junior -sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Hyödynnä kaikki sovelluksen mahdollisuudet tutustumalla huolellisesti käyttöohjeisiin.



Tässä käyttöohjeessa esitellään myPhonak Junior -sovelluksen ominaisuudet ja niiden käyttötapa. Lisäksi kerrotaan, miten tiettyjen ominaisuuksien käytön voi estää lapsilta lapsilukon avulla, niin että vain vanhemmat voivat käyttää kyseisiä ominaisuuksia. Lue tämä käyttöohje ennen kuin aloitat sovelluksen käytön.



Kognitiivisten kykyjen kehitystaso vaihtelee jopa samanikäisillä lapsilla. Jokaisen lapsen kypsyystaso ja riskitietoisuus on arvioitava yksilöllisesti sen varmistamiseksi, voiko lapsi käyttää myPhonak Junior -sovellusta. Seuraavia suosituksia voidaan käyttää ohjenuorana.



Kaukosäätimen itsenäinen käyttö:  
Soveltuu vähintään 10-vuotiaille lapsille, jotka pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kuinka sovelluksen asetukset vaikuttavat heidän kuuloonsa ja tietoisuuteensa ympäristön äänistä.



Kyky varoitusviestien lukemiseen ja ymmärtämiseen on olennaisen tärkeä.



Kaukosäätimen tuettu käyttö:  
Soveltuu vähintään 6-vuotiaille lapsille, jotka pystyvät antamaan selkeää palautetta muutoksista tai säädöistä, jotka kolmas osapuoli tekee sovelluksen kautta. Tässä tapauksessa vanhemmat/hoitajat voivat tehdä muutokset lapsen puolesta.



**HUOMAUTUS:** on äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat/hoitajat eivät tee mitään muutoksia, jos lapsi ei pysty antamaan niistä luotettavaa palautetta.



## Yhteensopivuustiedot:

myPhonak Junior -sovelluksen käyttö vaatii Phonak-kuulokojeita, joissa on Bluetooth®-yhteys.

myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on Bluetooth® low energy (LE) -ominaisuus, ja se on yhteensopiva laitteiden kanssa, joissa on iOS®-versio 14.0 tai sitä uudempi versio. myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2 -versiota ja Android OS 8.0 -versiota tai uudempia versioita.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

iPhone® on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.


Android on Google LLC:n tavaramerkki.

iOS® on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.

## Sisältö

Yleiskatsaus	4
myPhonak Junior -sovelluksen asentaminen	6
Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa	7
Lapsilukko	9
Mukauttaminen	10
Laiteparin muodostuksen vianmääritys	11
Kaukosäädin	12
Etätuki-istunto	13
Minun kuulokojeeni	15
Turvallisuustiedot ja symbolien kuvaus	16
Symbolien selitykset	20

## Yleiskatsaus – kaukosäädin

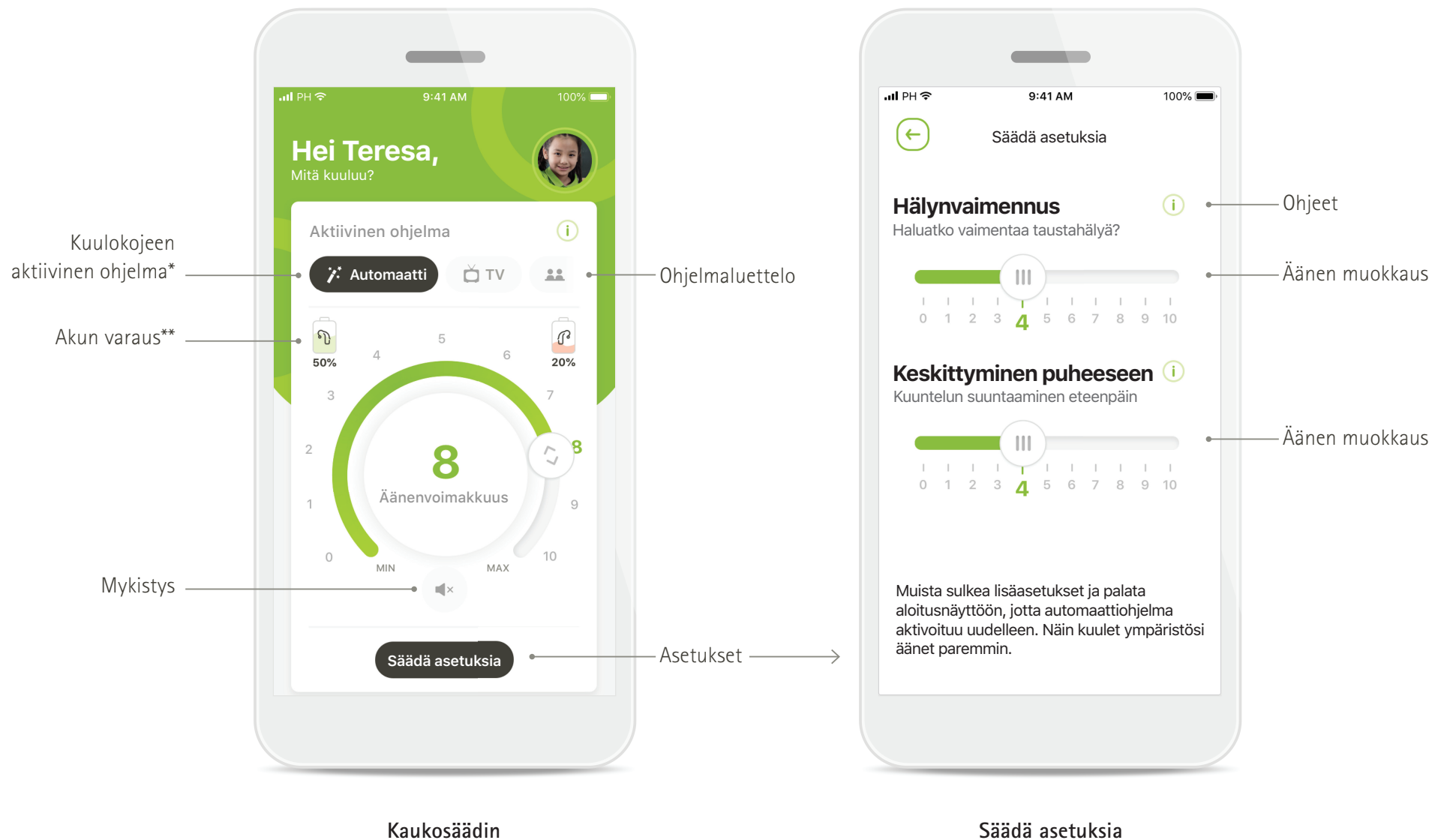


\*AutoSense™ Sky OS Sky-kuulokojeille. AutoSense™ OS Bolero-, Naida- ja Audéo-kuulokojeille.


\*\*Vain ladattavissa kuulokojeissa



## Yleiskatsaus – etätuki\*

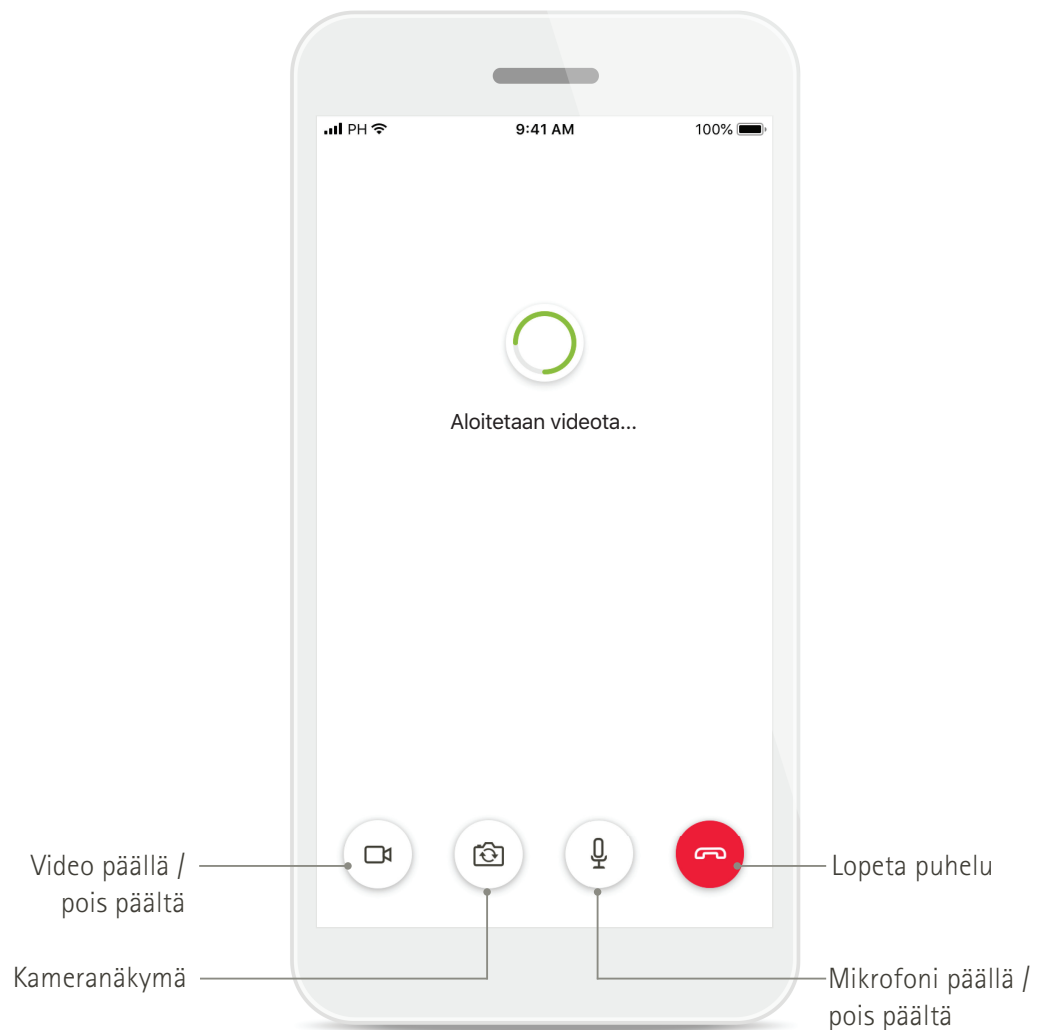

Etätukipuhelu

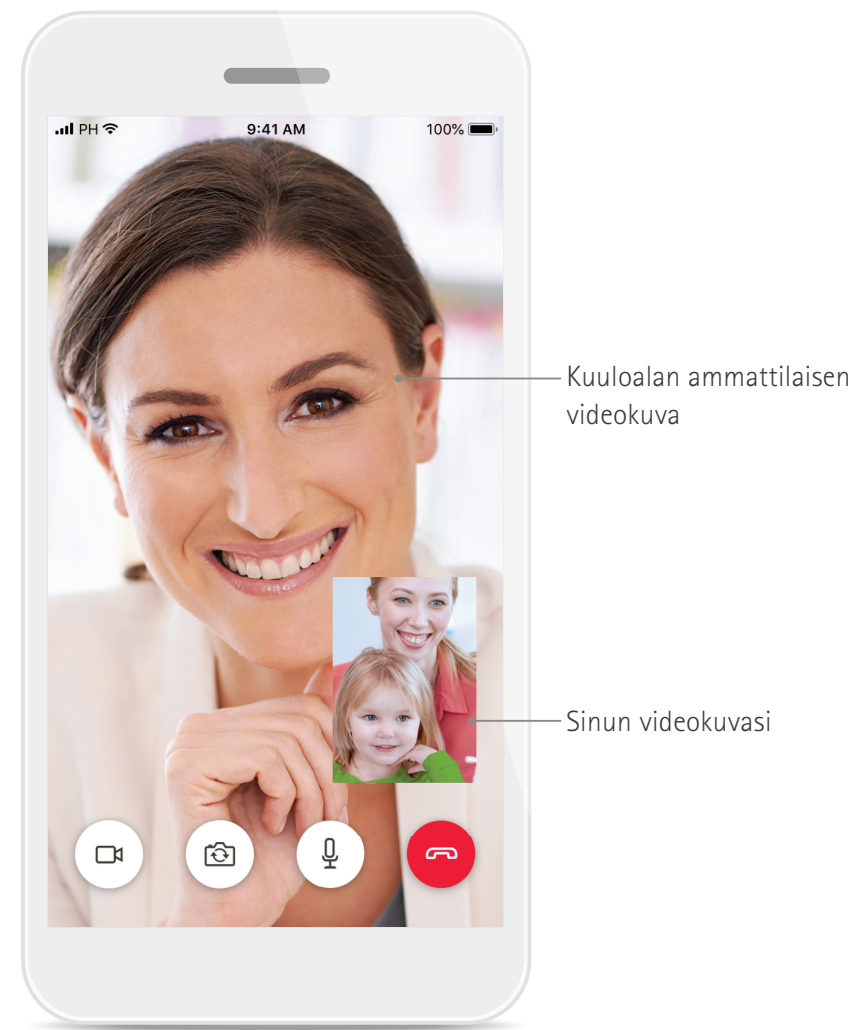


Etätukipuhelu

\*Saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta

# myPhonak Junior –sovelluksen asentaminen

- Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta
- Ota älypuhelimien Bluetooth käyttöön

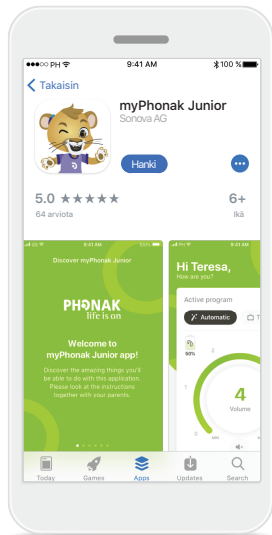


**Lataa myPhonak Junior –sovellus**  
Lataa sovellus sovelluskaupasta. Asennuksen jälkeen avaa myPhonak Junior




**Avaa myPhonak Junior**  
Avaa sovellus ja valitse **Tutustu**.



**Tietosuojailmoitus**  
Jos haluat käyttää sovellusta, sinun on hyväksyttävä tietosuojailmoitus valitsemalla **Hyväksyn**, ennen kuin voit jatkaa.

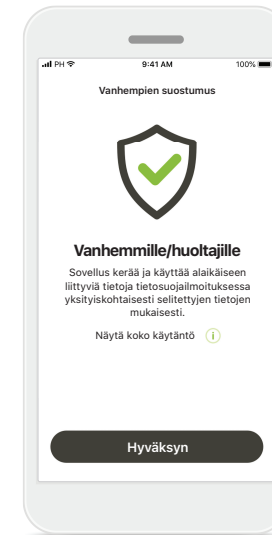


**Vanhempien suostumus**  
Vanhemman tai huoltajan on annettava suostumuksensa sovelluksen käyttöön. myPhonak Junior -sovellus kerää ja käyttää alaikäiseen liittyviä tietoja tietosuojailmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti.

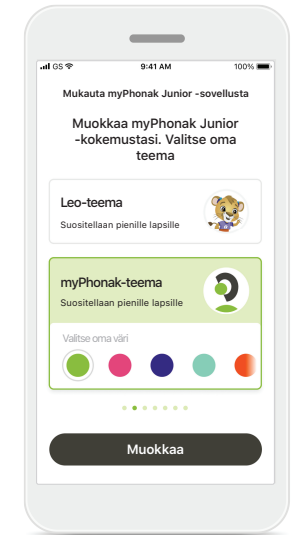

**Valitse teema**  
Vanhemmat, hoitajat tai sovelluksen käyttäjät voivat valita joko Leo- tai myPhonak-teeman. Sovelluksen toiminnot ovat samat molemmissa teemoissa. Teema voidaan valita käyttönoton yhteydessä tai Oma profiili -osiossa.


# Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa\*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.\*\*

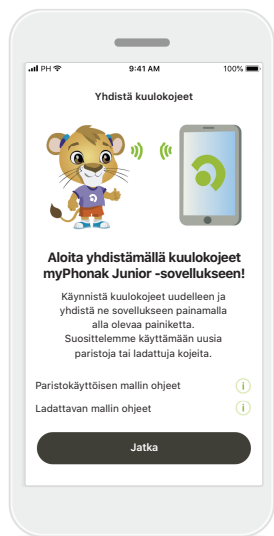


## Paritusohjeet

Valitse **Jatka** ja noudata kuulokojeitasi koskevia ohjeita.

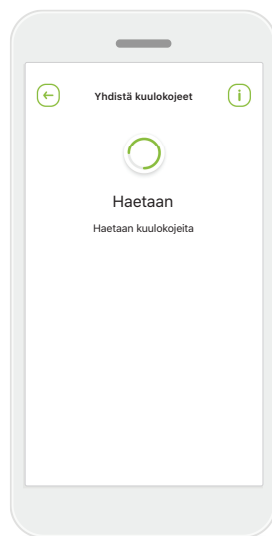


## Haetaan

Sovellus hakee yhteensopivia kuulokojeita ja näyttää ne, kun kojeet on havaittu. Tähän saattaa kulua muutama minuutti.

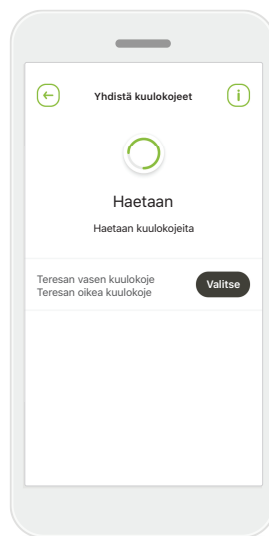


## Valitseminen

Napauta **Valitse**-kohtaa, kun (molemmat) kuulokojeesi näkyvät luettelossa.

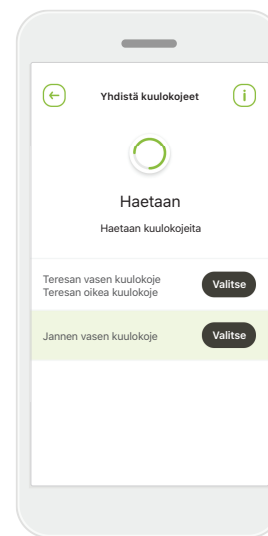

## Useita

Jos sovellus havaitsee useita kuulokojeita, ne näkyvät vastaavasti. Kuulokojeesi näkyy korostettuna, kun painat kuulokojeen painiketta.

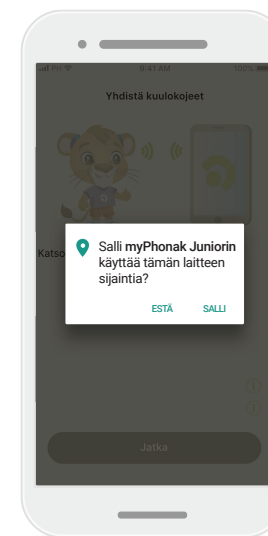

## Sijainti


Android-laitteissa sinun täytyy ottaa käyttöön sijaintipalvelut, kun muodostat laitepareja ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteiden kanssa. Alkuasennuksen jälkeen voit ottaa sijaintipalvelut taas pois käytöstä.

\*Yhteensopiva Sky M-, Sky Link M-, Naida M-, Bolero M-, Audéo M-, Naida P- ja Audéo P -kuulokojeiden kanssa.

\*\*Bluetooth-suoratoisto: voit toistaa musiikkia tai vastaanottaa puheluita kuulokojeisiin valitsemalla Asetukset > Bluetooth ja lisäämällä kuulokojeet yhdistettyjen laitteiden luetteloon. Jatka sen jälkeen paritusta palaamalla sovellukseen.

## Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa\*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.

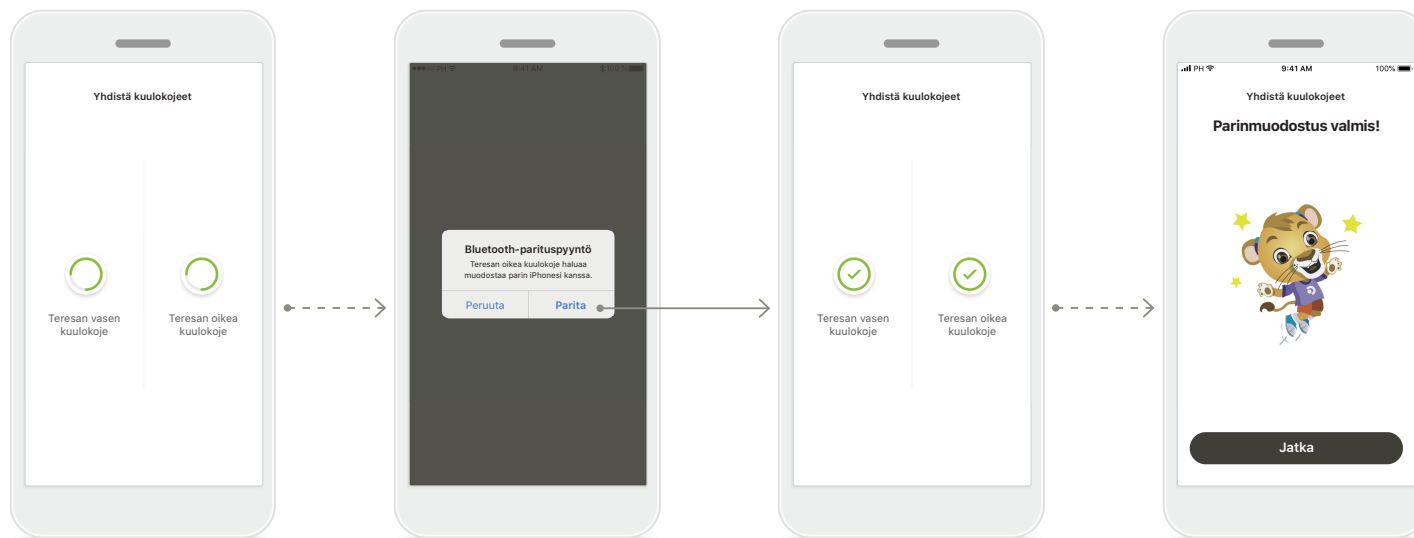

### Kuulokojeiden paritus

Sovellus muodostaa yhteyden kumpaankin kuulokojeeseen erikseen.

### Vahvista kaikki kuulokojeet

Kun näet kehoitteen, vahvista laiteparin muodostus napauttamalla valintaikkunassa **Parita** erikseen kummankin laitteen kohdalla.

### Parinmuodostus valmis

Molemmat kuulokojeet on nyt paritettu. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.


### Asennus valmis

Nyt voit käyttää kaikkia sovelluksen yhteensopivia toimintoja. Siirry päänäyttöön valitsemalla **Jatka**.

\*Yhteensopivia seuraavien kuulokojeiden kanssa: Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L ja Audéo L.

# Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön myPhonak Junior -sovelluksessa noudattamalla alla olevia ohjeita.

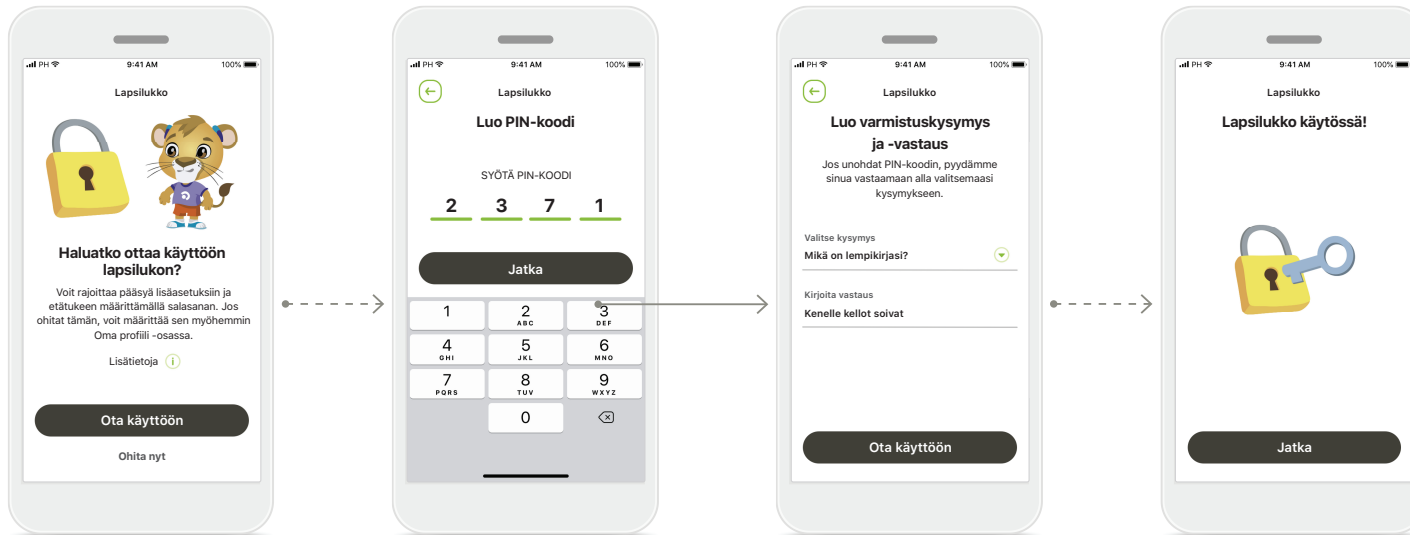

## Lapsilukon käyttöönotto

Lapsilukon voi ottaa käyttöön joko sovelluksen käyttöönoton aikana tai myöhemmin vanhemman/huoltajan valitsemana aikana Oma profiili -osiossa. Tämän toiminnon avulla voi rajoittaa etätuen käyttöä, ladattavien kuulokojen automaattisen käynnistystoiminnon käyttöä ja puheluiden Bluetooth-kaistanleveyden valintaa.

## Luo PIN-koodi

Ota lapsilukko käyttöön määrittämällä nelinumeroisen PIN-koodi. PIN-koodin voi vaihtaa tai palauttaa milloin tahansa vanhemman/huoltajan valitsemana ajankohtana.

## Varmistuskysymys

Valitse varmistuskysymys ja kirjoita oikea vastaus. Tähän kysymykseen vastaamalla pääset käyttämään rajoitettuja toimintoja, jos unohdat nelinumeroisen PIN-koodisi.


## Lapsilukko käytössä

Kun olet valinnut varmistuskysymyksen ja kirjoittanut vastauksen, voit ottaa lapsilukon käyttöön. Lapsilukon voi poistaa käytöstä sovellusvalikossa, jos sitä ei tarvita.




# Mukauttaminen

Voit käyttää myPhonak Junior -sovelluksen mukautusasetuksia noudattamalla alla olevia ohjeita.

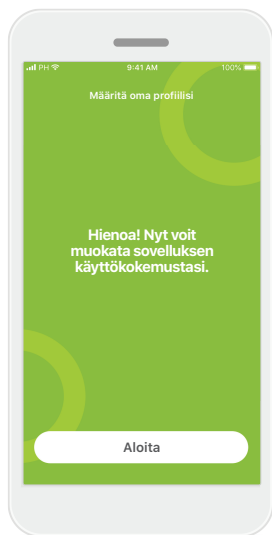


## Aloita mukauttaminen

Voit aloittaa mukauttamisen joko käyttöönoton aikana tai myöhemmin aloitusnäytön Oma profiilisi -osiosta.

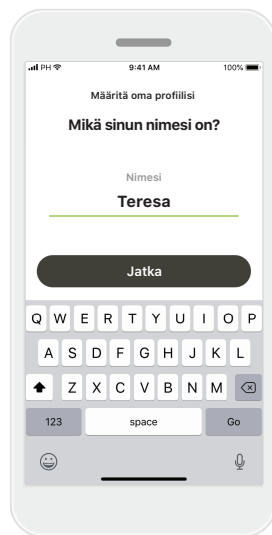


## Käyttäjäprofiilin nimi

Valitse käyttäjänimi.

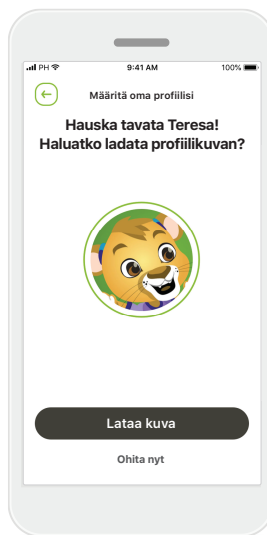

## Käyttäjäprofiilin kuva

Valitse profiilikuva. Tämä vaihe voidaan ohittaa ja tehdä myöhemmin Oma profiilisi -osiossa.

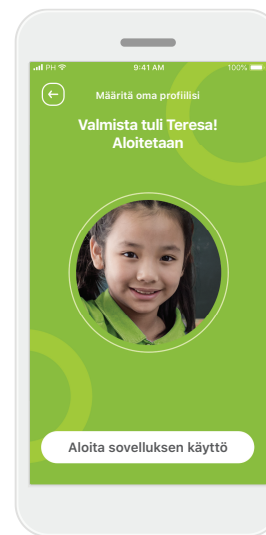


## Lisäasetukset

Muita mukautusasetuksia ovat sovelluksen taustaväriteeman vaihtaminen sekä virtuaalisten kuulokojeiden ja koulun värin muuttaminen.

## Parituksen vianmääritys


Mahdollisia virheitä parituksen aikana.

Lisätietoja vianmäärityksestä saat Phonakin tukisivulta.

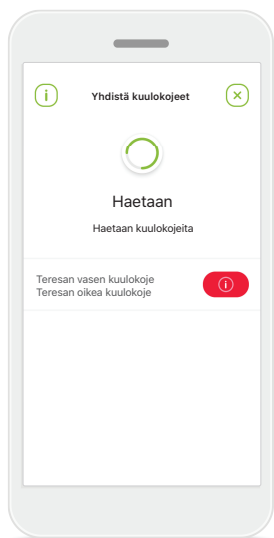

### Laitteet eivät ole yhteensopivat

Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä laitteisiin, koska ne eivät ole yhteensopivia sovelluksen kanssa. Pyydä kuuloalan ammattilaiselta lisätietoja.

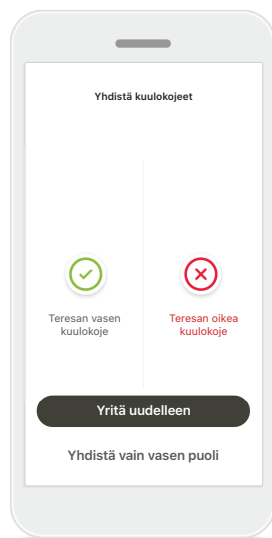

### Kuulokojeen yhteysvirhe

Jos toisen kuulokojeen pariliitoksen muodostaminen epäonnistuu, tee toinen seuraavista:

1. Aloita pariliitoksen muodostaminen uudelleen valitsemalla **Yritä uudelleen**.
2. Jatka vain toisen kuulokojeen osalta.



### Yhteyden muodostus molempiin kuulokojeisiin epäonnistuu

Aloita pariliitoksen muodostaminen uudelleen valitsemalla **Yritä uudelleen** ja seuraa ohjeita.

# Kaukosäätimen päänäyttö

Toiminnot, joita voi käyttää kaikille kuulokojeille.




## Kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Muuta äänenvoimakkuutta liikuttamalla liukusäädintä.

## Aktiivisen ohjelman vaihtaminen


Napauta käytettävissä olevia ohjelmia mukauttaaksesi ohjelmaa tiettyyn kuunteluympäristöön. Käytettävissä olevat ohjelmat riippuvat siitä, miten kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeet.

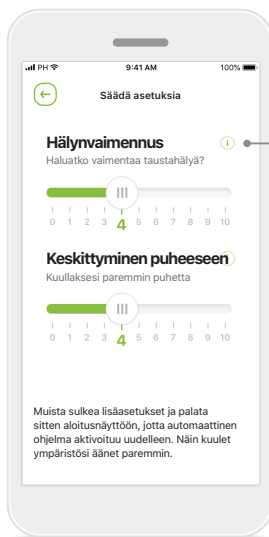


## Säädä asetuksia


Asetusnäelmästä pääset seuraaviin toimintoihin:

- Hälynvaimennus
- Keskittyminen puheeseen

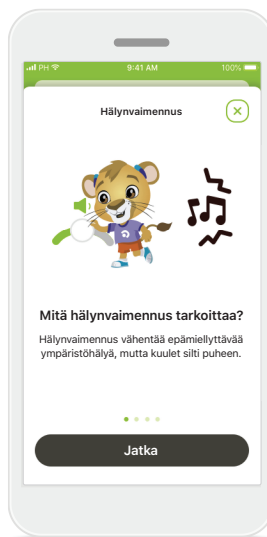


## Tietoja

Saat enemmän tietoja eri toiminnoista painamalla -kuvaketta.

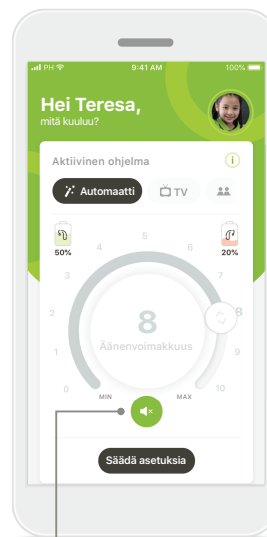

## Mykistys

Voit vaimentaa kuulokojeet painamalla **Mykistys**-kuvaketta.

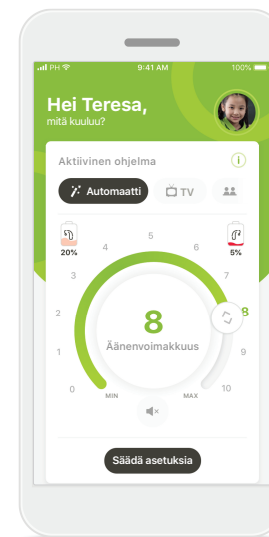


## Akun alhainen varaustila

Jos akun varaustila on alle 20 %, kuvake muuttuu punaiseksi. Lataa kuulokojeesi pian.


# Etätuki-istunto

Jos käytät mobiilidataa, operaattorisi saattaa laskuttaa sinua siitä. Tarkista asia operaattoriltasi ennen Phonak-etätukipuhelun aloittamista. 10 minuutin etätukivideopuhelu kuluttaa noin 56 Mt dataa, kun taas pelkkään äänipuheluun kuluu noin 30 Mt.

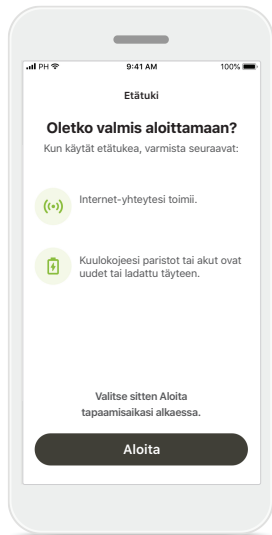


## Etätukipuhelun aloittaminen

Kun tapaamisaikasi alkaa, avaa myPhonak Junior -sovellus ja valitse **Aloita**, niin kuuloalan ammattilainen saa tiedon siitä, että olet valmiina Phonak-etätukipuheluun.

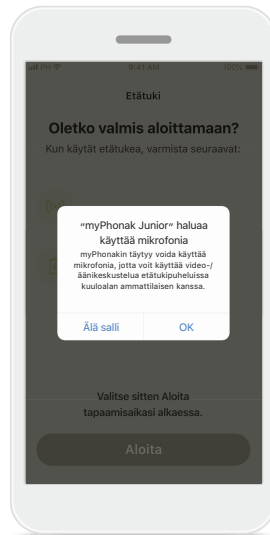


## Kameran ja mikrofonin käyttäminen

Salli myPhonak Junior -sovelluksen käyttää kameraasi ja mikrofoniasi valitsemalla **OK**.

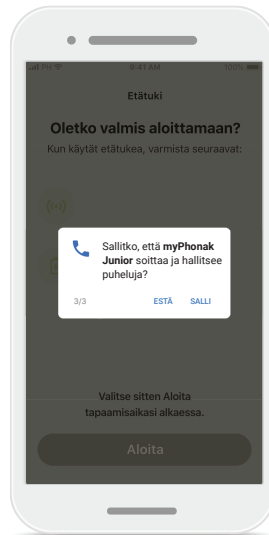

## myPhonak-puhelujen salliminen

Jos sinulla on Android-älypuhelin, salli myPhonak Junior -sovellukselle puhelujen soittaminen ja hallintavalitsemalla **SALLI**.

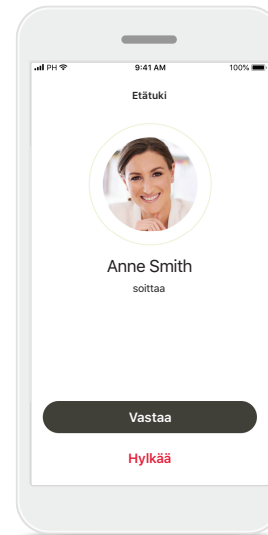


## Videopuhelujen hyväksyminen

Sovellus muodostaa yhteyden kuuloalan ammattilaiseen. Hyväksy kuuloalan ammattilaisen puhelu valitsemalla **Vastaa**.

# Etätuki-istunto


Voit halutessasi tehdä etätukipuhelustasi yksilöllisemmän ottamalla videokuvan tai äänen käyttöön tai poistamalla sen käytöstä.

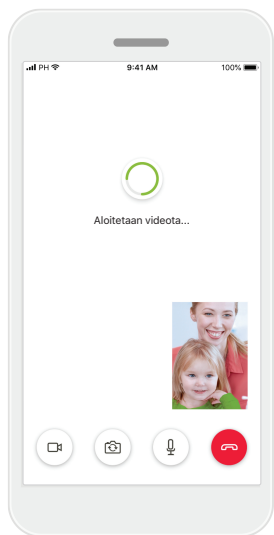


**Videopuhelun aloittaminen**  
Muutaman sekunnin kuluttua videoyhteys on määritetty ja näet kuuloalan ammattilaisen.




**Käynnissä oleva puhelu**  
Sinulla on nyt yhteys kuuloalan ammattilaiseen.

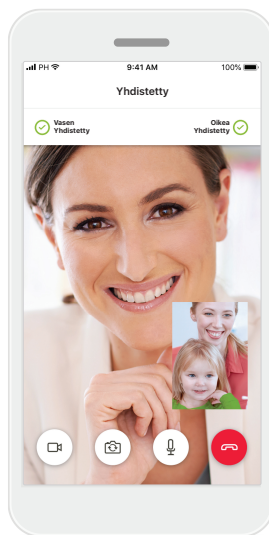

**Yhdistetyt kuulokojeet**  
Jos kuuloalan ammattilaisen on muodostettava yhteys kuulokojeisiisi, se voidaan tehdä etänä älypuhelimesi avulla.  
Kuuloalan ammattilainen kertoo sinulle, kun hän muodostaa yhteyden kuulokojeisiisi.

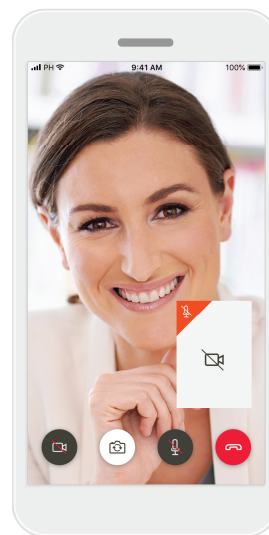

**Ei videokuvaa**  
Jos haluat piilottaa oman videokuvasi, voit ottaa videokuvan pois käytöstä yhdellä napsautuksella.


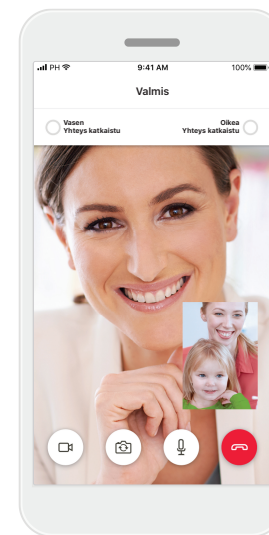


**Uudet säädöt tallennettu**  
Kuulokojeesi mykistetään hetkeksi yhteyden muodostamisen aikana ja kun kuulokojeesi säätöjä tallennetaan. Näet prosessin tilan näytöllä.




# Minun kuulokojeeni


Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja langattomista lisälaitteista.

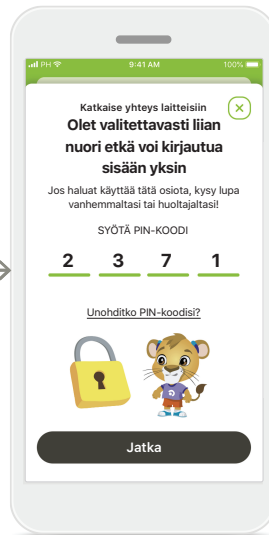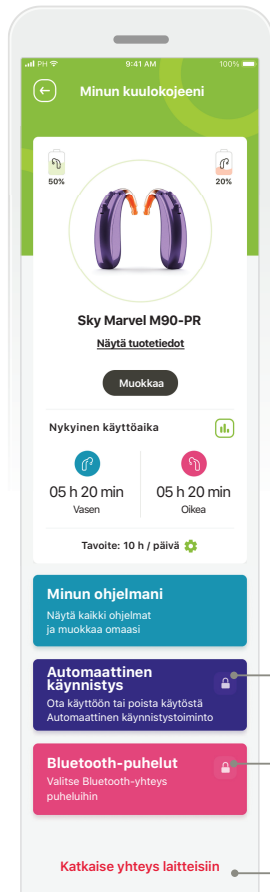


**Lapsilukko**  
Lapsilukon ansiosta pienet lapset eivät voi vahingossa katkaista kuulokojeiden yhteyttä.

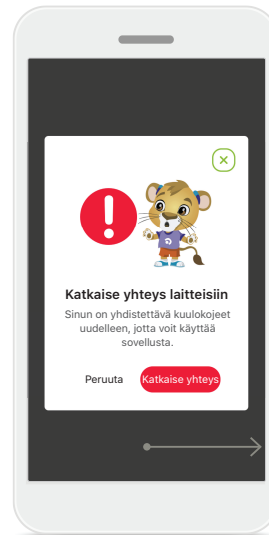

**Katkaise yhteys laitteisiin**  
Voit poistaa kuulokojeesi valitsemalla **Katkaise yhteys**. Huomioi, että jos teet niin, sinun on muodostettava kuulokojeistasi laitepari uudelleen, jotta voit käyttää sovellusta.

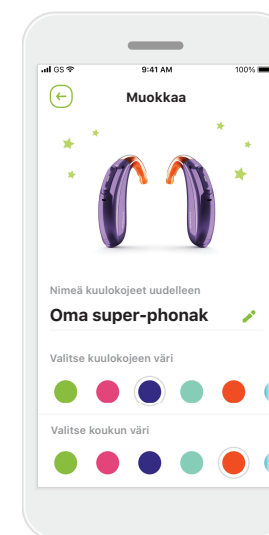

**Mukauttaminen\***  
Kuulokojeen ja kouden väriä sekä sovelluksessa näkyvää laitteen nimeä voidaan muuttaa.

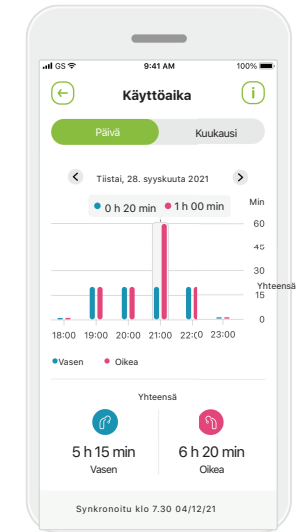

**Käyttöaika\***  
Käyttöaika näyttää yhteenvedon siitä, kuinka pitkään kumpaakin kuulokojetta käytetään päivittäin ja kuukausittain. Kuulokojeet, joissa on ladattavat akut, antavat eniten käyttöaikatietoja.

## Minun kuulokojeeni

Minun kuulokojeeni -näyttö sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat akun tilaa (akuilla varustettujen kuulokojeiden tapauksessa), kuulokojetyyppiä, Roger-lisenssien asennusta, käyttöaikaa, omia ohjelmia, automaattista käynnistystä ja Bluetooth-puheluita. Voit myös muokata kuulokojeiden ulkomuotoa tässä näytössä.

\*Vain tietyissä kuulokojeissa

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

## Käyttötarkoitus:

Sovellus on tarkoitettu kuulokojeen nykyisten toimintojen valitsemiseen, säätämiseen ja tallentamiseen, tilatietojen käyttämiseen sekä loppukäyttäjän ja kuuloalan ammattilaisen väliseen viestintään langattomasti ja visuaalisesti.

## Kohdepotilaat:

Kohdepotilaita ovat loppukäyttäjät, jotka arvostavat käyttömukavuutta, kuten sitä, että heidän kuulokojeensa optimoidaan todellisiin käyttötilanteisiin ja että heidän ei tarvitse tulla klinikalle kojeen säätämistä varten, ja jotka haluavat jakaa kokemuksensa.

- Kohdeprofiili:

Katso tarkemmat tiedot sivulta 2

Kaikkien sovellusversioiden käyttöohje kaikilla saatavilla kielillä on luettavissa sähköisessä muodossa verkkosivustolla. Voit lukea käyttöohjeet toimimalla seuraavasti:

- Mene osoitteeseen <https://www.phonak.com/en-int/support> ja valitse haluamasi maa
- Valitse kohta "Support" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "User Guides" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "Apps" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse "myPhonak Junior app"

Vaihtoehtoisesti voit lukea myPhonak Junior -käyttöohjeen nykyisen version suoraan sovelluksesta siirtymällä Tuki-osioon ja napauttamalla Käyttöohje-korttia. Käyttöohje avautuu ulkoiseen selainikkunaan.

## Tietoturvailmoitus

Potilastiedot ovat yksityisiä tietoja, ja niiden suojaaminen on tärkeää:

- Varmista, että älypuhelimien käyttöjärjestelmään on päivitetty uusimmat turvallisuuspäivitykset. Ota automaattiset päivitykset käyttöön.
- Varmista, että asennettu sovellusversio on ajan tasalla.
- Yhdistä kuulokojeesi vain virallisista kaupoista ladattuihin alkuperäisiin Sonovan sovelluksiin.
- Asenna vain hyvämaineisia sovelluksia virallisista kaupoista.
- Käytä vahvoja salasanoja ja pidä tunnistetiedot suojaossa.
- Lukitse puhelin PIN-koodilla ja/tai biometrisellä tunnistella (kuten sormenjälki tai kasvot) ja määritä puhelin lukittumaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä muutaman minuutin ajan.
- Varmista, että asennetuissa sovelluksissa on vain tarvittavat käyttöoikeudet.
- Vältä kuulokojeiden yhdistämistä laitepariksi Bluetoothin avulla julkisilla paikoilla, sillä tällöin vaarana ovat kolmansien osapuolten aiheuttamat ei-toivotut häiriöt. Bluetooth-paritus on suositeltavaa tehdä kotona.
- ÄLÄ käytä puhelinta, johon on tehty luvattomia muutoksia (jailbreikkaus tai roottaus).

Varmista, että tiedot ovat aina turvassa. Huomioi, että tämä luettelo ei ole täydellinen.

- Kun siirrät tietoja riskialttiiden kanavien kautta, lähetä tiedot nimettömästi tai salaa ne.
- Huolehdi älypuhelimien tietojen varmuuskopioinnista, sillä se auttaa tietojen katoamis- ja varkaustapauksissa.
- Poista kaikki tiedot älypuhelimesta, jota et enää käytä tai joka hävitetään.

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

## Ohjelman ylläpito:

Seuraamme jatkuvasti markkinoilta saamaamme palautetta. Jos havaitset ongelmia uusimmassa sovellusversiossa, ota yhteyttä paikalliseen valmistajan edustajaan ja/tai anna palautetta App Storessa tai Google Play -kaupassa.

## Käyttöaiheet

Huomaa, että käyttöaiheet eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuulokojeiden ja tinnituksen tasapainotuksen yleisiä kliinisiä käyttöaiheita ovat seuraavat:

- kuulonalenema
  - tois- tai molemminpuoleinen
  - konduktiivinen, sensorineuraalinen tai niiden yhdistelmä
  - lievä tai erittäin vaikea
- krooninen tinnitus (vain kuulokojeet, joissa on Tinnitus Balance -ominaisuus).

## Vasta-aiheet

Huomaa, että vasta-aiheet eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuulokojeiden käytön ja Tinnitus Balance -ominaisuuden yleisiä kliinisiä vasta-aiheita ovat seuraavat:

- kuulonalenema ei ole kuulokojeen sovitusalueella (eli vahvistus, taajuusvaste)
- akuutti tinnitus
- korvan epämuodostuma (eli umpinainen korvakäytävä, korvalehteä ei ole)
- neuraalinen kuulonalenema (retrokokleaariset patologiat, kuten kuulohermion puuttuminen tai toimimaton kuulohermo).

Ensisijaiset kriteerit potilaan lähettämiseen lääketieteellisen tai muun asiantuntijan vastaanotolle ja/tai hoitoon ovat seuraavat:

- näkyvä synnynnäinen tai trauman aiheuttama korvan epämuodostuma tai aktiivinen nesteen valuminen korvasta viimeisen 90 päivän aikana
- äkillinen tai nopeasti etenevä kuulonalenema joko toisessa tai molemmissa korvissa viimeisen 90 päivän aikana
- akuutti tai krooninen huimaus
- audiometrinen luu-ilmaväli vähintään 15 dB 500 Hz:ssä, 1 000 Hz:ssä ja 2 000 Hz:ssä
- näkyviä merkkejä merkittävästä korvavahan kerääntymisestä tai vierasesineestä korvakäytävässä
- kipu tai epä mukavuus korvassa

- tärykalvon ja korvakäytävän poikkeava ulkonäkö, kuten
  - ulkoisen kuulokanavan tulehdus
  - reikä tärykalvossa
  - muut poikkeamat, joiden kuuloalanammattilainen uskoo olevan lääketieteellisesti merkityksellisiä.

Kuuloalanammattilainen voi päättää, että lähete ei sovellu potilaalle tai että se ei ole potilaan parhaan edun mukaista, kun jokin seuraavista pitää paikkansa:

- Kun on olemassa riittävästi näyttöä siitä, että lääketieteen ammattilainen on tutkinut potilaan tilan perusteellisesti ja kaikki mahdollinen hoito on annettu.
- Tila ei ole huonontunut tai muuttunut merkittävästi edellisen tutkimuksen ja/tai hoidon jälkeen.
- Jos potilas on tehnyt tietoisin ja kykenevän päätöksen olla kysymättä lääketieteellistä mielipidettä siihen neuvomisesta huolimatta, on sallittua suositella asianmukaisia kuulokojejärjestelmiä seuraavien ehtojen mukaisesti:
  - Suositus ei aiheuta mitään haittavaikutuksia potilaan terveydelle tai yleiselle hyvinvoinnille.
  - Rekisterissä olevien tietojen mukaan potilaan paras etu on otettu huomioon kaikin mahdollisin tavoin. Jos se on oikeudellisesti tarpeen, potilas on allekirjoittanut vastuuvapauslausekkeen, josta käy ilmi, että hän ei ole noudattanut neuvoa hakea lääketieteellistä mielipidettä ja että kyseessä on tietoinen päätös.

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.

## Käytön rajoitukset

Sovellusta voi käyttää vain yhteensopivien laitteiden mahdollistamiin toimintoihin.

## Haittavaikutukset

Huomaa, että haittavaikutukset eivät koske sovellusta vaan yhteensopivia kuulokojeita. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa kuulokojeiden fysiologisten haittavaikutusten, kuten tinnituksen, huimauksen, korvavahan kerääntymisen, liiallisen paineen, hikoilun tai kosteuden, rakkuloiden, kutinan ja/tai ihottumien, tukkoisuuden tai täysinäisyyden ja sen seurausten, kuten päänsäryn ja/tai korvakivun, hoitamisessa tai lieventämisessä. Perinteiset kuulokojeet voivat altistaa potilaat suuremmille äänitasoille, jotka voivat siirtää taajuusvasteen kynnysarvoja, joihin akustinen trauma on vaikuttanut.

## Hyöty

Sovellus hyödyttää kohdekäyttäjiä tarjoamalla mahdollisuuden säätää kuulokojeen asetuksia ensisovituksen sallimissa rajoissa.

Sovelluksen avulla kohdekäyttäjät voivat olla kätevästi yhteydessä ja kommunikoida kuuloalan ammattilaisten kanssa kuulokojeen etäsäätöjä varten.

Sovellukseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajan edustajalle ja asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka on suoraan tai välillisesti johtanut tai saattanut johtaa johonkin seuraavista:

- a. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- b. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- c. vakava kansanterveydellinen uhka

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla olevat turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttöä.



Olet itse vastuussa oman älypuhelimesi käytöstä. Käsittele älypuheliminta varovasti ja ole huolellinen sovelluksen käytössä.



Vahvistuksen vähentäminen tai hälynvaimennuksen lisääminen voi heikentää varoitus- tai turvallisuussignaalien kuuluvuutta. Tämä voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.



Jos haluat ilmaisen paperiversion käyttöohjeista, ota yhteyttä paikalliseen Sonova-edustajaan. Paperiversio lähetetään yleensä seitsemän päivän kuluessa.



Jos kuulokojeet eivät reagoi laitteeseen epätavallisten kenttähäiriöiden vuoksi, siirry pois häiritsevistä kentästä.



Jos kuulokojeet eivät reagoi, tarkista, ovatko ne päällä ja onko paristoissa tai akuissa virtaa.



Ota Bluetooth käyttöön. Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää kuulokojeet.



## Merkkien selitykset



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää kiinnittää huomiota tässä käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.



CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä Phonak-tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-merkki otettu käyttöön 2021. CE-symbolin perässä olevat numerot vastaavat niiden sertifioitujen laitosten koodia, joita konsultoitin yllä mainittujen direktiivien mukaisesti.



Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä. EY-edustaja on myös Euroopan unionin maahantuojia.



Ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite.



Nimi, osoite, päiväys

Yhdistetty symboli, joka ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan ja valmistuspäivämäärän EU:n asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti.



Tämä osoittaa, että saatavilla on sähköiset käyttöohjeet. Tiedot ovat saatavilla sivustolla [phonak.com/junior/userguide](https://phonak.com/junior/userguide).



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Sveitsi



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen · Saksa

V3.01/2023-07/NLG © 2021-2023 Sonova AG All rights reserved

Tämä käyttöohje koskee myPhonak Junior 1.2 -versiota ja myPhonak Junior 1 -sovelluksen myöhempiä versioita.

Sovelluksen käyttöohjeen aiemman version saat ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan tai etsimällä verkkosivulta.

