


myPhonak Junior.

Käyttöohje – myPhonak Junior 2

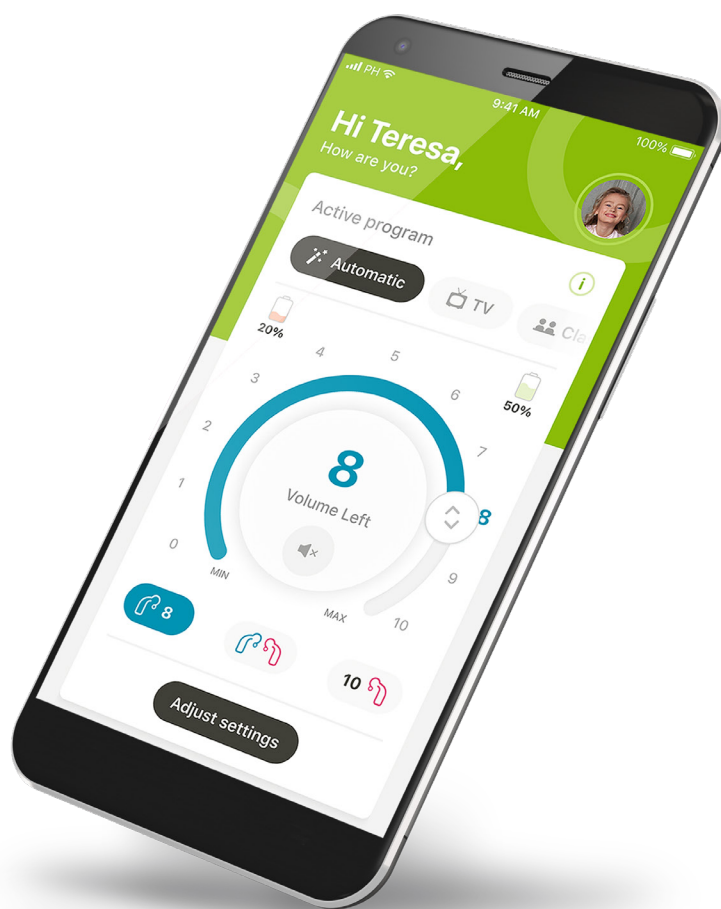

Käytön aloittaminen

myPhonak Junior -sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Hyödynnä kaikki sovelluksen mahdollisuudet tutustumalla huolellisesti käyttöohjeisiin.

Tässä käyttöohjeessa esitellään myPhonak Junior -sovelluksen ominaisuudet ja niiden käyttötapa. Lisäksi kerrotaan, miten tiettyjen ominaisuuksien käytön voi estää lapsilta lapsilukon avulla, niin että vain vanhemmat voivat käyttää kyseisiä ominaisuuksia. Lue tämä käyttöohje ennen kuin aloitat sovelluksen käytön.

Kognitiivisten kykyjen kehitystaso vaihtelee jopa samanikäisillä lapsilla. Jokaisen lapsen kypsyystaso ja riskitietoisuus on arvioitava yksilöllisesti sen varmistamiseksi, voiko lapsi käyttää myPhonak Junior -sovellusta. Lisää turvallisuustietoja on luvussa "Tärkeitä turvallisuustietoja" sivulla 17. Seuraavia suosituksia voidaan käyttää ohjenuorana:

- Sovellusta ei tule käyttää säätöjen tekemiseen alle 10-vuotiaille lapsille.
- Sovellusta ei tule käyttää säätöjen tekemiseen lapselle, ellei lapsi pysty antamaan selkeää palautetta tehdyn muutoksen hyödyistä.
- Tutkimukset ovat osoittaneet, että yli 10-vuotiaat lapset osaavat käyttää sovellusta ilman valvontaa. Kun harkitaan, onko tietty lapsi valmis käyttämään sovellusta ilman valvontaa, on varmistettava, että lapsi pystyy tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kuinka sovelluksen asetukset vaikuttavat hänen kuuloonsa ja tietoisuuteensa ympäristön äänistä.
- Kyky lukea ja ymmärtää varoitusviestejä on olennaisen tärkeä.

Käytön aloittaminen



Yhteensopivuustiedot:

myPhonak Junior -sovelluksen käyttö vaatii Phonak-kuulokojeita, joissa on Bluetooth®-yhteys.

- myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on Bluetooth® low energy (LE) -ominaisuus ja iOS®-versio 16 tai sitä uudempi versio.
- myPhonak Junior -sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2 -versiota ja Android OS 10 -versiota tai uudempia versioita.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

iPhone on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.

IOS® on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.




Sisältö

Yleiskatsaus	5
myPhonak Junior -sovelluksen asentaminen	7
Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa	8
Lapsilukko	10
Mukauttaminen	11
Parinmuodostuksen vianmääritys	12
Kaukosäätimen päänäyttö	13
Auracast™-lähetysten käyttäminen*	14
Etätuki-istunto	15
Minun kuulokojeeni	17
Tärkeitä turvallisuustietoja	18
Vaatimustenmukaisuustiedot	21
Merkkien selitykset	22

Yleiskatsaus – kaukosäädin

Kaukosäädin

Käytössä oleva aktiivinen ohjelma*

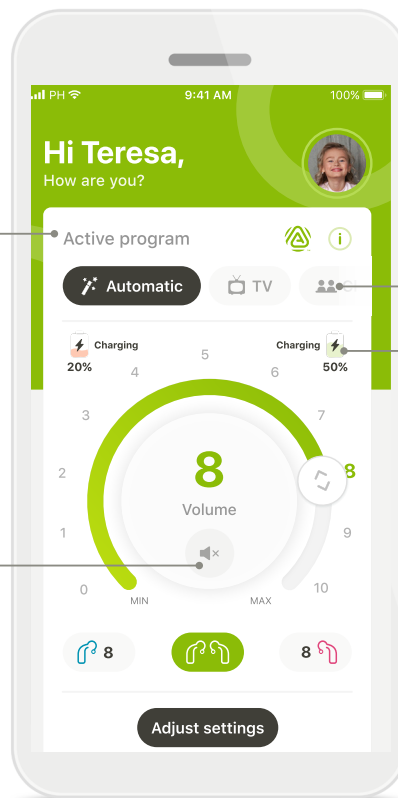


Ohjelmakaruselli

Akun varaus**

Mykistä / poista mykistys

Säädä asetuksia

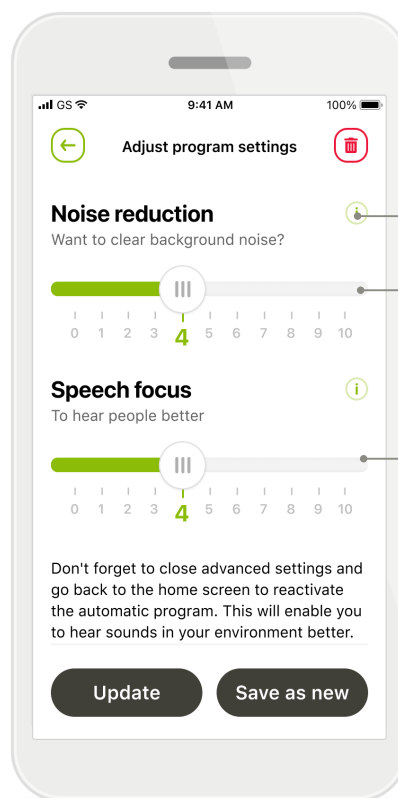

Ohjeet



Äänen muokkaus

Äänen muokkaus

*AutoSense™ Sky OS Sky -kuulokojeille. AutoSense™ OS Bolero-, Naída- ja Audéo-kuulokojeille.

**Koskee vain ladattavia kuulokojeita.


Yleiskatsaus – etätuki*

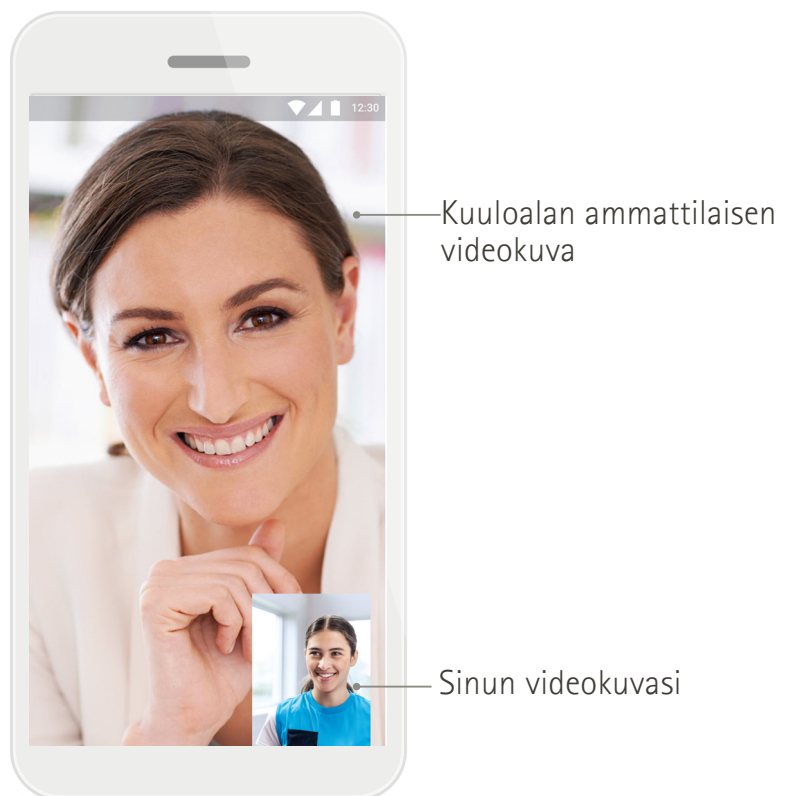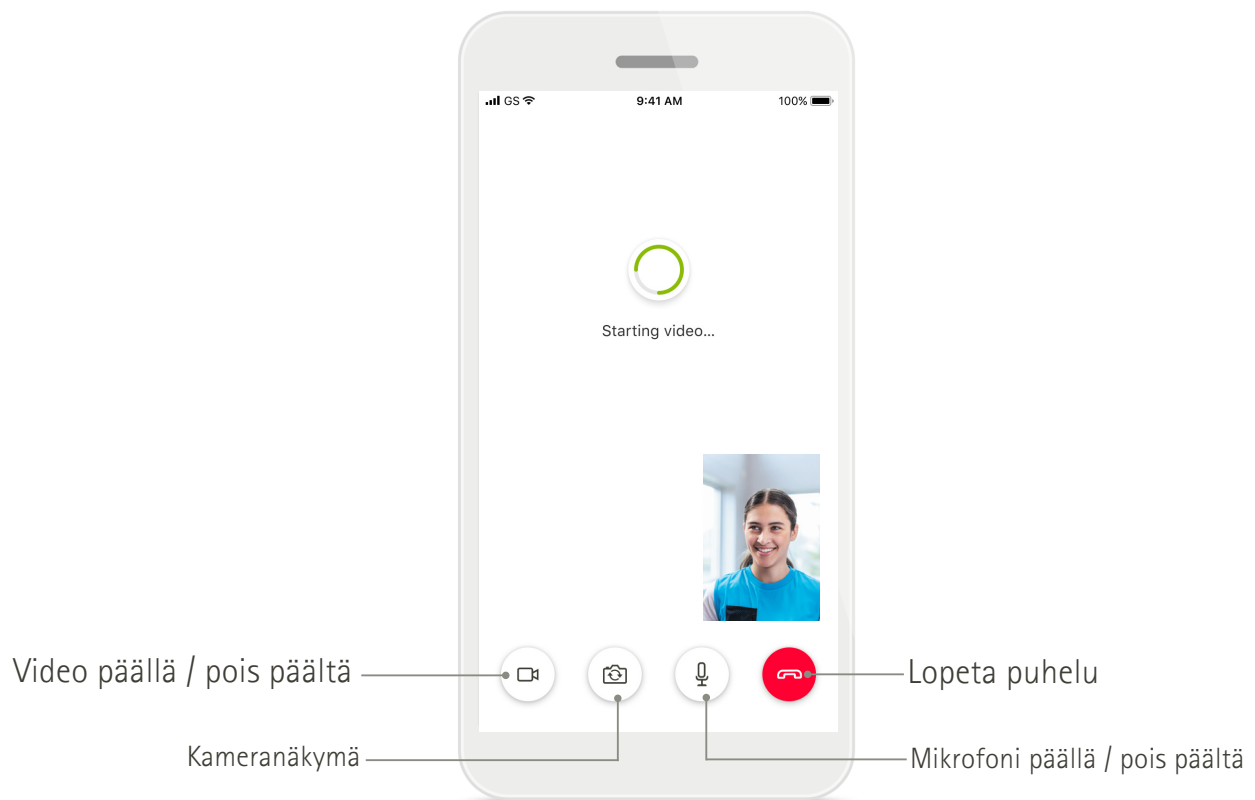

*Saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyiltä kuuloalan ammattilaisilta


myPhonak Junior -sovelluksen asentaminen

1. Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta.
2. Ota älypuhelimien Bluetooth® käyttöön.
3. Lataa myPhonak Junior -sovellus sovelluskaupasta ja asenna se puhelimeen.
4. Avaa sovellus ja valitse Jatkaa.
5. Jos haluat käyttää sovellusta, sinun on hyväksyttävä Tietosuojailmoitus valitsemalla Hyväksyn.

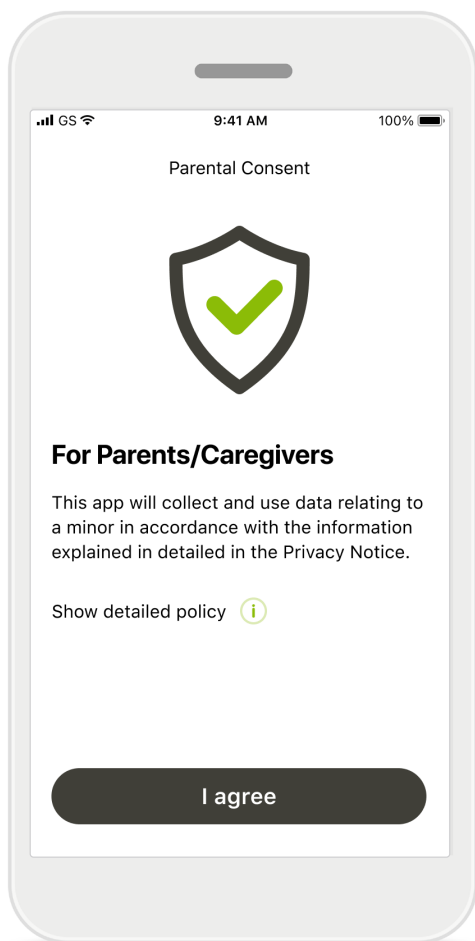

Vanhempien suostumus

Vanhemman tai huoltajan on annettava suostumuksensa sovelluksen käyttöön. myPhonak Junior -sovellus kerää ja käyttää alaikäiseen liittyviä tietoja tietosuojailmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti.

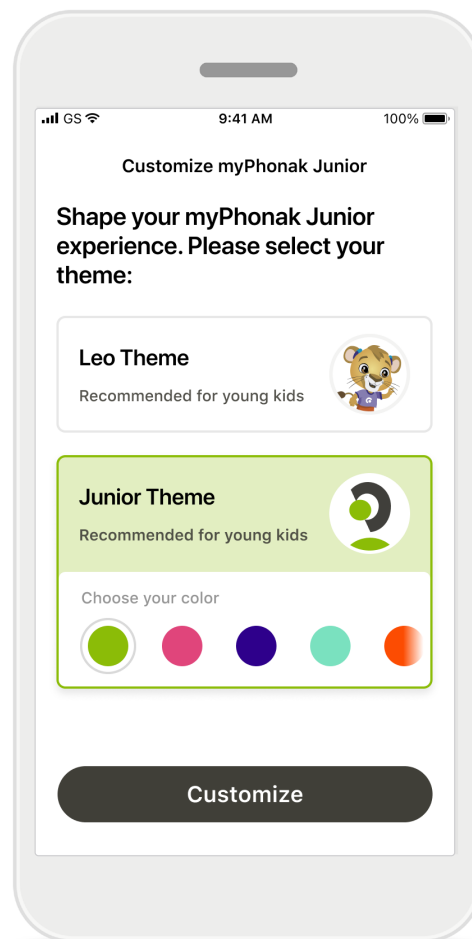


Valitse teema

Vanhemmat, hoitajat tai sovelluksen käyttäjät voivat valita joko Leo- tai myPhonak-teeman. Sovelluksen toiminnot ovat samat molemmissa teemoissa. Teema voidaan valita käyttöänoton yhteydessä tai Oma profiilisi -osiossa.

Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.**

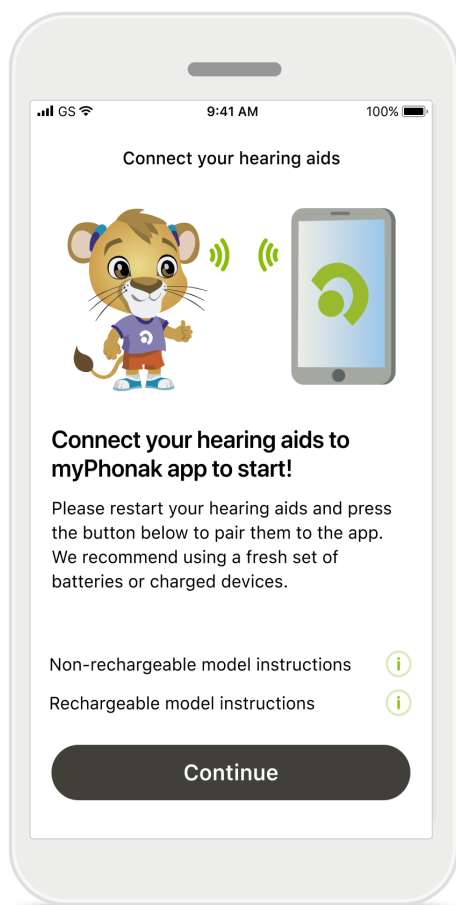


Laiteparin muodostusohjeet

Valitse **Jatka** ja noudata omia kuulokojeitasi koskevia ohjeita.

Sovellus hakee yhteensopivia kuulokojeita ja näyttää ne, kun kojeet on havaittu. Tähän saattaa kulua muutama minuutti.

Napauta **Valitse**-kohtaa, kun kuulokojeesi näkyvät luettelossa.

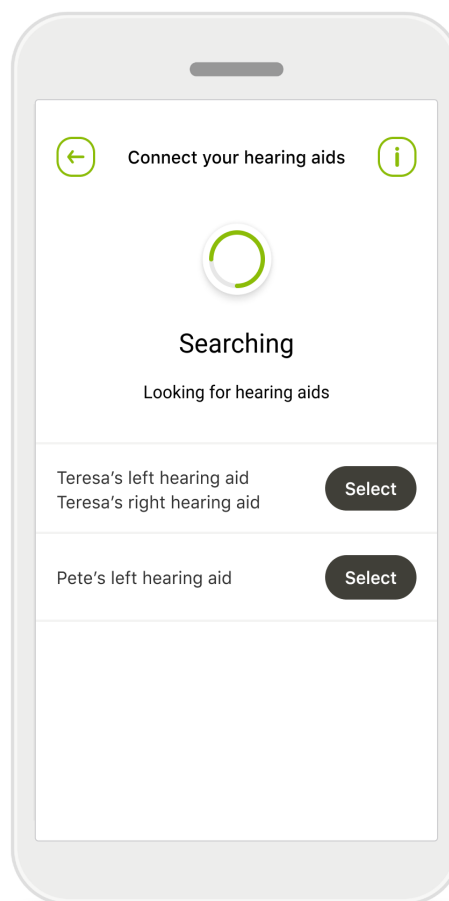

Useita

Jos sovellus havaitsee useita yhteensopivia kuulokojeita, ne näkyvät vastaavasti. Kuulokojeesi näkyy korostettuna, kun napautat kuulokojeen painiketta.

Android-laitteissa on otettava käyttöön Sijaintipalvelut, kun Bluetooth-laitteista muodostetaan laitepari ensimmäisen kerran. Alkuasennuksen jälkeen voit taas poistaa sijaintipalvelut käytöstä.


*Yhteensopiva tiettyjen kuulokojeiden kanssa.

Vieraile osoitteessa <https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> tai ota yhteys kuulokojeistasi vastaavaan kuuloalan ammattilaiseen.

**Bluetooth-suoratoisto: Voit suoratoistaa musiikkia tai vastaanottaa puheluita kuulokojeisiin valitsemalla Asetukset > Bluetooth ja lisäämällä kuulokojeet liitettyjen laitteiden luetteloon. Jatka sen jälkeen laiteparin muodostusta palaamalla sovellukseen.

Laiteparin muodostaminen yhteensopivien kuulokojeiden kanssa*

Yhdistä Bluetooth-toiminnolla varustetut kuulokojeet myPhonak Junior -sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita.**

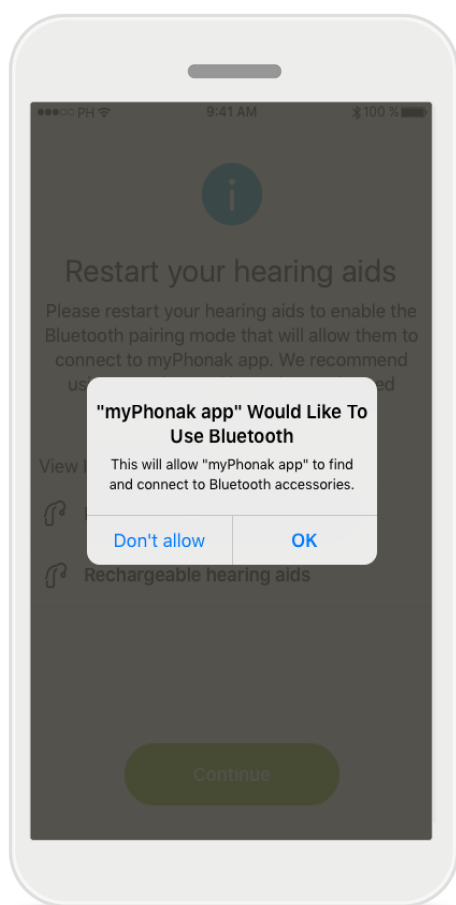


Kuulokojeiden parinmuodostus

Sovellus muodostaa yhteyden kumpaankin kuulokojeeseen erikseen.

Kun näet kehoitteen, vahvista laiteparin muodostus napauttamalla valintaikkunassa **Parita** erikseen kummankin laitteen kohdalla.

Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.

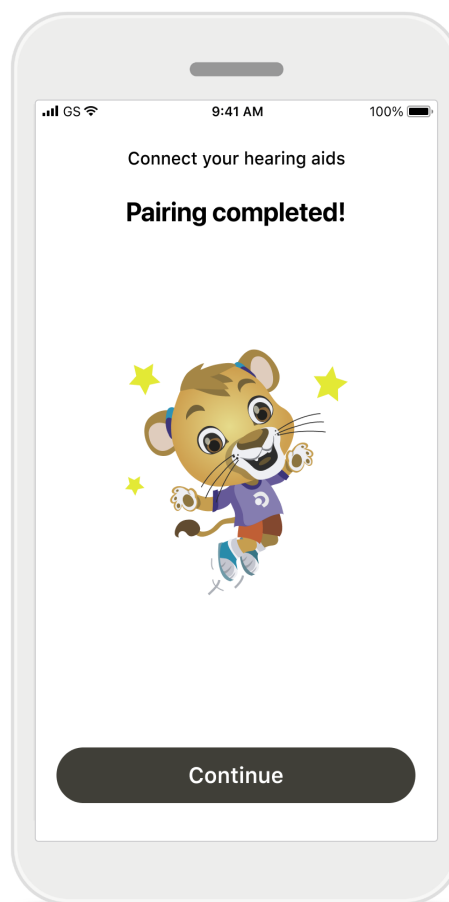

Asennus valmis

Nyt voit käyttää kaikkia sovelluksen yhteensopivia toimintoja. Siirry päänäyttöön valitsemalla **Jatka**.

Voit katkaista kuulokojeiden yhteyden sovellukseen valitsemalla **Katkaise yhteys** Minun kuulokojeeni -osiossa.

Jos haluat käyttää sovellusta uudelleen myöhemmin, sinun on yhdistettävä kuulokojeet sovellukseen uudelleen.

*Yhteensopiva tiettyjen kuulokojeiden kanssa. Vieraile osoitteessa <https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> tai ota yhteys kuulokojeistasi vastaavaan kuuloalan ammattilaiseen.

**Bluetooth-suoratoisto: Voit suoratoistaa musiikkia tai vastaanottaa puheluita kuulokojeisiin valitsemalla Asetukset > Bluetooth ja lisäämällä kuulokojeet liitettyjen laitteiden luetteloon. Jatka sen jälkeen laiteparin muodostusta palaamalla sovellukseen.

Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön myPhonak Junior -sovelluksessa noudattamalla alla olevia ohjeita.

1

Lapsilukon käyttöönotto

Lapsilukon voi ottaa käyttöön joko sovelluksen käyttöönoton aikana **Oma profiilisi** -osiossa tai myöhemmin vanhemman/ huoltajan valitsemana aikana. Tämän toiminnon avulla voi rajoittaa etätuen, äänenvoimakkuussäädön erotuksen ja ladattavien kuulokojen automaattisen käynnistystoiminnon käyttöä sekä puheluiden Bluetooth*-kaistanleveyden valintaa.

2

Luo PIN-koodi

Määritä 4-numeroinen PIN-koodi lapsilukon ottamiseksi käyttöön. PIN-koodin voi vaihtaa tai palauttaa milloin tahansa vanhemman/ huoltajan valitsemana ajankohtana.

3





Varmistuskysymys

Valitse varmistuskysymys ja kirjoita siihen oikea vastaus. Jos unohdat 4-numeroisen PIN-koodisi, pääset rajoitettuihin toimintoihin vastaamalla tähän kysymykseen.

4


Lapsilukko käytössä

Kun olet valinnut varmistuskysymyksen ja kirjoittanut vastauksen siihen, voit ottaa lapsilukon käyttöön. Lapsilukko voidaan myös poistaa käytöstä sovelluksen valikossa, jos sitä ei tarvita.

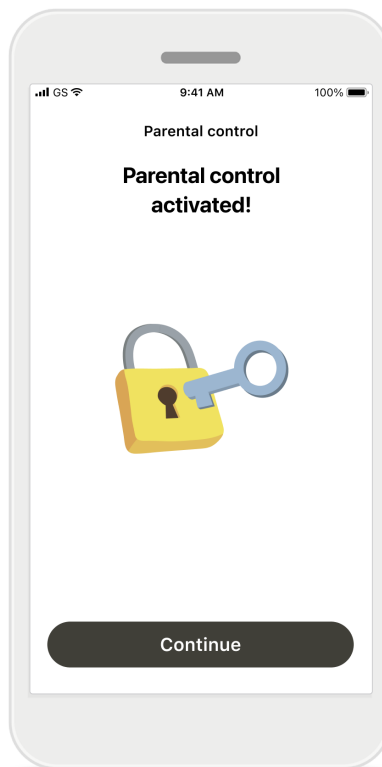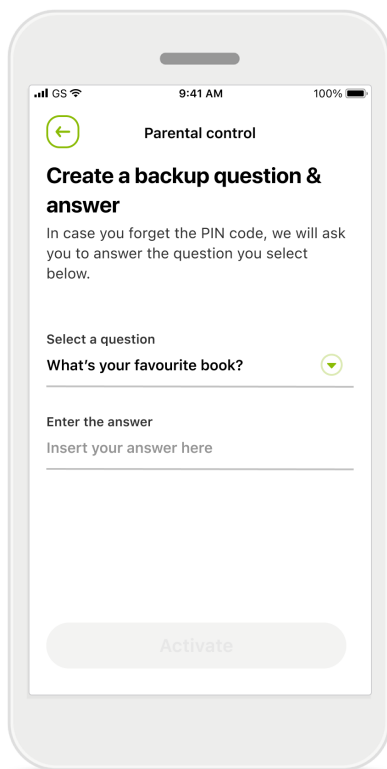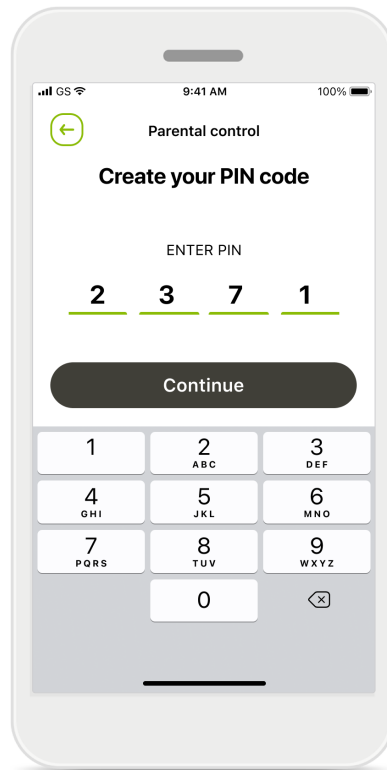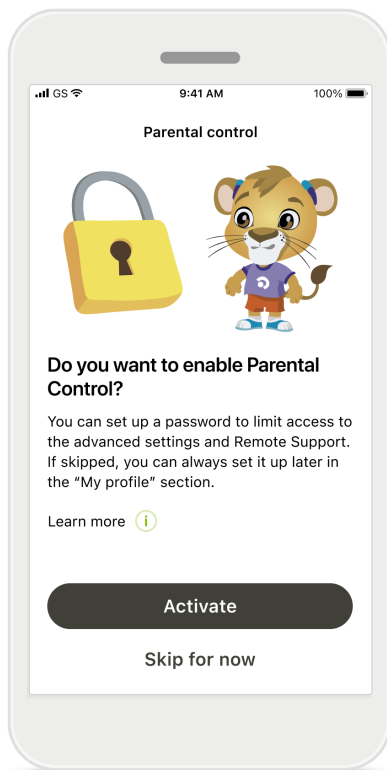


Mukauttaminen

Jos haluat käyttää myPhonak Junior -sovelluksen mukautusasetuksia, noudata alla olevia ohjeita. Voit aloittaa mukauttamisen joko käyttöönoton aikana tai myöhemmin aloitusnäytön Oma profiilisi -osiosta.

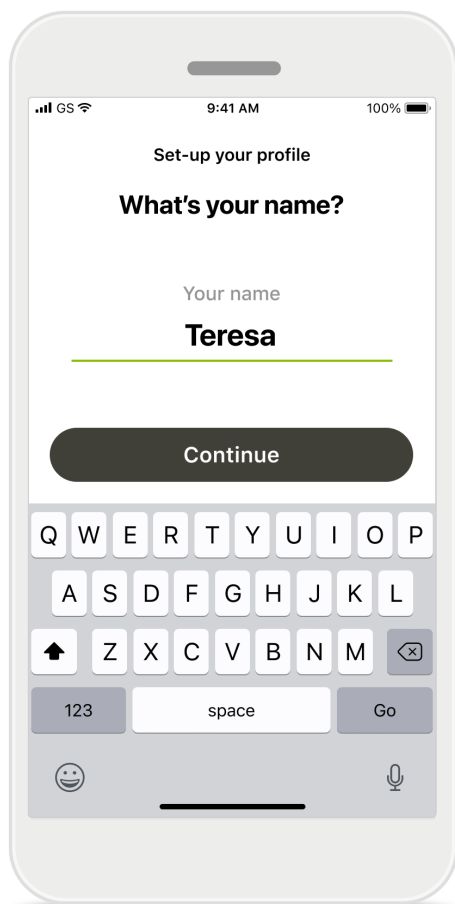

Käyttäjäprofiilin nimi

Valitse käyttäjänimi ja profiilikuva. Tämä vaihe voidaan ohittaa ja tehdä myöhemmin Oma profiilisi -osiossa.

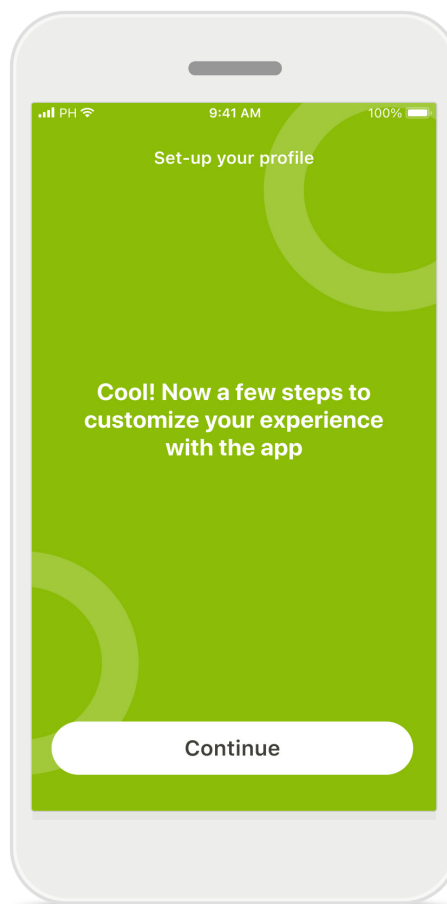


Lisäasetukset

Mukautusasetuksiin kuuluvat myös sovelluksen taustaväriteeman vaihtaminen sekä virtuaalisten kuulokojeiden ja kourun värin vaihtaminen.

Parinmuodostuksen vianmääritys


Mahdollisia virheitä laiteparin muodostusprosessin aikana.
Lisätietoja vianmäärityksestä saat Phonakin tukisivulta.

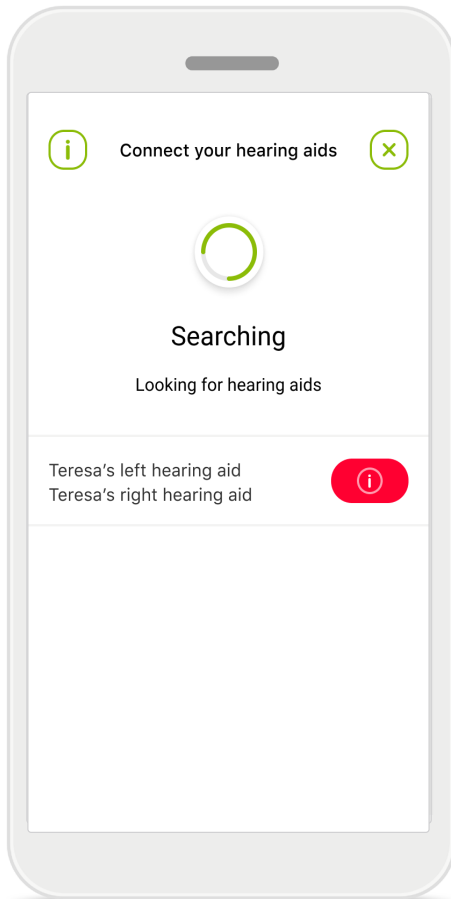

Laitteet eivät ole yhteensopivat

Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä laitteisiin, koska ne eivät ole yhteensopivia sovelluksen kanssa.

Pyydä kuuloalan ammattilaiselta lisätietoja.

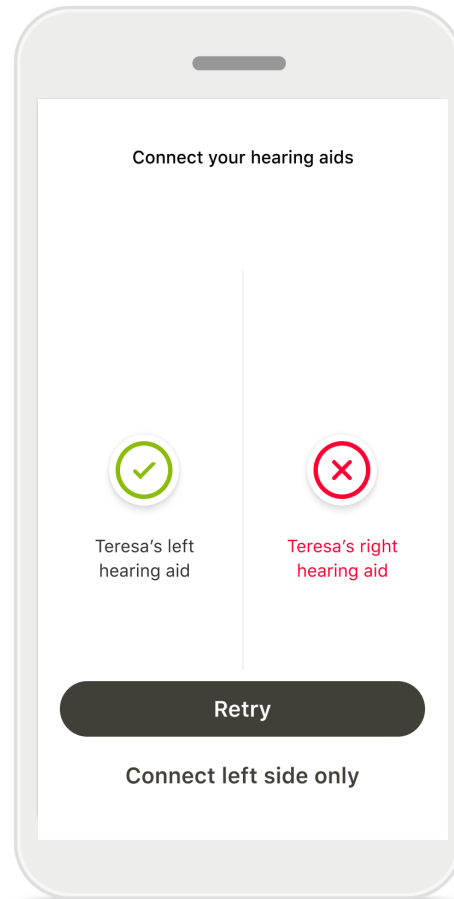


Kuulokojeen yhteysvirhe

Jos laiteparin muodostaminen toisen kuulokojeista kanssa epäonnistuu, voit toimia toisella seuraavista tavoista:

1. Aloita pariliitoksen muodostaminen uudelleen valitsemalla **Yritä uudelleen**.
2. Jatka vain toisen kuulokojeen kanssa.

Kaukosäätimen päänäyttö

Toiminnot, joita voi käyttää kaikille kuulokojeille.

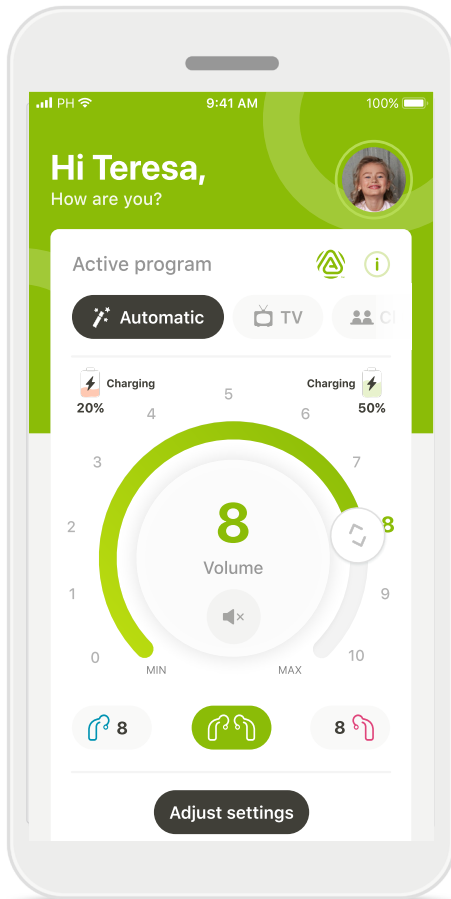


Kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pyöräliukusäätimellä.

Aktiivisen ohjelman vaihtaminen

Napauttamalla jotain käytettävissä olevista ohjelmista voit säätää kuulemista tietyn kuunteluympäristön mukaan. Käytettävissä olevat ohjelmat riippuvat siitä, miten kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeet.

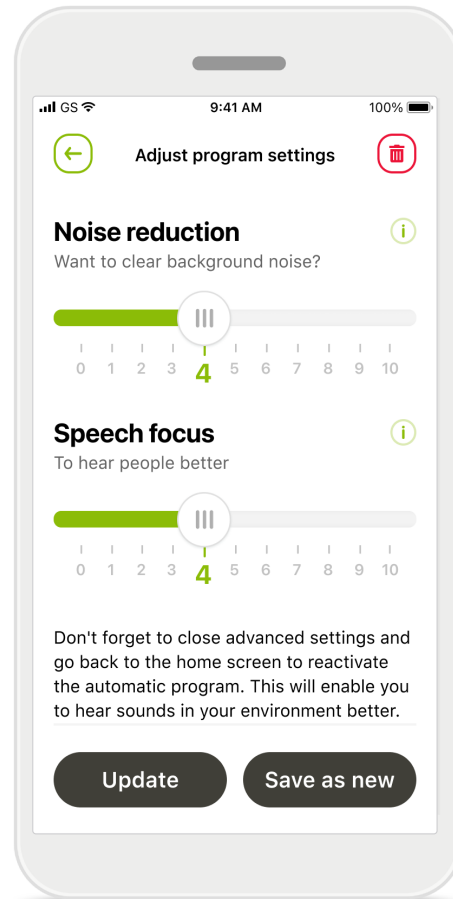

Säädä asetuksia



Asetusnäkyvästä pääset seuraaviin toimintoihin:

- Hälynvaimennus
- Keskittyminen puheeseen

Saat enemmän tietoja eri toiminnoista painamalla -kuvaketta. Voit mykistää kuulokojeen (tai kuulokojeet) painamalla **Mykistys** -kuvaketta. Jos akun varaustila on alle 20 %, kuvake muuttuu punaiseksi. Lataa kuulokojeesi pian.

Auracast™-lähetyksen käyttäminen*

Auracast™-lähetyksominaisuuden avulla voit kuunnella suoria äänilähetyksiä televisiosta, teattereissa, konserteissa ja muissa Auracast™-tekniikkaa tukevista paikoista.

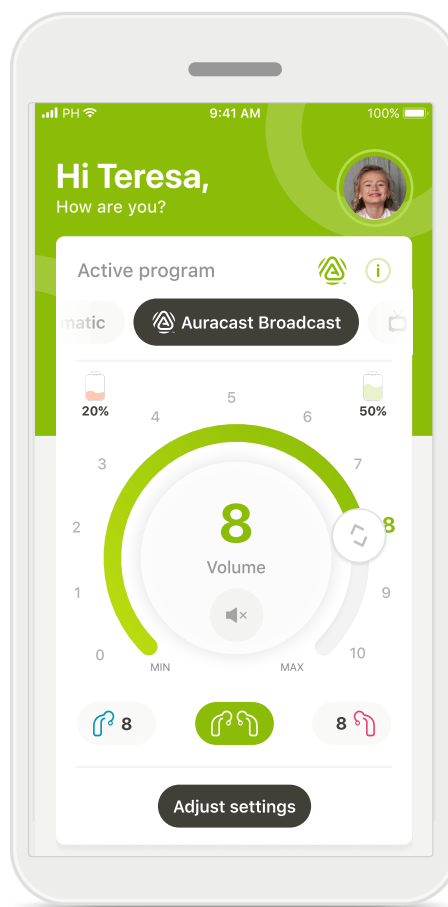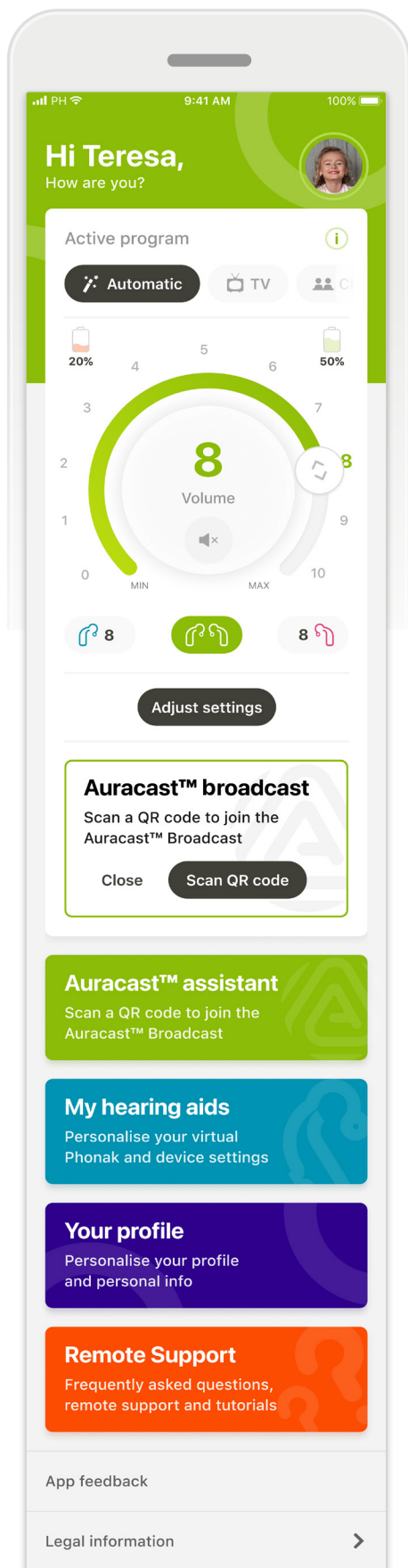

Voit avata Auracast™-lähetyksen joko napauttamalla **Auracast™-avustajan** ruutua tai aloitusnäytön **Auracast™-lähetyskuvaketta**.

Molemmissa vaihtoehdoissa lähetykseen voi liittyä skannaamalla QR-koodi.

Kun lähetyksen tiedot näkyvät myPhonak Junior -sovelluksessa, napauta **Liity lähetykseen**, minkä jälkeen ääni lähetetään automaattisesti kuulokojeisiisi.


Jos olet jo muodostanut yhteyden Auracast-lähetykseen, **Auracast™**-ohjelma näkyy ohjelmakarusellissa aloitusnäytön yläosassa. Valitsemalla karusellista **Auracast™** pääset nopeasti kuuntelemaan kyseistä Auracast™-lähetystä.

* Käytettävissä vain tietyissä kuulokojeissa. Siirry osoitteeseen <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> tai käännä kuuloalan ammattilaisen puoleen.

Etätuki-istunto

Jos käytät mobiilidataa, operaattorisi saattaa laskuttaa siitä. Tarkista asia operaattoriltasi ennen Phonak-etätukipuhelun aloittamista.

10 minuutin etätukivideopuhelu kuluttaa noin 56 Mt dataa, kun taas pelkkään äänipuheluun kuluu noin 30 Mt.

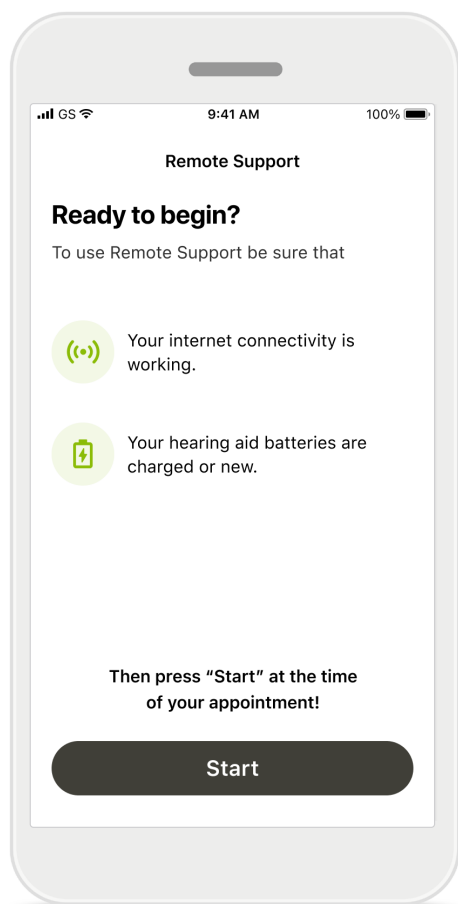


Etätukipuhelun aloittaminen

Kun tapaamisaikasi alkaa, avaa myPhonak Junior -sovellus ja valitse **Aloita**, niin kuuloalan ammattilainen saa tiedon siitä, että olet valmiina Phonak Remote -etätukipuheluun.

Salli myPhonak Junior -sovelluksen käyttää kameraasi ja mikrofoniaasi valitsemalla **OK**.

Jos sinulla on Android-älypuhelin, salli myPhonak Junior -sovellukselle puhelujen soittaminen ja hallinta valitsemalla **SALLI**.

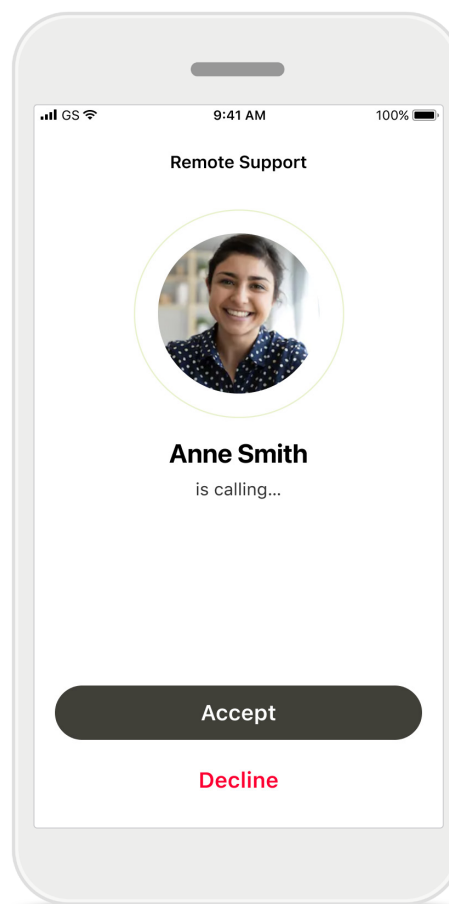


Videopuhelujen hyväksyminen

Sovellus muodostaa yhteyden kuuloalan ammattilaiseen. Hyväksy kuuloalan ammattilaisen puhelu valitsemalla **Hyväksy**.


Etätuki-istunto

Voit halutessasi tehdä etätukipuhelustasi yksilöllisemmän ottamalla videokuvan tai äänen käyttöön tai poistamalla sen käytöstä.

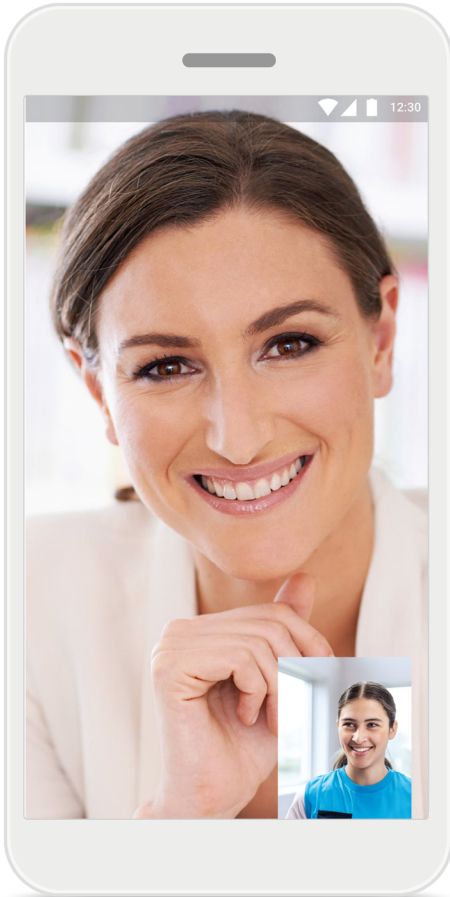

Videopuhelun aloittaminen

Muutaman sekunnin kuluttua videoyhteys on määritetty ja näet kuuloalan ammattilaisen.

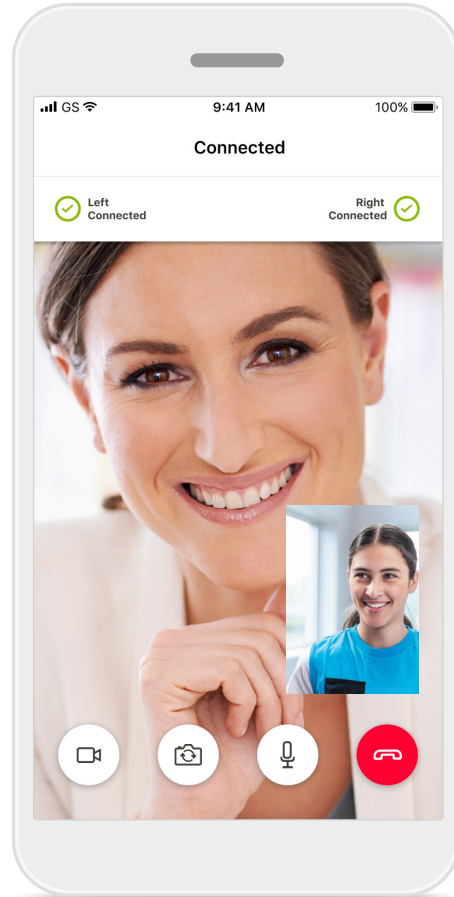

Yhdistetyt kuulokojeet

Jos kuuloalan ammattilaisen on muodostettava yhteys kuulokojeisiisi, se voidaan tehdä etänä älypuhelimesi avulla.



Kuuloalan ammattilainen kertoo sinulle, kun hän muodostaa yhteyden kuulokojeisiisi.

Jos haluat piilottaa oman videokuvasi, voit ottaa videokuvan pois käytöstä painiketta napauttamalla.

Kuulokojeesi mykistetään hetkeksi yhteyden muodostamisen aikana ja kun asetuksia tallennetaan. Näet prosessin tilan näytöllä.


Minun kuulokojeeni

Toiminnot, jotka riippuvat kuulokojeen ohjelmoinnista ja sovelluksen kanssa pariliitetyistä langattomista lisälaitteista.

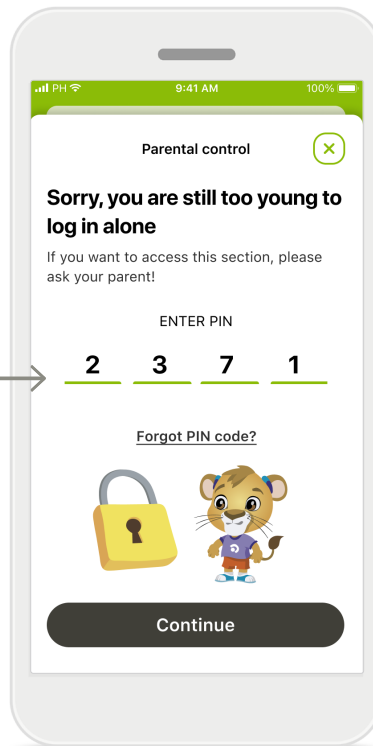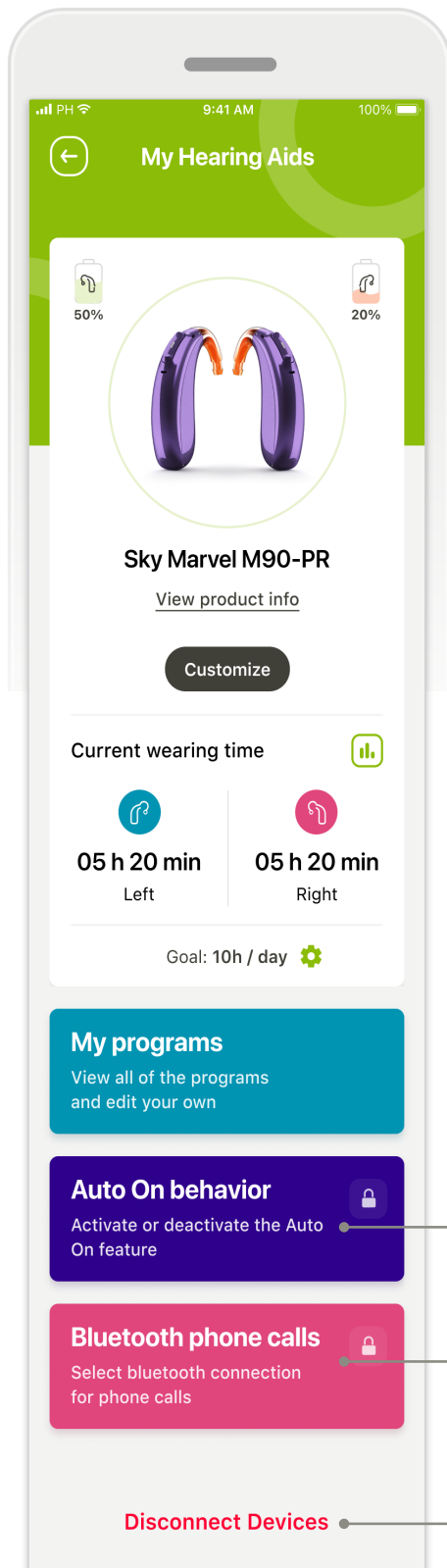

Lapsilukko

Lapsilukko estää pieniä lapsia katkaisemasta vahingossa yhteyttä kuulokojeisiinsa.

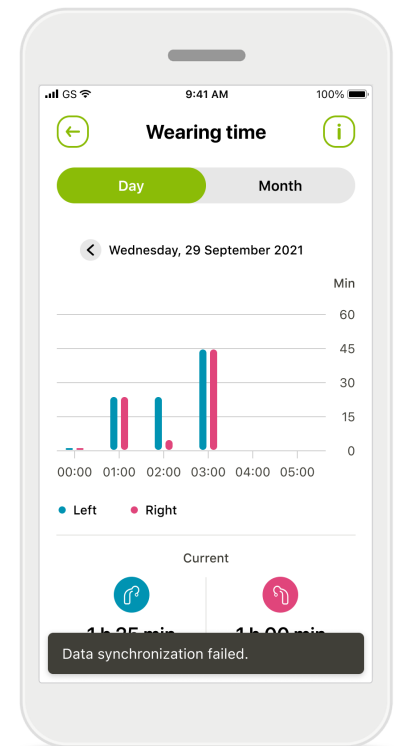

Käyttöaika

Käyttöaika näyttää yhteenvedon kummankin kuulokojeen päivittäisestä ja kuukausittaisesta käyttöajasta sekä lapsesi kuunteluympäristöjen tyypeistä. Kuulokojeet, joissa on ladattavat akut, antavat eniten tietoja.

Minun kuulokojeeni

Minun kuulokojeeni -näyttö sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat akun tilaa (akuilla varustettujen kuulokojeiden tapauksessa), kuulokojetyyppiä, Roger-lisenssien asennusta, käyttöaika, omia ohjelmia, automaattista käynnistystä ja Bluetooth-puheluita. Voit myös mukauttaa kuulokojeiden ulkomuotoa tässä näytössä.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttämistä.

Käyttötarkoitus:

Sovellus on erillinen ohjelma, joka on tarkoitettu kuulokojeen asetusten valintaan, määrittämiseen ja tallentamiseen sovitushjelman alueen sallimissa rajoissa. Sovelluksen avulla kuulokojeiden käyttäjät voivat myös olla yhteydessä ja kommunikoida kuuloalan ammattilaisten kanssa kuulokojeen etäsäätiä varten.

Kohdekäyttäjä:

Vähintään 10-vuotias yhteensopivaa laitetta käyttävä henkilö, jolla on kuulonalenema, sekä hänen huoltajansa tai hoitajansa.

Kohdepotilaat:

Tämä laite on tarkoitettu vähintään 10-vuotiaille potilaille, joiden tila vastaa yhteensopivan kuulokojeen kliinistä käyttöaihetta.

Käyttöaiheet

Huomaa, että käyttöaiheet eivät koske sovellusta, vaan yhteensopivia kuulokojeita. Katso tarkemmat tiedot kuulokojeen käyttöohjeesta.

Vasta-aiheet:

Huomaa, että vasta-aiheet eivät koske sovellusta, vaan yhteensopivia kuulokojeita.

Haittavaikutukset:

Sovelluksen käyttöön ei liity tunnettuja haittavaikutuksia.

Kliininen hyöty

Kliinistä hyötyä ei saada sovelluksesta, vaan yhteensopivista kuulokojeista. Sovellus hyödyttää kohdekäyttäjiä tarjoamalla mahdollisuuden säätää kuulokojeen asetuksia kuuloalan ammattilaisen tekemän sovituksen sallimissa rajoissa.

Sovelluksen avulla kohdekäyttäjät voivat olla kätevästi yhteydessä ja kommunikoida kuuloalan ammattilaisten kanssa kuulokojeen etäsäätiä varten.

Sovellukseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajan edustajalle sekä käyttäjän asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka on suoraan tai välillisesti johtanut tai saattanut johtaa johonkin seuraavista:

- a. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- b. potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- c. vakava kansanterveydellinen uhka

Jos haluat ilmoittaa odottamattomasta toiminnasta tai tapahtumasta, ota yhteyttä valmistajaan tai edustajaan.

Käytön rajoitukset:

Sovellusta voi käyttää vain yhteensopivien laitteiden mahdollistamiin toimintoihin. Katso yksityiskohtaisemmat tiedot kuulokojeen käyttöohjeesta.

Ota huomioon, että täyden hyödyn saaminen sovelluksesta edellyttää vakaata internet-yhteyttä.

Tietoturvailmoitus:

Potilastiedot ovat yksityisiä, ja niiden suojaaminen on tärkeää:

- Varmista, että älypuhelimien käyttöjärjestelmään on päivitetty uusimmat turvallisuuspäivitykset. Ota automaattiset päivitykset käyttöön.
- Varmista, että asennettu sovelluksen versio on ajan tasalla.
- Käytä kuulokojeiden kanssa vain virallisista sovelluskaupoista ladattuja aitoja Sonova-sovelluksia.
- Asenna vain luotettavia sovelluksia virallisista sovelluskaupoista.
- Varmista, että käytät vahvoja salasanoja ja pidät tunnistetietosi salaisina.
- Lukitse puhelimesi PIN-koodilla ja/tai biometrisellä tunnisteella (esim. sormenjälki- tai kasvotunnistuksella) ja aseta puhelin lukittumaan automaattisesti muutaman minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Varmista, että asennetuilla sovelluksilla on vain tarvittavat käyttöoikeudet.
- Vältä Bluetooth-laiteparin muodostamista kuulokojeiden kanssa julkisella paikalla. Näin vältetään ulkopuolisten tahojen aiheuttamat epätoivotut häiriöt. Bluetooth-laiteparin muodostaminen on suositeltavaa tehdä kotona.
- ÄLÄ käytä puhelinta, johon on tehty luvattomia muutoksia (jailbreikkaus tai roottaus).

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttämistä.

Varmista, että tiedot ovat aina turvassa. Huomioi, että tämä luettelo ei ole täydellinen.

- Kun siirrät tietoja riskialttiiden kanavien kautta, lähetä tiedot nimettömästi tai salaa ne.
- Suojaa älypuhelimien tietojen varmuuskopiot paitsi tietojen menetyksen, myös varkauden varalta.
- Poista kaikki tiedot älypuhelimesta, jota et enää käytä tai joka hävitetään.

Ohjelman ylläpito:

Seuraamme jatkuvasti palautetta, jota saamme markkinoilta. Jos havaitset ongelmia uusimmassa sovellusversiossa, ota yhteyttä paikalliseen valmistajan edustajaan ja/tai anna palautetta App Storessa tai Google Play -kaupassa.

Kaikkien sovellusversioiden käyttöohje kaikilla saatavilla kielillä on luettavissa sähköisessä muodossa verkkosivustolla. Voit lukea käyttöohjeet toimimalla seuraavasti:

- Napsauta linkkiä <https://www.phonak.com/en-int/support-options> ja valitse haluamasi maa
- Valitse kohta "Support" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "User Guides" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse kohta "Apps" (englanti) tai vastaava sivu omalla kielelläsi
- Valitse "myPhonak Junior app"

myPhonak Junior -sovelluksen käyttöohjeen uusin versio on mahdollista avata myös suoraan sovelluksesta siirtymällä Tuki-osioon ja napauttamalla Käyttöohje-korttia. Käyttöohje avautuu ulkoiseen selainikkunaan.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttämistä.



Asetusten muuttaminen, kuten äänenvoimakkuuden pienentäminen tai hälynvaimennuksen lisääminen, voi aiheuttaa vaaratilanteita, joissa esimerkiksi vastaantulevaa liikennettä ei enää kuulla.



Jos kuulokojeet eivät vastaa, tarkista, oletko kantamatkan sisällä, ovatko kuulokojeet päällä ja onko paristoissa tai akuissa virtaa. Jos voimakas sähkömagneettinen kenttä voi aiheuttaa häiriöitä yhteyteen, siirry pois häiritsevästä kentästä.



Ota Bluetooth käyttöön. Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää kuulokojeet.



Olet itse vastuussa oman älypuhelimesi käytöstä. Käsittele älypuhelimta varovasti ja ole huolellinen sovelluksen käytössä.



Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa: vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, että tämä tuote täyttää
lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU)
2017/745 vaatimukset.

Merkkien selitykset



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.



Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää kiinnittää huomiota tässä käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.



Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.



CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, että tämä tuote täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset. CE-symbolin perässä olevat numerot vastaavat niiden sertifioitujen laitosten koodia, joita konsultoitin yllä mainitun asetuksen mukaisesti.



Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan unionin. EU-edustaja on myös Euroopan unionin maahantuoja.



Tämä ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite.



Nimi, osoite, päiväys

Yhdistetty symboli, joka ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan ja valmistuspäivämäärän EU:n asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti.



Tämä osoittaa, että saatavilla on sähköiset käyttöohjeet. Ohjeet voi lukea osoitteesta www.phonak.com/myphonakapp



Tämä ilmoittaa valmistajan luettelonumeron, jotta lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Saksa



Valmistaja:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveitsi
www.phonak.com

V3.00/2026-08/ZT © 2021–2026 Sonova AG All rights reserved

Tämä käyttöohje koskee myPhonak Junior 2.1 –versiota ja myPhonak Junior 2 –sovelluksen tulevia aliversioita. Sovelluksen käyttöohjeen aiemman version saat ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan tai etsimällä verkkosivulta.

Jos haluat ilmaisen paperiversion käyttöohjeista, ota yhteyttä paikalliseen Sonova-edustajaan. Paperiversio lähetetään yleensä seitsemän päivän kuluessa.

