


5

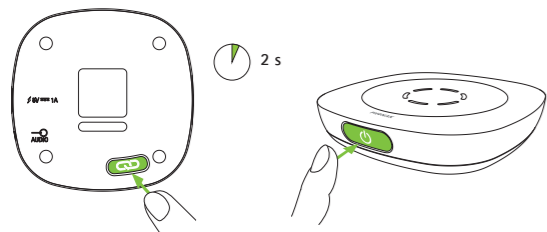


Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de aan/uitknop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

6

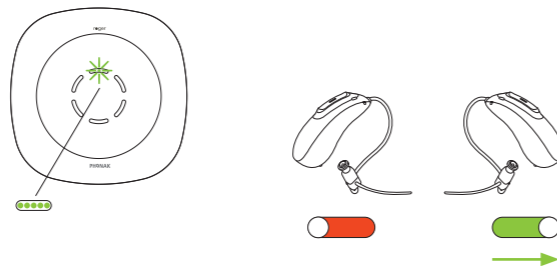


You should see a flashing green LED now. Switch on your right hearing aid and place it close to Roger Table Mic.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Table Mic.

Vous devriez voir maintenant une LED verte clignotante. Allumez votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger Table Mic.

U zou een knipperende groene LED moeten zien. Schakel nu uw rechterhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger Table Mic.

7

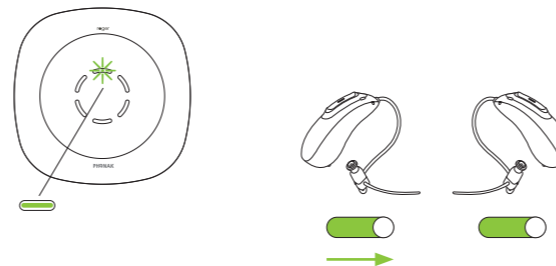


Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Wacht een paar seconden totdat u een groene, ononderbroken LED en schakel vervolgens uw andere hoortoestel in.

Model: Roger Table Mic 3

 Sonova Communications AG  
Herrenschwandweg 4  
CH-3280 Murten  
Switzerland

[www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

**sonova**  
HEAR THE WORLD

**PHONAK**  
life is on

A Sonova brand



7 613385 747898

029-3373-49/V1.00/2024-03/na © 2024 Sonova AG. All rights reserved


# Roger™

RogerDirect™ Setup Guide for Roger Table Mic  
RogerDirect™ Verbindungsanleitung für Roger Table Mic  
Guide de connexion RogerDirect™ pour Roger Table Mic  
RogerDirect™ installatiehandleiding voor Roger Table Mic



**roger**

1

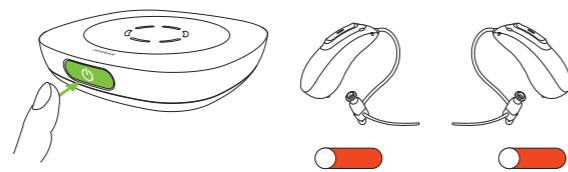


Switch on your Roger Table Mic.

Schalten Sie den Roger Table Mic ein.

Allumez votre Roger Table Mic.

Schakel uw Roger Table Mic in.

2

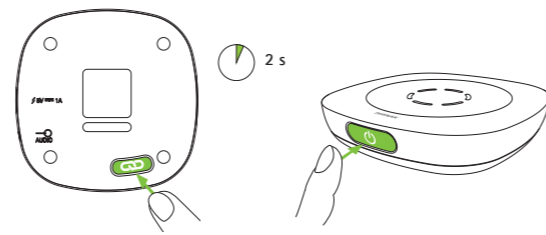


Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de aan/uitknop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

3

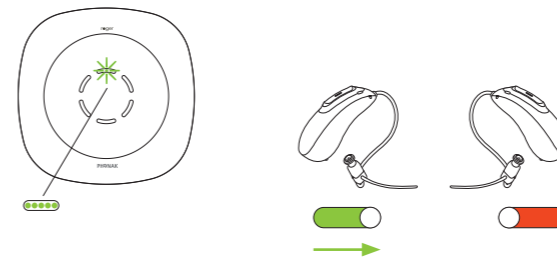


You should see a flashing green LED now. Switch on your left hearing aid and place it close to Roger Table Mic.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Table Mic.

Vous devriez voir une LED verte clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger Table Mic.

U zou een knipperende groene LED moeten zien. Schakel nu uw linkerhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger Table Mic.

4

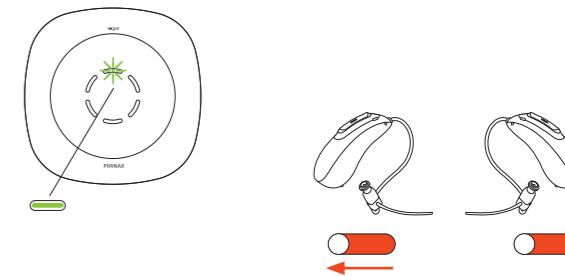

Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie dann Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Eteignez maintenant votre aide auditive gauche.

Wacht een paar seconden totdat u een groene, ononderbroken LED ziet en schakel vervolgens uw linkerhoortoestel uit.