

# Phonak Roger Upgrader™

## Guide rapide de mise à jour du microprogramme de Roger On™



Roger Upgrader™ est un outil conçu pour mettre à jour le microprogramme de votre appareil Roger On afin d'assurer une efficacité maximale.

### Pré-requis


1. Téléchargez Roger Upgrader version 1.27 ou supérieure



2. Installez Roger Upgrader et ouvrez l'application

1


Connectez votre microphone Roger à votre ordinateur à l'aide du câble fourni

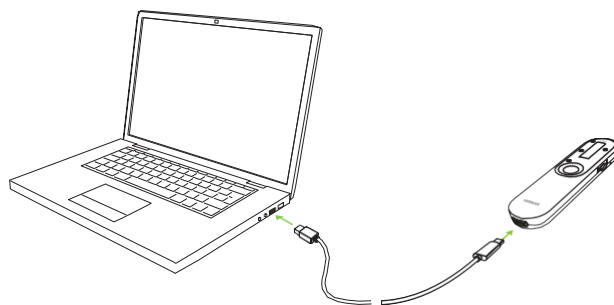

2


Cliquez sur « Manual firmware change »

(Changement manuel du microprogramme)

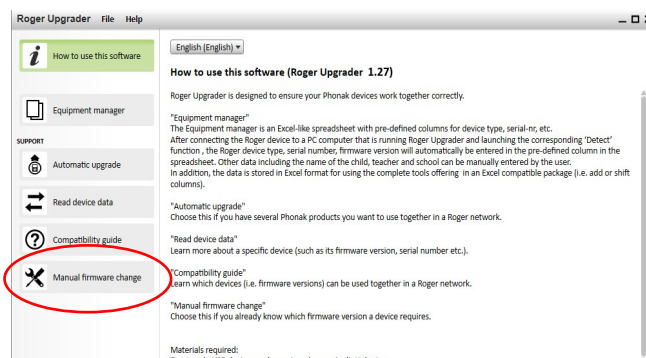


3

Cliquez sur « Start assistant » (Démarrer l'assistant)

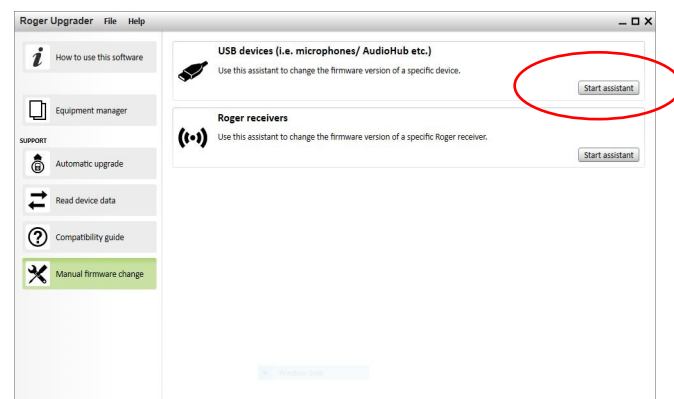


4

Cliquez sur « Continue » (Continuer)

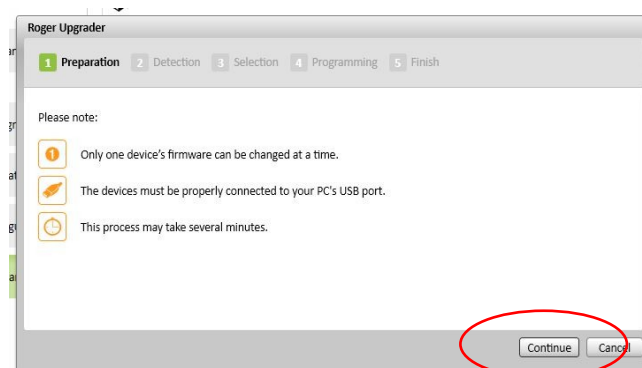

5

Sélectionnez la version du microprogramme et cliquez sur « Continue » (Continuer)

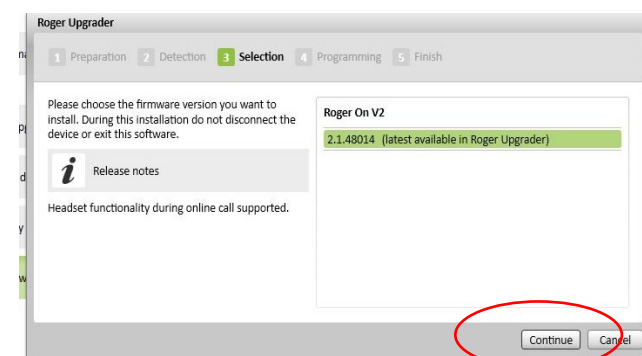



Sonova Communications •  
Herrenschwandweg 4 •  
3280 Murten •  
Suisse

[www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

**sonova**  
HEAR THE WORLD\*



\*Entendre le monde

Guide rapide de mise à jour du microprogramme de Roger On™

/V1.00/2023-06/NLG© 2023 Sonova AG Tous droits réservés