

myRogerMic 1.0

Használati útmutató



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Az első lépések

A myRogerMic a hallási megoldások terén világszerte svájci vállalat, a zürichi székhelyű Sonova által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy az alkalmazás minden előnyét élvezhesse.

Rendeltetésszerű használat

A myRogerMic app a meglévő Roger On™ funkciók kiválasztására, módosítására és mentésére szolgál, illetve segítségével vezeték nélkül, vizuálisan megjelenítve férhet hozzá az állapotinformációkhoz.



Kompatibilitási információk:

A myRogerMic app Phonak Roger On™ vagy Phonak Roger On™ iN eszközzel használható.

A myRogerMic alkalmazást olyan, Bluetooth® Low-Energy (LE) technológiát támogató telefonokon használhatja, amelyek kompatibilisek a 13-as vagy újabb verziójú iOS® operációs rendszerekkel.

Az alkalmazást a Google Mobile Services (GMS) igénybevételére alkalmas, 4.2-es Bluetooth®-kapcsolatot támogató, 7.0-ás vagy újabb verziójú Android™ operációs rendszerrel rendelkező Android™-eszközökön használhatja.

A Bluetooth® szövevény és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik

Az iPhone® az Apple Inc. tulajdonát képező, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.


Az Android™ a Google LLC. védjegye

Az iOS® a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatai tulajdonát képező védjegy vagy bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban, ahol a Cisco Inc. jelen van.

Tartalom


Az első lépések	2
Gyors áttekintés	3
A myRogerMic app telepítése	4
Párosítás a Roger On eszközzel	5
A párosítás hibaelhárítása	6
A Roger On eszközökkel való csatlakozási problémák hibaelhárítása	7
A mikrofonüzemmód funkciói	8
Nyalábirányítás	9
Egyéni üzemmód létrehozása	10
MultiBeam 2.0 technológia	11
A Roger On eszköz(ök) hozzáadása, kiválasztása és eltávolítása	12
MultiTalker Network	13
Egyéb funkciók	14
A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók, A szimbólumok magyarázata	15

Gyors áttekintés

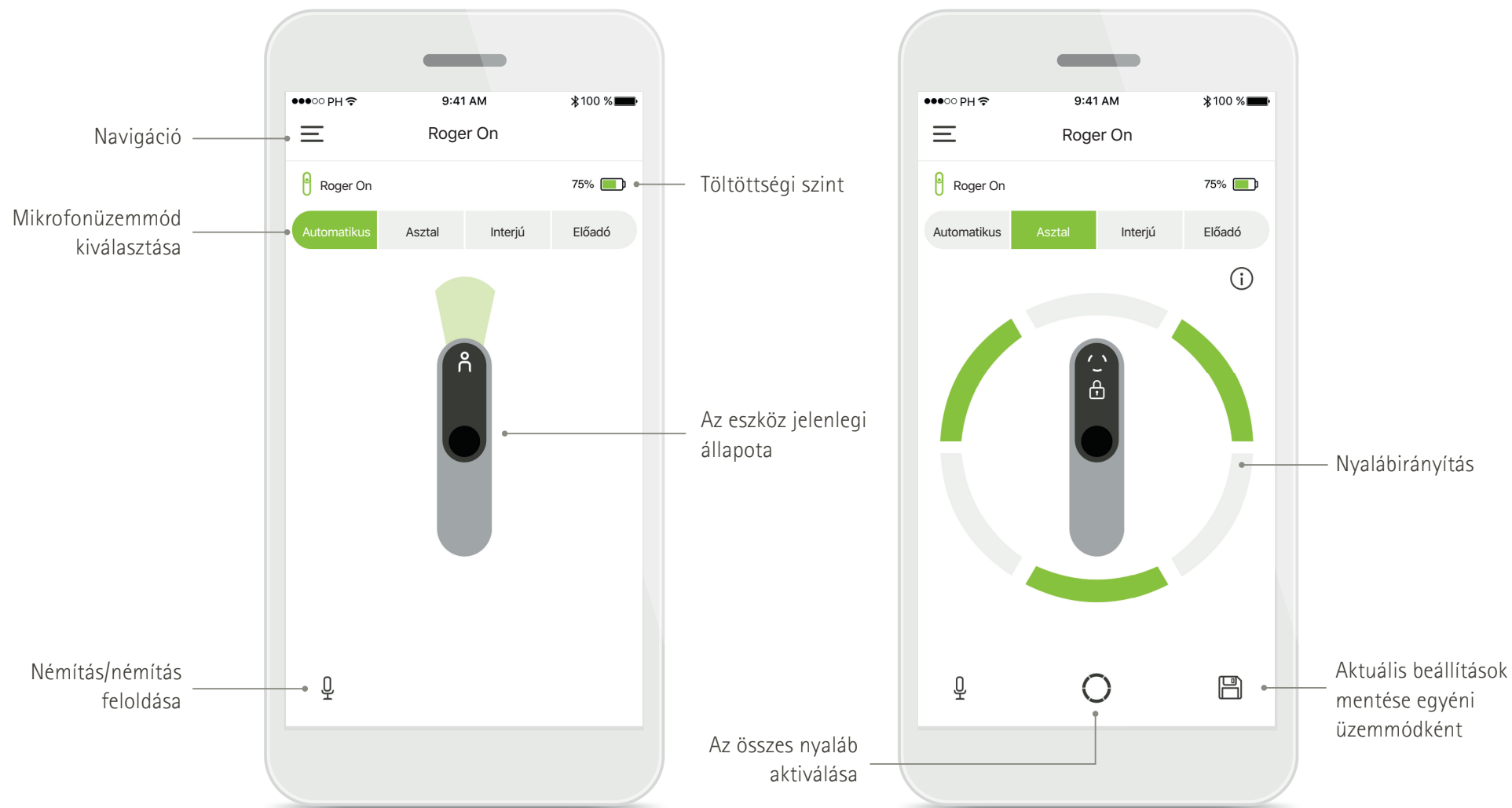


A myRogerMic app telepítése

- Csatlakozzon okostelefonjával az internetre wifi vagy mobiladat-kapcsolat használatával
- Kapcsolja be okostelefonján a Bluetooth®-funkciót

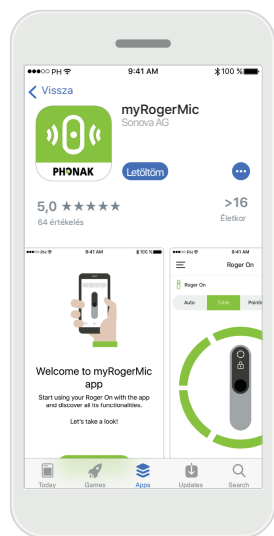


A myRogerMic app letöltése

Töltse le az alkalmazást az áruházból. Miután telepítette, nyissa meg a myRogerMic appot.

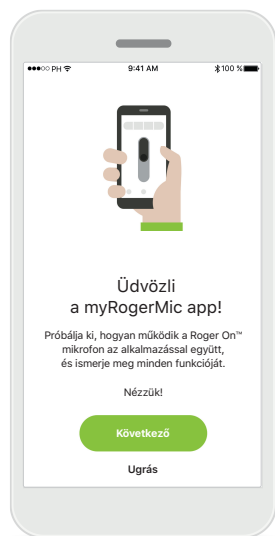


A myRogerMic app megnyitása

Nyissa meg az alkalmazást, majd koppintson a **Következő** lehetőségre, vagy az **Ugrás** lehetőségre a belépési információk átugrásához.

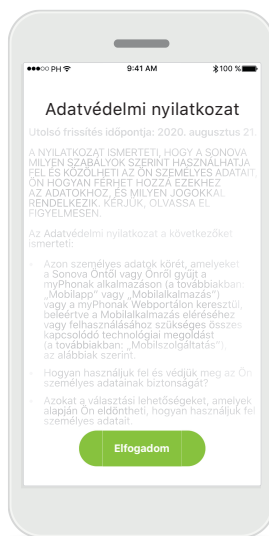

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alkalmazás használatához és a továbblépéshez az **Elfogadom** gombbal el kell fogadnia az adatvédelmi nyilatkozatot.

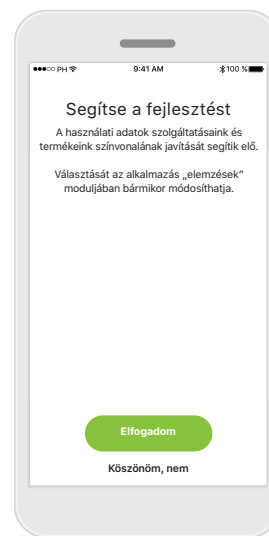

Termékfejlesztés

A használati adatok megosztása termékeink színvonalának javítását segíti elő.


Koppintson az **Elfogadom** lehetőségre, ha szeretné névtelenül megosztani a használati adatokat, vagy a **Köszönöm, nem** lehetőségre, ha nem kívánja megosztani azokat.

Párosítás a Roger On eszközzel


A myRogerMic app Roger On eszközzel való csatlakoztatásához kövesse az alábbi utasításokat. Legfeljebb tíz Roger On eszközt párosíthat az alkalmazással. Olvassa el a „A Roger On eszköz(ök) hozzáadása, kiválasztása és eltávolítása” című fejezetet, hogy megtudja, hogyan adhat hozzá több eszközt.




A párosítás menete
Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd koppintson a **Folytatás** lehetőségre.

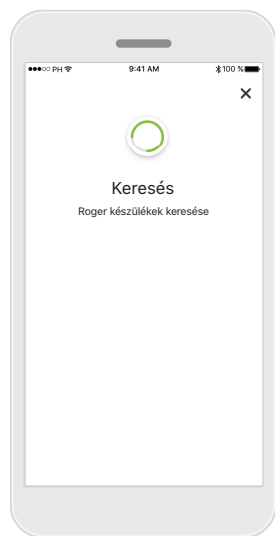

Keresés
Az alkalmazás Roger On eszközöket keres, és miután megtalálta, megjeleníti őket. Ez néhány másodpercig eltarthat.

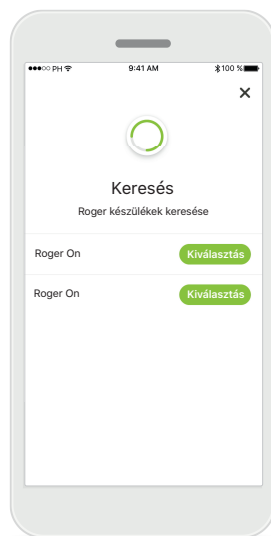

Kiválasztás
Amikor az Ön Roger On eszköze is megjelent a listán, koppintson a **Kiválasztás** lehetőségre. Egyszerre csak egy Roger On eszközt párosíthat. Minden Roger On eszközt külön kell párosítania.

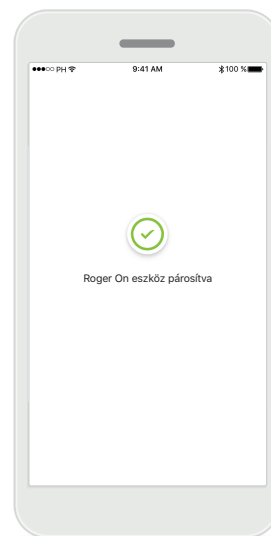


A párosítás befejeződött
Párosította a Roger On eszközt. Az alkalmazás automatikusan a következő lépésre ugrik.



A beállítás befejeződött
A myRogerMic app funkciói készen állnak a használatra. Koppintson az **OK** gombra a főképernyő előhívásához.

A párosítás hibaelhárítása


A beállítási folyamat során előforduló lehetséges hibák.

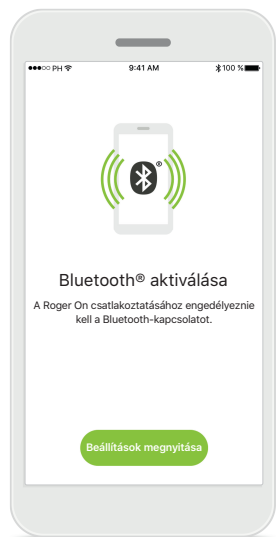

Bluetooth – iOS

A Roger On eszköz párosításához be kell kapcsolnia a Bluetooth-funkciót a mobiltelefonján.


Ha iPhone készülékkel rendelkezik, ezt a **Beállítások megnyitása** gombra kattintva is megteheti.

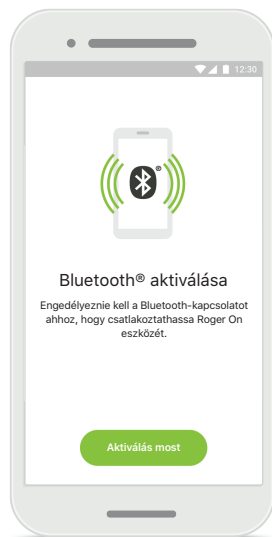

Bluetooth – Android


A Roger On eszköz párosításához be kell kapcsolnia a Bluetooth-funkciót a mobiltelefonján.

Ha Android készülékkel rendelkezik, az **Aktiválás most** gombra kattintva is bekapcsolhatja azt.

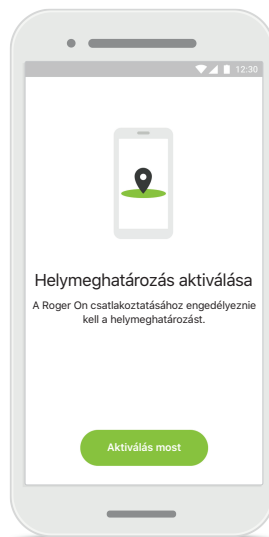

Helymeghatározás

Bluetooth eszközök első alkalommal történő párosításakor Android eszközökön engedélyezni kell a helymeghatározási szolgáltatásokat. A párosítás befejezése után a helymeghatározási szolgáltatások újra letilthatók.

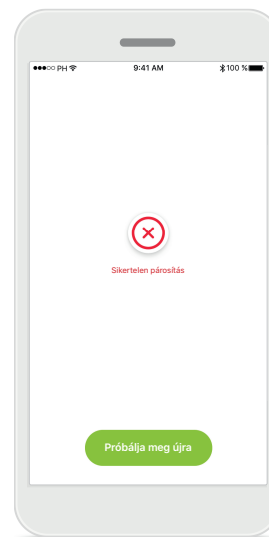


Sikertelen párosítás

Ha a párosítás sikertelen volt, a következőket teheti:

1. A párosítási folyamat újraindításához kattintson a **Próbálja meg újra** lehetőségre.
2. Zárja be az alkalmazást, és kezdje előlről a folyamatot.

A Roger On eszközökkel való csatlakozási problémák hibaelhárítása

A Roger On eszközhöz való csatlakozás során előforduló lehetséges hibák.

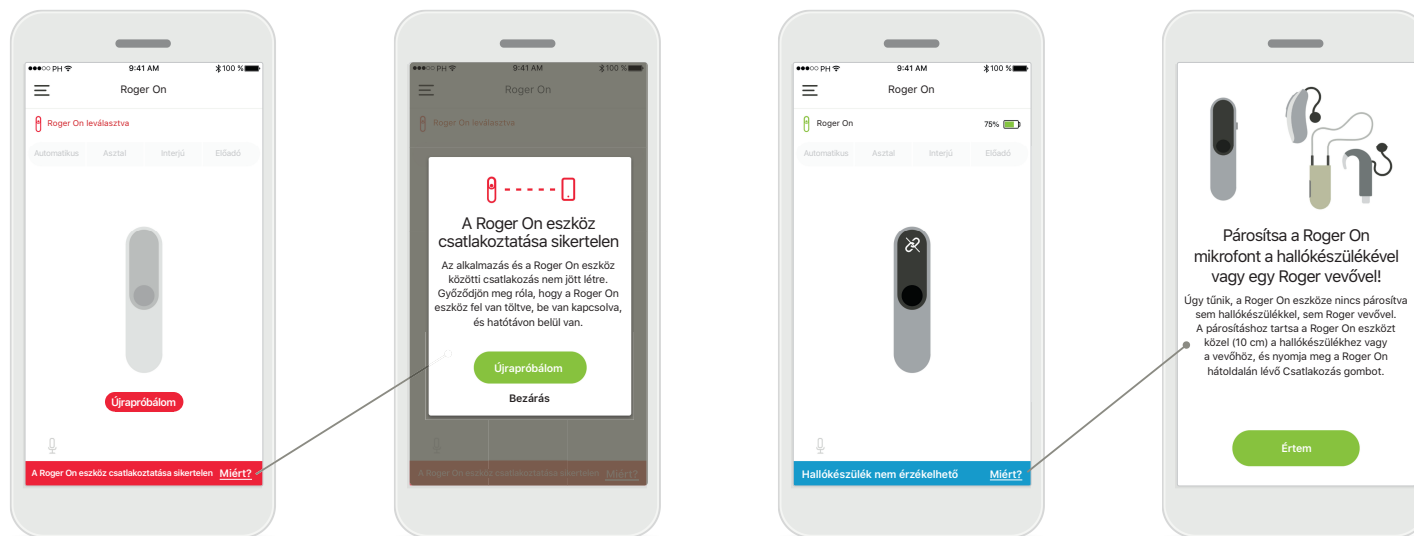

Sikertelen csatlakozás

Ha a myRogerMic app nem tud csatlakozni Roger On eszközhöz, győződjön meg a következőkről, majd próbálja újra csatlakoztatni:

- A Roger On eszköz be van kapcsolva, és az akkumulátor töltöttségi szintje nem alacsony vagy nincs lemerülve.
- A Roger On eszköz a Bluetooth-funkcióval ellátott mobiltelefonja hatótávolságán belül van.


Sikertelen csatlakozás – Utasítások

Koppintson a **Miért?** gombra, hogy megtudja, miért volt sikertelen a csatlakozás, és mit tehet a sikeres csatlakozás érdekében.

Hallókészülék nem érzékelhető


A Roger On eszköze nincs párosítva a hallókészülékével/ hallókészülékeivel. A **Miért?** gombra koppintva utasításokat talál a Roger On eszköze hallókészülékével/ hallókészülékeivel vagy Roger vevővel való párosításához.

A mikrofonüzemmód funkciói*

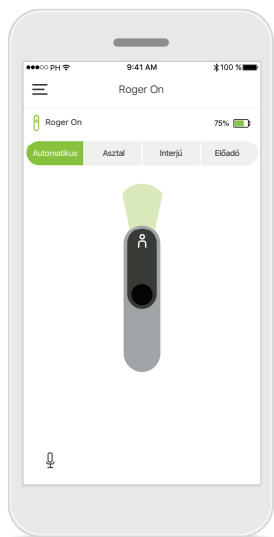


Automatikus üzemmód

Ha a Roger On eszköz automatikus üzemmódban van, a mikrofonüzemmódot a Roger On eszköz pozíciójának megfelelően fogja módosítani. A mikrofonüzemmód a Roger On eszközt ábrázoló képen jelenik meg a képernyőn.

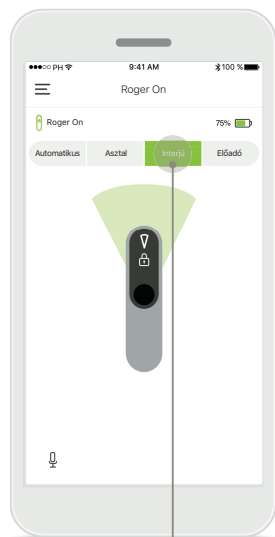

A mikrofonüzemmód zárolása

Koppintson a használni kívánt mikrofonüzemmódra. Zárolta a kiválasztott mikrofonüzemmódot Roger On eszközén.

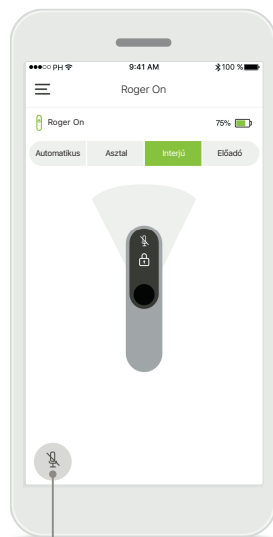




Némítás/némítás feloldása

A Roger On némításához vagy némításának feloldásához koppintson a mikrofon ikonra.

*Ha többet szeretne megtudni a különböző mikrofonüzemmódok funkcióiról, tekintse meg a Roger On használati útmutatóját.

Nyalábirányítás

Ha Roger On eszközt az asztalra helyezi, a MultiBeam Technológia használata javíthat a beszédérthetőségen zajos környezetben.¹ Ha például egy étteremben folytat csoportos beszélgetést, a hallott beszélő nem feltétlenül az, akit Ön hallgatni kíván. Ilyen történhet akkor, ha egy második beszélgetés is kialakul az asztaltársaságban. Ebben az esetben a myRogerMic app lehetővé teszi, hogy a hallgatni kívánt beszélő felé irányítsa a mikrofonnyalábot.

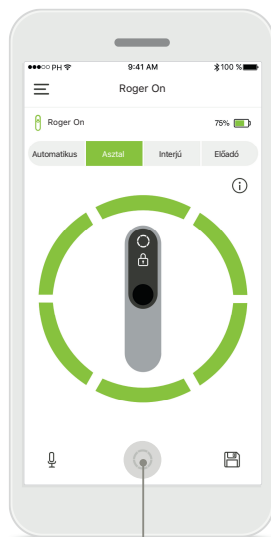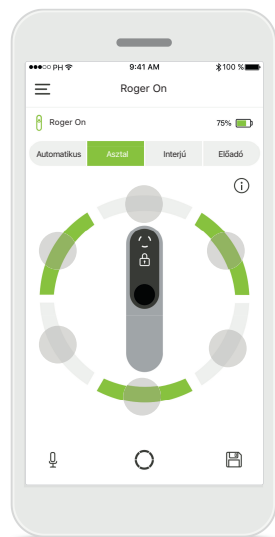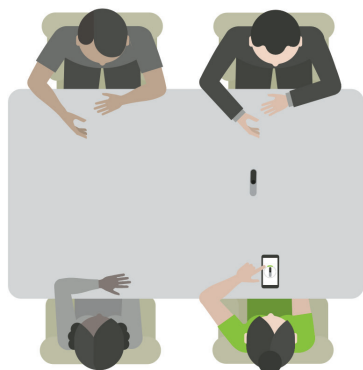

Asztali üzemmód

Helyezze az asztal közepére a Roger On eszközt. A jobb élmény érdekében ügyeljen arra, hogy a Roger On eszközt úgy helyezze az asztalra, hogy az USB-csatlakozója Ön felé nézzen, vagy ugyanolyan helyzetben legyen, mint az alkalmazásban látható.

Nyalábok aktiválása/ deaktiválása

Koppintson egy hangirányra a hangirány aktiválásához/
deaktiválásához.


Mind a hat nyaláb aktiválása

A képernyőn található kör ikonra koppintva mind a hat nyalábot aktiválhatja.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Egyéni üzemmód létrehozása


Ha egy adott nyalábmintát gyakran használ, elmentheti azt az alkalmazásban egyéni üzemmódként. Ezután a nyalábmintát közvetlenül a Roger On eszközén, illetve egyetlen koppintással az alkalmazásban is elérheti. Legfeljebb két egyéni üzemmódot menthet el, amelyeket bármikor elérhet vagy törölhet is.

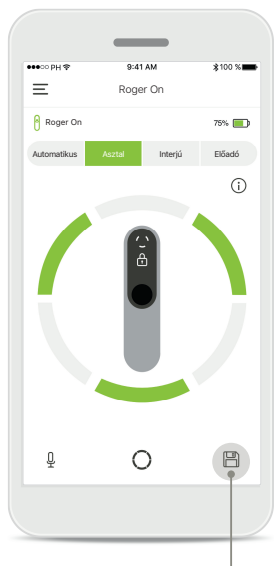


Egyéni üzemmód mentése
Miután kiválasztotta a gyakran használt nyalábmintát, koppintson a mentés ikonra az egyéni üzemmódként való mentéshez. Legfeljebb két egyéni üzemmódot menthet el.



Egyéni üzemmód elnevezése
Adjon tetszőleges nevet nyalábmintájának, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

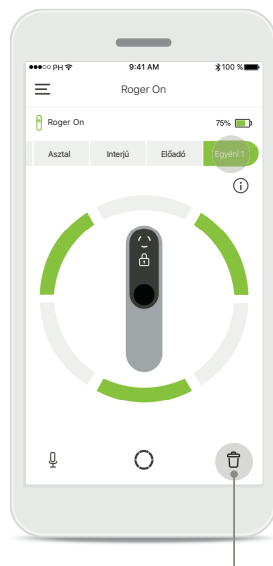


Egyéni üzemmód elérése és törlése
A mentett egyéni üzemmód manuális üzemmódként jelenik meg a mikrofonüzemmódok listájában. A törlés ikonra koppintva törölheti az egyéni üzemmódot.

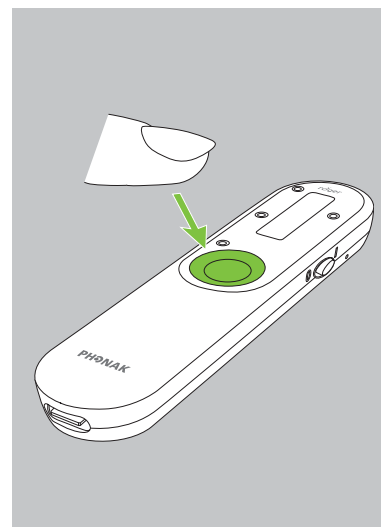


Egyéni üzemmód elérése a Roger On eszközön
Az egyéni üzemmódot a Roger On eszközön is aktiválhatja. Nyomja meg többször a Roger On funkciógombját, amíg el nem éri az egyéni üzemmódot.

MultiBeam 2.0 technológia


Ha két Sonova által gyártott, RogerDirect funkcióval ellátott hallókészülékkel rendelkezik, bekapcsolhatja a MultiBeam 2.0 technológiát. Ha egy asztal közepére Roger On eszközt helyez, a MultiBeam 2.0 segítségével hallhatja, melyik irányból beszélnek. Ezt a funkciót csak zárolt asztali üzemmódban használhatja.

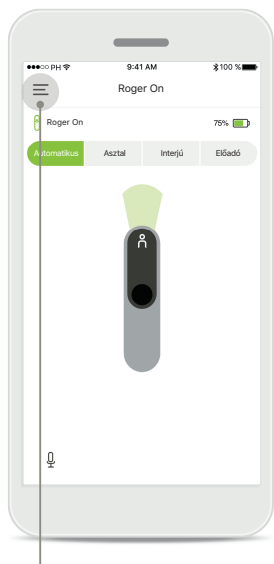


Menü megnyitása
A menü megnyitásához koppintson a három vonalra.

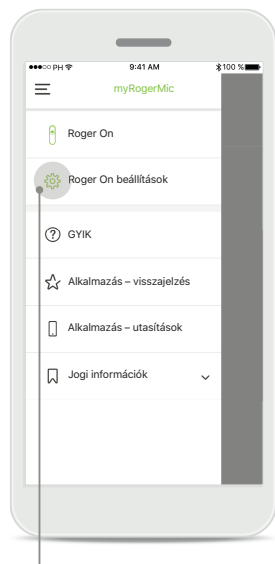


A beállítások megnyitása
Koppintson a Roger On beállítások lehetőségre.

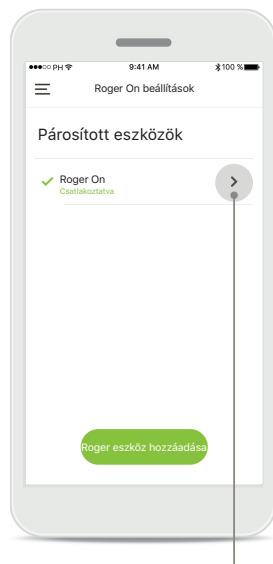

Roger On eszköz kiválasztása
Koppintson a választott Roger On eszköz mellett található nyílra.

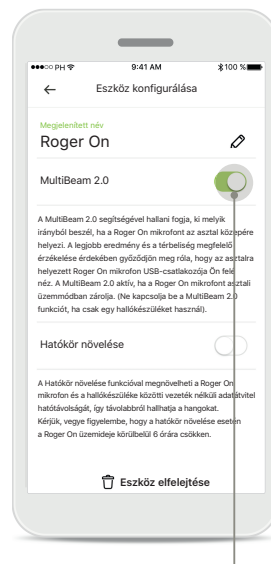


A MultiBeam 2.0 bekapcsolása
A bekapcsoláshoz koppintson a MultiBeam 2.0 mellett található csúszkára. Mentette a beállítást, és a Roger On eszköze ezentúl minden alaklommal bekapcsolja a MultiBeam 2.0 technológiát, ha manuálisan asztali üzemmódra állítja azt.

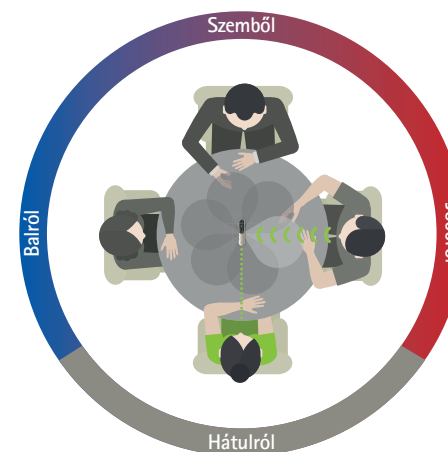

Asztalon használva
Helyezze a Roger On eszközt az asztal közepére, és gondoskodjon arról, hogy az USB-csatlakozója Ön felé nézzen. Majd az alkalmazás segítségével vagy a funkciógomb lenyomásával zárolja a Roger On mikrofont asztali üzemmódban.

A Roger On eszköz(ök) hozzáadása, kiválasztása és eltávolítása

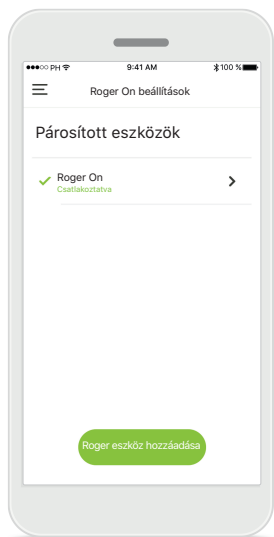


Új Roger On eszköz hozzáadása

Az alkalmazás főmenüjében ugorjon a Roger On beállítások oldalra, majd koppintson a **Roger eszköz hozzáadása** gombra.




Kiválasztás több eszköz közül

A párosítási folyamat végeztével megjelennek a használni kívánt Roger On eszköz kiválasztásának menetét leíró utasítások.

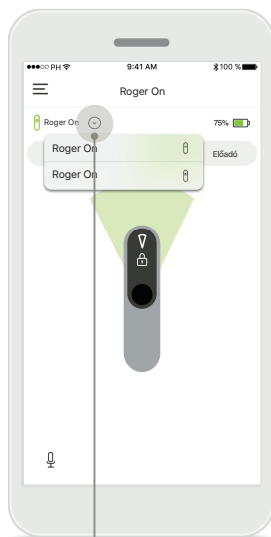


Kiválasztás több eszköz közül

Ha egynél több Roger On eszköz van párosítva az alkalmazáshoz, egy nyíl jelenik meg a kezdőképernyőn. Koppintson a nyílra az alkalmazással vezérelni kívánt eszköz kiválasztásához.

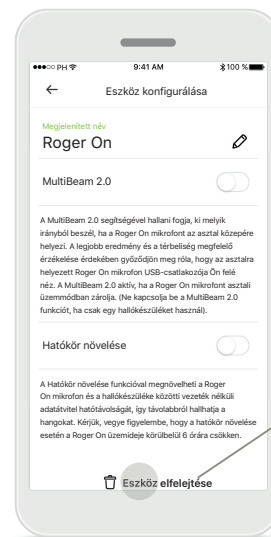

Roger On eszköz eltávolítása

Az alkalmazás főmenüjében található Roger On beállítások oldalán válassza ki az eltávolítani kívánt Roger On eszközt. Koppintson az oldal alján található Eszköz elfelejtése ikonra.

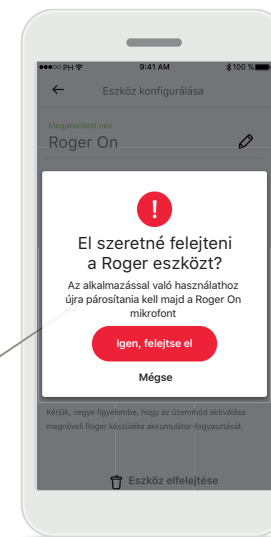

Roger On eszköz eltávolításának megerősítése

Az **Igen, felejtse el** gombra koppintva erősítheti meg, hogy valóban el akarja távolítani a Roger On eszközt.


MultiTalker Network

A Roger On más Roger mikrofonokkal, pl. a Roger Table Mic II eszközzel is használható, hogy egy nagyobb csoport tagjait vagy több távolról beszélőt is hallgathasson.

A Roger On használati útmutatójának 13. fejezetében megtudhatja, hogyan csatlakoztathat másik mikrofont a Roger On eszközéhez.

Ha a Roger On eszközt más mikrofonokkal együtt MultiTalker Networkbe rendezve használja, az automatikusan előadó üzemmódba vált (1). Asztalra való lehelyezéskor, vagy kézben tartva a Roger On eszköze automatikusan elnémul. Az alkalmazás automatikusan némítottként jeleníti meg a mikrofonját, és utasításokat biztosít a némítás újbóli feloldásához (2).

Ha feloldja Roger On eszköze némítását (hosszan nyomva tartja a mikrofon közepén található funkciógombot), a hozzá csatlakoztatott mikrofonok (azaz a vele MultiTalker Networkben szereplő mikrofonok) automatikusan blokkolva lesznek. Ez megjelenik a myRogerMic appban is (3).

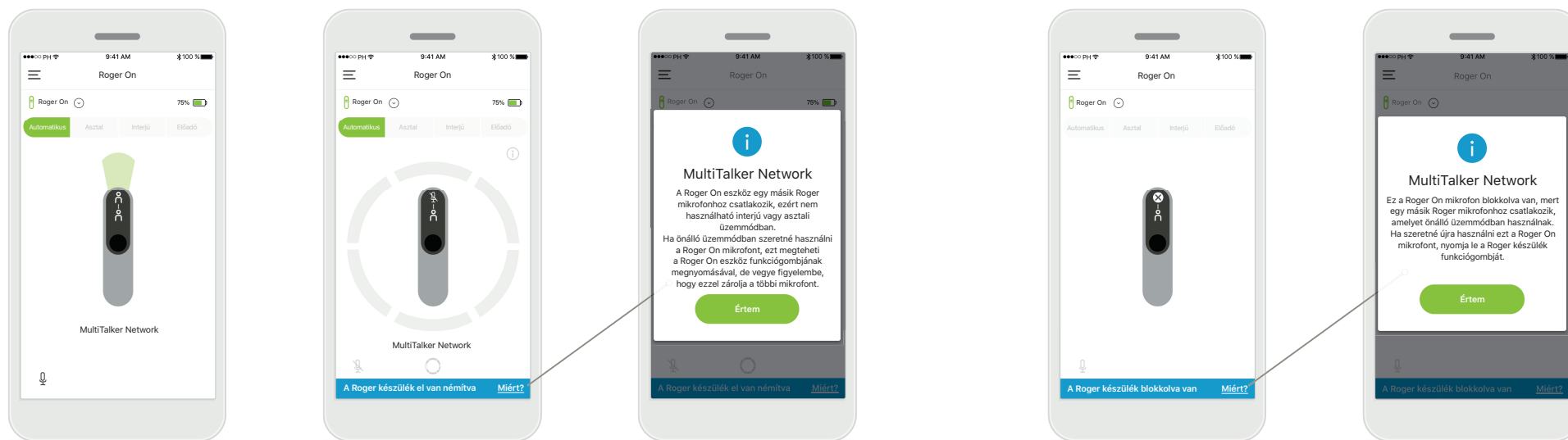

1. MultiTalker Network

Az alkalmazás megjeleníti az automatikusan beállított előadó üzemmódot, ha a Roger On eszköze másik Roger mikrofonhoz van csatlakoztatva.


2. Elnémított Roger On eszköz

A mikrofonja elnémul, mert nem előadó üzemmódban használja azt. Koppintson a **Miért?** gombra, hogy megtudja, miért és hogyan kell feloldania újból a némítást.

3. Blokkolt Roger On eszköz


A mikrofonja blokkolva van, mert egy másik mikrofon csatlakozik hozzá, amelyet önálló üzemmódban használnak (azaz interjú vagy asztali üzemmódban van, MultiTalker Networkbe rendezve, és nincs elnémítva). Koppintson a **Miért?** gombra, hogy megtudja, hogyan oldhatja fel a blokkolást.

Egyéb funkciók

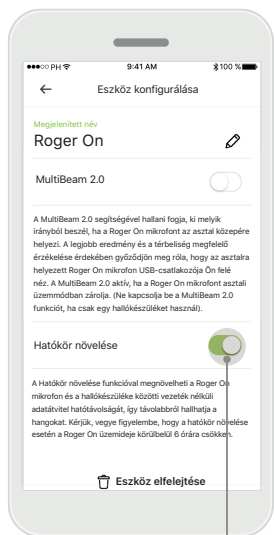


Hatókör növelése

A Hatókör növelése funkciót az alkalmazás főmenüjében található Roger On beállítások oldalon kapcsolhatja be. A funkció segítségével távolabbról hallhatja a hangokat, mivel az megnöveli a Roger On mikrofon és a hallókészüléke közötti vezeték nélküli adatátvitel hatótávolságát.

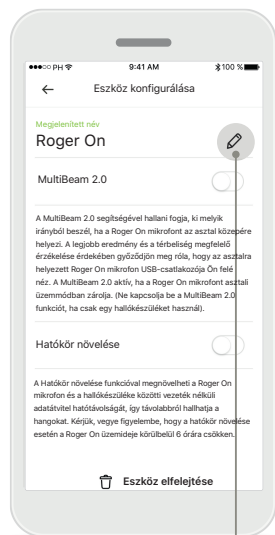

Roger On eszköz elnevezése

Válassza ki az elnevezni kívánt Roger On eszközt, és koppintson a szerkesztés (ceruza) ikonra az átnevezéshez.

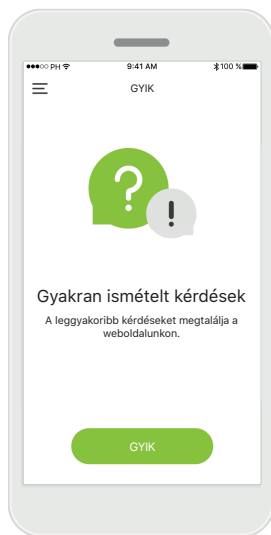

GYIK

Erről az oldalról elérheti a külső webhelyünket, ahol megtalálja a gyakran ismételt kérdéseket.

A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók



Az okostelefon használatért Ön a felelős. Az okostelefont és az alkalmazást mindig körültekintően használja.



A mikrofon üzemmódjának megváltoztatása vagy a nyalábirányítás csökkentheti a figyelmeztető, illetve biztonsággal kapcsolatos jelzések hallhatóságát. Ez veszélyes helyzetekhez vezethet.



Ha a Roger On eszköz az elektromágneses tér okozta zavar miatt nem reagál a készülékre, hagyja el az adott területet.



Ha a Roger On eszköz nem válaszol, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva, nem merült-e le az akkumulátor, és hogy a standard Bluetooth LE kapcsolat hatótávolságán belül helyezkedik-e el.



A használati útmutató ingyenes példányának beszerzése érdekében kérje a helyi Sonova-képviselő segítségét. A kívánt útmutatót 7 napon belül elküldjük Önnek.



Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót. Engedélyeznie kell a Bluetooth-kapcsolatot ahhoz, hogy csatlakozhasson Roger On eszközéhez.



Ne aktiválja a MultiBeam 2.0 funkciót, ha csak egy hallókészüléket használ. Ez csökkentheti hallókészüléke hallásteljesítményét.

A szimbólumok magyarázata



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia és szem előtt kell tartania a használati útmutatóban foglalt lényeges tudnivalókat.



Ez a szimbólum arra utal, hogy a felhasználónak figyelembe kell vennie a használati útmutatóban szereplő, vonatkozó figyelmeztető megjegyzéseket.



Fontos információk a termék kezeléséről és biztonságos használatáról.



A CE-jelöléssel a Sonova AG igazolja, hogy az adott Phonak termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv követelményeinek. CE-jelölés 2020 óta.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.hu