

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione del Ricevitore ActiveVent™

Congratulazioni per l'acquisto dei tuoi apparecchi acustici. I tuoi apparecchi acustici sono dotati dei ricevitori ActiveVent. La cura e la manutenzione degli apparecchi acustici sono importanti.

Perché la pulizia è importante?

1. Garantisce migliori prestazioni quotidiane
2. Allunga la vita utile dei dispositivi
3. Previene problemi di riparazione che possono derivare dall'accumulo di cerume e dall'umidità



Come eseguire la pulizia

1. Apparecchio acustico

Pulire ogni giorno l'apparecchio acustico con un panno umido.


2. Auricolare

Pulire ogni giorno l'auricolare con un panno umido.


3. Sostituire il filtro anticerume

Si raccomanda di sostituire il filtro anticerume una volta alla settimana.

Il suo Audioprotesista le consiglierà l'intervallo appropriato per ottenere le prestazioni migliori. Continuare a leggere nella pagina seguente le istruzioni per la sostituzione.

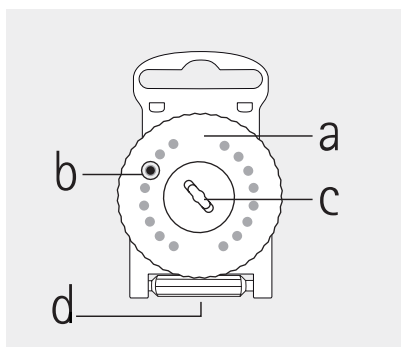

- a) disco girevole
- b) filtro nuovo
- c) fessura per lo smaltimento dei filtri usati
- d) strumento di ricambio

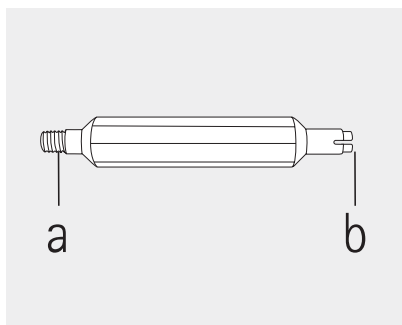


- a) estremità filettata per rimuovere il filtro usato
- b) estremità scanalata per inserire il filtro nuovo


Istruzioni per la sostituzione del filtro anticerume

Rimuovere il filtro anticerume usato


1. Tenere saldamente l'auricolare e tenere ferma la parte posteriore del ricevitore con il dito per evitare che si sposti dall'auricolare. Inserire l'estremità filettata dello strumento di ricambio nell'apertura del ricevitore, tenendo fermo il ricevitore con un dito o con il pollice.

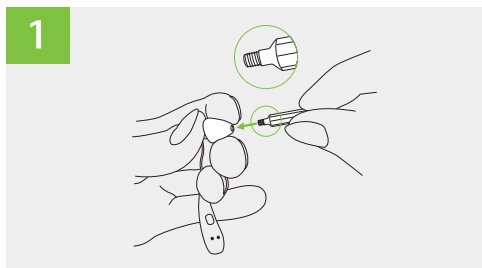

2. Ruotare lo strumento di ricambio in senso orario fino ad avvertire una certa resistenza, quindi rimuovere il filtro anticerume usato tirando lo strumento di ricambio per estrarlo dal ricevitore.

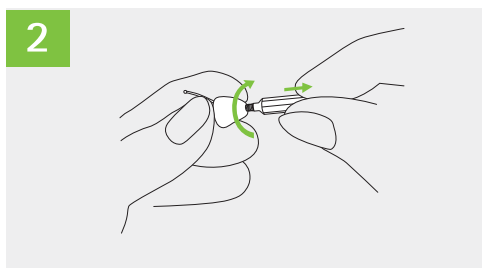


3. Erogare il filtro anticerume usato facendo scorrere lo strumento di ricambio lungo la fessura al centro dell'erogatore e sollevando lo strumento di ricambio per estrarlo.

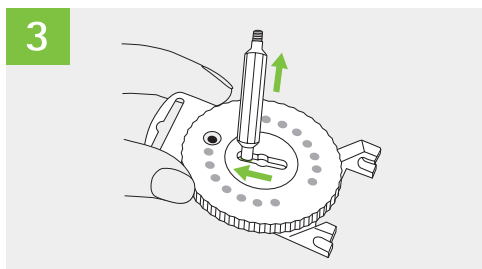


Inserire un filtro anticerume nuovo


1. Ruotare il disco dell'erogatore fino a vedere un filtro anticerume nuovo a vedere un filtro anticerume nuovo nell'apposita finestra.

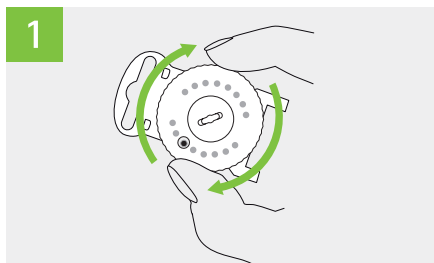


2. Prelevare il filtro anticerume nuovo inserendo l'estremità scanalata dello strumento di ricambio.

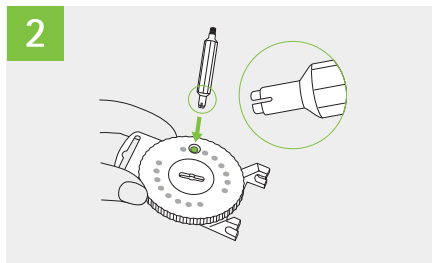

3. Tenere saldamente l'auricolare e tenere fermo il ricevitore all'estremità, dove è collegato il cavo. Inserire delicatamente il filtro anticerume nuovo nell'apertura del ricevitore.

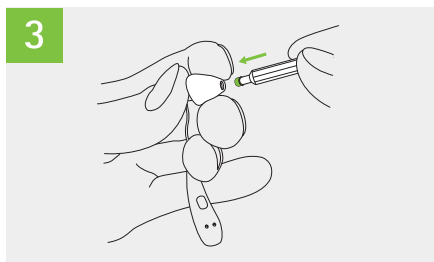

4. a) Inclinare leggermente lo strumento di ricambio mentre si estrae dal ricevitore.
b) Ricollegare lo strumento di ricambio all'erogatore di filtri anticerume.

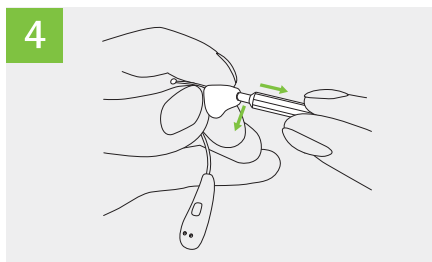

www.phonak.com/activevent

029-1153-05/V1.00/2020-08/Clean and Care ActiveVent Instruction
© 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera



Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germania



0459



7 613389 1520248

028-2296-05/V1.00/2021-07/NLG © 2021 Sonova AG. All rights reserved.