

Roger 셀렉트™ iN

사용 설명서



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

목차

1.	인사말	4
2.	Roger 셀렉트 iN	5
2.1	명칭 설명	6
2.2	액세서리	8
2.3	상태 표시등	10
3.	시작하기	12
3.1	Roger 마이크 충전하기	12
3.2	Roger 셀렉트 iN 전원 켜기	14
4.	Roger 셀렉트 iN을 사용하여 더 잘 듣기	15
4.1	테이블에서 더 잘 듣기	15
4.2	먼 거리에 있는 화자의 대화 더 잘 듣기	18
5.	TV 또는 다른 오디오 장치에서 듣기	21
5.1	도킹 스테이션 연결하기	21
5.2	도킹 스테이션을 사용하여 TV 듣기	23
6.	휴대용 오디오 장치에서 듣기	25
7.	부가 기능	27
7.1	음소거	27
7.2	Roger 셀렉트 iN을 Roger 수신기에 연결	28
7.3	Roger 기기들과 연결 해제(NewNet)	30
7.4	초기화	30

8. Roger 셀렉트 iN을 다른 Roger 마이크와 함께 사용하기	31
8.1 다른 마이크와 연결하기	31
8.2 여러 개의 마이크 사용하기	33
9. 문제 해결 방법	34
10. 적합성 정보	37
11. 기호 안내 및 설명	41
12. 경고 및 주의 사항	44
12.1 경고문	44
12.2 사용상의 주의 사항	47
12.3 그 외 중요 정보	48
13. 서비스 및 제품 보증	49
13.1 국내 제품 보증 서비스	49
13.2 국제 제품 보증 서비스	49
13.3 제품 보증 제한	50

1. 인사말

Roger 셀렉트 iN은 스위스에 본사를 두고 있는 세계적인 청각솔루션 브랜드 포낙의 제품입니다.

이 프리미엄 제품은 수십 년간의 연구와 전문성으로 빚어낸 결과이며 사용자가 소리의 아름다움을 항상 느낄 수 있도록 설계되었습니다! 탁월한 선택을 해주셔서 감사드리며 오랫동안 듣는 즐거움을 누릴 수 있기를 바랍니다.

Roger 셀렉트 iN을 사용하기 전에 사용자 설명서를 읽고 제품 사용방법을 숙지하시면 더욱 쉽고 편리하게 사용하실 수 있습니다. 기타 문의 사항은 청각 전문가 또는 제품을 구매하신 청각 전문센터를 방문하여 주시기 바랍니다.

Phonak - life is on
www.phonak.com


2. Roger 셀렉트 iN

Roger 셀렉트 iN은 화자의 음성을 픽업하여 무선으로 직접 양쪽 보청기에 보내는 마이크입니다. Roger 셀렉트 iN을 테이블 중앙에 배치할 수도 있고(예: 식당에서) 한 사람이 착용하게 할 수도 있습니다(즉, 먼 거리에 있는 화자의 음성을 듣기 위해).




- ① Roger 셀렉트 iN은 일반적으로 보청기로부터 최대 10m 이내의 범위에서 작동합니다. 사람 또는 벽이 있을 경우 이 거리가 줄어들 수 있습니다. Roger 셀렉트 iN을 눈으로 직접 볼 수 있을때(즉, 가시선상에 있을 때)까지가 가장 먼 범위 내입니다.

2.1 명칭 설명


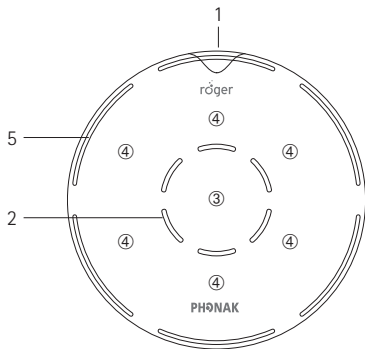


- 1 켜기/끄기 버튼(배터리 상태 표시등 포함)
- 2 상태 표시등(전방향성 마이크 모드)
- 3 중앙 터치 버튼
- 4 6개의 조정 터치 버튼
- 5 마이크 모드 상태 표시등

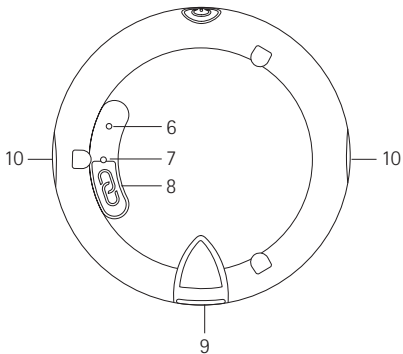

- 6 리셋(초기화) 버튼
- 7 뒷면 상태 표시등
- 8 연결 버튼
- 9 충전 입력부 Micro-USB
- 10 목걸이/ 옷깃 착용을 위한 슬롯


2.2 액세서리

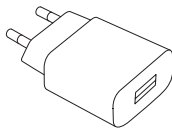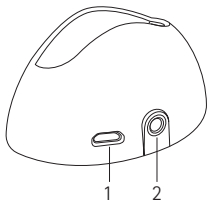


도킹 스테이션

- 1 외부 전원 공급장치 입력부
- 2 디지털/아날로그 오디오 입력부


외부 전원 공급장치

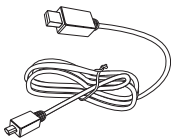


USB 케이블

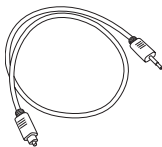

디지털 오디오 케이블

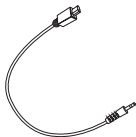


아날로그 오디오 케이블

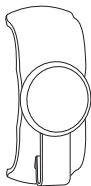

자석 클립




목걸이

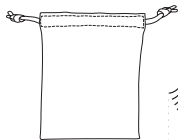

보관용 파우치

2.3 상태 표시등


배터리 상태

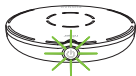

마이크 모드



녹색등 빠르게 깜박임	충전 중
녹색등 계속 켜져 있음	충전 완료
녹색등 느리게 깜박임	전원 켜짐, 배터리 충전 완료
주황색등 깜박임	배터리 절반 충전
빨간색등 깜박임	배터리 방전, Roger 셀렉트 iN 충전 필요
6개 세그먼트에 모두 녹색등이 켜져 있음	모든 방향(전방향)으로 마이크 활성화
1번에서 5번까지의 녹색 세그먼트	선택한 방향으로 마이크 활성화

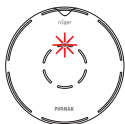


빨간색등이 계속
켜져 있음

마이크 음소거됨

빨간색등 깜박임

음소거 해제 불가, 동일한
네트워크에서 다른 Roger
셀렉트 iN이 활성화되어
있음

음소거

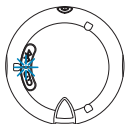

파란색등 깜박임

연결 또는 페어링 모드

녹색등 계속 켜져
있음

연결/페어링 성공

빨간색등 두 번
깜박임

연결 시간 초과, 장치를 더
가깝게 이동해야 함

빨간색등 길게 세
번 깜박임

장치가 호환되지 않음


연결

3. 시작하기


3.1 Roger 셀렉트 충전하기

Roger 셀렉트를 충전하는 방법에는 아래와 같이 3가지가 있습니다.

A) 외부 전원 공급장치 사용하기: 충전 케이블의 작은 쪽 끝을 Roger 셀렉트에 연결합니다. 충전 케이블의 큰 쪽 끝을 외부 전원 공급장치에 연결합니다. 외부 전원 공급장치를 벽에 있는 콘센트에 연결합니다.

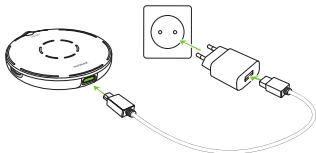

B) 컴퓨터 또는 태블릿과 연결하기: 충전 케이블의 작은 쪽 끝을 Roger 셀렉트에 연결합니다. 충전 케이블의 큰 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고 컴퓨터 전원을 켭니다.

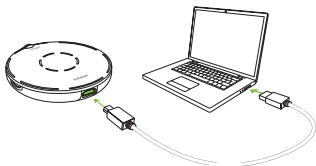


C) 도킹 스테이션 사용하기: Roger 셀렉트 iN을 도킹 스테이션에 끼웁니다.

❶ 도킹 스테이션을 설정하려면 5.1장을 읽어 보십시오.



충전 중 배터리 상태 표시등

Roger 셀렉트가 완전히 충전될 때까지 전원 버튼 주위의 배터리 상태 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 완전히 충전되면 배터리 상태 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

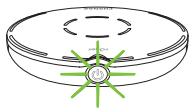


충전 중



충전 완료

3.2 Roger 셀렉트 iN 전원 켜기

마이크  모드 표시등이 켜질 때까지 버튼을 1초 동안 누릅니다.

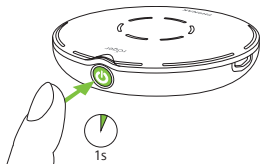

전원을 켜 후 배터리 상태 표시등

Roger 마이크가 켜지면 전원 버튼 주위의 배터리 상태 표시등이 부드럽게 깜박입니다. 녹색등이 깜빡이면 배터리가 완전히 충전된 것입니다. 완전히 충전된 장치는 약 8시간 동안 사용 가능합니다. 주황색이 깜빡이면 배터리가 절반 정도 남아있는 상태입니다. 상태 표시등이 빨간색등으로 깜박이기 시작하면, Roger 셀렉트를 바로 충전해야 합니다.



Roger 셀렉트를 충전하십시오.

4. Roger 셀렉트 iN을 사용하여 더 잘 듣기

Roger 셀렉트 iN은 다양한 기능을 가진 지능형 제품입니다. 이 제품은 사용자의 현재 상황을 감지하고 설정을 자동으로 조정하여 가능한 최상의 어음 이해도를 제공합니다.

- ❶ 최상의 어음 이해도를 위해서는 Roger 셀렉트를 대화하는 상대방에게 최대한 가까이 놓으십시오.

4.1. 테이블에서 더 잘 듣기

테이블 중앙에 Roger 셀렉트를 놓고 그룹으로 모여 있는 사람들의 음성을 듣습니다.



Roger 셀렉트는 전방향 마이크를 활성화합니다.
화자가 말하면 Roger 셀렉트가 마이크 초점을
화자에게 맞추고 배경 소음을 줄입니다.

두 명 이상이 동시에 말하는 경우에는
특정인에게 초점을 맞추도록
세그먼트를 눌러 지정할 수 있습니다.



추가 세그먼트를 눌러 다른
사람을 추가할 수도 있습니다.



활성화된 세그먼트를 다시 누르면
선택한 방향이 비활성화됩니다.



전체 그룹의 음성을 들으려면 다시
중앙 버튼을 누르십시오.




마이크 모드 상태 표시등

장치를 누르거나 이동할 때마다 마이크 모드 상태 표시등에 활성화된 세그먼트가 표시됩니다. 배터리 전원을 절약하기 위해 몇 초가 지나면 상태 표시등이 희미해집니다.



여섯 방향 모두 활성화됨

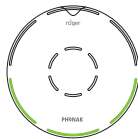


선택한 방향만 활성화

- ① 테이블이 없는 경우에는 Roger 셀렉트를 손바닥에 올린 상태로 들고 있을 수도 있습니다. 그러면 테이블에 놓았을 때와 동일하게 사용할 수 있습니다.

4.2 먼 거리에 있는 화자의 음성 더 잘 듣기


Roger 셀렉트 iN을 사용하면 먼 거리 또는 매우 시끄러운 환경에서도 단일 대화상대의 음성을 들을 수 있습니다. 일반적인 조건에서는 10m 떨어진 거리에서도 화자의 음성을 들을 수 있습니다.

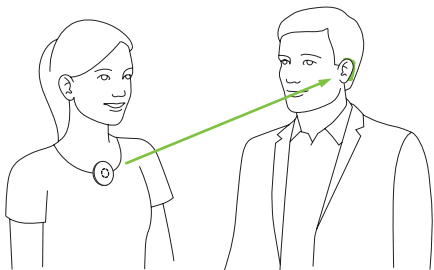


장치를 화자에게 주기 전에 목걸이나 옷깃에 클립으로 부착하십시오. Roger 마이크는 적절한 마이크 모드를 자동으로 활성화합니다.

클립 사용하기

- 1) 클립을 Roger 셀렉트에 부착합니다. 클립을 Roger 셀렉트 측면의 작은 슬롯에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

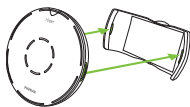

- 2) 자석 클립을 엽니다.

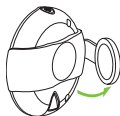

- 3) 클립을 화자의 셔츠에 부착합니다.




최상의 결과를 얻으려면 Roger 셀렉트가 입에서 약 20cm 떨어진 곳의 가슴 중간에 착용해야 합니다.



목걸이 사용하기

- 1) 목걸이를 Roger 셀렉트에 연결합니다. 목걸이를 Roger 셀렉트 측면의 작은 슬롯에 딱딱 소리가 나도록 끼웁니다.
- 2) 목걸이를 화자의 목에 걸고 길이를 조절하여 Roger 셀렉트가 입으로부터 약 20cm 이내에 있도록 길이를 조정합니다.

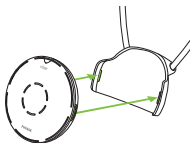


마이크 모드 상태 표시등

화자가 Roger 셀렉트 iN을 착용하면, 맨위의 마이크 모드 상태 표시등이 켜집니다.



클립 또는 목걸이 제거하기


클립 또는 목걸이 옆의 한쪽 부분을 눌러 Roger 셀렉트에서 분리합니다.

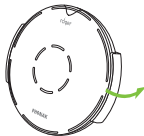


5. TV 또는 다른 오디오 장치에서 듣기

5.1 도킹 스테이션 설정하기

- 1) USB 케이블의 작은 쪽 끝을 도킹 스테이션의 외부 전원 입력부에 연결합니다.
- 2) USB 케이블의 큰 쪽 끝을 외부 전원 공급장치에 연결합니다.
- 3) 외부 전원 공급장치를 벽에 있는 콘센트에 연결합니다.

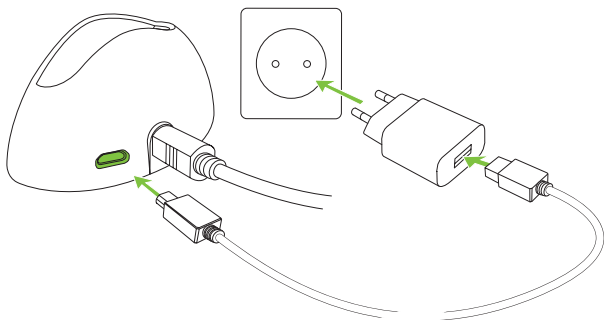

- 4) 광 (Toslink) 케이블의 연결 단자를 TV 또는 다른 오디오 장치의 광출력 단자에 연결합니다.

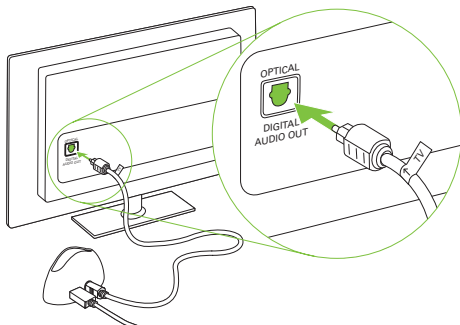

- ❶ TV 또는 다른 오디오 장치에 광 오디오 출력이 없는 경우, 아날로그 오디오 케이블을 사용하여 TV와 도킹 스테이션을 연결할 수 있습니다. 최대 오디오 출력은 1.4Vrms이며, 오디오 입력 전압이 더 높으면 장치가 손상될 수 있습니다.
- ❶ 광 (Toslink) 케이블을 장치 또는 TV에 연결한 경우, 광 케이블의 빛으로부터 눈을 보호하시기 바랍니다.

5.2 도킹 스테이션을 사용하여 TV 듣기


1) Roger 셀렉트를

도킹 스테이션에 삽입합니다. 로저 셀렉트가 도킹 스테이션에 삽입되면 전원이 자동으로 꺼집니다.



2) TV(또는 다른 오디오 장치)를 켭니다. Roger 셀렉트가 오디오 신호를 양쪽 보청기에 자동으로 전송합니다.


오디오 신호의 전송을 종료하려면 TV(또는 다른 오디오 장치)를 끄거나 Roger 셀렉트를 도킹 스테이션 밖으로 꺼내십시오.

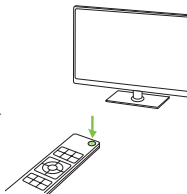


- ❶ 오디오가 전송되면 Roger 셀렉트 iN의 내장 마이크는 음소거됩니다. 중앙 터치 버튼을 눌러 Roger 셀렉트의 마이크를 활성화/비활성화할 수 있습니다(전방향성 마이크만 해당).

음소거 상태 표시등

Roger 셀렉트를 도킹 스테이션에 삽입한 상태에서 오디오를 전송하면 가운데 빨간색 상태 표시등이 나타납니다.

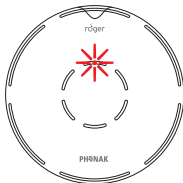


Roger 셀렉트는 자체 마이크가 음소거된 상태에서 오디오 신호를 전송합니다.

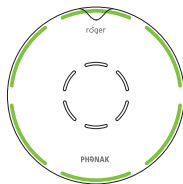

오디오를 전송할 때 Roger 셀렉트는 마이크 신호를 동시에 전송합니다.

6. 휴대용 오디오 장치에서 듣기

- 1) Roger 셀렉트의 전원을 켭니다.

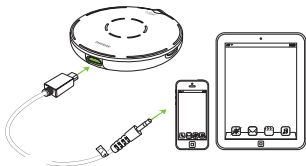

- 2) 짧은 오디오 케이블의 직사각형 끝을 Roger 셀렉트에 연결합니다.
- 3) 짧은 오디오 케이블의 둥근 끝을 휴대용 장치의 헤드폰 출력 단자에 연결합니다.
- 4) 휴대용 오디오 장치에서 음악 또는 음악 앱을 시작합니다.


❶ 오디오 케이블을 연결하면 Roger 셀렉트가 자동으로 음소거됩니다. 중앙 터치 버튼을 눌러 마이크를 활성화할 수 있습니다. 이제 오디오 장치와 마이크를 동시에 들을 수 있습니다.

오디오 신호의 전송을 종료하려면 오디오 케이블을 분리하거나 Roger 셀렉트의 전원을 끄십시오.

음소거 상태 표시등

오디오 케이블이 Roger 셀렉트에 연결되면
중앙에 있는 빨간색 상태 표시등이
켜집니다.

Roger 셀렉트는 자체 마이크가
음소거된 상태에서 오디오 신호를
전송합니다.

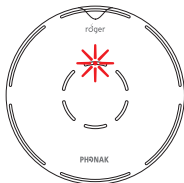


오디오를 전송할 때 Roger
셀렉트는 마이크 신호를 동시에
전송합니다.



7. 부가 기능

7.1 음소거

Roger 셀렉트를 음소거하려면 중앙에 있는 빨간색 상태 표시등이 나타날 때까지 장치의 중앙 터치 버튼을 한 번 또는 두 번 누릅니다.

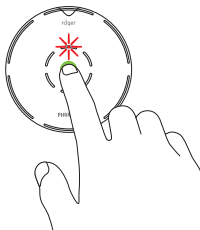

Roger 셀렉트를 다시 활성화하려면 중앙 터치 버튼을 누릅니다.


❶ 화자가 장치를 착용하면 음소거 기능을 사용할 수 없습니다.

7.2 Roger 셀렉트 iN을 Roger 수신기에 연결하기

Roger 수신기는 보청기에 설치하거나 보청기/어음처리기에 연결하거나 신체에 착용할 수 있습니다(Roger 넥 루프 또는 Roger X를 스트리머에 연결).

다음과 같이 Roger 수신기를 연결하십시오.

1. Roger 셀렉트와 Roger 수신기를 켭니다.
2. Roger 셀렉트를 Roger 수신기와 가까운 곳에 (10cm 이내) 놓습니다.
3. Roger 셀렉트의 연결 버튼  을 누릅니다.

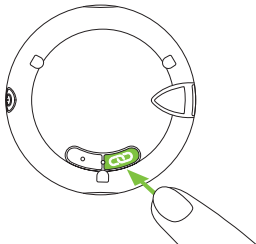

상태 표시등(뒷면)이 2초 동안 녹색으로 변하면 성공적으로 연결된 것입니다.

상태 표시등 연결하기

연결 버튼을 누르면 뒷면의 상태 표시등을 통해 다음과 같은 피드백이 나타날 수 있습니다.



연결 중



연결 성공 - Roger 수신기가 Roger 셀렉트에 연결되었습니다.



Roger 셀렉트가 Roger 수신기를 찾을 수 없습니다. 장치를 Roger 수신기에 가깝게 놓고 Roger 수신기의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 다시 연결해 보십시오.



Roger 수신기가 Roger 셀렉트와 호환되지 않습니다.

❶ 수량의 제한없이 Roger 수신기를 Roger 셀렉트에 연결할 수 있으며, 다른 Roger 수신기에 대해서도 2단계와 3단계를 반복하기만 하면 됩니다.

7.3 Roger 기기들과 연결 해제(NewNet)


 연결된 수신기 또는 다른 Roger 마이크에서 Roger 셀렉트를 분리하려면 연결 버튼을 7초 동안 누릅니다. Roger 셀렉트가 연결된 모든 장치에서 분리되면 뒷면 상태 표시등이 주황색으로 바뀝니다.

7.4 초기화

Roger 셀렉트가 명령에 응답하지 않으면 전원 버튼과 리셋(초기화) 버튼을 함께 10초 동안 눌러 초기화할 수 있습니다(리셋(초기화) 버튼을 누르기 위해 얇은 종이 클립이 필요할 수 있음).

8. Roger 셀렉트 iN을 다른 Roger 마이크와 함께 사용하기


Roger 셀렉트 iN은 다른 Roger 마이크와 결합할 수 있습니다(예: Roger Table Mic II). 여러 마이크를 사용하면 더 큰 그룹 또는 먼 거리에 있는 여러 화자의 음성을 들을 수 있습니다.

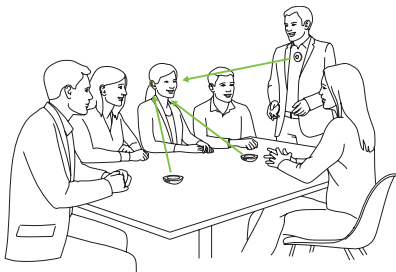

8.1. 다른 마이크와 연결하기

다른 마이크를 Roger 셀렉트 iN에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1) Roger 셀렉트 iN과 다른 마이크의 전원을 켭니다.
- 2) Roger 셀렉트 iN과 다른 마이크를 서로 가까운 곳(10cm 이내)에 놓습니다.
- 3) Roger 셀렉트 iN의 연결 버튼을 누릅니다.

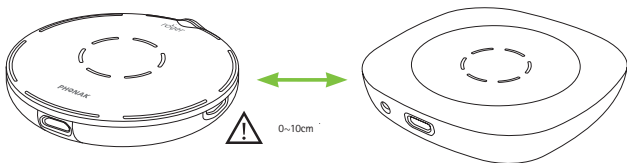

연결 상태 표시등

연결 버튼을 누르면 뒷면의 상태 표시등을 통해 다음과 같은 피드백이 나타날 수 있습니다.

 연결 성공 - 다른 Roger 마이크가 Roger 셀렉트 iN에 연결되었습니다.

 Roger 셀렉트 iN이 다른 Roger 마이크를 찾을 수 없습니다. Roger 셀렉트 iN을 다른 Roger 마이크에 가깝게 놓고, 두 마이크의 전원이 모두 켜져 있는지 확인합니다. 그런 다음 다시 연결해 보십시오.

 다른 Roger 마이크가 Roger 셀렉트 iN과 호환되지 않거나 다른 Roger 셀렉트 iN의 블루투스가 여전히 활성화되어 있습니다. Roger 마이크의 소프트웨어를 업데이트하거나 두 번째 Roger 셀렉트 iN의 Bluetooth를 비활성화하십시오.

8.2. 여러개의 마이크 사용하기

Roger 셀렉트 iN을 다른 마이크와 함께 사용하려면 화자의 가슴 위치에 착용해야 합니다. Roger 셀렉트를 테이블에 배치하면 자동으로 음소거됩니다. Roger 셀렉트 iN의 음소거를 해제하면 Roger 셀렉트 iN과 연결된 다른 마이크가 음소거됩니다. Roger 셀렉트 iN을 음소거하거나 가슴 위치에 착용하면 다른 마이크가 다시 활성화됩니다.

9. 문제 해결 방법

문제

원인

해결 방법

Roger 셀렉트가
켜지지
않습니다.

배터리가
방전되었습니다.

Roger 셀렉트를 최소
2시간 이상 충전하십시오.

Roger 셀렉트에서
소리가
들리지
않습니다.

Roger 셀렉트가
음소거되어
있습니다(빨간색
LED).

중앙 터치 버튼을 눌러
Roger 셀렉트의 음소거를
해제하십시오.

잘못된 방향이
선택되었습니다.

화자의 방향에 있는
세그먼트를 누르십시오.

Roger 수신기가
Roger 셀렉트에
연결되지
않습니다.

Roger 수신기 또는 Roger
호환 보청기 가까이
Roger 셀렉트를 놓고 연결
버튼을 누르십시오.

Roger 수신기가
작동하지
않습니다.

Roger 수신기가 보청기에
부착되어 있는지,
전원은 켜져 있는지
확인하십시오

보청기가 올바른
프로그램으로
설정되지
않았습니다.

보청기가 올바른
프로그램(Roger/FM/DAI/
EXT)으로 설정되어 있는지
확인하십시오.

문제

원인

해결 방법

화자의 음성이
들리기는 하지만
무슨 말인지
이해가
어렵습니다.

로저 셀렉트가
화자와 너무 멀리
떨어져 있습니다.

Roger 셀렉트를
화자의 근처로
더 가깝게
이동하십시오.

마이크 입구가
손가락으로 가려져
있습니다.

마이크 입구가
가려지지 않도록
하여 셀렉트를
잡으십시오.

마이크 입구가
먼지로 덮여
있습니다.

마이크 입구를
청소하십시오.

잘못된 방향이
선택되었습니다.

화자의 방향에
있는 세그먼트를
누르십시오.

음성 신호가
자꾸
끊어집니다.

사용자와 Roger
셀렉트와의 거리가
너무 멍니다.

Roger 셀렉트에
가깝게
이동하십시오.

사용자와 Roger
셀렉트 사이에
장애물이 있습니다.

Roger 셀렉트가 시야
안에 들어오도록
조정하거나 Roger
셀렉트에 가깝게
이동하십시오.

소음이 너무
많이 들립니다.

Roger 셀렉트에서
소음이 들립니다.

배경 소음을
줄이려면 화자
방향에 있는
세그먼트를
누르십시오.

문제

Roger
마이크에서 내
음성을 듣고
싶지 않습니다.

원인

Roger 마이크에서
내 목소리가
들립니다.

해결 방법

자신의 음성이
픽업되는 것을
최소화하기 위해
화자 방향에
있는 세그먼트를
누르십시오.

멀티미디어
장치의 볼륨이
너무 낮습니다.

볼륨 설정이
잘못되어 있습니다.

음원의 볼륨을
높이십시오.

내 멀티미디어
장치에서
소리가 들리지
않습니다.

음원이
음소거되었습니다.

음원의 음소거를
해제하십시오.

Roger 마이크가
꺼져 있습니다.

Roger 마이크를
켜십시오.

오디오 케이블
연결이 올바르지
않습니다.

오디오 케이블을
올바르게
연결하십시오.

Roger 셀렉트가
작동을 멈추었고
어떤 버튼을
눌러도 작동되지
않습니다.

소프트웨어에
문제가 생겼습니다.

전원 버튼과 연결
버튼을 동시에
10초 동안 눌러
Roger 셀렉트를
재부팅하십시오.

10. 적합성 정보

유럽:

자기 적합성 선언

Sonova Communications AG는 이 제품이 Radio Equipment Directive 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 제조사, 현지 Phonak 대리점 또는 www.phonak.com에서 제공합니다.

작동 주파수: 2400 ~ 2483.5MHz

전력 레벨: 100mW 미만

호주/뉴질랜드:



R-NZ

뉴질랜드와 호주 내의 합법적 판매를 위해 해당 RSM(Radio Spectrum Management) 및 ACMA(Australian Communications and Media Authority) 규제 협정을 준수하는 장치임을 나타냅니다.

적합성 라벨 R-NZ는 적합성 레벨 A1에 따라 뉴질랜드 시장에 공급되는 무선 제품에 적용되는 적합성 라벨입니다.

알림 1:

이 장치는 FCC 규정 Part 15와 캐나다 산업성의 면허 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건을 따릅니다.

- 1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.
그리고
- 2) 이 장치는 원치 않는 장치 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

알림 2:

Sonova Communications AG의 명시적 승인 없이 이 장치를 변경하거나 수정하면 이 장치 작동에 대한 FCC 승인이 무효화될 수 있습니다.

알림 3:

이 장치는 테스트되었으며, 캐나다 산업성 ICES-003 및 FCC 규정 Part 15에 따라 Class B 디지털 장치 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

이 제한사항은 거주 시설에서 유해한 간섭으로부터 적절히 보호하기 위한 것입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 방사하며, 안내에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을

일으킬 수 있습니다. 그렇지만, 특정 시설에서 간섭이 발생하지 않음을 보증하지는 않습니다. 장치가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 켜다 켜면 확인할 수 있음) 사용자는 다음 방법 중 하나를 사용하여 간섭 문제를 해결하도록 시도하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나 방향을 바꾸거나 위치를 옮깁니다.
- 장치와 수신기 간의 거리를 더 멀리 합니다.
- 수신기가 연결된 콘센트가 아닌 다른 회로 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 대리점 또는 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

알림 4:

일본 무선 법 준수. 비즈니스 법 준수. 이 장치는 일본 무선 법 (電波法) 에 따라 허가되었습니다. 이 장치는 변경하면 안 됩니다(변경하면 허가된 지정 번호가 무효화됨).

알림 5:

FCC/캐나다 산업성 RF 방사선 피폭 성명
이 장치는 통제되지 않은 환경에 대해 설정된 FCC RF 방사선 피폭 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동해서는 안 됩니다.

11. 기호 안내 및 설명



CE 기호는 이 제품이 Radio Equipment Directive 2014/53/EU를 준수한다는 것을 Sonova Communications AG에서 확인하는 표시입니다.



이 기호는 사용자가 본 사용 설명서의 관련 정보를 읽고 고려하는 것이 중요함을 나타냅니다.



장치 제조사를 나타냅니다.



이 기호는 사용자가 본 사용 설명서에 있는 관련 경고 사항에 주의를 기울이는 것이 중요함을 나타냅니다.



취급 및 제품 안전에 중요한 정보입니다.

작동 조건

이 장치는 이 사용 설명서에 달리 명시되지 않은 한, 설계 의도대로 사용하는 경우 문제점이나 제한사항 없이 기능을 발휘하도록 되어 있습니다.



수송 및 보관 온도: $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}$ 섭씨
($-4^{\circ} \sim +140^{\circ}$ 화씨). 작동 온도: $0^{\circ} \sim +40^{\circ}$ 섭씨($+32^{\circ} \sim +104^{\circ}$ 화씨).



건조한 상태를 유지하십시오.



운송 및 보관 중 습도: 90% 미만(비응축).
작동 습도: 90% 미만(비응축).



대기압: 200hPa ~ 1500 hPa.



제품 또는 포장에 있는 이 기호는 다른 가정용 생활폐기물과 함께 폐기될 수 없음을 나타냅니다. 이 제품은 장치 구입처나 폐기용 전기, 전자제품수거소에 별도로 폐기되어야 합니다. 오래된 기기를 올바르게 폐기하면 환경 및 인체 건강에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. 이 제품에는 교체할 수 없는 배터리가 내장되어 있습니다. 부상을 입거나 제품을 손상시킬 수 있으므로 제품을 열거나 배터리를 제거하려 하지 마십시오. 배터리를 제거하려면 현지 재활용 시설에 문의하십시오.

12. 경고 및 주의 사항

장치를 사용하기 전에 다음 페이지에 있는 정보를 읽으십시오.

12.1 위험 경고

- ⚠ 이 장치는 36개월 미만의 어린이가 사용할 수 없습니다. 이 장치에는 어린이가 삼킬 경우 질식의 원인이 될 수 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 어린이 및 정신 장애가 있는 사람 또는 애완동물이 닿을 수 없는 곳에 보관 하십시오. 부품을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 병원에 연락하십시오.
- ⚠ 이 장치는 자기장을 생성할 수 있습니다. 이식 가능 장치(예: 심박조율기, 제세동기 등)에서 Roger 셀렉트 iN의 영향이 느껴지는 경우, Roger 셀렉트 iN의 사용을 중단하고 담당 의사 또는 의료기기 제조사에 문의하시기 바랍니다.
- ⚠ 청각 전문가에 의해 프로그램된 보청기만 사용하십시오.

- ⚠ 전기 부품은 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
- ⚠ Sonova Communications AG에서 명시적으로 승인하지 않은 장치에 대한 변경이나 수정은 허용되지 않습니다.
- ⚠ Sonova Communications AG에서 승인한 액세서리만 사용하십시오.
- ⚠ Sonova Communications AG에서 제공하는 충전기는 최대 고도 5000m에서 Roger 셀렉트 iN 충전에 사용할 수 있습니다. 안전을 위해 Sonova Commnications AG에서 제공하는 충전기 또는 정격 5VDC, 최대 2000mA 및 최대 고도 2000m 사용으로 승인된 충전기만 사용하십시오.
- ⚠ 폭발 위험이 있는 구역(폭발 위험이 있는 광산 또는 산업 지역, 산소가 많은 환경 또는 인화성 마취제를 처리하는 곳) 또는 전자 장비가 금지된 장소에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.

- ⚠ 장치를 열면 장치가 손상될 수 있습니다. 본 사용 설명서의 문제 해결 방법에 명시된 내용으로 해결되지 않는 문제가 발생하면, 담당 청각 전문가와 상의하십시오.
- ⚠ 기계를 작동할 때 장치의 어떤 부분도 기계에 걸리지 않게 하십시오.
- ⚠ 장치를 몸에 지니고 있을 때는 충전하지 마십시오.

12.2 제품 안전 정보

- ① 먼지나 이물질로부터 장치 커넥터, 플러그, 전원 공급장치를 보호하십시오.
- ① 장치를 다른 케이블에 연결할 때 과도한 힘을 주지 마십시오.
- ① 과도한 습기(목욕 또는 수영 구역) 및 열원(라디에이터)으로부터 장치를 보호하십시오. 심한 충격이나 진동이 가해지지 않도록 장치를 보호하십시오.
- ① 장치를 닦을 때는 젖은 헝겊을 사용하십시오. 가정용 세제(가루비누, 비누 등)나 알코올로 장치를 닦아서는 절대로 안 됩니다. 전자레인지 또는 기타 가열 장치를 사용하여 장치를 건조시켜서는 절대로 안 됩니다.
- ① X선 방사능, CT 스캔 또는 MRI 스캔은 장치의 올바른 작동에 치명적이거나 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

- ① 장치가 떨어졌거나 손상된 경우, 과열된 경우, 장치의 코드나 플러그가 손상된 경우 또는 장치를 액체에 떨어뜨린 경우, 장치 사용을 중지하고 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

12.3 기타 중요 정보

- ① 광 Toslink 케이블을 장치 또는 TV에 연결했을 때 이 케이블의 광학 빛으로부터 눈을 보호하십시오.
- ① 고전력 전자 장비, 대형 전기 시설 및 금속 구조물은 작동 범위를 손상시키고 크게 줄일 수 있습니다.
- ① 장치는 내부 기술 데이터를 수집하고 저장합니다. 이 데이터는 장치를 점검하고 사용자의 올바른 장치 사용을 돕는 목적으로 청각 전문가가 확인할 수 있습니다.
- ① 장치에서 연결된 수신기로 전송된 디지털 신호는 마이크의 네트워크에 없는 다른 장치로는 전송되지 않습니다.

13. 서비스 및 보증

13.1 국내 제품 보증 서비스

국내 제품 보증 서비스 규정에 대해서는 구입처의 청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

13.2 국제 제품 보증 서비스

Phonak은 구입일로부터 1년간의 유효한 국제 제품 보증 서비스를 제공합니다. 본 보증 서비스는 제조 및 재료 결함에 대해 적용됩니다. 이 보증은 구매 영수증을 보여주는 경우에만 유효합니다.

국제 제품 보증은 현지 보증이나 소비재 판매에 적용 가능한 국가 법률에 따라 소비자가 보유할 수 있는 법적 권리에 영향을 주지 않습니다.

13.3 제품 보증 제한

이 보증은 부적절한 취급, 보관, 화학물질에 대한 노출, 침수, 또는 과도한 물리적 충격으로 인한 제품 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. 제3자 또는 포낙 브랜드 공식 지정업체가 아닌 곳에서 수리를 하여 발생한 손상 및 고장에 대해서도 제품 보증 서비스를 받으실 수 없습니다. 본 제품의 보증은 청각 전문센터에서 제공한 서비스를 포함하지 않습니다.

일련 번호: _____

구입 일자: _____

포낙 보청기 공식 판매처
(도장/서명):

참고

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
스위스
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-0755-19/V3.00/2021-06/Nerc © 2021 Sonova AG All rights reserved

