


myPhonak●

使用指南 – myPhonak 7

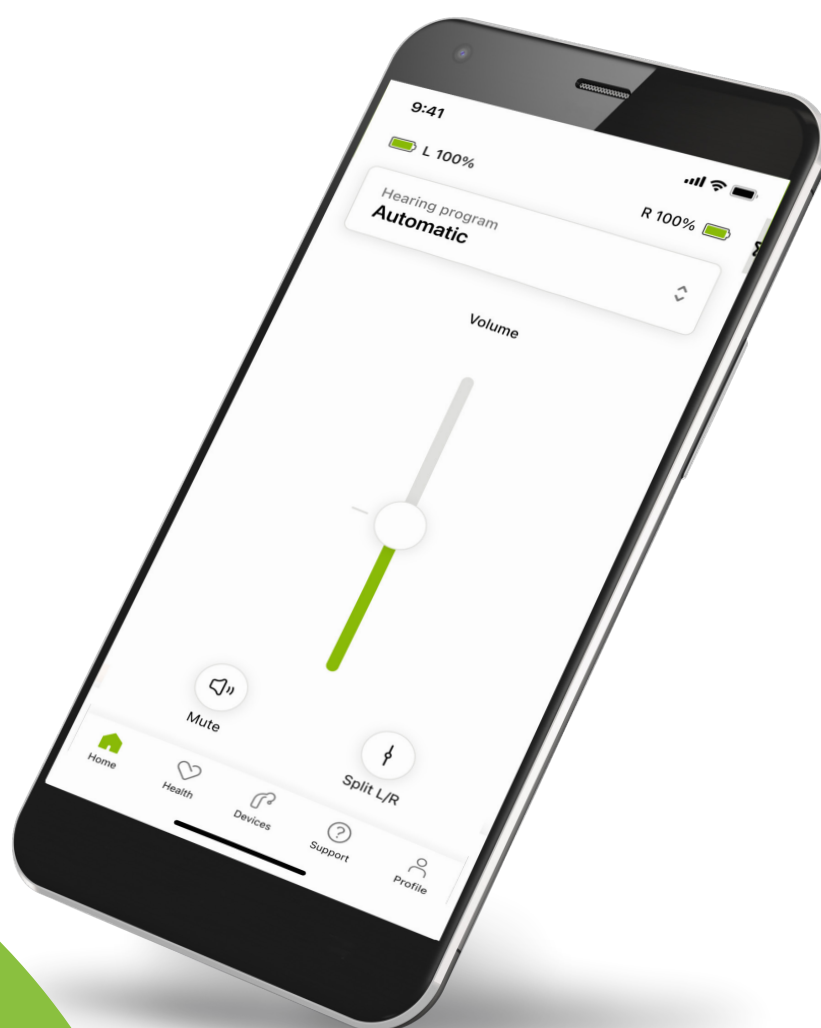

新手入門

myPhonak 是聽力解決方案全球領導者 Sonova（總部設在瑞士蘇黎世）開發的一款應用程式。本使用指南描述了可由用戶操作的功能。

- ❗ 開始使用應用程式前，請仔細閱讀本使用指南，以便充分利用它所提供的所有功能。
- ❗ 操作此應用程式不需要額外的訓練。



相容性資訊：

myPhonak app 僅支援有 Bluetooth®（藍牙）連接功能的峰力助聽器。

- myPhonak 可用於使用 iOS® 16 或更高版本、具有 Bluetooth®（藍牙）低功耗 (LE) 功能的手機。
- myPhonak 可以在獲得 Google Mobile Services (GMS) 認證並支援 Bluetooth®（藍牙）4.2 和 Android OS 10.0 及更新版本的 Android™ 裝置上使用。

Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。

iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

Android 是 Google LLC 的商標。

IOS® 是 Cisco Systems, Inc. 和/或其附屬公司在美國和某些其他國家/地區的註冊商標或商標。

目錄

快速概覽	4
安裝 myPhonak	5
用 myPhonak 設定和管理帳戶	6
與峰力助聽器配對	7
疑難排解：配對	8
首頁：遙控器視圖	9
首頁：遙控器進階設定	10
首頁：遙控器視圖* – 非標準功能	12
首頁：遙控器進階設定 – 建立新程式或更新現有程式*	14
疑難排解：遙控器進階設定	15
使用 Auracast™ 廣播*	16
裝置	17
更新	20
支援和遠端支援會話	22
開始遠端支援會話	25
疑難排解：遠端支援會話	26
健康管理部分中的健康資料追蹤：設定	28
健康管理頁面	29
健康管理詳細功能視圖：佩戴時間、步數、活動水平*、步行和跑步距離*	30
健康管理詳細功能視圖：心率*、步行和跑步*消耗的卡路里*	32
健康管理：其他功能*	34
重要安全資訊	36
相容性資訊	38
符號說明	39

快速概覽

遙控器




遠端支援



*僅適用於可充電助聽器。

安裝 myPhonak

1. 將您的智慧型手機透過 WiFi 或行動資料連接到網路。
2. 打開智慧型手機的 Bluetooth®（藍牙）。
3. 從商店下載 myPhonak 應用，然後將其安裝到手機上。
4. 打開應用。
5. 首次使用應用時，您可以進行導覽。
如果不需要，點擊[跳過過程](#)。

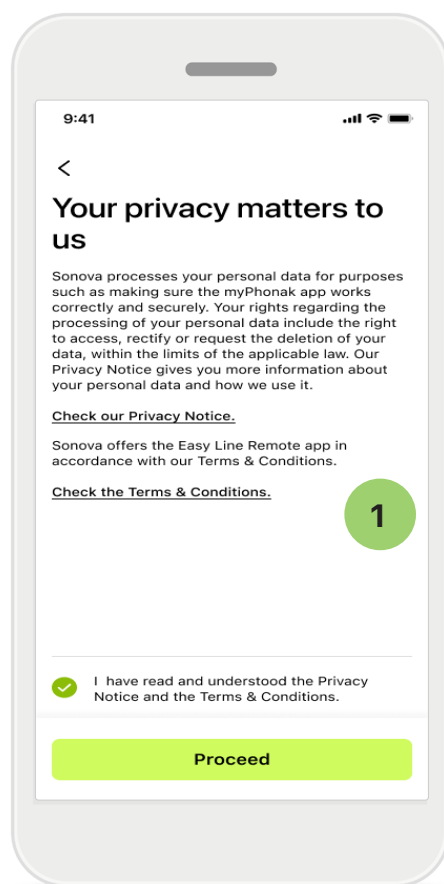

1 隱私權原則



如要使用該應用，請在閱讀隱私權注意事項及條款和條件後選取核取方塊。然後，點擊[繼續](#)。

產品改進

您可以分享應用的使用方法和健康資料，以幫助我們改進產品。您的資料將按照隱私權注意事項中的描述進行處理，並且無法反向追溯到您。

用 myPhonak 設定和管理帳戶

- 您可以建立帳戶以存取其他健康管理功能。無需建立帳戶即可調整您的助聽器設定。
- 您可以使用您的電子郵件 ID 或手機號碼建立您的帳戶。
- 如果您已經擁有帳戶，請點擊**登入**。
- 如果您想跳過該部分，請點擊  **Home**。

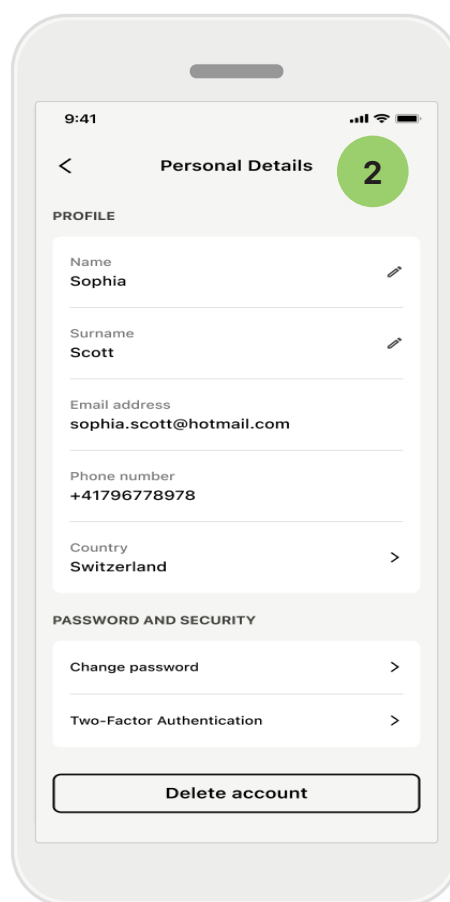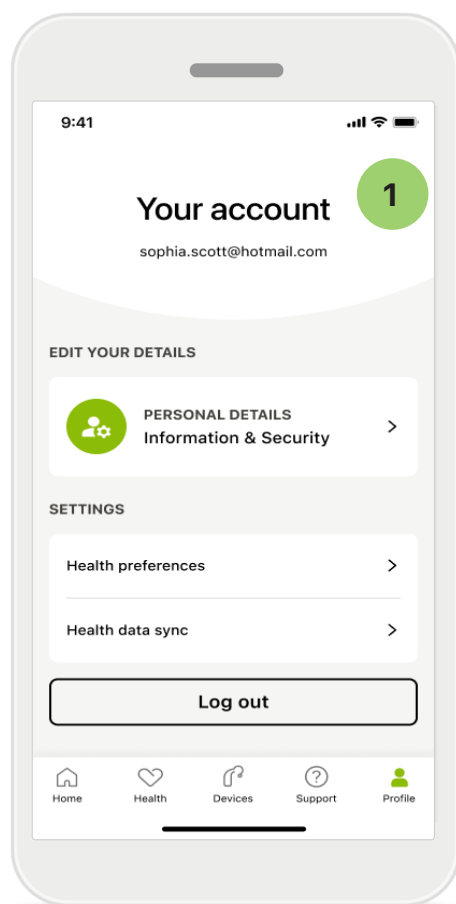

1 「個人資料」部分
在「個人資料」螢幕上，
您可以編輯自己的個人資
料資訊，並調整與健康管
理有關的偏好。


如果要從應用登出，點擊
登出。

2 個人詳細資訊
您可以在「個人詳細資訊」下
編輯自己的個人資訊，以及修
改您的安全資訊。
如果您想刪除自己的帳戶，點
擊**刪除帳戶**。您需要輸入密碼
來確認該操作。

與峰力助聽器配對

要將支援 Bluetooth®（藍牙）功能的助聽器與 myPhonak 連接，請按照以下說明操作。


- 點擊**讓我們開始吧**

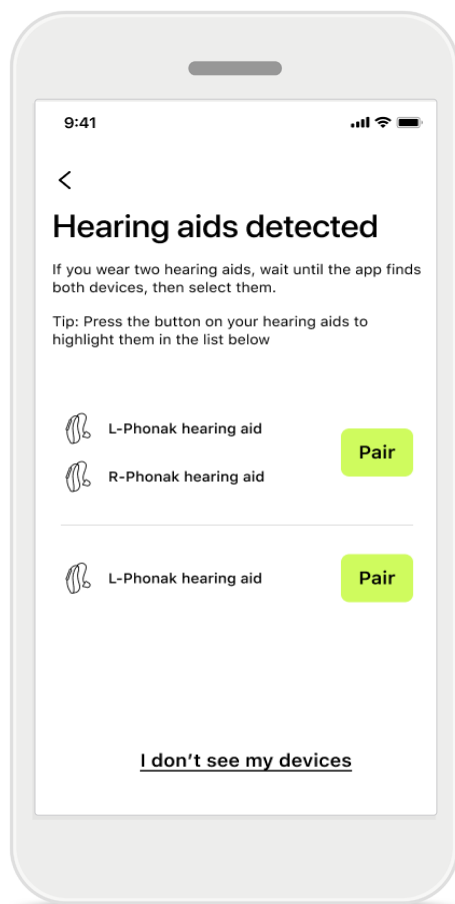

正在搜尋

應用程式會搜尋相容的助聽器。這可能需要幾秒鐘。之後，會顯示結果。點擊您要連接的裝置。應用程式將分別連接各個助聽器。

在 iOS 裝置上，分別為每個助聽器點擊彈出框中的配對以確認**配對**。

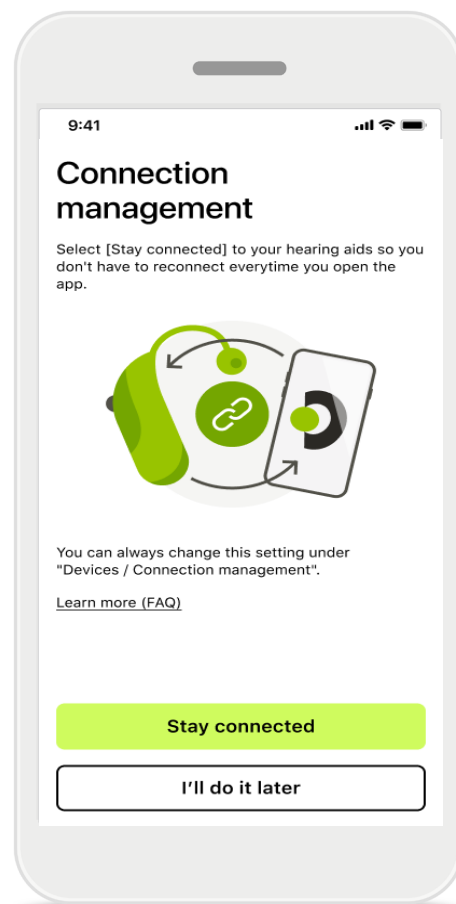

連接管理

您可以將助聽器與 myPhonak 應用程式保持連接，以免每次都重新進行連接。點擊**保持連接**來啟動該設定。

Infinio Ultra 及更新版本的附加功能：

- 成功配對之後，您的助聽器便可連接並進行藍牙串流傳輸。現在您可以使用助聽器聆聽音樂和接聽來電。


i 如果助聽器不回應，請檢查您是否超出範圍、助聽器是否已開機及電池是否有電量。如果存在干擾區域，請離開干擾區域。

疑難排解：配對

設定過程中可能出現的錯誤。


有關更多疑難排解資訊，請訪問峰力支援頁面：

<https://www.phonak.com/support-connectivity-guide>

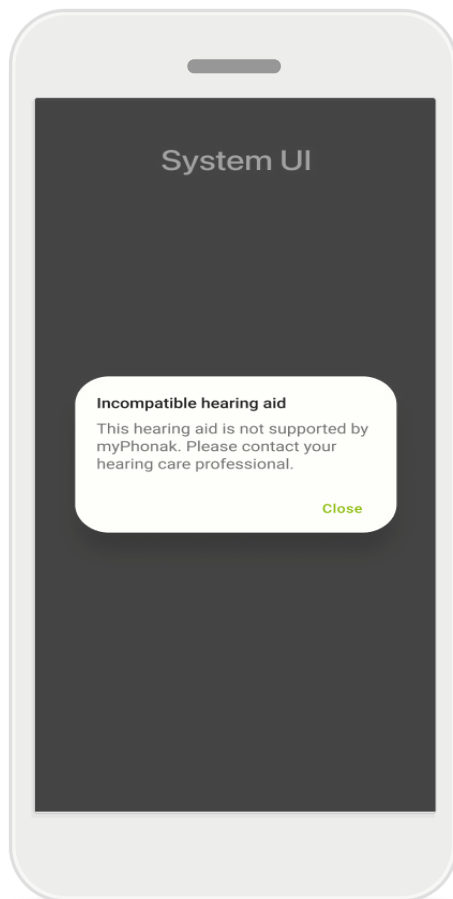

裝置不相容

應用程式無法連接助聽器，因為它們不相容。
瞭解更多資訊，請連絡您的聽力保健專業人員。

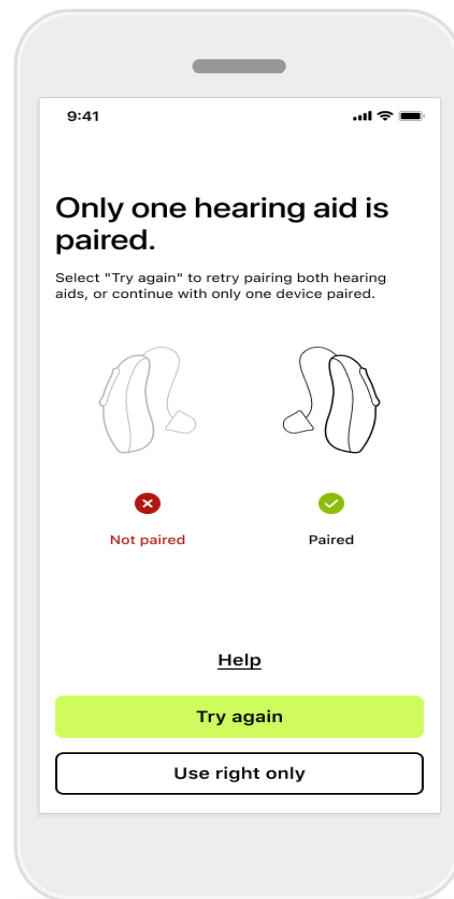

助聽器連接錯誤


如果與其中一個助聽器配對失敗，點擊**重試**以重新開始配對過程。

連接雙側助聽器失敗

點擊**重試**重新開始配對過程。
請按照說明進行。

在 Android 裝置上，首次與 Bluetooth®（藍牙）裝置配對時必須啟用位置服務。
首次設定後，您可以再次停用定位服務。


首頁：遙控器視圖

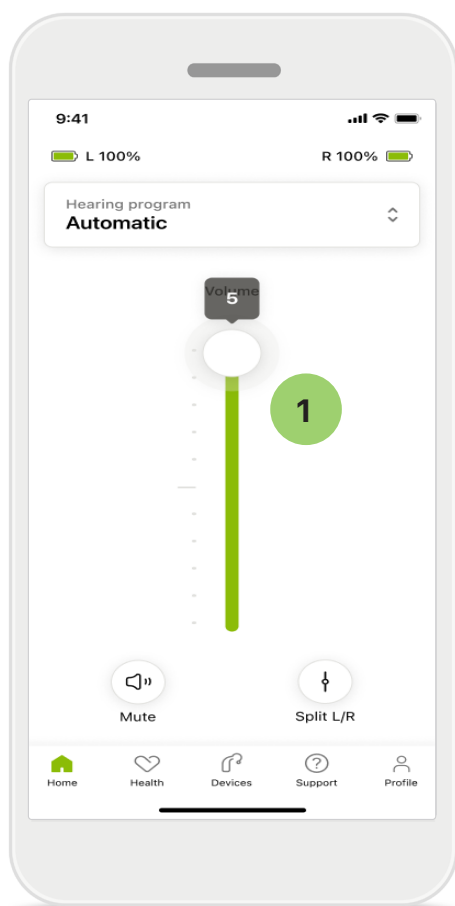

1 調整助聽器音量

向上移動滑塊可以提高音量。若要降低音量，請向下移動滑塊。

如果您使用兩個助聽器，則該滑塊可以同時控制兩個裝置。

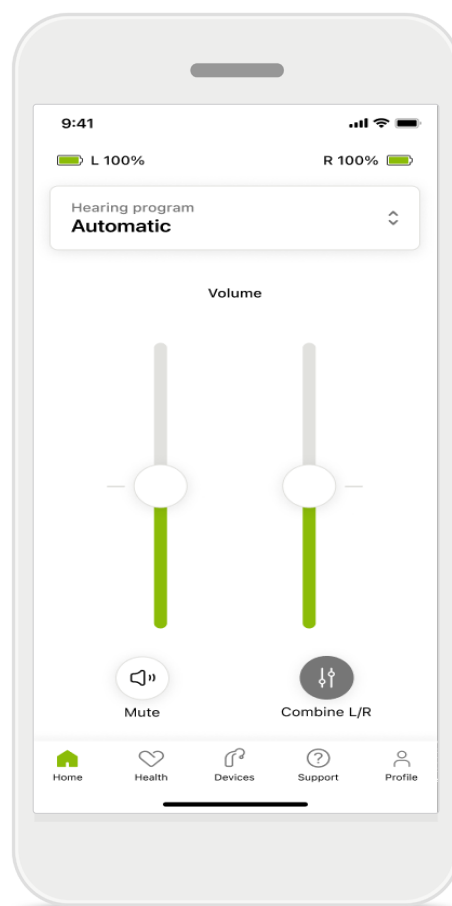


分開調整音量

如果您要分開調整，請按一下  **拆分** 圖示，以單獨調整每個助聽器，或返回到主設定。如果您要將助聽器靜音或取消靜音，只需點擊  **靜音** 圖示即可。

可直接從應用程式主螢幕頂部訪問聲音程式。滑動選單，透過點擊選擇適合您需求的程式。從以下程式中進行選擇：

-  全自動程式
-  由聽力保健專業人員建立的程式
-  由您建立的程式


首頁：遙控器進階設定

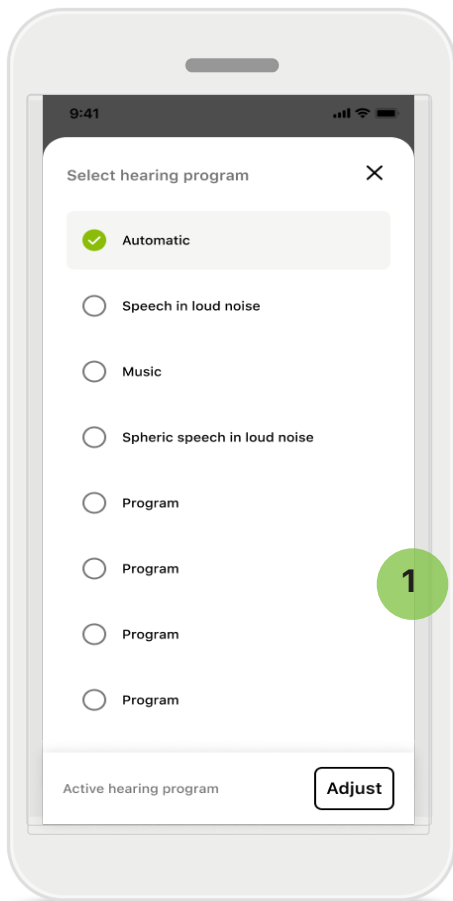

1

調整程式


透過點擊**調整程式**，您可以使用進階聲音設定修改所選程式。

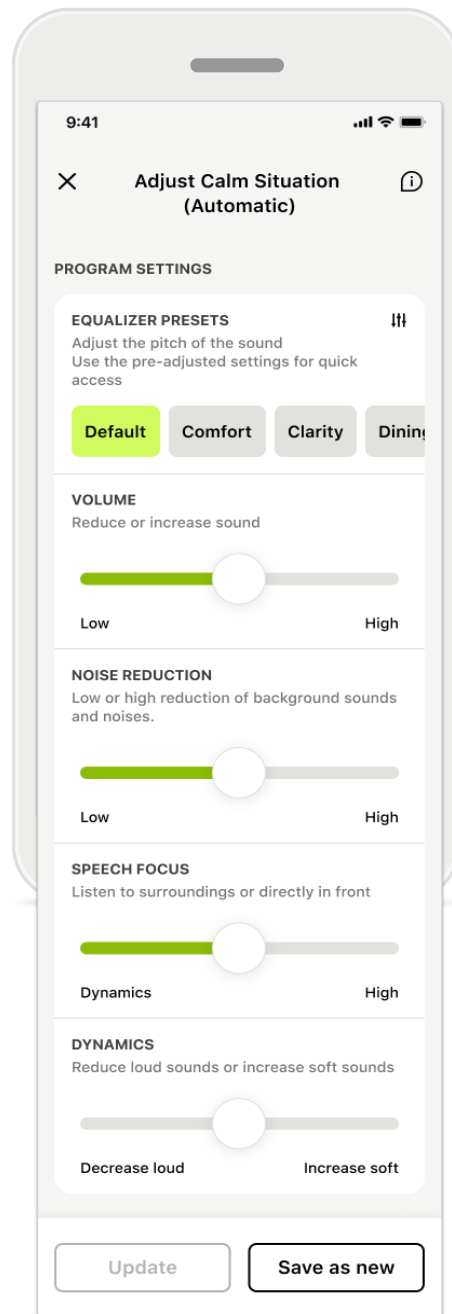

程式設定


您可以用不同的方式調整所選程式。使用滑桿來調整每個設定：均衡器預設、音量控制、降噪、語音聚焦和動態控制。

首頁：遙控器進階設定

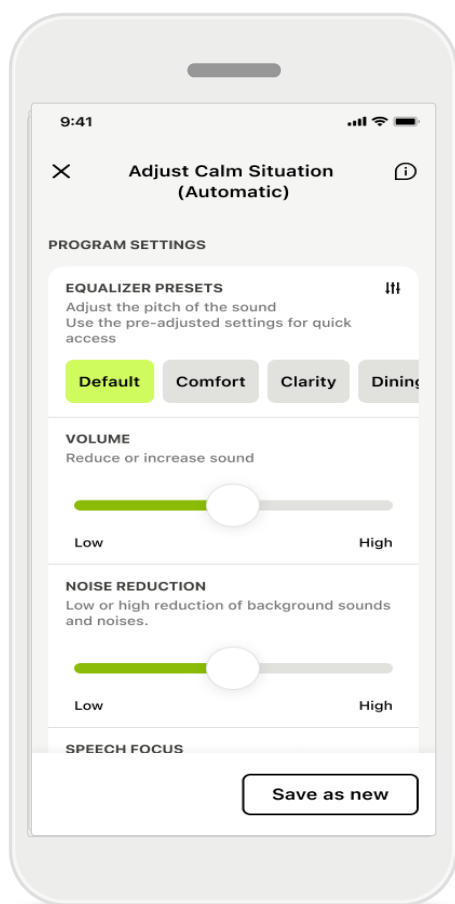

均衡器預設

均衡器預設可讓您根據自己所處的聲學環境對音高進行快速調整。點擊均衡器圖示進行進階調整。

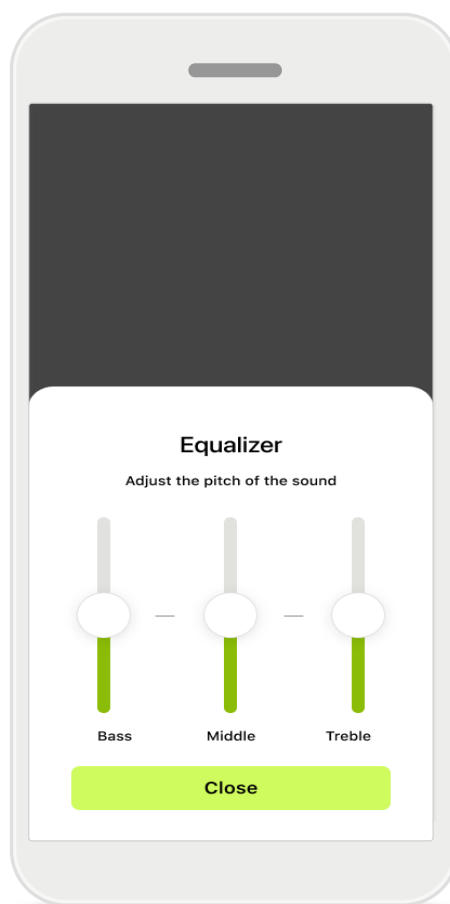


調整音高

使用滑標調整聲調（頻率）。點擊關閉返回到設定。


首頁：遙控器視圖* – 非標準功能

- 根據助聽器的程式設計方式以及所擁有的無線配件，如果您要進行串流傳輸，則可調整更多設定，如耳鳴遮蔽器和環境平衡。例如，如果您的助聽器支援耳鳴功能，並且您正在使用傳輸程式，則可以在專用螢幕中進行調整。

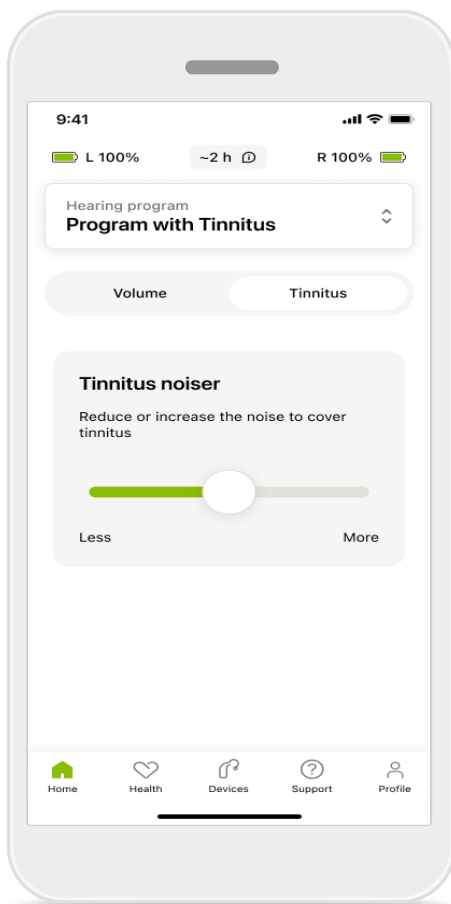

耳鳴遮蔽器

如果您有耳鳴，並且聽力保健專業人員已經告知您如何使用耳鳴遮蔽器，您可以調節掩蔽噪音的音量。

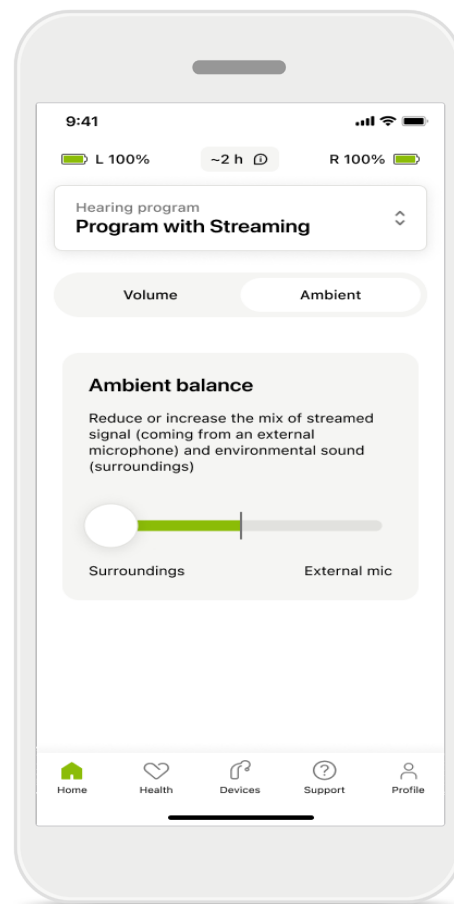


環境平衡

如果您使用外部傳輸裝置（例如電視連接器、音樂），則可以將焦點調整為聽到更多的傳輸訊號，或聽到更多的周圍環境聲音。

* 有關功能和助聽器相容性的詳情，請諮詢您的聽力保健專業人員。

首頁：遙控器視圖* – 非標準功能

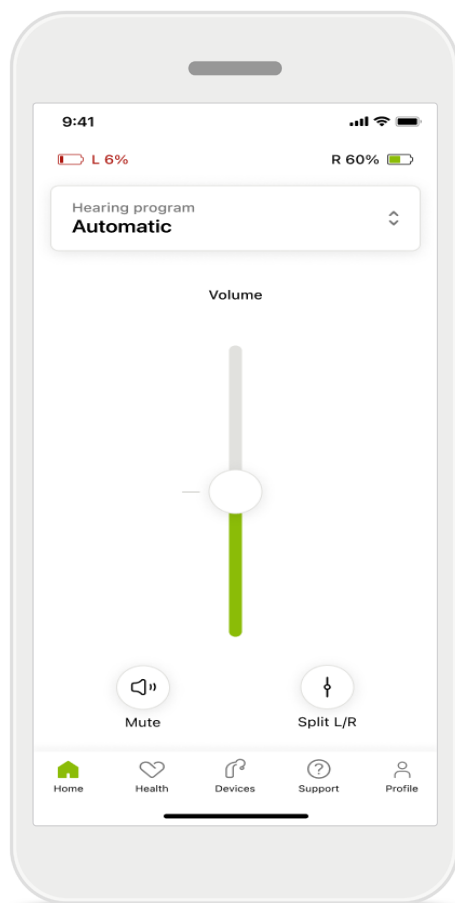


電池電量

對於可充電的助聽器，您可以查看目前的充電狀態。如果電池低於20%，圖示會變紅。考慮儘快充電。

* 有關功能和助聽器相容性的詳情，請諮詢您的聽力保健專業人員。

首頁：遙控器進階設定 – 建立新程式或更新現有程式*

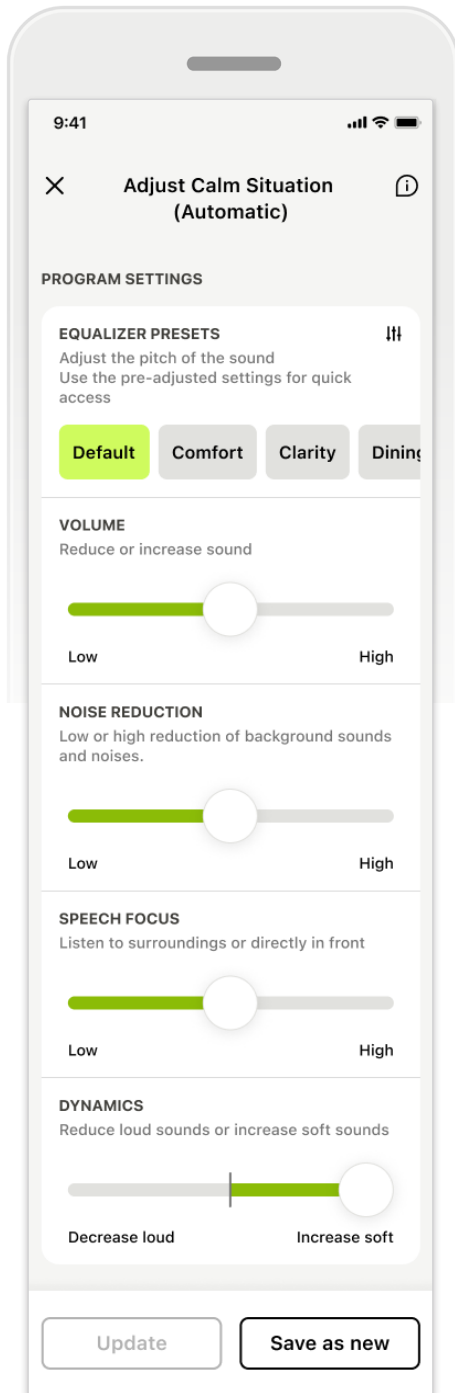

個人化調整


對現有程式進行調整後，可選擇更新或另存為新程式。如果您選擇將其另存為新程式，可為其命名。

請記住，名稱限制為 22 個字元，而且不得重複使用相同的名稱、將其留空或使用空格填充。

成功儲存新程式會顯示一個相應的螢幕，並將您的新設定新增至程式清單中。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。


疑難排解：遙控器進階設定

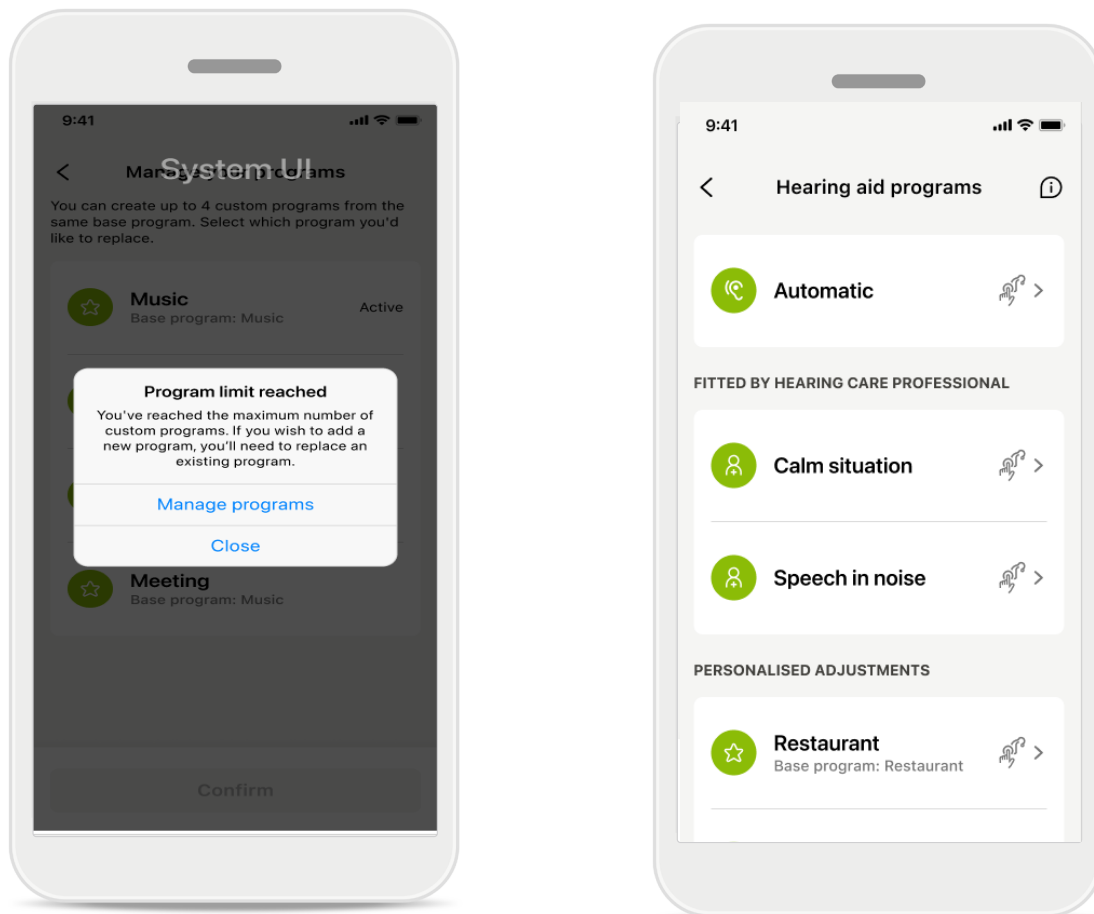

已達到程式限值 – 同一基本程式上限
最多可以根據同一基本程式建立四個程式。
如果達到限制，則可以點擊**管理**，將現有程式替換為新程式。

使用 Auracast™ 廣播*

透過 Auracast™ 廣播，您可以使用來自電視、劇院、音樂會等場所的現場共享音訊廣播，前提是該場所配備了 Auracast™ 技術。

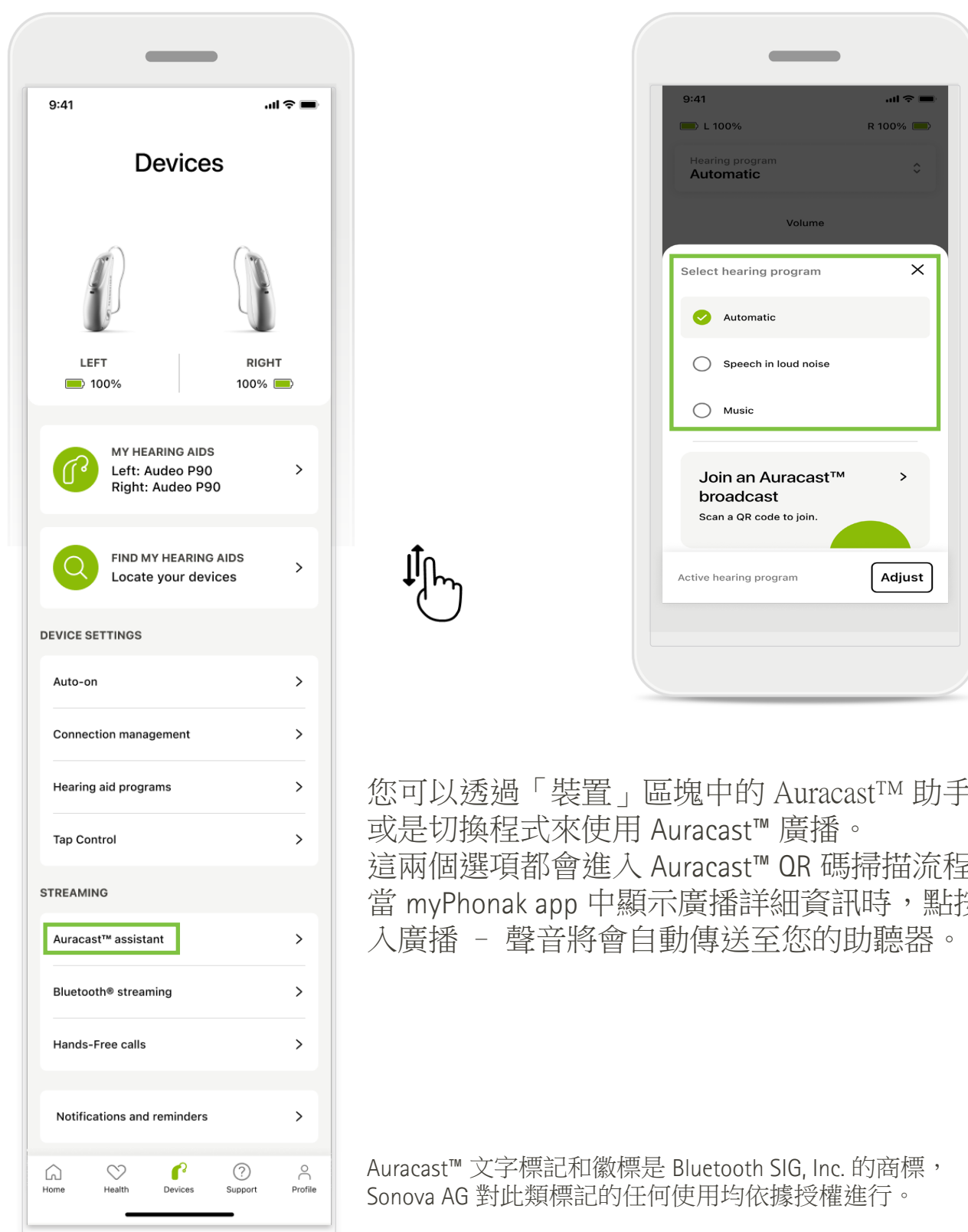


您可以透過「裝置」區塊中的 Auracast™ 助手，或是切換程式來使用 Auracast™ 廣播。這兩個選項都會進入 Auracast™ QR 碼掃描流程。當 myPhonak app 中顯示廣播詳細資訊時，點按加入廣播 - 聲音將會自動傳送至您的助聽器。

Auracast™ 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

裝置

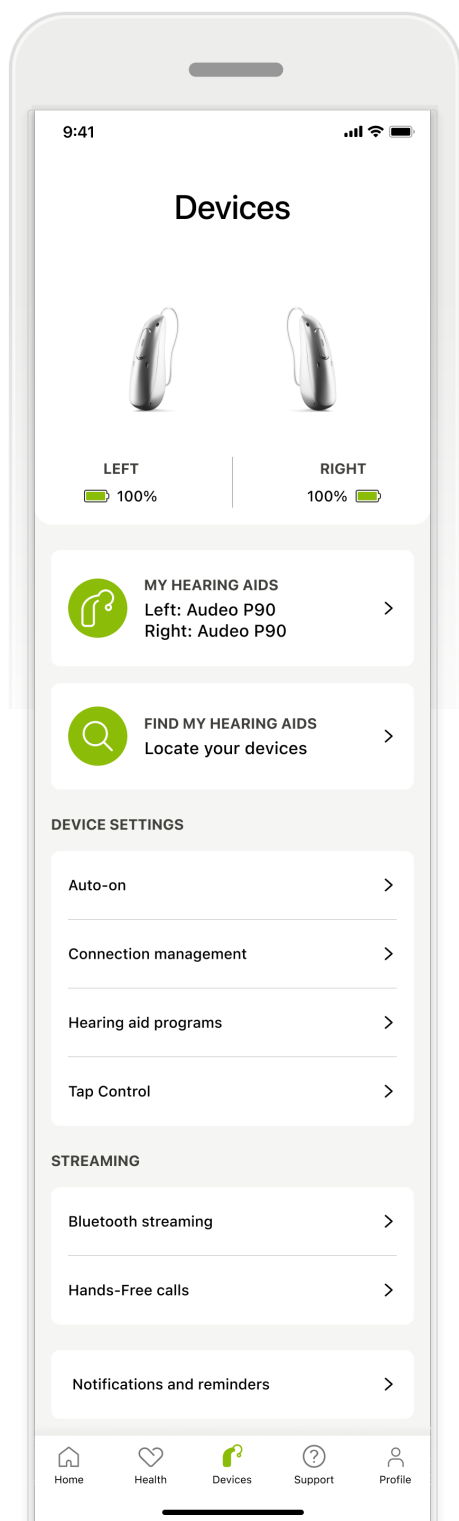


裝置主螢幕

在「裝置」部分，您可以存取與您的助聽器有關的所有設定，例如「程式管理」和「裝置設定」。您還可以查看可充電型號的電池狀態*。


*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

裝置

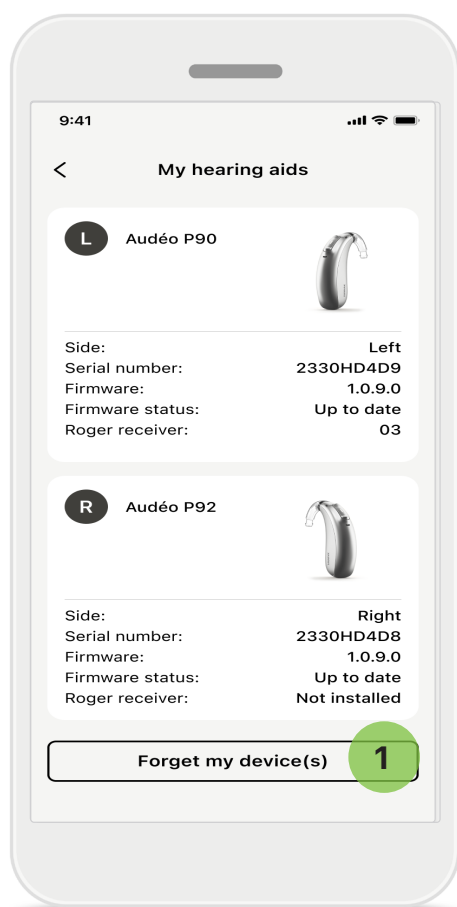


1 忘記裝置

轉到「我的助聽器」卡片刪除裝置。按一下「忘記我的裝置」按鈕後，會出現一條彈出式訊息。您需要確認刪除操作。請注意，執行該操作後，您需要再次與助聽器配對才能使用該應用。

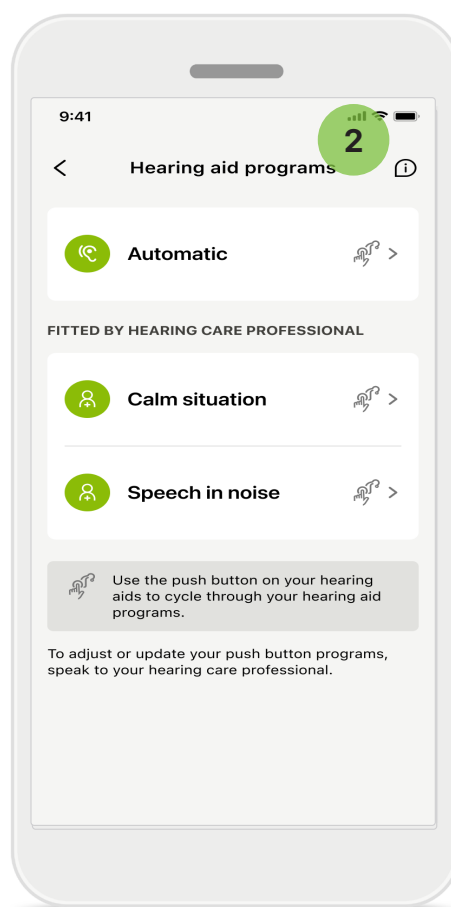


2 程式管理

透過點擊助聽器程式，您將能夠查看所有可用的程式。點擊一個程式可編輯其名稱或刪除它。有三種程式：全自動、由您的聽力保健專業人員建立的程式和個性化程式。如果程式名稱旁有圖示，表示可透過您助聽器上的按鈕使用。

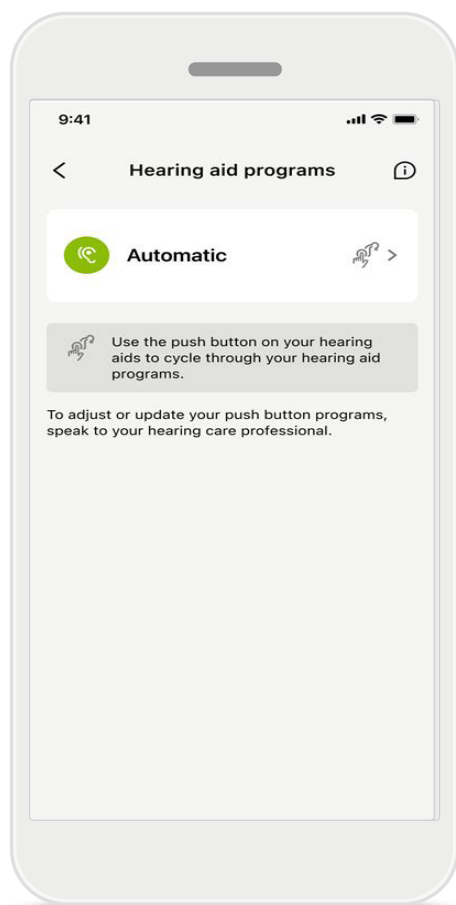

助聽器程式


您可以刪除程式，也可以變更其名稱。您還可以查看其關聯的基本程式。點擊**刪除程式**即可刪除程式。點擊按鈕會顯示一條彈出訊息，而您需要確認刪除操作。

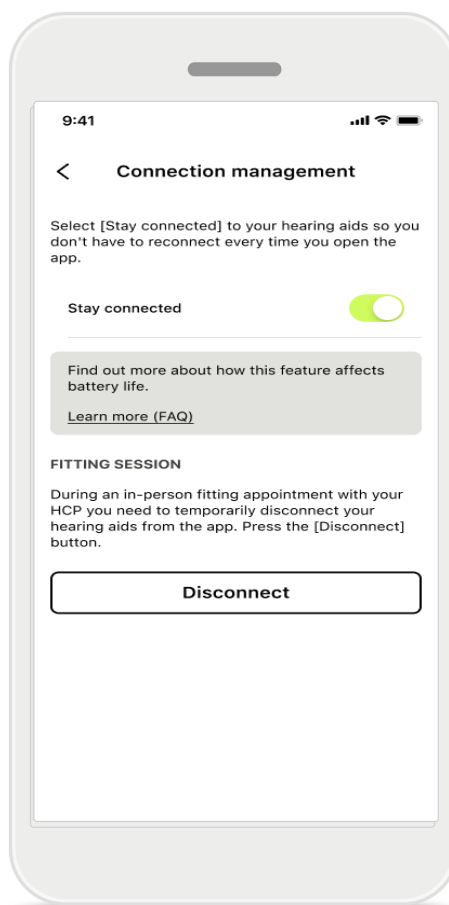

連接管理啟動

您可以啟動**保持連接**，這樣您就可以不必在每次打開應用程式時重新連接助聽器。

更新

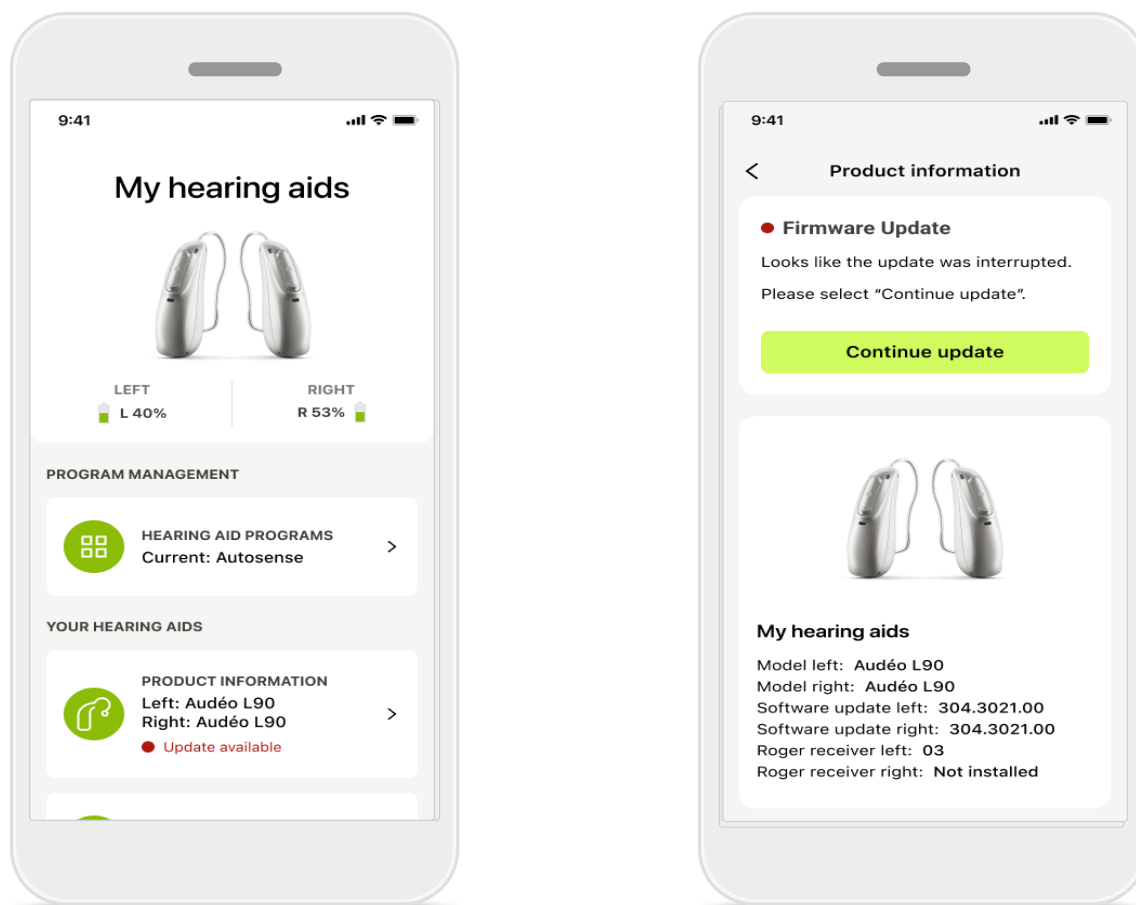


助聽器更新

可用的更新位於「裝置」部分的「產品資訊」下。

如果有可用的更新，則可以在「產品資訊」部分中找到更多資訊和更新的相關資訊。

要開始更新，請點擊[更新](#)。

更新

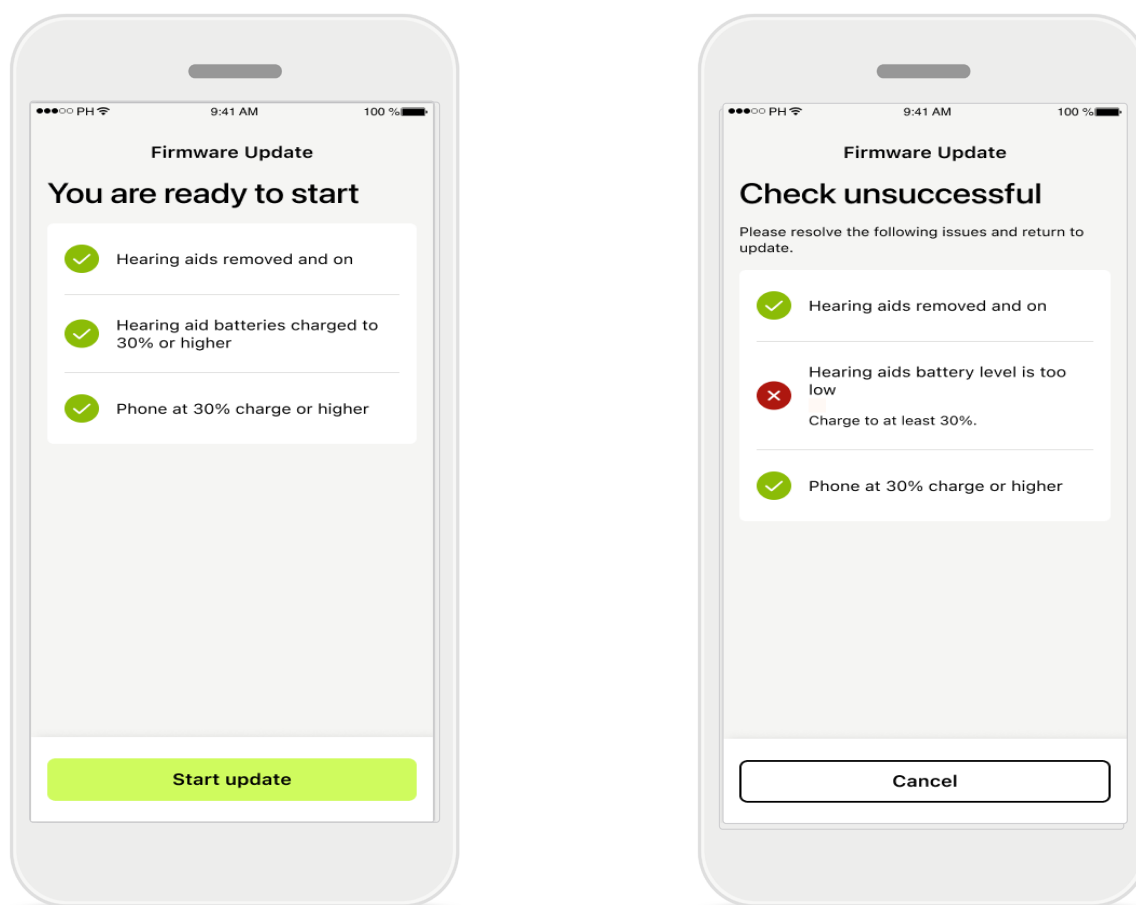


助聽器更新

只有滿足幾個條件，才能進行更新。這是為了防止更新失敗或中斷（即助聽器電池至少充電至 30% 或手機至少充電至 30%）。

系統會自動檢查這些條件，並顯示錯誤原因和修復方法的說明。按照這些提示操作，以便快速、順利地完成更新。


有關疑難排解，請訪問此[連結](#)。

支援和遠端支援會話

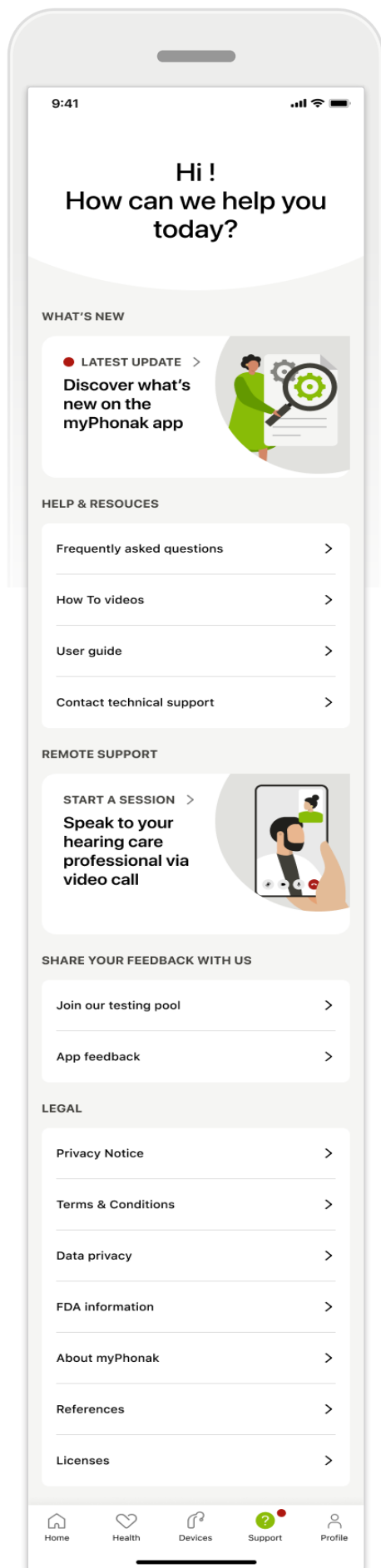

「支援」部分
在支援頁面中，您可以存取常見問題*、使用指南、操作方法視訊網站、法律設定以及共用回饋。您也可點擊「開始會話」來開始遠端支援。

支援和遠端支援會話

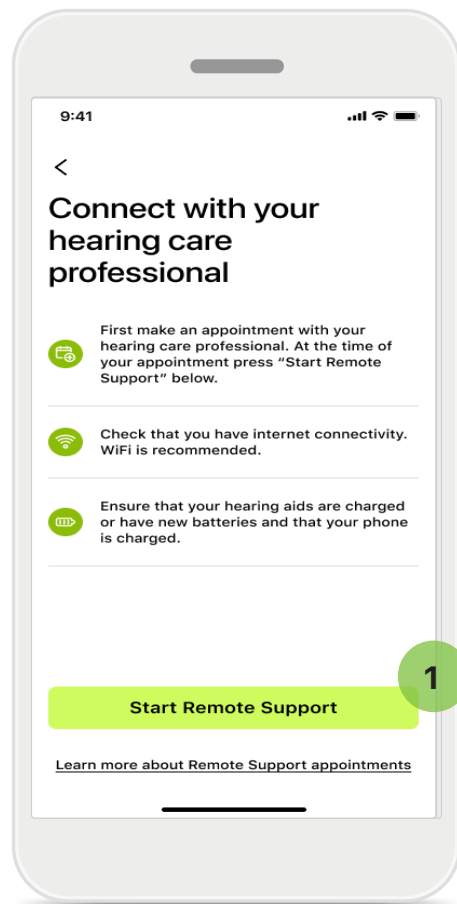

遠端支援


透過點擊「支援」頁面上的**開始會話**，您將能夠與聽力保健專業人員進行遠端支援會話。遠端會話需要事先預約。

1 點擊**開始遠端支援**以繼續。


存取麥克風和鏡頭

當詢問是否允許存取麥克風和鏡頭時，請點擊**確定**以同意 MyPhonak 應用程式存取麥克風和鏡頭。

支援和遠端支援會話

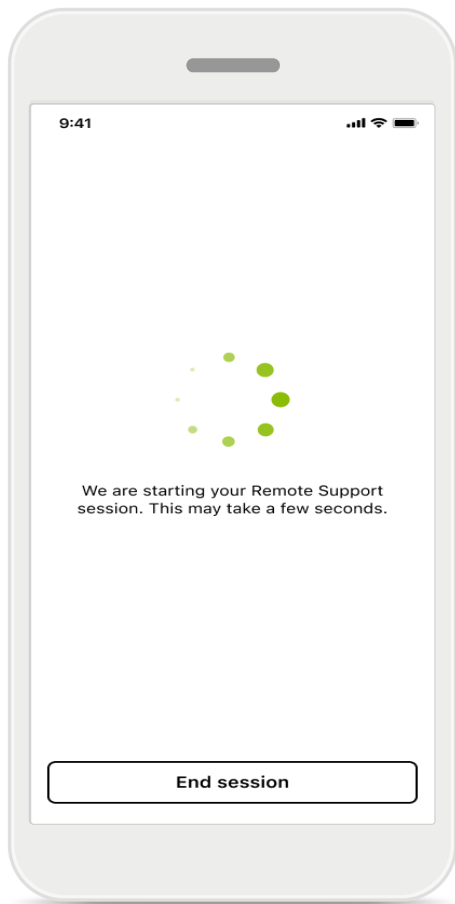


等待您的聽力保健專業人員應用程式將讓您與聽力保健專業人員連線。等待聽力保健專業人員進入通話。

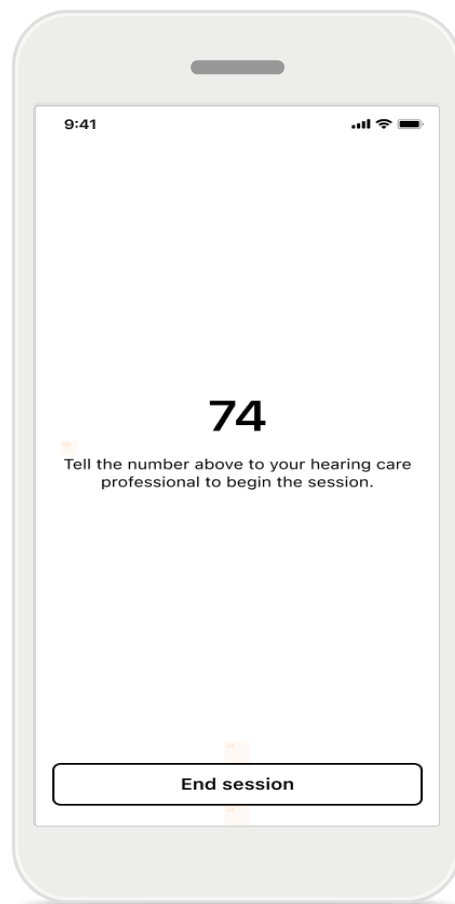


如果您正在使用視訊會議平台與聽力保健專業人員交流，螢幕上會出現一個 2 位數的代碼。請將 2 位數代碼口頭告知您的聽力保健專業人員，以完成連接。

開始遠端支援會話

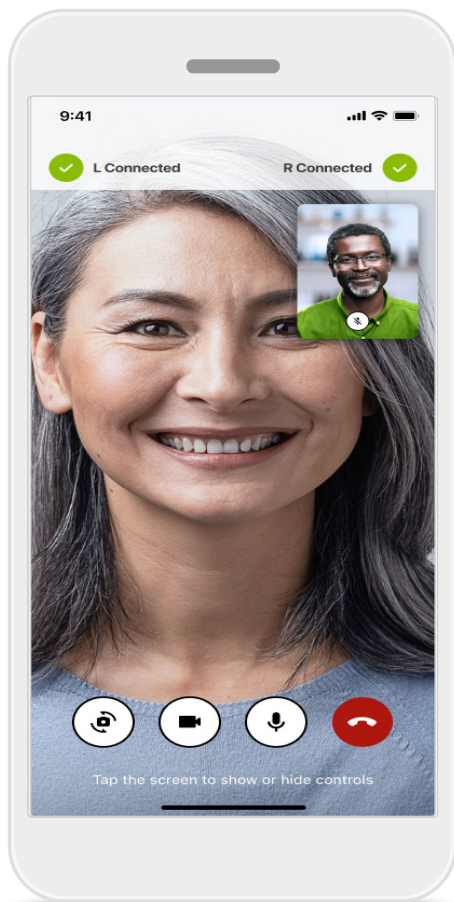

已經連接時，您將能夠看到聽力保健專業人員並聽到他們的聲音。使用控制項後，可以靜音/取消靜音、停用視訊、切換鏡頭或結束通話。

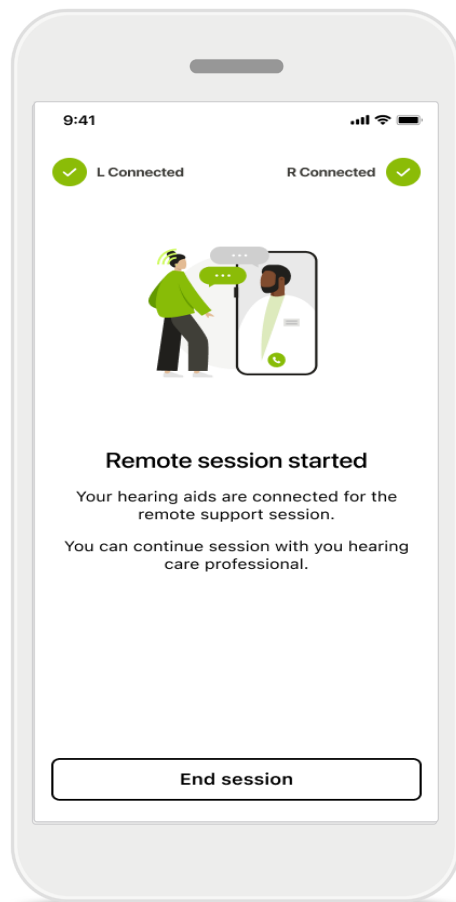


當您在視訊會議平台與聽力保健專業人員連線時，便無法透過 myPhonak 應用程式與他們進行音訊或視訊交流，但您的助聽器將保持連接。

如果聽力保健專業人員需要連接您的助聽器，可透過您的智慧型手機遠端連接。聽力保健專業人員會在連接成功後通知您。

通話結束後，您可以對體驗進行評價。點擊連結來提交回饋。點擊**完成**回到主螢幕。

疑難排解：遠端支援會話



遠端支援會話使用網際網路與您的聽力保健專業人員進行連接。為了提高品質，我們建議您使用 Wi-Fi。

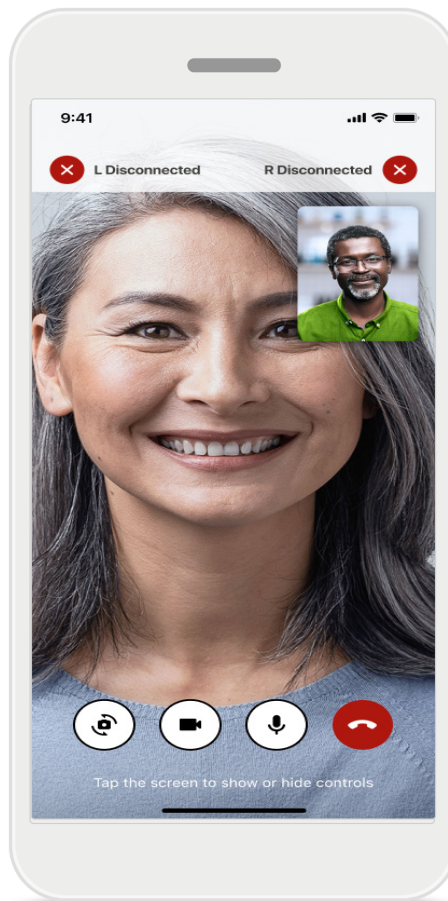

助聽器連接中斷

可在螢幕頂部看到助聽器連接情況。如果助聽器斷開連接，符號將變紅。您的聽力保健專業人員需要重新進行連接。

疑難排解：遠端支援會話

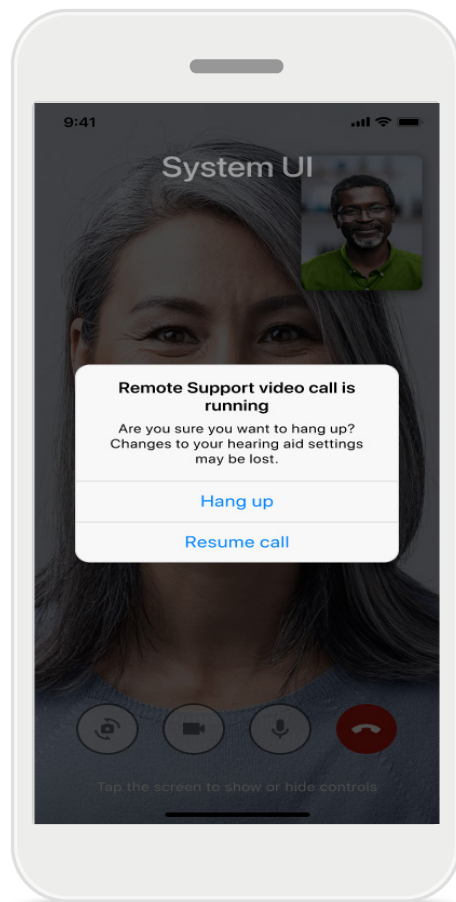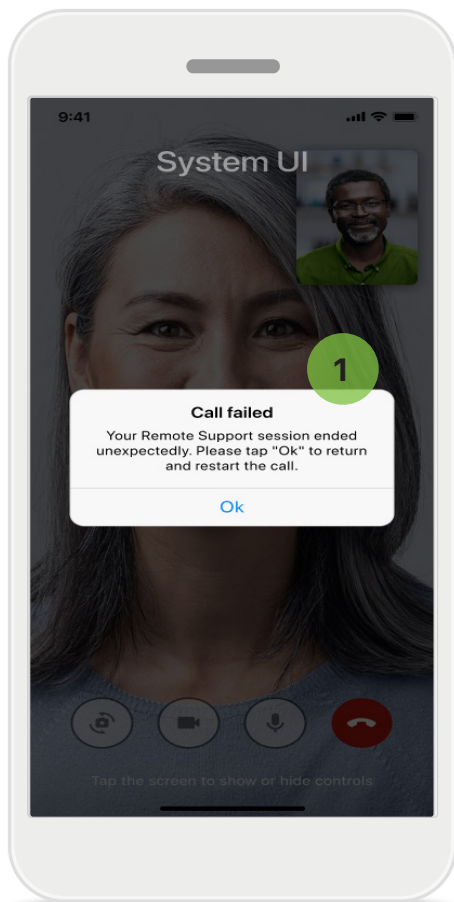

1 通話失敗

如果通話失敗，按下**確定**回到主頁面，您可以在其中重新開始通話。

運行時結束通話

如果您在通話過程中結束通話，則會顯示該彈出式訊息。

健康管理部分中的健康資料追蹤：設定

這裡介紹的「健康管理」部分的一些功能僅適用於某些助聽器。


有關更多資訊，請參閱 <https://www.phonak.com>

要存取健康管理功能 ，您需要用 myPhonak 帳戶註冊。

啟用 iPhone 的位置服務，以提高健康管理追蹤的品質。

拒絕存取將阻止您追蹤健康資料。

輸入您的詳細資訊，以便準確計算健康資料。請記住，該資訊是可選擇的。一切盡在您的掌控之中！

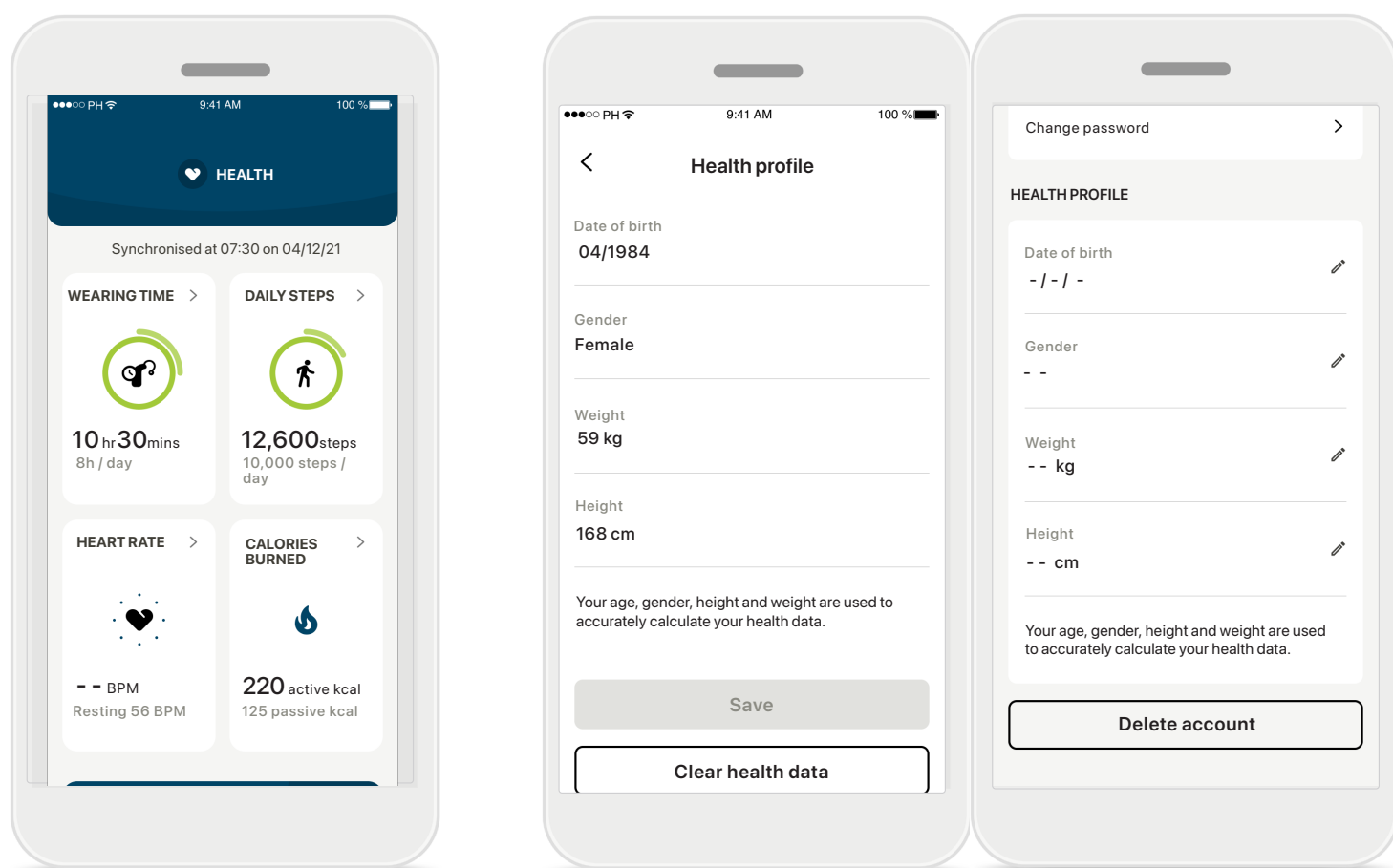

進入健康管理

設定完成後，您可以進入健康管理頁面（健康管理主螢幕）。


編輯/清除健康個人資料

您可以在「個人資料」部分編輯或清除您的健康個人資料數據。轉至「個人詳細資訊」，向下捲動至「健康個人資料」，然後點擊編輯（鉛筆）圖示來更新或清除您的資料。

健康管理頁面

在健康管理儀表板中，您可以：

- 存取您的助聽器所支援的健康管理功能，並查看其值的即時變化情況*，
- 查看目標進度（若已設定目標），
- 存取健康管理技巧（對其他健康管理應用的建議）。

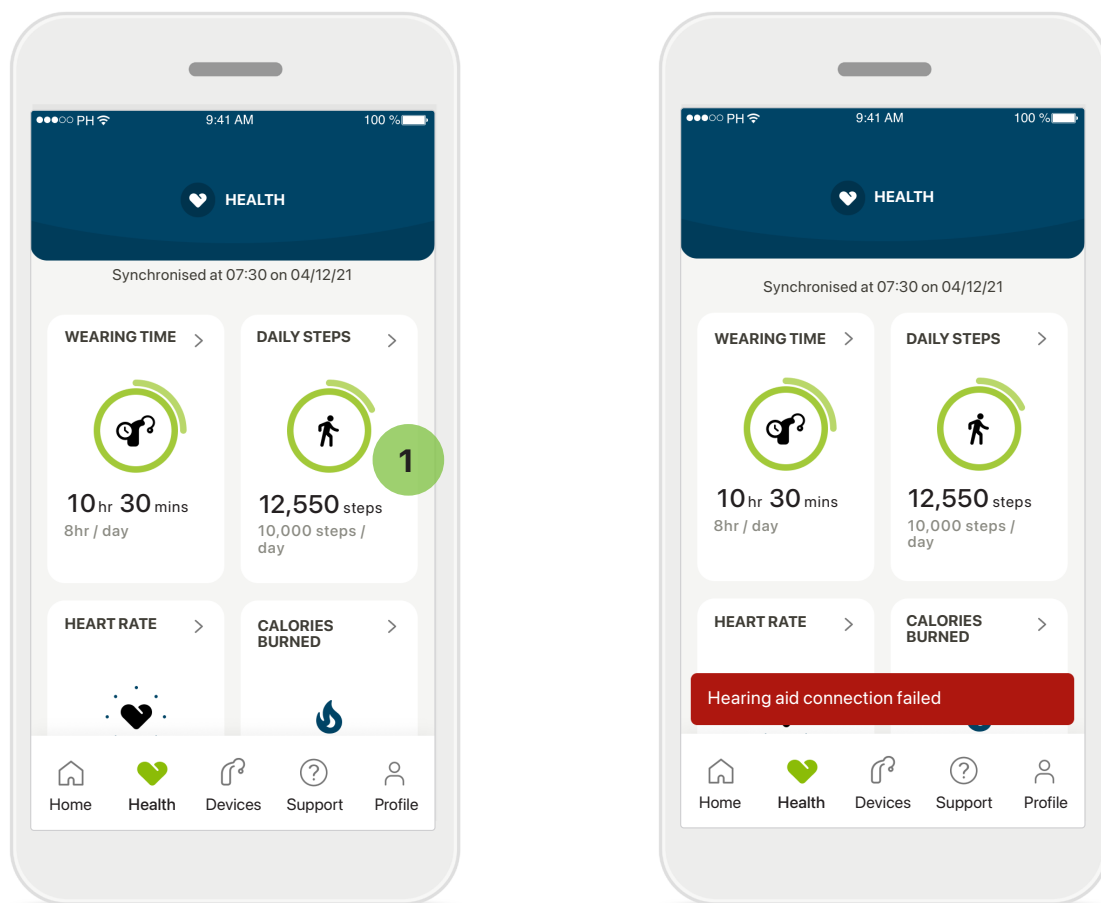

1 剩餘目標進度

如果您已設定目標，您可以看到目標最大值並看到圖示周圍出現第二個圓圈，表示目標進度。

與您助聽器的連接

請記住，您需要與助聽器連接，才能查看您的健康管理功能值的即時變化情況。應用程式與助聽器的高頻率同步可以獲得更準確的時間資訊。如果連接失敗或您的資料無法同步，您會收到通知，並被導向常見問題解答網站，以了解對策。


*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

此部分所含資訊僅供教育和參考之用。您不應將「健康管理」部分顯示的資訊用來替代或取代專業的醫療建議。

如果您對自己的健康有任何疑問，或者在開始鍛煉程式之前，應該始終諮詢醫生或其他醫療保健專家。

若要追蹤心率，請將耳件正確插入耳道。為了獲得最好的結果，請保持靜止、安靜。

健康管理詳細功能視圖：佩戴時間、步數、活動水平*、步行和跑步距離*

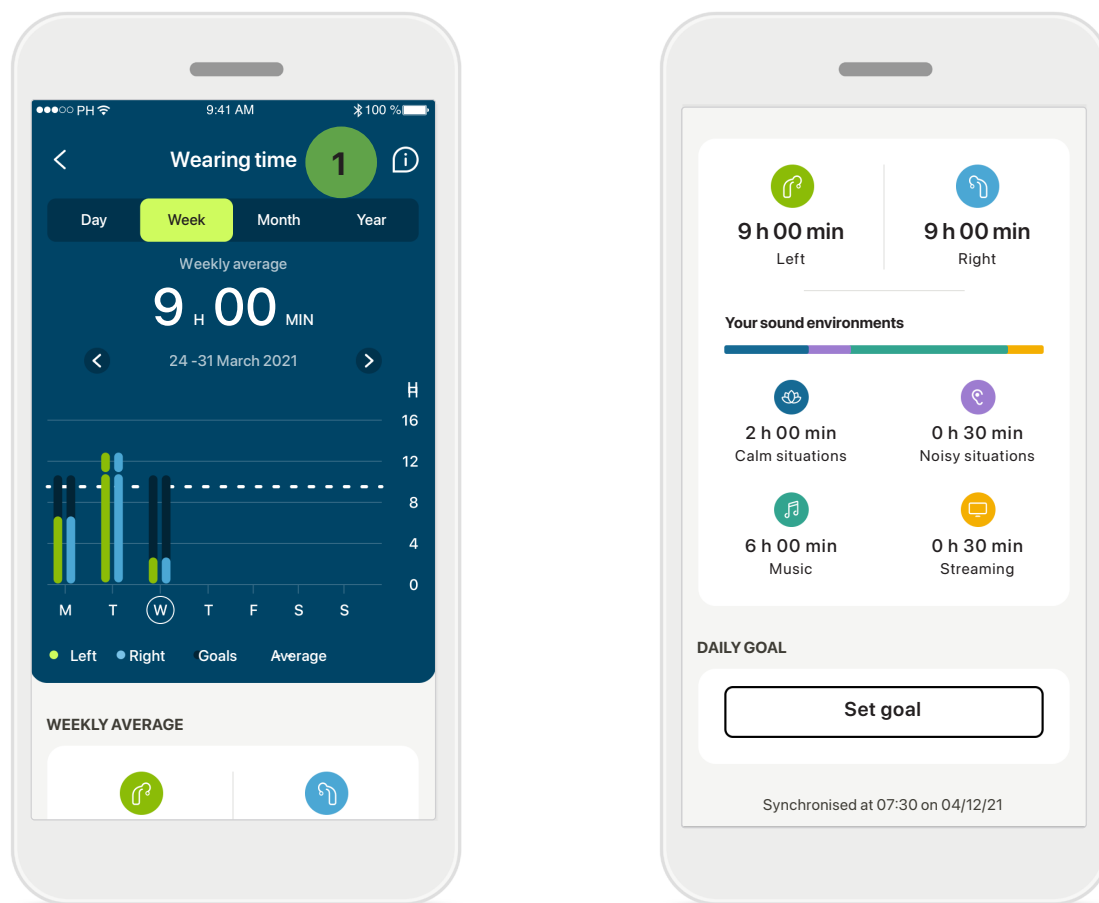


1 佩戴時間

透過按一下儀錶板的佩戴時間卡，可以輸入每日佩戴時間圖。點擊各自的標籤（已變為綠色）可前往每週、每月或每年的視圖。

如果您有兩個助聽器，圖會顯示左右兩個助聽器的值。您可以在下方看到目前值（對於日視圖）或平均值（對於非日視圖），以及佩戴時間在不同聲音環境下的詳細資訊。

健康管理詳細功能視圖：佩戴時間、步數、活動水平*、步行和跑步距離*

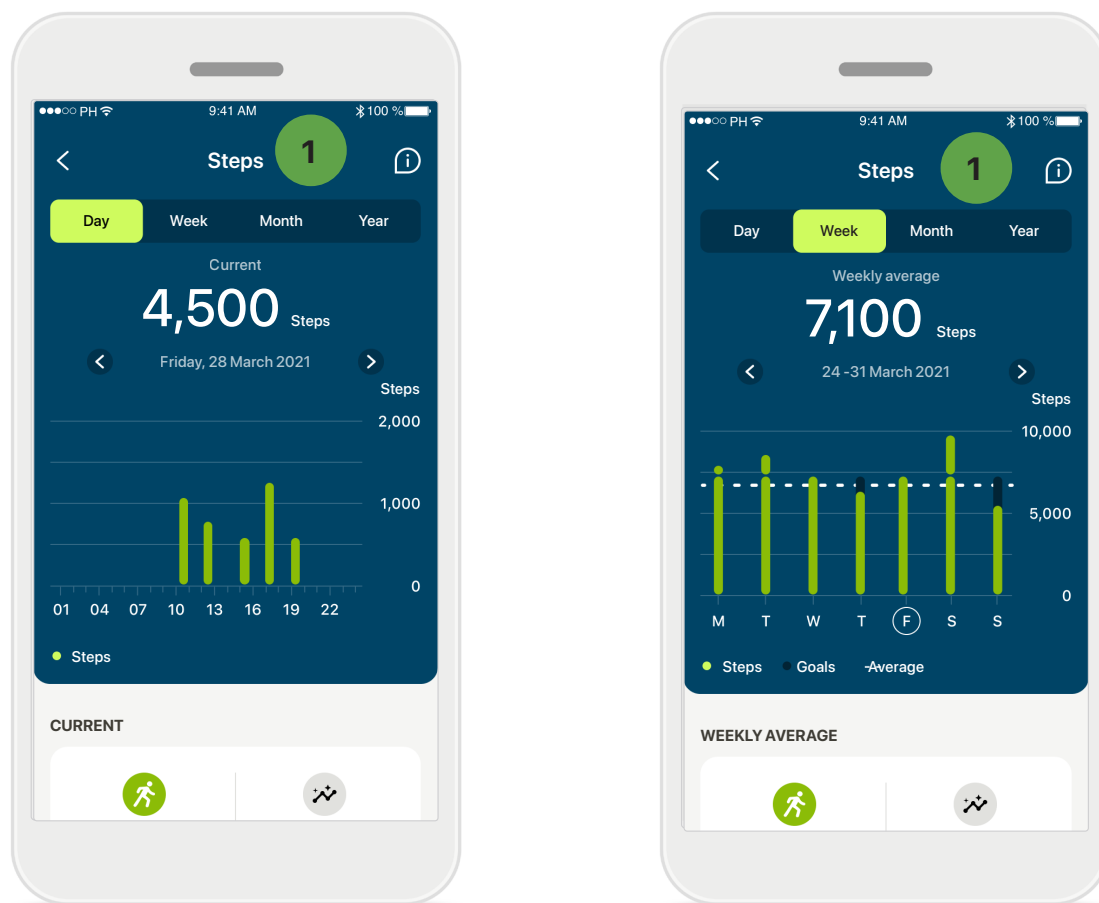

1 步數、活動量和距離



透過按一下儀錶板的步數卡，可以進入每日步數圖。點擊相應的標籤，進入週視圖、月視圖或年視圖，標籤將變為綠色。

您可以在下方看到目前（對於每日視圖）或平均值（對於非每日視圖），以及步行或跑步的大致距離。

活動水平顯示您未進行活動、進行低強度（檢測到一些動作）、中等強度（檢測到步行）或高強度（檢測到跑步）活動的時間。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

健康管理詳細功能視圖：心率*、步行和跑步*消耗的卡路里*

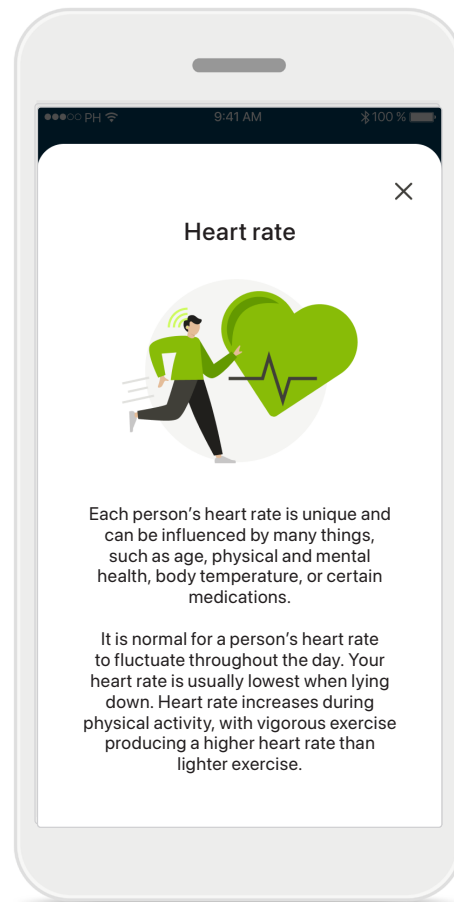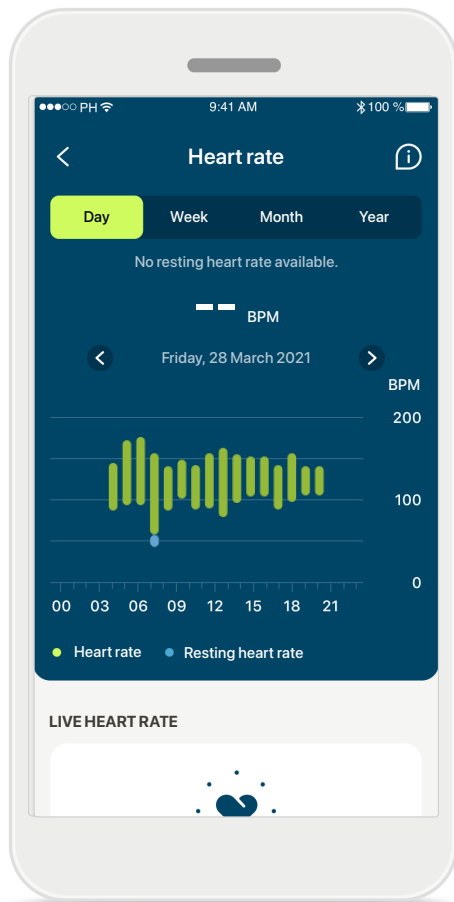

心率 (HR) 追蹤



所有視圖均包含運動狀態的心率。每日檢視圖包括靜止心率 (RHR) 和每小時的 HR 範圍。每週視圖包括每天的靜止心率 (RHR) 的平均值、運動狀態的心率和您每天的 HR 範圍。

每週、每月和每年檢視圖包括：

- 每日檢視圖 - 每小時解析度（每小時定期和即時心率範圍、每天一個最低靜止心率）；
- 每週/每月/每年檢視圖 - 心率範圍和靜止心率範圍的每日/每週/每月解析度。

按一下螢幕右上方的  圖示，獲取有關心率的更多資訊和參考資料，以及為何必須追蹤靜止心率。

健康管理詳細功能視圖：心率*、步行和跑步*消耗的卡路里*

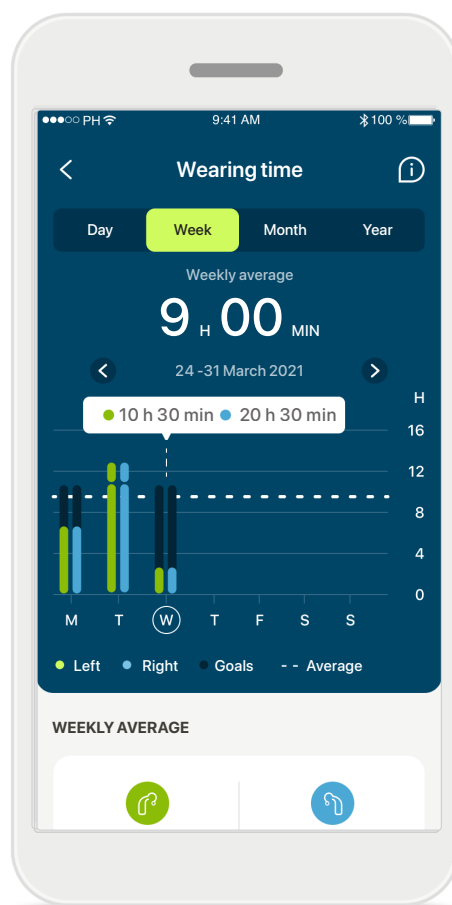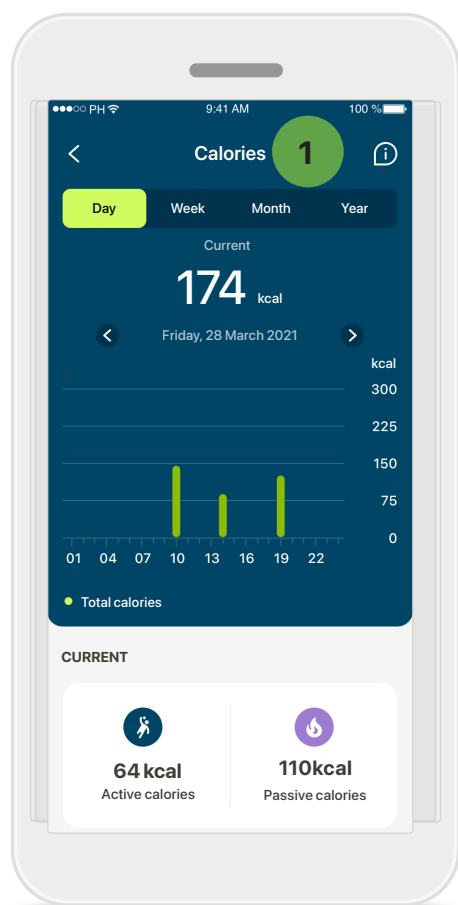

1 卡路里數追蹤


每日視圖包含目前主動消耗的卡路里數（透過運動鍛煉消耗）和被動消耗的卡路里數（基於基礎代謝率）。這兩種類型的卡路里數總和（總熱量）如圖所示。每週、每月和每年視圖包含主動消耗、被動消耗的平均值，以及總卡路里數。

工具提示

點擊圖表條的某個位置，以查看白色橫幅中顯示的確切值（工具提示）。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

健康管理：其他功能*

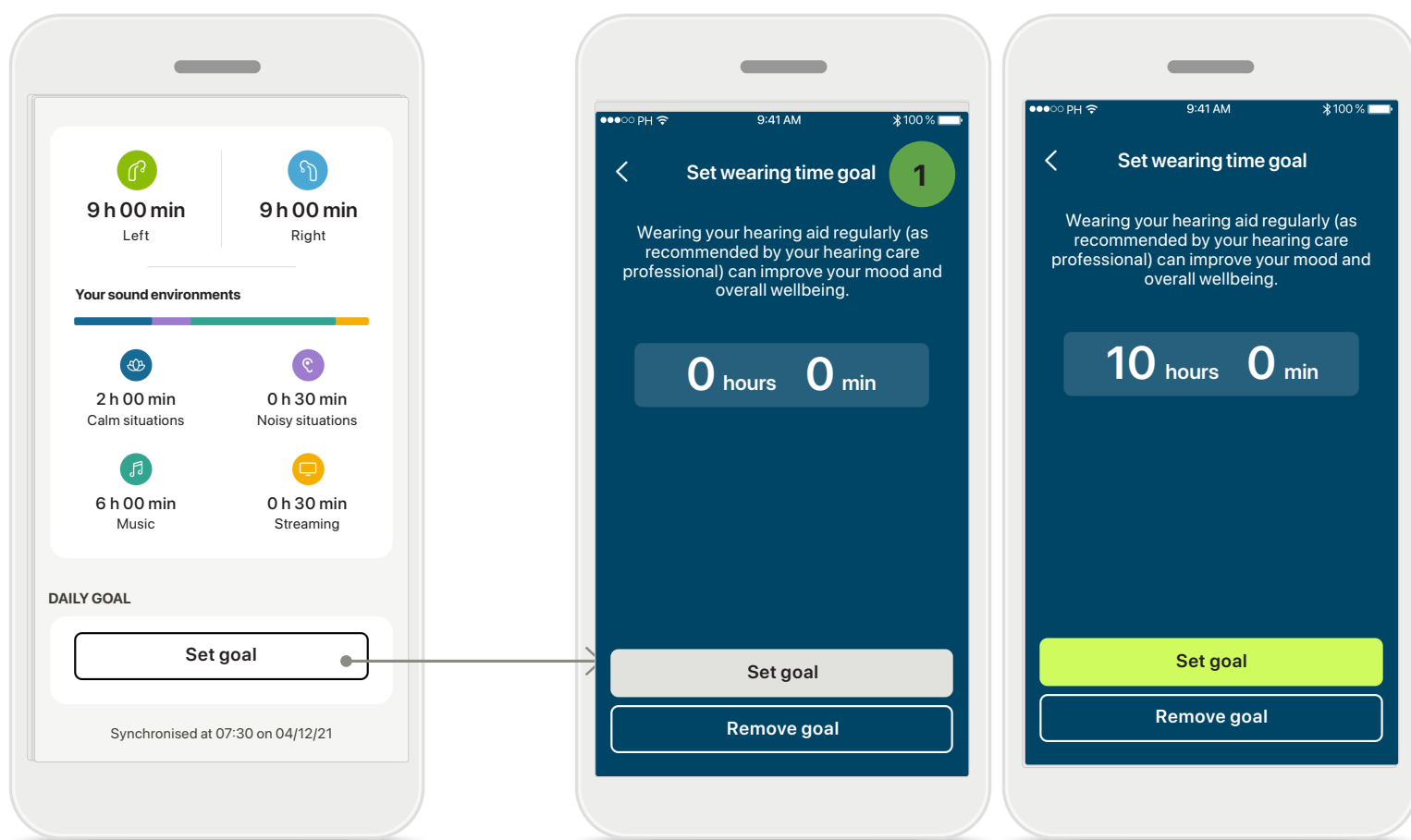


1 設定、變更和刪除目標*

設定目標是步數和佩戴時間的可選步驟。您可以在健康管理設定過程中、在健康管理儀錶板內或在這些功能的詳細視圖內進行設定。

點擊**設定目標**或**變更目標**，以按照以上範例中所示的一系列螢幕進行操作。輸入佩戴時間或步數的有效數字，然後點擊「設定目標」以儲存變更。如果您想刪除，點擊「刪除目標」。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

健康管理：其他功能*

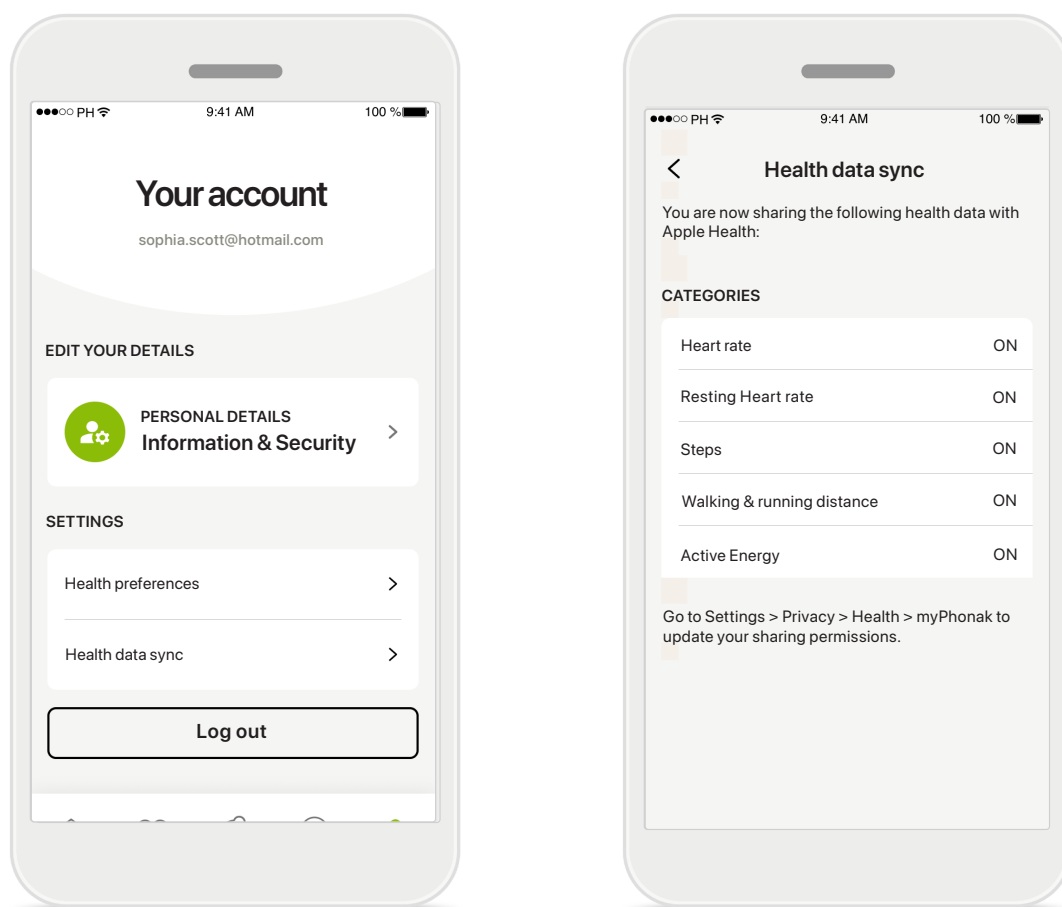

使用 Apple Health 同步峰力健康資料

在「設定」部分的「個人資料」中，打開健康資料同步。按照說明操作，打開您要使用 Apple Health 同步的 myPhonak 健康資料。同步後，您可以透過重新打開健康資料同步查看與 Apple Health 共用的資料。

*僅適用於特定助聽器。請訪問 <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> 或諮詢助聽器專家。

重要安全資訊

在使用您的應用之前，請閱讀以下頁面的相關安全資訊。

預期用途：

該應用是獨立的軟體，供預期的助聽器使用者在驗配軟體允許的有限範圍內選擇、配置和儲存助聽器設定。該應用還使預期的助聽器使用者能夠與聽力保健專業人員聯絡和溝通，以進行遠端助聽器調整。

目標病患群體：

該裝置適用於 18 歲以上符合相容助聽器的臨床適應症的病患。

預期使用者：

使用相容裝置的聽力損失人群。

適應症：

請注意，適應症並非來自應用，而是來自相容的助聽器。有關詳細資訊，請參閱助聽器的使用指南。

禁忌症：

請注意，禁忌症源自相容的助聽器，而非應用。

臨床好處：

臨床益處並非來自應用程式，而是來自相容的助聽器。

該應用給預期使用者帶來的益處是，讓其能夠在初次驗配允許的範圍內根據個人需求調整和儲存助聽器設定。

該應用還為預期使用者提供了一種便捷的途徑，使其能夠與聽力保健專業人員進行溝通和聯絡，以便進行遠端助聽器調整。

副作用：

沒有與使用該應用有關的已知副作用。

使用的局限性：

應用的使用受限於相容裝置的功能。

有關詳細資訊，請參閱助聽器的使用指南。

請注意，需要穩定的網際網路連接才能使用應用的全部功能。

如果出現與應用有關的嚴重事故，應該報告製造商代表和所在國家的主管部門。嚴重事故指的是已經或可能直接或間接導致以下情況的事件：

- a. 病患、使用者或其他人員死亡
- b. 導致病患、使用者或其他人員健康狀況發生暫時性或永久性嚴重惡化
- c. 造成重大公共衛生威脅

如果要報告意外的操作或事件，請聯絡製造商或代表。

安全須知

病患資料是私人資料，務必仔細保護：

- 確保智慧型手機安裝了最新的作業系統安全更新。啟用自動更新。
- 確保您安裝的應用程式版本是最新版本
- 僅為您的助聽器使用來自官方商店的正版 Sonova 應用。
- 僅安裝官方商店中聲譽良好的應用程式。
- 確保您使用強式密碼並將憑據保密。
- 使用 PIN 和/或生物識別（例如指紋、面部）鎖定手機，並將手機設定為在幾分鐘不活動後自動鎖定。
- 確保安裝的應用僅擁有所需許可權。
- 避免在公共區域與助聽器建立藍牙配對。這是由於存在來自第三方的不必要干擾的風險。我們建議在家中進行這種藍牙配對。
- 切勿使用已越獄或取得根許可權的手機。始終確保資料安全。請注意，此清單並不完整。
- 透過不安全的通道傳輸資料時，請傳送匿名資料或對其進行加密。
- 保護您的智慧型手機資料備份不僅不會丟失資料，還可以防止被盜。
- 刪除您不再使用或將丟棄的智慧型手機上的所有資料。

重要安全資訊

在使用您的應用之前，請閱讀以下頁面上的相關安全資訊。

軟體維護：

我們會持續監測來自市場的回饋。如果您在使用最新應用版本時遇到任何問題，請聯絡您當地的製造商代表和/或在 Appstore 或 Google Play 商店中提供回饋。

① 變更設定（例如降低音量或增加噪音消除器）可能會導致危險，例如無法聽到傳入的交通訊號。

所有應用版本全部適用語言的電子版使用指南均可透過網頁存取。要存取使用指南，請按照以下流程操作：

- 按一下 <https://www.phonak.com/en-int/global-locations>，然後選擇感興趣的國家/地區
- 轉到「支援」（英文）或相應語言的等效項
- 轉到「使用者指南」（英文）或相應語言的等效項
- 轉到「應用」（英語）或相應語言的等效項
- 選擇「myPhonak app」

或者，也可以透過導覽到「支援」部分，然後點擊名為「使用指南」的卡片，直接從應用存取目前版本的 myPhonak 使用指南。之後，使用指南將在外部瀏覽器視窗中打開。



相容性資訊

歐洲：符合性聲明

Sonova AG 在此聲明，本產品符合醫療器械（歐盟）第 2017/745 號法規之要求。

符號說明



此符號表示，使用者必須閱讀本使用指南內的相關資訊並將其考慮在內。



此符號表示使用者務必要注意該使用指南中的相關警告通知。



處理和產品安全性方面的重要資訊。



Sonova AG 透過 CE 標誌確認此產品符合醫療器械 (EU) 第 2017/745 號法規之要求。CE 符號後的數字與根據上述指令進行諮詢的認證機構的代碼一致。



表示歐盟的授權代表。EU REP 也是歐盟進口商。



表示裝置是醫療器械。



名稱、地址、日期

EU（歐盟）第 2017/745 號法規中定義的組合符號「醫療器械製造商」和「生產日期」。



提示有可用的電子使用說明。說明可從 www.phonak.com/myphonakapp 網站獲取



表示製造商的目錄號，以便識別醫療器械。



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
德國



製造商：

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
瑞士
www.phonak.com

V13.00/2026-06/ZT © 2021-2026 Sonova AG All rights reserved
本使用指南適用於 myPhonak 7.5 和 myPhonak 7 應用程式的後續子版本。
有關應用程式使用指南的早期版本，請聯絡當地代表或訪問網站。

若需要紙本使用說明，請聯絡您當地的 Sonova 代表。
紙本使用說明會在 7 天之內為您寄出。

