

Phonak RemoteMic

Gebruiksaanwijzing



PHONAK
life is on

Inhoud

1. Welkom	5
2. Uw RemoteMic leren kennen	6
2.1 Apparaatbeschrijving	7
2.2 Opmerking over compatibiliteit	8
2.3 Opmerking over streamingstabiliteit	9
3. Aan de slag	10
3.1 De batterij opladen	10
3.2 Inschakelen	12
3.3 De RemoteMic koppelen	13
3.4 Betekenis van de indicatorlampjes	16
4. Dagelijks gebruik	18
4.1 De streamer voorbereiden	18
4.2 Apparaten verbinden	19
4.3 Het volume instellen	21
4.4 De RemoteMic dragen	22
4.5 Onderbreken en hervatten	24
4.6 Uitschakelen	25

5. Gebruik in specifieke situaties	26
5.1 RemoteMic en telefoongesprekken	26
5.2 RemoteMic en televisie kijken	27
5.3 Streamingafstand RemoteMic	28
5.4 Het veiligheidskoord gebruiken	29
5.5 Alle Bluetooth-koppelingen verwijderen	30
6. Problemen oplossen	31
7. Service en garantie	36
8. Conformiteitsverklaring	38
9. Informatie en verklaring van symbolen	42
10. Belangrijke veiligheidsinformatie	47



Raadpleeg voor meer informatie over de ComPilot, ComPilot II of de ComPilot Air II, zoals voorzieningen, uitleg van indicatorlampjes enzovoort, de desbetreffende gebruiksaanwijzingen.

Ik ga de RemoteMic samen met de volgende streamer gebruiken:



☐ ComPilot



☐ ComPilot II



☐ ComPilot Air II

1. Welkom

De RemoteMic is een kwaliteitsproduct dat is ontwikkeld door Phonak, een van 's werelds meest toonaangevende leveranciers van hooroplossingen.

Lees deze gebruikersinstructies grondig door om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die uw hoortoestellen u bieden.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien of ga naar www.phonak.com/remotemic.

Phonak – Life is on

www.phonak.com




CE-markering toegepast: 2012

2. Uw RemoteMic leren kennen

De RemoteMic stuurt de stem van de spreker via de Phonak streamer draadloos naar de hoortoestellen.


Het systeem bestaat uit drie hoofdelementen: de RemoteMic, uw Phonak-hoortoestellen en een streamer, bijvoorbeeld Phonak ComPilot Air II.

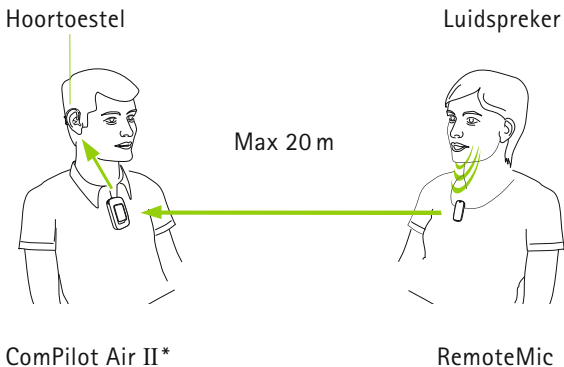

*De Phonak-streamers ComPilot of ComPilot II zijn eveneens compatibel

2.1 Apparaatbeschrijving


- 1 Volume omhoog (↑)
- 2 Volume omlaag (↓)
- 3 Aan/uit-schakelaar (⏻)
- 4 Aansluiting lader (mini-USB)
- 5 Microfoonopening
- 6 Indicatorlampje
- 7 Oogje voor veiligheidskoord
- 8 Bevestigingsclip

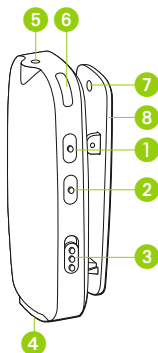

Accessoires

(De inhoud kan per land variëren)

- Dual mini-USB-splitter (1 in/2 uit)
- Afneembaar veiligheidskoord
- Beschermingstasje

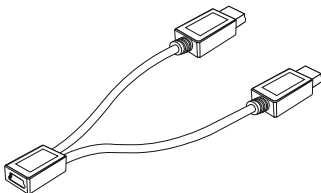

2. Uw RemoteMic leren kennen

Andere optionele accessoires

- Phonak mini-USB-voedingseenheid (oplader)
- 12 V-adapter voor auto-oplader

2.2 Opmerking over compatibiliteit

Behalve uw draadloze Phonak-hoortoestellen is er ook een compatibele streamer vereist.



Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Phonak onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.

2.3 Opmerking over streamingstabiliteit

Het bereik van de Bluetooth-verbinding tussen de RemoteMic en een streamer is maximaal 20 meter.

Het bereik kan kleiner zijn wanneer het signaal wordt belemmerd door obstakels zoals muren of het menselijk lichaam.

Het beste resultaat wordt verkregen wanneer u de RemoteMic in het zicht van de streamer gebruikt.

3. Aan de slag


3.1 Batterij opladen

De RemoteMic heeft een ingebouwde, niet te verwijderen, oplaadbare batterij.

- ❗ Laad de RemoteMic vóór het eerste gebruik minimaal drie uur op, ook als het indicatorlampje niet brandt of groen wordt.

De batterij opladen:

- Pak de Phonak oplader van de streamer.
- Steek de stekker van de voeding in een stopcontact.
- Steek de stekker van de mini-USB in de mini-USB-poort van de RemoteMic.
- De normale oplaadtijd is twee uur.
- Het opladen is voltooid wanneer het indicatorlampje ononderbroken groen oplicht.

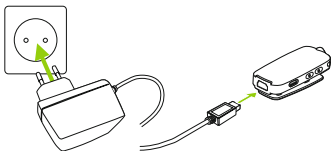


Eén voedingseenheid gebruiken voor het opladen van twee apparaten

Plaats de dubbele mini-USB-splitter tussen de voeding en de apparaten zoals hieronder wordt weergegeven.


Met een streamer:

Beide apparaten kunnen tegelijk worden opgeladen.

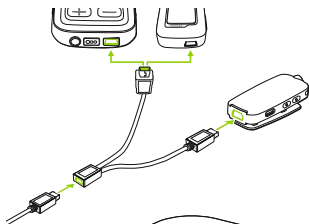

Met TVLink II:

De RemoteMic kan worden opgeladen terwijl de TVLink II wordt gebruikt.

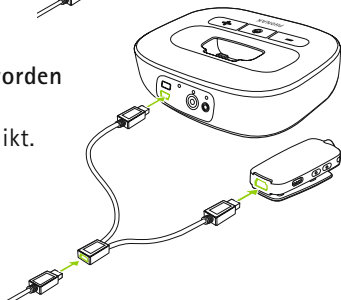


i De RemoteMic kan zonder gevaar de hele nacht op de oplader worden aangesloten.

3. Aan de slag

3.2 Inschakelen

Schuif de Aan/
uit-schakelaar om
de RemoteMic in
of uit te schakelen.

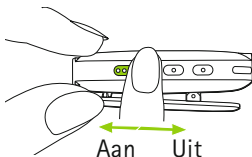

Slaapmodus

Als er gedurende 30 minuten geen streamer wordt gedetecteerd, schakelt de RemoteMic over naar de slaapmodus, zelfs als deze nog steeds is ingeschakeld.

Schakel de RemoteMic uit en weer in om de slaapmodus te verlaten.

3.3 Inschakelen

Voordat u RemoteMic voor het eerst met een streamer gebruikt, moeten deze apparaten eerst aan elkaar gekoppeld worden.



- ❶ Als u de RemoteMic en de streamer als een set hebt ontvangen, zijn ze al gekoppeld. Ga naar hoofdstuk 3.4.

De streamer in koppelmodus zetten Met ComPilot Air II:

- Zet het apparaat aan terwijl u tegelijkertijd de knop Volume omhoog  ingedrukt houdt.

Met ComPilot II:

- Zet het apparaat eerst aan. Houd de verbindingsknop  en de knop Volume omhoog  tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.

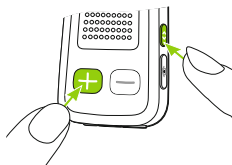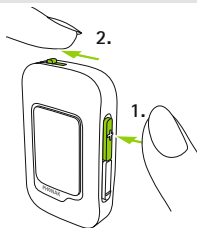

Het snel blauw knipperende indicatorlampje geeft aan dat de streamer in de koppelmodus staat.


3. Aan de slag

RemoteMic in koppelmodus zetten

- ❗ Als de RemoteMic nog nooit gekoppeld is, dan staat deze na het aanzetten automatisch 30 minuten in de koppelmodus. Dit wordt aangegeven door een snel blauw knipperend indicatorlampje.

De koppelmodus handmatig starten:

- Zet de RemoteMic uit.
- Houd de knop Volume omhoog ingedrukt (⬆).
- Zet de RemoteMic aan terwijl u tegelijkertijd op de knop (⬆) drukt.
- Laat de knop (⬆) los wanneer het indicatorlampje snel blauw begint te knipperen.
- Zorg ervoor dat de streamer en de RemoteMic zich op maximaal 1 meter van elkaar bevinden.

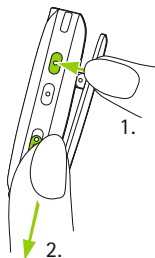

De ComPilot blijft twee minuten in de koppelmodus of tot het koppelen voltooid is.

Koppeling voltooien

Wacht tot beide indicatorlampjes ononderbroken blauw branden. Dit kan tot 2 minuten duren, maar duurt gewoonlijk niet langer dan enkele seconden.

- ① U hoeft de apparaten maar eenmaal te koppelen. Ze blijven gekoppeld en worden automatisch opnieuw verbonden wanneer ze worden ingeschakeld, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.


3. Aan de slag

3.4 Betekenis van de indicatorlampjes

Informatie tijdens werking



of

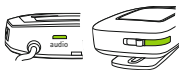

	RemoteMic	Streamer
Zoeken naar gekoppeld apparaat	Ononderbroken groen 	
Streaming	Ononderbroken blauw 	Ononderbroken blauw 
Pauzmodus	Blauw knipperend 	Blauw knipperend 
Koppelmodus	Snel blauw knipperend 	Snel blauw knipperend 

Stroom- en batterij-informatie RemoteMic

Inschakelen		Groen gedurende 2 seconden
Uitschakelen		Rood gedurende 2 seconden
Opladen		Ononderbroken rood
Volledig opgeladen met oplader aangesloten		Ononderbroken groen
Batterij leeg signaal		Extra rood kort knipperend
RemoteMic in slaapmodus of uit		Indicatorlampje brandt helemaal niet


i Schakel de RemoteMic uit en weer aan om het apparaat uit de slaapmodus te halen.

4. Dagelijks gebruik

4.1 De streamer voorbereiden

- Zet de streamer aan.
- Draag de streamer zoals wordt weergegeven.

Met de ComPilot of
ComPilot II:

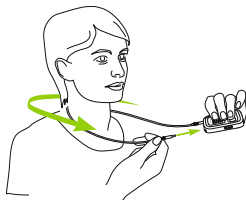

Met de ComPilot Air II
(zonder neklus):



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de streamers voor meer informatie over de streamers.

4.2 Apparaten verbinden

Telkens wanneer de apparaten worden ingeschakeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar.

- Zorg ervoor dat de streamer en de RemoteMic zich binnen 2 meter afstand van elkaar bevinden.
- Zet de RemoteMic en de streamer aan.
- De indicatorlampjes worden groen.
- Wacht tot de indicatorlampjes van beide apparaten ononderbroken blauw branden. Dit kan tot 30 seconden duren, maar duurt gewoonlijk niet langer dan 5 seconden.




i Herhaal de koppeling in hoofdstuk 3.3 als het indicatorlampje snel blauw knippert na het aanzetten van de RemoteMic of als het indicatorlampje niet binnen twee minuten ononderbroken blauw gaat branden.

4. Dagelijks gebruik

Functietest

Voer voordat u het systeem gebruikt een korte functietest uit door zachtjes op de microfoonopening te tikken.

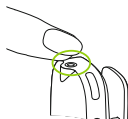


U moet de tikgeluiden duidelijk kunnen horen via uw hoortoestellen.

- ① De RemoteMic hoeft meestal niet in het zicht te zijn van het streamer. Raadpleeg als de audio af en toe wegvalt het gedeelte Problemen oplossen in hoofdstuk 6.

4.3 Het volume instellen


De volume-instelling van de RemoteMic veranderen:

- Spreek met 20 cm afstand in de RemoteMic.
- Gebruik de volumeregelaars  om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.

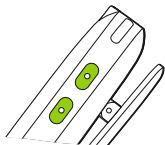

Met de volumeknoppen van de streamer kunt u het algehele volume van de hoortoestellen en de RemoteMic nauwkeurig afstellen:

-  om het volume te verhogen
-  om het volume te verlagen

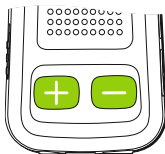

of

Omgevingsgeluiden verminderen

- Houd  2 seconden ingedrukt voor meer reductie.
- Houd  2 seconden ingedrukt om het oorspronkelijke volume van het hoortoestel te herstellen.




4. Dagelijks gebruik

❗ De volume-instelling van de RemoteMic wordt bewaard, zelfs na uitzetten van de RemoteMic.

❗ Uw audicien kan het microfoonniveau van uw hoortoestellen bij gebruik van de RemoteMic veranderen als dit niet naar wens is.


4.4. De RemoteMic dragen

- Druk zachtjes op de clip om deze te openen.
- Zorg ervoor dat de RemoteMic stevig op de kleding bevestigd is, zoals weergegeven in de afbeelding.
- Om krasgeluiden te voorkomen, dient u de RemoteMic tijdens het gebruik niet met kleding te bedekken.

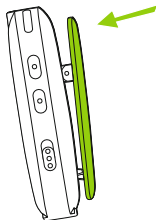

Afstand tot de mond van de spreker:

- U bereikt de beste resultaten op 20 cm afstand.
- Overschrijdt een afstand van 50 cm niet.

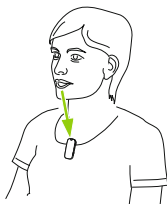


❗ Hoe meer omgevingsruis er is, hoe dichterbij de RemoteMic bij de mond van de spreker geplaatst moet worden.

❗ Gebruik geen neklus tijdens streaming. Door krasgeluiden kan de luisterervaring slechter worden.

4. Dagelijks gebruik

4.5 Onderbreken en hervatten

Om de audio-uitzending vanaf uw RemoteMic te onderbreken, drukt u op de hoofdknop .

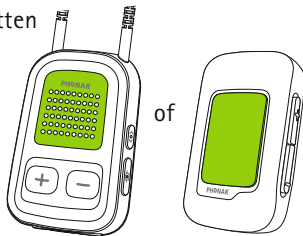


Indien gepauzeerd:

- De indicator-lampjes knipperen blauw op de beide apparaten.
- Uw hoortoestellen keren terug naar het laatst gekozen hoortoestelprogramma.
- Om streaming van de RemoteMic te hervatten, drukt u opnieuw op de hoofdknop  van de streamer.

 De hoortoestelprogramma's kunnen niet worden gewijzigd tijdens streaming of wanneer streaming is gepauzeerd.

4.6 Uitschakelen

Om de RemoteMic-uitzending volledig te beëindigen, schakelt u de RemoteMic uit door de Aan/Uit schakelaar in de uit-stand te zetten.

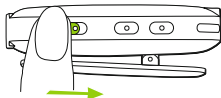


Schakel de RemoteMic uit wanneer deze niet gebruikt wordt.

5. Gebruik in specifieke situaties

5.1 RemoteMic en telefoongesprekken

❶ Telefoongesprekken via Bluetooth gaan altijd vóór streaming van de RemoteMic.


Als de streamer is gekoppeld en verbonden met uw mobiele telefoon, dan kunt u nog steeds telefoontjes ontvangen, zelfs wanneer u RemoteMic gebruikt. Bij een binnenkomende oproep stopt de streamer automatisch met het verzenden van het audiosignaal vanaf uw RemoteMic en wordt het signaal van uw mobiele telefoon naar uw hoortoestellen gestuurd.

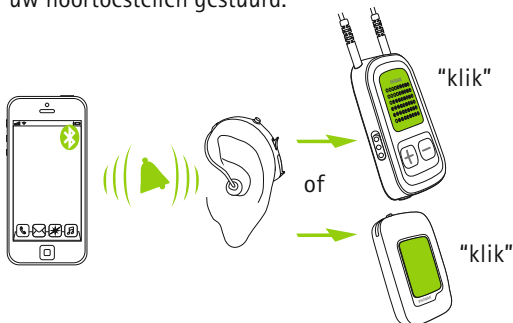

Om een binnenkomend gesprek aan te nemen, drukt u kort op de hoofdknop ■ van de streamer zodra u de beltoon via uw hoortoestellen hoort. Als u opnieuw op de hoofdknop ■ drukt, wordt het telefoongesprek beëindigd.

5.2 RemoteMic en televisie kijken

Voor een optimale geluidsontvangst in stereo van uw tv of andere audiobronnen adviseren we het gebruik van het speciale Phonak TVLink II-basisstation.

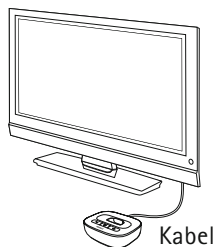


Als er geen kabelverbinding beschikbaar is of als u op reis bent, kunt u de RemoteMic gebruiken om de geluidskwaliteit tijdens het televisie kijken te verbeteren.

5. Gebruik in specifieke situaties

Om het beste resultaat te bereiken:

- Zoek de luidspreker van de tv.
- Plaats de RemoteMic op 20 cm afstand van de luidspreker.
- Overweeg de oplader aangesloten te laten tijdens het televisie kijken.

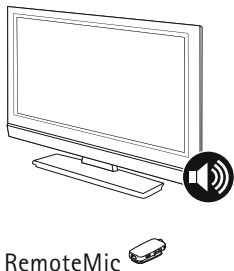

5.3 Streamingafstand RemoteMic

De RemoteMic werkt tot 20 m. De streamer hoeft niet in het zicht te zijn van de RemoteMic. Interferentie in de buurt door muren, meubels of het menselijk lichaam kan het bereik verkleinen.


Als de RemoteMic buiten het bereik van de streamer komt, wordt de draadloze audiotransmissie onderbroken of zelfs beëindigd. Plaats de RemoteMic weer binnen het bereik van de streamer om streaming naar uw hoortoestellen te hervatten.

Het kan tot 10 seconden duren voordat de streaming wordt hervat.

❗ Als de streaming langer dan 30 minuten onderbroken werd, dan moet u mogelijk de RemoteMic uit- en weer inschakelen.

5.4 Het veiligheidskoord gebruiken


Tijdens transport kunt u het afneembare veiligheidskoord gebruiken zoals weergegeven:

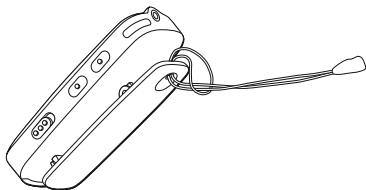

5.5 Alle Bluetooth-koppelingen verwijderen

Als u problemen ondervindt met een van de gekoppelde apparaten, of als een apparaat geen verbinding meer maakt met uw RemoteMic, dan kunt u overwegen alle koppelingen van de RemoteMic te verwijderen.

- Zet de RemoteMic aan terwijl u op de knop  drukt.
- Laat de knop  na 10 seconden los, wanneer het blauwe knipperende lampje groen wordt.

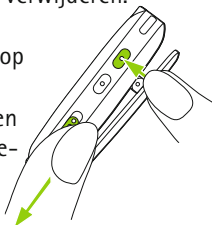

Als u de koppeling van Bluetooth-apparaten verwijdert, kunt u geen verbinding meer maken met Bluetooth-apparaten die voorheen gekoppeld waren. U moet de koppelprocedure opnieuw uitvoeren (zie 3.3) als u weer verbinding wilt maken.

i De indicatorlampjes gaan een paar seconden na het verwijderen van de koppelingen snel blauw knipperen (automatische koppelmodus).

6. Problemen oplossen

Hierna volgt een samenvatting van veelgestelde vragen over de RemoteMic en de antwoorden daarop.

<i>Oorzaken</i>	<i>Wat te doen?</i>
Ik kan geen geluid van de RemoteMic horen	
■ Een van de of alle apparaten zijn uitgeschakeld ■ RemoteMic staat in de pauzmodus (blauw knipperend indicatorlampje) ■ De afstand tussen de streamer en de RemoteMic is te groot ■ Een obstakel hindert de transmissie	■ Zorg ervoor dat alle apparaten (RemoteMic, streamer, hoortoestellen) zijn ingeschakeld en volledig gebruiksklaar zijn ■ Druk kort op de multitoets van de streamer om streaming te hervatten ■ Breng de apparaten dichterbij elkaar. Buitenshuis is 20 meter is het maximum ■ Om streamingonderbrekingen te voorkomen, dient u de streamer op correcte wijze te dragen en de RemoteMic binnen het bereik te houden ■ Afhankelijk van het materiaal (bijv. het menselijk lichaam) is mogelijk zichtverbinding nodig

6. Problemen oplossen

Oorzaken

Wat te doen?

Ik hoor onderbrekingen tijdens audio-overdracht

- De RemoteMic is te ver weg van de streamer of wordt gehinderd door een obstakel (bijv. menselijk lichaam)
- De streamer zoekt na het aanzetten 2 minuten naar andere gekoppelde apparaten

- Overschrijd de maximale afstand niet en pas de oriëntatie van de apparaten aan
- Na 2 minuten stopt de ComPilot met zoeken naar andere apparaten en stoppen de onderbrekingen

Tijdens de streaming is het volume niet naar wens (te zacht of te hard)

- De volumeniveaus zijn niet correct ingesteld

- Pas het volume aan met de volummeknoppen van de RemoteMic en de streamer

Oorzaken

Wat te doen?

Er is te veel ruis, ik kan de spreker niet verstaan

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Het volume van uw hoortoestelmicrofoons is te hoog ingesteld | <ul style="list-style-type: none">■ Verlaag het volume van het hoortoestel door lang op de streamerknop  te drukken■ Plaats de RemoteMic dichterbij de mond van de spreker (20 cm)■ Gebruik de knop van de RemoteMic  om het volume van de RemoteMic te verhogen |
| <ul style="list-style-type: none">■ De RemoteMic schuurt langs de kleding van de drager | <ul style="list-style-type: none">■ Zorg ervoor dat de RemoteMic stevig is vastgemaakt. De kleding mag de RemoteMic niet bedekken |
| <ul style="list-style-type: none">■ De instellingen van uw hoortoestellen zijn niet correct | <ul style="list-style-type: none">■ Vraag uw audicien om uw hoortoestellen nauwkeurig af te stellen |

6. Problemen oplossen

Oorzaken

Wat te doen?

RemoteMic wordt niet meer herkend door de streamer waarmee deze eerder was gekoppeld

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Als er na 2 minuten nog geen apparaat is gevonden, stopt de streamer met zoeken om stroom te sparen.■ De apparaten staan te ver van elkaar.■ RemoteMic kan aan maximaal 4 verschillende Bluetooth-apparaten worden gekoppeld. Als het interne geheugen vol is, zal de vijfde koppeling de eerste koppeling wissen■ De koppeling is nog niet uitgevoerd of is verwijderd | <ul style="list-style-type: none">■ Zet de streamer uit. Wacht tot het rode indicatorlampje uitgaat, en zet dan het apparaat weer aan■ Breng de apparaten op minder dan 1 meter afstand van elkaar en probeer het opnieuw■ Herhaal de koppeling tussen de apparaten■ Herhaal de koppeling tussen de apparaten |
|--|--|

Het indicatorlampje verandert niet in ononderbroken blauw

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ RemoteMic en de streamer zijn niet gekoppeld | <ul style="list-style-type: none">■ Voltooi de koppeling zoals beschreven in 3.3 |
|--|--|

<i>Oorzaken</i>	<i>Wat te doen?</i>
Ik zie een snel knipperend blauw indicatorlampje op de RemoteMic	
■ De RemoteMic is nog nooit gekoppeld en staat altijd in de koppelmodus	■ Voltooi de koppeling zoals beschreven in 3.3
Het indicatorlampje verandert niet in ononderbroken blauw	
■ RemoteMic en de streamer zijn niet gekoppeld ■ De streamer is niet correct geprogrammeerd voor uw hoortoestellen	■ Draag de streamer rond de nek en maak de neklus op de juiste wijze vast ■ Vraag uw audicien om de streamer en uw hoortoestellen opnieuw te groeperen
Het opladen duurt langer dan normaal	
■ Het apparaat wordt gebruikt tijdens het opladen ■ De oplader levert onvoldoende oplaadstroom	■ Opladen tijdens het gebruik is mogelijk, maar de oplaadtijd is dan wel 30% langer ■ Gebruik alleen door Phonak goedgekeurde opladers

7. Service en garantievoorwaarden

7.1 Plaatselijke garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw streamer en RemoteMic hebt aangeschaft, naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

7.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. Garantie wordt alleen verleend na het overleggen van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

7.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting.

Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die verricht worden door een audicien in zijn werkplaats.

Serienummer:

Erkende audicien

(stempel/handtekening):

Aankoopdatum:

8. Conformiteitsinformatie

Conformiteitsverklaring

Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product voldoet aan de essentiële vereisten uit de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU
De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op www.phonak.com

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada.

Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit toestel schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
- Sluit het toestel aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

Kennisgeving 4:

FCC/IC RF Verklaring blootstelling aan straling
Dit apparaat voldoet aan de limieten van FCC/IC inzake blootstelling aan straling, bepaald voor een ongeregelde omgeving. Eindgebruikers moeten de specifieke instructies volgen om te voldoen aan de RF-richtlijn met betrekking tot blootstelling. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden gebruikt of hierbij in de buurt worden geplaatst.

Kennisgeving 5:

Naleving van de Japanse radiowet en Japanse telecommunicatiewet. Dit apparaat is goedgekeurd volgens de Japanse radiowet (電波法) en de Japanse telecommunicatiewet (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders is het toegewezen identificatienummer niet meer geldig).

Meer details vindt u op het productgegevensblad op www.phonak.com/remotemic

9. Informatie en verklaring van symbolen



Het CE-symbool is een bevestiging van Phonak AG dat dit Phonakproduct voldoet aan de eisen van Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

**Bedieningsom-
standigheden**

Dit apparaat is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.



Temperatuur bij transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius
Gebruikstemperatuur:
0° tot 55° Celsius.



Droog houden.

9. Informatie en verklaring van symbolen



Vochtigheid bij transport: tot 90%
(niet-condenserend).

Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%,
wanneer niet gebruikt.



Atmosfeerdruk: 200 hPa
tot 1500 hPa



Dit symbool geeft de fabrikant
van het apparaat aan, zoals staat
vastgesteld in Richtlijn 93/42/EEC.



Japanse aanduiding voor
gecertificeerde radioapparatuur.



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit apparaat niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil.

Breng oude of ongebruikte apparaten weg naar stortplaatsen voor elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoord afvalbeleid beschermt het milieu en de gezondheid.

Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare batterij. Probeer het product niet te openen of de batterij te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen.

Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggooien van de batterij.

9. Informatie en verklaring van symbolen



Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc.; deze merken worden door Phonak onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.

10. Belangrijke veiligheidsinformatie

De volgende pagina's bevatten belangrijke veiligheidsinformatie.

Waarschuwingen voor gevaar

-  Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren.

-  Phonak-hoortoestellen kunnen magnetische velden genereren. Uit testen die Phonak heeft uitgevoerd is gebleken dat er geen interferentie ontstaat met geïmplanteerde apparaten (bijv. pacemakers, defibrillatoren, etc.) die een veilig of effectief gebruik van die geïmplanteerde apparaten in de weg staat. Gebruikers van geïmplanteerde apparaten dienen voorafgaand aan het gebruik van een Phonak-hoortoestel contact op te nemen met hun arts en/of fabrikant van het geïmplanteerde apparaat. Stop met het gebruik van het Phonak-hoortoestel als u merkt dat het Phonak-hoortoestel enig invloed heeft op het geïmplanteerde apparaat en neem voor advies contact op met de fabrikant van het apparaat.

10. Belangrijke veiligheidsinformatie

- ⚠ Gebruik alleen hoortoestellen die speciaal voor u geprogrammeerd zijn door uw audicien.
- ⚠ Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers gebruiken die door Phonak geleverd zijn, of gestabiliseerde opladers met een kwalificatie van 5 VDC, min. 250 mA.
- ⚠ Laad de RemoteMic niet op via de USB-poort van een pc of laptop. Hierdoor kan uw apparatuur beschadigd raken.
- ⚠ Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Phonak, zijn niet toegestaan.
- ⚠ Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX-normen. Gebruik alleen door Phonak AG goedgekeurde accessoires, om elektrische schokken te voorkomen.
- ⚠ De mini-USB-poort mag alleen voor het gespecificeerde doel worden gebruikt.

-
- ⚠ Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare batterij. Probeer het product niet te openen of de accu te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen.
 - ⚠ Als u de snoertjes van het apparaat gebruikt voor een doel waarvoor ze niet zijn ontworpen (bijvoorbeeld als u de USB-kabel rond de nek draagt), kan dit tot verwondingen leiden.
 - ⚠ Verwijder elektrische onderdelen overeenkomstig plaatselijke voorschriften van Phonak AG.
 - ⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden behandeld) of waarin elektronische apparatuur is verboden.

10. Belangrijke veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie product

- ① Schakel het apparaat uit als het niet wordt gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.
- ① Bescherm de apparaataansluitingen, stekkers, de oplaadpoort en de voedingseenheid tegen vuil.
- ① Bescherm het apparaat tegen bovenmatig vocht (baden, zwemmen), hitte (radiator, autodashboard) en rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen, fitness, sport).
- ① Laat het apparaat niet vallen. Het apparaat kan beschadigd raken wanneer het op een hard oppervlak valt.
- ① Maak de apparaten schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de apparaten te reinigen. Gebruik nooit een magnetron of een ander verwarmingstoestel om de apparaten te drogen.

-
- ① De digitaal gecodeerde, inductieve transmissietechnologie in deze apparaten is buitengewoon betrouwbaar en ondervindt nagenoeg geen interferentie van andere apparaten. Er wordt echter wel op gewezen dat wanneer het systeem in de buurt van computerapparatuur, grotere elektromagnetische installaties of andere sterke elektromagnetische bronnen wordt gebruikt, een minimumafstand van 60 cm dient te worden aangehouden van de interferentiebron om de correcte werking te waarborgen.
- ① Speciale medische en tandheelkundige onderzoeken waarbij blootstelling aan straling noodzakelijk is, kunnen de juiste werking van uw apparaat beïnvloeden. Verwijder het voorafgaand aan het onderzoek en houd het buiten de onderzoeksruimte:
- Medisch of tandheelkundig onderzoek met röntgenstraling (inclusief CT-scan)
 - Medische onderzoeken met MRI/NMRI-scans waarbij magnetische velden worden gegenereerd.
- ① Houd het apparaat minimaal 10 cm verwijderd van magneten.

10. Belangrijke veiligheidsinformatie

Andere belangrijke informatie

- De RemoteMic is een apparaat conform Bluetooth 2.1. De draadloze transmissietechnologie is niet beperkt tot, maar wel geoptimaliseerd voor het gebruik met de Phonak-streamer.
- Het gebruik van de RemoteMic met niet-Phonak streamer wordt niet ondersteund door Phonak.
- Krachtige elektronische apparatuur, grotere elektronische installaties en metalen constructies kunnen het werkingsbereik drastisch beperken.

Opmerkingen

Opmerkingen



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Zwitserland

www.phonak.com

