

Roger Clip-On Mic

1.1

Gebruiksaanwijzing



roger



PHONAK
life is on

Inhoud

1. Welkom	4
2. Uw Roger Clip-On Mic leren kennen	6
2.1 Inhoud verpakking	6
2.2 Hoe de Roger Clip-On Mic werkt	7
2.3 Apparaatbeschrijving	8
2.4 Lampjes (LED-status)	9
3. Aan de slag	10
3.1 Het dockingstation plaatsen	10
3.2 Uw Roger Clip-On Mic opladen	15
3.3 Aan- en uitzetten	18
3.4 De Roger-ontvanger gebruiken	19
3.5 Een ontvanger aansluiten	20
4. Roger Clip-On Mic gebruiken	23
4.1 Roger Clip-On Mic dragen	23
4.2 Het draagkoord gebruiken	25
4.3 Aansluiten op multimedia-apparaten	28

5. Speciale functies	30
5.1 Gedempt	30
5.2 Roger-toestellen loskoppelen (NewNet)	31
5.3 Verificatiemodus	31
6. Extra microfoons toevoegen	33
6.1 Verbinden	33
6.2 Extra microfoons gebruiken	37
7. Problemen oplossen	40
8. Belangrijke informatie	44
9. Service en garantievoorwaarden	50
10. Informatie en verklaring van symbolen	52

1. Welkom

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roger Clip-On Mic van Phonak. Deze compacte microfoon gebruikt adaptieve draadloze transmissie om mensen met gehoorverlies te helpen meer spraak te verstaan in lawaai en over een afstand. Het is ideaal voor gebruik als partnermicrofoon of om iedere spreker in een vergadering een eigen microfoon te geven. De audio-ingang maakt het luisteren naar TV/multimedia mogelijk. Hij kan ook worden gebruikt in combinatie met andere Roger-microfoons in een microfoon-netwerk.

Uw Roger Clip-On Mic is een Zwitsers kwaliteitsproduct dat werd ontwikkeld door Phonak, een van de meest toonaangevende leveranciers van hoeroplossingen.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om ten volle gebruik te maken van alle mogelijkheden die de Roger Clip-On Mic u biedt.

Neem contact op met uw audicien indien u vragen heeft.

Phonak – life is on

www.phonak.com



2. Uw Roger Clip-On Mic leren kennen

2.1 Inhoud verpakking



Roger Clip-On Mic



Dockingstation



Voeding met
landadapter en
laadkabel



Bewaartasje



Draagkoord



Audiokabel voor
dockingstation



micro-USB
audiokabel (geschikt
voor het reizen)




RCA/Cinch-adapter
voor tv of HiFi



Snelgids voor
instelling

2.2 Hoe de Roger Clip-On Mic werkt

Roger Clip-On Mic verzendt de stem van de spreker rechtstreeks en draadloos naar uw oren. Het systeem bestaat uit drie hoofdelementen: uw hoortoestellen, Roger-ontvangers en uw Roger Clip-On Mic.

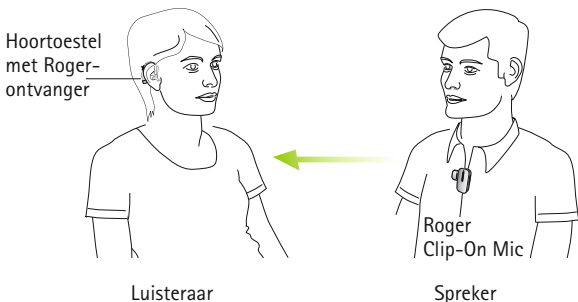


Uw Roger Clip-On Mic en hoortoestel behoren binnen een bereik van 10 m/33 ft goed te functioneren. Let op: menselijke lichamen en muren kunnen deze afstand verkorten. Wanneer u uw Roger Clip-On Mic kunt zien (d.w.z. binnen gezichtsveld), heeft u de grootste kans het optimale bereik te behalen.

2. Uw Roger Clip-On Mic leren kennen


2.3 Apparaatbeschrijving

Roger Clip-On Mic

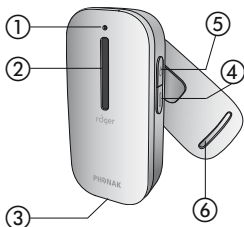





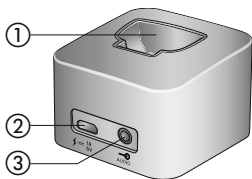



- ① Indicatielampje (LED)
- ② Microfoons
- ③ Oplaad- en audio-ingang (micro-USB)
- ④ Verbinden
- ⑤ Aan/Uit/Dempen
- ⑥ Draaibare clip

Dockingstation



- ① Poort voor Roger Clip-On Mic
- ② Ingang voor oplader (micro-USB)
- ③ Audio-ingang (plug van 3,5 mm / 1/8 inch)

2.4 Lampjes (LED-status)

<i>Indicatielampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Inschakelen gestart
	Uitschakelen gestart
	Audio-input herkend
	Ingang microfoon/audio gedempt
	Opladen bezig
	Volledig opgeladen
	Batterij bijna leeg – laad uw Roger Clip-On Mic op
	De verbinding tussen uw Roger Clip-On Mic en andere microfoons is verbroken. Druk op de Connect-knop om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

3. Aan de slag

3.1 Het dockingstation voorbereiden

Het dockingstation van Roger Clip-On Mic wordt zowel gebruikt om de microfoon op te laden en om audio vanuit de televisie of een ander audioapparaat naar uw hoortoestellen te zenden (Roger Clip-On Mic moet in het dockingstation worden ingevoerd).

De voeding voorbereiden

1. Selecteer de adapter voor uw land.



VS



EU



VK




AUS

2. Steek de ronde hoek van de adapter in de ronde hoek van de universal power supply.
3. Klik de adapter op zijn plaats. Zorg ervoor dat de adapter stevig vastzit.




Verwijderen / verwisselen:

- a. Trek het lipje van de universal power supply.
- b. Trek de adapter voorzichtig omhoog om deze te verwijderen.
- c. Begin daarna opnieuw met stap 1 (hierboven).

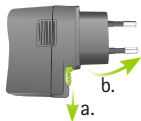


De voeding aansluiten op het dockingstation


1. Plaats het dockingstation naast uw tv-toestel / audio-apparaat en sluit het kleine uiteinde van de laadkabel aan op de voedingsingang van het dockingstation ⚡ $\overline{\text{---}} \frac{1\text{A}}{5\text{V}}$.
2. Steek het grotere uiteinde van de laadkabel in de universal power supply.
3. Steek de stekker van de voeding in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

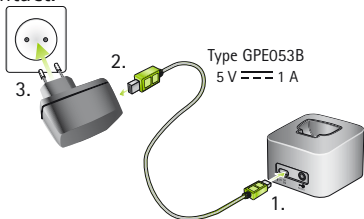

3. Aan de slag


Het dockingstation aansluiten op een tv-toestel/ audio-apparaat

1. Steek de stekker van de audiokabel in de audio-input van het dockingstation:  AUDIO.

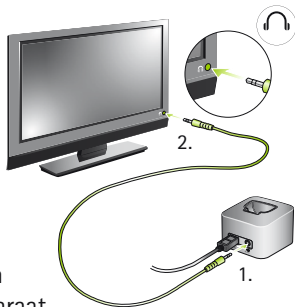


2. Steek het andere uiteinde van de audiokabel in de hoofdtelefoonuitgang van uw tv-toestel/audio-apparaat.

U kunt ook het andere uiteinde van de audiokabel in de Cinch / RCA-adapter van uw tv-toestel steken. Steek de rode en witte stekkers in de overeenkomstige rode en witte outputpoorten van uw tv-toestel.

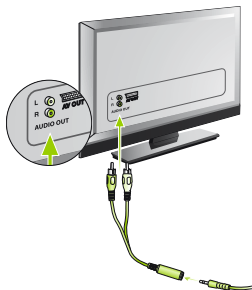

U kunt ook een aansluiting maken met een SCART-adapter, die u kunt kopen in een elektronikawinkel of bij uw Phonak-dealer.

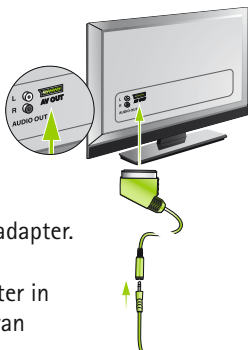

Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de SCART-adapter.

Steek vervolgens de SCART-adapter in een vrije SCART-outputopening van uw tv.

Beschikt uw tv-toestel niet over een analoge audio-uitgang, dan hebt u een digitaal-naar-analoog omvormer nodig. Uw audicien kan hiervoor een speciale converter leveren.


3. Aan de slag

- ① Wanneer het dockingstation in de hoofdtelefoon-aansluiting van uw tv-toestel is gestoken, kunt u het volume aanpassen via de afstandsbediening van het tv-toestel.
- ① Bij sommige tv-toestellen worden de luidsprekers uitgeschakeld als de stekker in de hoofdtelefoon-aansluiting wordt gestoken, het geluid van de tv is dan niet hoorbaar voor anderen. Gebruik in dat geval de Cinch / RCA- of de SCART-uitgangsoening, zoals hierboven beschreven.
- ① Het dockingstation van de Roger Clip-On Mic kan ook aangesloten worden op een ander audio-apparaat, zoals een mp3-speler, pc of HiFi-systeem met behulp van de audiokabel.

3.2 Uw Roger Clip-On Mic opladen

De Roger Clip-On Mic heeft een ingebouwde lithium-polymeeraccu die snel kan worden opgeladen.

Om uw Roger Clip-On Mic op te laden, zet u hem in het dockingstation. Het indicatielampje gaat oranje branden om aan te geven dat het opladen bezig is.

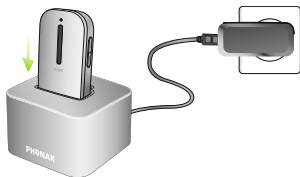

Het opladen van een geheel ontladen batterij duurt ongeveer 2 uur. Het opladen is voltooid wanneer het indicatielampje ononderbroken groen oplicht.


- ⓘ Laadt u de Roger Clip-On Mic voor de eerste keer op, doe dit dan minstens twee uur lang, ook als het batterij-indicatielampje niet brandt of eerder groen wordt.

3. Aan de slag

U kunt uw Roger Clip-On Mic ook opladen zonder het dockingstation. Dit kan van pas komen wanneer u op reis bent.




Met behulp van de micro-USB kabel:

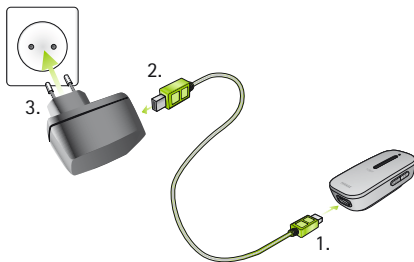1. Sluit het kleine uiteinde (micro-USB) van de laadkabel aan op de Roger Clip-On Mic.
2. Steek het grotere uiteinde (USB) van de laadkabel in de universele voeding.
3. Steek de stekker van de voeding in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.




-
- ① U kunt uw Roger Clip-On Mic ook opladen op een van de USB-poorten van uw computer.
 - ① Indien u de laadkabel tegelijk aansluit op een USB-poort van uw computer en het dockingstation, zal uw Roger Clip-On Mic niet opgeladen worden.

Indicatielampje (batterijstatus)

<i>Indicatielampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Opladen bezig
	Volledig opgeladen
	Batterij bijna leeg – laad uw Roger Clip-On Mic op. Daarnaast zult u pieptonen horen in uw hoortoestellen.



3. Aan de slag

3.3 Aan- en uitzetten

Om uw Roger Clip-On Mic in te schakelen drukt u gedurende een seconde op de aan-/uitknop  tot het indicatorlampje groen oplicht.




Indicatorlampje (tijdens het inschakelen)

<i>Indicatorlampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Bezig met inschakelen
	Ingeschakeld

3.4 De Roger-ontvanger gebruiken

Roger MyLink

Indien uw Roger-ontvanger een Roger MyLink is, schakelt u die in en hangt u die om uw nek. Vergewis u ervan dat uw hoortoestellen in de modus T/MT/luisterspoel gezet zijn.

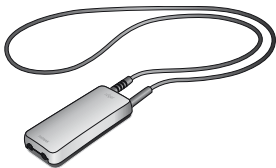

De gebruiksaanwijzing van de Roger MyLink verschaft meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de Roger MyLink.

Roger-ontvangers die zijn aangesloten op uw hoortoestellen gebruiken

Indien u Roger-ontvangers hebt met rechtstreekse aansluiting op uw hoortoestellen, dient u zich ervan te vergewissen dat ze juist zijn aangesloten en dat elk hoortoestel is ingesteld op het programma Roger/FM/DAI/EXT/AUX.




3. Aan de slag

3.5 Een ontvanger aansluiten

Uw audicien heeft mogelijk al uw Roger Clip-On Mic aangesloten op uw hoortoestellen. Indien dat niet het geval is, sluit u de ontvanger als volgt aan op uw Roger Clip-On Mic:

1. Zorg ervoor dat de Roger Clip-On Mic en de Roger-ontvanger beide ingeschakeld zijn.
2. Houd de Roger Clip-On Mic binnen 10 cm / 4 inch van de Roger-ontvanger.
3. Druk op de knop Verbinden  op uw Roger Clip-On Mic.

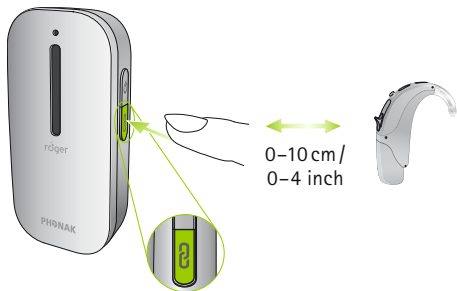




-
4. Het indicatielampje licht gedurende twee seconden groen op om aan te geven dat er een verbinding is.
 5. Herhaal stappen 2 en 3 om een tweede ontvanger aan te sluiten.
- ① Afhankelijk van het type ontvanger kunt u maximaal twee Roger-ontvangers op het oor OF één Roger MyLink aansluiten op uw Roger Clip-On Mic.

3. Aan de slag

Indicatielampje (verbindingstatus)

Na het drukken op de Connect-knop kan de volgende informatie verschaft worden door het indicatielampje:

<i>Indicatielampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Verbinding succesvol – uw Roger-ontvanger is aangesloten op uw Roger Clip-On Mic.
	Roger Clip-On Mic kon geen Roger-ontvanger vinden. Breng de Roger Clip-On Mic dichterbij uw Roger-ontvanger en controleer of de Roger-ontvanger ingeschakeld is. Probeer dan opnieuw verbinding te maken.
	De Roger-ontvanger is niet compatibel met uw Roger Clip-On Mic.

4. Roger Clip-On Mic gebruiken

4.1 Roger Clip-On Mic dragen

De eenvoudigste manier om de Roger Clip-On Mic vast te maken aan de persoon die spreekt is met de clip. Er zijn verschillende mogelijkheden om de Roger Clip-On Mic aan de kleren van de spreker te bevestigen:



Op de kraag
vastgeklemd
(klem omlaag)

of



Op de kleding
vastgeklemd
(klem omhoog)

of



Vastgeklemd
tussen knopen
(klem opzij)

4. Roger Clip-On Mic gebruiken

- ① Zorg ervoor dat de Roger Clip-On Mic naar de mond van de spreker gericht is.
- ① De afstand tussen de Roger Clip-On Mic en de mond van de spreker mag niet groter zijn dan 20 cm / 8 inch.



max. 20 cm / 8 inch



Te ver weg



Niet naar de mond gericht

4.2 De draagkoord gebruiken


Indien het niet mogelijk is om de Roger Clip-On Mic vast te maken aan de kleren van de spreker, kunt u ook de draagkoord gebruiken om hem rond zijn/haar nek te hangen.

De draagkoord vastmaken

1. Druk op de clip van de Roger Clip-On Mic en schuif het plastic deel van de draagkoord erover.




2. Sluit de clip en controleer of hij volledig gesloten is.

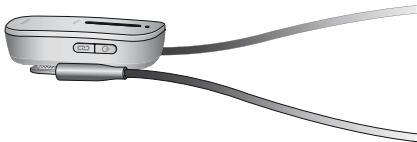

4. Roger Clip-On Mic gebruiken

Om de draagriem te verwijderen, opent u de clip en trekt u de draagkoord eruit.

1.

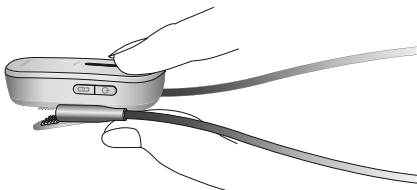


2.




De Roger Clip-On Mic rond de nek hangen

1. Open de draagriem door de magneten uit elkaar te trekken.

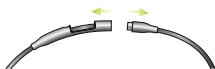

2. Hang de Roger Clip-On Mic rond de nek van de spreker en sluit de draagriem.

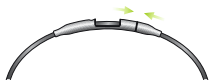

3. Pas de lengte van de draagriem aan om de Roger Clip-On Mic dichterbij de mond te brengen. Zet de draad vast door de kabel in het gat te trekken. De afstand tussen de Roger Clip-On Mic en de mond mag niet groter zijn dan 20 cm / 8 inch.



4. Zet de draad vast door de kabel door het gat te trekken.

max. 20 cm /
8 inch



4. Roger Clip-On Mic gebruiken

4.3 Aansluiten op multimedia-apparaten

U kunt uw Roger Clip-On Mic aansluiten op een audio-bron (zoals een tv-toestel, tablet of stereo-installatie) om het audiosignaal rechtstreeks in uw hoortoestellen te ontvangen.

Via het dockingstation

Zorg dat het dockingstation stroom heeft en juist is aangesloten op uw audiobron, zoals beschreven in 'Aan de slag' (pagina 12). Plaats uw Roger Clip-On Mic in het dockingstation. Na het inschakelen van uw audiobron detecteert Roger Clip-On Mic automatisch dat er een audiosignaal is en begint hij dit door te zenden.




- ① Indien het dockingstation niet is ingeschakeld, kan de Roger Clip-On Mic nog steeds een extern audiosignaal herkennen en verzenden. Zet gewoon de Roger Clip-On Mic aan.
- ① Wanneer de Roger Clip-On Mic een audiosignaal verzendt, is de microfoon ervan gedempt.

Via een micro-USB audiokabel

Als alternatief kunt u de korte micro-USB audiokabel gebruiken om uw multimedia-apparaat rechtstreeks op uw Roger Clip-On Mic aan te sluiten.

1. Steek de ronde stekker van de micro-USB audiokabel in de hoofdtelefoonuitgang van uw multimedia-apparaat.


2. Steek de rechthoekige stekker (micro-USB) van de micro-USB kabel in de poort van uw Roger Clip-On Mic.

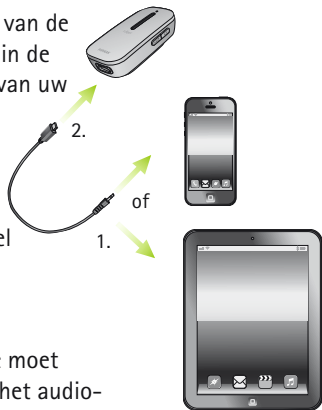

- i** De Roger Clip-On Mic moet ingeschakeld zijn om het audio-signaal naar uw hoortoestellen te kunnen verzenden. Nadat u het audiosignaal van uw multimedia-apparaat hebt geactiveerd, zal de Roger Clip-On Mic dit signaal herkennen en automatisch zijn eigen microfoon dempen.

5. Speciale functies

5.1 Gedempt

Druk stevig op de knop Aan/Uit  om de microfoon van de Roger Clip-On Mic of audio-ingang te dempen. Na het dempen gaat het indicatielampje vast paars branden.

Druk nogmaals op de knop Aan/Uit om de microfoons of de audio-ingang weer te activeren.




Indicatorlampje (Dempfunctie)


Indicatorlampje Betekenis



Microfoon/audio-input gedempt

5.2 Roger-toestellen ontkoppelen (NewNet)


Om de verbinding tussen de Roger Clip-On Mic en aangesloten ontvangers of andere Roger-microfoons te verbreken, houdt u de knop Verbinden  ingedrukt gedurende 7 seconden. Het lampje gaat oranje branden wanneer de Roger Clip-On Mic is losgekoppeld van alle aangesloten toestellen.

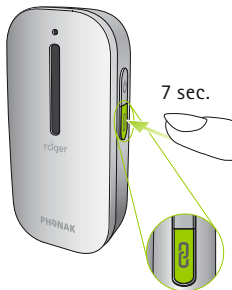

U kunt nu Roger-ontvangers of Roger-microfoons opnieuw beginnen aan te sluiten op uw Roger Clip-On Mic.

5.3 Verificatiemodus (uitsluitend voor audiciens)

De verificatiemodus wordt gebruikt door audiciens om een toestel te verifiëren volgens het Roger POP (Roger Phonak Offset Protocol).

Om de verificatiemodus te activeren, drukt u 5 maal na elkaar op de knop  Verbinden.

5. Speciale functies

Statuslampje (verificatiemodus)

Indicatielampje *Betekenis*



Verificatiemodus geactiveerd

- ① De verificatiemodus kan enkel geactiveerd worden tijdens de 60 seconden na het inschakelen van de Roger Clip-On Mic.
- ① Wanneer de Roger Clip-On Mic is uitgeschakeld, is de verificatiemodus automatisch gedeactiveerd.

Resetten

Indien uw Roger Clip-On Mic niet langer reageert, kunt u het toestel resetten door tegelijk te drukken op de knop Aan/Uit  en Verbinden  gedurende 7 seconden.

6. Extra microfoons toevoegen

Met de Roger-technologie kunt u meerdere microfoons gelijktijdig gebruiken door aanvullende Roger-microfoons aan te sluiten.


6.1 Verbinden

Volg de onderstaande instructies om een andere microfoon aan te sluiten op uw Roger Clip-On Mic:

1. Schakel beide microfoons in.
2. Houd de twee microfoons dicht bij elkaar (binnen 10 cm / 4 inch).

6. Extra microfoons toevoegen

3. Druk op de Connect-knop  op een van de microfoons.

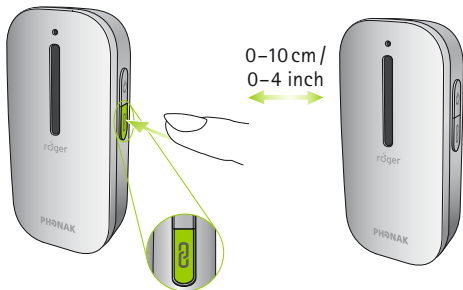




4. De lampjes van beide microfoons lichten gedurende twee seconden groen op om aan te geven dat er een verbinding is.

-
- ① Indien u uw Roger Clip-On Mic met een Roger Pen wilt verbinden, wordt u aangeraden om de Connect-knop van de Roger Pen in te drukken.
 - ① Er kunnen maximaal tien Roger-microfoons worden aangesloten op uw Roger Clip-On Mic.
 - ① Als u uw Roger Clip-On Mic wilt loskoppelen van andere microfoons, kunt u de functie NewNet gebruiken (zie ‚Speciale functies‘ op pagina 30).

6. Extra microfoons toevoegen

Indicatielampje (verbindingstatus)


Na het drukken op de Connect-knop, kan de volgende informatie verschaft worden door het indicatielampje:


<i>Indicatielampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Verbinding succesvol – de andere Roger-microfoon is nu aangesloten op uw Roger Clip-On Mic.
	Roger Clip-On Mic kon geen andere Roger-microfoon vinden. Breng de Roger Clip-On Mic dichterbij de andere Roger-microfoon en controleer of beide microfoons ingeschakeld zijn. Probeer dan opnieuw verbinding te maken.
	De andere Roger-microfoon is niet compatibel met uw Roger Clip-On Mic. Werk de software van uw Roger-microfoons

6.2 Extra microfoons gebruiken

Overhandig de Roger-microfoons aan uw sprekers. Zorg ervoor dat ze juist gedragen worden (gericht naar de mond en binnen 20 cm / 8 inch).

Roger Clip-On Mics herkennen automatisch wanneer uw vriend of partner spreekt, voordat zijn / haar stem direct naar uw hoortoestellen verzonden wordt.

Indien een spreker de groep tijdelijk wenst te verlaten, moet hij / zij de microfoon dempen door stevig te drukken op de knop  Aan / Uit.

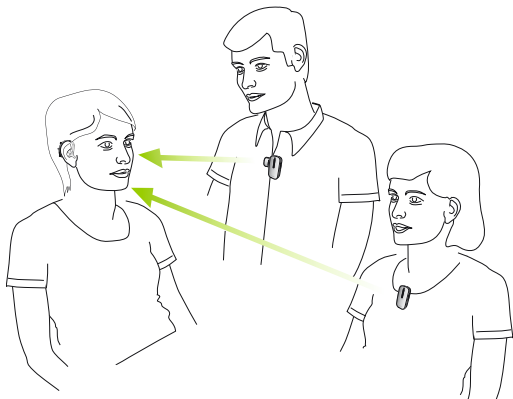




6. Extra microfoons toevoegen

- ① Slechts één spreker kan per keer gehoord worden. Wanneer twee personen tegelijk spreken, zal de persoon die het eerst begon te spreken gehoord worden. Wanneer die stopt met praten, zal de andere spreker hoorbaar zijn.
- ① Indien er een probleem optreedt in het netwerk, drukt u op de Connect-knop op een van de microfoons om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

Indicatielampje (status meerdere microfoons)

Wanneer meerdere Roger-microfoons gebruikt worden, kan de volgende informatie verschaft worden door het indicatielampje:

<i>Indicatielampje</i>	<i>Betekenis</i>
	Uw Roger-microfoon is gedempt. Schakel de dempfunctie uit door te drukken op de knop Aan/Uit  .
	De verbinding tussen uw Roger Clip-On Mic en andere microfoons is verbroken. Druk op de Connect-knop om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

7. Problemen oplossen

Mogelijke oorzaak (oorzaken)

Oplossing(en)

Ik kan de Roger Clip-On Mic niet inschakelen

- De batterij is leeg

- Laad de Roger Clip-On Mic gedurende minstens twee uur op

Ik kan de spreker niet verstaan

- De microfoon is niet correct gepositioneerd

- Breng de Roger Clip-On Mic dichterbij de mond van de spreker

- De openingen van de microfoon zijn bedekt door vingers of kleren

- Zorg ervoor dat de Roger Clip-On Mic naar de mond van de spreker gericht is
- Zorg ervoor dat de openingen van de microfoon niet bedekt zijn door vingers, kleren of vuil

Ik kan de stem van de spreker niet horen, hoewel de Roger Clip-On Mic is ingeschakeld

- De microfoon is gedempt
- Uw hoortoestellen zijn niet op het juiste programma gezet

- Controleer het indicatielampje – indien het paars is, druk dan kort op de knop Aan/Uit om de microfoons te activeren
- Controleer of uw hoortoestellen op het juiste programma zijn gezet (Roger/FM/DAI/EXT/AUX)

Mogelijke oorzaak (oorzaken)

- Uw Roger-ontvangers zijn niet aangesloten op de Roger Clip-On Mic
- Uw Roger Clip-on Mic maakte deel uit van een netwerk

Oplossing(en)

- Houd de Roger Clip-On Mic dicht bij de Roger-ontvanger in kwestie en druk kort op de Connect-knop
- Druk op de Connect-knop op uw Roger Clip-on Mic.

Ik blijf het audiosignaal verliezen

- Afstand tussen Roger Clip-On Mic en Roger-ontvanger is te groot
- Er zijn obstakels tussen u en de Roger Clip-On Mic

- Kom dichterbij de Roger Clip-On Mic
- Zorg ervoor dat u de Roger Clip-On Mic kunt zien (direct zicht)

Het volume van mijn multimedia-apparaat is te laag

- Onjuiste volume-instellingen

- Verhoog het volume van uw audiobron

Ik kan mijn multimedia-apparaat niet horen

- De audiobron is gedempt
- Roger Clip-On Mic gebruikt de micro-USB audiokabel maar is niet ingeschakeld

- Schakel de dempfunctie van de audiobron uit
- Schakel de Roger Clip-On Mic in om te luisteren naar de audiobron via de micro-USB audiokabel

7. Problemen oplossen

Mogelijke oorzaak (oorzaken)

Oplossing(en)

Het lampje van de Roger Clip-On Mic licht blauw op (één keer)

■ Uw Roger Clip-on Mic maakte deel uit van een netwerk

■ Druk op de Connect-knop op uw Roger Clip-on Mic.

Het lampje van de Roger Clip-On Mic knippert rood (dubbele flits)

■ De batterij is bijna leeg

■ Laad de Roger Clip-On Mic zo snel mogelijk op

De Roger Clip-On Mic werkt niet langer

■ Softwareprobleem

■ Start de Roger Clip-On Mic opnieuw op door de twee knoppen tegelijkertijd in te drukken

Ik kan mijn Roger Clip-On Mic niet verbinden met een andere Roger-microfoon

■ De software is niet compatibel

■ Werk al uw Roger-microfoons bij met behulp van de Roger Upgrader die beschikbaar is via de website van Phonak of neem contact op met uw plaatselijke Phonak-dealer.

Mogelijke oorzaak (oorzaken)

Oplossing(en)

Ik kan het signaal van een of meerdere aanvullende microfoons niet horen

- De microfoon staat uit
- De microfoon is niet juist geplaatst
- De verbinding met het microfoon-netwerk is verbroken

- Zet alle microfoons aan
- Zorg dat de Roger-microfoon wordt vastgehouden/op de juiste manier vlak bij de mond wordt gedragen
- Druk op de Connect-knop op een microfoon om opnieuw verbinding te maken met het netwerk


Roger Clip-On Mic bevindt zich in de buurt van een computer/tv-box en het wifi-signaal van de verbinding lijkt langzamer te zijn.



- De wifi-router bevindt zich op een te grote afstand en de Roger Clip-On Mic is te dicht in de buurt van de computer/tv geplaatst.

- Plaats de Roger Clip-On Mic op minstens 1 meter van de computer/tv

8. Belangrijke informatie

8.1 Belangrijke veiligheidsinformatie

 Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u uw Phonak-toestel in gebruik neemt.

 Dit symbool op het product of de verpakking ervan  betekent dat het niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Het is uw verantwoordelijk om uw afgedankte apparaten gescheiden van de stroom van gemeentelijk afval te verwijderen. De juiste verwijdering van uw oude apparaten zal helpen om de potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

8.2 Waarschuwingen voor gevaar

- ⚠ Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- ⚠ Het toestel kan beschadigd raken door het te openen. Wanneer zich problemen voordoen die niet opgelost kunnen worden door de aanwijzingen in het gedeelte Problemen oplossen van deze gebruiksaanwijzing te volgen, neem dan contact op met uw audicien.
- ⚠ Uw toestel mag uitsluitend gerepareerd worden door een erkend servicecentrum. Wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Phonak, zijn niet toegestaan.
- ⚠ Verwijder elektrische componenten overeenkomstig plaatselijke voorschriften.
- ⚠ Gebruik het toestel niet in zones waar elektronische apparatuur verboden is. Raadpleeg bij twijfel de persoon die de leiding heeft.

8. Belangrijke informatie

- ⚠ Het toestel mag niet worden gebruikt aan boord van vliegtuigen, tenzij het cabinepersoneel hier specifiek toestemming voor geeft.
- ⚠ Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX normen.
- ⚠ Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Phonak AG.
- ⚠ Als u de snoertjes van uw toestel gebruikt voor een doel waarvoor ze niet zijn ontworpen (bijvoorbeeld als u de USB-kabel rond de nek draagt), kan dit tot verwondingen leiden.
- ⚠ Als u een machine bedient, moet u oppassen dat er geen onderdelen van het toestel door de machine worden gegrepen.
- ⚠ Laad het toestel niet op terwijl u het op uw lichaam draagt.
- ⚠ Pas op: elektrische schok. Steek niet alleen de losse adapter in een contactdoos.

8.3 Veiligheidsinformatie product

- ① Behoed het toestel voor zware schokken en trillingen.
- ① Stel het toestel niet bloot aan temperaturen en vochtigheidspercentages die buiten de aanbevolen omgevingscondities vallen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- ① Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om het apparaat te drogen.
- ① Reinig het toestel met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep enz.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- ① Laad uw toestel alleen op met de opladers die door Phonak geleverd zijn of met gestabiliseerde opladers die 5 VDC en ≥ 500 mA leveren.
- ① Sluit geen USB- of audiokabel van meer dan 3 meter (10 ft) aan op het toestel.
- ① Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.

8. Belangrijke informatie

- ① Bescherm het toestel tegen bovenmatig vocht (baden, zwemmen), hitte (radiator, dashboard van de auto) of rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen, fitness, sport).
- ① Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de juiste werking van het toestel nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
- ① Pas geen bovenmatige kracht toe als u het toestel op de verschillende kabels aansluit.
- ① Bescherm alle openingen (microfoons, audio-input en oplader) tegen stof en vuil.
- ① Neem contact op met uw audicien en stop met het gebruiken van het toestel als het gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt tijdens het opladen, de kabel of de stekker beschadigd is of wanneer het in een vloeistof is gevallen.

-
- ① Het toestel heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Deze batterij kan honderden keren worden opgeladen en gebruikt, maar kan wel na verloop van tijd minder goed gaan functioneren. De batterij mag op dat moment alleen worden vervangen door geautoriseerd personeel.

8.4 Andere belangrijke informatie

- Personen met pacemakers of andere medische apparaten dienen **ALTIJD** hun arts of de fabrikant van hun apparaat te raadplegen **VOORDAT** ze het toestel gebruiken. Bij gebruik van het toestel in combinatie met een pacemaker of andere medische apparaten dient u zich **ALTIJD** te houden aan de veiligheidsaanbevelingen van de arts die verantwoordelijk is voor uw pacemaker of van de fabrikant van de pacemaker.
- Het toestel verzamelt en bewaart interne technische gegevens. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen door Phonak om het apparaat te controleren, alsook om u te helpen het apparaat correct te gebruiken.
- Het digitale signaal dat wordt verzonden vanaf het toestel naar een aangesloten ontvanger kan niet worden opgevangen door andere apparaten die zich niet binnen het netwerk van de microfoon bevinden.

9. Service en garantievoorwaarden

9.1 Plaatselijke garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw apparaat hebt aangeschaft, naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

9.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

9.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op deze garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn / haar werkplaats.

Serienummer:

Erkende audicien
(stempel / handtekening):

Aankoopdatum:

10. Informatie en verklaring van symbolen



Het CE-symbool is een bevestiging door Phonak Communications AG dat dit Phonak-product voldoet aan de belangrijkste vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de gebruiker de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzingen.



Belangrijke informatie voor de hantering en veiligheid van het product.

Bedieningsom- standigheden

Dit toestel is zo ontworpen dat het werkt zonder problemen of beperkingen wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië. Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.



Temperatuur: -20° tot $+60^{\circ}$ Celsius
(-4° tot $+140^{\circ}$ Fahrenheit).



Vochtigheid bij transport: tot 90%
(niet-condenserend).
Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%,
wanneer niet gebruikt.

10. Informatie en verklaring van symbolen



Atmosfeerdruk: 500 hPA tot 1100 hPA



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit apparaat niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Gelieve oude of ongebruikte apparaten te deponeren op stortplaatsen voor elektronisch afval of ze te overhandigen aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid. Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare batterij. Probeer het product niet te openen of de batterij te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggoien van de batterij.

Kennisgeving

Fabrikant:

Phonak Communications AG

Laenggasse 17

CH-3280 Murten

Zwitserland

www.phonak.com/phonak-roger

