


# myPhonak Junior 1.2

Gebruiksaanwijzing





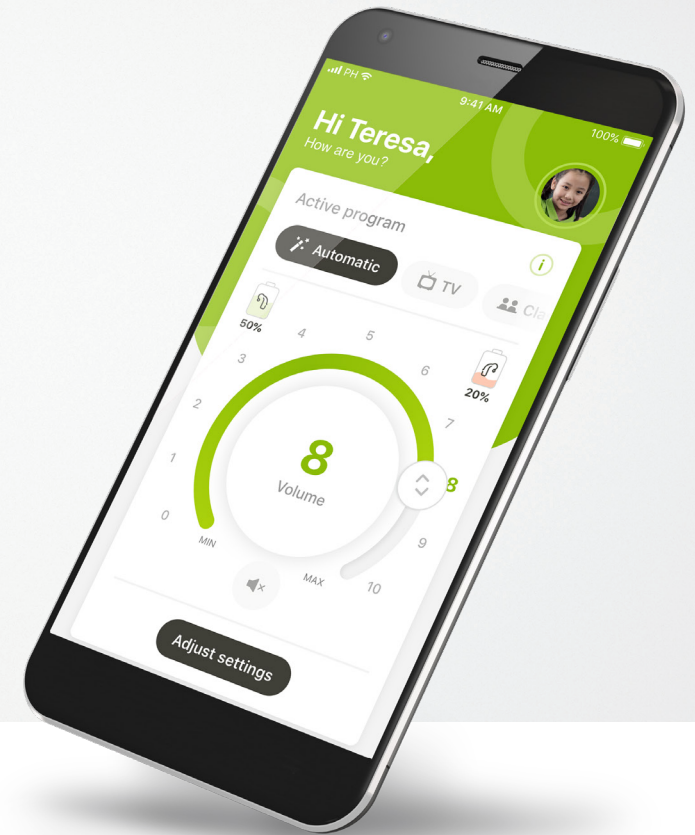



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Aan de slag

myPhonak Junior is een app die is ontwikkeld door Sonova, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland. Lees de gebruikersinstructies grondig door om te kunnen profiteren van alle mogelijkheden die de app te bieden heeft.

-  Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de functies van myPhonak Junior en hoe deze functies door de drager gebruikt kunnen worden. Er wordt ook beschreven hoe bepaalde functies kunnen worden geblokkeerd met een kinderslot zodat deze functies alleen samen met een ouder/voogd kunnen worden gebruikt. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat je de app gebruikt.
-  De cognitieve ontwikkeling van kinderen verschilt, zelfs bij kinderen van dezelfde leeftijd. Het niveau van volwassenheid en risicobewustzijn moet voor elk kind op individuele basis beoordeeld worden om te kijken of het gebruik van myPhonak Junior geschikt is. De volgende aanbevelingen kunnen als richtlijn gebruikt worden:
-  **Zelfstandig gebruik van de afstandsbediening:** Kinderen vanaf 10 jaar, die weloverwogen beslissingen kunnen maken over hoe de instellingen van de app hun gehoor en bewustzijn van de geluiden om hen heen beïnvloeden.
-  Het is van belang dat zij de waarschuwingsberichten kunnen lezen en begrijpen.
-  **Ondersteund gebruik van de afstandsbediening:** Kinderen vanaf 6 jaar die duidelijke feedback kunnen geven over wijzigingen of aanpassingen die door een externe partij via de app worden aangebracht. In deze situatie kunnen ouders/verzorgers de wijzigingen uit naam van het kind doorvoeren.
-  **OPMERKING:** het is erg belangrijk dat de wijzigingen niet door de ouders/verzorgers worden aangebracht, tenzij het kind betrouwbaar feedback kan geven.



### Informatie over compatibiliteit:

Om myPhonak Junior te kunnen gebruiken, moet je beschikken over Phonak-hoortoestellen met Bluetooth®-functionaliteit. myPhonak Junior kan worden gebruikt op telefoons met Bluetooth® low energy (LE) en is compatibel met apparaten met iOS® versie 14.0 of nieuwer. myPhonak Junior kan worden gebruikt op door Google Mobile Services (GMS) gecertificeerde Android™-apparaten die Bluetooth® 4.2 ondersteunen en op Android OS 8.0 of nieuwer.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

iPhone® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.


Android is een handelsmerk van Google LLC.

iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.

## Inhoud

Kort overzicht	4
De myPhonak Junior-app installeren	6
Koppelen met compatibele hoortoestellen	7
Kinderslot	9
Aanpassen	10
Problemen met koppelen oplossen	11
Afstandsbediening	12
Remote Support-sessie	13
Mijn Hoortoestellen	15
Veiligheidsinformatie en beschrijving van symbolen	16
Verklaring van symbolen	20


## Kort overzicht - Afstandsbediening

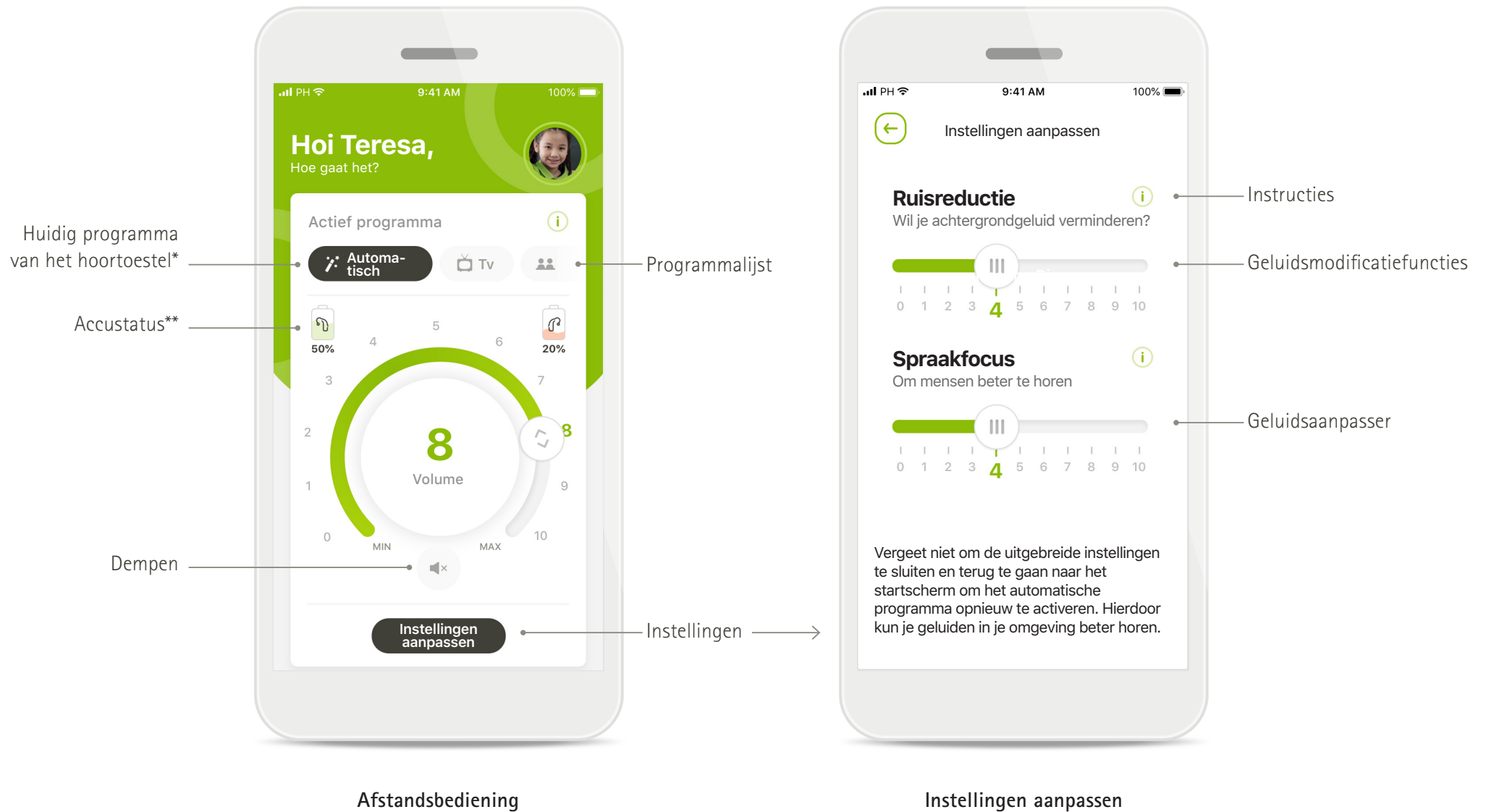

\*AutoSense™ Sky OS voor Sky-hoortoestellen. AutoSense™ OS voor Bolero-, Naida- en Audéo-hoortoestellen.

\*\*Alleen beschikbaar voor oplaadbare hoortoestellen

## Kort overzicht - Remote Support\*

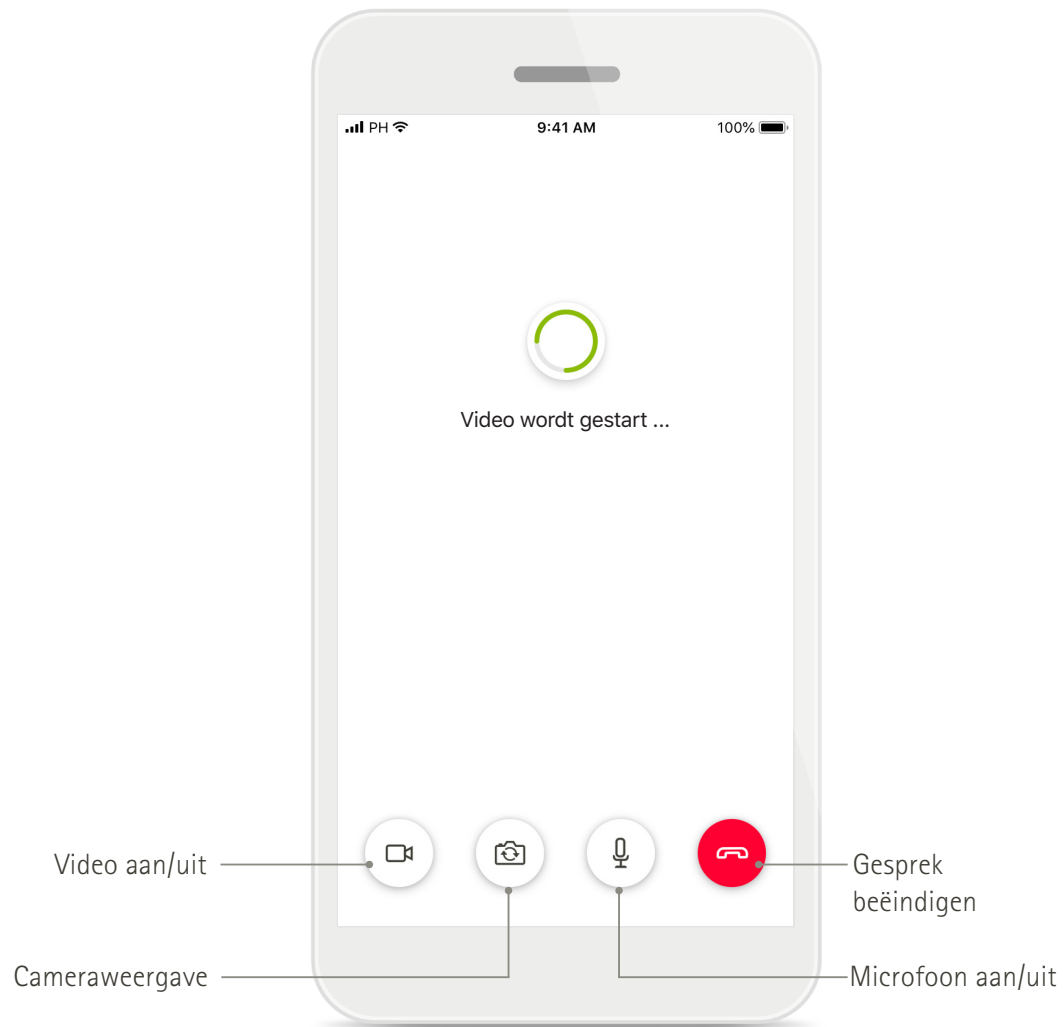

Remote Support-gesprek




Remote Support-gesprek

\*Alleen beschikbaar in bepaalde landen en via geselecteerde audiciens

# De myPhonak Junior-app installeren

- Verbind je smartphone met het internet via wifi of mobiele data
- Schakel Bluetooth op je smartphone in

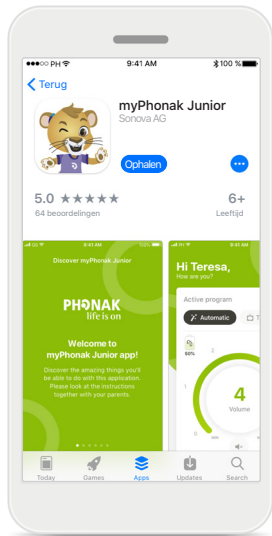

## myPhonak Junior-app downloaden

Download de app in de store. Open myPhonak Junior na downloaden




## myPhonak Junior openen

Open de app en klik op **Ontdekken**.




## Privacyverklaring

Om de app te kunnen gebruiken, moet je bij het privacystatement op **Ik ga akkoord** drukken om in te stemmen met het privacystatement en door te gaan.

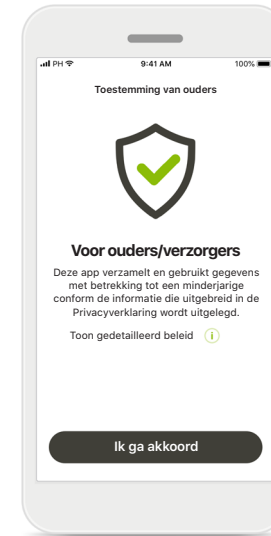

## Toestemming van ouders

Als ouder of verzorger moet je de Toestemming voor ouders accepteren om de app te kunnen gebruiken. De myPhonak Junior-app verzamelt en gebruikt gegevens van een minderjarige overeenkomstig de informatie in de Privacyverklaring.

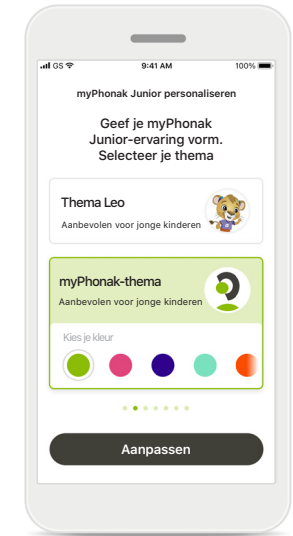

## Een thema selecteren

Ouders, zorgverleners of gebruikers van de app kunnen kiezen uit het thema Leo en het thema myPhonak. Beide thema's hebben dezelfde app-functionaliteiten. De thema's kunnen gekozen worden tijdens de onboarding of in Jouw profiel.


# Koppelen met compatibele hoortoestellen\*

Om hoortoestellen met Bluetooth-functionaliteit met de myPhonak Junior-app te koppelen, dien je de instructies hieronder te volgen.\*\*




## Koppelinstructies

Tik op **Doorgaan** en volg de instructies voor je hoortoestel

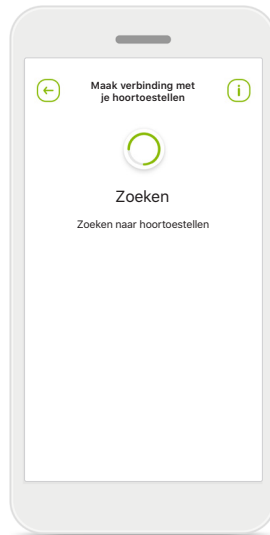


## Zoeken

De app zoekt naar compatibele hoortoestellen en geeft ze weer zodra ze zijn gedetecteerd. Dit kan enkele minuten duren.

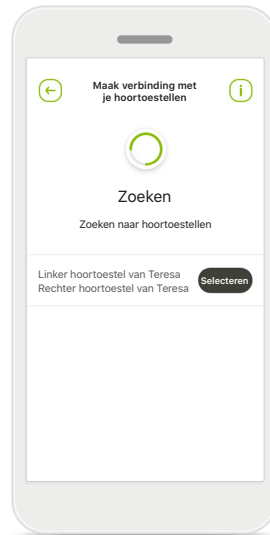


## Selecteren

Druk op **Selecteren** wanneer je hoortoestellen in de lijst worden weergegeven.

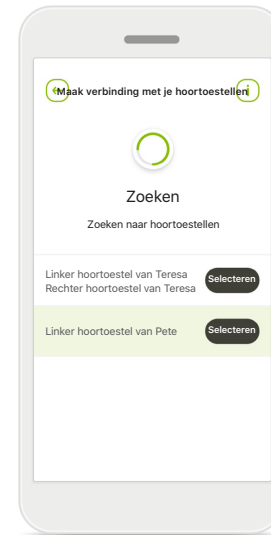

## Meerdere

Indien er meerdere hoortoestellen worden gedetecteerd, worden ze allemaal weergegeven. Om je hoortoestel te selecteren, moet je op de knop van je hoortoestel drukken.

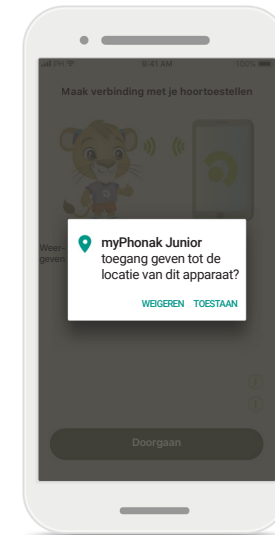

## Locatie

Op Android-apparaten moet je de locatieservices inschakelen wanneer je Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelt. Na de eerste configuratie kan je de locatieservices weer uitschakelen.


\*Compatibel met Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P en Audéo P.

\*\*Streamen met Bluetooth: om muziek te streamen of telefoongesprekken te ontvangen via je hoortoestellen, ga je naar Instellingen > Bluetooth en voeg je de hoortoestellen toe aan je lijst met verbonden apparaten. Keer vervolgens terug naar de app om door te gaan met koppelen.



## Koppelen met compatibele hoortoestellen\*

Om hoortoestellen met Bluetooth-functionaliteit met de myPhonak Junior-app te koppelen, dien je de instructies hieronder te volgen.

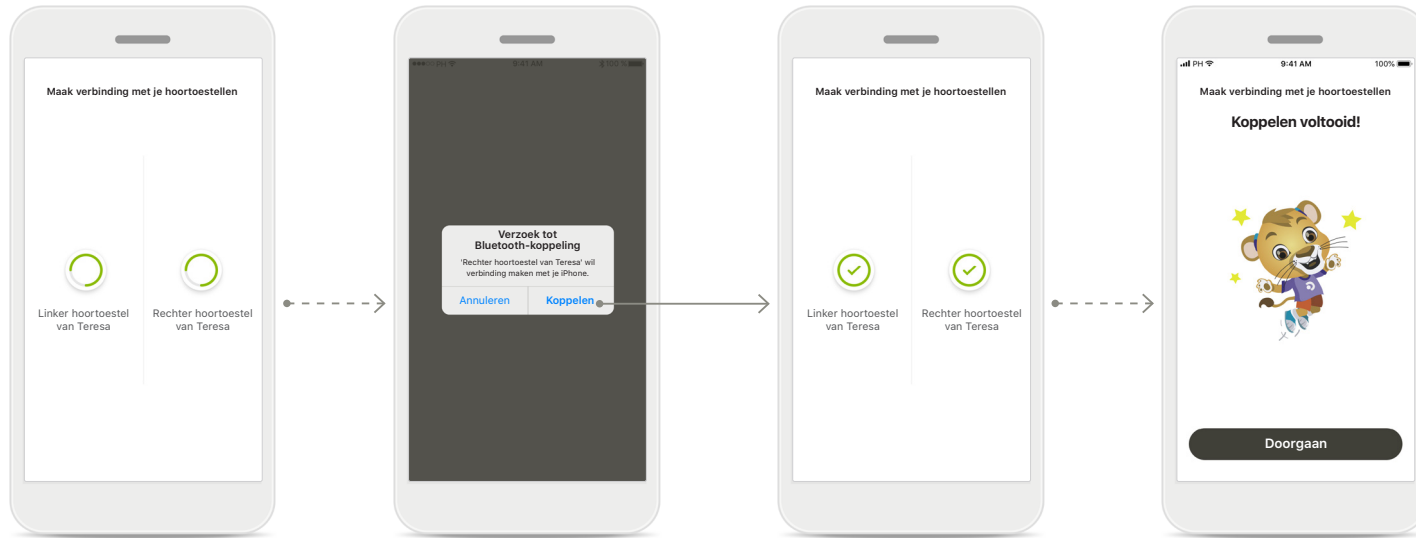

### De hoortoestellen koppelen

De app wordt met elk hoortoestel afzonderlijk verbonden.

### Voor elk hoortoestel bevestigen

Wanneer je daarom gevraagd wordt, tik je voor elk apparaat op **Koppelen** in de pop-up.

### Koppelen voltooid

Beide hoortoestellen zijn nu gekoppeld. De app gaat automatisch door naar de volgende stap.

### Configuratie voltooid


Je bent nu klaar om alle compatibele functies in de app te gebruiken. Tik op **Doorgaan** om naar het hoofdscherm te gaan.

\*Compatibel met Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L en Audéo L.



# Kinderslot

Om het kinderslot van de myPhonak Junior-app te activeren, volg je de onderstaande instructies.

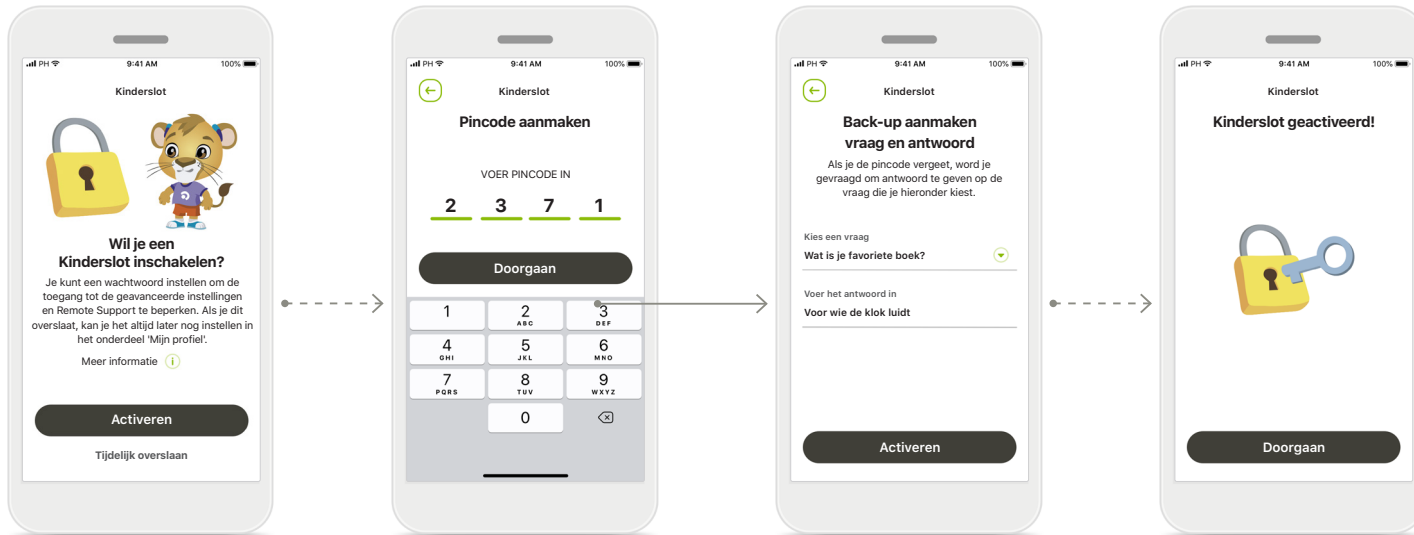

## Kinderslot inschakelen

Kinderslot kan tijdens de onboarding/eerste keer starten van de app worden geactiveerd, of op een door de ouder/verzorger gekozen moment in Jouw profiel. Met deze functie kan toegang tot Remote Support, Automatisch aan-functies voor oplaadbare hoortoestellen en de breedteselectie voor bellen met Bluetooth beperkt worden.

## Pincode aanmaken

Geef een pincode van 4 cijfers op om het kinderslot te activeren. Deze pincode kan worden gewijzigd of opnieuw worden ingesteld op ieder moment dat de ouder/voogd dat wil.

## Back-upvraag

Selecteer een Back-upvraag en type het juiste antwoord. Deze vraag wordt gebruikt om toegang te krijgen tot verboden functies, voor het geval je je pincode van 4 cijfers vergeet.

## Kinderslot geactiveerd

Nadat je de back-upvraag hebt geselecteerd en het antwoord heeft ingevoerd, kan je het kinderslot activeren. Het kinderslot kan ook worden uitgeschakeld in het appmenu, indien een geval zich voordoet waarin dit nodig is.


# Aanpassen

Om aanpassingsopties van de myPhonak Junior-app te gebruiken, volg je de onderstaande instructies.




## Beginnen met aanpassen

Je kunt beginnen met aanpassen tijdens de onboarding of later in het gedeelte Jouw profiel op het startscherm.

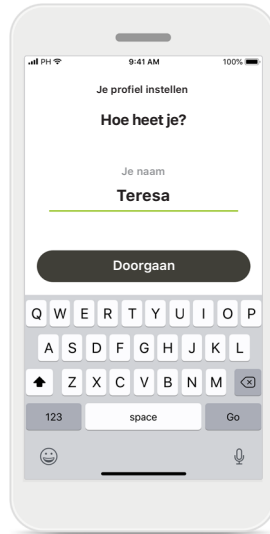


## Profielnaam gebruiker

Kies een gebruikersnaam.

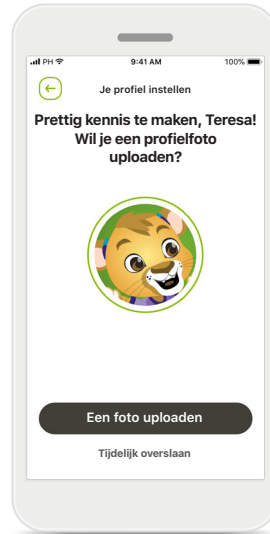

## Profielfoto gebruiker

Kies een profielfoto. Dit kun je overslaan en later instellen in het gedeelte Jouw profiel.

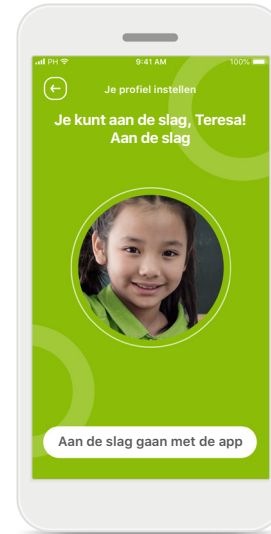


## Meer opties

Andere aanpassingsopties zijn onder andere het wijzigen van de het kleurenthema van de achtergrond van de app en het wijzigen van de kleuren van de virtuele hoortoestellen en de oorhaak.

# Problemen met koppelen oplossen


Mogelijke problemen tijdens het configuratieproces.

Ga voor meer informatie over probleemoplossing naar de Phonak-ondersteuningspagina.

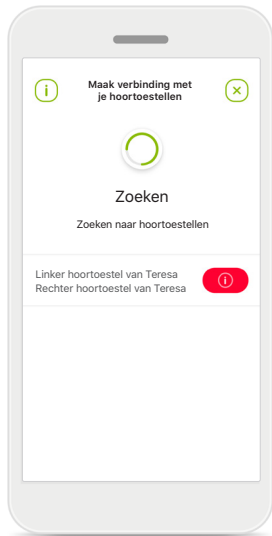

## Incompatibele toestellen


De app kan geen verbinding maken met de toestellen, omdat ze niet compatibel zijn. Neem contact op met je audicien voor meer informatie.

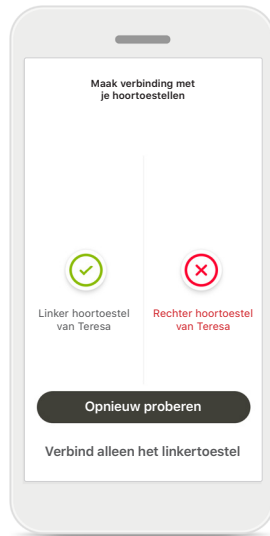

## Fout bij hoortoestelverbinding

Als het koppelen met een van de hoortoestellen mislukt, kan je het volgende doen:

1. Tik op **Opnieuw proberen** om het koppelingsproces opnieuw op te starten.
2. Ga door met slechts een van de twee hoortoestellen.

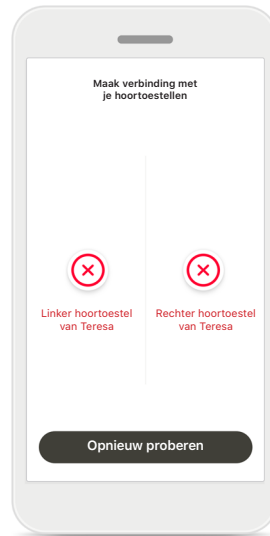


## Verbinding met beide mislukt

Tik op **Opnieuw proberen** om het koppelingsproces opnieuw op te starten en volg de instructies.

# Algemeen overzicht Afstandsbediening

Beschikbare functies voor alle hoortoestellen.

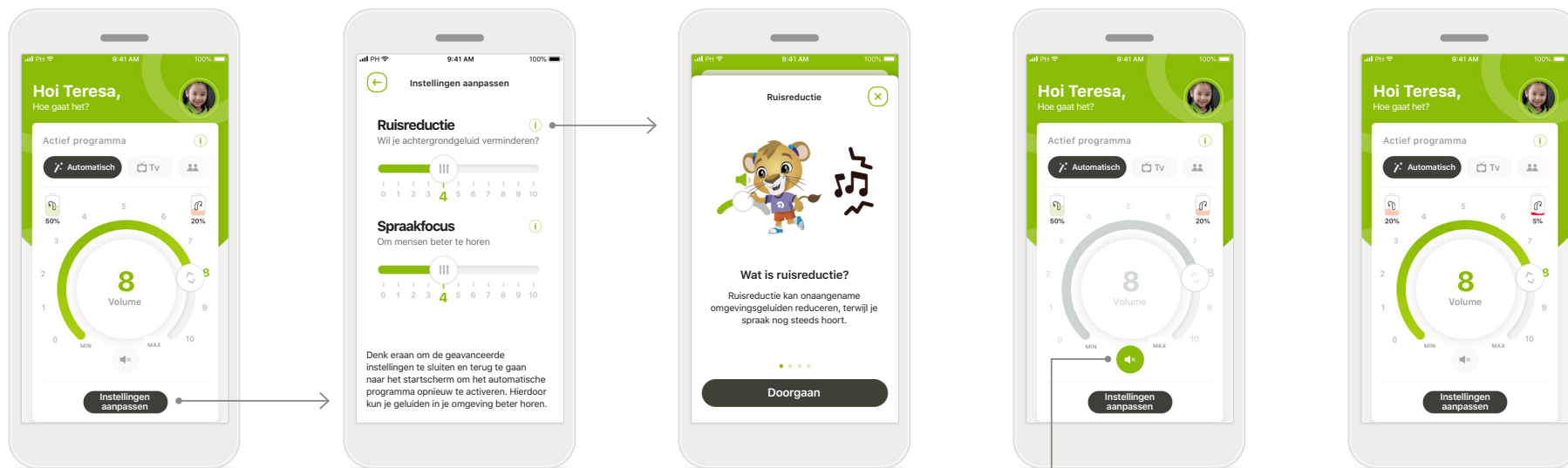

## Volume van het hoortoestel aanpassen

Beweeg het schuifwiel om het volume aan te passen

## Actief programma wijzigen

Tik op de beschikbare programma's om aan een specifieke hooromgeving aan te passen. De beschikbaarheid van programma's is afhankelijk van de manier waarop je audicien je hoortoestellen heeft geprogrammeerd.

## Instellingen aanpassen

In de instellingenweergave kan je de volgende functies openen:

- Ruisreductie
- Sprakfocus

## Informatie

Je kunt meer informatie krijgen over verschillende functies krijgen door op het **i**-pictogram te drukken.

## Dempen

Je kunt de hoortoestellen dempen met het pictogram **Dempen**.


## Status bijna lege accu

Als de accustatus onder de 20% ligt, wordt het pictogram in het rood weergegeven. Laad je hoortoestellen dan zo snel mogelijk op.

## Remote Support-sessie


Als van mobiele data gebruik maakt, kan je provider hier kosten voor rekenen. Je wordt geadviseerd om navraag te doen bij je telefoonprovider voordat je een Phonak Remote Support-sessie start.

Een Remote Support-sessie verbruikt ongeveer 56 MB voor een videogesprek van 10 minuten, terwijl een audiogesprek ongeveer 30 MB verbruikt.

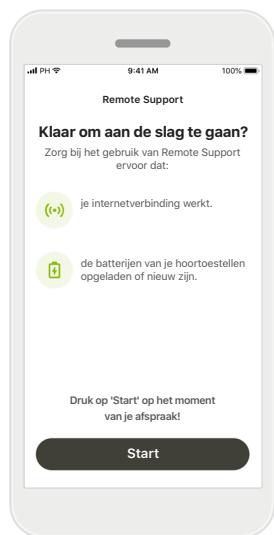


### De Remote Support-sessie starten

Op het moment van je afspraak open je myPhonak Junior en tik je op **Start** om je audicien te laten weten dat je klaar bent voor je Phonak Remote Support-afspraak.

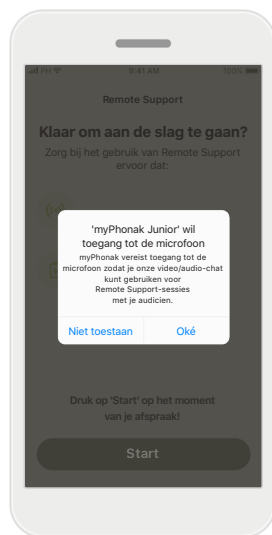


### Toegang tot camera en microfoon

Tik op **Oké** om myPhonak Junior toegang te geven tot je camera en microfoon.

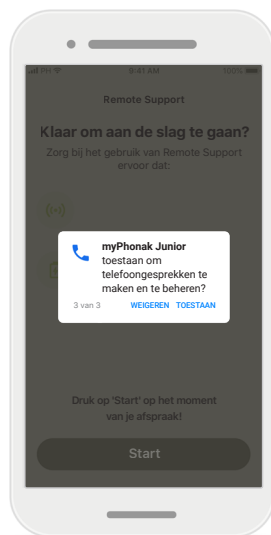

### Toegang tot myPhonak-oproepen

Als je een Android-smartphone hebt, tik je op **TOESTAAN** om de myPhonakJunior toestemming te geven om telefoongesprekken te maken en te beheren.

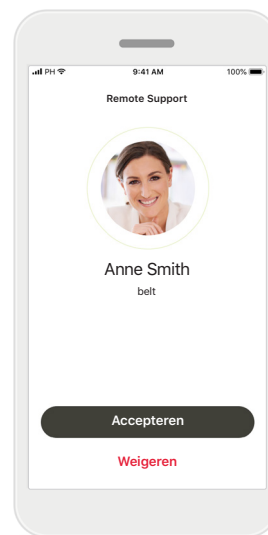


### Videogesprekken aannemen

De app verbindt je met je audicien. Tik op **Accepteren** om de oproep van je audicien te accepteren.


# Remote Support-sessie

Tijdens de Remote Support-sessie kan je je ervaring personaliseren door jouw video of audio naar eigen wens in of uit te schakelen.

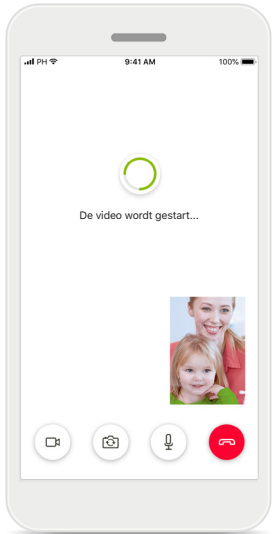


## Video-oproep starten

Na een paar seconden is het videobeeld ingesteld en kan je je audicien zien.

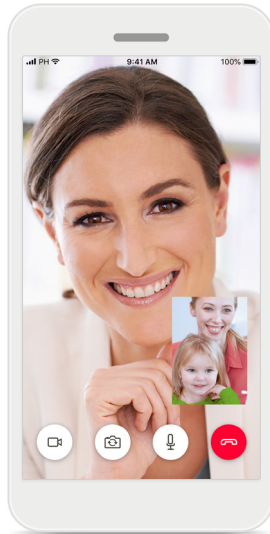


## Lopend gesprek

Je bent nu verbonden met je audicien.

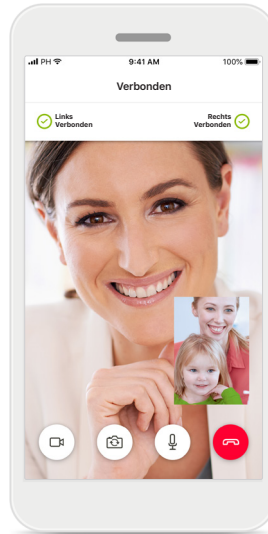


## Verbonden hoortoestellen

Als je audicien verbinding moet maken met je hoortoestellen, kan dit op afstand via je smartphone. Je audicien zal je laten weten wanneer deze verbinding maakt met je hoortoestellen.

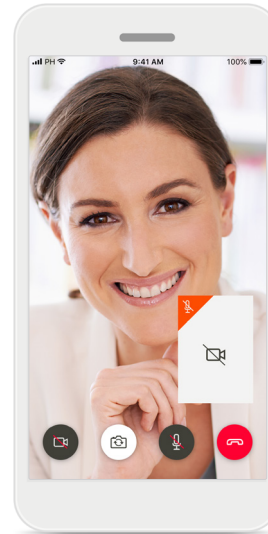

## Geen video

Als je je video wilt verbergen, dan kan je de video met een druk op de knop deactiveren.


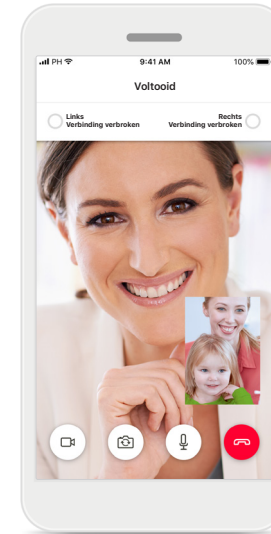


## Nieuwe instellingen opgeslagen


Je hoortoestellen zullen kort worden gedempt tijdens het verbindingsproces en tijdens het opslaan van de hoortoestelinstellingen. Je kunt de status volgen op je scherm.

# Mijn Hoortoestellen


Functies die afhankelijk zijn van de manier waarop de hoortoestellen zijn geprogrammeerd en van welke draadloze accessoires je hebt.

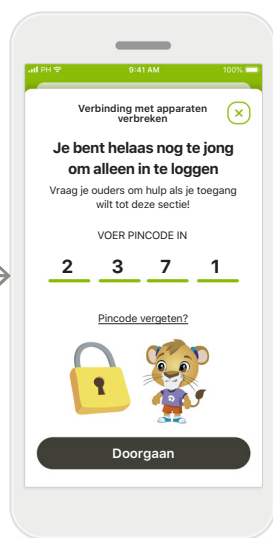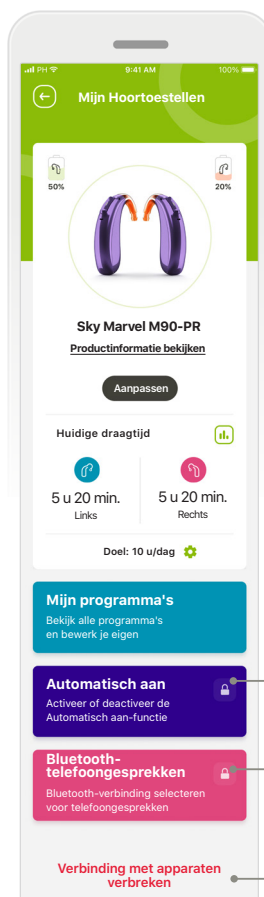

**Kinderslot**  
Kinderslot kan kleine kinderen beschermen tegen het per ongeluk verbreken van de verbinding met hun hoortoestellen.

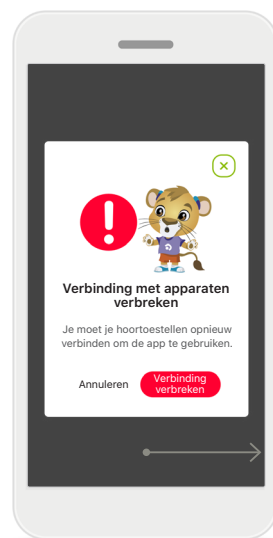

**Verbinding met apparaten verbreken**  
Je kunt je hoortoestellen verwijderen door op **Verbinding verbreken** te drukken. Onthoud dat je je hoortoestellen opnieuw moet koppelen om de app weer te kunnen gebruiken.

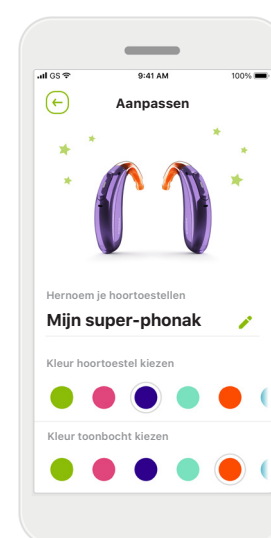

**Aanpassen\***  
De kleur van het hoortoestel, de toonbocht en de naam van het apparaat die worden weergegeven in de app kunnen aangepast worden



**Draagtijd\***  
Draagtijd geeft je een overzicht van hoe lang elk hoortoestel wordt gebruikt op dagelijkse en maandelijkse basis. Hoortoestellen met oplaadbare batterijen geven de meeste informatie met betrekking tot draagtijd.

## Mijn Hoortoestellen

Het scherm Mijn Hoortoestellen biedt waardevolle informatie over de batterijstatus (voor oplaadbare apparaten), je type hoortoestel, installatie van licenties van Roger, Draagtijd, Mijn programma's, Automatisch aan en Bluetooth-telefoongesprekken. Je kunt hier ook het uiterlijk van de hoortoestellen aanpassen.

\*Alleen beschikbaar voor specifieke hoortoestellen



# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de relevante veiligheidsinformatie op de volgende pagina's voordat je de app gaat gebruiken.

## Beoogd gebruik:

De app is bedoeld om de juiste en bestaande hoortoestelfuncties te selecteren, aan te passen en op te slaan. Hij biedt bovendien draadloos en op een gevisualiseerde manier toegang tot statusinformatie en communicatie tussen de Eindgebruiker en de Audicien.

## Beoogde cliëntpopulatie:

De beoogde cliëntpopulatie voor deze oplossing bestaat uit Eindgebruikers (leken) die waarde vinden in gemak als het optimaliseren van hun hoortoestellen aan hun relevante situaties in de praktijk, en de flexibiliteit om niet naar de winkel te hoeven voor aanpassingen, en die willen worden aangetrokken om hun ervaringen te delen.

### • Doelprofiel:

Zie pagina 2 voor meer details

De gebruiksaanwijzing van alle app-versies zijn digitaal voor alle toepasselijke talen beschikbaar op de webpagina. Doe het volgende om gebruiksaanwijzingen te bekijken:

- Klik op <https://www.phonak.com/en-int/support> en kies het land van jouw voorkeur
- Ga naar 'Support' (English) of het equivalent in de respectieve taal
- Ga naar 'User Guides' (English) of het equivalent in de respectieve taal
- Ga naar 'Apps' (English) of het equivalent in de respectieve taal
- Kies 'myPhonak Junior-app'

De huidige versie van de myPhonak Junior-gebruiksaanwijzing kan ook rechtstreeks in de app worden geopend door naar het gedeelte Help te gaan en vervolgens op de kaart 'Gebruiksaanwijzing' te tikken. De gebruiksaanwijzing wordt vervolgens in een extern browservenster geopend.

## Veiligheidsmededeling:

Gegevens van patiënten zijn privégegevens en de beveiliging ervan is belangrijk:

- Zorg ervoor dat de smartphones bijgewerkt zijn met de nieuwste beveiligingsupdates voor het besturingssysteem. Schakel automatisch bijwerken in.
- Zorg dat je geïnstalleerde app-versie up-to-date is.
- Gebruik uitsluitend echte Sonova-apps van officiële stores voor je hoortoestellen.
- Installeer uitsluitend betrouwbare apps van officiële stores
- Gebruik sterke wachtwoorden en houd inloggegevens geheim
- Vergrendel je telefoon met een pincode of biometrische gegevens (zoals vingerafdruk, gezichtsherkenning) en stel in dat de telefoon na een paar minuten inactiviteit automatisch wordt vergrendeld.
- Zorg ervoor dat de geïnstalleerde apps alleen de vereiste machtigingen hebben
- Probeer geen Bluetooth-verbinding te maken met je hoortoestellen op een openbare plek. Op dit soort plekken is het risico op ongewenste interferentie van derden namelijk groter. We raden aan om thuis de Bluetooth-verbinding te maken.
- Een geïllustreerde telefoon of een telefoon die is geroot mag NIET worden gebruikt

Zorg dat gegevens altijd beveiligd zijn. Let op: deze lijst is niet volledig.

- Stuur alleen anonieme gegevens of versleutel ze als je gegevens via onveilige kanalen overdraagt.
- Bescherm back-ups van je smartphonegegevens niet alleen tegen gegevensverlies, maar ook tegen diefstal.
- Verwijder alle gegevens van een smartphone die je niet meer gebruikt of die je weggooit.

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de relevante veiligheidsinformatie op de volgende pagina's voordat je de app gaat gebruiken.

## Software-onderhoud

We houden voortdurend terugkoppeling vanuit de markt in de gaten. Als je problemen ervaart met de nieuwste app-versie, neem je contact op met je lokale vertegenwoordiger van de fabrikant en/of geef je feedback in de Appstore of Google Play Store.

## Indicaties

Let op, de indicaties zijn niet op basis van de app maar van compatibele hoortoestellen. Algemene klinische indicaties voor het gebruik van hoortoestellen en Tinnitus Balance zijn:

- Geheeroverlies
  - Unilateraal of bilateraal
  - Conductief, sensorineuraal of gemengd
  - Matig tot zeer ernstig
- Sprake van chronische tinnitus (uitsluitend voor hoortoestellen met Tinnitus Balance)

## Contra-indicaties

Let op, de indicaties zijn niet op basis van de app maar van compatibele hoortoestellen. Algemene klinische contra-indicaties voor het gebruik van hoortoestel en Tinnitus Balance zijn:

- Geheeroverlies dat niet binnen het aanpasbereik van het hoortoestel valt (m.a.w. versterking, frequentierespons)
- Acute tinnitus
- Vervormd oor (m.a.w. gesloten gehoorgang, geen oorschelp)
- Neuraal geheeroverlies (retro-cochleair pathologieën zoals geen/geen geschikte gehoorzenuw)

De primaire criteria voor doorverwijzing van een cliënt voor advies van een medische of andere specialist en/of behandeling zijn:

- Zichtbare erfelijke of traumatische vervorming van het oor Voorgeschiedenis van actieve drainage van het oor in de afgelopen 90 dagen
- Voorgeschiedenis van plotseling of snel verergerend geheeroverlies in één oor of beide oren binnen de afgelopen 90 dagen
- Acute of chronische duizeligheid
- Audiometrisch air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz, 1.000 Hz en 200 Hz
- Zichtbaar bewijs van significante oorsmeeropbouw of een vreemd voorwerp in de gehoorgang.
- Pijn of vervelend gevoel in het oor.

- Afwijkend uiterlijk van het trommelvlies en de gehoorgang zoals:
  - Ontsteking van de externe gehoorgang
  - Geperforeerd trommelvlies
  - Andere afwijkingen waarvan de audicien denkt dat ze medisch zorgelijk zijn

De audicien kan beslissen dat doorverwijzen niet toepasselijk is of het beste voor de patiënt kiezen indien het volgende van toepassing is:

- Wanneer er voldoende bewijs is dat de aandoening volledig is onderzocht door een medisch specialist en een beschikbare behandeling wordt geleverd.
- De aandoening niet significant is verslechterd of veranderd sinds het vorige onderzoek en/of de vorige behandeling
- Indien de patiënt zijn/haar geïnformeerd en bekwaam besluit heeft doorgegeven om het advies een medische opinie te raadplegen, af te slaan, is het toegestaan toepasselijke hoortoestelsystemen aan te bevelen, onderhevig aan de volgende overwegingen:
  - De aanbeveling heeft geen negatieve gevolgen op de gezondheid of het algemene welzijn van de cliënt
  - Het dossier bevestigt dat alle benodigde overwegingen over wat het beste voor de cliënt is, zijn gemaakt. Indien juridisch vereist heeft de cliënt een disclaimer ondertekend om te bevestigen dat het doorverwijzingsadvies is afgeslagen en dat hij/zij een geïnformeerd besluit heeft genomen.

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de relevante veiligheidsinformatie op de volgende pagina's voordat je de app gaat gebruiken.

## Beperking van gebruik

Het gebruik van de app is beperkt tot de mogelijkheden van de compatibele toestellen.

## Bijwerkingen

Let op, de indicaties zijn niet op basis van de app maar van compatibele hoortoestellen. Fysiologische bijwerkingen van de hoortoestellen, zoals tinnitus, duizeligheid, cerumenophoping, te veel druk, zweten of vocht, blaren, jeuk en/of uitslag, verstopt of vol gevoel en de bijbehorende gevolgen als hoofdpijn en/of oorpijn, kunnen worden verholpen of verlicht door je audicien. Traditionele hoortoestellen kunnen cliënten blootstellen aan hogere niveaus van geluidsblootstelling, wat kan leiden tot drempelverschuivingen in het frequentiebereik door akoestisch trauma.

## Voordeel

De app biedt beoogde gebruikers het voordeel van binnen het bereik toegestane aanpassingen doen bij de eerste aanpassing.

De app biedt beoogde gebruikers een comfortabele manier om te communiceren en verbinding te maken met audiciens om hoortoestellen op afstand af te stellen.

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de app moet worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde instantie in het land waarin je woonachtig bent. Een ernstig incident wordt beschreven als een incident dat direct of indirect leidt, kan hebben geleid of mogelijk kan leiden tot het volgende:

- a. het overlijden van een cliënt, gebruiker of andere persoon
- b. de tijdelijke of permanente drastische achteruitgang van de gezondheid van een cliënt, gebruiker of andere persoon
- c. een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de relevante veiligheidsinformatie op de volgende pagina's voordat je de app gaat gebruiken.



Je draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de persoonlijke smartphone. Ga voorzichtig om met de smartphone en wees aandachtig bij het gebruik van de app.



Door de versterking te verlagen of de ruisonderdrukking te verhogen, kunnen waarschuwings- of veiligheidssignalen minder duidelijk hoorbaar zijn. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.



Voor een afgedrukt exemplaar van de gebruiksaanwijzing kan je contact opnemen met je plaatselijke Sonova-vertegenwoordiger. Binnen 7 dagen wordt er dan een kopie naar je verzonden.



Als de hoortoestellen niet op het apparaat reageren vanwege ongewone veldstoringen, dient je afstand te nemen van het storingsveld.



Als de hoortoestellen niet reageren, controleer dan of ze zijn ingeschakeld en de accu of batterij niet leeg is.



Activeer Bluetooth. Bluetooth moet worden ingeschakeld om je hoortoestellen te verbinden.

## Verklaring van symbolen



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.




Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit Phonak-product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. CE-markering toegepast 2021. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.



Toont de geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan. De EC REP is ook de importeur voor de Europese Unie.



Geeft aan dat het toestel een medisch hulpmiddel is.

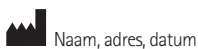

Gecombineerd symbool 'de fabrikant van het medische instrument' en 'productiedatum', zoals gedefinieerd in de EU-verordening (EU) 2017/745.



Een indicatie dat er een elektronische gebruiksaanwijzing beschikbaar is. Instructies kunnen worden verkregen via [phonak.com/junior/userguide](http://phonak.com/junior/userguide).



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Zwitserland



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen · Duitsland

V3.01/2023-07/NLG © 2021-2023 Sonova AG All rights reserved

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op myPhonak Junior 1.2 en latere subversies van de myPhonak Junior 1-app.

Voor eerdere versies van de gebruiksaanwijzing van de app neem je contact op met je lokale vertegenwoordiger of raadpleeg je de website.

