

Phonak Naída™ L ●

Productinformatie

Phonak Naída Lumity is het uitgebreide AHO-portfolio voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies.

Naída L-hoortoestellen beschikken over Phonak SmartSpeech™ Technology en zijn de beste keuze voor cliënten die krachtige oplossingen van ons meest geavanceerde platform Phonak Lumity nodig hebben.



Productbeschrijving



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30


Batterijmaat		675	geïntegreerd en oplaadbaar
Luisterspoel		•	
Compatibiliteit met CROS L			•
Bluetooth®		•	•
Hydrofobe coating		•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inch)	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 inch)
	Gewicht	4,60 g	3,68 g
Oplaaftijden ²	0% tot 100%		3 uur
	0% tot 80%		1,5 uur
	30 min. aanpassing		10 min.

		HE11	HE11 680	HE11 680	SlimTube 4.0
Max. outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	141	134	130	129
Max. gain (dB)	2 cc coupler	84	78	68	69
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100
Stroomverbruik (mA)		3,3	2,8		

Aanpasbereik

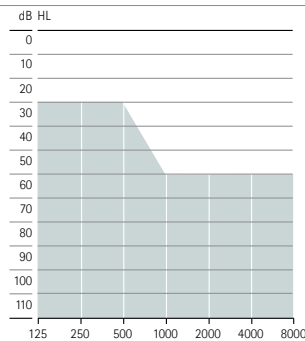

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, elke audiologische configuratie

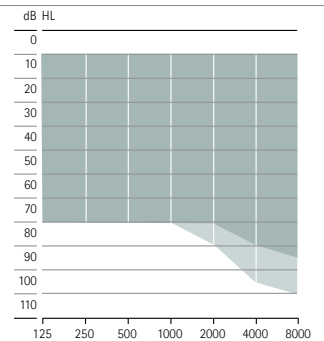

Mild tot matig-ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Kleuren behuizing



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de standaard IEC60529.

² De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij en kan worden beïnvloed door de temperatuur.

Prestatieniveaus

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Spraak in veel lawaai	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Muziek	•	•		
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	4	4
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Telefoon via luisterspoel ± mic ¹	•	•	•	•
Openbare luisterspoel ± mic ¹	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Telefoongesprek + mic	•	•	•	•

SmartSpeech Technology	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streamen pauzeren/ hervatten	•	•		
- Telefoongesprek opnemen/afwijzen	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ en directioneel instelling	•	•	•	•
BroadbandBooster ¹	•	•	•	•
Gezondheidsfuncties ^{2,3}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeuringeling	•	•	•	•
Tinnitus Balance ²	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12

¹ Enkel beschikbaar voor Phonak Naída L-UP

² Enkel beschikbaar voor Phonak Naída L-PR

³ Beschikbaar in combinatie met myPhonak

Aanpassing

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 of hoger	9.0 of hoger
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

Akoestische koppeling

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Geluidsuitgang	Toonbocht	Gedempt (HE11 680), transparant	•	•
	Toonbocht	Ongedempt (HE11), transparant	•	
	SlimTube 4.0	Beschikbaar in uitvoering voor links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)		•
Oorstukje voor SlimTube	Eartip	Cap dome		•
		Open eartip	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•
		Vented dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•
		Power eartip	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•
	SlimTip	Acryl		•
		Silicone		•
Oorstukje voor toonbocht		Oorstukje	•	•

Phonak Naída L Trial

Bij de Phonak Naída L Trial-hoortoestellen kan het gewenste prestatieniveau snel worden ingesteld om aan uw behoeften te voldoen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt. De Naída L Trial-hoortoestellen bevatten ook een vooraf geïnstalleerde Roger ontvanger voor eenvoudige demonstratie van elke Roger microfoon.

Oplaadopties Phonak Naída L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR beschikt over alle functies van Lumity waar u dol op bent en is bovendien oplaadbaar. Cliënten kunnen de hele dag genieten van hun gehoor, zelfs als ze streamen*.

* De verwachte batterijduur is 16 uur bij 4 uur streamen via BT classic en 4 uur streamen via de TV Connector.



Phonak Naída L Bluetooth®-uitvoeringen

Rechtstreekse telefoongesprekken/
audiostreaming

Draadloze Bluetooth 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons

Draadloze Communicatie Portfolio

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Draadloze accessoires		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger microfoons	•	•
Apps		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/naida-lumity

Ga voor meer informatie over Roger microfoons naar www.phonak.com/roger

Ga voor meer informatie over myPhonak en myPhonak Junior naar www.phonak.com/apps

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. En samen met onze audiiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-06998-07/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved