

Phonak Lyric™ 4

Gebruiksaanwijzing



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende hoortoestelmodel:

Niet-draadloos model
Lyric4

CE-markering toegepast
2020



Inhoud

Uw hoortoestel

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Inleiding over Lyric | 5 |
| 2. Lyric aanpassen en verwijderen | 9 |
| 3. Follow-up en vervanging | 18 |

Nadere informatie

- | | |
|--|----|
| 4. Veelgestelde vragen | 20 |
| 5. Service en garantievoorwaarden | 27 |
| 6. Conformiteitsinformatie | 28 |
| 7. Informatie en verklaring van symbolen | 29 |
| 8. Privacystatement | 35 |
| 9. Belangrijke veiligheidsinformatie | 37 |

Bedankt dat u hebt gekozen voor Lyric, het eerste hoortoestel voor langdurig dragen dat 100% onzichtbaar is. Lyric vraagt veel minder interactie en behandeling dan conventionele hoortoestellen. We zijn er zeker van dat Lyric uw dagelijks leven waardevoller zal maken.


Uw hoortoestel is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u Lyric hoortoestellen veilig zult gebruiken en kunt genieten van alle mogelijkheden die ze bieden.

Indien u vragen hebt, neem dan contact op met uw audicien.

Phonak – life is on
www.phonak.com

1. Inleiding over Lyric

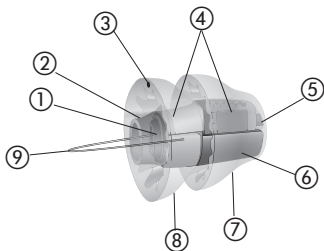

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ① Inbrenghendel | ⑥ Batterij |
| ② Microfoonbescherming | ⑦ Mediaal kapje |
| ③ Aanduiding 'deze kant naar boven' | ⑧ Lateraal kapje |
| ④ Microfoon en signaalprocessor | ⑨ Extractielus |
| ⑤ Speaker | |

1.1 Wat maakt Lyric zo speciaal?

Lyric wordt door een Lyric audicien op comfortabele wijze in de gehoorgang geplaatst en kan 24 uur per dag, zeven dagen per week en maandenlang worden gedragen. En dit zonder operatie of verdoving. In tegenstelling tot veel andere hoortoestellen, wordt Lyric geheel in de gehoorgang geplaatst, en gebruikt deze de anatomie van het oor om een natuurlijke geluidskwaliteit te bieden.


1.2 Wat u kunt verwachten van uw nieuwe Lyric

Wennen aan uw nieuwe hoortoestel

Net als alle hoortoestellen heeft ook Lyric een gewenningsperiode nodig. De meeste mensen zijn binnen enkele dagen aan Lyric gewend. Anderen hebben twee weken nodig om aan Lyric te wennen.

Het kan zijn dat u wat ongemak ervaart tijdens het slapen. Probeer te slapen met zo weinig mogelijk directe druk op uw oren. Op uw rug slapen is ideaal.

Probeer bij jeuk niet te krabben of aan uw oor te trekken.
In plaats daarvan kunt u zachtjes de zijkant van uw
gezicht, bij uw oor masseren.

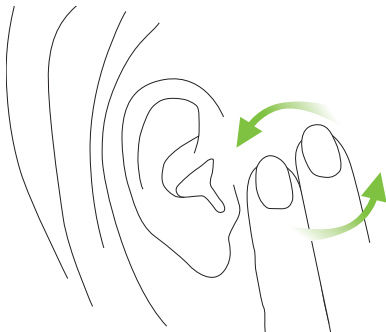

Wennen aan nieuwe geluiden en geluidskwaliteit

Gewoonlijk ontwikkelt gehoorverlies zich langzaam over jaren. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat geluiden wat luid of vreemd klinken wanneer u voor het eerst een Lyric draagt. De stemmen van vrienden en familie - en misschien ook uw eigen stem - klinken soms even anders dan u gewend was.


In het begin merkt u misschien ook normale omgevingsgeluiden op, zoals het geluid van de koelkast, straatlawaaï van de banden van de auto en hakken die op de vloer tikken tijdens het lopen. Deze geluiden zullen u in korte tijd minder opvallen, omdat ze deel gaan uitmaken van uw alledaagse wereld van geluiden.

2. Lyric aanpassen en verwijderen

Het volgende hoofdstuk bevat instructies voor het gebruik van uw Lyric. Lees dit zorgvuldig door.

2.1 De SoundLync gebruiken


De SoundLync bevat een kleine zwarte magneet die als een afstandsbediening werkt waarmee u de instellingen van uw Lyric kunt wijzigen (zie instructies in hoofdstuk 2.2 – 2.5).

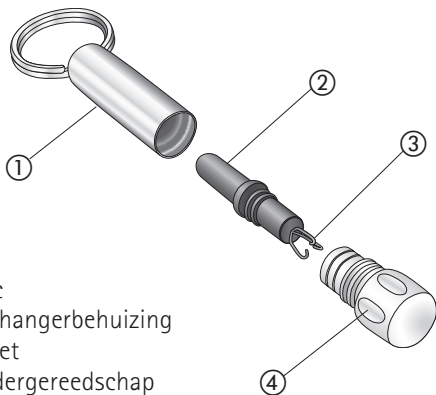

SoundLync

- ① Sleutelhangerbehuizing
- ② Magneet
- ③ Verwijdergereedschap
- ④ Kap

- Wanneer u de SoundLync wilt gaan gebruiken, schroeft u de magneet uit de sleutelhangerbehuizing en houdt u deze in de gehoorgang zonder het hoortoestel aan te raken.

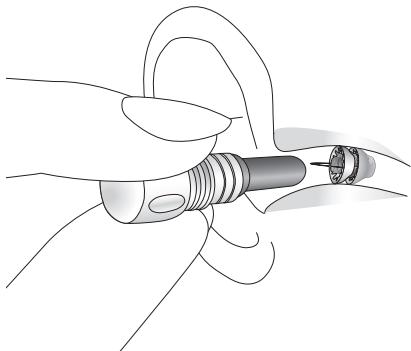

- Aan de ene kant van de magneet is een klein hulpmiddel bevestigd waarmee u Lyric in dringende gevallen veilig uit uw oor kunt halen.

Opmerking: Onthoud dat Lyric één seconde gedempt wordt nadat een pieptoon klinkt. Hij wordt ook gedempt tijdens de reeks pieptonen wanneer u het volume wijzigt.

2.2 Lyric in de SLAAPSTAND zetten

- Houd de magneet, terwijl het hoortoestel is ingeschakeld, in de gehoorgang zonder het hoortoestel aan te raken.
- U hoort **2 pieptonen**.
- Haal de magneet uit uw oor.

Opmerking: De Slaapstand is een instelling voor akoestische transparantie. In deze configuratie compenseert Lyric de demping die door het hoortoestel zelf wordt veroorzaakt. Het klinkt dan alsof u geen hoortoestel draagt.

2.3. Lyric uitzetten

- Houd de magneet, terwijl het hoortoestel is ingeschakeld, in de gehoorgang zonder het hoortoestel aan te raken.
- Wacht tot u **2 pieptonen hoort**.
- **Houd de magneet** zolang vast tot u nog **4 pieptonen hoort**. (Er is een korte pauze tussen de eerste 2 en de laatste 4 pieptonen).

- Haal de magneet uit uw oor.

Opmerking: Als Lyric is uitgeschakeld, werkt deze als gehoorbeschermer.

2.4. Lyric aanzetten

Als u Lyric wilt aanzetten vanuit de SLAAPSTAND of als deze is uitgeschakeld, houdt u de magneet in de gehoorgang zonder het hoortoestel aan te raken.

- Wacht tot u **1 pieptoon hoort**.
- Haal de magneet uit uw oor.

2.5 Het volume aanpassen

- Zet het hoortoestel in de SLAAPSTAND – **2 pieptonen**.
Haal de magneet uit de gehoorgang.
- Wacht tot de demping van Lyric is ingegaan.
- Plaats de magneet weer terug in de gehoorgang en zet het hoortoestel aan – **1 pieptoon. Houd de magneet in de gehoorgang.**

- Haal de magneet niet uit uw gehoorgang. Lyric blijft het volume met één stap verhogen vanaf waarop het eerder was ingesteld. Elke stap wordt aangeduid met een pieptoon. Zodra u het maximale niveau bereikt, geeft Lyric een dubbele pieptoon af. Als u de magneet op zijn plaats houdt, blijft Lyric het volume verlagen tot de laagste volume-instelling is bereikt en vervolgens verhogen van het laagste naar het hoogste volume.
- **Haal de magneet** uit uw oor wanneer het gewenste volume is bereikt.

Opmerking: Wanneer u Lyric aanzet of het hoortoestel uit de SLAAPSTAND haalt, wordt het volume automatisch ingesteld op het laatstgekozen volume.

2.6 Snelle referentieids van SoundLync


AAN	1 pieptoon
SLAAPSTAND	2 pieptonen
UIT	2 pieptonen (vasthouden) 4 pieptonen
Volume	2 pieptonen (magneet verwijderen) 1 pieptoon (vasthouden en wachten) Serie pieptonen Dubbele pieptoon (hoogste volume)

2.7 Instructies om Lyric zelf te verwijderen


Lyric verwijderen

U hoeft Lyric niet te verwijderen tussen routinebezoeken. Als het hoortoestel om welke reden dan ook zonder hulp van een Lyric audicien moet worden verwijderd, kunt u het hoortoestel zelf verwijderen, of kan iemand anders u daarbij helpen. Wanneer u Lyric uit uw oor hebt gehaald, kunt u deze niet meer terugplaatsen.


Stap 1: Als Lyric nog werkt, zet u het toestel uit met de magneet (zie de instructies in hoofdstuk 2.3).

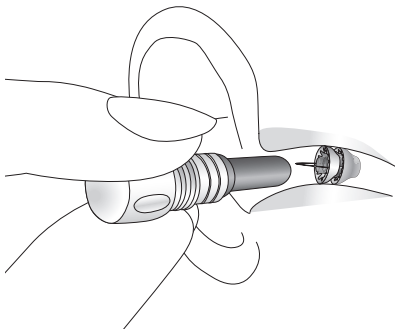

Stap 2: Draai het dopje op de magneet los om het verwijdergereedschap weer te geven. Houd het verwijdergereedschap stevig beet, net als een pen, en laat uw hand tegen uw wang rusten. Plaats het verwijdergereedschap langzaam en voorzichtig in de gehoorgang tot het het hoortoestel raakt.

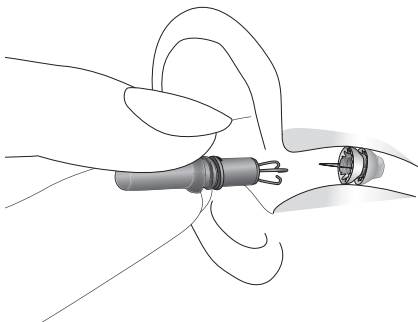

Stap 3: Voer voorzichtig een draaiende beweging uit om de extractielus aan te haken. U moet een lichte weerstand voelen wanneer u eraan trekt. Verwijder het hoortoestel rustig met een geleidelijke draaiende beweging.

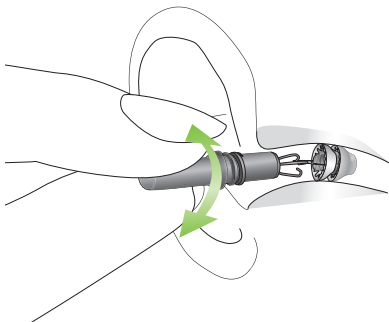

Stap 4: Leg het verwijderde hoortoestel in het doosje. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Lyric audicien om uw gehoorgang te laten nakijken. Lever het gebruikte hoortoestel in bij uw audicien.



Opmerking: Als het verwijdergereedschap niet beschikbaar is, kunt u Lyric verwijderen met een stomp pincet. Gebruik het pincet om de handgreep op het hoortoestel beet te pakken en het hoortoestel voorzichtig met een draaiende beweging te verwijderen. Laat u hierbij helpen door een gezinslid of vriend. Wees heel voorzichtig als u het hoortoestel niet zelf verwijdert, en vraag de persoon die u helpt om Lyric langzaam en met een draaiende beweging te verwijderen.

Waarschuwing: Als het hoortoestel of een gedeelte van het hoortoestel niet verwijderd kan worden, neem dan contact op met uw audicien voor hulp.

3. Follow-up en vervanging

Wanneer Lyric in uw oor of oren is geplaatst, zal de Lyric audicien mogelijk een follow-up afspraak plannen om eventueel de instellingen te wijzigen of vragen te beantwoorden.

Voor het vervangen van hoortoestellen zal uw Lyric audicien u mogelijk vragen om het kantoor te bellen voor een afspraak als het hoortoestel niet meer werkt, of wordt er een afspraak ingepland om Lyric na een vooraf-bepaalde periode opnieuw aan te passen. Wanneer het hoortoestel niet meer werkt, moet het binnen 24 uur worden verwijderd.

Als het niet binnen 24 uur door uw Lyric audicien kan worden verwijderd, kunt u het hoortoestel zelf verwijderen of kunt u het door iemand anders laten verwijderen. Zie hoofdstuk 2.7 voor instructies voor het verwijderen van Lyric.

Zorgdragen voor Lyric

Lyric kan 24 uur per dag, zeven dagen per week en maanden achter elkaar worden gedragen, zelfs tijdens het douchen. Lyric is waterbestendig, niet waterdicht, en mag niet volledig onder water worden gedompeld. Houd uw hoofd niet onder water zonder de speciale oordop die Lyric beschermt tegen blootstelling aan water.

U kunt Lyric beschermen door blootstelling aan haarspray, conditioners, luchtjes, haarverf of andere bijtende vloeistoffen te beperken. U beschermt de SoundLync door deze niet te laten vallen op een hard oppervlak, bloot te stellen aan hitte of te onderwerpen aan andere activiteiten die deze mogelijk demagnetiseren.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw Lyric audicien.

De levensduur van uw batterij maximaliseren

Bij normaal gebruik gaat de batterij maandenlang mee. U kunt de draagtijd verlengen door Lyric in de SLAAPSTAND te zetten wanneer u gaat slapen.

4. Veelgestelde vragen

Kan ik headsets of oordopjes gebruiken met Lyric?

Er kan gebruik worden gemaakt van een externe hoofdtelefoon en externe gehoorbescherming. Gebruik geen in het oor geplaatste headsets, oordopjes, of oorpluggen; deze kunnen het hoortoestel losmaken. Vraag uw audicien naar de mogelijkheden. Standaardoor telefoons voor de iPod kunnen wel worden gebruikt.

Zijn MRI-scans, röntgenfoto's of CT-scans schadelijk voor Lyric of mijn oor?

Laat Lyric verwijderen voordat er een MRI-scan wordt gemaakt, omdat het hoortoestel metalen onderdelen bevat.

In tegenstelling tot een MRI-scan zijn röntgenfoto's of een CT-scan niet schadelijk en zullen ze het hoortoestel niet verplaatsen, omdat hierbij geen magneet wordt gebruikt. Informeer de arts en/of technicus echter wel over het hoortoestel. Als er een röntgenfoto of een CT-scan van het hoofd moet worden gemaakt, moet het hoortoestel mogelijk worden verwijderd. Vertel de arts dat u een Lyric draagt als u welke operatie dan ook moet ondergaan.

Mag ik vliegreizen maken met Lyric?

Ja. Het is veilig om te vliegen terwijl u Lyric draagt (onder voorbehoud dat de vliegtuigcabine onder druk staat).

Mag ik zwemmen met Lyric?

Lyric is waterbestendig, niet waterdicht, en mag niet volledig onder water worden gedompeld. Houd uw hoofd niet onder water zonder de speciale oordop die Lyric beschermt tegen blootstelling aan water. Lyric mag tijdens het douchen worden ingehouden.

Wat gebeurt er als ik onder water duik of ga skydiven terwijl ik Lyric draag?

Gebruik Lyric niet tijdens het duiken onder water of skydiven. Drukveranderingen bij het duiken of parachutespringen kunnen ongemak en/of feedback veroorzaken als Lyric in de gehoorgang wordt verplaatst. Als u deze activiteiten per ongeluk doet terwijl u een Lyric draagt, laat u uw gehoorgang nakijken door een Lyric audicien.

Moet ik een afspraak maken met mijn Lyric audicien als de batterij in slechts één oor leeg is?


Ja. Als het hoortoestel in een van beide oren om welke reden dan ook niet meer werkt, moet het toestel binnen 24 uur worden verwijderd en moet uw gehoorgang worden nagekeken door een Lyric audicien. Als u binnen 24 uur geen afspraak kunt krijgen met een Lyric audicien, moet u het hoortoestel zelf verwijderen met de SoundLync.

Wat moet ik doen als mijn oor pijn doet?

U kunt in eerste instantie wat ongemak of druk ervaren wanneer u Lyric voor het eerst draagt. In de meeste gevallen is dat een kwestie van uren of dagen, en het voelt eerder aan als ongemak dan als pijn. Raadpleeg uw Lyric audicien als u na het eerste ongemak pijn blijft voelen. Als u uw Lyric audicien niet kunt bereiken, blijf Lyric dan niet dragen, maar verwijder het hoortoestel zelf of laat dit doen door iemand anders. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Lyric audicien.

Wat moet ik doen als ik jeuk heb in mijn oor?

Verplaats Lyric niet. Als uw oor jeukt, kunt u zachtjes de zijkant van uw gezicht, vóór uw oor, masseren. Als uw oor blijft jeuken of als er huidirritatie ontstaat, gaat u terug naar uw Lyric audicien voor controle.

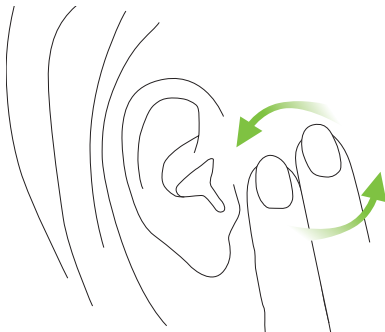

Hoe verwijder ik oorsmeer uit mijn oren als ik Lyric draag?

Probeer geen oorsmeer uit uw gehoorgang te verwijderen terwijl u Lyric draagt. Gebruik geen wattenstaafjes. Laat oorsmeer uit uw oor verwijderen door een kno-arts of Lyric audicien.

Activeert Lyric een metaaldetector?

Nee. De metalen componenten van Lyric zijn te klein om een metaaldetector te activeren.

Hoe lang gaat een Lyric hoortoestel mee?

Lyric is ontworpen om te worden gedragen tot deze niet meer werkt (dus wanneer er geen versterking meer is) of voor maximaal 120 dagen. Diverse factoren beïnvloeden de levensduur van het hoortoestel, waaronder maar niet beperkt tot de tijd dat het toestel in de SLAAPSTAND heeft gestaan of is uitgeschakeld, lawaaierige omgevingen, blootstelling aan water en de aanmaak van oorsmeer.

Moet ik telkens wanneer ik een nieuw hoortoestel wil, teruggaan naar mijn Lyric audicien?

De Lyric audicien moet elk Lyric hoortoestel opnieuw plaatsen en programmeren nadat uw oren zijn gecontroleerd. Het vervangen van hoortoestellen duurt ongeveer 10 minuten.

Is het slapen niet ongemakkelijk?

Het kan zijn dat u wat ongemak ervaart tijdens het slapen. Probeer te slapen met zo weinig mogelijk directe druk op uw oren. Op uw rug slapen is ideaal.

Kan ik Lyric met de telefoon gebruiken?

Ja, u kunt de telefoon gemakkelijk met Lyric gebruiken.

5. Service en garantievoorwaarden

Sonova AG geeft een uitgebreide garantie voor Lyric, vanaf de dag van aankoop. Gelieve bij uw audicien te informeren over de garantievoorwaarden die geldig zijn in het land van aankoop. De garantie dekt de vervanging van het hoortoestel in geval van defecten in het Lyric fabricageproces of de gebruikte materialen.

De garantieclaims worden niet geaccepteerd indien het hoortoestel normale slijtage, verkeerde hantering of onderhoud, blootstelling aan chemische producten, onderdompeling in water of overmatige belasting vertoont. De garantie heeft geen betrekking op services die zijn uitgevoerd door een audicien op zijn of haar werkplek.

6. Conformiteitsinformatie

Europa:

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Sonova AG dat dit product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u via de fabrikant verkrijgen:

www.phonak.com/us/en/certificates

Emissienormen: EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, EN 55011:2009+A1, CISPR11:2009/AMD1:2010, CISPR22:1997, CISPR32:2012, ISO 7637-2:2011, CISPR25:2016, EN 55025:2017

Immunitie-normen: EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, EN 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-2:2008, EN 61000-4-3:2006+A1+A2, IEC 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, IEC 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2010, IEC 61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004, IEC 61000-4-11:2004, IEC 60601-1(§ 4.10.2):2005, ISO 7637-2:2011

7. Informatie en verklaring van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit Phonak-product, inclusief accessoires, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die zijn geraadpleegd voor de bovengenoemde richtlijn.



Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikers-instructies voldoen aan de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type B van EN 60601-1. De oppervlakte van het hoortoestel is gespecificeerd als een toepassingsgedeelte van het type B.



Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in de EU richtlijn 93/42/EEG.



Geeft de geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten met betrekking tot batterijen in deze gebruiksaanwijzingen.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.



Droog houden tijdens transport.



Geeft aan dat het toestel een medisch hulpmiddel is.



Het symbool van het doorgekruiste getal twee geeft aan dat dit hoortoestel slechts eenmaal kan worden gebruikt.
Niet hergebruiken. Breng uw gebruikte Lyric terug naar een Lyric audicien.



Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Temperatuur tijdens transport: 0 tot +50 °Celsius (+32 tot +122 °Fahrenheit).

Temperatuur tijdens opslag: +10 tot +40 °Celsius (+50 tot +104 °Fahrenheit).

Bedieningsomstandigheden: +10 tot +40 °C (+50 tot +104 °Fahrenheit).



Vochtigheid bij transport: tot 90% (niet-condenserend). Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%.

Bedieningsomstandigheden: : 5-85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend (maximaal 95% non-condenserend gedurende < 2 uur)



Atmosferische druk:
500 hPa tot 1100 hPa

Bedieningsomstandigheden:
700 hPa tot 1060 hPa



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit hoortoestel niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Gelieve een oud of ongebruikt hoortoestel in te leveren bij een stortplaats voor elektronisch afval, of het hoortoestel te overhandigen aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid.



Deze symbolen geven de twee pakjes aan die samen met het Lyric hoortoestel worden verpakt in de verpakking. Deze pakjes garanderen een optimale omgeving voor de Lyric batterij tijdens transport en opslag.



Werp deze twee pakjes na het openen van de verpakking onmiddellijk weg.



Open de twee pakjes niet.



Slik de inhoud van de twee pakjes niet in.



Geeft de datum aan waarna het medische hulpmiddel niet meer mag worden gebruikt.



Geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is geproduceerd.

8. Privacystatement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie regelt hoe bedrijven met uw persoonsgegevens moeten omgaan. Sonova, overkoepelende organisatie van Phonak, respecteert uw privacy en zet zich volledig in om uw persoonsgegevens te beschermen. We willen u graag inlichten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe de wetgeving u beschermt.

De gegevens die we ontvangen van uw audicien:

Hieronder vindt u de gegevens die zijn verzameld en verwerkt door Sonova:

- Identiteitsgegevens
(voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht)
- Lyric-ID
- Serienummers van producten
- Contractinformatie
(duur en betalingswijze)
- Aanpassingsgegevens van Lyric

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wetgeving ons dat toestaat. De gegevens worden over het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Garantieclaims
- Klachtenafhandeling
- Verbetering van het product
- Marketinggerichte en statistische doeleinden
- Productterugroeping in het onwaarschijnlijke geval van een productdefect

Sonova en uw audicien zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of als u het niet eens bent met deze verklaring, neem contact met ons op via privacy@sonova.com.

9. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt

Beoogd gebruik:

Het doel van hoortoestellen is geluiden te versterken en naar het oor te zenden, en hiermee slechthorendheid te compenseren.

Doelgroep:

De doelgroep is voornamelijk volwassenen. Dit product kan ook worden gebruikt door tieners, indien de anatomie van hun gehoorgang geschikt is voor Lyric. We raden aan om deze beslissing overeen te laten komen tussen de Lyric audicien, de gebruiker, de verzorger van de gebruiker en een Audiologisch Centrum.

Indicaties:

Aanwezigheid van gehoorverlies.

Contra-indicaties:

Tekenen van actieve of chronische pathologie van het midden- of buitenoor, chronische drainage of afscheiding, tekenen van chronische ontsteking.

Voorafgaand aan het gebruik van Lyric dient u door uw audicien en/of uw arts (huisarts of kno-arts) te laten bevestigen dat u een geschikte kandidaat bent voor Lyric en dat er geen contra-indicaties bestaan.

Een hoortoestel kan slechthorendheid niet genezen, en kan gehoorverlies door organische oorzaak niet voorkomen of verbeteren. Ondanks onregelmatig gebruik van het hoortoestel kan een gebruiker nog steeds alle voordelen benutten.

Het gebruik van een hoortoestel is slechts een onderdeel van hoorrevalidatie, en kan worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen.

Het hoortoestel is geschikt voor thuiszorg en vanwege de draagbaarheid ervan kan het gebeuren dat het wordt gebruikt in professionele zorgfaciliteiten, zoals huisartspraktijken, tandartspraktijken etc.

9.1 Waarschuwingen

-  De hoortoestellen (geprogrammeerd voor het specifieke gehoorverlies) mogen alleen worden gebruikt door die persoon voor wie ze bedoeld zijn. Andere mensen kunnen ze beter niet gebruiken, omdat die het gehoor kan beschadigen.
-  Indien u pijn voelt in of achter uw oor, indien het oor ontstoken raakt, of als er huidirritatie of meer opeenhoping van oorsmeer plaatsvindt, dient u uw audicien of arts te raadplegen. Neem in de volgende gevallen contact op met uw Lyric audicien:
- Als het hoortoestel niet goed werkt.
 - Als u na het eerste ongemak pijn blijft voelen.
 - Als u een plotselinge of beduidende wijziging in het gehoor ervaart.
-  Wijzigingen aan het hoortoestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Sonova AG, zijn niet toegestaan. Deze wijzigingen kunnen uw gehoor of het hoortoestel beschadigen.

-  De SoundLync bevat een magneet. Als u een medisch hulpmiddel gebruikt zoals een pacemaker of ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator), lees dan de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor de mogelijke invloed van magnetische velden op uw medische hulpmiddel. Plaats de SoundLync niet in uw borstzakje. Houd een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) aan tussen de SoundLync en uw medische hulpmiddel.
-  Dit hoortoestel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Indien dit apparaat wordt gebruikt door kinderen en personen met een verstandelijke beperking, dienen zij te allen tijde onder toezicht te worden gehouden om hun veiligheid te garanderen. Het hoortoestel is een klein apparaat en bevat kleine onderdelen. Houd kinderen en personen met een verstandelijke beperking altijd onder toezicht wanneer dit hoortoestel wordt gebruikt. Indien het toestel wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts of ziekenhuis, aangezien het hoortoestel of onderdelen hiervan verstikkingsgevaar veroorzaken!

- ⚠ Gebruik het hoortoestel niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden gebruikt).
- ⚠ Als Lyric om welke reden dan ook niet meer werkt, moet het toestel binnen 24 uur worden verwijderd en moet uw gehoorgang worden nagekeken door een audicien met kennis van Lyric.
- ⚠ Steek geen wattenstaafjes of andere objecten in uw gehoorgang. U kunt hiermee uw hoortoestel en/of oor beschadigen.
- ⚠ Ga niet skydiven, scubaduiken of duiken. Duiken terwijl u Lyric draagt, kan oorletsel of schade aan het hoortoestel veroorzaken.
- ⚠ Wanneer u de SoundLync in de gehoorgang houdt, dient u te zorgen dat u deze langzaam en voorzichtig inbrengt. Voorkom verplaatsing van het hoortoestel, aangezien dit uw oor kan verwonden en/of schade kan toebrengen aan het hoortoestel.

 Patiënten bij wie een magnetische, extern programmeerbare CSF-shuntklep is geïmplantéerd, kunnen een onbedoelde wijziging in hun klepinstelling ervaren wanneer zij worden blootgesteld aan sterke magnetische velden. De speaker (luidspreker) van hoortoestellen, de Lyric SoundLync, de Lyric programmeerpen en de MiniControl bevatten statische magneten. Houd een afstand van minimaal 5 cm (2 inch) aan tussen de magneten en de locatie van de geïmplantéerde shuntklep.

 **WAARSCHUWING:** Dit apparaat maakt gebruik van een lithium knoopcelbatterij. Deze batterijen zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig of fataal letsel binnen 2 uur of minder na het inslikken of het plaatsen in het lichaam/een lichaamsdeel, ongeacht of de batterij gebruikt of nieuw is! Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een cognitieve beperking of huisdieren. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u vermoedt dat er een batterij is ingeslikt of in het lichaam/een lichaamsdeel is geplaatst. Niet afwachten!

9.2 Informatie over de veiligheid van het product

Lyric dragen:

- ① Lyric is waterbestendig, niet waterdicht, en mag niet volledig onder water worden gedompeld. Houd uw hoofd niet onder water zonder de speciale oordop die Lyric beschermt tegen blootstelling aan water.
- ① Wanneer Lyric is verwijderd, kan deze niet meer worden teruggeplaatst.
- ① Medische beeldvormingsprocedures, zoals MRI-scans, kunnen een correcte werking van het hoortoestel negatief beïnvloeden. Laat Lyric verwijderen voordat een MRI-scan wordt ondergaan, omdat Lyric metalen onderdelen bevat. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over CT-scans of het maken van röntgenfoto's.

- ① Wees voorzichtig wanneer u de SLAAPSTAND gebruikt of het hoortoestel uitschakelt, aangezien u bij noodgevallen mogelijk geen alarm hoort afgaan.
- ① Steek geen wattenstaafjes of andere objecten in uw gehoorgang. U kunt hiermee uw hoortoestel en/of oor beschadigen.
- ① Het hoortoestel kan verstikkingsgevaar opleveren of per ongeluk worden ingeslikt. Houd het daarom buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Neem direct contact op met uw huisarts als een hoortoestel wordt ingeslikt!

SoundLync gebruiken:

- ① Het oppervlak van de SoundLync is vrij van nikkel. De sleutelhanger bevat wel nikkel. De sleutelhanger mag om die reden niet in contact komen met de huid als u allergisch bent voor nikkel. We raden in dergelijke gevallen aan de sleutelhanger eraf te halen alvorens de SoundLync in gebruik te nemen.

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen

Uw audicien:



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Duitsland



Fabrikant:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Zwitserland

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459



029-0836-07/V2.00/2022-12/NLG/PM © 2021-2022 Sonova AG All rights reserved

7 613389 354980