

Phonak RemoteMic

Bruksanvisning



PHONAK
life is on

Innhold

1. Velkommen	5
2. Bli kjent med RemoteMic	6
2.1 Instrumentbeskrivelse	7
2.2 Merknad om kompatibilitet	8
2.3 Merknad om overføringsstabilitet	9
3. Komme i gang	10
3.1 Lade batteriet	10
3.2 Slå på	12
3.3 Parkoble RemoteMic	13
3.4 Forstå indikatorlampene	16
4. Daglig bruk	18
4.1 Klargjøre streameren	18
4.2 Koble til enheter	19
4.3 Angi volum	21
4.4 Slik brukes enheten	22
4.5 Pause og gjenoppta	24
4.6 Slå av	25

5. Bruk i spesielle tilfeller	26
5.1 RemoteMic og telefonsamtaler	26
5.2 RemoteMic og TV-titting	27
5.3 Overføringsavstand for RemoteMic	28
5.4 Bruke sikringstråden	29
5.6 Slette alle Bluetooth-parkoblinger	30
6. Feilsøking	31
7. Service og garanti	36
8. Samsvarsinformasjon	38
9. Informasjon om og forklaring av symboler	42
10. Viktig sikkerhetsinformasjon	47



For detaljert informasjon om ComPilot, ComPilot II eller ComPilot Air II, f.eks. forklaring av funksjoner, indikatorlamper osv., se korresponderende bruksanvisninger.

Jeg skal bruke RemoteMic sammen med følgende streamer:



☐ ComPilot



☐ ComPilot II



☐ ComPilot Air II

1. Velkommen

RemoteMic er et kvalitetsprodukt utviklet av Phonak, et av verdens ledende selskaper innen hørselsteknologi.

Les denne bruksanvisningen nøye for å kunne dra nytte av alle mulighetene RemoteMic kan tilby.

Hvis du har spørsmål, kan du snakke med din audiograf eller gå inn på www.phonak.com/remotemic

Phonak – life is on

www.phonak.com




Brukt CE-merke: 2012

2. Bli kjent med RemoteMic

RemoteMic sender stemmen til personen som snakker, trådløst til høreapparatene gjennom Phonak-streameren.

Systemet består av tre hovedelementer:


RemoteMic, Phonak-høreapparatene og en streamer, f.eks. Phonak ComPilot Air II.

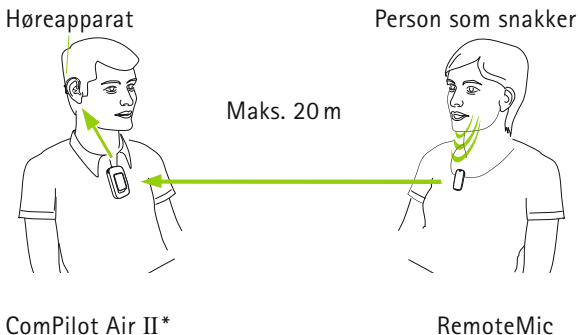

*Phonak-streameren ComPilot eller ComPilot II er også kompatibel

2.1 Instrumentbeskrivelse


- 1 Volum opp (+)
- 2 Volum ned (-)
- 3 Strømbryter (I/O)
- 4 Ladeinngang (mini-USB)
- 5 Mikrofonåpning
- 6 Indikatorlampe
- 7 Festehull for sikringstråden
- 8 Festeklype

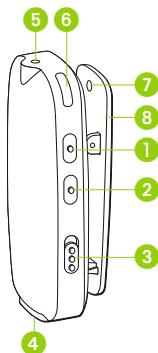

Tilbehør

(innholdet kan variere fra land til land)

- Dobbel mini-USB-fordeler (1 inn/2 ut)
- Avtakbar sikringstråden
- Beskyttende veske

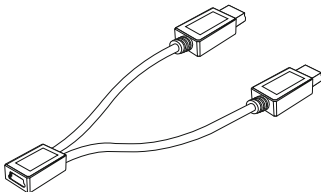

2. Bli kjent med RemoteMic

Annet tilbehør

- Strømforsyning til Phonak mini-USB (lader)
- 12 V billaderadapter

2.2 Merknad om kompatibilitet

I tillegg til de trådløse Phonak-høreapparatene er det nødvendig med en kompatibel streamer.



Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Phonak er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.

2.3 Merknad om overføringsstabilitet

Bluetooth-forbindelsens rekkevidde mellom RemoteMic og en streamer kan være opptil 20 meter.

Rekkevidden kan bli redusert hvis signalet blir hindret av fysiske hindringer som vegger eller menneskekropper.

Det beste resultatet oppnås når RemoteMic er innen synsvidde fra streameren.

3. Komme i gang


3.1 Lade batteriet

RemoteMic har et innebygd oppladbart batteri som ikke kan tas ut.

i Når RemoteMic lades for første gang, må den lades i minst tre timer, også dersom indikatorlampen ikke lyser eller lyser grønt før det har gått tre timer.

Lade batteriet:

- Ta Phonak-strømledningen fra streameren.
- Sett strømledningen inn i en stikkontakt.
- Sett mini-USB-pluggen inn i mini-USB-kontakten på RemoteMic.
- Normal ladetid er 2 timer.
- Ladingen er fullført når indikatorlampen lyser kontinuerlig grønt.

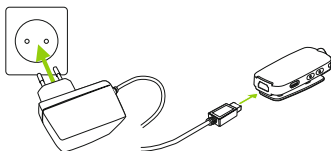


Bruke én strømledning for to enheter

Plasser den doble mini-USB-fordeleren mellom strømledningen og enhetene som vist nedenfor.


Med streamer:

Begge enhetene kan lades samtidig.

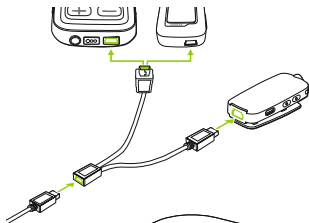

Med TVLink II:

RemoteMic kan lades mens TVLink II er i bruk.

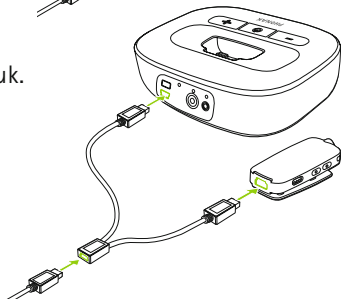


❗ Det er trygt å la RemoteMic være koblet til laderen natten over.

3. Komme i gang

3.2 Slå på

Skyv strømbryteren for å slå RemoteMic på eller av.

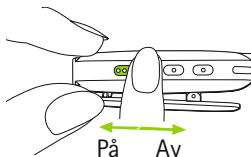

Hvilemodus

Hvis det ikke oppdages en streamer i løpet av 30 minutter, går RemoteMic inn i hvilemodus, selv om den er slått på.

Slå RemoteMic av og på igjen for å gå ut av hvilemodus.

3.3 Parkoble RemoteMic


Før RemoteMic brukes med en streamer for første gang, må enhetene parkobles.

❗ Hvis du fikk RemoteMic og streameren som et sett, er de allerede parkoblet. Gå til kapittel 3.4

Sette streameren i parkoblingsmodus


Med ComPilot Air II:

- Slå på og trykk på volum opp -knappen samtidig.

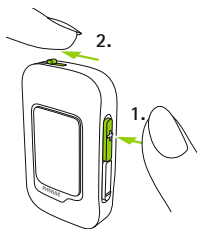

Med ComPilot II:

- Slå på først. Trykk på koble til-knappen  og volum opp-knappen  samtidig i 2 sekunder.

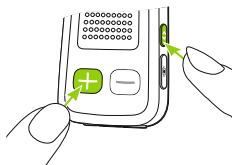

Den raskt blinkende blå indikatorlampen bekrefter at streameren er i parkoblingsmodus.


3. Komme i gang

Sette RemoteMic i parkoblingsmodus

❗ Hvis RemoteMic aldri har blitt parkoblet, vil den automatisk være i parkoblingsmodus i 30 minutter etter at den er slått på. Dette indikeres med en raskt blinkende blå indikatorlampe.

Starte parkoblingsmodus manuelt:

- Slå av RemoteMic.
- Trykk på og hold inne volum opp-knappen (⬆).
- Slå på RemoteMic samtidig som du trykker på (⬆) -knappen.
- Slipp (⬆) -knappen når indikatorlampen starter å blinke raskt i blått.
- Pass på at streameren og RemoteMic er innenfor en rekkevidde på 1 meter.

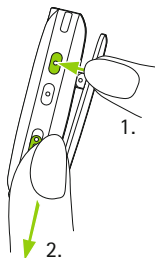

RemoteMic holder seg i parkoblingsmodus i to minutter eller til parkoblingen er fullført.

Fullføre parkobling

Vent til begge indikatorlampene lyser kontinuerlig blått. Dette kan ta opptil 2 minutter, men skjer vanligvis etter noen sekunder.

- ① Du trenger bare å parkoble enhetene én gang. De forblir parkoblet og vil automatisk bli koblet til når de slås på igjen som beskrevet i kapittel 4.2.


3. Komme i gang

3.4 Forstå indikatorlampene

Informasjon under bruk



eller

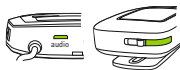

	RemoteMic	Streamer
Søke etter parkoblet enhet	Kontinuerlig grønt lys 	
Direkteoverføring	Kontinuerlig blått lys 	Kontinuerlig blått lys 
Pausemodus	Blinkende blått lys 	Blinkende blått lys 
Parkoblingsmodus	Raskt blinkende blått lys 	Raskt blinkende blått lys 

Strøm- og batteriinformasjon for RemoteMic

Slå på		Grønt lys i 2 sekunder
Slå av		Rødt lys i 2 sekunder
Lade		Kontinuerlig rødt lys
Fullt oppladet når lader er tilkoblet		Kontinuerlig grønt lys
Batterivarsling		Ekstra korte blink med rødt lys
RemoteMic i hvilemodus eller av		Indikatorlampen er slukket


❶ Slå RemoteMic av og på igjen for å få enheten til å gå ut av hvilemodus.

4. Daglig bruk

4.1 Klargjøre streameren

- Slå streameren på.
- Bruk streameren som vist.

Med ComPilot eller
ComPilot II:

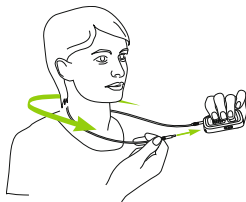

Med ComPilot Air II:



Se bruksanvisningen til streameren for en detaljert beskrivelse av denne.

4.2 Koble til enheter

Hver gang enhetene slås på, kobler de seg til hverandre automatisk.

- Pass på at streameren og RemoteMic er innenfor en rekkevidde på 2 meter.
- Slå på RemoteMic og streameren.
- Indikatorlampene lyser grønt.
- Vent til indikatorlampene på begge enhetene lyser kontinuerlig blått. Dette kan ta opptil 30 sekunder, men skjer vanligvis etter 5 sekunder.




i Hvis indikatorlampen blinker raskt blått når RemoteMic blir slått på, eller hvis indikatorlampen ikke lyser kontinuerlig blått innen to minutter, gjentar du parkoblingen i kapittel 3.3.

4. Daglig bruk

Funksjonstest

Før apparatet tas i bruk, skal det utføres en rask funksjonstest ved å tromme lett på mikrofonåpningen.

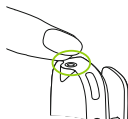

Du skal høre trommelyden tydelig gjennom høreapparatene.

- ❗ Fri sikt mellom RemoteMic og streameren er normalt ikke nødvendig. Hvis du opplever at lyden faller ut, se feilsøkingsveiledningen i kapittel 6.

4.3 Angi volum


Endre RemoteMics voluminnstilling:

- Snakk inn i RemoteMic fra en avstand på 20 cm.
- Bruk /  volumkontrollene til å stille inn volumet til et behagelig nivå.



For å finjustere totalvolumet til høreapparatene og RemoteMic kan du bruke volumknappene på streameren:


-  til å øke volumet
-  til å redusere volumet

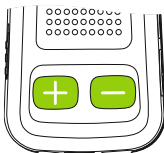

Redusere omgivelseslyder

- Trykk på og hold inne  (2 sek.) for å redusere mer.
- Trykk på og hold inne  (2 sek.) for å gå tilbake til det opprinnelige volumet til høreapparatet.

eller

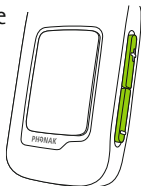


4. Daglig bruk

❗ Voluminnstillingen til RemoteMic blir lagret selv om RemoteMic slås av.

❗ Hvis du ikke er fornøyd, kan din audiograf endre mikrofonnivået til høreapparatene mens RemoteMic er i bruk.


4.4. Slik brukes enheten

- Trykk forsiktig for å åpne klypen.
- Kontroller at RemoteMic er festet godt til klærne som vist på bildet.
- Unngå å dekke til RemoteMic med klærne for å unngå skrapelyder.

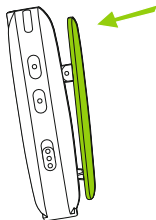

Avstand til munnen til den som snakker:

- De beste resultatene oppnås ved 20 cm.
- Pass på at avstanden ikke overskrider 50 cm.

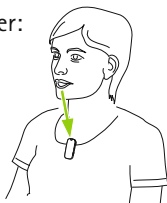


① Jo mer støy i omgivelsene, jo nærmere talerens munn bør RemoteMic være.

① Ikke bruk halsslyngesnor under direkteoverføring. Skrapestøy kan forringe lytteopplevelsen.

4. Daglig bruk

4.5 Pause og gjenoppta

For å sette lydoverføringen fra streameren på pause trykker du på  hovedknappen.

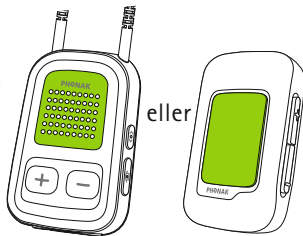


Når den er satt på pause:

- Indikatorlampene blinker blått på begge enhetene.
- Høreapparatene går tilbake til det sist brukte høreapparatprogrammet.
- Trykk på hovedknappen på streameren igjen for å  gjenoppta direkteoverføringen.

i Høreapparatprogrammet kan ikke endres under direkteoverføring eller når den står i pause.

4.6 Slå av

For å avslutte overføring fra RemoteMic fullstendig slår du av RemoteMic ved å skyve strømbryteren til av-stilling.

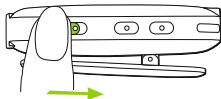


Slå RemoteMic av når den ikke er i bruk.

5. Bruk i spesielle tilfeller

5.1 RemoteMic og telefonsamtaler

❶ Telefonsamtaler via Bluetooth blir alltid prioritert over direkteoverføring via RemoteMic.

Hvis streameren parkobles og kobles til mobiltelefonen, kan du fortsatt motta telefonsamtaler, selv når du bruker RemoteMic. Ved innkommende anrop stopper streameren automatisk overføringen av lydsignalet fra RemoteMic og sender signalet fra mobiltelefonen til høreapparatene.

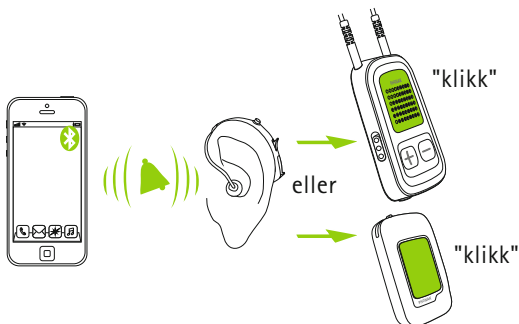


Motta innkommende anrop ved å trykke kort på hovedknappen  på streameren når du hører ringetonen gjennom høreapparatene. Trykk på hovedknappen  igjen for å avslutte telefonsamtalen.

5.2 RemoteMic og TV-titting

For å sikre stereolyd av høy kvalitet fra TV eller andre lydkilder anbefaler vi bruk av den dedikerte Phonak TVLink II-basestasjonen.

Hvis kabeltilkobling ikke er tilgjengelig, eller hvis du reiser, kan RemoteMic brukes for å forbedre lydkvaliteten under TV-titting.

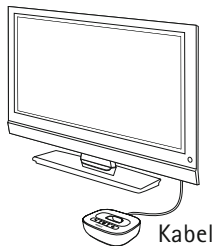


TVLink II-basestasjon

5. Bruk i spesielle tilfeller

Slik oppnås best resultat:

- Lokaliser TV-høytaleren.
- Plasser RemoteMic 20 cm fra høytaleren.
- Det kan være lurt å la laderen være plugget i under TV-titting.

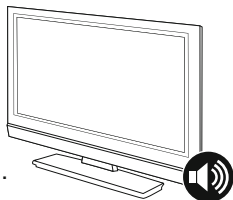

5.3 Overføringsavstand for RemoteMic

RemoteMic



RemoteMic fungerer innen en rekkevidde på 20 m. Fri sikt mellom streameren og RemoteMic er ikke nødvendig. Interferens i omgivelsene på grunn av vegger, møbler eller kroppen kan redusere rekkevidden.


Hvis RemoteMic flyttes utenfor rekkevidden til streameren, vil den trådløse lydoverføringen bli avbrutt eller til og med avsluttet. Flytt RemoteMic tilbake innenfor rekkevidden til streameren for å gjenoppta direkteoverføring til høreapparatene.

Det kan ta opptil 10 sekunder før direkteoverføringen gjenopptas.

- ❗ Hvis direkteoverføringen ble avbrutt i mer enn 30 minutter, er det mulig at RemoteMic må slås av og på igjen.

5.4 Bruke sikringstråden

Under transport kan du bruke den avtakbare sikringstråden som vist:

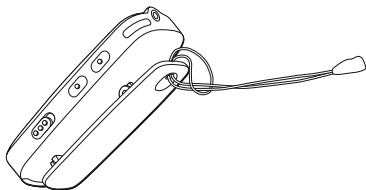


5. Bruk i spesielle tilfeller

5.5 Slette alle Bluetooth-parkoblinger

Hvis du har problemer med én av de parkoblede enhetene, eller hvis en enhet mister forbindelsen til RemoteMic, kan du slette alle parkoblinger fra RemoteMic.

- Slå RemoteMic på mens du trykker på -knappen.
- Slipp -knappen etter 10 sekunder når den blinkende lampen skifter fra blått til grønt lys.

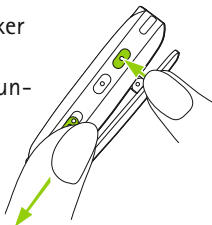

Hvis du sletter parkobling av Bluetooth-enheter, kan du ikke koble til tidligere parkoblede Bluetooth-enheter. Hvis du vil koble til igjen, må du utføre parkoblingsprosessen på nytt (se 3.3).

- ❗ Indikatorlampene begynner å blinke raskt blått noen sekunder etter at parkoblinger ble slettet (automatisk parkoblingsmodus).

6. Feilsøking

Nå følger et sammendrag av ofte stilte spørsmål om RemoteMic og svarene på disse.

Årsaker

Gjør følgende

Jeg kan ikke høre lyden fra RemoteMic

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Én av eller alle enhetene er slått av.■ RemoteMic er i pausemodus (blinker blått).■ Avstanden mellom streameren og RemoteMic er for stor.■ En hindring stopper overføringen. | <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller at alle enheter (RemoteMic, streameren, høreapparater) er slått på og fungerer som de skal.■ Trykk raskt på hovedknappen på streameren for å gjenoppta direkteoverføring.■ Plasser enhetene nærmere hverandre. 20 meter er maksimal avstand utendørs.■ For å unngå avbrudd i direkteoverføring må du sørge for å bruke streameren riktig og holde RemoteMic innenfor rekkevidde.■ Avhengig av materialet (f.eks. kroppen) kan det være nødvendig med fri sikt. |
|---|---|

6. Feilsøking

Årsaker	Gjør følgende
Det er avbrudd i lydoverføringen	
■ RemoteMic er for langt unna streameren eller er skjermet av en hindring (f.eks. en kropp). ■ Streameren søker etter andre parkoblede enheter i 2 minutter etter at den slås på.	■ Ikke overskrid den maksimale avstanden, og juster retningen til enheten. ■ Etter 2 minutter vil streameren slutte å søke etter andre enheter, og avbruddet vil stanse.
Volumet er ikke passelig under direkteoverføring (for lavt eller for høyt)	
■ Volumnivåene er ikke stilt inn riktig.	■ Juster volumet med volumknappene på RemoteMic og streameren.

Årsaker

Gjør følgende

Det er for mye støy, jeg forstår ikke personen som snakker

- | | |
|--|---|
| ■ Volumet på mikrofonene på høreapparatet er for høyt. | ■ Reduser volumet til høreapparatet ved å trykke på og holde inne  -knappen på streameren. |
| | ■ Plasser RemoteMic nærmere munnen til den som snakker (20 cm). |
| | ■ Bruk  -knappen på RemoteMic for å øke volumet til RemoteMic. |
| ■ RemoteMic skraper mot klærne til brukeren. | ■ Kontroller at RemoteMic er festet godt. Pass på at klærne ikke dekker RemoteMic. |
| ■ Innstillingene til høreapparatene er ikke riktige. | ■ Be din audiograf finjustere høreapparatene. |

6. Feilsøking

Årsaker	Gjør følgende
RemoteMic gjenkjennes ikke lenger av den streameren den tidligere var parkoblet med	
■ Etter 2 minutter med søk etter enheter stopper streameren søket for å spare strøm. ■ Enhetene er for langt unna hverandre. ■ RemoteMic kan parkobles med maksimalt fire ulike Bluetooth-enheter. Hvis internminnet er fullt, vil den fjerne den første parkoblingen. ■ Parkobling har aldri blitt utført eller er slettet.	■ Slå av streameren. Vent til den røde strømindikatorlampen slår seg av, og slå på enheten igjen. ■ Hold enhetene mindre enn 1 meter fra hverandre, og prøv igjen. ■ Gjenta parkoblingen mellom enhetene. ■ Gjenta parkoblingen mellom enhetene.
Indikatorlampen lyser ikke kontinuerlig blått	
■ RemoteMic og streameren er ikke parkoblet.	■ Fullfør parkoblingen som beskrevet i 3.3.

<i>Årsaker</i>	<i>Gjør følgende</i>
Indikatorlampen på RemoteMic blinker raskt blått	
■ RemoteMic har aldri blitt parkoblet og er alltid i parkoblingsmodus.	■ Fullfør parkoblingen som beskrevet i 3.3.
Indikatorlampen lyser ikke kontinuerlig blått	
■ RemoteMic og streameren er ikke parkoblet. ■ Streameren er ikke riktig programmert for dine høreapparater.	■ Bruk streameren rundt halsen, og fest halsslyngen riktig. ■ Be din audiograf om å omgruppere streameren og høreapparatene.
Ladetiden er lenger enn vanlig	
■ Enheten er i bruk under lading. ■ Laderen tilfører ikke nok ladestrøm.	■ Lading under bruk er mulig, selv om det forlenger ladetiden med 30 %. ■ Bruk kun ladere som er godkjent av Phonak.

7. Service og garanti

7.1 Lokal garanti

Spør din kontaktperson der du fikk utlevert/kjøpte streameren og RemoteMic, om betingelsene for den lokale garantien.

7.2 Internasjonal garanti

Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra utleverings-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell. Garantien trer kun i kraft ved fremlegging av kjøpsbevis.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

7.3 Garantibegrensning

Denne garantien dekker ikke skader fra feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre. Denne garantien inkluderer ikke service som er utført av audiografer på deres kontor.

Serienummer:

Autorisert audiograf/lege
(stempel/signatur):

Utleverings-/kjøpsdato:

8. Informasjon om overholdelse

Samsvarserklæring

Phonak AG erklærer herved at dette produktet oppfyller de vesentlige kravene i direktiv 2014/53/EU for radio- og teleterminalutstyr. Du kan få hele samsvarserklæringen fra produsenten.

Australia / New Zealand:



R-NZ

Indikerer en enhets samsvar med gjeldende regelverk for Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) for lovlig salg i New Zealand og Australia.
Samsvarsmerket R-NZ gjelder radioprodukter som leveres på det newzealandske markedet under samsvarsnivå A1.

Merknad 1:

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210-reglene til Industry Canada. Bruken innebærer to forutsetninger:

- 1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens.
- 2) Denne enheten må tillate all interferens som mottas, også interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad 2:

Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Phonak, kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen for bruk av denne enheten.

Merknad 3:

Denne enheten er blitt testet og samsvarer med kravene til et digitalt system av klasse B slik kravene er fastsatt i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en husmontering. Denne enheten genererer, benytter seg av og sender ut radiobølger og kan, hvis den ikke er installert og brukes i henhold til instruksene, forårsake skadelig forstyrrelse i radiokommunikasjon. Det foreligger derimot ingen garanti mot at forstyrrelse kan forekomme i visse installasjoner.

8. Informasjon om overholdelse

Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe som oppdages ved å skru systemet av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Vri eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble systemet til et uttak i en annen krets enn det som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-reparatør for å få hjelp.

Merknad 4:

Samsvarserklæring om eksponering for radiostråling i henhold til FCC/IC

Dette utstyret overholder FCC/ICs grenseverdier for stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukerne må følge bruksanvisningene for å tilfredsstille radiostrålingens overholdelse av disse grenseverdiene. Denne senderen må ikke plasseres ved siden av eller brukes i forbindelse med noen annen slags antenne eller sender.

Merknad 5:

Samsvar med japansk lovgivning for radio og telekommunikasjon. Denne enheten overholder japansk lovgivning for radio (電波法) og telekommunikasjon (電気通信事業法).

Denne enheten skal ikke endres (da blir det tildelte nummeret ugyldig).

Du finner mer informasjon i produktdatabladet på www.phonak.com/remotemic

9. Informasjon og forklaring av symboler



CE-symbolet er en bekreftelse fra Phonak AG om at dette Phonakproduktet oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU for radio- og teleterminalutstyr.



Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.



Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne bruksanvisningen.



Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.



Samsvarsmerking for EMC og radiokommunikasjon i Australia.

Driftsbetingelser

Denne enheten skal fungere problemfritt og uten restriksjoner så lenge den brukes slik det er tiltenkt, med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen.



Temperaturer for transport og oppbevaring: -20 til $+60$ °C
Driftstemperatur: 0 til 55 °C.



Holdes tørr.

9. Informasjon og forklaring av symboler



Fuktighet under transport:
Opptil 90 % (ikke-kondenserende).
Fuktighet under lagring:
0 til 70 % når apparatet
ikke er i bruk.



Atmosfærisk trykk: 200 hPA til
1500 hPA.



Indikerer produsenten av den
medisinske enheten, som definert
i direktiv 93/42/EØF.



Japansk merke for sertifisert
radioutstyr.



Symbolet med utkrysset søppelbøtte gjør deg oppmerksom på at denne enheten ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

Kast gamle eller ubrukte enheter ved avfallsanlegg for elektronisk avfall, eller lever produktet inn til din audiograf for kassering. Korrekt kassering verner om miljø og helse. Dette produktet har et innebygd batteri som ikke kan byttes ut. Ikke prøv å åpne produktet eller ta ut batteriet, ettersom dette kan forårsake personskafe og skade på produktet. Kontakt den lokale gjenvinningsstasjonen for å få fjernet batteriet.

9. Informasjon og forklaring av symboler



Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse varemerkene av Phonak er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.

10. Viktig sikkerhetsinformasjon

Følgende sider inneholder viktig sikkerhetsinformasjon

Advarsler

-  Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn, personer med mentalt nedsatte evner og kjæledyr.
-  Phonak-produkter kan generere magnetiske felt. Tester som Phonak utførte, viste at det ikke ble forårsaket interferens på implanterbart utstyr (f.eks. pacemaker, defibrillator osv.) som ville påvirke sikker og effektiv bruk av implanterbart utstyr. Brukere av implanterbart utstyr skal ta kontakt med lege og/eller utstyrtsprodusent før de tar i bruk Phonak-produktet. Stopp bruken av Phonak-produktet hvis du opplever påvirkning fra Phonak-produktet på det implanterte utstyret. Ta kontakt med produsenten av det implanterte utstyret og be om råd.
-  Bruk kun høreapparater som en audiograf har programmert spesielt for deg.

10. Viktig sikkerhetsinformasjon

-  Av sikkerhetsmessige årsaker skal det kun brukes ladere levert av Phonak eller stabiliserte ladere med en nominell ytelse på 5 VDC, min. 250 mA.
-  RemoteMic skal ikke lades fra USB-porten til en PC eller bærbar PC. Det kan skade utstyret.
-  Det er ikke tillatt å endre eller modifisere noen av enhetene med mindre dette er uttrykkelig godkjent av Phonak.
-  Eksternt utstyr bør kun kobles til hvis det er testet i henhold til gjeldende IECXXXXX-standarder. Bruk kun tilbehør som er godkjent av Phonak AG, for å unngå elektrisk støt.
-  Mini-USB-porten skal kun brukes til spesifisert formål.
-  Dette produktet har et innebygd batteri som ikke kan byttes ut. Ikke prøv å åpne produktet eller ta ut batteriet, ettersom dette kan forårsake personskade og skade på produktet.

-
- ⚠ Hvis kablene til enheten brukes til noe annet enn beregnet formål (f.eks. bruke USB-kabelen rundt halsen), kan dette føre til skader.
 - ⚠ Kast elektriske komponenter i henhold til lokale bestemmelser fra Phonak AG.
 - ⚠ Ikke bruk enheten i eksplosive områder (gruver eller industriområder med eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare bedøvelsesmidler håndteres) eller på steder der elektronisk utstyr er forbudt.

Sikkerhetsinformasjon om produktet

- ❗ Slå av enheten og oppbevar den på et trygt sted når den ikke er i bruk.
- ❗ Beskytt enhetens kontakter, plugg, ladeåpninger og strømforsyning mot smuss og rester.
- ❗ Beskytt enheten mot fuktighet (bading, svømming), varme (radiator, dashbordet i bilen) eller direkte hudkontakt ved svetting (trening, idrett, sport).

10. Viktig sikkerhetsinformasjon

- ① Ikke mist enheten i bakken. Hvis du mister den på et hardt underlag, kan den bli skadet.
- ① Rengjør enhetene med en fuktig klut. Enhetene må aldri rengjøres med vaskemidler (vaskepulver, såpe osv.) eller alkohol. Mikrobølgeovn eller andre varmeovner må aldri benyttes til å tørke noen av enhetene.
- ① Den digitalkodede, induktive overføringsteknologien som brukes i disse enhetene, er svært pålitelig og forstyrres nesten aldri av andre enheter. Vær likevel klar over at når systemet brukes i nærheten av datautstyr, større elektroniske installasjoner eller andre felt med sterk elektromagnetisk stråling, kan det være nødvendig å holde en avstand på minst 60 cm for at enheten skal fungere ordentlig.

-
- ① Spesielle medisinske undersøkelser eller tannundersøkelser, inkludert stråling som beskrevet nedenfor, kan påvirke riktig funksjon av enhetene. Ta av høreapparatene, og hold dem utenfor undersøkelsesrommet/-området før du gjennomfører følgende:
- Medisinske undersøkelser eller tannundersøkelser med røntgen (også CT-skanning).
 - Medisinske undersøkelser med MR-/NMR-skanninger som genererer magnetiske felt.
- ① Hold enheten minst 10 cm unna magneter.

10. Viktig sikkerhetsinformasjon

Annen viktig informasjon

- RemoteMic er kompatibel med Bluetooth 2.1. Den trådløse overføringsteknologien er ikke begrenset til, men optimalisert for streameren fra Phonak.
- Phonak støtter ikke bruk av RemoteMic med andre streamere enn de fra Phonak.
- Kraftig elektronisk utstyr, store elektroniske installasjoner og metallkonstruksjoner kan påvirke og redusere driftsrekkevidden betraktelig.

Merknader

Merknader



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveits

www.phonak.com

