




Phonak Audéo L-312 (L90/L70/L50/L30/Trial)

S Receiver


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå

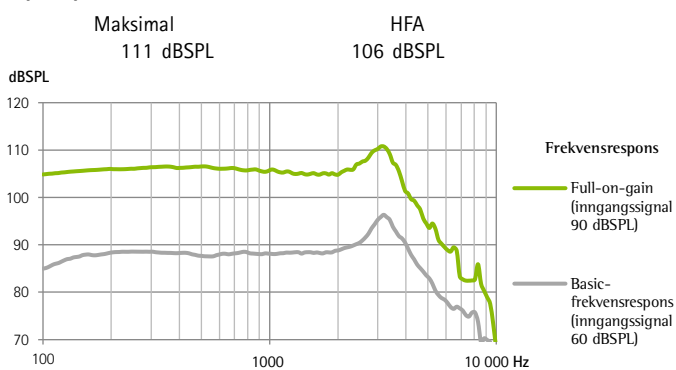

Lydforsterkning

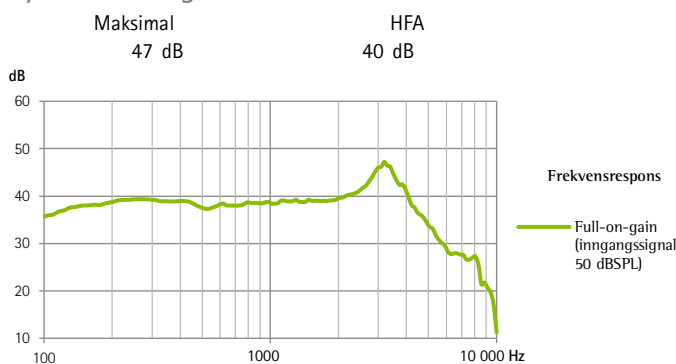


Frekvensområde	< 100 Hz - > 8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,4 mA			
Forventet driftstid*	121 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

M Receiver


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå

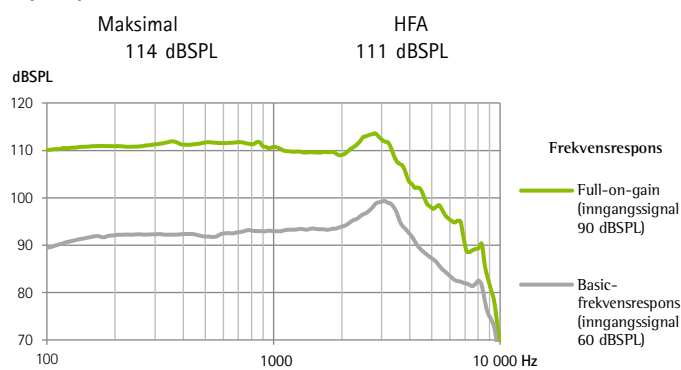

Lydforsterkning

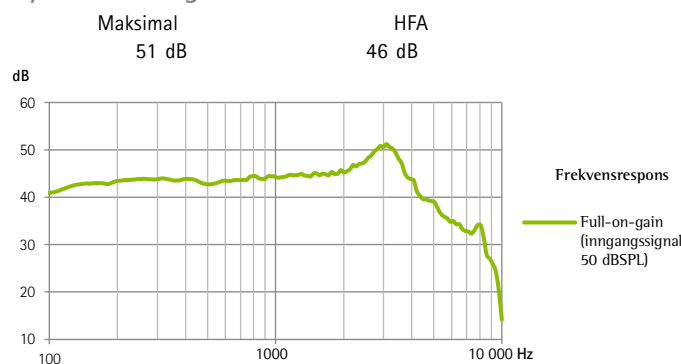

Frekvensområde	< 100 Hz - > 8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,4 mA			
Forventet driftstid*	121 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

Generell testinformasjon

- Forsyningsspenning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

Advarsler

- ⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Du bør være spesielt forsiktig når du tilpasser dette apparatet, da det er en risiko for å redusere hørselsresten til brukeren.
- ⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.
- ⚠ Det utviklede lydtrykksnivået i ørene til barn kan være betydelig høyere enn hos voksne. RECD målt til korrekt mål av tilpasseren, OSPL90, anbefales.

* Batteriyttelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lyd miljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on


Phonak Audéo L-312 (L90/L70/L50/L30/Trial)

P Receiver


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå

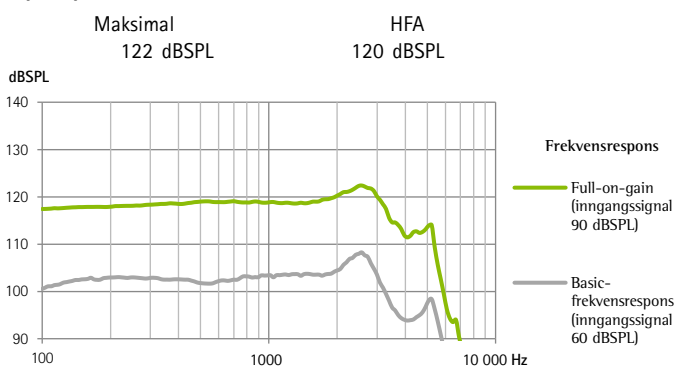

Lydforsterkning

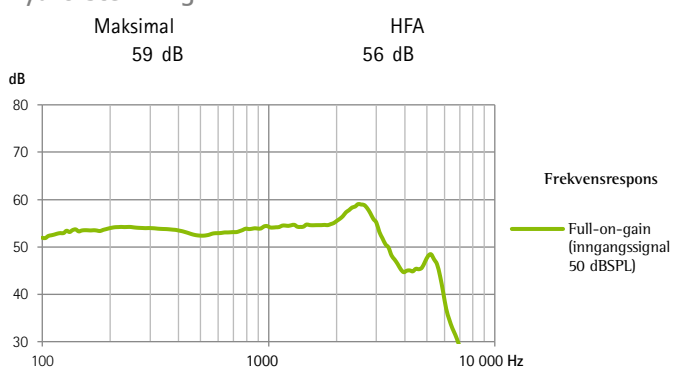


Frekvensområde	<100 Hz – 6300 Hz (CeruShield)			
	<100 Hz – 5900 Hz (CeruStop)			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Batteristrøm	1,5 mA			
Forventet driftstid*	113 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

UP Receiver


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå

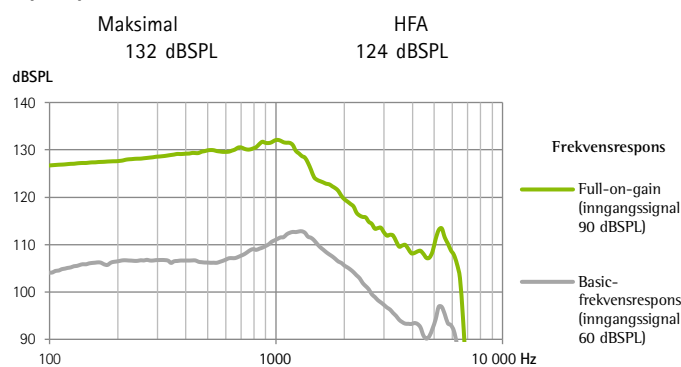

Lydforsterkning

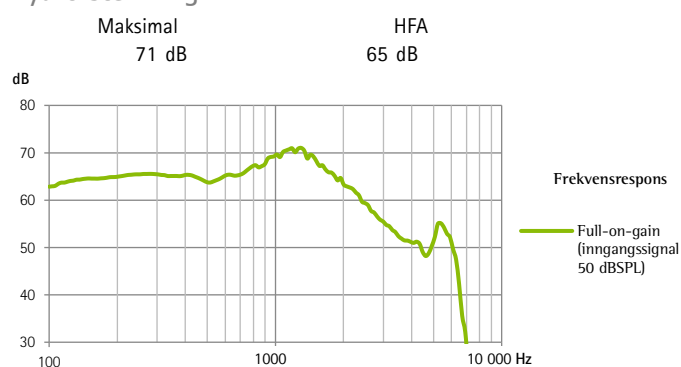

Frekvensområde	<100 Hz – 6100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Batteristrøm	1,4 mA			
Forventet driftstid*	121 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

* Batteriyttelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lyd miljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on