

# Phonak Marvel™ Acessórios sem fio

Informações do produto



O Phonak TV Connector é uma solução "plugue e use" fácil de usar para os aparelhos auditivos Phonak Marvel. Com a Tecnologia AirStream™ exclusiva da Phonak, ele proporciona uma transmissão sonora de alta qualidade a partir de qualquer TV e sistema estéreo. Além disso, utilizando a conectividade direta com smartphones que possuem sistema operacional iOS e Android, o intuitivo aplicativo Phonak Remote permite que o usuário desfrute ainda mais do seu aparelho auditivo Marvel.

# TV Connector – O dispositivo de transmissão fácil de usar para TV e música




O **TV Connector** é a interface "plugue e use" para a TV e outras fontes de áudio, suportando conectividade direta com os aparelhos auditivos Phonak Marvel. Ele foi desenvolvido para simplificar a configuração e utilização e oferece uma excelente qualidade sonora estéreo por meio da Tecnologia AirStream™. O TV Connector pode transmitir sinais de áudio a uma distância de até 15 metros para uma quantidade ilimitada de usuários conectados ao mesmo tempo.

## Características gerais

- Transmissão sem fio com som estéreo para ambos os aparelhos auditivos
- Tecnologia AirStream para uma melhor qualidade sonora, latência mínima durante a transmissão e um método de conexão mais fácil
- Basta um clique para conectar todos os aparelhos auditivos compatíveis ao alcance sem tocar no aparelho auditivo
- Transmissão sem fio simultânea para uma quantidade ilimitada de usuários ao mesmo tempo
- Para uma maior discrição, ele pode ser montado atrás da TV

## Como usar

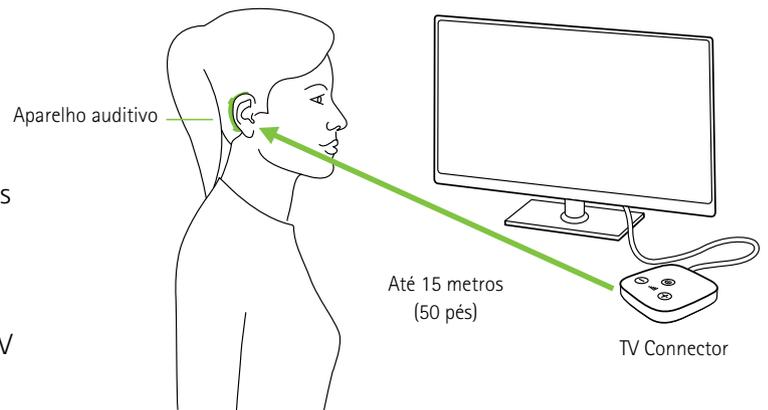

## Compatibilidade

- O TV Connector é compatível com todos os aparelhos auditivos sem fio com conectividade direta da Phonak.

Para assistir a vídeos sobre como usar e configurar o TV Connector, visite [www.phonakpro.com/tvconnector](http://www.phonakpro.com/tvconnector)

## Informações técnicas



- 1 Botão de Conectar
- 2 Luz indicadora (LED)
- 3 Entrada do cabo microUSB para energia
- 4 Entrada para cabo óptico (Toslink) ou analógico (jack de 3,5 mm)
- 5 Botão de Ligar e Desligar
- 6 Botões Aumentar e Diminuir volume (calibração)

Tamanho de caixa pequena (C: 63 mm x L: 63 mm x A: 12 mm)

# Phonak Remote – O aplicativo de controle remoto simplificado




O **Phonak Remote App** foi desenvolvido para aumentar a comodidade e facilitar o uso do controle remoto. Ele permite controlar facilmente as funções do seu aparelho auditivo, visualizadas no smartphone sem a necessidade de um dispositivo intermediário utilizado junto ao corpo.


## Características gerais

- Ajuste do volume dos aparelhos auditivos em ambos os lados ou em cada lado individualmente
- Lista de programas com seleção direta dos programas disponíveis
- Possibilidade de personalização do nome dos programas disponíveis no aplicativo
- Seleção de fontes de áudio disponíveis conectadas aos aparelhos auditivos
- Ajuste fácil da função de Balanceamento Ambiental do aparelho auditivo e a transmissão sem fio a partir de uma fonte de áudio
- Ajuste individual da intensidade do Tinnitus Balance, quando disponível no aparelho auditivo
- Verificação do tempo médio de uso dos aparelhos auditivos conectados no aplicativo
- Nível de carga da bateria (aparelhos auditivos recarregáveis)
- Configuração Auto-On (Ativação automática), quando fora do carregador (aparelhos auditivos recarregáveis)


Para assistir a vídeos sobre como usar e configurar o aplicativo Phonak Remote no seu celular, visite [www.phonakpro.com/remoteapp](http://www.phonakpro.com/remoteapp)

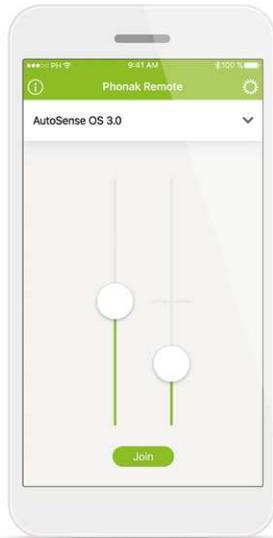


Ajuste do volume para cada lado separadamente

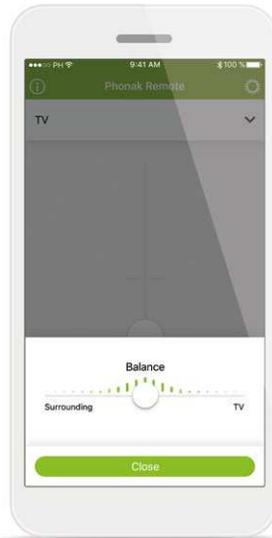

Balanceamento Ambiental na transmissão de áudio sem fio

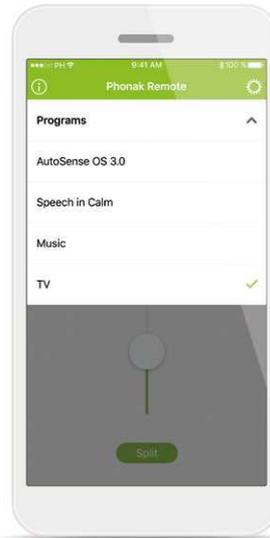

Seleção e personalização de programas

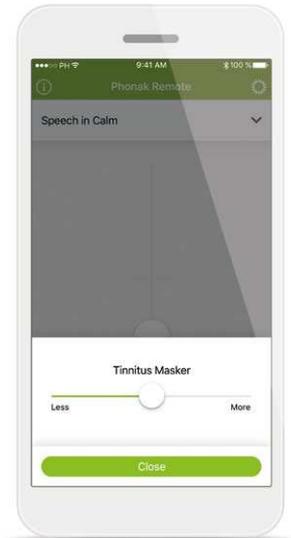

Intensidade do Tinnitus Balance

## Compatibilidade

- O Phonak Remote App é somente compatível com os aparelhos auditivos Phonak que possuem conectividade Bluetooth®.
- O Phonak Remote pode ser utilizado em telefones com a funcionalidade Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) e é compatível com o iPhone 5s ou mais recente, com Versão iOS 10.2 ou mais recente.
- O Phonak Remote pode ser utilizado nos Serviços do Google Mobile (GMS) de dispositivos Android certificados com Bluetooth 4.2 e Android OS 6.0 ou mais recente.

Apple, o logotipo Apple, iPhone e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android, Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

# Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

[www.phonak.com.br](http://www.phonak.com.br)