



roger

Telefonsamtal på ett enkelt sätt med Roger™

Guide

Översikt - mikrofoner



Roger On™
(iN)



Roger Table Mic II
(iN)



Roger Select™



Roger Select™ iN

Tillbehör

Telefonalternativ




Bärbar enhet/PC/bärbar dator
för telefonsamtal via internet
(trådlöst via Bluetooth®)




PC/bärbar dator för
telefonsamtal via internet
(via kabel)




Fast telefon (via kabel)

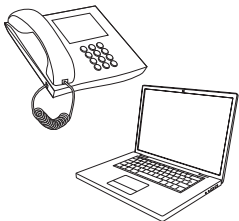


Växelfonitoni
(via Bluetooth)

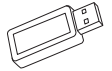


Bluetooth
USB-adapter

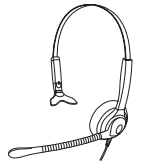

Extern
headset-mikrofon

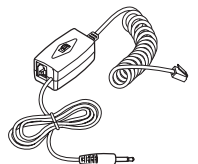

Adapter för
fast telefon

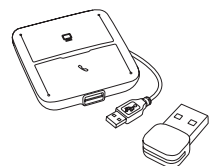

Hub för headset
och Bluetooth-
USB-adapter

Det finns fler telefonalternativ från Phonak. Gå in på www.phonak.se/telefonlosningar


Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

Bärbar enhet/PC/bärbar dator för telefonsamtal via internet

(VoIP, t.ex. Zoom, MS Teams) trådlöst via Bluetooth




Roger Select

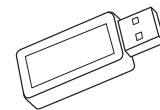

Tillbehör: Bluetooth USB-adapter
(Phonak artikelnummer: 076-0856)


Använda Bluetooth

Parkoppla bara Roger Select med din Bluetooth-aktiverade bärbara enhet/PC/bärbara dator. Du behöver inte hålla telefonen mot örat för att höra i ett telefonsamtal. Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

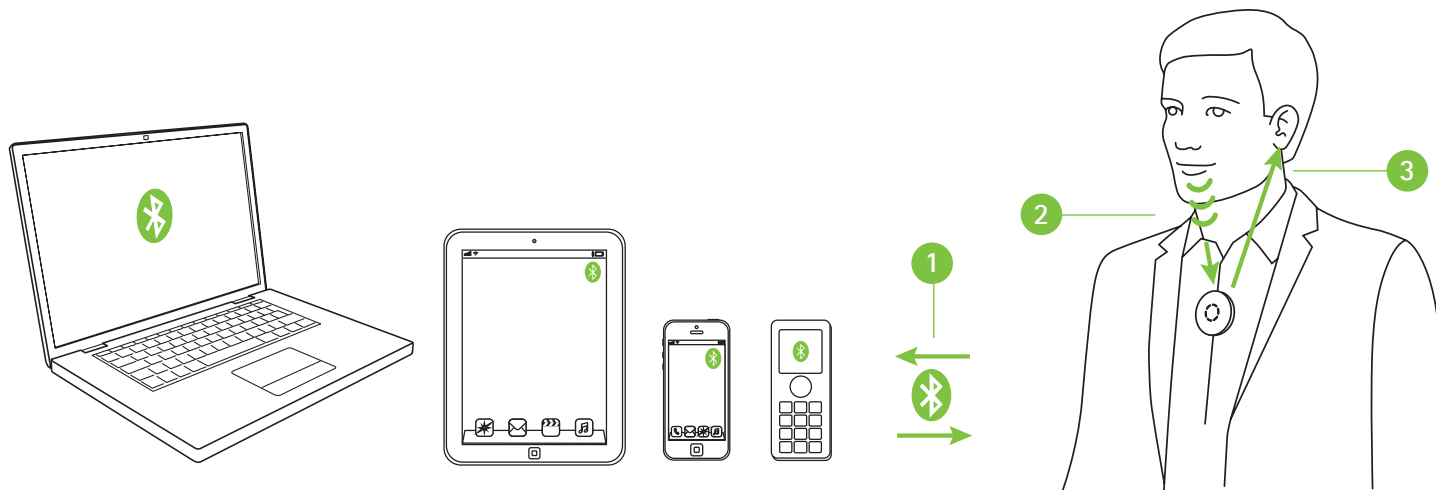

- 1 Parkoppla din bärbara enhet/PC/bärbara dator med Roger Select
- 2 Under telefonsamtalet talar du bara in i Roger Select
- 3 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

Om din PC/bärbara dator inte har inbyggd Bluetooth ska du ansluta Bluetooth USB-adaptern till en ledig USB-port på din PC/bärbara dator och parkoppla Bluetooth USB-adaptern med Roger Select.

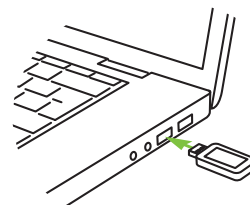

OBS! Denna lösning fungerar inte med hörapparater med RogerDirect™.

PC/bärbar dator för telefonsamtal via internet

(VoIP, t.ex. Zoom, MS Teams) via ljudkabel

Roger-mikrofoner som kan användas



Roger Select
Roger Select iN



Roger Table Mic II
Roger Table Mic II iN




Roger On
Roger On iN



Tillbehör: Extern
headset-mikrofon

Använda den inbyggda mikrofonen från en PC/bärbar dator

- 1 Anslut hörlursuttaget på din PC/bärbara dator till dockningsstationens ljudingång eller direkt till Roger-mikrofonens ljudingång
- 2 Under själva telefonsamtalet talar du in i datorns inbyggda mikrofon
- 3 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

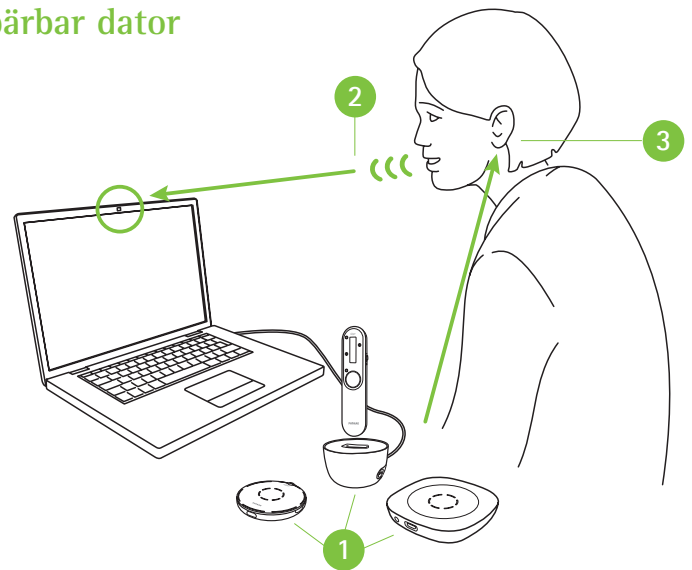


Använda extern headset-mikrofon

Genom att använda en headset-mikrofon får du en bättre ljudkvalitet på din egen röst.

OBS! Du kan behöva justera ljudinställningarna på din PC eller VoIP-programvara för att ange 3,5 mm-uttaget som ljudutgång och USB-mikrofonen som mikrofoningång.

- 1 Anslut hörlursuttaget på din PC/bärbara dator till dockningsstationens ljudingång eller direkt till Roger-mikrofonens ljudingång
- 2 Anslut den externa mikrofonen till mikrofoningången på din PC/bärbara dator. Alternativt kan du ansluta ditt headset till en USB-port om det är ett USB-headset
- 3 Under själva telefonsamtalet talar du in i den externa mikrofonen
- 4 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

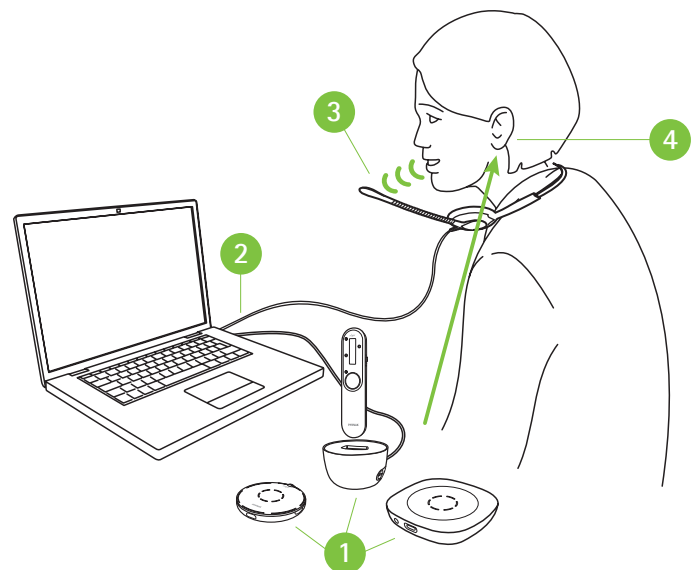

PC/bärbar dator för telefonsamtal via internet


(VoIP, t.ex. Zoom, MS Teams) via USB-kabel



Roger On
Roger On iN

Använda USB-kabel

- 1 Anslut USB-laddkabeln mellan din PC/bärbara dator och Roger On
- 2 Under telefonsamtalet talar du in i den inbyggda mikrofonen på PC:n/den bärbara datorn eller använder en extern mikrofon som på föregående sida
- 3 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

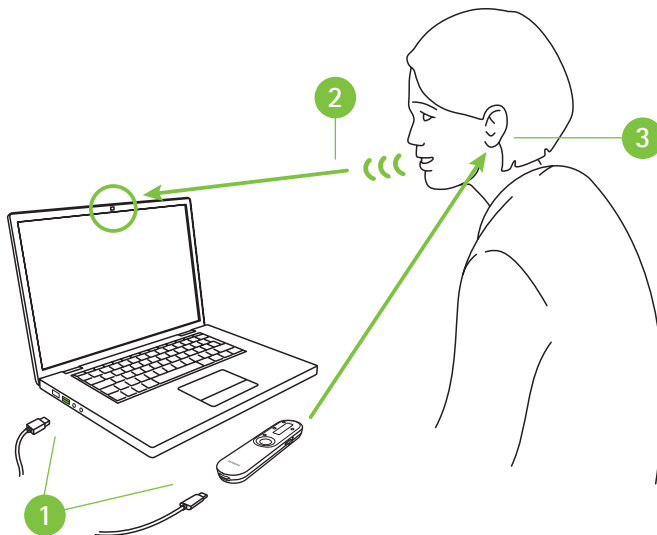

Fasta telefoner

via kabel

Roger-mikrofoner som kan användas




Roger Select
Roger Select iN



Roger Table Mic II
Roger Table Mic II iN




Roger On
Roger On iN

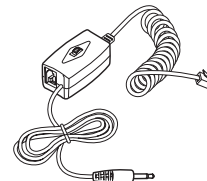

Adapter för fast telefon
(t.ex. Telefonset 055-4064)

Använda adapter för fast telefon

Lift telefonluren och håll den mot munnen för att svara på samtal. Du måste fortfarande tala in i luren. Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

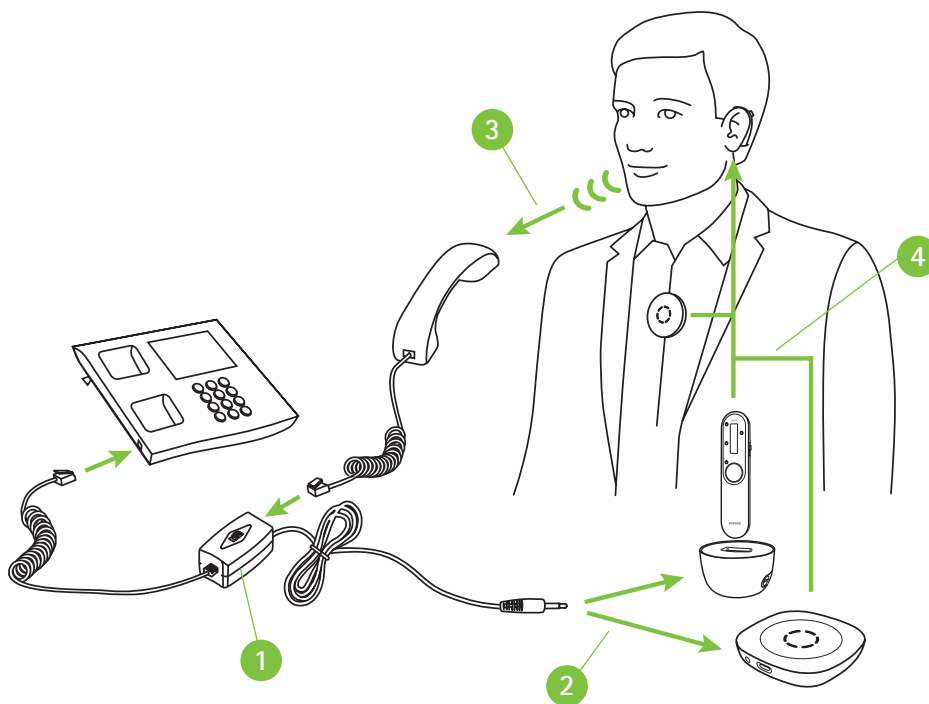


- 1 Installera adaptern för fast telefon mellan telefonen och telefonluren.
- 2 Anslut hörlursuttaget på adaptern till dockningsstationens ljudingång eller direkt till Roger-mikrofonens ljudingång
- 3 Under själva telefonsamtalet talar du i telefonluren
- 4 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

Växeltefoni

(PC/bärbar dator och skrivbordstelefon) trådlöst via Bluetooth




Roger Select

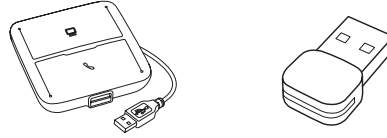

Hub för headset (t.ex. Poly MDA200),
Bluetooth USB-adapter (t.ex. Poly PLT-BT300)

Använda Bluetooth

Detta är den mest avancerade lösningen för kontorssamtal. Telefonen kan växla mellan att vara en datortelefon och en kontorstelefon. I båda fallen överförs ljudet till Roger Select, som helst bärs runt halsen, som ger dig båda händerna fria under telefonsamtalet.

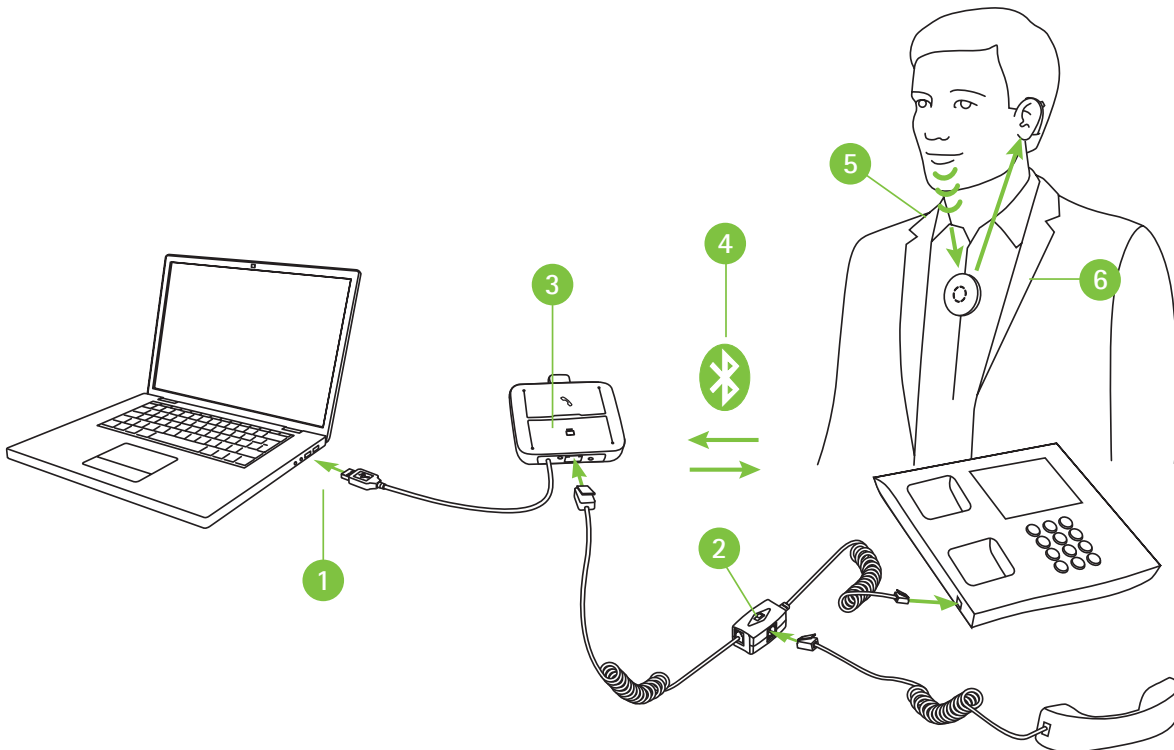

- 1 Anslut huben för headset till din dator
- 2 Installera adaptorn för huben för headset mellan telefonen och telefonluren
- 3 Anslut Bluetooth-USB-adaptorn till huben för headset
- 4 Parkoppla Bluetooth USB-adaptorn med Roger Select
- 5 Under telefonsamtalet talar du in i Roger Select
- 6 Du hör då personen du pratar med i båda öronen.

OBS! Denna lösning fungerar inte med hörapparater med RogerDirect™.

life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonakpro.se