


myPhonak Junior 1.2

Kullanım Kılavuzu

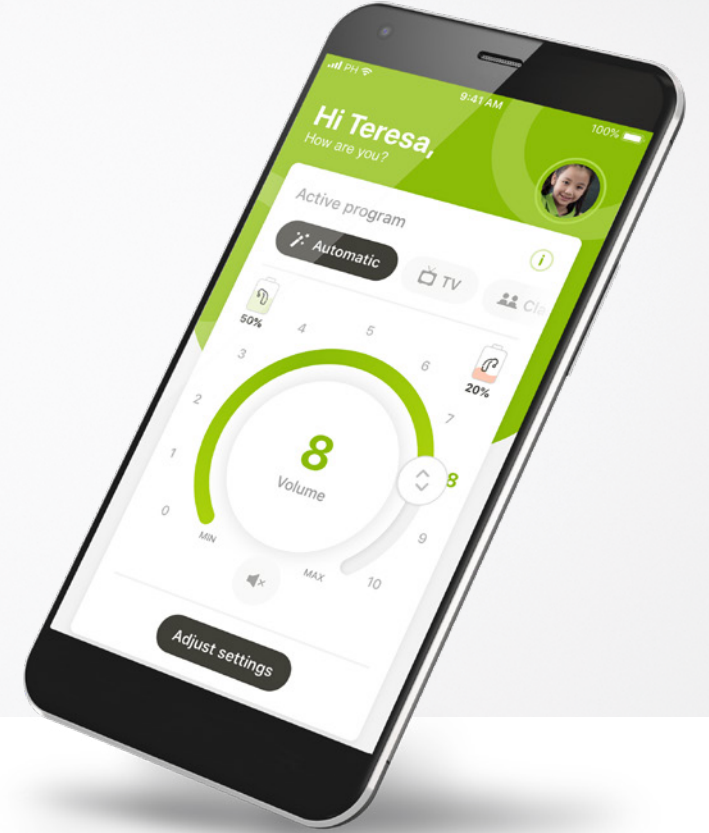

Bir Sonova Markası

PHONAK
life is on

Başlangıç

myPhonak Junior, merkezi İsviçre'nin Z rih kentinde yer alan, iřitme c z mlerinde d nya lideri Sonova tarafından geliřtirilmiř bir uygulamadır. Sunulan t m imkanlardan yararlanmak i in kullanım talimatlarının tamamını okuyun.



Bu kullanım kılavuzu, myPhonak Junior uygulamasının  zelliklerini ve bu  zelliklerin kullanıcı tarafından nasıl kullanılabileceğini a ıklar. Aynı zamanda belirli  zelliklerin c ocuklar tarafından yalnızca bir ebeveynle birlikteyken kullanılabileceği řekilde ebeveyn kilidi ile nasıl engelleneceğini a ıklar. Uygulamayı kullanmaya bařlamadan  nce bu kullanım kılavuzunu bařtan sona okuyun.



Biliřsel geliřim aynı yařtaki c ocuklarda dahi farklılık g sterir. myPhonak Junior kullanımına uygunluęu belirlemek i in olgunluk seviyesi ve risk farkındalıęının her bir c ocuk i in ayrı olarak deęerlendirilmesi gerekir. Kılavuzda ilk olarak ařaęıdaki  nerilerden yararlanılabilir:



Remote Control'den baęımsız kullanımı:
Uygulama ayarları iřitmelerini ve etraflarındaki seslere y nelik farkındalıklarını nasıl etkileyeceęine dair bilgiye dayalı kararlar alabilecek 10 yař ve  zeri c ocuklar i indir.



Uyarı mesajlarını okuyabilme ve anlayabilme kabiliyeti esastır.



Remote Control destekli kullanımı:
Uygulama  zerinden    nc  bir taraf a yapılan deęiřikliklere veya ayarlamalara y nelik olarak net geri bildirim saęlayabilecek 6 yař ve  zeri c ocuklar i indir. Bu senaryoda, ebeveynler/bakıcılar c ocuk adına deęiřiklikler yapabilir.



NOT: C ocuk g venilir geri bildirim veremedięi s rece ebeveynler/bakıcılar tarafından deęiřiklikler yapılmaması azami  nem tařır.



Uyumluluk bilgisi:

myPhonak Junior'ın kullanılabilmesi i in Bluetooth® baęlantısına sahip Phonak iřitme cihazları gereklidir.
myPhonak Junior, Bluetooth® low energy (LE)  zellięine sahip telefonlarda kullanılabilir ve iOS® S r m 14.0 veya  zerini  alıřtıran cihazlarla uyumludur. myPhonak Junior, Bluetooth® 4.2 ile Android OS 8.0 ve  zerini destekleyen Google Mobile Services (GMS) sertifikalı Android™ cihazlarda kullanılabilir.

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. řirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu t r markaların Sonova AG tarafından her t rl  kullanımı lisanslıdır.

iPhone®, Apple Inc. řirketinin ABD ve dięer  lkelerde tescilli ticari markasıdır.


Android, Google LLC řirketinin ticari markasıdır.

IOS®, Cisco Systems, Inc. ve/veya baęlı kuruluřlarının Amerika Birleřik Devletleri'nde ve dięer bazı  lkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

İçindekiler

Hızlı genel bakış	4
myPhonak Junior uygulamasını kurma	6
Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme	7
Ebeveyn Kontrolü	9
Özelleştirme	10
Eşleştirme sorunlarını giderme	11
Remote Control	12
Uzaktan Destek oturumu	13
İşitme Cihazlarım	15
Güvenlik bilgileri ve sembollerin tanımı	16
Sembol açıklaması	20

Hızlı genel bakış - Remote Control

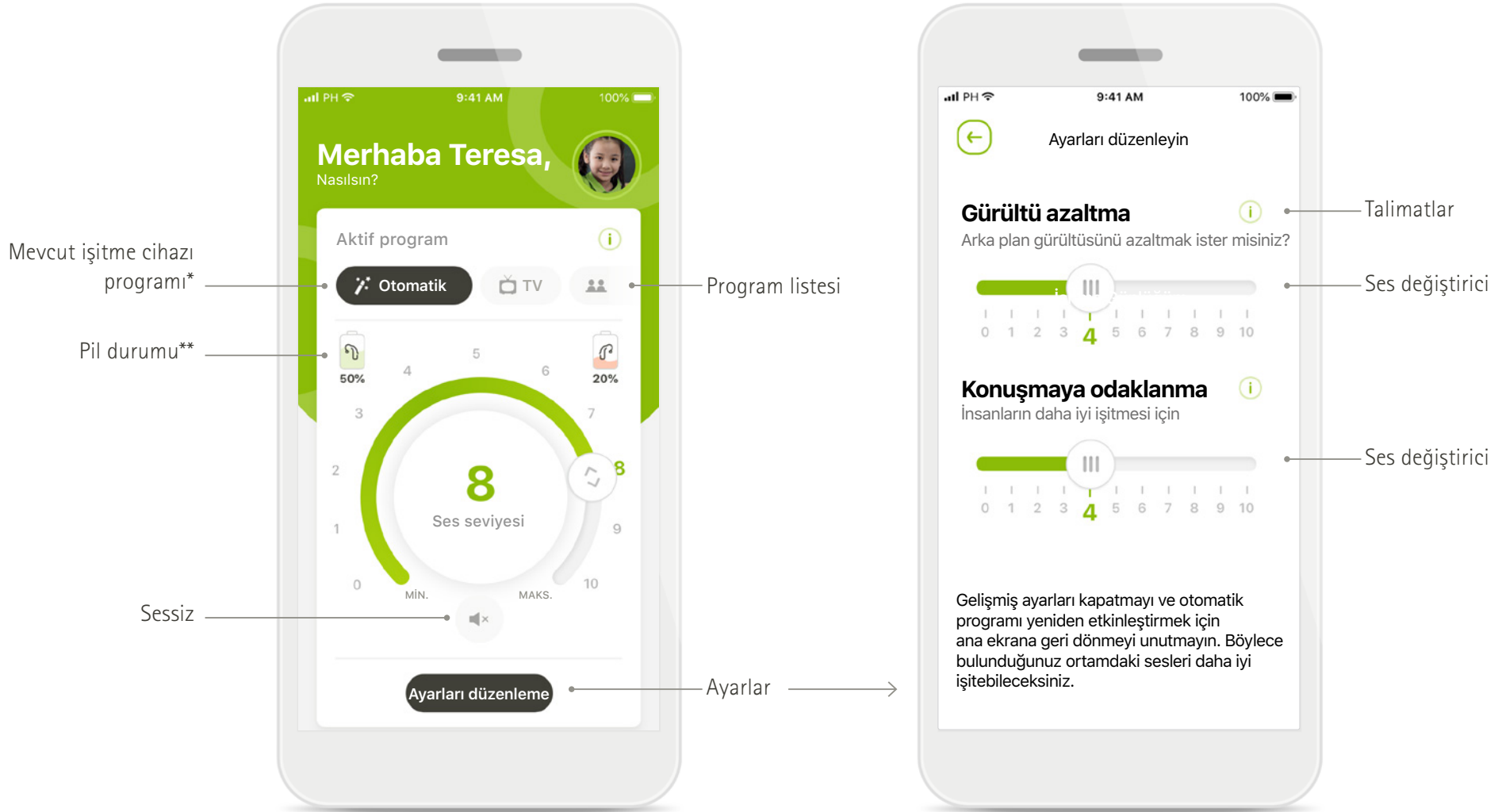


Remote Control

Ayarları düzenleme


*Sky işitme cihazları için AutoSense™ Sky OS. Bolero, Naída ve Audéo işitme cihazları için AutoSense™ OS.

**Yalnızca şarj edilebilir işitme cihazları için mevcuttur

Hızlı genel bakış - Uzaktan Destek*

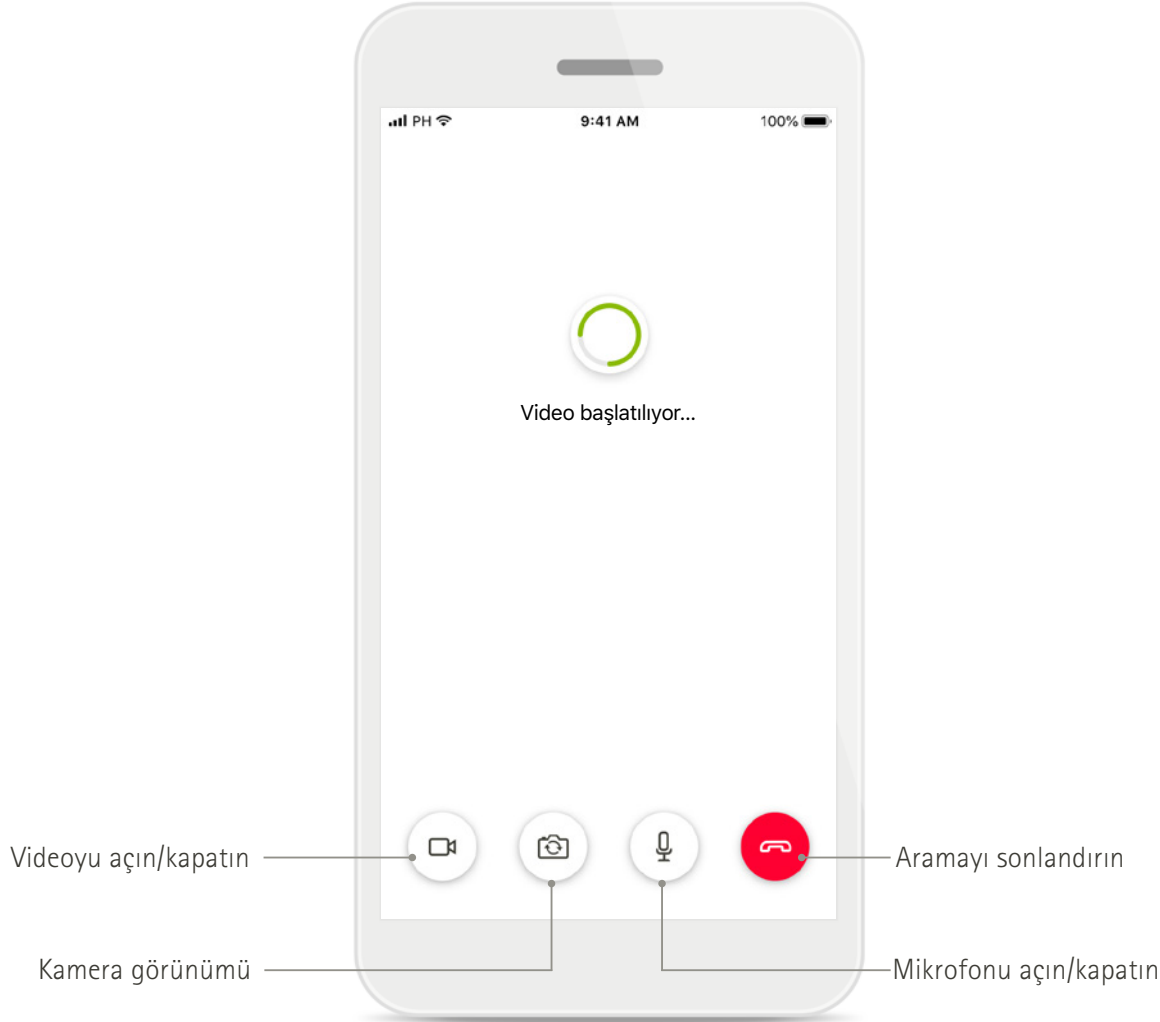

Uzaktan Destek görüşmesi

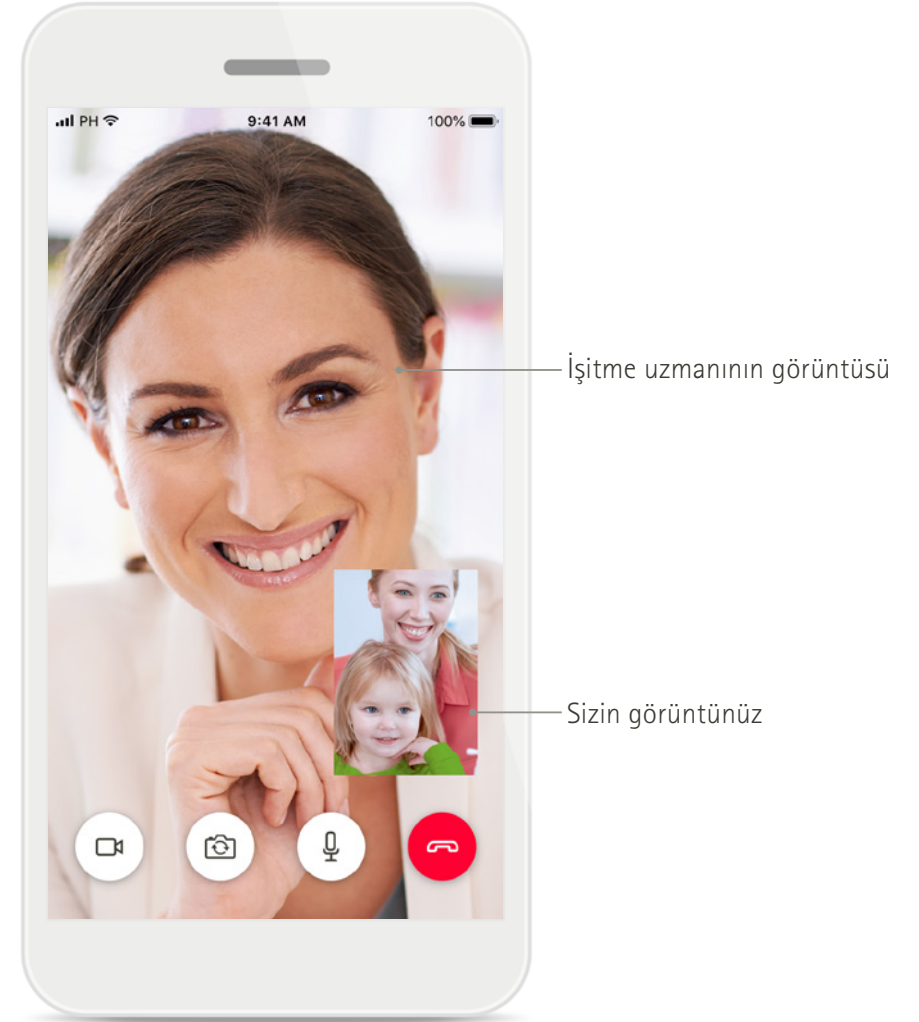


Uzaktan Destek görüşmesi


*Yalnızca belirli ülkelerde ve seçilen işitme uzmanları aracılığıyla kullanılabilir

myPhonak Junior uygulamasını kurma

- Akıllı telefonunuzu WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlayın
- Akıllı telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın

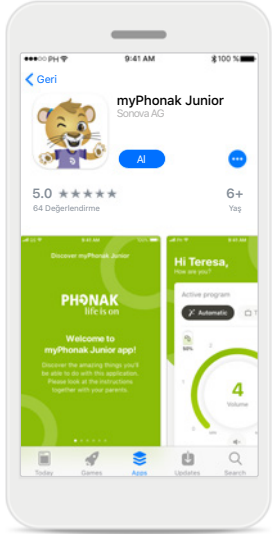


myPhonak Junior uygulamasını indirin
Uygulamayı mağazadan indirin. Kurulumdan sonra myPhonak Junior'ı açın

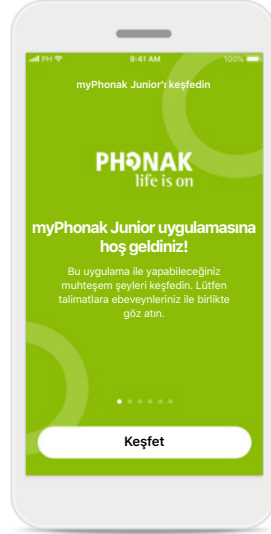


myPhonak Junior'ı açın
Uygulamayı açın ve **Keşfet** öğesine tıklayın.



Gizlilik bildirimi
Uygulamayı kullanmak istiyorsanız, devam edebilmek için Gizlilik Bildirimini kabul etmek üzere **Kabul ediyorum** öğesine tıklamanız gerekir.

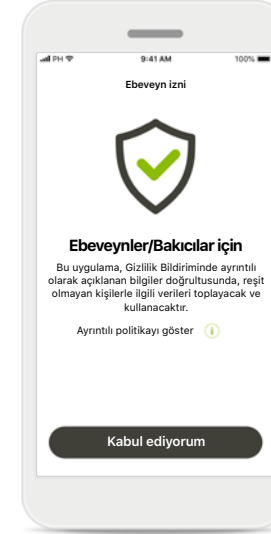


Ebeveyn izni
Uygulamayı kullanmak için bir ebeveyn veya bakıcı olarak ebeveyn iznini kabul etmelisiniz. myPhonak Junior, Gizlilik Bildiriminde verilen bilgiler doğrultusunda reşit olmayan kişilerle ilgili verileri toplar ve kullanır.

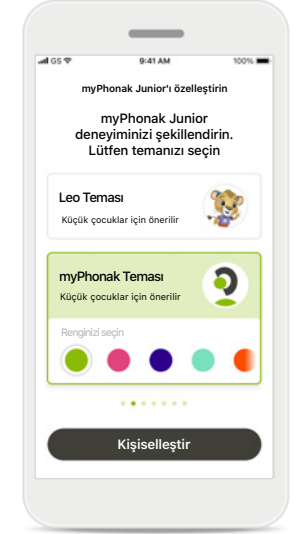

Bir tema seçin
Ebeveynler, bakıcılar veya uygulama kullanıcıları "Leo" ve "myPhonak" temaları arasından seçim yapabilir. Her iki temada da aynı uygulama işlevleri mevcuttur. Tema, alıştırmaya esnasında veya Profilim kısmından seçilebilir.


Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme*

myPhonak Junior'ı Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.**

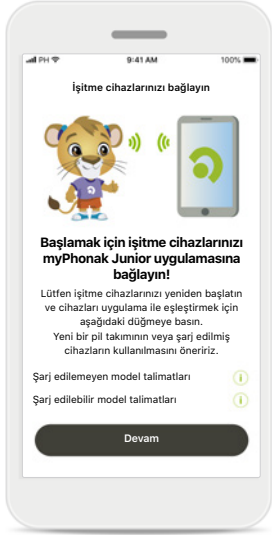


Eşleştirme talimatları

Devam öğesine dokununuz ve işitme cihazlarınıza ilişkin talimatları izleyiniz

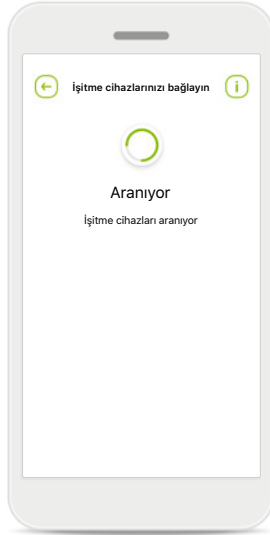


Arama

Uygulama, uyumlu işitme cihazlarını aramaktadır ve bunları tespit eder etmez görüntüleyecektir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

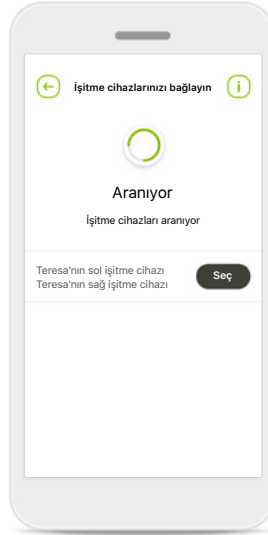


Seçme

İşitme cihazlarınız listede görüldüğünde **Seç** öğesine dokununuz.

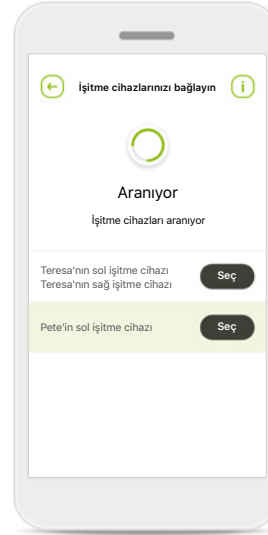

Çoklu

Birden fazla işitme cihazının tespit edilmesi durumunda bunlar uygun şekilde görüntülenir. İşitme cihazınızı vurgulamak için lütfen işitme cihazındaki düğmeye basın.

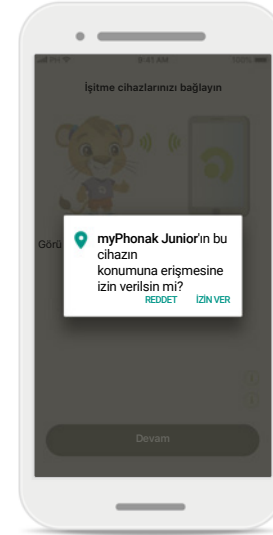

Konum


Android cihazlarda, Bluetooth ile cihazları ilk defa eşleştirirken konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. İlk kurulumdan sonra konum hizmetlerini tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.

*Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P ve Audéo P ile uyumludur.

**Bluetooth aktarımı: İşitme cihazlarınıza müzik aktarımı yapmak için veya telefon çağrılarını işitme cihazlarınızdan almak için lütfen Ayarlar > Bluetooth öğesine gidin ve işitme cihazlarınızı bağlı cihazlar listenize ekleyin. Ardından eşleştirmeye devam etmek için uygulamaya dönün.

Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme*

myPhonak Junior'ı Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

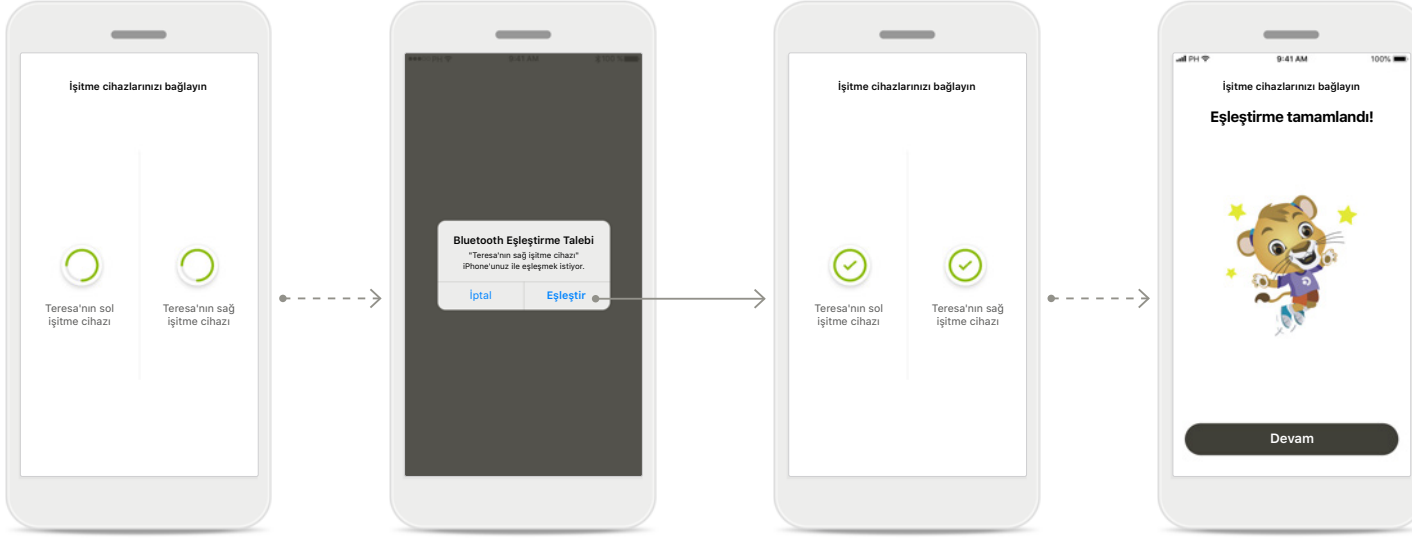

İşitme cihazlarını eşleştirme
Uygulama her bir işitme cihazına ayrı şekilde bağlanacaktır.

Tüm işitme cihazları için onaylayın
İstendiğinde her bir cihaz için ayrı olarak açılır penceredeki **Eşleştir** seçeneğine dokunarak eşleştirmeyi onaylayın.

Eşleştirme tamamlandı
Her iki işitme cihazı da şimdi eşleştirildi. Uygulama otomatik olarak sonraki adıma geçer.

Kurulum tamamlandı
Artık uygulamadaki tüm uyumlu işlevleri kullanmaya hazırsınız. Ana ekrana erişmek için **Devam** öğesine dokununuz.

*Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L ve Audéo L ile uyumludur.

Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn kontrolünü myPhonak Junior ile etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.



Ebeveyn kontrolünü etkinleştirme

Ebeveyn kontrolü alıştırma/uygulama başlangıcında veya daha sonra ebeveynin/bakıcının istediği zaman Profiliniz kısmında etkinleştirilebilir. Bu işlem, şarj edilebilir işitme cihazları için Uzaktan Destek ile Otomatik Açma özelliğine erişimin ve telefon aramaları için Bluetooth bant aralığı seçimine erişimin kısıtlanmasına yardımcı olur.

PIN kodunuzu oluşturun

Ebeveyn kontrolünü etkinleştirmek için 4 haneli bir PIN kodu belirleyin. Bu PIN kodu, ebeveyn/bakıcı tarafından belirlenen herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sıfırlanabilir.

Yedek soru


Bir yedek soru seçin ve doğru yanıtı yazın. Bu soru, 4 haneli PIN kodunuzu unutmanız durumunda, kısıtlı işlevlere erişmeniz için kullanılır.

Ebeveyn kontrolü etkinleştirildi


Yedek soruyu seçtikten ve yanıtı yazdıktan sonra ebeveyn kontrolünü etkinleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyulmaması durumunda ebeveyn kontrolü aynı zamanda uygulama menüsünden de devre dışı bırakılabilir.

Özelleştirme


Özelleştirme seçeneklerini myPhonak Junior uygulaması ile kullanmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

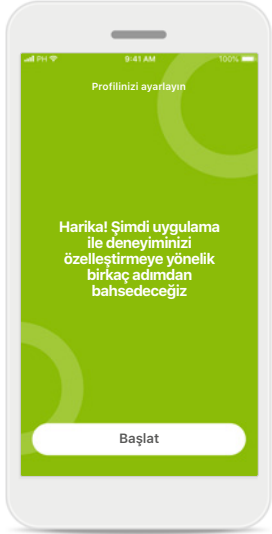


Kişiselleştirmeye başlayın
Özelleştirmeyi alıştırma esnasında veya daha sonra ana ekranın Profiliniz kısmında başlatabilirsiniz.

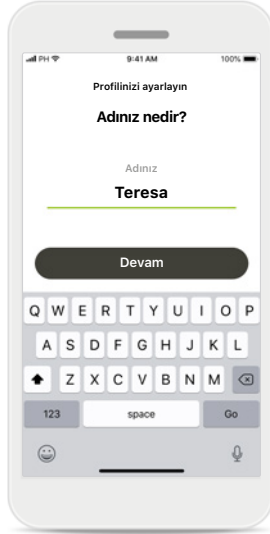

Kullanıcı profil adı
Bir kullanıcı adı seçin.

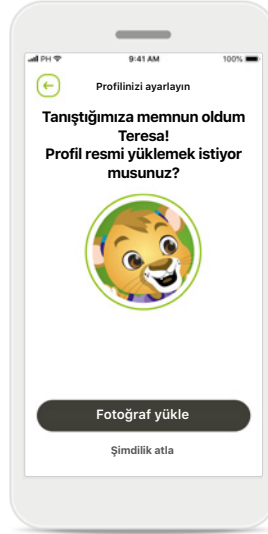

Kullanıcı profil resmi
Bir profil resmi seçin. Bu, atlanabilir ve daha sonra Profiliniz kısmında ayarlanabilir.

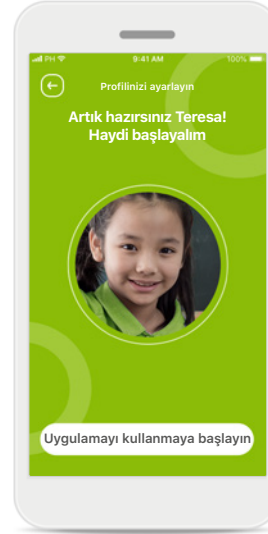


Diğer seçenekler
Diğer kişiselleştirme seçenekleri uygulamanın arka plan renk temasını değiştirmeyi, sanal işitme cihazlarının ve boynuzun renklerini değiştirmeyi içerir.

Eşleştirme sorunlarını giderme

Kurulum sürecindeki olası hatalar.


Sorun gidermeye ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Phonak destek sayfasını ziyaret edin.

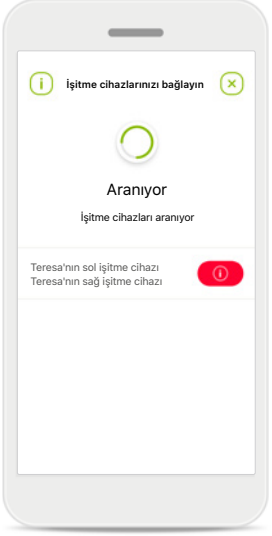

Uyumsuz cihazlar

Uyumsuz oldukları için uygulama cihazlara bağlanamaz.


Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.

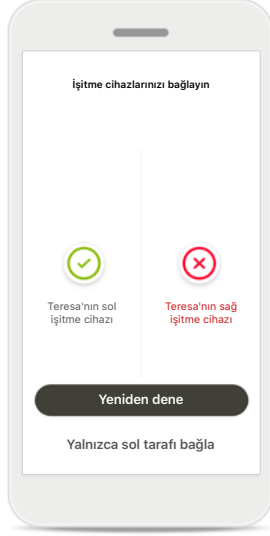

İşitme cihazı bağlantı hatası

İşitme cihazlarından biriyle eşleştirmenin başarısız olması durumunda aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

1. Eşleştirme sürecini yeniden başlatmak için **Yeniden dene** seçeneğine dokununuz.
2. İki işitme cihazının yalnızca biriyle devam edin.

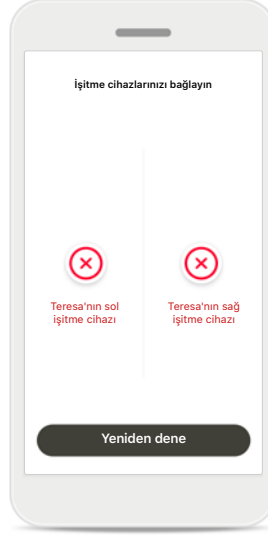


Her iki cihaza da bağlantı başarısız

Eşleştirme sürecini yeniden başlatmak için **Yeniden dene** seçeneğine dokununuz ve talimatları izleyin.


Remote Control ana görünümü

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

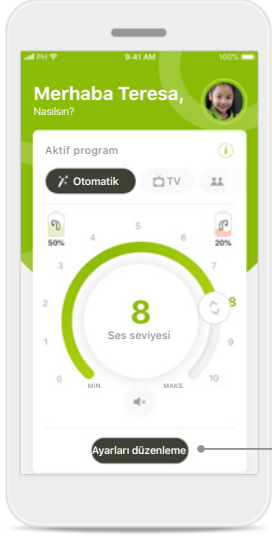


İşitme cihazının ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini değiştirmek için kaydırma çubuğunu hareket ettirin.

Aktif programı değiştirin
Cihazınızı belirli bir işitme ortamına göre ayarlamak için mevcut programlara dokununuz. Mevcut programların hangileri olduğu işitme cihazlarınızın işitme uzmanınız tarafından nasıl ayarlandığına bağlıdır.

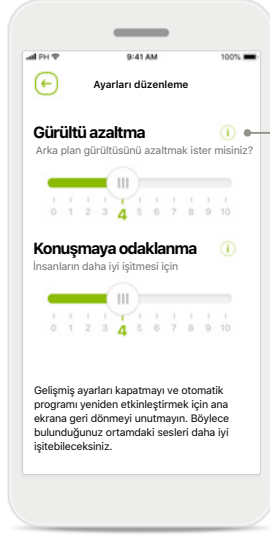


Ayarları düzenleme
Bu ayarlar görünümü aşağıdaki işlevlere erişmenizi sağlar:


- Gürültü azaltma
- Konuşmaya odaklanma

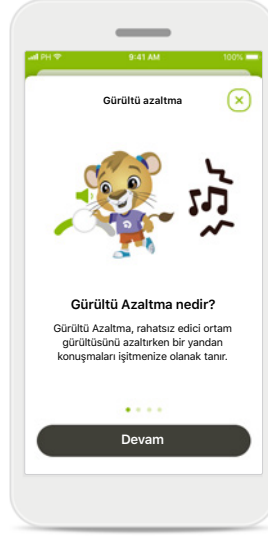

Bilgi
İ simgesine basarak çeşitli özellikler hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

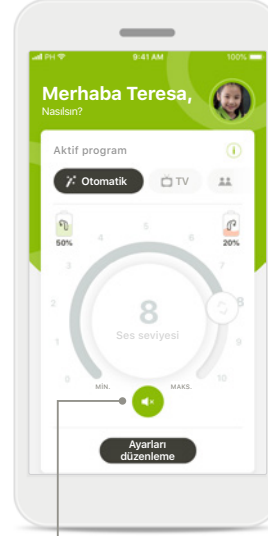


Sessiz
Sessiz simgesine basarak işitme cihazlarınızı sessize alabilirsiniz.

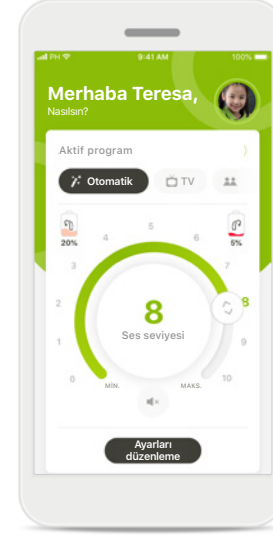

Pil seviyesi düşük
Pil şarj düzeyi %20'nin altına düştüğünde simge kırmızıya döner. En kısa zamanda işitme cihazlarınızı şarj edin.


Uzaktan Destek oturumu

Mobil veri kullanıyorsanız mobil sağlayıcınız sizden ücret alabilir. Lütfen Phonak Uzaktan Destek oturumu başlatmadan önce operatör sağlayıcınıza danışın. Bir Uzaktan Destek oturumu, 10 dakikalık bir görüntülü aramada yaklaşık 56 MB, sesli aramada ise yaklaşık 30 MB kullanır.

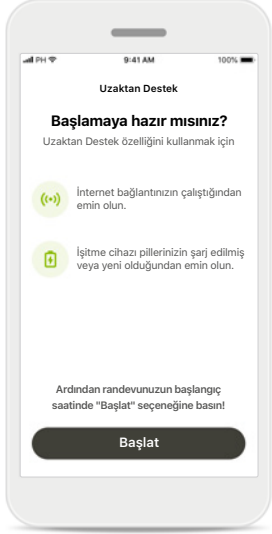


Uzaktan Destek oturumunu başlatma

Randevu saatinde myPhonak Junior'ı açın ve işitme uzmanınıza Phonak Uzaktan Destek randevunuz için hazır olduğunuzu bildirmek üzere **Başlat** seçeneğine dokununuz.

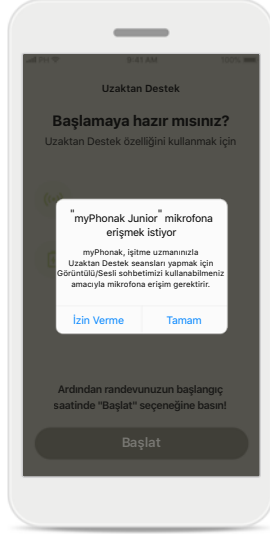


Kamera ve mikrofona erişim

myPhonak Junior'ın kamera ve mikrofona erişmesine izin vermek için **Tamam** seçeneğine dokununuz.

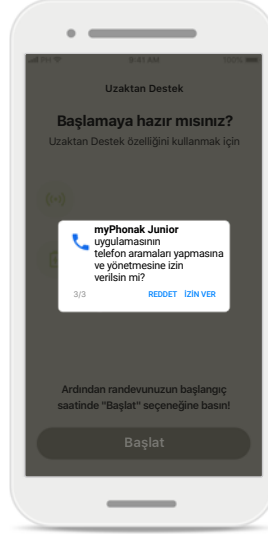

myPhonak aramalarına erişim

Android akıllı telefonunuz varsa myPhonak Junior'ın telefon aramaları yapmasına ve bu aramaları yönetmesine izin vermek için **İZİN VER** öğesine dokununuz.

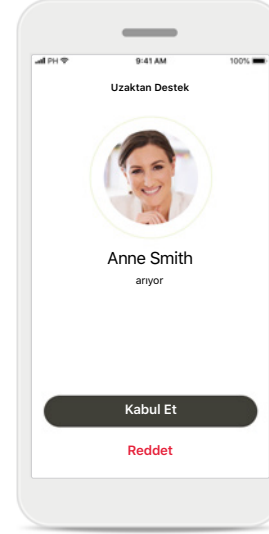


Görüntülü aramaları kabul edin


Uygulama sizi bir işitme uzmanına bağlayacak. İşitme uzmanınızdan gelen aramayı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokununuz.

Uzaktan Destek oturumu


Uzaktan Destek oturumundayken derseniz Görüntü veya Sesi açıp kapatarak deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

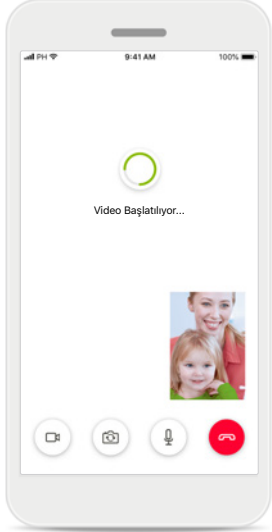


Görüntülü arama başlatma
Video görüntüsü ayarlandıktan birkaç saniye sonra işitme uzmanınızı görebilirsiniz.

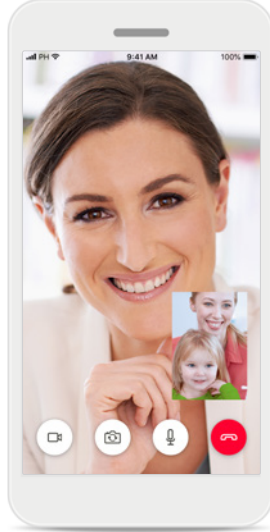


Devam eden arama
Şimdi işitme uzmanınıza bağlısınız.

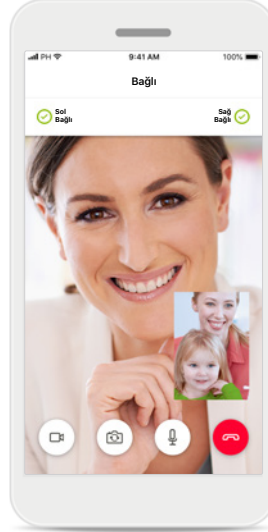

Bağlı işitme cihazları
İşitme uzmanınızın işitme cihazlarınıza bağlanması gerekirse bu, akıllı telefonunuz kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilir. İşitme uzmanınız, işitme cihazlarınıza bağlandığında sizi bilgilendirecek.

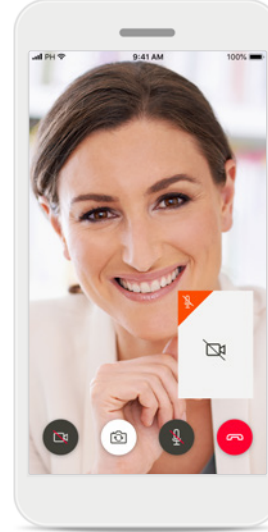

Görüntü yok
Görüntünüzü gizlemek isterseniz bir düğmeye tıklayarak görüntüyü devre dışı bırakabilirsiniz.

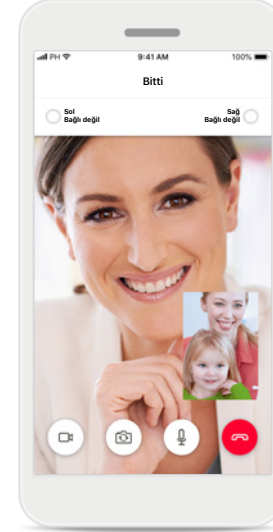


Yeni ayarlar kaydedildi
Bağlantı işlemi sırasında ve ayarlar işitme cihazlarınıza kaydedilirken işitme cihazları bir süreliğine sessize alınacaktır. Durumu ekranınızda görebileceksiniz.

İşitme Cihazlarım


İşitme cihazlarının nasıl programlandığına ve hangi kablosuz aksesuarlara sahip olduğunuza bağlı olan işlevler.




Ebeveyn Kilidi
Ebeveyn kontrolü ile küçük çocukların işitme cihazlarının bağlantısını yanlışlıkla kesmeleri engellenir.

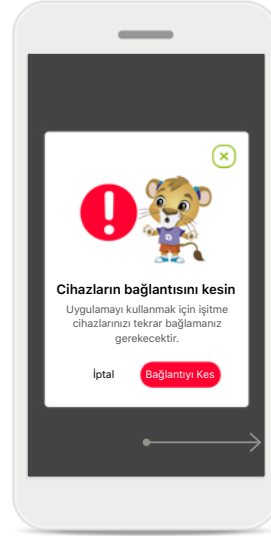

Cihazların bağlantısını kesin
Bağlantıyı Kes öğesine basarak işitme cihazlarınızı kaldırabilirsiniz. Lütfen bunu yaptığınızda, uygulamayı kullanmak için işitme cihazlarınızı tekrar eşleştirmeniz gerekeceğini unutmayın.

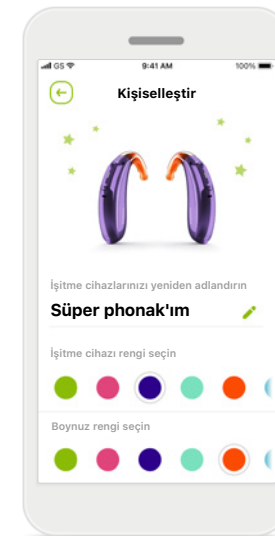

Kişiselleştirme*
Uygulamada görüntülenen işitme cihazı rengi, boynuz rengi ve cihaz adı değiştirilebilir

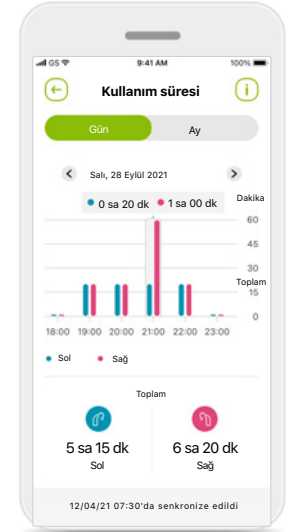

Kullanım süresi*
Kullanım süresi her bir işitme cihazının günlük ve aylık bazda ne süreyle kullanıldığına dair genel bir bakış sağlar. Şarj edilebilir pilli işitme cihazları en fazla kullanım süresi bilgisini sağlar.

İşitme Cihazlarım

"İşitme Cihazlarım" ekranı pil durumuna (şarj edilebilir cihazlar), işitme cihazınızın türüne, yüklü Roger lisanslarına, Kullanım süresine, Programlarım bölümüne, Otomatik Açma davranışına ve Bluetooth telefon görüşmelerine dair kıymetli bilgiler sağlar. İşitme cihazlarınızın görünümü de burada özelleştirilebilir.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamayı kullanmadan önce sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanım amacı:

Uygulamanın kullanım amacı, mevcut işitme cihazı işlevlerini seçmek, ayarlamak ve kaydetmek, durum bilgilerine erişmek ve Son Kullanıcı ile İşitme Uzmanı arasında kablosuz olarak görsel bir iletişim kurmaktır.

Hedef hasta popülasyonu:

Bu çözümün hedef hafta popülasyonu, işitme cihazlarını günlük hayatlarında karşılaşılabilecekleri durumlara göre optimize edebilme kolaylığına önem veren, ayarlamalar için kliniğe gitmeme esnekliğine sahip olan ve deneyimlerini paylaşmak isteyen Son Kullanıcılardır (mesleğe yabancı kişilerdir).

• Hedef Profil:

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 2

Tüm uygulama sürümleri için geçerli tüm dillerde elektronik formatta kullanım kılavuzuna web sayfası üzerinden erişilebilir. Kullanım kılavuzlarına erişmek için adımları izleyin:

- <https://www.phonak.com/en-int/support> bağlantısına tıklayın ve ilgili ülkeyi seçin
- "Destek" (İngilizce "Support") veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Kullanım Kılavuzları"na (İngilizce "User Guide") veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Uygulamalar"a (İngilizce) veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "myPhonak Junior uygulaması"nı seçin

Alternatif olarak, myPhonak Junior kullanım kılavuzunun geçerli sürümüne, Destek bölümüne gidip "Kullanım Kılavuzu" adlı karta dokunularak doğrudan uygulamadan erişilebilir. Bu durumda kullanım kılavuzu harici bir tarayıcı penceresinde açılır.

Güvenlik bildirimi

Kullanıcı verileri gizli verilerdir ve korunmaları önemlidir:

- Akıllı telefonlarda en son İşletim Sistemi güvenlik güncellemelerinin kurulu olduğundan emin olun. Otomatik güncellemeyi etkinleştirin.
- Kurulu uygulama sürümünüzün güncel olduğundan emin olun
- İşitme cihazlarınızla birlikte yalnızca, resmi mağazalardan alınan orijinal Sonova uygulamalarını kullanın.
- Yalnızca resmi mağazalardan alınan güvenilir uygulamaları kurun
- Güçlü şifreler kullandığınızdan ve kimlik bilgilerini gizli tuttuğunuzdan emin olun
- Telefonu PIN ve/veya biyometrik (örn. parmak izi, yüz) ayarlar ile kilitleyin ve telefonu birkaç dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayın.
- Kurulu uygulamalara yalnızca gerekli olan izinlerin verildiğinden emin olun
- Halka açık bir alanda işitme cihazlarınızla Bluetooth eşleştirmesi oluşturmaktan kaçının. Bunun nedeni, bir üçüncü tarafın istenmeyen müdahalesi riskidir. Bu Bluetooth eşleştirmesini evde yapmanızı öneririz.
- Yazılım kısıtlamaları kaldırılmış veya root erişim izni verilmiş bir telefon KULLANMAYIN

Verileri her zaman güvende tuttuğunuzdan emin olun.

Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını aklınızda bulundurun.

- Verileri güvenli olmayan kanallar üzerinden aktarırken anonim veriler gönderin veya verileri şifreleyin.
- Akıllı telefonunuzun veri yedeklerini sadece veri kaybına karşı değil, aynı zamanda hırsızlığa karşı da koruyun.
- Artık kullanmayacağınız veya atacağınız bir akıllı telefondaki tüm verileri kaldırın.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamayı kullanmadan önce sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Yazılım bakımı:

Piyasadan edindiğimiz geri bildirimleri devamlı olarak izlemekteyiz. En son uygulama sürümüyle ilgili sorunlarla karşılaşmanız halinde, lütfen yerel üretici temsilcinizle iletişime geçin ve/veya Appstore veya Google Play Store'da geri bildirimde bulunun.

Endikasyonlar

Lütfen endikasyonların mobil uygulamadan değil, uyumlu işitme cihazlarından kaynaklandığını unutmayın. İşitme cihazları ve Tinnitus Balance kullanımına yönelik genel klinik endikasyonlar şöyledir:

- İşitme kaybı varlığı
 - Tek taraflı veya çift taraflı
 - İletim tipi, sensörinöral veya mikst tip
 - Hafif ile ileri derecede
- Kronik tinnitus varlığı (yalnızca Tinnitus Balance sunan işitme cihazları)

Kontrendikasyonlar

Lütfen kontrendikasyonların mobil uygulamadan değil, uyumlu işitme cihazlarından kaynaklandığını unutmayın. İşitme cihazları ve Tinnitus Balance kullanımına yönelik genel klinik kontrendikasyonlar şöyledir:

- İşitme kaybının, işitme cihazının fitting aralığında olmaması (kazanç, frekans cevabı)
- Akut tinnitus
- Kulakta deformite (kapalı kulak kanalı, kulak kepçesi bulunmaması)
- Nöral işitme kaybı (mevcut olmayan/cansız işitme siniri gibi retrokoklear patolojiler)

Bir kullanıcının tıbbi görüş veya başka bir uzman görüşü ve/veya tedavisi almak üzere sevk için birincil kriterler şunlardır:

- Kulakta görünür doğuştan veya travmatik biçim bozukluğu Önceki 90 gün içinde kulaktan aktif akıntı geçmişi
- Önceki 90 gün içinde bir veya her iki kulakta ani veya hızla ilerleyen işitme kaybı geçmişi
- Akut veya kronik baş dönmesi
- 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz'de 15 dB veya üzerinde odyometrik hava-kemik aralığı
- Kulak kanalında belirgin serümen birikimi veya yabancı cisme ilişkin görünür kanıt
- Kulakta ağrı veya rahatsızlık hissi

- Kulak zarı ve kulak kanalında anormal görünüm, örneğin:
 - Dış kulak yolu kanalında enflamasyon
 - Perfore kulak zarı
 - İşitme uzmanının tıbbi sorun teşkil ettiğini düşündüğü başka anomaliler

İşitme uzmanı, aşağıdaki durumlarda sevk uygun olmadığına veya hastanın yararına olmadığına karar verebilir:

- Rahatsızlığın bir tıp uzmanı tarafından tam olarak araştırıldığına ve olası herhangi bir tedavi sağlandığına dair yeterli kanıt bulunduğu.
- Önceki araştırma ve/veya tedaviden bu yana rahatsızlığın kötüye gitmemiş veya önemli ölçüde değişiklik göstermemiş olması
- Hasta, tıbbi görüş alması yönündeki tavsiyeyi kabul etmeme konusunda bilinçli ve yetkin bir karar vermişse, aşağıdaki hususlara tabi olmak üzere uygun işitme cihazı sistemlerinin tavsiye edilmeye devam edilmesine izin verilir:
 - Tavsiyenin hastanın sağlığı veya genel iyilik hali üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır
 - Kayıtlar, hastanın yararına en uygun koşullar hakkında gerekli tüm değerlendirmelerin yapıldığını doğrulamaktadır. Yasal olarak gerekmesi halinde, kullanıcı, sevk tavsiyesinin kabul edilmediğini ve bunun bilinçli bir karar olduğunu teyit etmek üzere bir feragatname imzalamıştır.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamayı kullanmadan önce sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanım sınırlaması

Uygulamanın kullanımı uyumlu cihazın/cihazların özellikleriyle sınırlıdır.

Yan etkiler:

Lütfen yan etkilerin mobil uygulamadan değil, uyumlu işitme cihazlarından kaynaklandığını unutmayın. İşitme cihazlarının tinnitus, baş dönmesi, serümen birikimi, aşırı basınç, terleme veya nem, su toplama, kaşıntı ve/veya kızarıklık, tıkanma veya doluluk gibi fizyolojik yan etkileri ve bunların baş ağrısı ve/veya kulak ağrısı gibi sonuçları, işitme uzmanınız tarafından çözülebilir veya hafifletilebilir. Konvansiyonel işitme cihazları, kullanıcıları daha yüksek ses seviyelerine maruz bırakır ve dolayısıyla, akustik travmadan etkilenen frekans aralığında eşik kaymalarına yol açma potansiyeline sahiptir.

Fayda

Uygulama, ilk fitting'in izin verdiği menzil dahilinde ayarlama yapma olasılığı sunarak hedef kullanıcılara fayda sağlar.

Uygulama, hedef kullanıcıların uzaktan işitme cihazı ayarlarıyla ilgili olarak işitme uzmanları ile iletişim kurmaları için pratik bir yöntem sunar.

Uygulama ile ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olay, üretici temsilcisine ve ikamet edilen ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir. Ciddi olay, aşağıdakilerden herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek her türlü olay olarak tanımlanır:

- kullanıcının veya başka bir kişinin ölümü
- kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunun geçici veya kalıcı olarak önemli ölçüde bozulması
- ciddi bir halk sağlığı tehdidi

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamayı kullanmadan önce sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.



Kişisel akıllı telefonun kullanım sorumluluğu size aittir. Lütfen kişisel akıllı telefonu ve uygulamayı dikkatli bir şekilde kullanın.



Amplifikasyonun azaltılması, ses gidericinin artırılması, uyarı sinyallerinin veya güvenliğe ilişkin sinyallerin duyulabilirliğini azaltabilir. Bu, tehlikeli durumlara yol açabilir.



Kullanım talimatlarının ücretsiz basılı bir kopyasını edinmek için lütfen yerel Sonova temsilcinizle irtibat kurun. Tarafınıza 7 gün içinde bir nüshası gönderilecektir.



İşitme cihazları olağan dışı bir alan bozulmasından dolayı ses aktarım cihazınıza yanıt vermiyorsa, rahatsız edici alandan uzaklaşın.



İşitme cihazları yanıt vermiyorsa lütfen işitme cihazlarının açık olduğundan ve pilin boş olmadığından emin olun.



Bluetooth'unuzu etkinleştirin. İşitme cihazlarınıza bağlanabilmesi için Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekir.

Sembol açıklaması

	Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri okuyup dikkate almasının önemli olduğunu gösterir.
	Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili uyarı notlarına dikkat etmesinin önemli olduğunu gösterir.
	Kullanım ve ürün güvenliği için önemli bilgiler.
	Sonova AG, CE sembolüyle bu Phonak ürününün Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC'nin gerekliliklerini karşıladığını onaylar. CE işareti 2021'de uygulanmıştır. CE sembolünden sonra gelen sayılar yukarıda bahsi geçen direktifler uyarınca danışılan lisanslı kuruluşların koduna karşılık gelir.
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili temsilciyi belirtir. Avrupa Yetkili Temsilcisi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ithalatçısıdır.
	Cihazın bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir
 Ad, adres, tarih	2017/745 sayılı AB Yönetmeliğinde (AB) tanımlandığı şekilde, "tıbbi cihaz üreticisi" ve "üretim tarihi" birleşik sembolü.
	Elektronik kullanım talimatlarının mevcut olduğuna dair bir gösterge. Talimatlara phonak.com/junior/userguide web sitesinden erişilebilir.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · İsviçre

EC REP

Sonova Almanya GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Almanya

V3.01/2023-06/PM © 2021-2023 Sonova AG Tüm hakları saklıdır

Bu kullanım kılavuzu, myPhonak Junior 1.2 ve myPhonak Junior 1 uygulamasının sonraki alt sürümleri için geçerlidir.

Uygulamanın kullanım kılavuzunun önceki sürümü için lütfen yerel temsilcinizle iletişime geçin veya web sitesine başvurun.

CE
0459