


myPhonak Junior

Kullanım Kılavuzu – myPhonak Junior 2

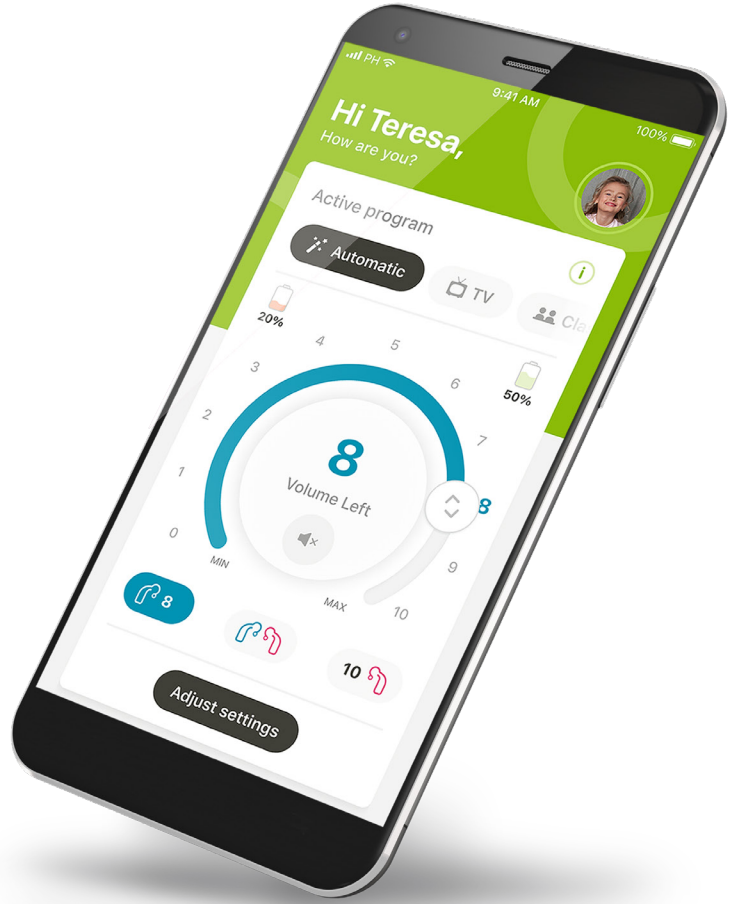

Başlangıç

myPhonak Junior, merkezi İsviçre'nin Z rih kentinde yer alan, iřitme     mlerinde d nya lideri Sonova tarafından geliřtirilmiř bir uygulamadır. Sunulan t m imkanlardan yararlanmak i in kullanım talimatlarının tamamını okuyun.

Bu kullanım kılavuzu, myPhonak Junior uygulamasının  zelliklerini ve bu  zelliklerin kullanıcı tarafından nasıl kullanılabileceğini a ıklar. Aynı zamanda belirli  zelliklerin  ocuklar tarafından yalnızca bir ebeveynle birlikteyken kullanılabileceği řekilde ebeveyn kontrol  ile nasıl engelleneceğini a ıklar. Uygulamayı kullanmaya bařlamadan  nce bu kullanım kılavuzunu bařtan sona okuyun.

Biliřsel geliřim aynı yařtaki  ocuklarda dahi farklılık g sterir. myPhonak Junior kullanımına uygunluđu belirlemek i in olgunluk seviyesi ve risk farkındalıđının her bir  ocuk i in ayrı olarak deđerlendirilmesi gerekir. Daha fazla g venlik bilgisi i in l tfen sayfa 17'daki " nemli g venlik bilgileri" b l m ne bakın. Kılavuzda ilk olarak ařađıdaki  nerilerden yararlanılabilir:

- Uygulama, 10 yař altındaki  ocuklar i in ayarlama yapma amacıyla kullanılmamalıdır.
-  ocuk, ayarlamamanın yararı hakkında g venilir feedback sađlayamadık a, uygulamayı bir  ocuk i in ayarlamalar yapmak i in kullanmayın.
- Arařtırmalar, 10 yař ve  zeri  ocukların uygulamayı g zetimsiz olarak uygun řekilde kullanılabileceğini g stermiřtir. Bir  ocuđun uygulamayı g zetimsiz olarak kullanmaya hazır olup olmadığını deđerlendirirken, uygulama ayarlarının, iřitme durumlarını ve etraflarındaki seslerin farkındalıđını nasıl etkileyeceği hakkında bilin li kararlar alabileceđinden emin olun.
- Uyarı mesajlarını okuyabilme ve anlayabilme kabiliyeti esastır.

Başlangıç



Uyumluluk bilgisi:

myPhonak Junior'ın kullanılabilmesi için Bluetooth® bağlantısına sahip Phonak işitme cihazları gereklidir.

- myPhonak Junior, iOS® Sürüm 16 veya üzerinde çalışan, Bluetooth® düşük enerji (DE) özelliğine sahip telefonlarda kullanılabilir.
- myPhonak Junior, Bluetooth® 4.2 ile Android OS 10 ve üzerini destekleyen Google Mobil Servisleri (GMS) sertifikalı Android™ cihazlarda kullanılabilir.

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Android, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.

IOS®, Cisco Systems, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer bazı ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

İçindekiler


Hızlı genel bakış	5
myPhonak Junior uygulamasını yükleme	7
Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme	8
Ebeveyn Kontrolü	10
Özelleştirme	11
Eşleştirme sorunlarını giderme	12
Remote Control ana görünümü	13
Auracast™ Yayını Kullanımı*	14
Uzaktan Destek oturumu	15
İşitme Cihazlarım	17
Önemli güvenlik bilgileri	18
Uyumluluk bilgileri	21
Sembol açıklaması	22

Hızlı genel bakış - Remote control

Remote Control

Kullanımdaki mevcut program*


Sessize al/sesi aç

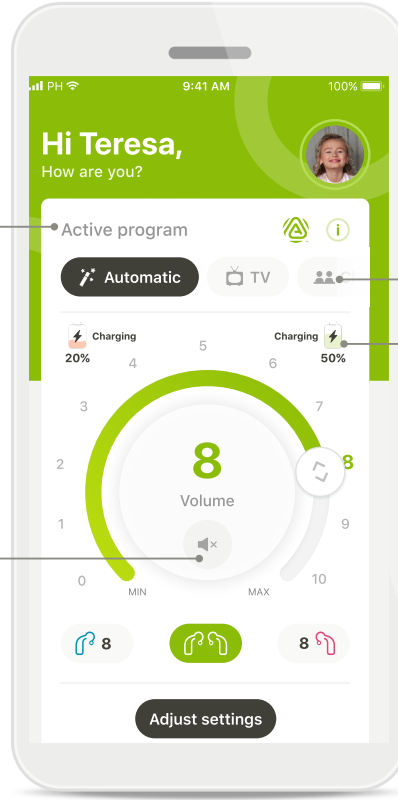

Program menüsü

Pil durumu**

Ayarları düzenleme

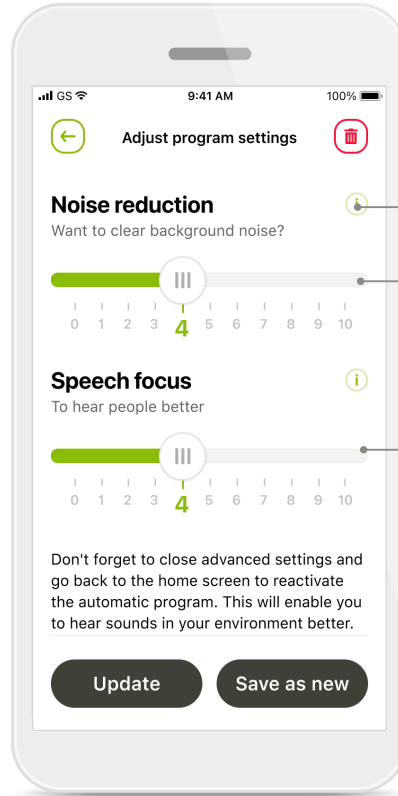

Talimatlar



Ses değiştirici

Ses değiştirici

*Sky işitme cihazları için AutoSense™ Sky OS. Bolero, Naída ve Audéo işitme cihazları için AutoSense™ OS.


**Yalnızca şarj edilebilir işitme cihazları içindir.

Hızlı genel bakış - Uzaktan Destek*

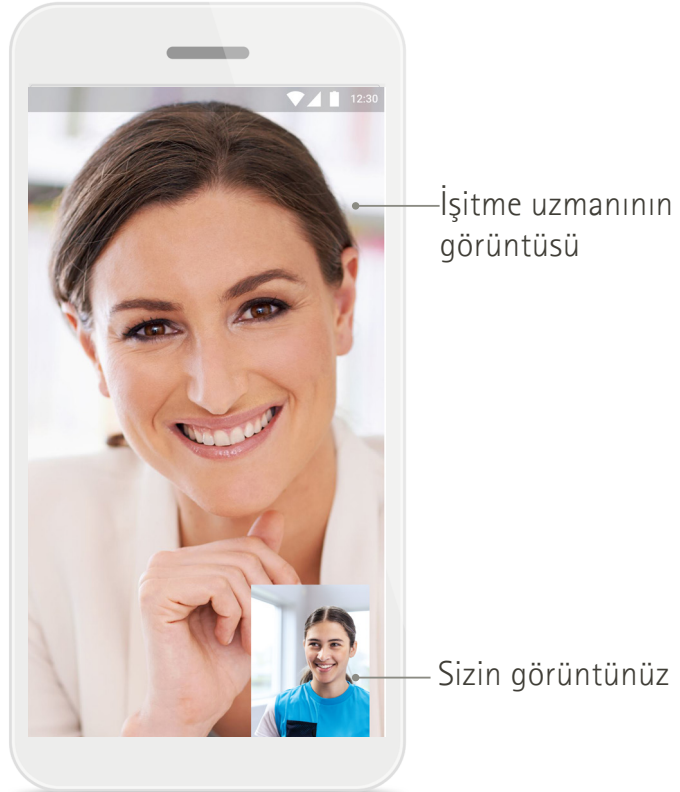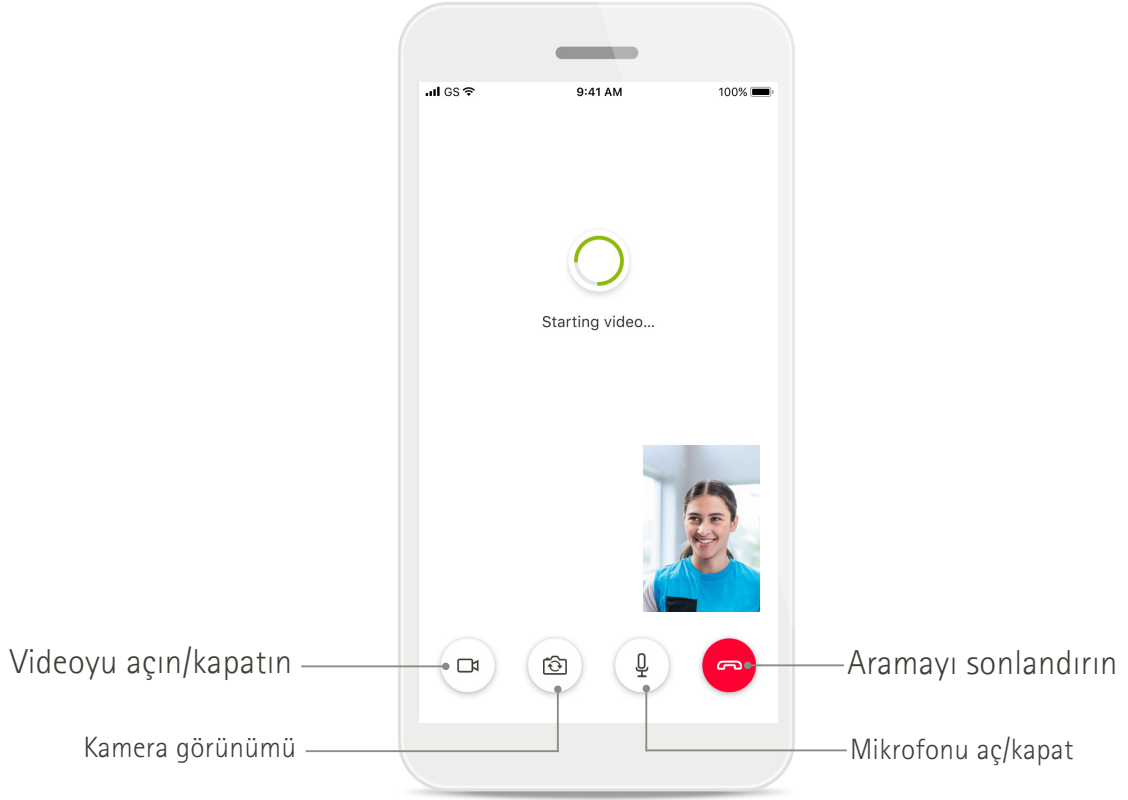


myPhonak Junior uygulamasını yükleme

1. Akıllı telefonunuzu WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlayın.
2. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® özelliğini açın.
3. Uygulama mağazasından myPhonak Junior uygulamasını indirip telefonunuza yükleyin.
4. Uygulamayı açın ve Devam Et'e dokununuz.
5. Uygulamayı kullanmak için Gizlilik Bildirimini kabul etmek üzere Kabul ediyorum ögesine tıklamanız gerekir.

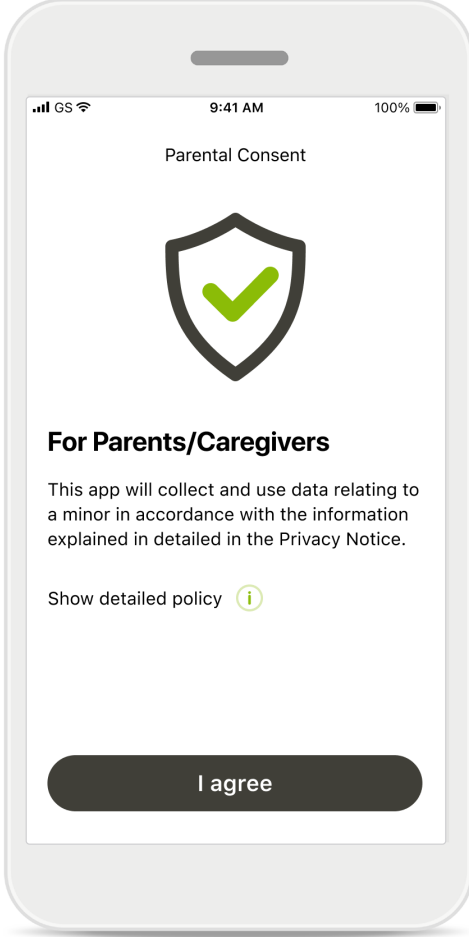

Ebeveyn izni

Uygulamayı kullanmak için bir ebeveyn veya bakıcı olarak ebeveyn iznini kabul etmelisiniz. myPhonak Junior, Gizlilik Bildiriminde verilen bilgiler doğrultusunda reşit olmayan kişilerle ilgili verileri toplar ve kullanır.


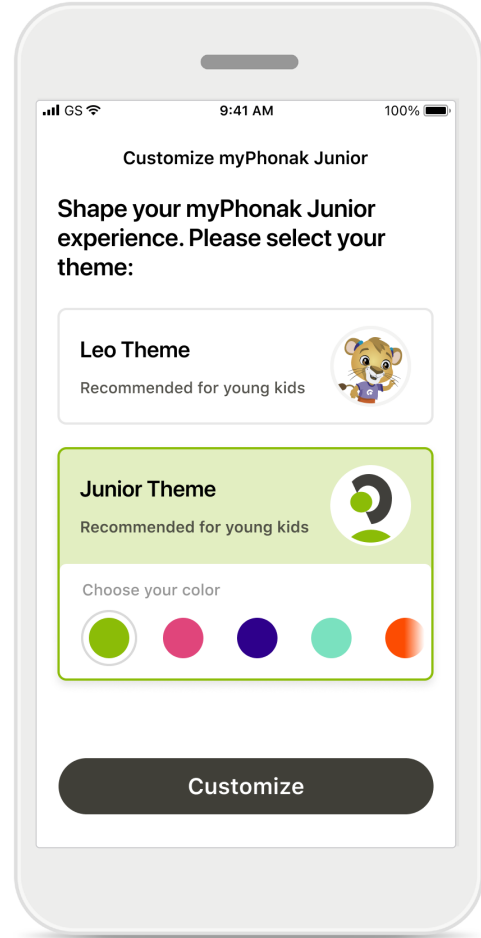


Bir tema seçin

Ebeveynler, bakıcılar veya uygulama kullanıcıları "Leo" ve "myPhonak" temaları arasından seçim yapabilir. Her iki temada da aynı uygulama işlevleri mevcuttur. Tema, alıştırmalar esnasında veya Profilim kısmından seçilebilir.

Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme*

myPhonak Junior'ı Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.**

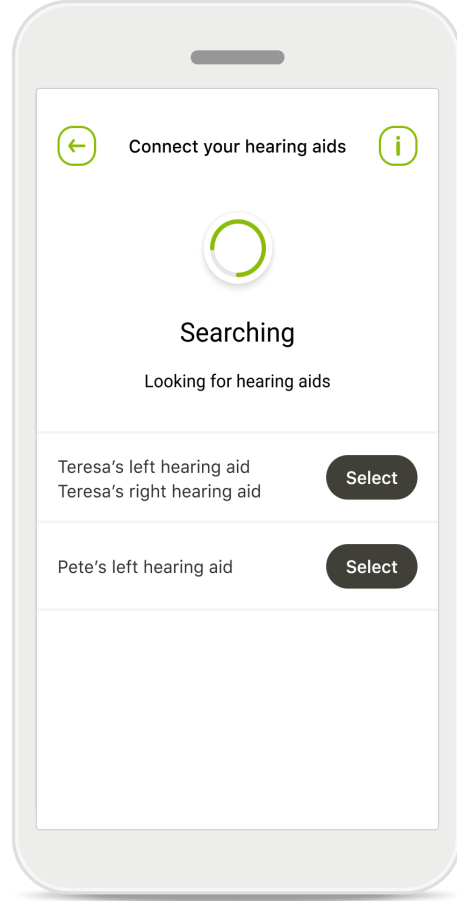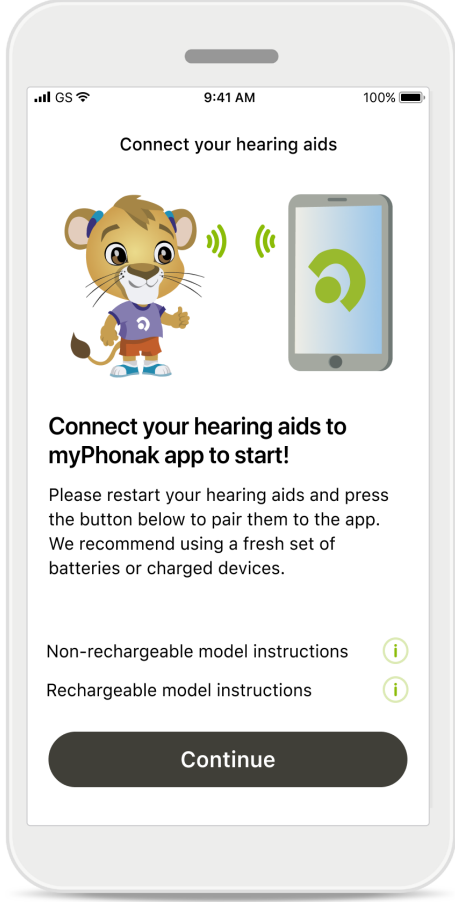

Eşleştirme talimatları

Devam ögesine dokununuz ve işitme cihazlarınıza ilişkin talimatları izleyin.

Uygulama, uyumlu işitme cihazlarını aramaktadır ve bunları tespit eder etmez görüntüleyecektir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

İşitme cihazlarınız listede görüldüğünde **Seç** ögesine dokununuz.

Çoklu

Birden fazla işitme cihazının tespit edilmesi durumunda bunlar uygun şekilde görüntülenir. İşitme cihazınızı vurgulamak için lütfen işitme cihazınızdaki düğmeye dokununuz.

Android cihazlarda Bluetooth özellikli cihazları ilk kez eşleştirirken konum servislerini etkinleştirmeniz gerekir. İlk kurulumdan sonra konum hizmetlerini tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.


*Belirli işitme cihazlarıyla uyumludur.

<https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

**Bluetooth ses aktarımı: İşitme cihazlarınızda müzik aktarımı yapmak veya telefon aramalarını almak için lütfen Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve işitme cihazlarınızı bağlı cihazlar listenize ekleyin. Ardından eşleştirmeye devam etmek için uygulamaya dönün.

Uyumlu işitme cihazları ile eşleştirme*

myPhonak Junior'ı Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş işitme cihazlarına bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.**

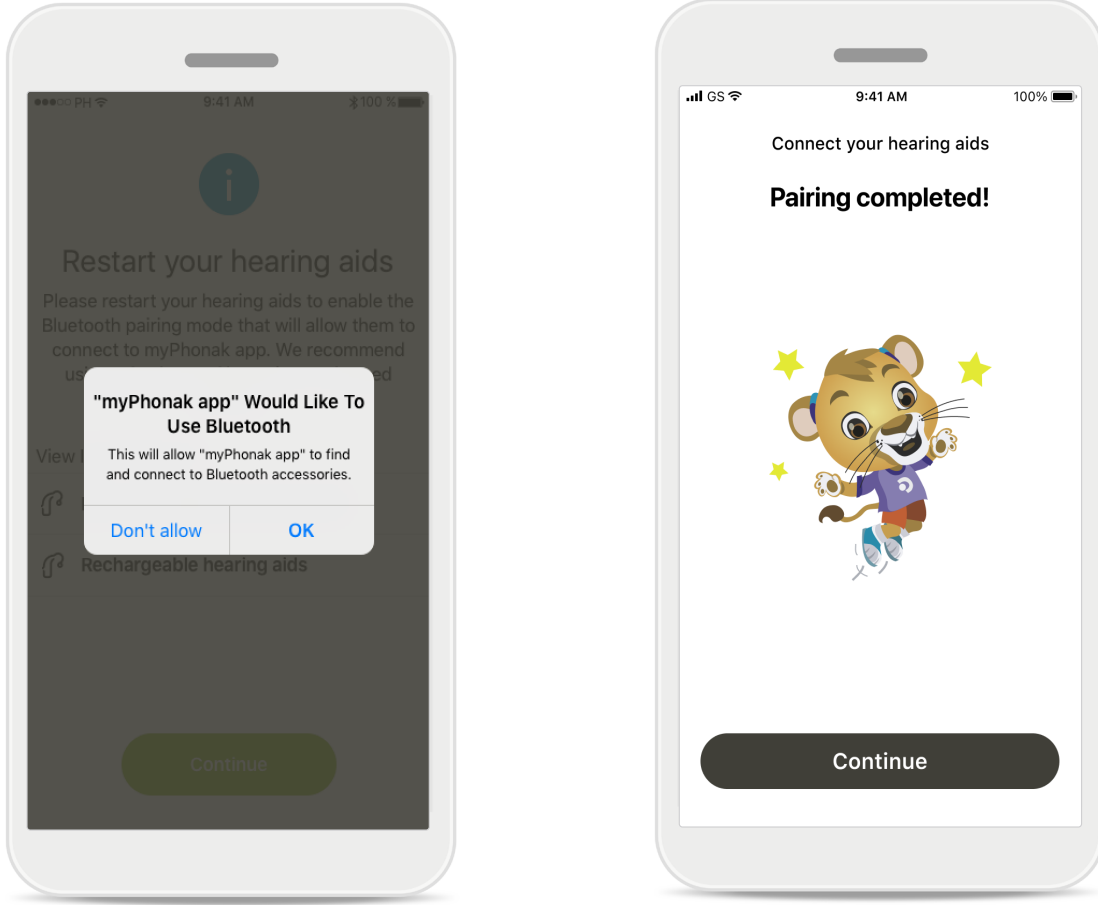

İşitme cihazlarını eşleştirme

Uygulama her bir işitme cihazına ayrı şekilde bağlanacaktır.

İstendiğinde her bir cihaz için ayrı olarak açılır penceredeki **Eşleştir** seçeneğine dokunarak eşleştirmeyi onaylayın.

Uygulama otomatik olarak sonraki adıma geçer.

İşitme Cihazlarım bölümünde **Bağlantıyı Kes** seçeneğine dokunarak işitme cihazlarınızın uygulama ile bağlantısını kesebilirsiniz. Uygulamayı gelecekte tekrar kullanmak için işitme cihazlarını yeniden bağlamanız gerekecektir.

Kurulum tamamlandı

Artık uygulamadaki tüm uyumlu işlevleri kullanmaya hazırsınız. Ana ekrana erişmek için **Devam** ögesine dokununuz.

*Belirli işitme cihazlarıyla uyumludur. <https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

**Bluetooth ses aktarımı: İşitme cihazlarınızda müzik aktarımı için veya telefon aramaları almak için lütfen Ayarlar > Bluetooth ögesine gidin ve işitme cihazlarınızı, bağlı cihazlar listenize ekleyin. Ardından eşleştirmeye devam etmek için uygulamaya dönün.

Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn kontrolünü myPhonak Junior ile etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

1

Ebeveyn kontrolünü etkinleştirme

Ebeveyn kontrolü alıştırmada/uygulama başlangıcında veya daha sonra ebeveynin/bakıcının istediği zaman **Profiliniz** kısmında etkinleştirilebilir. Bu işlev, şarj edilebilir işitme cihazları için Uzaktan Destek, Ayrı Ses Kontrolü, Otomatik Açma özelliğine erişimin ve telefon aramaları için Bluetooth* bant aralığı seçimine erişimin kısıtlanmasına yardımcı olur.

2

PIN kodunuzu oluşturun

Ebeveyn kontrolünü etkinleştirmek için 4 haneli bir PIN kodu tanımlayın. Bu PIN kodu, ebeveyn/bakıcı tarafından belirlenen herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sıfırlanabilir.

3

Yedek soru

Bir yedek soru seçin ve doğru yanıtı yazın. Bu soru, 4 haneli PIN kodunuzu unutmanız durumunda, kısıtlı işlevlere erişmeniz için kullanılır.

4


Ebeveyn kontrolü etkinleştirildi

Yedek soruyu seçtikten ve yanıtı yazdıktan sonra ebeveyn kontrolünü etkinleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyulmaması durumunda ebeveyn kontrolü aynı zamanda uygulama menüsünden de devre dışı bırakılabilir.

Özelleştirme


myPhonak Junior uygulamasıyla özelleştirme seçeneklerini kullanmak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

Özelleştirmeyi alıştırmaya esnasında veya daha sonra ana ekranın Profiliniz kısmında başlatabilirsiniz.

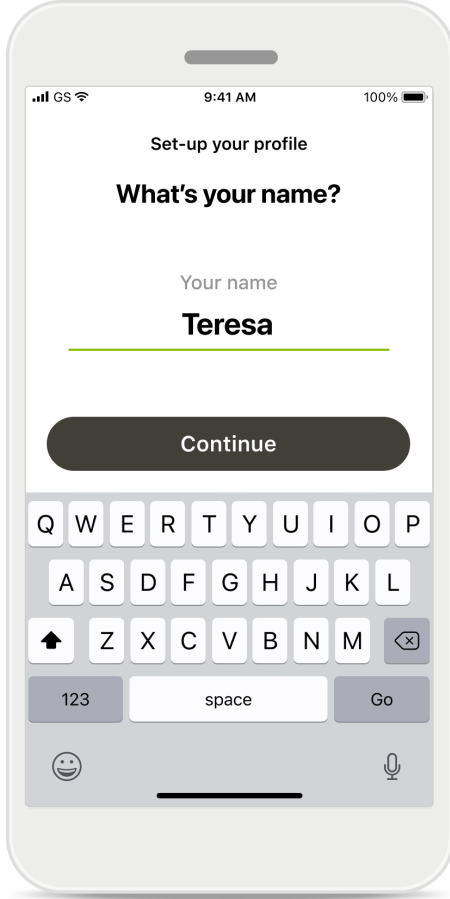

Kullanıcı profil adı

Bir kullanıcı adı ve profil resmi seçin. Bu, atlanabilir ve daha sonra Profiliniz kısmında ayarlanabilir.

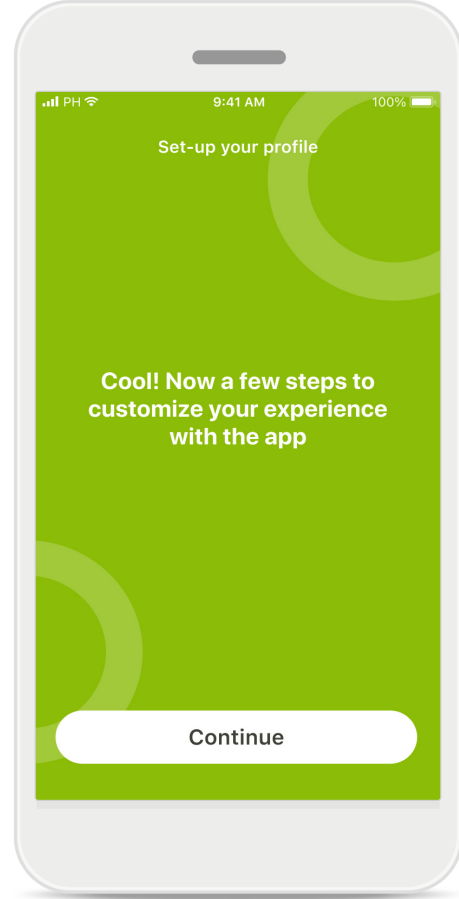


Diğer seçenekler

Diğer özelleştirme seçenekleri arasında, uygulamanın arka plan renk temasını değiştirme ve sanal işitme cihazları ve boynuz rengini değiştirme bulunur.

Eşleştirme sorunlarını giderme


Kurulum sürecindeki olası hatalar.

Sorun gidermeye ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Phonak destek sayfasını ziyaret edin.

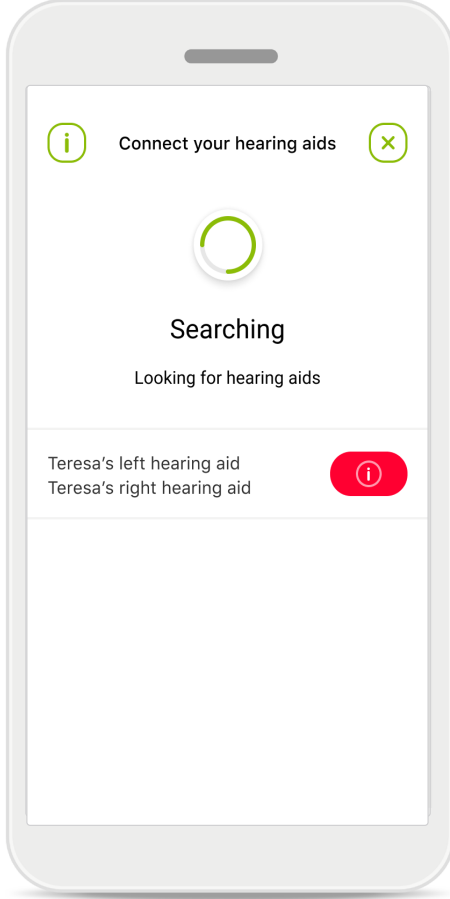

Uyumsuz cihazlar

Uygulama cihazlara uyumsuz oldukları için bağlanamaz. Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.

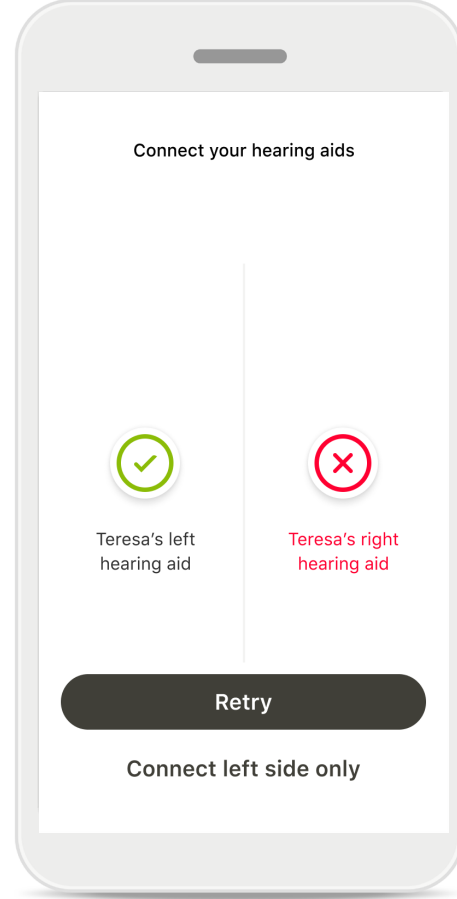


İşitme cihazı bağlantı hatası

İşitme cihazlarından biriyle eşleştirmenin başarısız olması durumunda aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

1. Eşleştirme sürecini yeniden başlatmak için **Yeniden dene** seçeneğine dokununuz.
2. İki işitme cihazının yalnızca biriyle devam edin.

Remote Control ana görünümü

Tüm işitme cihazları için mevcut olan işlevler.

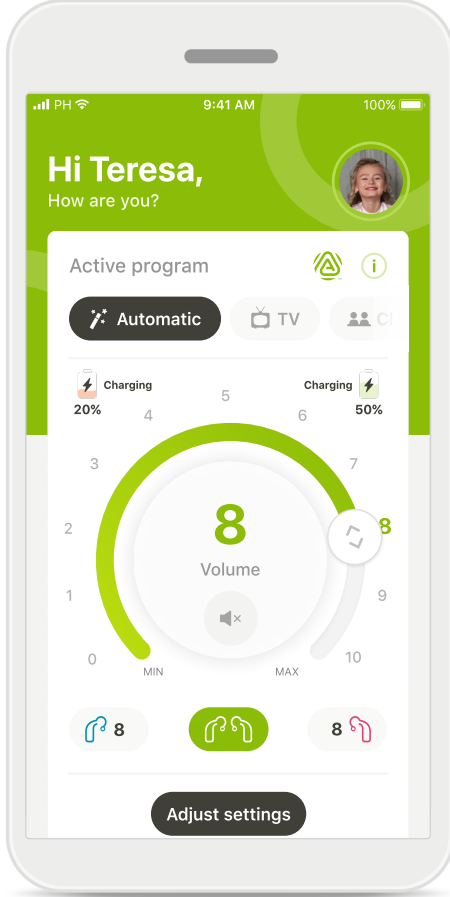


İşitme cihazının ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini değiştirmek için kaydırma çubuğunu hareket ettirin.

Aktif programı değiştirin

Belirli bir işitme ortamına ayarlamak için mevcut programlara dokununuz. Mevcut programların hangileri olduğu işitme cihazlarınızın işitme uzmanınız tarafından nasıl ayarlandığına bağlıdır.

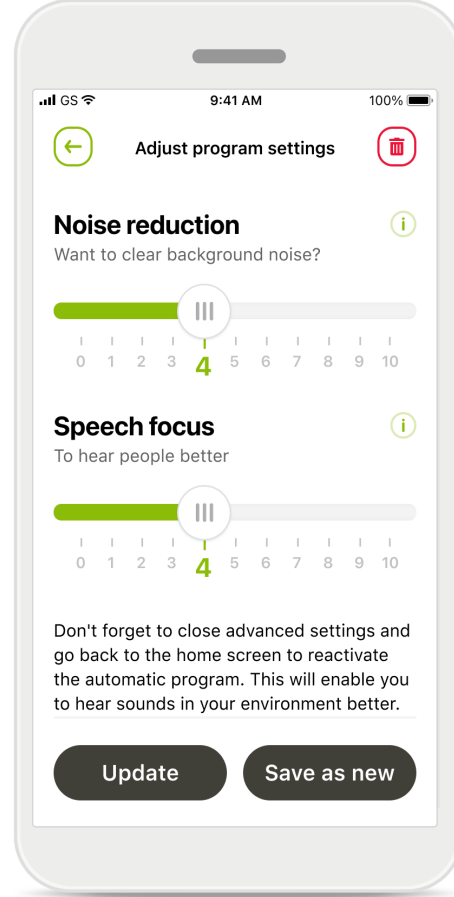

Ayarları düzenleme

Bu ayarlar görünümü aşağıdaki işlevlere erişmenizi sağlar:

- Gürültü azaltma
- Konuşmaya odaklanma



 simgesine basarak çeşitli özellikler hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

Sessiz  simgesine basarak işitme cihazlarınızı sessize alabilirsiniz.

Pil şarj düzeyi %20'nin altına düştüğünde simge kırmızıya döner. En kısa zamanda işitme cihazlarınızı şarj edin.

Auracast™ Yayını Kullanımı*

Auracast™ yayını ile televizyonlardan, tiyatrolardan, konserlerden ve Auracast™ teknolojisini destekleyen diğer mekanlardan canlı ses yayınlarını dinleyebilirsiniz.

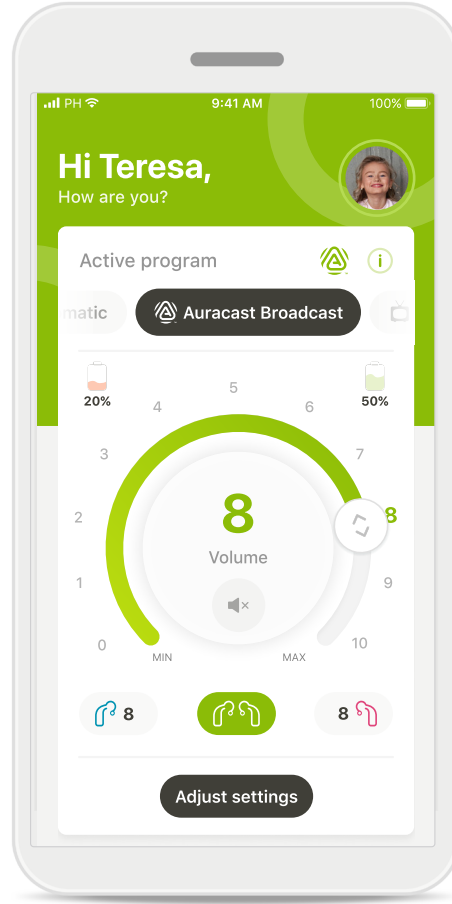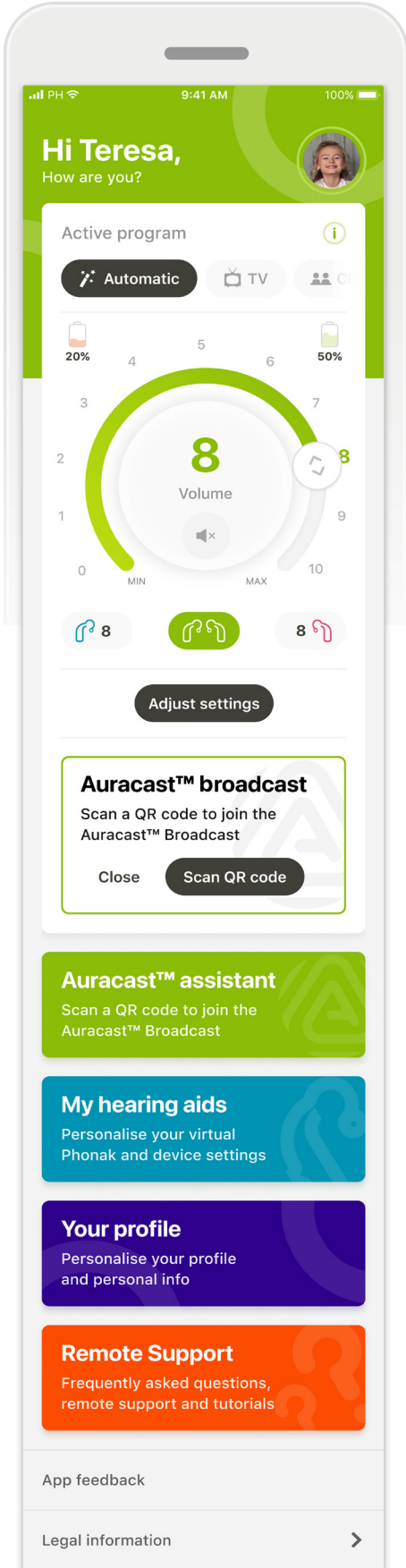



Auracast™ yayını, **Auracast™ asistan** kutucuğuna veya ana ekrandaki **Auracast™ yayın**  simgesine dokunarak açabilirsiniz. Her iki seçenek de bir QR kodu tarayarak yayına erişmenizi sağlar. myPhonak Junior uygulamasında yayın detayları görüldüğünde, sesi otomatik olarak işitme cihazlarınıza göndermek için **Yayına katıl** seçeneğine dokunun. Halihazırda bir Auracast aktarımına bağlandıysanız **Auracast™ programı**, ana ekranın üst kısmındaki program menüsünde görünecektir. Burada **Auracast™**'i seçtiğinizde ilgili Auracast™ yayınına hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

* Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Uzaktan Destek oturumu

Mobil veri kullanıyorsanız mobil sağlayıcınız sizden ücret alabilir. Lütfen Phonak Uzaktan Destek oturumu başlatmadan önce operatör sağlayıcınıza danışın.

Bir Uzaktan Destek oturumu, 10 dakikalık bir görüntülü aramada yaklaşık 56 MB, sesli aramada ise yaklaşık 30 MB kullanır.

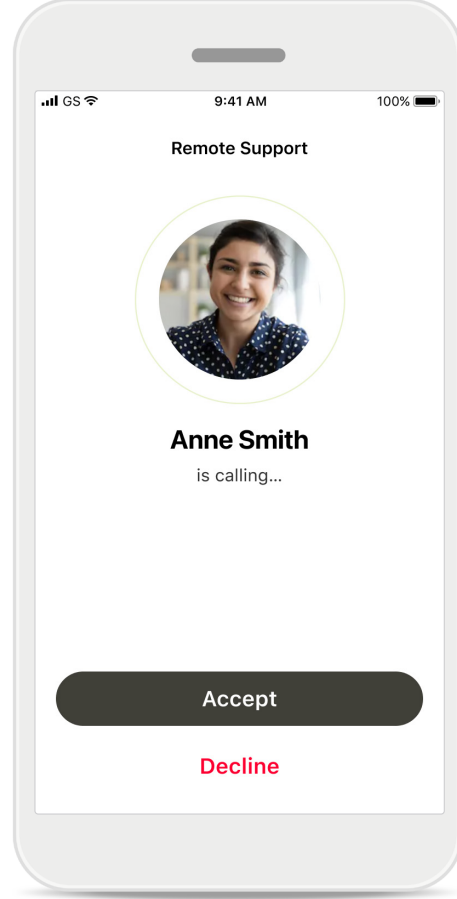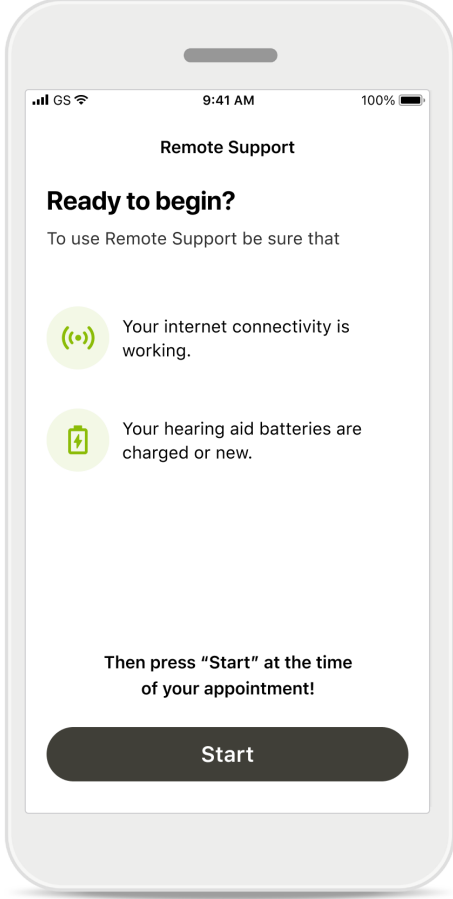

Uzaktan Destek oturumunu başlatma

Randevu saatinde myPhonak Junior'ı açın ve işitme uzmanınıza Phonak Uzaktan Destek randevunuz için hazır olduğunuzu bildirmek üzere **Başlat** seçeneğine dokunun.

myPhonak Junior'ın kamera ve mikrofonunuza erişmesine izin vermek için **Tamam** seçeneğine dokunun.


Android akıllı telefonunuz varsa myPhonak Junior'ın telefon aramaları yapmasına ve bu aramaları yönetmesine izin vermek için **İZİN VER** öğesine dokunun.

Görüntülü aramaları kabul edin

Uygulama sizi bir işitme uzmanına bağlayacak. İşitme uzmanınızdan gelen aramayı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokunun.


Uzaktan Destek oturumu

Uzaktan Destek oturumundayken dilerseniz Görüntüyü veya Sesi açıp kapatarak deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

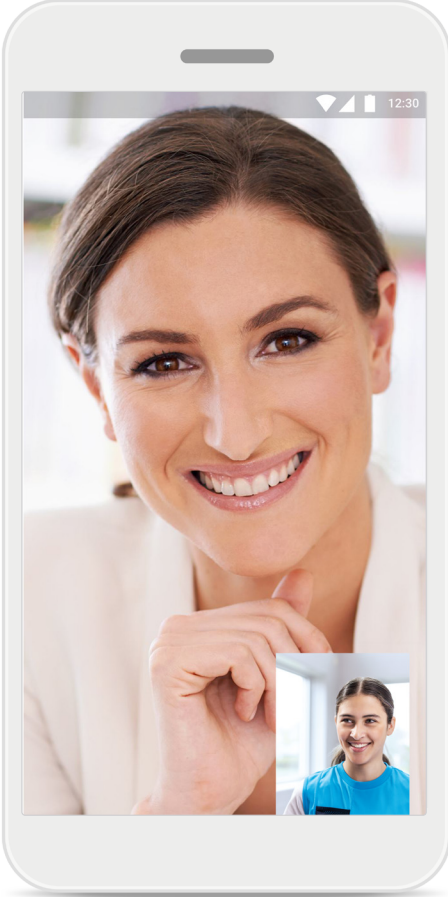

Görüntülü arama başlatma

Video görüntüsü ayarlandıktan birkaç saniye sonra işitme uzmanınızı görebilirsiniz.

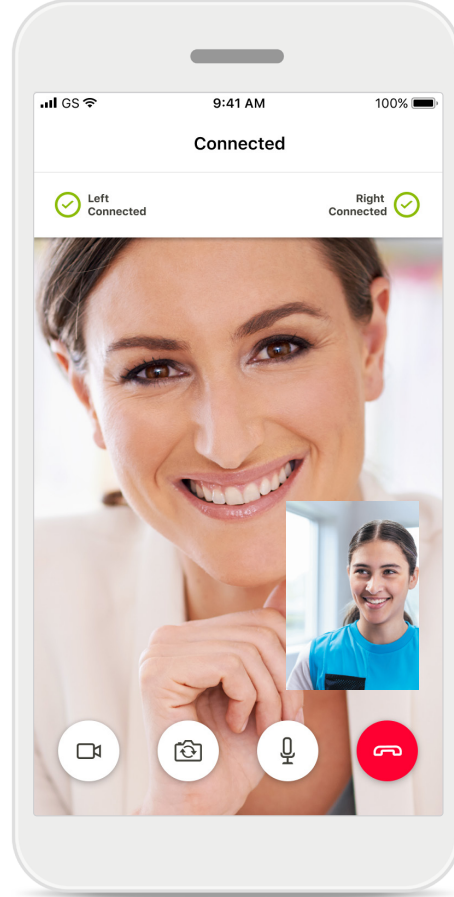

Bağlı işitme cihazları



İşitme uzmanınızın işitme cihazlarınıza bağlanması gerekirse bu, akıllı telefonunuz kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilir. İşitme uzmanınız, işitme cihazlarınıza bağlandığında sizi bilgilendirecek.

Görüntünüzü gizlemek isterseniz düğmeye dokunarak videoyu devre dışı bırakabilirsiniz.

Bağlantı işlemi sırasında ve ayarlar kaydedilirken işitme cihazlarınız bir süreliğine sessize alınacaktır. Durumu ekranınızda görebileceksiniz.


İşitme Cihazlarım

İşitme cihazlarının nasıl programlandığına ve hangi kablosuz aksesuarların uygulamayla eşleştirildiğine bağlı olan işlevler.

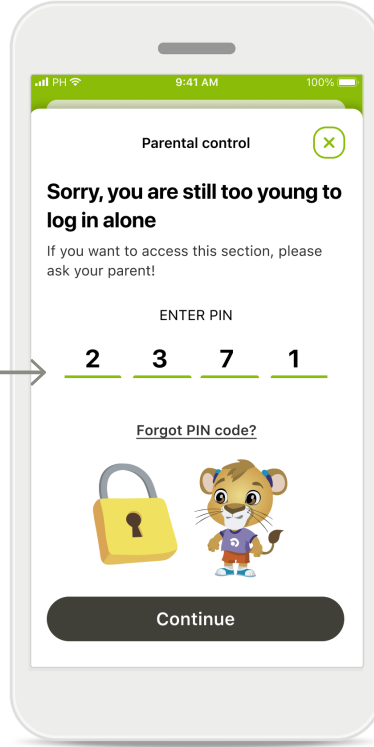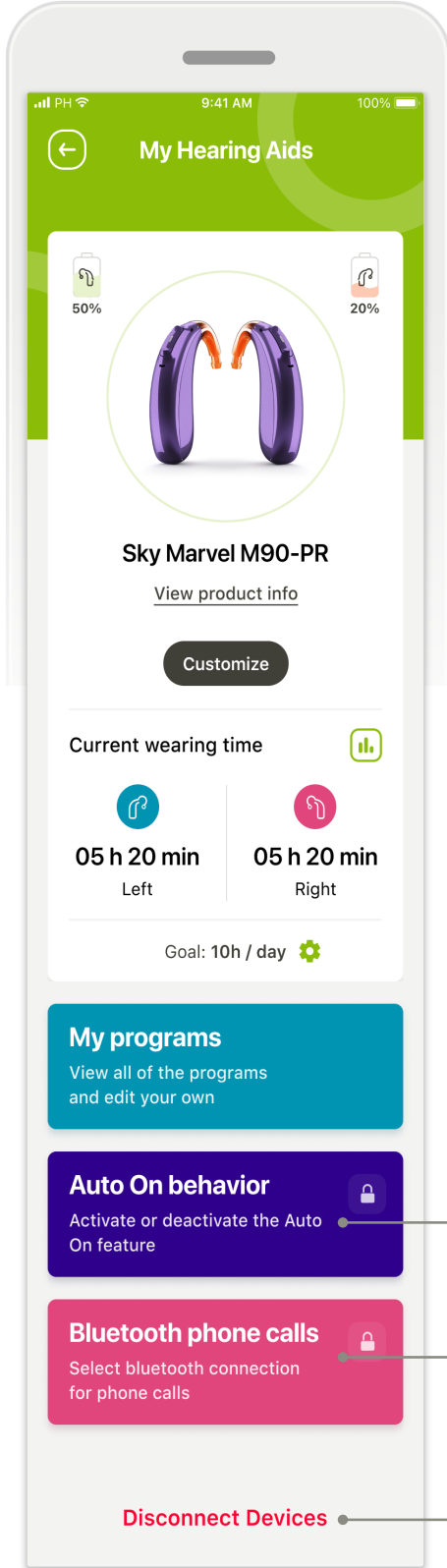

Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn kontrolü, küçük çocukların, işitme cihazlarının bağlantısını yanlışlıkla kesmesini önleyebilir.

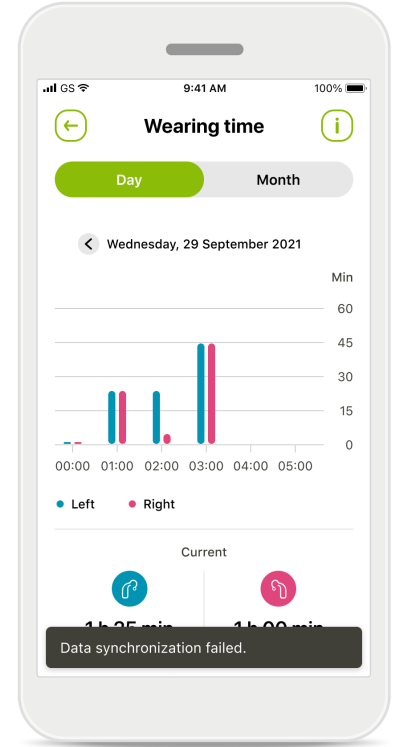

Kullanım süresi

Kullanım süresi, her işitme cihazının günlük ve aylık olarak ne kadar süreyle kullanıldığına ve çocuğunuzun dinlediği ortam türüne genel bir bakış sağlar. Şarj edilebilir işitme cihazları en fazla bilgiyi sağlar.

İşitme Cihazlarım

"İşitme Cihazlarım" ekranı pil durumuna (şarj edilebilir cihazlar), işitme cihazınızın türüne, yüklü Roger lisanslarına, Kullanım süresine, Programlarım bölümüne, Otomatik Açma davranışına ve Bluetooth telefon görüşmelerine dair kıymetli bilgiler sağlar. İşitme cihazlarınızın görünümü de burada özelleştirilebilir.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanım amacı:

Uygulama, amaçlanan işitme cihazı kullanıcılarının, fitting yazılımının izin verdiği sınırlı aralıkta işitme cihazı ayarlarını seçmeleri, yapılandırmaları ve kaydetmeleri için bağımsız bir yazılımdır. Uygulama ayrıca, hedeflenen işitme cihazı kullanıcılarının, uzaktan işitme cihazı ayarlamaları için işitme uzmanlarıyla bağlantı kurmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Hedef kitle:

Uyumlu bir cihaz kullanan, işitme kaybı olan en az 10 yaşında bir kişi ve bakıcısı.

Hedef kullanıcı popülasyonu:

Bu cihaz, uyumlu işitme cihazının kullanımına ilişkin klinik endikasyonları karşılayan 10 yaşından büyük hastalar için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar

Lütfen endikasyonların uygulamayla değil, uyumlu işitme cihazlarıyla ilgili olduğunu unutmayın. Ayrıntılı bilgi için işitme cihazınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

Kontrendikasyonlar:

Lütfen kontrendikasyonların uygulamayla değil, uyumlu işitme cihazlarıyla ilgili olduğunu unutmayın.

Yan etkiler:

Uygulamanın kullanımına ilişkin bilinen herhangi bir yan etki yoktur.

Klinik fayda

Klinik fayda uygulamadan değil, uyumlu işitme cihazlarından kaynaklanır. Uygulama, ilk fitting'in izin verdiği aralık dahilinde ayarlama yapma olasılığı sunarak hedef kullanıcılara fayda sağlar.

Uygulama, hedef kullanıcıların işitme cihazı ayarlarını uzaktan yapabilmeleri için işitme uzmanlarıyla iletişim ve bağlantı kurmalarını sağlayan pratik bir yöntem sunar.

Uygulamayla ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olay, üretici temsilcisine ve ikamet edilen ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir. Ciddi olay, aşağıdakilerden herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek her türlü olay olarak tanımlanır:

- a. kullanıcının veya başka bir kişinin ölümü
- b. kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunun geçici veya kalıcı olarak önemli ölçüde bozulması
- c. ciddi bir halk sağlığı tehdidi

Beklenmedik bir işlem ya da olayı bildirmek için lütfen üretici veya bir temsilciyle iletişime geçin.

Kullanım sınırlamaları:

Uygulamanın kullanımı uyumlu cihazın/cihazların özellikleriyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Uygulamanın tüm işlevlerinden yararlanmak için sürekli olarak internet bağlantısının gerekli olduğunu lütfen unutmayın.

Güvenlik bildirimi

Kullanıcı verileri gizli verilerdir ve korunmaları önemlidir:

- Akıllı telefonlarda en son İşletim Sistemi güvenlik güncellemelerinin kurulu olduğundan emin olun. Otomatik güncellemeyi etkinleştirin.
- Kurulu uygulama sürümünüzün güncel olduğundan emin olun.
- İşitme cihazlarınızla birlikte yalnızca, resmi mağazalardan alınan orijinal Sonova uygulamalarını kullanın.
- Yalnızca resmi mağazalarda bulunan güvenilir uygulamaları kurun.
- Güçlü şifreler kullandığınızdan ve kimlik bilgilerinizi gizli tuttuğunuzdan emin olun .
- Telefonu PIN ve/veya biyometrik (örn. parmak izi, yüz) ayarlar ile kilitleyin ve telefonu birkaç dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayın.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

- Kurulu uygulamalara yalnızca gerçekten gerekli olan izinlerin verildiğinden emin olun.
- Halka açık bir alanda işitme cihazlarınızla Bluetooth eşleştirmesi oluşturmaktan kaçının. Bunun nedeni, bir üçüncü tarafın istenmeyen müdahalesi riskidir. Bu Bluetooth eşleştirmesini evde yapmanızı öneririz.
- Yazılım kısıtlamaları kaldırılmış veya root erişim izni verilmiş bir telefon KULLANMAYIN.

Verilerinizi her zaman güvende tuttuğunuzdan emin olun. Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını aklınızda bulundurun.

- Verileri güvenli olmayan kanallar üzerinden aktarırken anonim veriler gönderin veya verileri şifreleyin.
- Akıllı telefonunuzun veri yedeklerini sadece veri kaybına karşı değil, aynı zamanda hırsızlığa karşı da koruyun.
- Artık kullanmayacağınız veya atacağınız bir akıllı telefondaki tüm verileri kaldırın.

Alternatif olarak, myPhonak Junior kullanım kılavuzunun geçerli sürümüne, Destek bölümüne gidip "Kullanım Kılavuzu" adlı karta dokunularak doğrudan uygulamadan erişilebilir. Bu durumda kullanım kılavuzu, harici bir tarayıcı penceresinde açılır.

Yazılım bakımı:

Piyasadan gelen feedbackleri sürekli olarak takip etmekteyiz. En son uygulama sürümüyle ilgili sorunlarla karşılaşmanız halinde lütfen yerel üretici temsilcinizle iletişime geçin ve/veya Appstore ya da Google Play Store'da feedback verin.

Tüm uygulama sürümleri için ilgili tüm dillerde hazırlanmış elektronik formatlı kullanım kılavuzlarına web sayfası üzerinden erişilebilir. Kullanım kılavuzlarına erişmek için şu adımları izleyin:

- <https://www.phonak.com/en-int/support-options> bağlantısına tıklayın ve ilgili ülkeyi seçin
- "Destek" (İngilizce "Support") veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Kullanım Kılavuzları"na (İngilizce) veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Uygulamalar"a (İngilizce) veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "myPhonak Junior uygulaması"nı seçin

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

-  Ayarları değiştirmek (örneğin ses seviyesini azaltmak veya gürültü engelleyicinin seviyesini artırmak) trafikten gelen seslerin işitilmemesi gibi tehlikelere yol açabilir.
-  İşitme cihazları yanıt vermiyorsa, lütfen cihaz değer aralığının dışında olup olmadığınızı veya işitme cihazlarının açık olup olmadığını ve pilin boş olup olmadığını kontrol edin ve dağıtım alanları varsa, rahatsız edici alanlardan uzaklaşın.
-  Bluetooth'unuzu etkinleştirin. İşitme cihazlarınıza bağlanabilmesi için Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekir.
-  Kişisel akıllı telefonun kullanım sorumluluğu size aittir. Lütfen kişisel akıllı telefonu ve uygulamayı dikkatli bir şekilde kullanın.

Uyumluluk bilgileri

Avrupa: Uygunluk Beyanı

Sonova AG, bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Sembol açıklaması



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri okuyup dikkate almasının önemli olduğunu gösterir.



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili uyarı notlarına dikkat etmesinin önemli olduğunu gösterir.



Kullanım ve ürün güvenliğine yönelik önemli bilgiler.



Sonova AG, CE sembolü ile bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını teyit eder. CE sembolünden sonra gelen sayılar yukarıda bahsi geçen yönetmelik uyarınca danışılan lisanslı kuruluşların koduna karşılık gelir.



Avrupa Birliği'ndeki Yetkili temsilciyi belirtir. EU REP aynı zamanda Avrupa Birliği ithalatçısıdır.



Cihazın bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.



Ad, adres, tarih

2017/745 sayılı AB Yönetmeliğinde (AB) tanımlandığı şekilde, "tıbbi cihaz üreticisi" ve "üretim tarihi" birleşik sembolü.



Elektronik kullanım talimatlarının mevcut olduğuna dair bir gösterge. Talimatlara www.phonak.com/myphonakapp web sitesinden erişilebilir



Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üretici katalog numarasını belirtir.



Sonova Almanya GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Almanya



Üretici:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
İsviçre
www.phonak.com

V3.00/2026-08/ZT © 2021-2026 Sonova AG Tüm hakları saklıdır

Bu kullanım kılavuzu, myPhonak Junior 2 uygulamasının myPhonak Junior 2.1 sürümü ve daha sonraki alt sürümleri için geçerlidir.
Uygulama kullanım kılavuzunun önceki sürümleri için lütfen yerel temsilcinizle iletişime geçin veya internet sitesine bakın.

Kullanım talimatlarının ücretsiz basılı bir kopyasını edinmek için lütfen yerel Sonova temsilcinizle irtibat kurun. Tarafınıza 7 gün içinde bir nüshası gönderilecektir.

