


myPhonak

Kullanım Kılavuzu - myPhonak 7

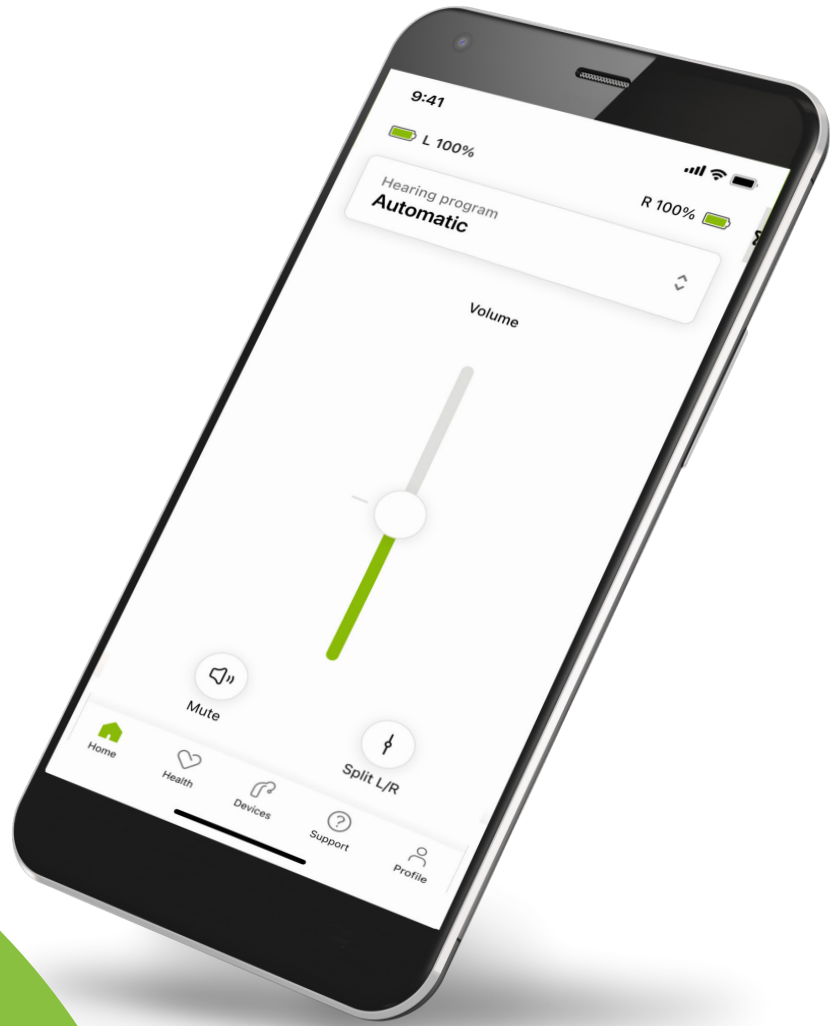

Başlangıç

myPhonak, merkezi İsviçre'nin Z rih kentinde yer alan, iřitme     mlerinde d nya lideri Sonova tarafından geliřtirilmiř bir uygulamadır. Bu kullanım kılavuzu, uygulamanın kullanıcılar tarafından faydalanılabilen  zelliklerini a ıklar.

-  Sunulan t m olanaklardan yararlanabilmek i in uygulamayı kullanmaya bařlamadan  nce bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.
-  Uygulamanın kullanımı i in ilave e itim gerekli de ildir.



Uyumluluk bilgisi:

myPhonak uygulamasının kullanılabilmesi i in Bluetooth® ba lantısına sahip Phonak iřitme cihazları gereklidir.

- myPhonak, iOS® S r m 16 veya  zerinde  alıřan, Bluetooth® d ř k enerji (LE)  zelli ine sahip telefonlarda kullanılabılır.
- myPhonak, Bluetooth® 4.2 ile Android OS 10.0 ve  zerini destekleyen Google Mobil Servisleri (GMS) sertifikalı Android™ cihazlarda kullanılabılır.

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. řirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu t r markaların Sonova AG tarafından her t rl  kullanımı lisanslıdır.

iPhone, Apple Inc. řirketinin ABD ve di er  lkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Android, Google LLC řirketinin ticari markasıdır.

IOS®, Cisco Systems, Inc. ve/veya ba lı kuruluřlarının Amerika Birleřik Devletleri'nde ve di er bazı  lkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

İçindekiler


Hızlı genel bakış	4
myPhonak kurulumu	5
myPhonak ile hesap oluşturma ve yönetme	6
Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme	7
Sorun giderme: Eşleştirme	8
Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda görünümü	9
Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları	10
Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda görünümü* - standart olmayan özellik	12
Ana Sayfa: Remote Control gelişmiş ayarları - Yeni program oluşturma veya mevcut bir programı güncelleme*	14
Sorun giderme: Remote Control gelişmiş ayarları	15
Auracast™ Yayını Kullanımı*	16
Cihazlar	17
Güncellemeler	20
Destek ve Uzaktan Destek oturumu	22
Uzaktan Destek oturumu başlatılıyor	25
Sorun giderme: Uzaktan Destek oturumu	26
Sağlık Bölümünde Sağlık Verisi İzleme: Ayarlama	28
Sağlık Panosu	29
Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümüleri: Kullanım süresi, adımlar, aktivite seviyeleri*, yürünen ve koşulan mesafe	30
Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümüleri: Kalp atış hızı*, yürüyerek ve koşarak* harcanan Kaloriler*	32
Sağlık: Diğer işlevler*	34
Önemli güvenlik bilgileri	36
Uyumluluk bilgileri	38
Sembol açıklaması	39

Hızlı genel bakış

Uzaktan Kumanda




Uzaktan Destek

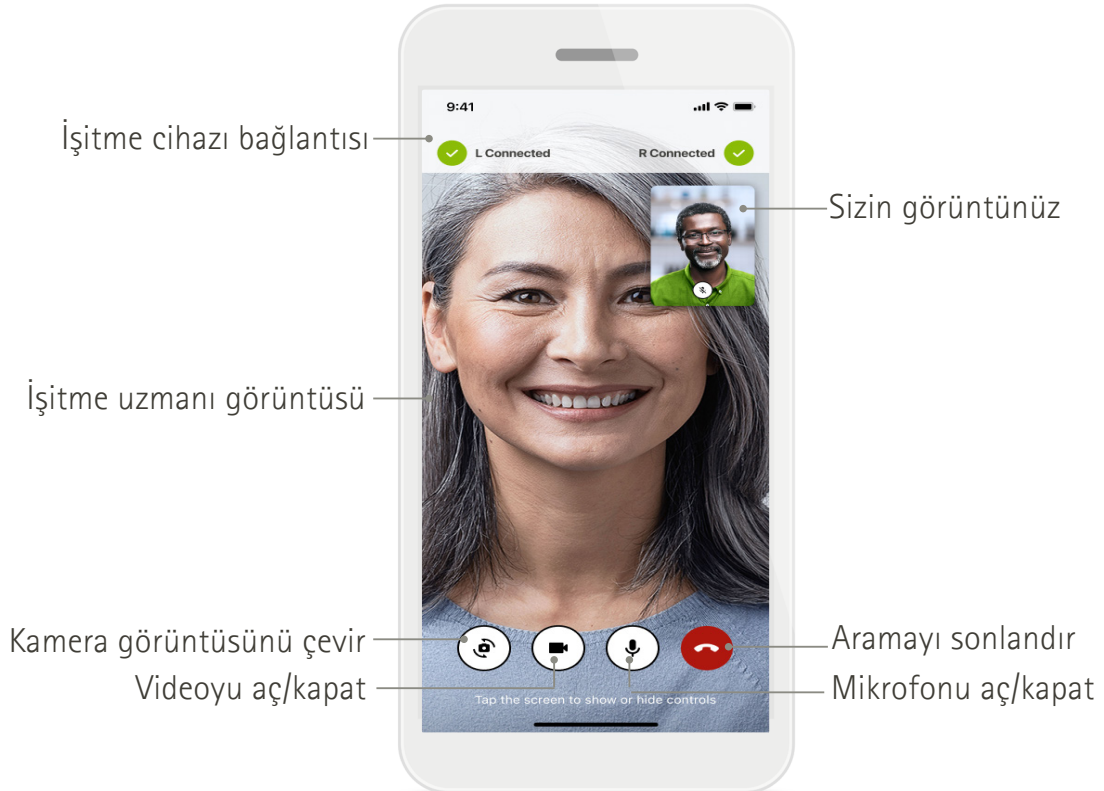

*Yalnızca şarj edilebilir işitme cihazları içindir.

myPhonak kurulumu

1. Akıllı telefonunuzu WiFi veya mobil veri aracılığıyla internete bağlayın.
2. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® özelliğini açın.
3. Uygulama mağazasından myPhonak uygulamasını indirip telefonunuza yükleyin.
4. Uygulamayı açın.
5. Uygulamayı ilk kullanımınızda bir bilgilendirme turu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız **Turu atla** seçeneğine dokununuz.

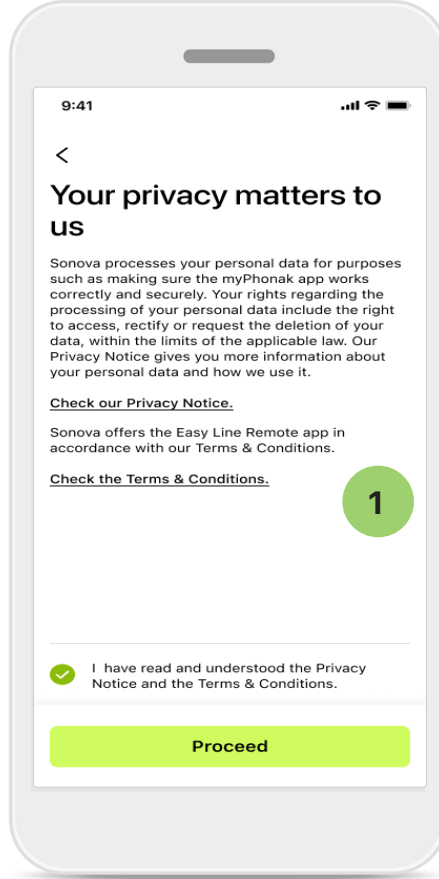

1

Gizlilik politikası

Uygulamayı kullanmak için Gizlilik Bildirimi ile Hükümler ve Koşullar bölümlerini okuduktan sonra onay kutusunu işaretleyin. Ardından **İlerle** seçeneğine dokununuz.



Ürün geliştirme

Ürünlerimizi geliştirmekte bize yardımcı olmak için uygulama kullanımı ve sağlık verilerini paylaşabilirsiniz. Verileriniz, gizlilik bildiriminde açıklandığı şekilde işlenir ve sizinle ilişkilendirilmez.

myPhonak ile hesap oluřturma ve yönetme

- Daha fazla saęlık özellięine erişmek için bir hesap oluřturabilirsiniz. İşitme cihazınızı ayarlamak için hesap oluřturmanız zorunlu deęildir.
- E-posta adresinizi veya cep telefon numaranızı kullanarak hesap oluřturabilirsiniz.
- Halihazırda bir hesaba sahipseniz **Oturum Aç** seçeneęine dokununuz.
- Bu kısmı atlamak istiyorsanız  seçeneęine dokununuz.

Home

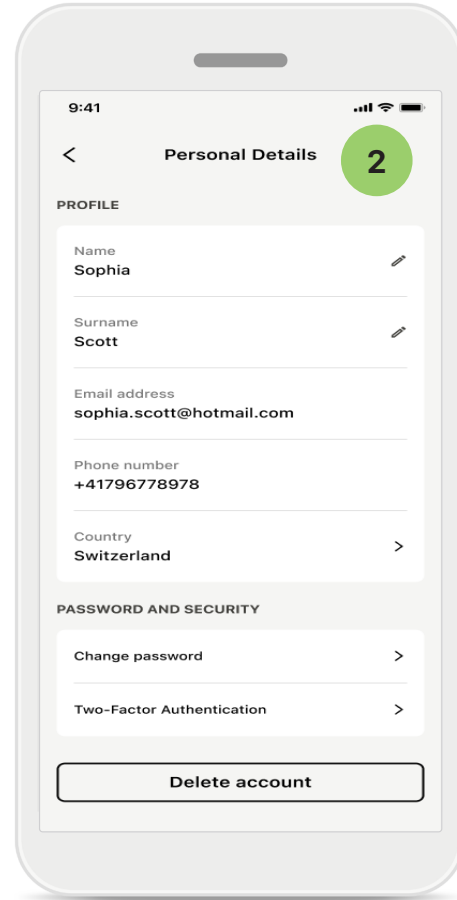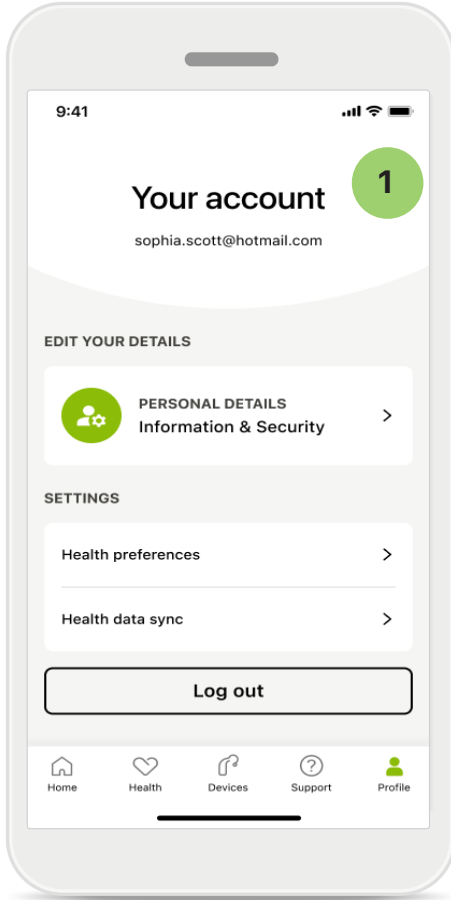

1 Profil bölümü

Profil ekranında, profil bilgilerinizi düzenleyebilir ve Saęlık ile ilgili tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Uygulamadaki oturumunuzu kapatmak istiyorsanız **Oturumu kapat** öęesine dokununuz.

2 Kişisel bilgiler


Kişisel bilgiler kısmında kişisel bilgilerinizi düzenleyebilir ve güvenlik bilgilerinizi deęiřtirebilirsiniz.

Hesabınızı silmek istiyorsanız **Hesabı sil** seçeneęine dokununuz. İşlemi onaylamak için řifrenizi girmeniz gerekir.

Phonak işitme cihazlarıyla eşleştirme

Bluetooth® özellikli işitme cihazlarını myPhonak'a bağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- Cihazı eşleştir sekmesine tıklayarak **Haydi Başlayalım** seçeneğine dokunun.

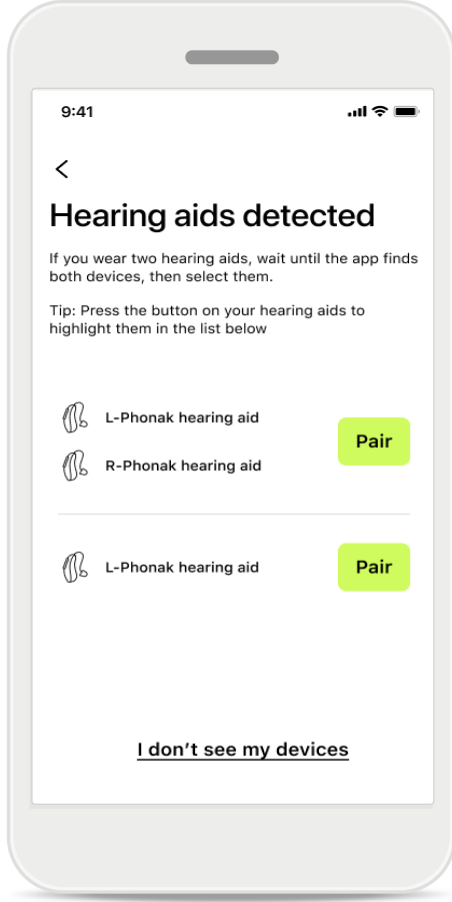


Arama

Uygulama, uyumlu işitme cihazlarını arar. Bu birkaç saniye sürebilir. Ardından sonuçlar görüntülenir. Bağlamak istediğiniz cihaza dokunun. Uygulama her bir işitme cihazına ayrı şekilde bağlanır.

iOS cihazlarında açılan penceredeki **Eşleştir** ögesine her işitme cihazı için ayrı şekilde dokunarak eşleştirmeyi onaylayın.

Infinio Ultra ve en yeni sürümde ek işlevler:

- Başarılı eşleştirme işleminden sonra işitme cihazlarınız Bluetooth aktarımı için bağlanır. Artık işitme cihazlarınızdan ses dinleyebilir ve telefon aramalarını yanıtlayabilirsiniz.

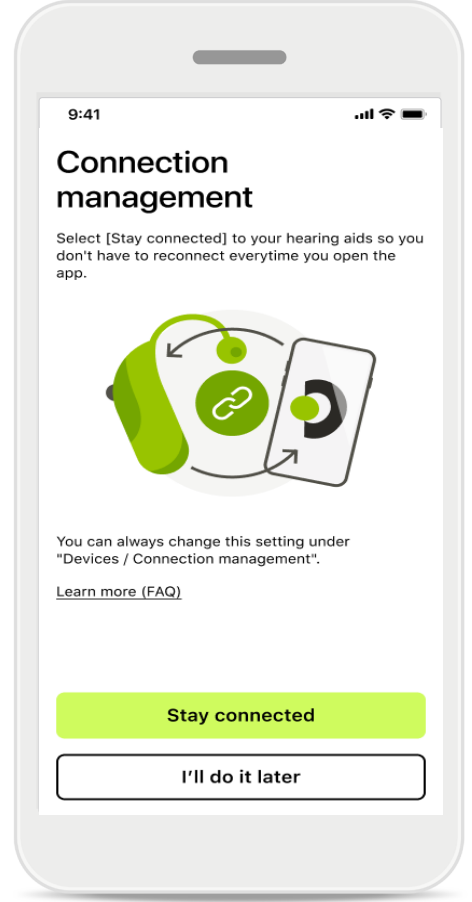

Bağlantı yönetimi

Her seferinde yeniden bağlanmak zorunda kalmamak için işitme cihazlarınızı myPhonak uygulamasıyla bağlı tutabilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirmek için **Bağlantıda kal** seçeneğine dokunun.




İşitme cihazları yanıt vermiyorsa lütfen kapsama alanı dışında olmadığınızdan veya işitme cihazlarının açık olduğundan ve pilin boş olmadığından emin olun. Bozucu alanlar varsa bunlardan uzaklaşın.

Sorun giderme: Eşleştirme

Kurulum sürecindeki olası hatalar.


Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi için

<https://www.phonak.com/support-connectivity-guide> adresinde bulunan Phonak destek sayfasını ziyaret edin

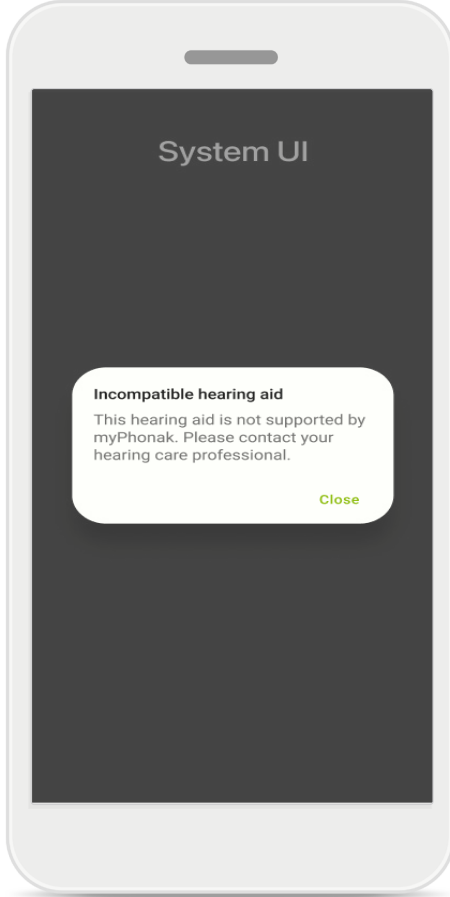

Uyumsuz cihazlar

Uygulama, uyumlu olmadıklarından işitme cihazlarına bağlanamıyor. Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.

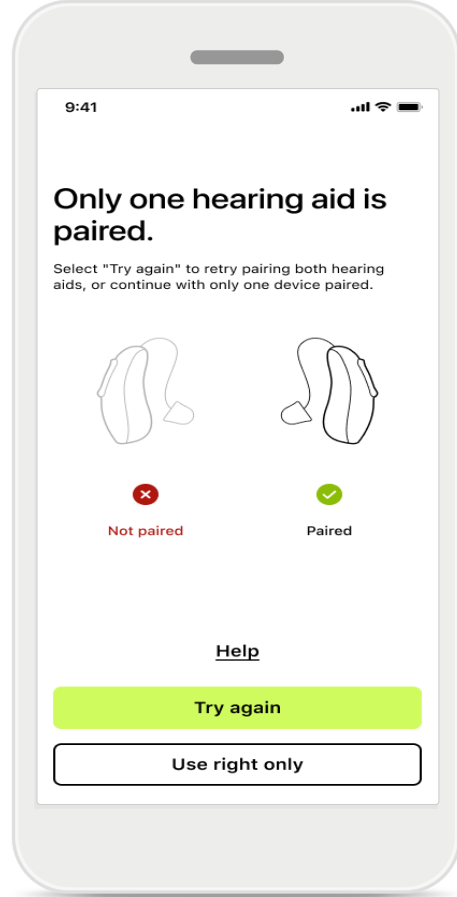

İşitme cihazı bağlantı hatası



İşitme cihazlarından biriyle eşleştirme başarısız olursa eşleştirme işlemini yeniden başlatmak için **Tekrar dene** seçeneğine dokununuz.

Her iki cihaza da bağlantı başarısız

Eşleştirme işlemini yeniden başlatmak için **Tekrar dene** öğesine dokununuz ve talimatları izleyiniz.

Android cihazlarda Bluetooth® özellikli cihazları ilk kez eşleştirirken konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. İlk kurulumun ardından konum hizmetlerini tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.

Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda görünümü

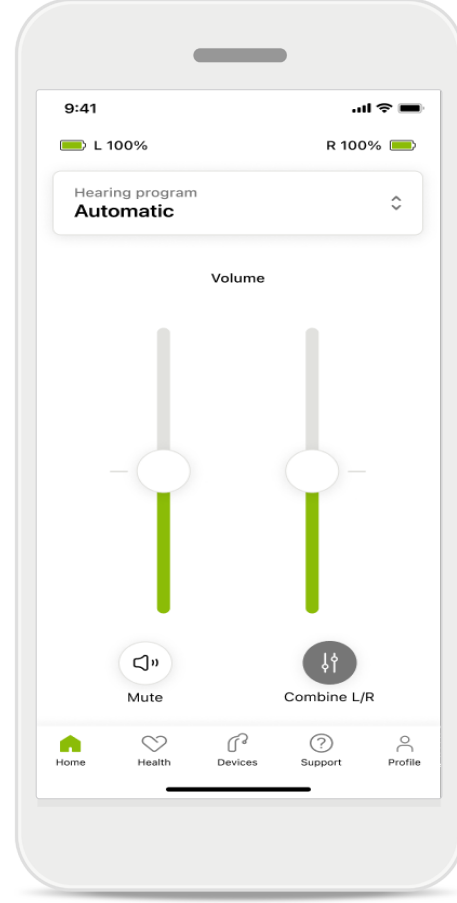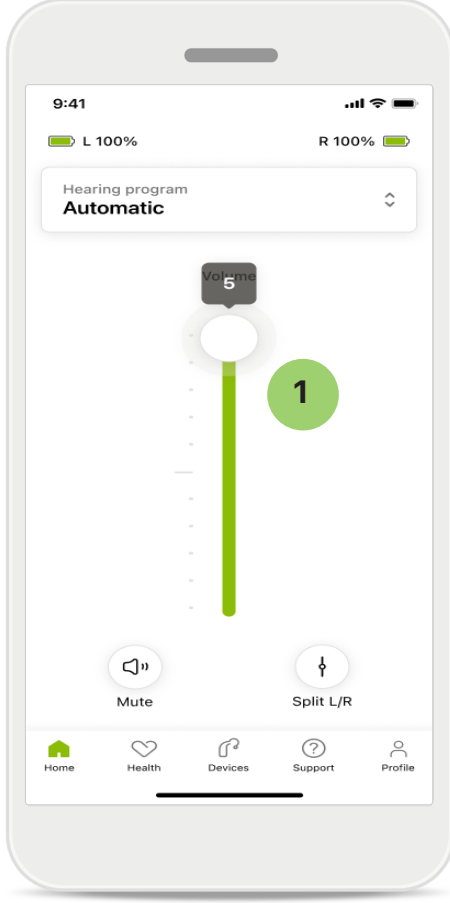

1 İşitme cihazının ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak için kaydırma çubuğunu yukarı doğru hareket ettirin. Ses seviyesini azaltmak için kaydırma çubuğunu aşağı doğru hareket ettirin.

İki işitme cihazı kullanıyorsanız bu kaydırma çubuğu her iki cihazı da aynı anda kontrol eder.

Ses seviyesini ayırın

Ses seviyesini ayırmak istediğinizde, her bir işitme cihazını ayrı olarak ayarlamak veya ana ayarlara geri dönmek için **Ayır** seçeneğine tıklayın.

İşitme cihazlarınızı sessize almak veya bunların sesini açmak istediğinizde


Sessize al simgesine dokununuz.

Ses programlarına, uygulama ana ekranının üst kısmından doğrudan erişebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun programı seçmek için kayar menüyü üzerine dokunarak kaydırın.


İçlerinden seçim yapın:

- 🔊 Otomatik program
- 👤 İşitme uzmanınız tarafından oluşturulan programlar
- ⭐ Sizin oluşturduğunuz programlar

Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları

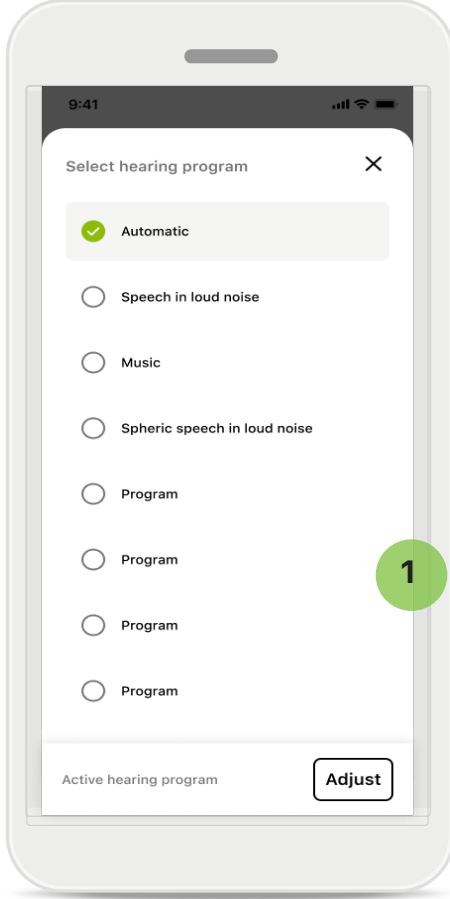


- 1 Programı ayarla**
Programı ayarla seçeneğine dokunarak gelişmiş ses ayarları yoluyla seçili programı düzenleyebilirsiniz.

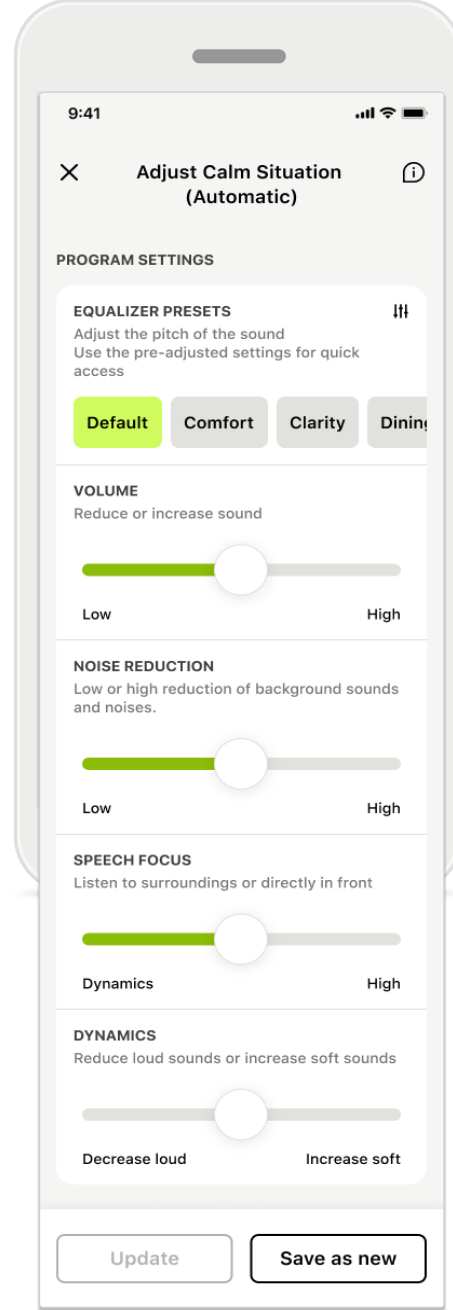

Program ayarları


Seçili programı farklı yöntemlerle ayarlayabilirsiniz. Her bir ayarı düzenlemek için kaydırma çubuklarını kullanın: ekolayzer ön ayarları, ses kontrolü, gürültü azaltma, konuşma odağı ve dinamik kontrol.

Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda gelişmiş ayarları

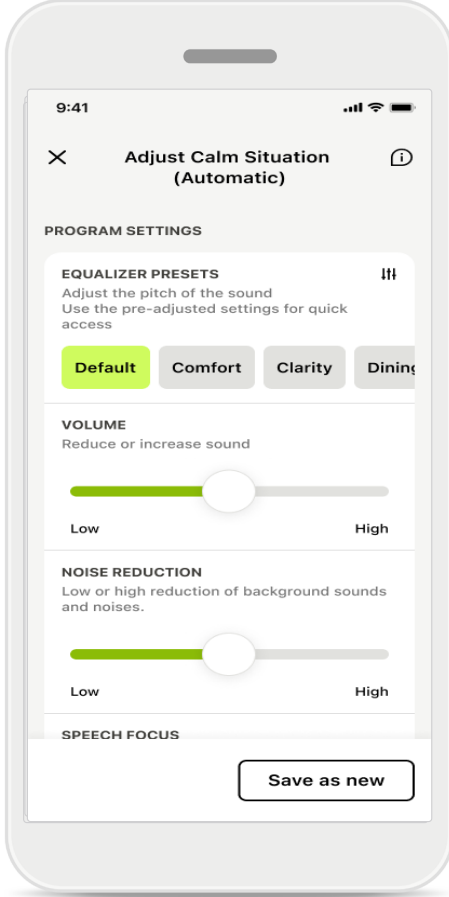

Ekolayzer ön ayarları

Ekolayzer ön ayarları, bulunduğunuz akustik ortama göre ses perdesinde hızlı ayarlamalar yapmanızı sağlar. Daha gelişmiş ayarlar yapmak için ekolayzer simgesine dokununuz.

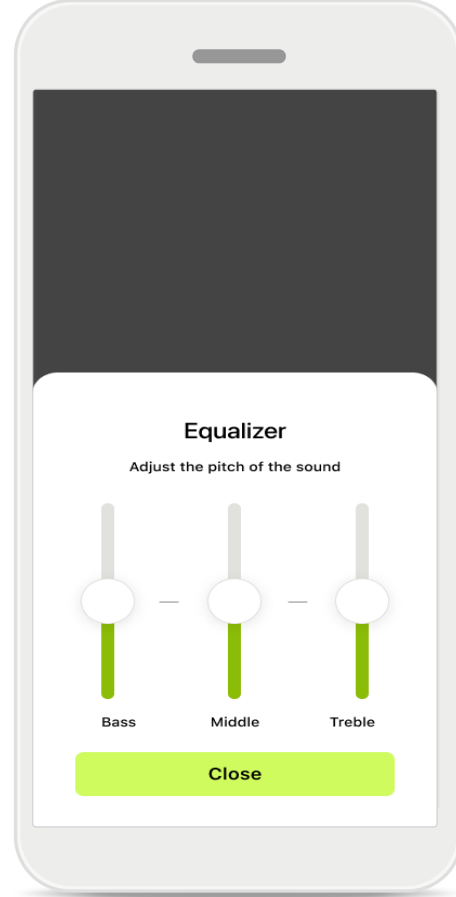


Ses perdesini ayarlama

Kaydırma çubuklarını kullanarak ses perdesini (frekans) değiştirin. Ayarlara geri dönmek için **Kapat** seçeneğine dokununuz.


Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda görünümü* – standart olmayan özellik

- Ses aktarımı yapıyorsanız işitme cihazlarının nasıl programlandığına ve sahip olduğunuz kablosuz aksesuarlara bağlı olarak Tinnitus gürültüsü ve Ortam dengesi gibi daha fazla ayarı düzenleyebilirsiniz. Örneğin işitme cihazlarınız tinnitus işlevini destekliyorsa ve bir ses aktarım programındaysanız her ikisini de özel ekranlarından ayarlayabilirsiniz.

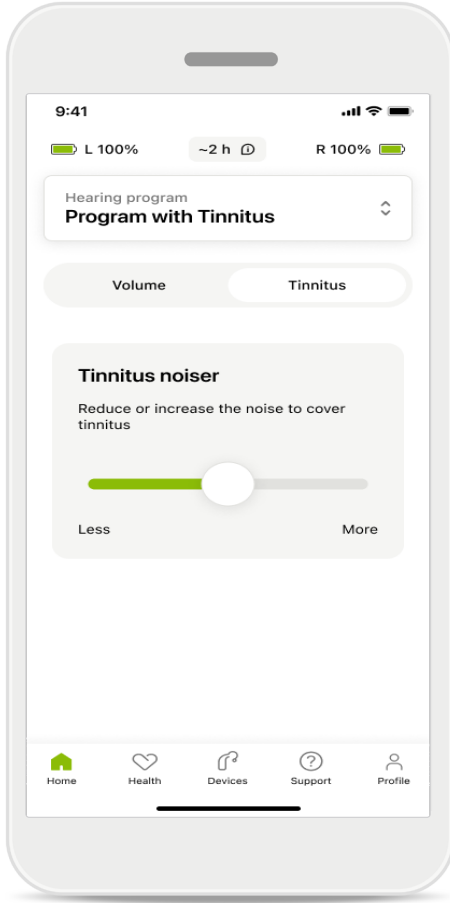

Tinnitus gürültüsü

Tinnitus şikayetiniz varsa ve işitme uzmanınız tarafından Tinnitus gürültüsünü nasıl kullanacağınız konusunda bilgilendirildiyse maskeleme sesinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.

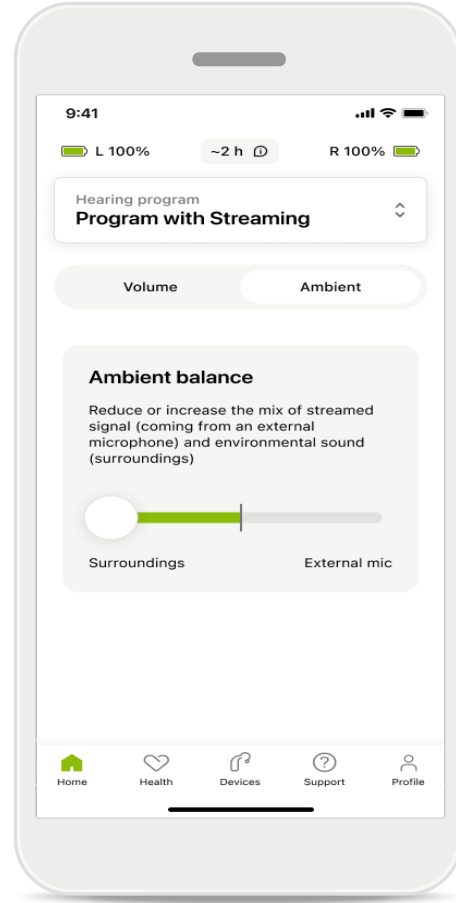


Ortam dengesi

Harici bir ses aktarma cihazı (örneğin TV Connector, müzik vs.) kullanıyorsanız aktarılan sesi daha fazla duymaya odaklanacak ya da ortam seslerini daha fazla duymaya odaklanacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz.

*Özellikler ve işitme cihazı uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme uzmanınıza danışın.

Ana Sayfa: Uzaktan Kumanda görünümü* – standart olmayan özellik

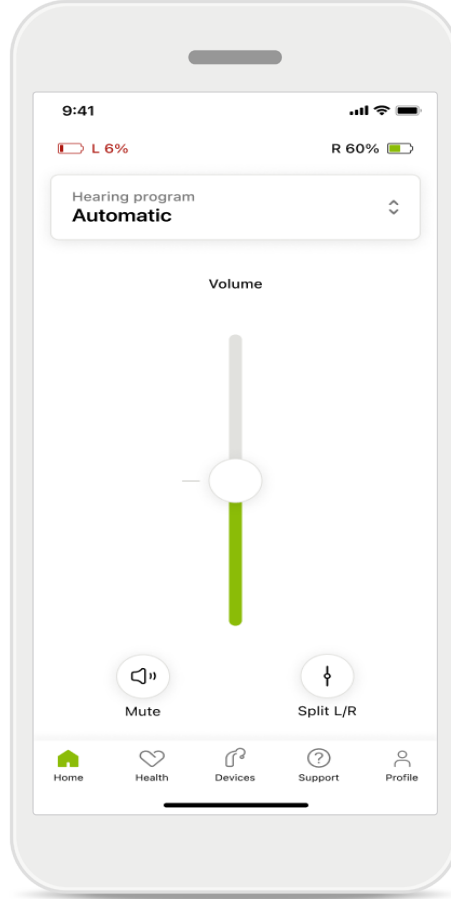


Pil seviyesi

Şarj edilebilir işitme cihazlarında mevcut şarj durumunu görebilirsiniz. Pil seviyesi %20'nin altına düştüğünde simge kırmızıya döner. Yakın zamanda cihazı şarj etmeniz gerekir.

*Özellikler ve işitme cihazı uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için işitme uzmanınıza danışın.

Ana Sayfa: Remote Control gelişmiş ayarları – Yeni program oluşturma veya mevcut bir programı güncelleme*

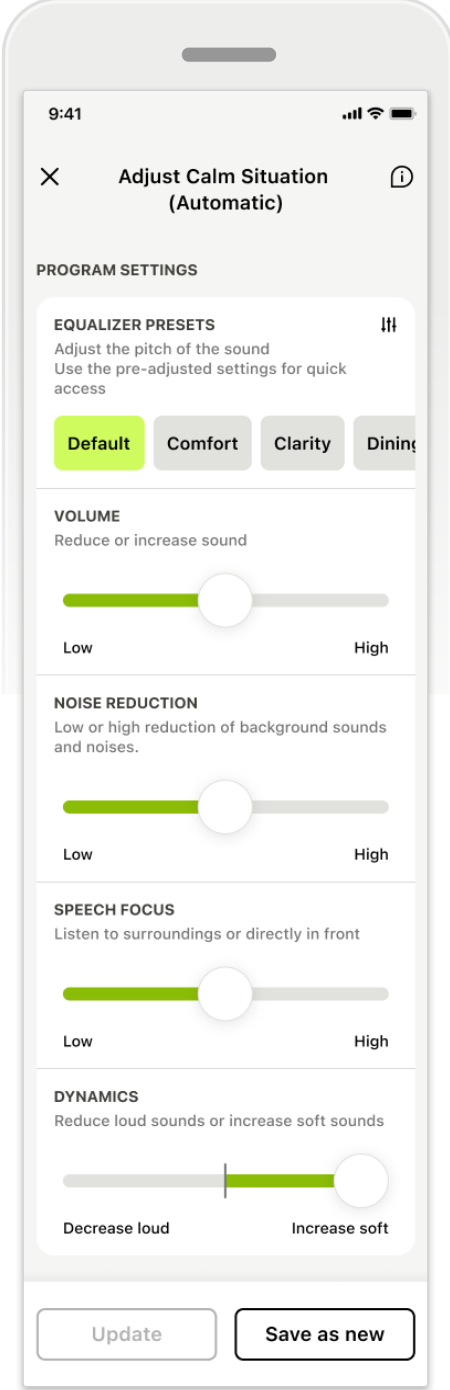

Kişiselleştirilmiş ayarlar


Mevcut bir program üzerinde düzenleme yaptıktan sonra **Güncelle** veya **Yeni olarak kaydet** seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Yeni bir program olarak kaydetmeyi seçtiğinizde programa dilediğiniz adı verebilirsiniz.

Ad için 22 karakterlik bir sınır olduğunu, aynı adı tekrar kullanamayacağınızı, adı boş bırakamayacağınızı ve adın sadece boşluk içermeyeceğini unutmayın.

Yeni bir programı başarıyla kaydettiğinizde ilgili ekran görüntülenir ve yeni ayarınız program listesine eklenir.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Sorun giderme: Remote Control gelişmiş ayarları

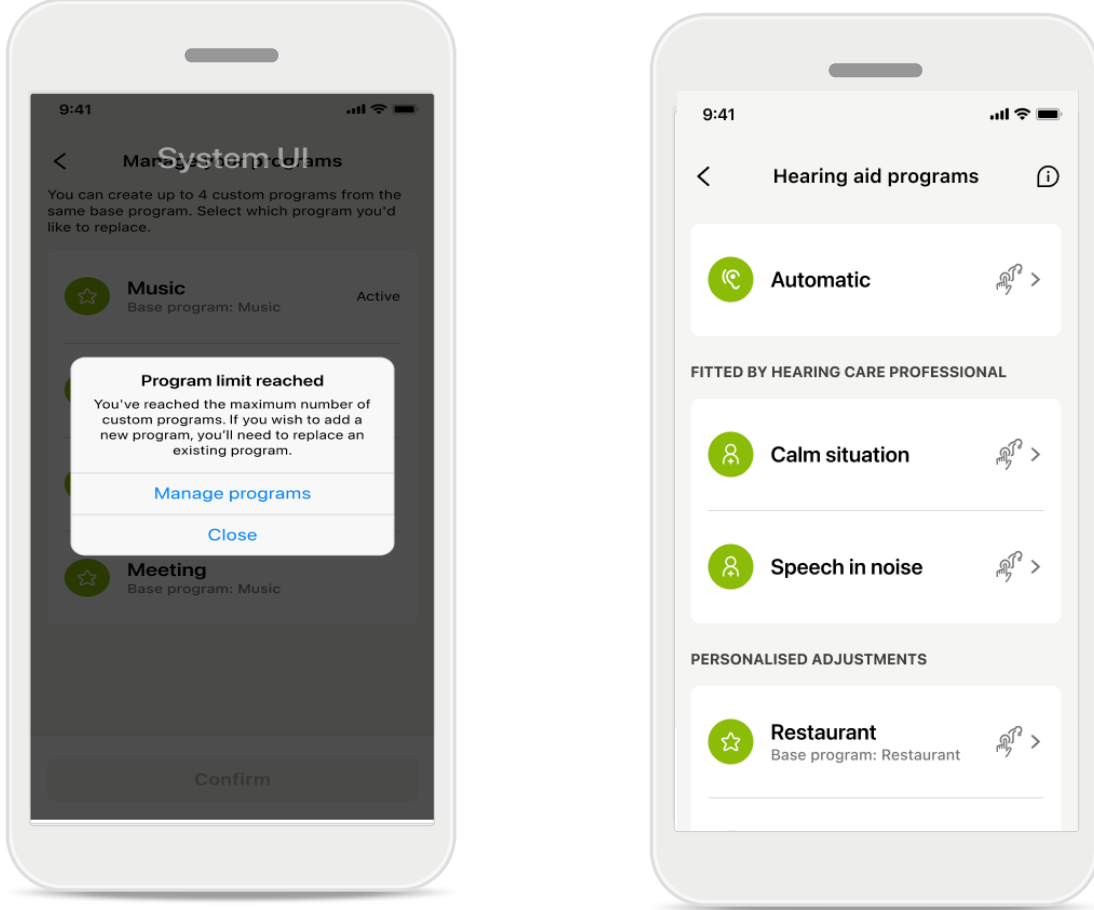



Program sınırına ulaşıldı – maksimum aynı temel program

Aynı temel programa dayalı en fazla dört programınız olabilir.

Sınıra ulaştığınızda **Yönet** seçeneğine dokunarak mevcut programı yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Auracast™ Yayını Kullanımı*

Auracast™ Yayını ile, tesis Auracast™ teknolojisiyle donatılmışsa televizyonlar, tiyatrolar, konserler ve daha fazlasından canlı paylaşılan ses yayınlarını kullanabilirsiniz.

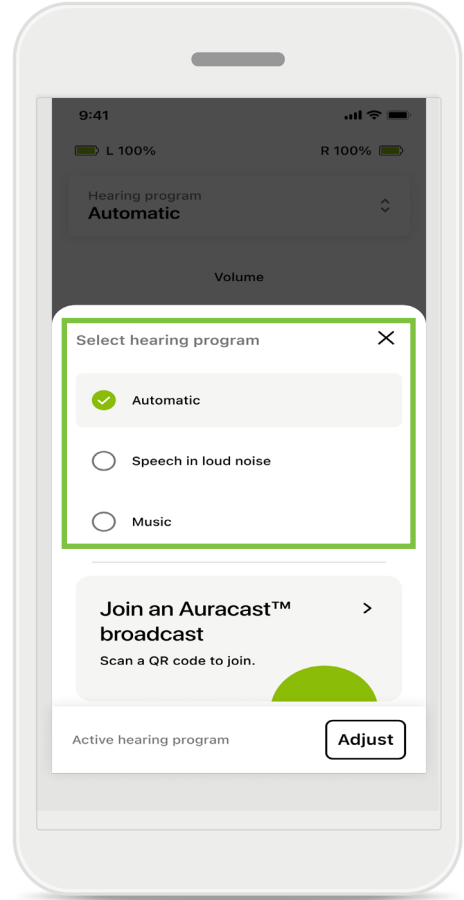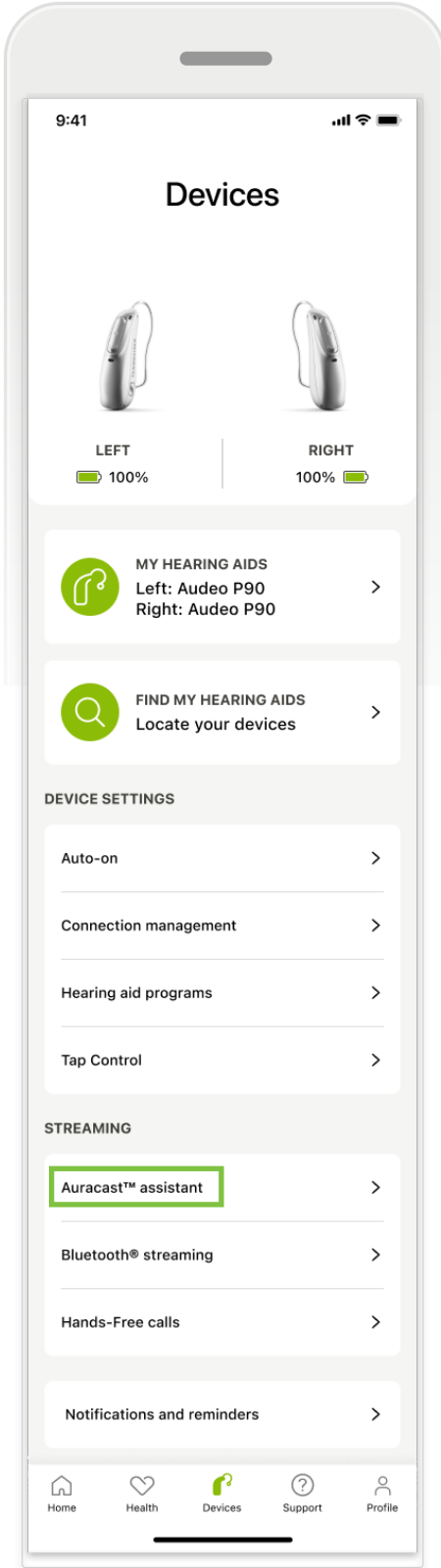

Auracast™ Yayınına, Cihazlar bölümünden Auracast™ asistanına dokunarak veya Programı değiştirerek erişebilirsiniz.


Her iki seçenek de Auracast™ QR kodunu tarama ekranına yönlendirir.

myPhonak uygulamasında Yayın detayları görüldüğünde **Yayına katıl** seçeneğine dokununuz; ses otomatik olarak işitme cihazlarınıza yönlendirilecektir.

Auracast™ marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Cihazlar


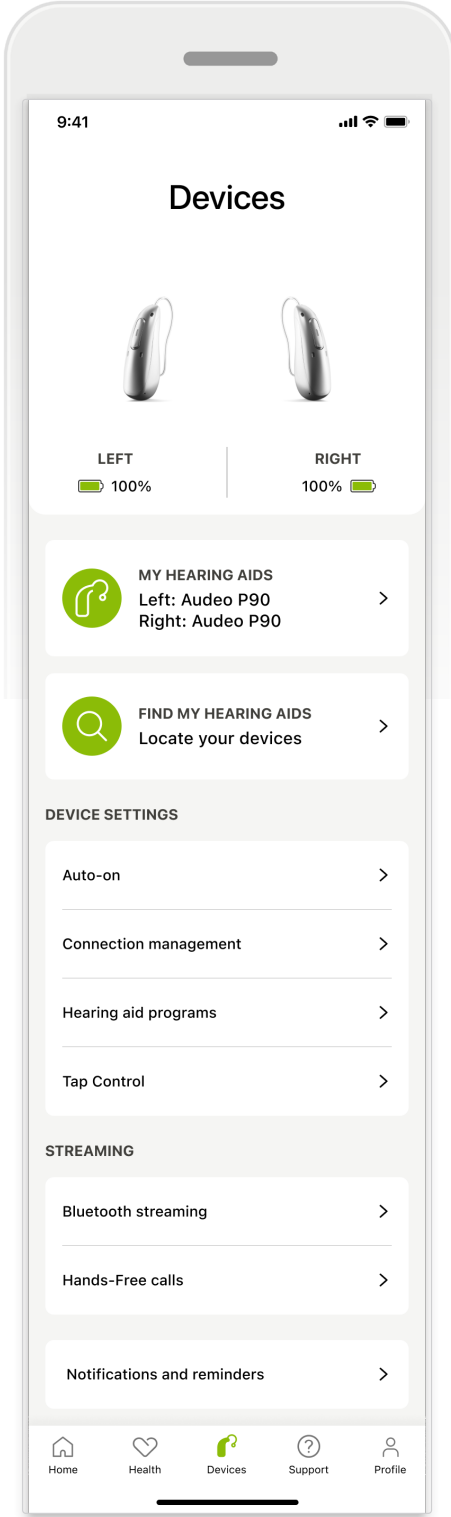


Cihazlar ana ekranı

İşitme cihazlarınızla ilgili tüm seçeneklere (örneğin Program yönetimi ve Cihaz ayarları) Cihazlar bölümünden erişebilirsiniz. Ayrıca şarj edilebilir modeller için pil durumunu görebilirsiniz*.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Cihazlar

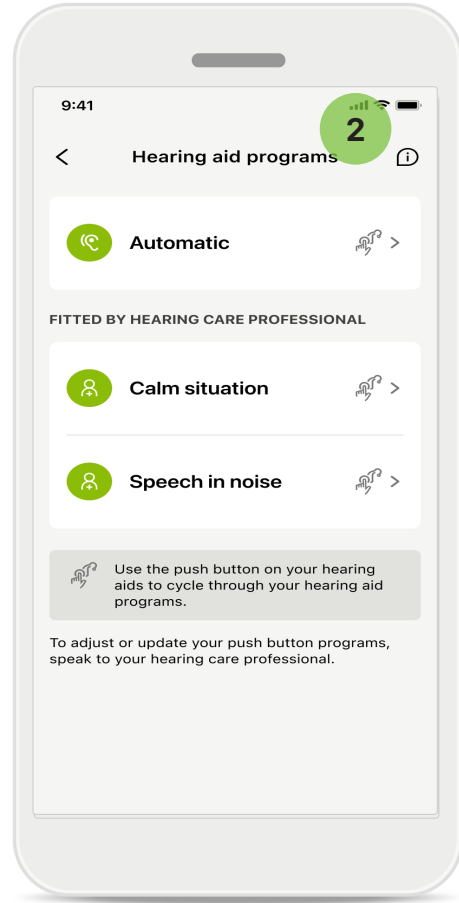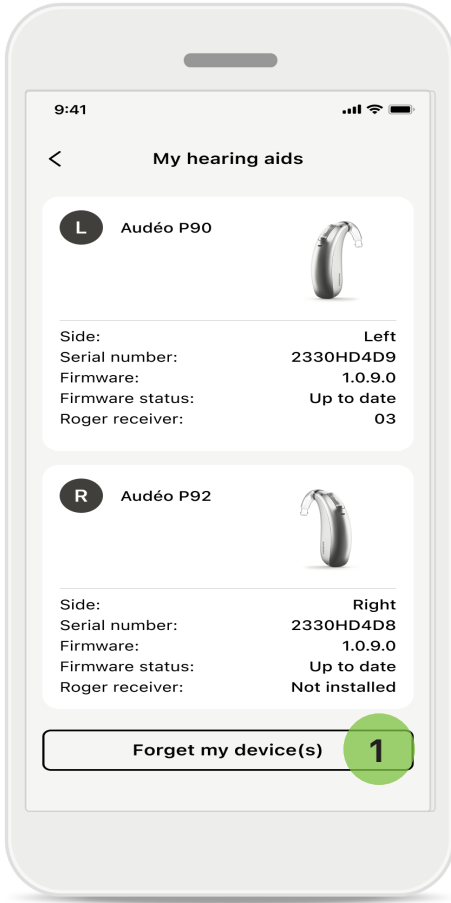


1 Cihazları unut

Cihazlarınızı kaldırmak için İşitme cihazlarım kartına gidin. Cihazlarımı unut düğmesine tıklamanızın ardından açılır bir mesaj görüntülenir. Kaldırma işlemini onaylamanız gerekir. Bunu yaptığınızda uygulamayı kullanmak için işitme cihazlarınızı yeniden eşleştirmeniz gerekeceğini unutmayın.

2 Program yönetimi


İşitme cihazı programları seçeneğine dokunarak mevcut tüm programları görebilirsiniz. Adını düzenlemek veya programı silmek için bir programa dokunun. Üç program vardır: **otomatik program, işitme uzmanınız tarafından oluşturulmuş programlar ve kişiselleştirilmiş programlar**. Program adının yanında bir simge bulunması, programın işitme cihazlarınız üzerindeki düğmeye basılarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Cihazlar

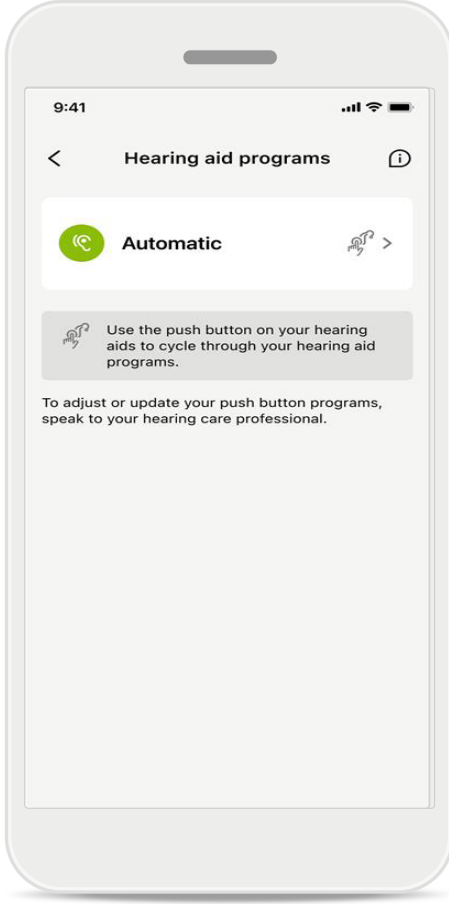

İşitme cihazı programları



Programı silebilir veya programın adını değiştirebilirsiniz. Programın hangi temel programa bağlı olduğunu da görebilirsiniz. Programı kaldırmak için **Programı sil** düğmesine dokununuz. Düğmeye dokunduğunuzda bir açılır mesaj görüntülenir ve sizden kaldırma işlemini onaylamanızı ister.

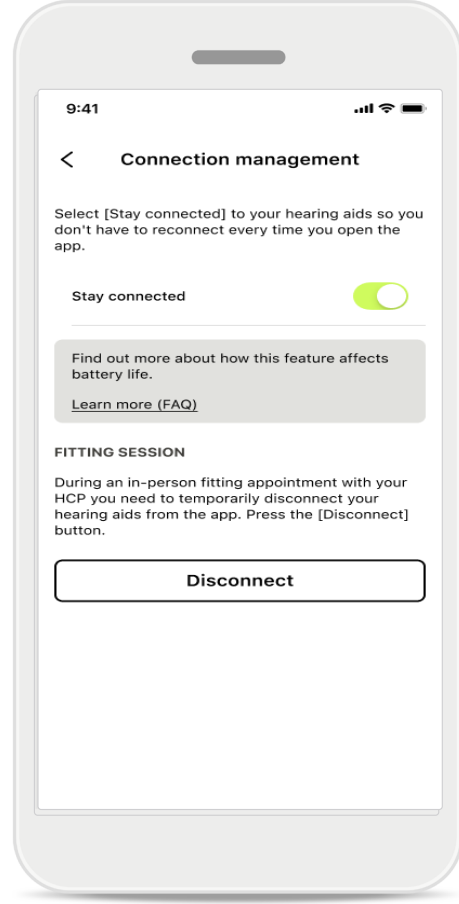

Bağlantı yönetimini etkinleştirme

Uygulamayı her açtığınızda işitme cihazlarına yeniden bağlanmak zorunda kalmamak için **Bağlantıda kal** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Güncellemeler

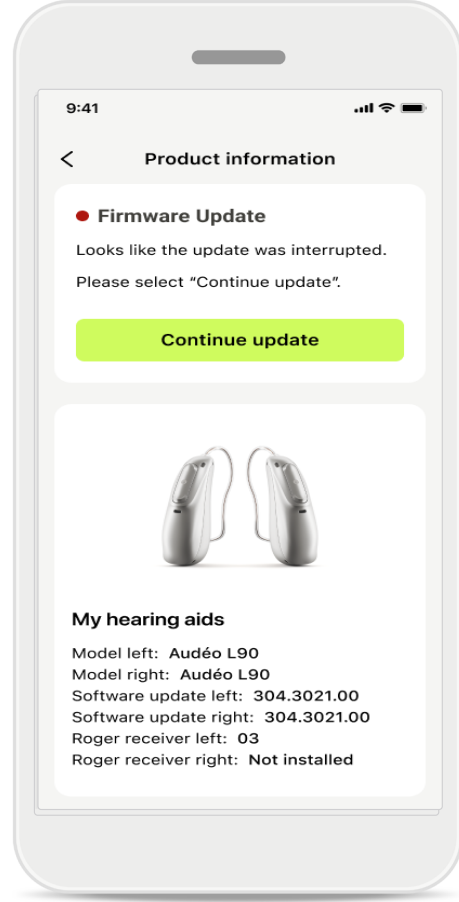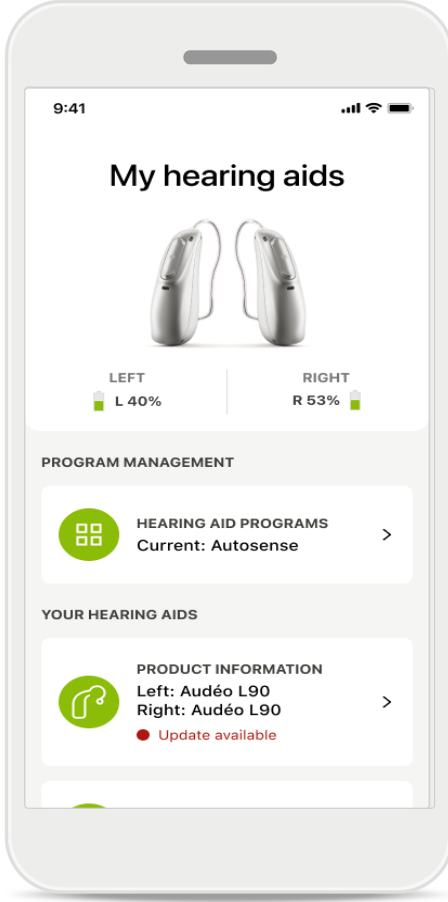


İşitme cihazı güncellemeleri

Mevcut güncelleme, Cihaz bölümündeki Ürün Bilgileri altında görülebilir. Mevcut bir güncelleme olması durumunda daha fazla bilgiye ve güncellenmenin ne hakkında olduğuna ilişkin açıklamaya Ürün Bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Güncellemeyi başlatmak için **Güncelle** seçeneğine dokununuz.

Güncellemeler

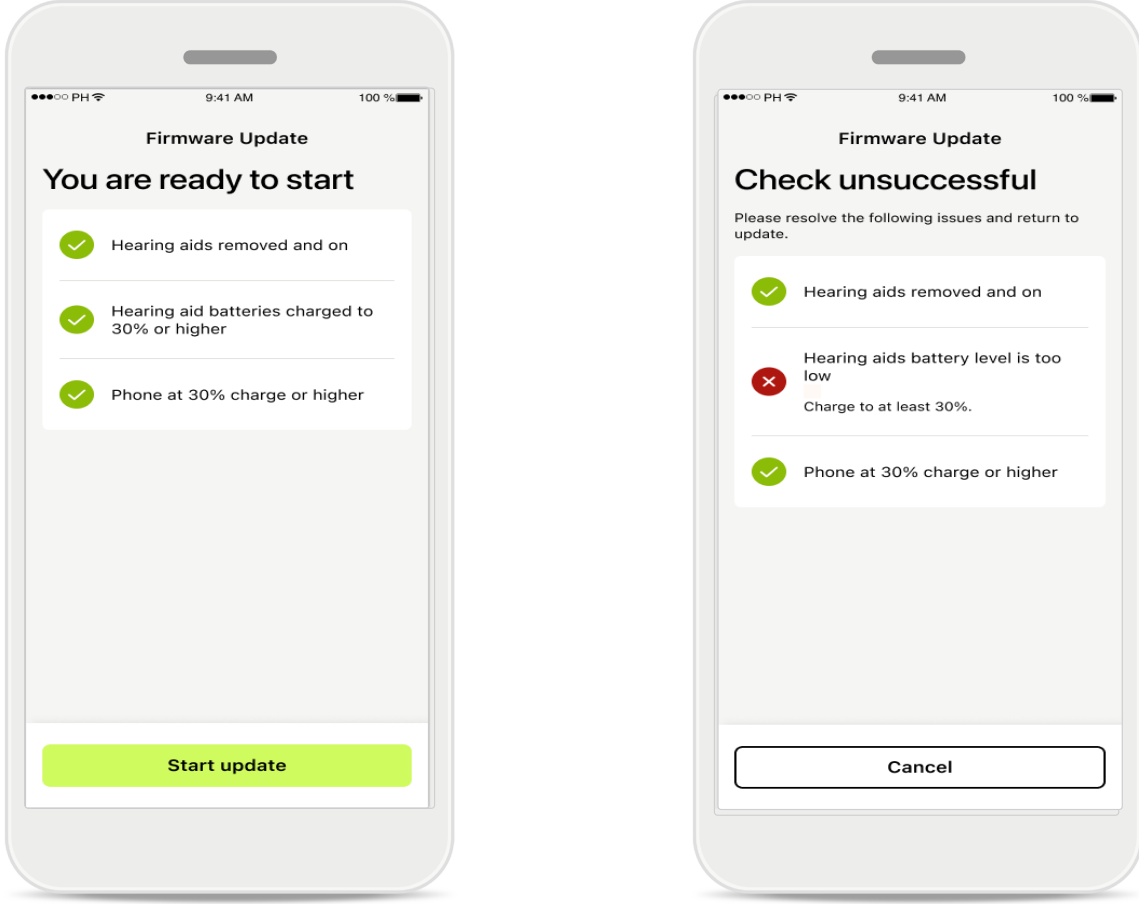

İşitme cihazı güncellemeleri


Güncellemenin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların sağlanmış olması gerekir. Bunun amacı, güncellemenin başarısız olmasını veya kesintiye uğramasını önlemektir (örneğin işitme cihazı pillerinin veya telefonun en az %30 oranında şarja sahip olması).

Sistem bu koşullara ilişkin otomatik bir kontrol gerçekleştirir ve sorun olması durumunda söz konusu soruna ve bunun nasıl düzeltileceğine dair açıklamalar sunar.

Bu ipuçlarını dikkate aldığınızda güncelleme hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Sorun giderme için lütfen şu [bağlantıya](#) gidin.

Destek ve Uzaktan Destek oturumu

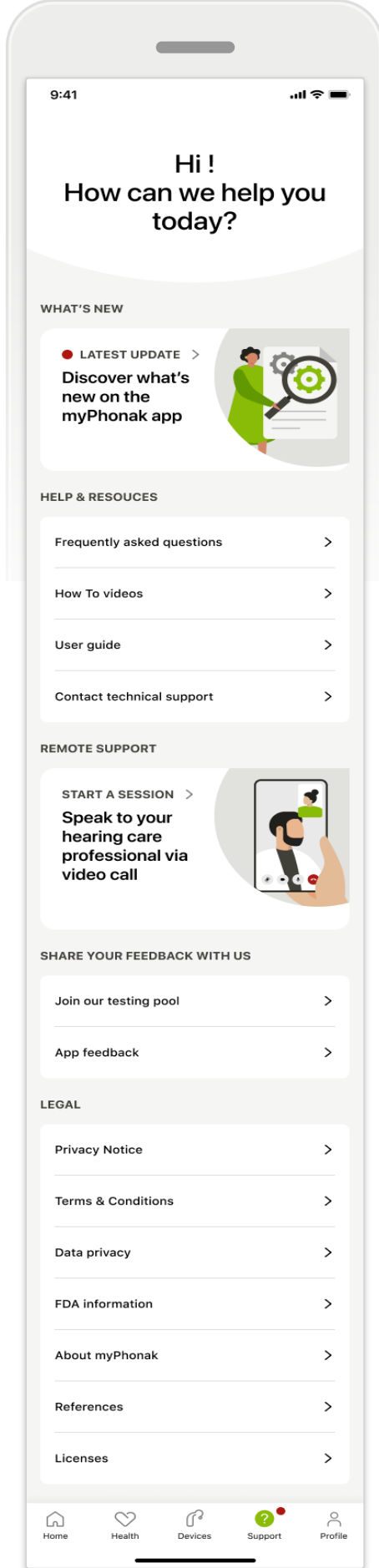


Destek bölümü

Destek ekranından SSS*, Kullanım Kılavuzu, yol gösterme videolarının web siteleri ve Yasal ayarlar kısımlarına erişebilir, feedback verebilirsiniz. Uzaktan Destek bölümüne Bir Oturum Başlat düğmesine dokunarak da ulaşabilirsiniz.

*SSS bağlantısı: <https://product-support.phonak.com/>.

Destek ve Uzaktan Destek oturumu

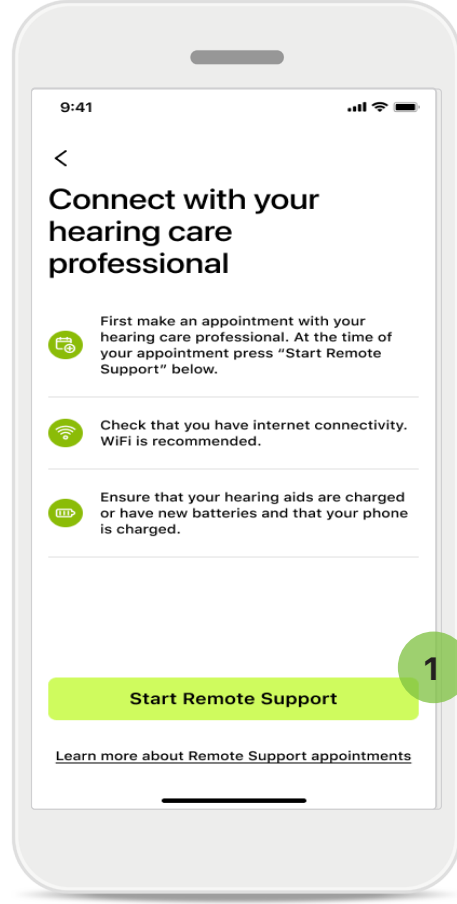

Uzaktan Destek


Destek ekranında **Bir Oturum Başlatın** düğmesine dokunarak işitme uzmanınızla bir Uzaktan Destek oturumuna katılabilirsiniz. Uzaktan Oturum önceden planlanmış olmalıdır.

- 1 Devam etmek için **Uzaktan Desteği Başlat** düğmesine dokunun.


Mikrofona ve kameraya erişim

Mikrofon ve kamera erişimine izin vermeniz istendiğinde MyPhonak uygulamasının mikrofon ve kameraınıza erişmesine izin vermek için **Tamam** düğmesine dokunun.

Destek ve Uzaktan Destek oturumu

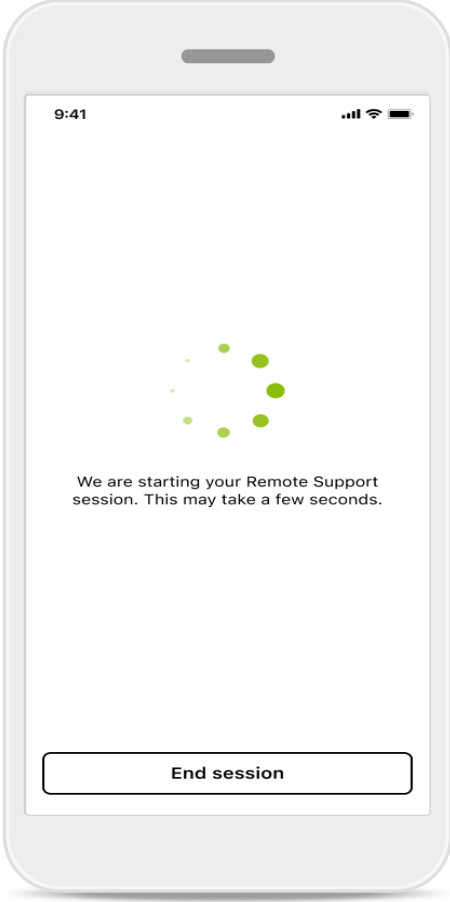


İşitme uzmanınız bekleniyor
Uygulama sizi işitme uzmanınıza bağlar. İşitme uzmanı aramaya katılana kadar bekleyin.

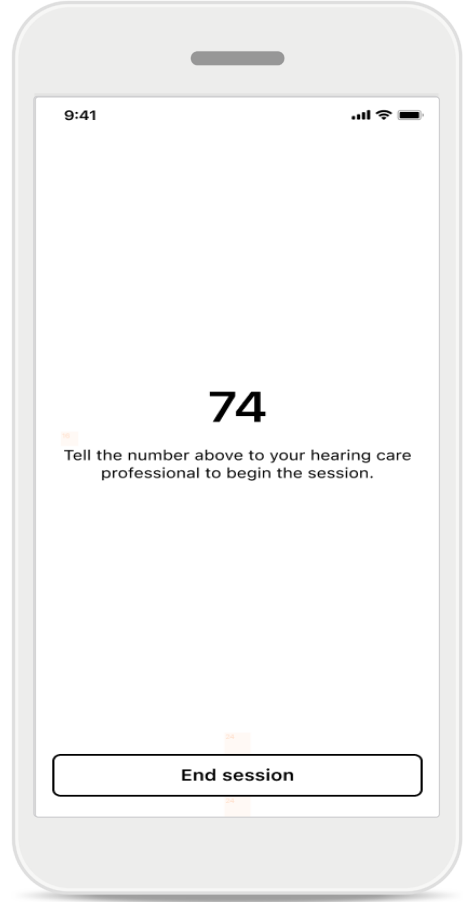


İşitme uzmanınızla bir video konferans platformu üzerinden iletişim kuruyorsanız ekranınızda 2 haneli bir kod görünür. Bağlantıyı tamamlamak için bu 2 haneli kodu sözlü olarak işitme uzmanınızla paylaşın.

Uzaktan Destek oturumu başlatılıyor

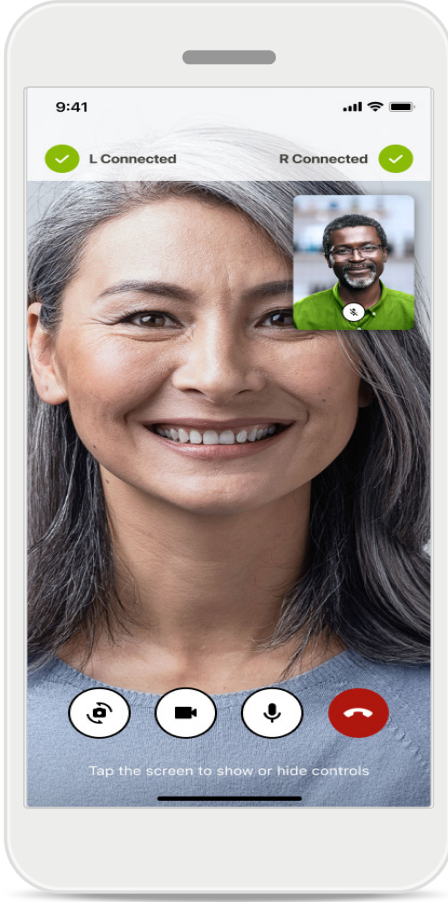

Halihazırda bağlıyken işitme uzmanınızı görebilir ve duyabilirsiniz. Kontrolleri kullanarak sessize alabilir/sesi açabilir, videoyu devre dışı bırakabilir, kameraları değiştirebilir veya aramayı sonlandırabilirsiniz.

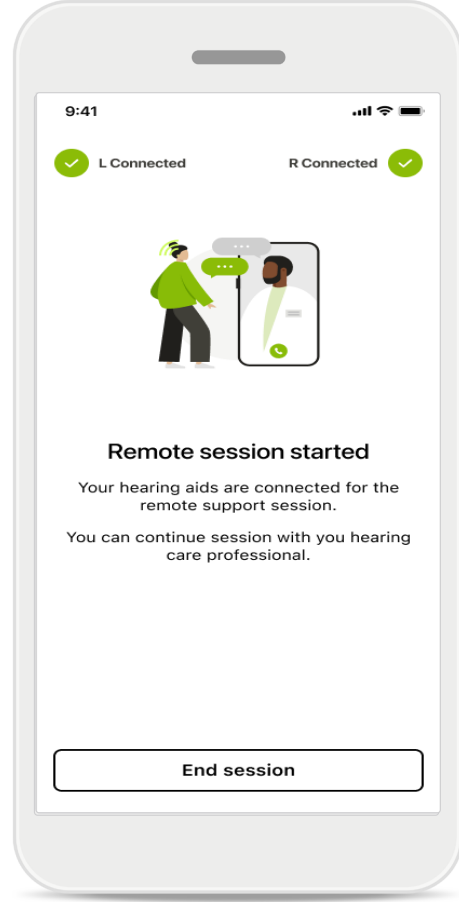


İşitme uzmanınızla bir video konferans platformu üzerinden iletişim kurarken işitme uzmanınızı myPhonak uygulaması üzerinden duymaz veya görmezsiniz ancak işitme cihazlarınız bağlıdır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazlarınıza bağlanmaya ihtiyaç duyuyorsa bunu akıllı telefonunuz aracılığıyla uzaktan yapabilir. İşitme uzmanınız bağlandığında sizi bilgilendirecektir.

Arama sona erdiğinde deneyiminizi değerlendirebilirsiniz. Feedback vermek için bağlantıya dokununuz. Ana ekrana dönmek için **Bitti** düğmesine dokununuz.



Sorun giderme: Uzaktan Destek oturumu

Uzaktan Destek oturumu, sizi işitme uzmanınıza bağlamak için interneti kullanır. Daha yüksek kalite için Wi-Fi kullanmanızı öneririz.

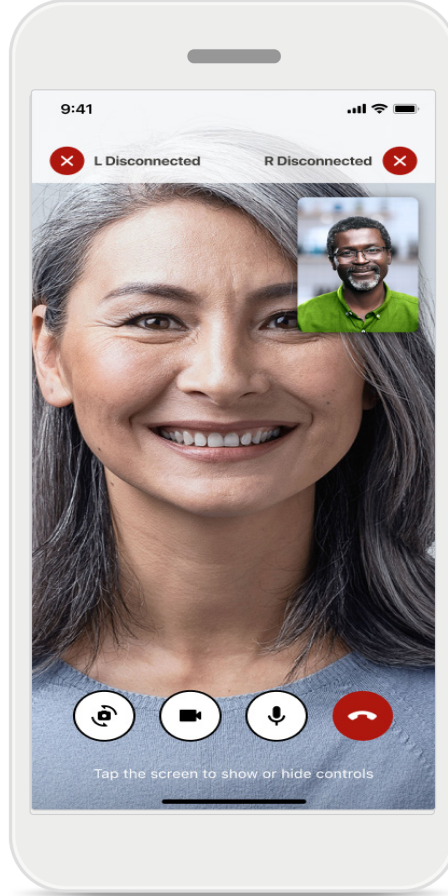

İşitme cihazlarıyla bağlantı kesildi
İşitme cihazlarınızla olan bağlantı ekranın üst kısmında görünür. İşitme cihazlarının bağlantısı kesilirse sembol kırmızıya döner. Bu durumda işitme uzmanınızın yeniden bağlanması gerekecektir.

Sorun giderme: Uzaktan Destek oturumu

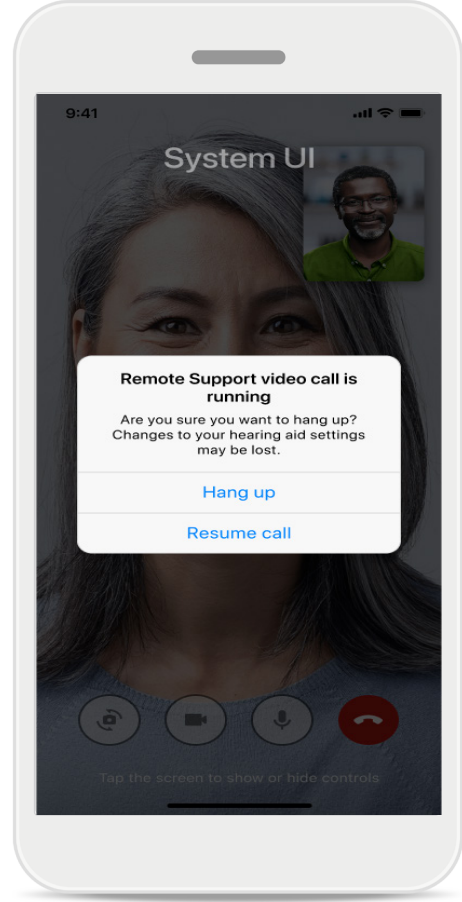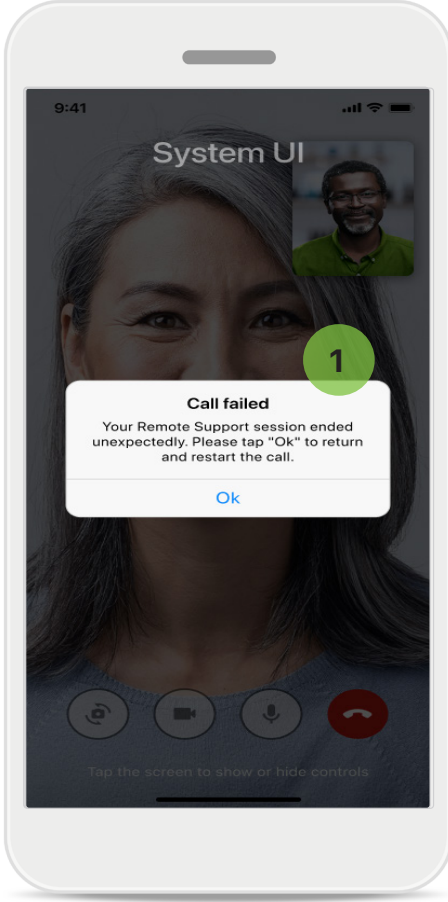

- 1 Arama başarısız oldu**
Arama başarısız olursa aramayı yeniden başlatabileceğiniz ana ekrana geri dönmek için **Tamam** düğmesine tıklayın.

Devam eden aramayı sonlandırma
Arama devam ederken aramayı sonlandırırsanız bu açılır mesaj görüntülenir.

Sağlık Bölümünde Sağlık Verisi İzleme: Ayarlama

Sağlık bölümünün burada açıklanan bazı özellikleri yalnızca belirli işletme cihazları ile kullanılabilir.


Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.phonak.com>

Sağlık özelliklerine erişmek için  kayıtlı bir myPhonak hesabınız olmalıdır.

Sağlık takibinin kalitesini artırmak için iPhone'unuzda konum hizmetlerini etkinleştirin.

Erişimin reddedilmesi sağlık verilerini izlemenizi engeller.

Sağlık verilerinizi doğru şekilde hesaplamak için bilgilerinizi girin. Bu bilgilerin isteğe bağlı olduğunu unutmayın. Kontrol tamamen sizde!

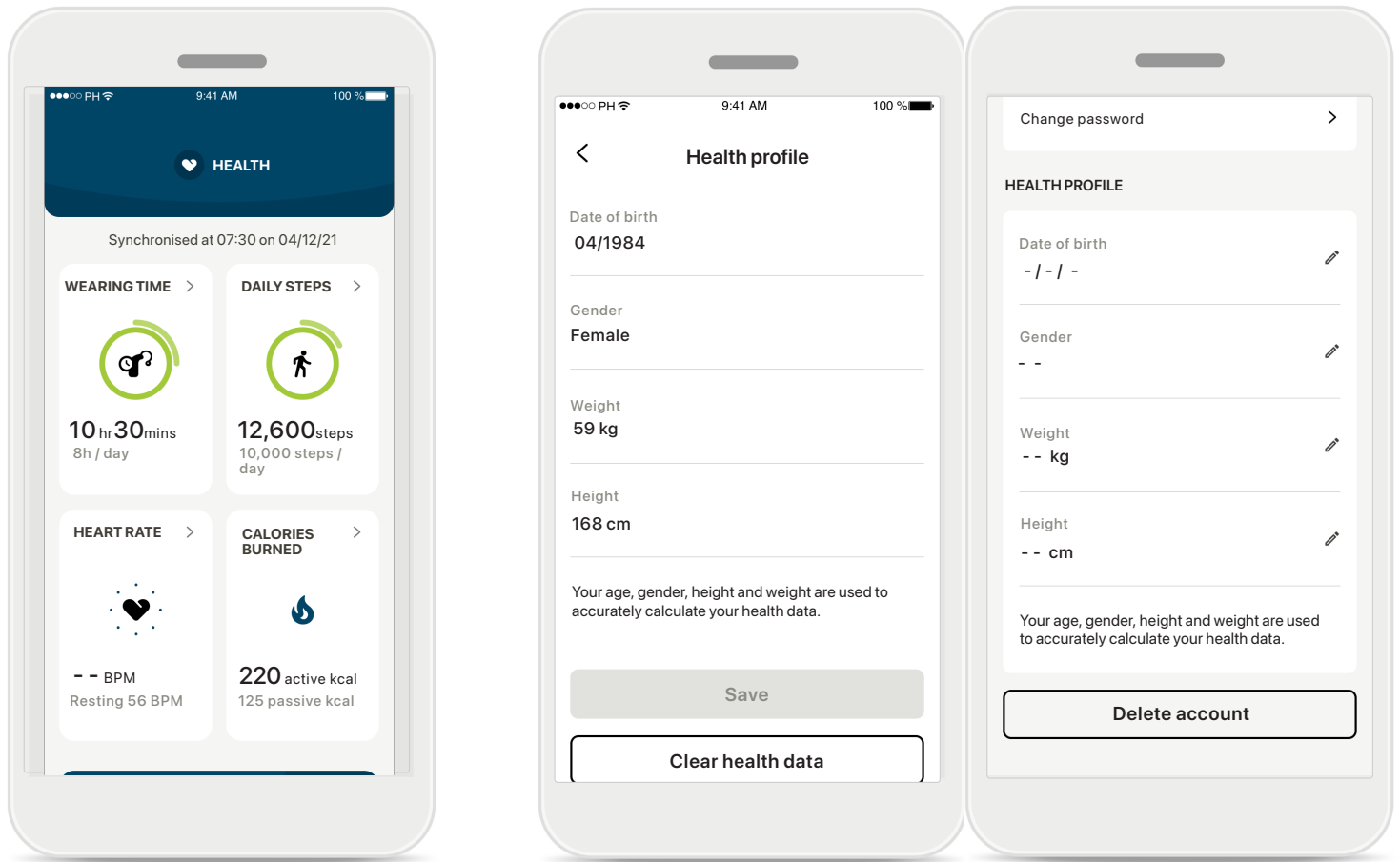

Sağlık bölümüne giriş yapın

Ayarlama işlemi tamamlandığında sağlık panosuna (sağlık ana ekranı) giriş yapabilirsiniz.



Sağlık profilini düzenleme/temizleme

Sağlık profili verilerinizi dilediğiniz zaman Profil bölümünden düzenleyebilir veya temizleyebilirsiniz. Kişisel Bilgiler kısmına gidin, aşağı kaydırarak Sağlık Profili'ne gelin ve verilerinizi güncellemek ya da temizlemek için düzenleme (kalem) simgesine dokununuz.

Sağlık Panosu

Sağlık panosunu kullanarak şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- İşitme cihazlarınız tarafından desteklenen sağlık işlevlerine erişmek ve değerlerin gerçek zamanlı* değişimini görmek,
- Önceden belirlenmiş hedeflere yönelik ilerlemeyi görmek,
- Sağlık ipuçlarına erişmek (diğer sağlık uygulamaları için öneriler).

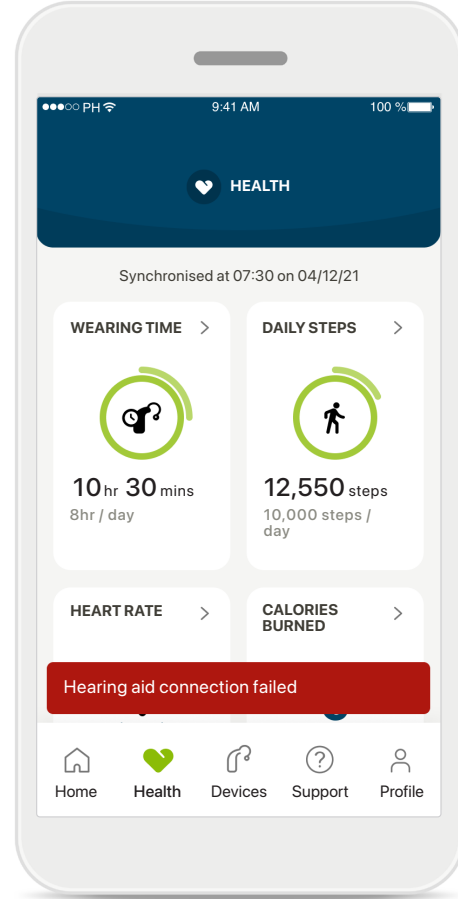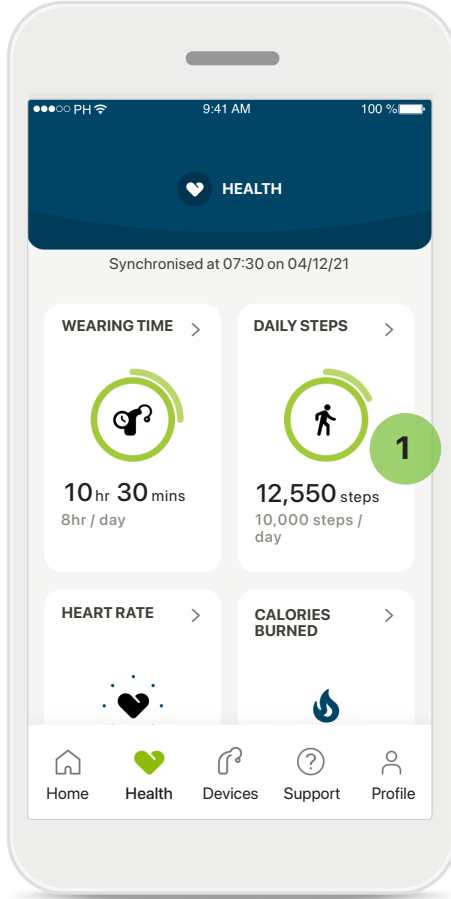

1 Hedef ilerlemesi aşıldı

Hedefler belirlediyseniz, simgenin etrafındaki ikinci daire olarak hedefinizin maksimum değeriyle birlikte ilerlemenizi görebilirsiniz.

İşitme cihazlarınızla bağlantı

Sağlık işlevi değerlerinizin canlı olarak değiştiğini görebilmek için işitme cihazlarınıza bağlanmanız gerektiğini unutmayın. Uygulamayı işitme cihazlarınızla sık sık senkronize etmeniz size daha doğru ve güncel bilgiler sağlar. Bağlantı kesilirse veya verileriniz senkronize edilemezse bu konuda bilgilendirilirsiniz ve ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için web sitesindeki SSS'ler bölümüne yönlendirilirsiniz.



*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Bu bölümde yer alan bilgiler yalnızca eğitici ve bilgilendirici niteliktedir. Sağlık bölümünde gösterilen bilgileri profesyonel tıbbi tavsiye olarak kullanmamalısınız ve bunlar profesyonel tavsiye yerine geçmemelidir.

Sağlığınız hakkında sorularınız varsa veya bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir.

Kalp atış hızınızı izlemek için işitme cihazlarının, kulak kanalına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. En iyi sonuç için sabit durun ve ses çıkarmayın.

Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri: Kullanım süresi, adımlar, aktivite seviyeleri*, yürünen ve koşulan mesafe

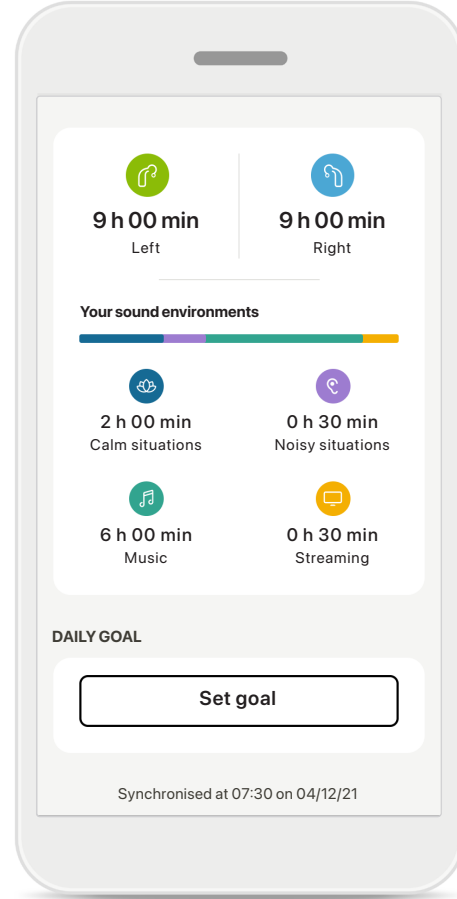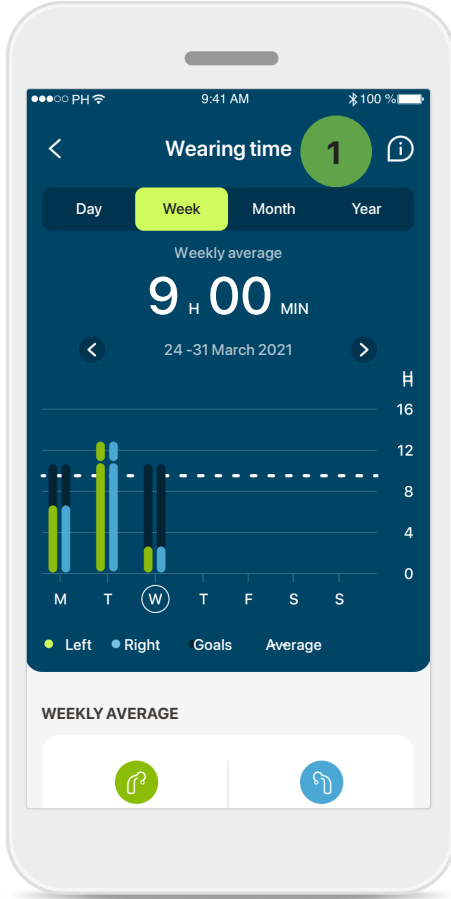


1 Kullanım süresi

Panodaki kullanım süresi kartına tıklayarak günlük kullanım süresi grafiğine girebilirsiniz. Haftalık, aylık veya yıllık görünüme gitmek için yeşile dönen ilgili sekmeye dokununuz.

İki işitme cihazınız varsa grafiklerde hem sol hem de sağ işitme cihazının değeri görüntülenir. Aşağıda güncel (günlük görünüm için) veya ortalama (günlük olmayan görünüm için) değerlerin yanı sıra farklı ses ortamlarında kullanım süresinin bir dökümünü görebilirsiniz.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri: Kullanım süresi, adımlar, aktivite seviyeleri*, yürünen ve koşulan mesafe

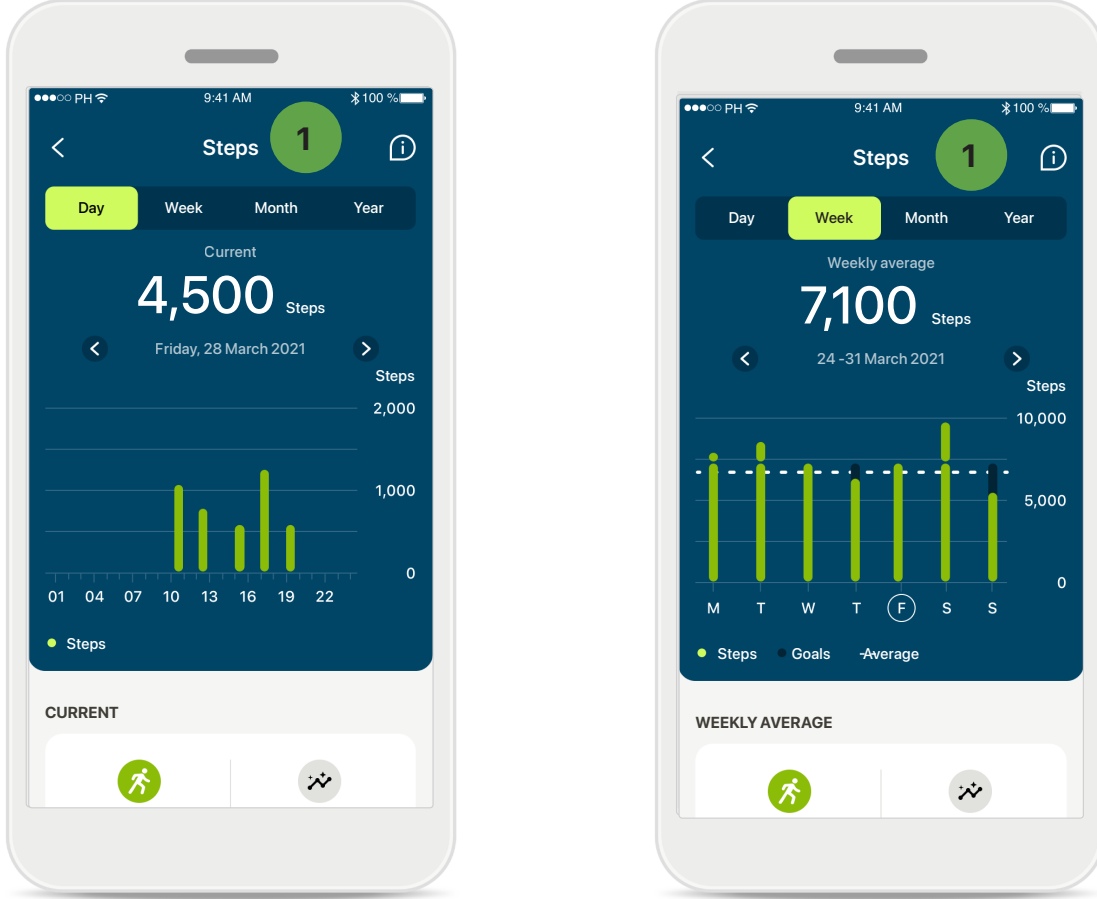

1 Adımlar, aktivite seviyeleri ve mesafe



Panodaki adımlar kartına tıklayarak günlük adımlar grafiğine girebilirsiniz. İlgili sekmeye dokunarak haftalık, aylık veya yıllık görünümüne gidin; sekmeye dokunduğunuzda yeşile döner.

Aşağıda mevcut (günlük görünüm için) veya ortalama (günlük harici görünüm için) değerlerin yanı sıra, yürüdüğünüz veya koştuğunuz yaklaşık mesafeyi görebilirsiniz.

Aktivite seviyeleri, hiç aktivite yapmadığınız, düşük seviyede (bir miktar hareket algılanır), orta seviyede (yürüme algılanır) veya yüksek seviyede (koşma algılanır) aktivite yaptığınız süreyi gösterir.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri: Kalp atış hızı*, yürüyerek ve koşarak* harcanan Kaloriler*

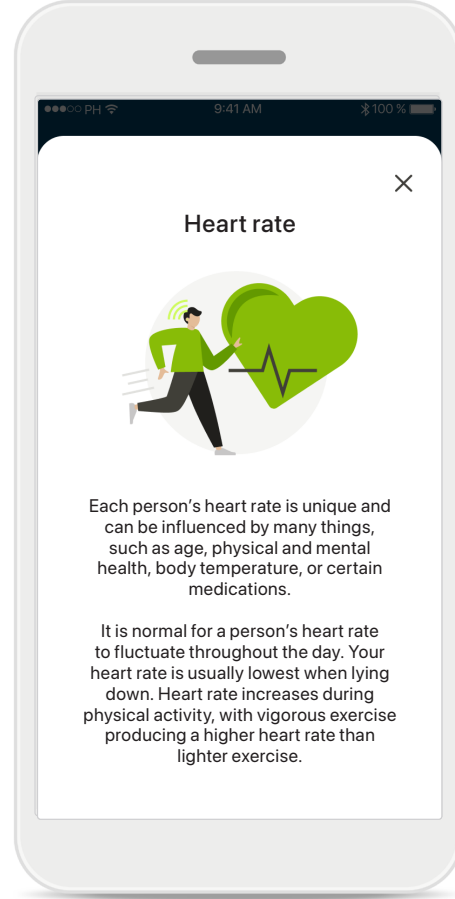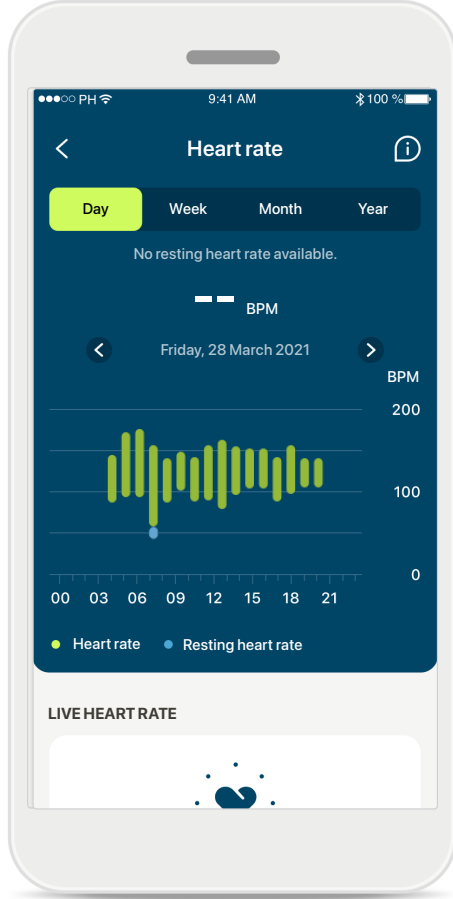

Kalp atış hızı (HR) takibi

Tüm görünümler canlı HR içerir. Günlük görünüm, dinlenme halinde kalp atış hızını (RHR) ve saatlik HR aralıklarını içerir. Haftalık görünüm, dinlenme halinde günlük ortalama kalp atış hızını (RHR), canlı kalp atış hızını ve günlük HR aralıklarınızı içerir.



Haftalık, aylık ve yıllık görünümeler şunları içerir:

- Günlük görünüm - saatlik çözünürlük (Saatlik periyodik ve canlı kalp atış hızı aralıkları, günde bir adet dinlenme halinde en düşük kalp atış hızı),
- Haftalık/aylık/yıllık görünümeler - Kalp atış hızı aralıkları ve dinlenme halindeki kalp atış hızı aralıklarının günlük/haftalık/aylık çözünürlüğü.

Kalp atış hızı ve dinlenme halinde kalp atış hızınızı takip etmenin neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi ve referansa ulaşmak için ekranın sağ üst kısmındaki  simgesine tıklayın.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Sağlık bölümü ayrıntılı özellik görünümleri: Kalp atış hızı*, yürüyerek ve koşarak* harcanan Kaloriler*

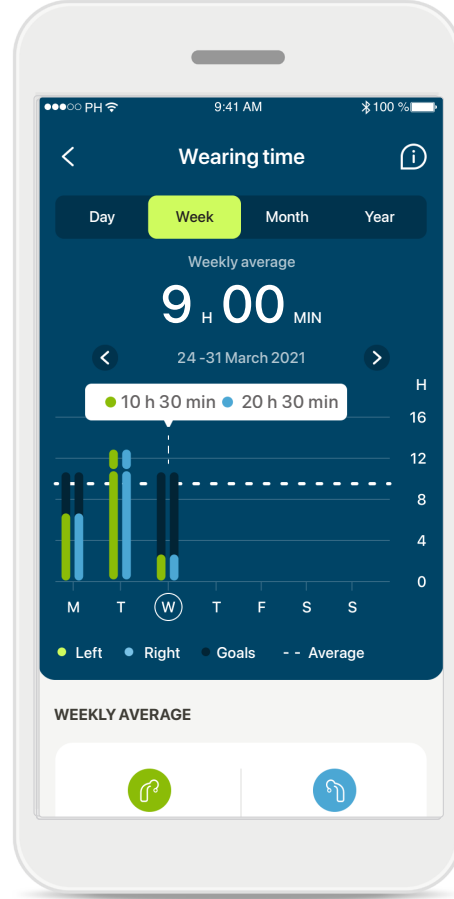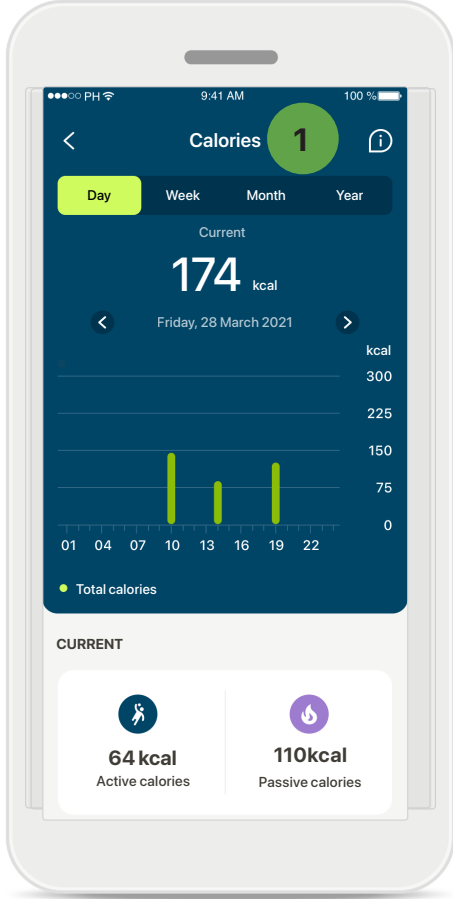


1 Kalori takibi

Günlük görünümde mevcut aktif kaloriler (fiziksel aktivite ile yakılanlar) ve pasif kaloriler (bazal metabolik hıza dayanan) yer alır. İki tür kalorinin tamamı da (toplam) grafikte gösterilir. Haftalık, aylık ve yıllık görünümde ortalama aktif, pasif ve toplam kalori değerleri bulunur.

Araç ipuçları

Beyaz başlıkta (araç ipucu) tam değerlerin görüntülenmesi için grafik çubuklarındaki bir noktaya dokununuz.

Sağlık: Diğer işlevler*

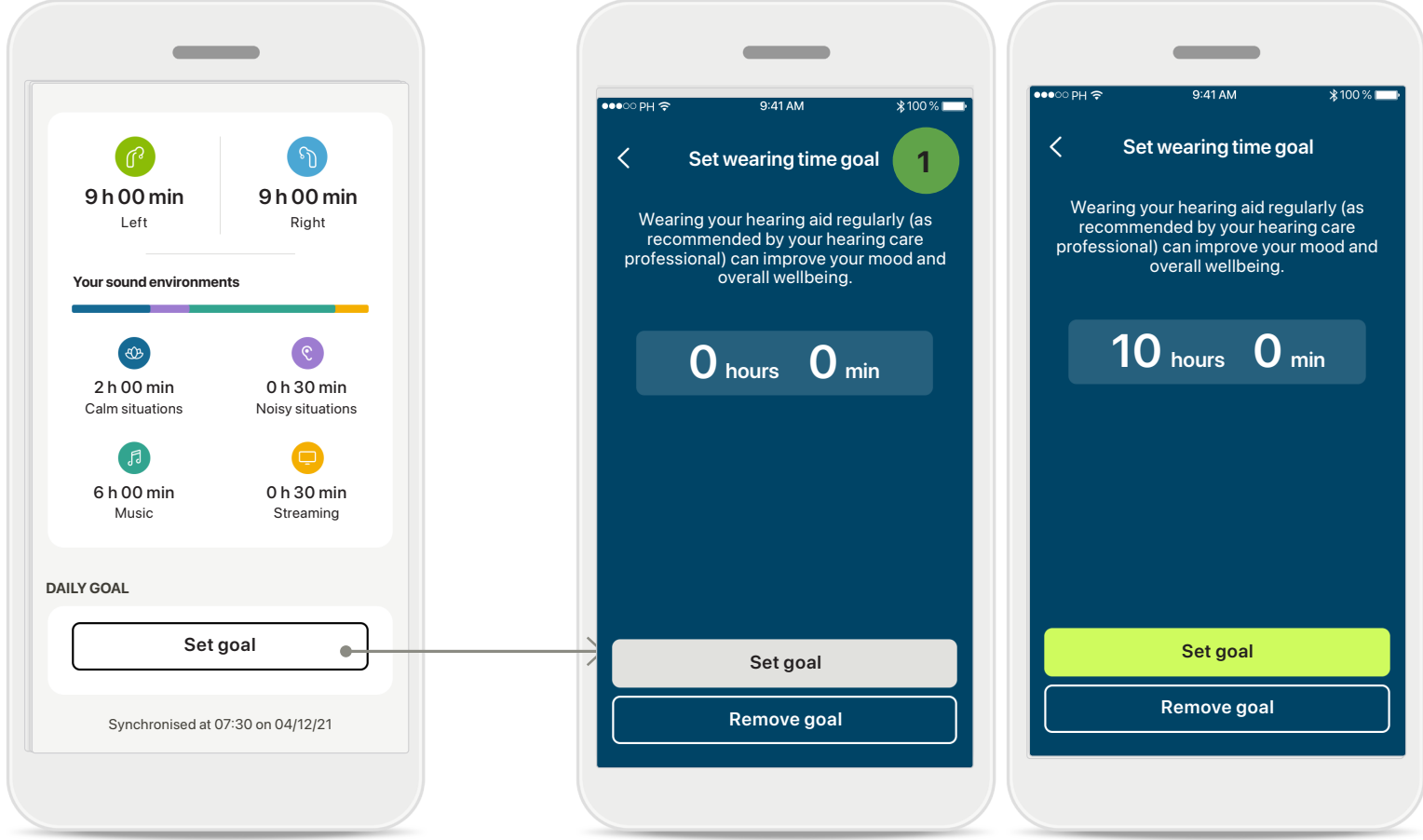


1 Hedef belirleme, değiştirme ve kaldırma*

Adım ve kullanım süresi için hedef belirlemek isteğe bağlıdır. Bunları sağlık bölümü ayarlarken, sağlık panosunda veya bu özelliklerin ayrıntılı görünümünü belirleyebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi ekran akışlarını takip etmek için **Hedef belirleyin** veya **Hedefi değiştir** düğmesine dokunun. Kullanım süresi veya adımlar için geçerli bir sayı girin ve değişikliklerinizi kaydetmek için Hedef belirleyin ögesine dokunun. Hedefi silmek istediğinizde Hedefi kaldır sekmesine dokunun.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Sağlık: Diğer işlevler*

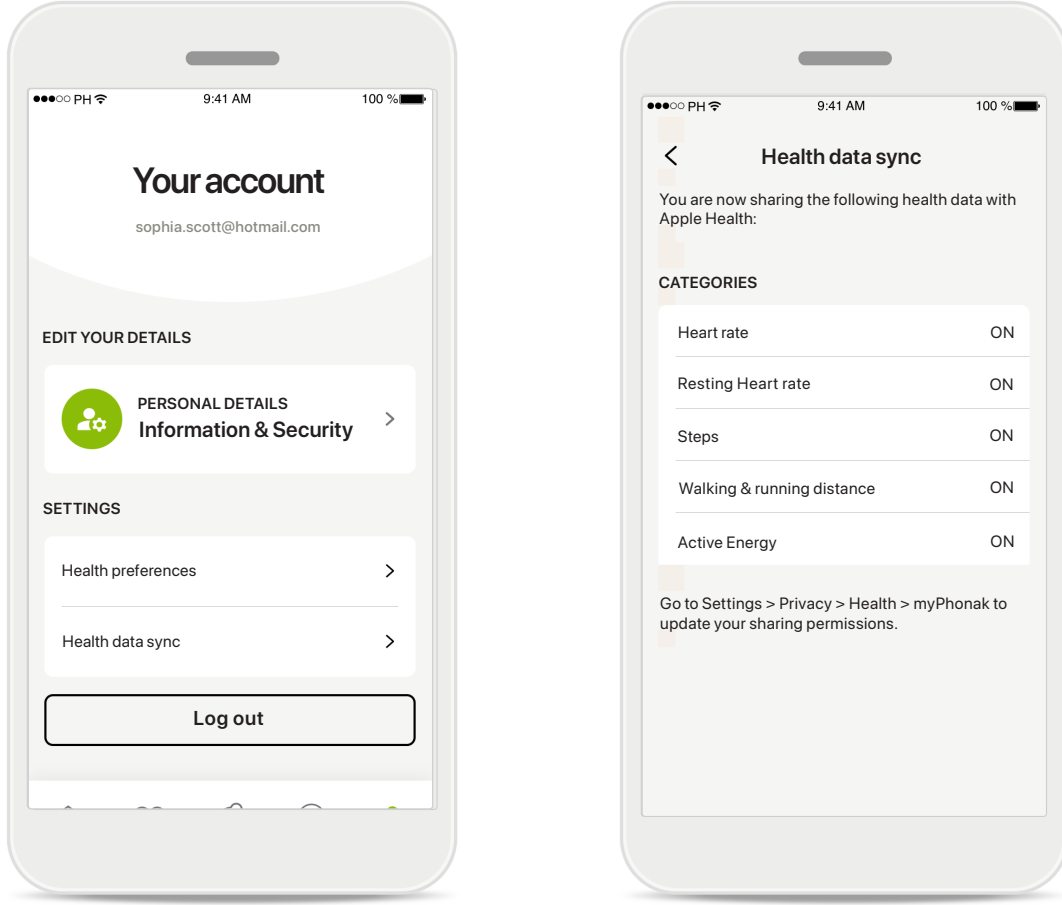

Phonak sağlık verilerinizi Apple Health ile senkronize edin

Ayarlar bölümündeki Profil ögesinden Sağlık verileri senkronizasyonunu açın. Talimatları takip edin ve Apple Health ile senkronize etmek istediğiniz myPhonak sağlık verilerini açın. Senkronizasyon işleminin ardından Sağlık verileri senkronizasyonu bölümünü yeniden açarak Apple Health ile hangi verileri paylaştığınızı görebilirsiniz.

*Yalnızca belirli işitme cihazlarında mevcuttur. <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> adresini ziyaret edin veya işitme cihazı uzmanınıza danışın.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanım amacı:

Uygulama, hedef işitme cihazı kullanıcılarının, fitting programının izin verdiği sınırlı menzil içinde işitme cihazı ayarlarını seçmesi, yapılandırması ve kaydetmesi için bağımsız bir yazılımdır. Uygulama ayrıca, hedeflenen işitme cihazı kullanıcılarının, uzaktan işitme cihazı ayarlamaları için işitme uzmanlarıyla bağlantı kurmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Hedef kullanıcı popülasyonu:

Bu cihaz, uyumlu işitme cihazının kullanımına ilişkin klinik endikasyonları karşılayan 18 yaşından büyük kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Hedef kitle:

Uyumlu bir cihaz kullanan işitme kaybı yaşayan kişiler.

Endikasyonlar:

Lütfen endikasyonların uygulamayla değil, uyumlu işitme cihazlarıyla ilgili olduğunu unutmayın. Ayrıntılı bilgi için işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Kontrendikasyonlar:

Lütfen kontrendikasyonların uygulamayla değil, uyumlu işitme cihazlarıyla ilgili olduğunu unutmayın.

Klinik fayda:

Klinik fayda uygulamadan değil, uyumlu işitme cihazlarından kaynaklanır. Uygulama, ilk fitting'in izin verdiği aralık dahilinde, işitme cihazı ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre düzenleme ve kaydetme olanağı sağlayarak hedef kullanıcılara fayda sağlar. Uygulama, hedef kullanıcıların işitme cihazı ayarlarını uzaktan yapabilmeleri için işitme uzmanlarıyla iletişim ve bağlantı kurmalarını sağlayan pratik bir yöntem sunar.

Yan etkiler:

Uygulamanın kullanımına ilişkin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.

Kullanım sınırlamaları:

Uygulamanın kullanımı uyumlu cihazın/cihazların özellikleriyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Uygulamanın tüm işlevlerinden yararlanmak için sürekli olarak internet bağlantısının gerekli olduğunu lütfen unutmayın.

Uygulamayla ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olay, üretici temsilcisine ve ikamet edilen ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir. Ciddi olay, aşağıdakilerden herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek her türlü olay olarak tanımlanır:

- a. hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin ölümü
- b. hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunun geçici veya kalıcı olarak önemli ölçüde bozulması
- c. ciddi bir kamu sağlığı tehdidi

Beklenmedik bir işlem ya da olayı bildirmek için lütfen üretici veya bir temsilciyle iletişime geçin.

Güvenlik bildirimi

Kullanıcı verileri gizli verilerdir ve korunmaları önemlidir:

- Akıllı telefonlarda en son İşletim Sistemi güvenlik güncellemelerinin kurulu olduğundan emin olun. Otomatik güncellemeyi etkinleştirin.
- Kurulu uygulama sürümünüzün güncel olduğundan emin olun
- İşitme cihazlarınızla birlikte yalnızca, resmi mağazalardan alınan orijinal Sonova uygulamalarını kullanın.
- Yalnızca resmi mağazalarda bulunan güvenilir uygulamaları kurun.
- Güçlü şifreler kullandığınızdan emin olun ve bilgilerinizi gizli tutun.
- Telefonu PIN ve/veya biyometrik (örn. parmak izi, yüz) ayarlar ile kilitleyin ve telefonu birkaç dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayın.
- Kurulu uygulamalara sadece gerekli olan izinlerin verildiğinden emin olun.
- Halka açık bir alanda işitme cihazlarınızla Bluetooth eşleştirmesi oluşturmaktan kaçının. Bunun nedeni, üçüncü tarafın istenmeyen müdahalesi riskidir. Bu Bluetooth eşleştirmesini evde yapmanızı öneririz.

Önemli güvenlik bilgileri

Lütfen uygulamanızı kullanmadan önce, sonraki sayfalarda yer alan ilgili güvenlik bilgilerini okuyun.

- İşletim sistemi kısıtlamaları kaldırılmış veya kök erişim izni verilmiş bir telefon KULLANMAYIN Verileri her zaman güvende tuttuğunuzdan emin olun. Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını aklınızda bulundurun.
 - Verileri güvenli olmayan kanallar üzerinden aktarırken anonim veriler gönderin veya verileri şifreleyin.
 - Akıllı telefonunuzun veri yedeklerini sadece veri kaybına karşı değil, aynı zamanda hırsızlığa karşı da koruyun.
 - Artık kullanmayacağınız veya atacağınız bir akıllı telefondaki tüm verileri kaldırın.
- ① Ayarları değiştirmek (örneğin ses seviyesini azaltmak veya gürültü engelleyicinin seviyesini artırmak) trafikten gelen seslerin işitilmemesi gibi tehlikelere yol açabilir.

Yazılım bakımı:

Piyasadan gelen feedback'leri sürekli olarak takip etmekteyiz. En son uygulama sürümüyle ilgili sorunlarla karşılaşmanız halinde lütfen yerel üretici temsilcinizle iletişime geçin ve/veya Appstore ya da Google Play Store'da feedback verin.

Tüm uygulama sürümleri için ilgili tüm dillerde hazırlanmış elektronik formatlı kullanım kılavuzlarına web sayfası üzerinden erişilebilir. Kullanım kılavuzlarına erişmek için şu adımları izleyin:

- <https://www.phonak.com/en-int/global-locations> bağlantısına tıklayın ve ilgili ülkeyi seçin
- "Destek" (İngilizce "Support") veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Kullanım Kılavuzları"na (İngilizce) veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "Uygulamalar"a (İngilizce) veya ilgili dilde karşılık gelen bölüme gidin
- "myPhonak app" ögesini seçin

Alternatif olarak, myPhonak kullanım kılavuzunun güncel sürümüne, Destek bölümüne gidip "Kullanım Kılavuzu" adlı karta dokunularak doğrudan uygulamadan erişilebilir. Bu durumda kullanım kılavuzu, harici bir tarayıcı penceresinde açılır.

Uyumluluk bilgileri

Avrupa: Uygunluk Beyanı

Sonova AG, bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Sembol açıklaması



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri okuyup dikkate almasının önemli olduğunu gösterir.



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili uyarı notlarına dikkat etmesinin önemli olduğunu gösterir.



Kullanım ve ürün güvenliğine yönelik önemli bilgiler.



Sonova AG, CE sembolü ile bu ürünün 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını teyit eder. CE sembolünden sonra gelen sayılar yukarıda bahsi geçen yönetmelik uyarınca danışılan lisanslı kuruluşların koduna karşılık gelir.



Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilciyi belirtir. EU REP aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ithalatçısıdır.



Cihazın bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.



Ad, adres, tarih

2017/745 sayılı AB Yönetmeliğinde (AB) tanımlandığı şekilde, "tıbbi cihaz üreticisi" ve "üretim tarihi" birleşik sembolü.



Elektronik kullanım talimatlarının mevcut olduğuna dair bir gösterge. Talimatlara www.phonak.com/myphonakapp web sitesinden erişilebilir



Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üretici katalog numarasını belirtir.



Sonova Almanya GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Almanya



Üretici:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
İsviçre
www.phonak.com

V13.00/2026-06/ZT © 2021-2026 Sonova AG Tüm hakları saklıdır

Bu kullanım kılavuzu, myPhonak 7 uygulamasının myPhonak 7.5 sürümü ve daha sonraki alt sürümleri için geçerlidir.

Uygulama kullanım kılavuzunun önceki sürümleri için lütfen yerel temsilcinizle iletişime geçin veya internet sitesine bakın.

Kullanım talimatlarının ücretsiz basılı bir kopyasını edinmek için lütfen yerel Sonova temsilcinizle irtibat kurun. Tarafınıza 7 gün içinde bir nüshası gönderilecektir.

