


マイフォナック

取扱説明書 - マイフォナック 6

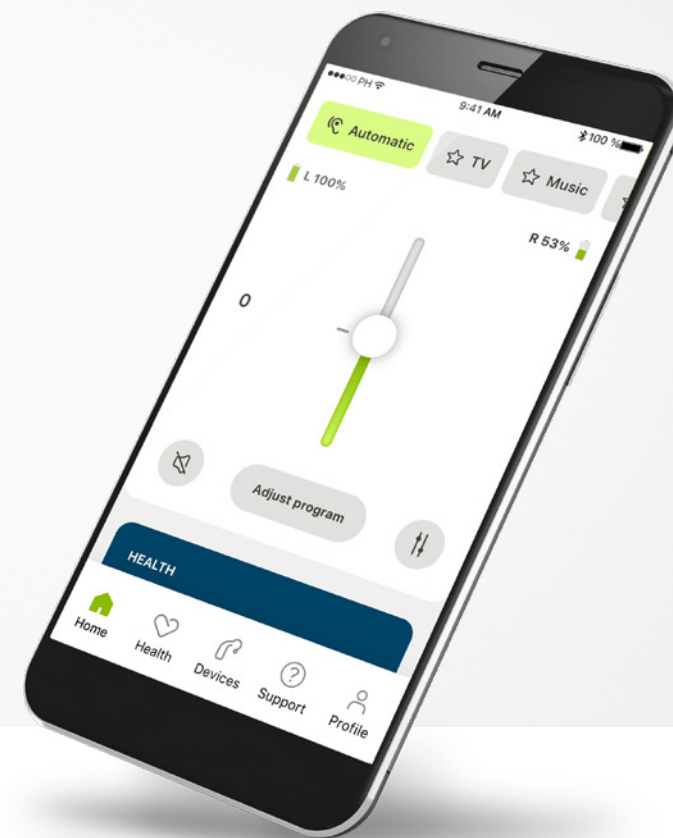

A Sonova brand

PHONAK
life is on

はじめに

マイフォナックは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、聞こえのソリューションにおける世界的なトップ企業である Sonova が開発したアプリです。本取扱説明書をよくお読みいただき、アプリの機能を最大限に活用してください。



本取扱説明書では、マイフォナックの機能と操作方法について説明します。アプリの使用を開始する前に、本取扱説明書をよくお読みください。

アプリの取扱いに、追加のトレーニングは必要ありません。



互換性の情報:

マイフォナック アプリを使用するには、Bluetooth® 接続が可能なフォナック補聴器が必要です。マイフォナックは、バージョンが14以降の iOS® に搭載の Bluetooth® low energy (LE)機能を備えた機器で使用することができます。

また、Bluetooth® 4.2と Android OS 7.0以降をサポートしている、Google Mobile Services (GMS)により承認された Android™ 機器でも使用することができます。

Bluetooth® のロゴ文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

iPhone® は Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

Android は Google LLC の商標です。

iOS® は Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登録商標または商標で、米国および他の国々で登録されています。


目次

簡単な概要	3
マイフォナックのインストール	5
マイフォナックのアカウント設定	6
アカウント設定のトラブルシューティング	7
フォナック補聴器とのペアリング	8
ペアリングのトラブルシューティング	9
ホーム - リモコンの画面	10
ホーム - リモコンの詳細設定	12
リモコンの詳細設定 - トラブルシューティング	14
ヘルス	16
機器	20
サポートおよびリモートサポート セッション	21
リモートサポート セッションを開始	22
リモートサポート セッションのトラブルシューティング	23
プロフィールとデータのプライバシー	24
安全に関する重要な情報	25
コンプライアンス情報	29
記号の説明	29

簡単な概要

リモコン

リモートサポート

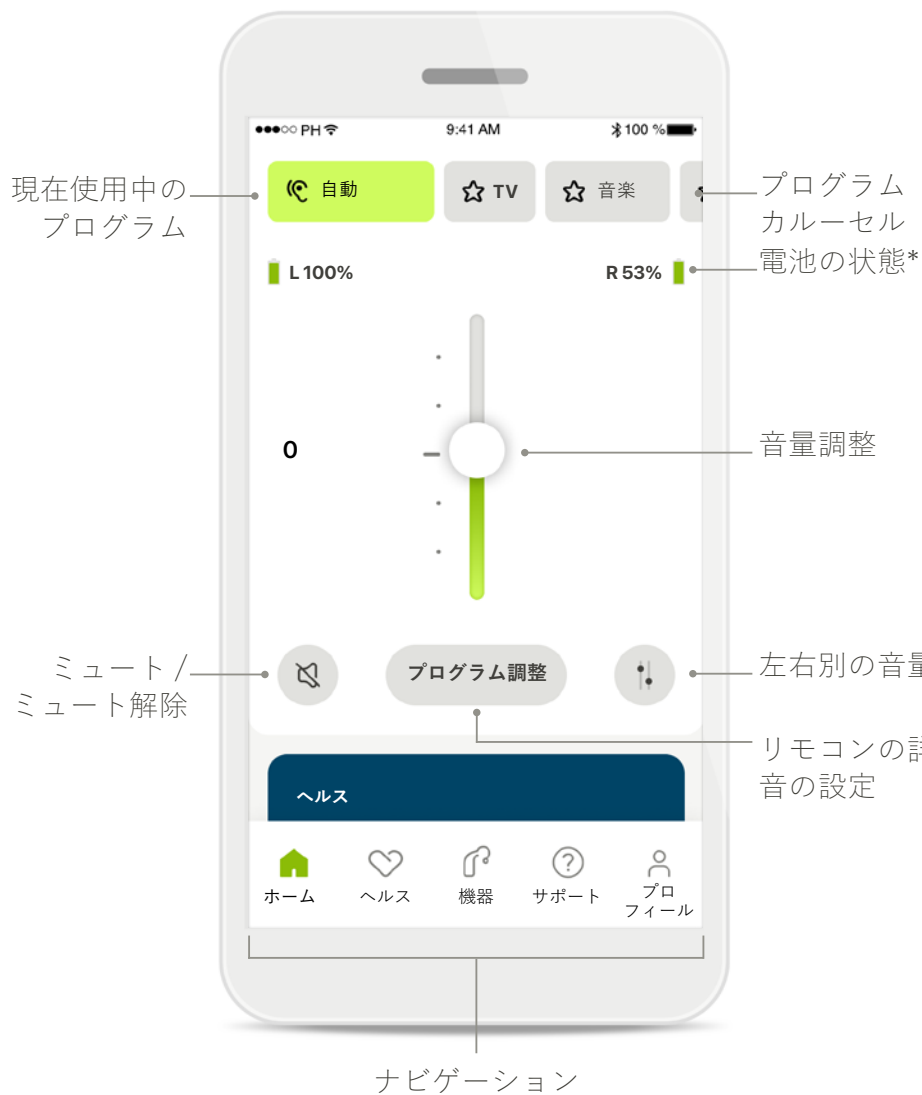

*充電式補聴器のみ

簡単な概要

ホーム



リモコン


ヘルス機能へクイックアクセス

リモートサポート情報にクイックアクセス

よくあるご質問

ナビゲーション

ヘルス

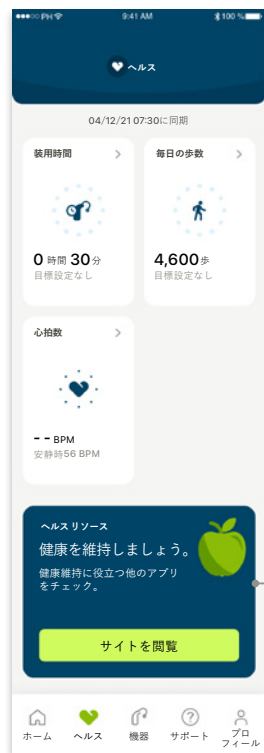

ヘルスカード

他の推奨ヘルスアプリ

リモコンの詳細設定 (音の詳細設定を含む)



追加情報

イコライザーの詳細な調整

プリセットのクイック選択


音量調整

雑音とことばの音を調整

小さい音/大きな音の調整

マイフォナックのインストール

- ・ スマートフォンを WiFi または携帯電話回線でインターネットに接続します。
- ・ スマートフォンの Bluetooth® をオンにします。

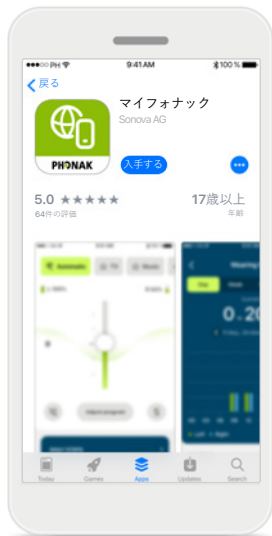

マイフォナックのダウンロード

ストアからアプリをダウンロードします。インストール後、アプリを開きます。




アプリを開く

はじめてアプリを開いたとき、ツアーを見るかどうか選択することができます。不要であれば、**[ツアーをスキップ]**をクリックします。




アカウントの作成

マイフォナック アカウントを任意で作成することができます。ヘルス機能にアクセスする場合は、必ず作成する必要があります。

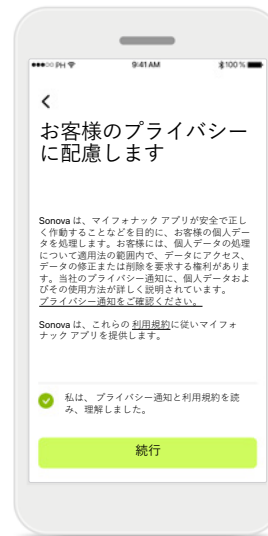

プライバシー ポリシー

アプリを使用するには、プライバシー通知と利用規約を読んだ後、ボックスにチェックを入れる必要があります。その後、**[続行]**をクリックします。

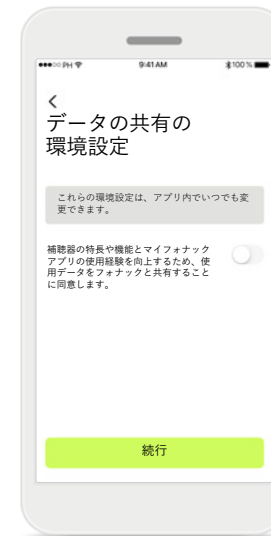

製品の向上

アプリの使用データを共有するかどうか選択することができます。共有される使用データは、当社の製品向上に役立ちます。データはプライバシー通知の記載に従って取り扱われるため、データによりお客様を特定することはできません。

マイフォナックのアカウント設定



アカウントの作成

マイフォナックアカウントを任意で作成することができます。ヘルス機能にアクセスする場合は、必ず作成する必要があります。

アカウントをすでにお持ちであれば、**[ログイン]**をクリックします。



メール登録

メールを用いて登録します。



パスワード設定

説明に従い安全なパスワードを設定します。パスワードは8文字以上にする必要があります。**[次へ]**をタップし、次のステップに進みます。



国の選択

お客様のアカウント情報は、お住いの国の規制に基づき安全に保存されます。



確認メール

メールアドレスを入力すると、そのアドレスに確認コードが送信されます。確認コードを受信したら、**[確認コードを入力]**をタップします。

アカウント設定のトラブルシューティング

すでに使用されているメールアドレス:過去に、同じメールアドレスを使用してフォナック アカウントを作成した場合、その旨を通知し説明が記載されたメールが届きます。新しいアカウントを作成するには、別のメールアドレスを使用してください。新しいアカウントを作成しない場合、同じメールアドレスでログインすることができます。



インターネット接続

お客様のアカウントを作成するには、インターネットに接続する必要があります。スマートフォンがインターネットに接続されていることを確認し、再試行してください。



パスワードのリセット

パスワードを思い出せない場合やリセットしたい場合、メールアドレスを入力し[送信]をタップします。



パスワードのリセット

パスワードのリセットに必要なリンクが記載されたメールが届きます。説明に従って操作してください。操作が完了したらアプリに戻り、新しいパスワードで[サインイン]します。



期限切れの確認コード

メールアドレスを検証するのに必要な確認コードは7日後無効になります。期限切れになると、新しいコードがメールで届きます。新しいコードを入力しお客様のアカウント作成を完了します。



無効な確認コード

無効なコードを入力した場合、[再送信]をクリックすると、新しいコードをメールで受け取ることができます。新しいコードを入力し[次へ]をクリックして、お客様のアカウントの作成を続行します。

フォナック補聴器とのペアリング

Bluetooth® が有効な補聴器をマイフォナックに接続するには、以下の説明に従ってください。



ペアリングの説明

[さっそく始めましょう] をタップし、補聴器に表示された説明に従ってください。



検索

アプリが互換性のある補聴器を検索し、検出されるとアプリに表示されます。これには数秒かかる場合があります。補聴器が表示されたら、接続する補聴器をタップします。



補聴器のペアリング

各補聴器はアプリに別々に接続されます。



すべての機器を確定

Apple 機器では、補聴器ごとにポップアップ画面で[ペアリング]をタップして、ペアリングを確定してください。



その他の機能

補聴器のペアリングに成功すると、通話やストリーミングされた音楽を聞くために補聴器をペアリングするかどうか選択することができます。この追加のペアリングをスキップするには、[続行]をタップします。

ペアリングのトラブルシューティング

設定中にエラーが起こる可能性があります。

トラブルシューティングの詳細は、フォナックのサポートページ(<https://www.phonak.com/myphonakapp>)にアクセスしてください。



互換性のない機器

補聴器に互換性がないため、アプリと接続できません。
詳細については、聴覚専門家にお問い合わせください。



補聴器の接続エラー

片方の補聴器のペアリングに失敗した場合、[再試行]をタップするとペアリング処理を再開することができます。



両方の接続に失敗

[再試行]をタップしてペアリング処理を再開し、説明に従います。



位置情報

Android 機器では、Bluetooth® 機器と初めてペアリングする際に位置情報サービスを有効にする必要があります。初期設定が完了したら、位置情報サービスは無効に戻してもかまいません。

ホーム - リモコンの画面

以下の機能はどの補聴器でも使用できます。



補聴器の音量調整

スライダーを上下に動かすことで、補聴器の音量を調整できます。両耳に補聴器を装着している場合、スライダーにより両方の補聴器が同時に調整されます。



音量調整の分割

左右の補聴器の音量を別々に調整するには、[分割]アイコンを押します。



ミュート

補聴器の音を消すには、[ミュート]をタップします。



プログラムカーセル

プログラムへアクセス

音に関するプログラムに、アプリのホーム画面から直接アクセスします。カーセルをスワイプし、お客様のニーズに適したプログラムをタップして選択します。

以下のプログラムから選択できます。

- 🔊 自動プログラム
- 👂 聴覚専門家が作成したプログラム
- ☆ お客様が作成したプログラム

ホーム - リモコンの画面*



追加の設定

ストリーミングを使用する場合、補聴器のプログラム設定や使用するワイヤレスアクセサリーに応じて、耳鳴りマスカや環境バランスなどの追加の設定を調整することができます。

例

たとえば、耳鳴りに対応する機能を持つ補聴器でストリーミングプログラムを使用している場合、耳鳴りに対応する機能とストリーミングの両方を、専用の画面で調整することができます。

耳鳴りマスカ

耳鳴りの症状があり、聴覚専門家から耳鳴りマスカの使用法の説明を受けている場合、マスキングノイズの音量を調整できます。

環境バランス

外部のストリーミング機器(テレビコネクター、音楽など)を使用する場合、ストリーミング信号がよく聴こえるように、または逆に周囲の環境音がよく聴こえるように、フォーカスを調整できます。

電池残量

補聴器が充電可能な場合、現在の充電状態を確認することができます。電池残量が20%を切ると、アイコンが赤くなります。すぐに充電してください。

*機能と補聴器の互換性の詳細は、聴覚専門家にお尋ねください。

ホーム - リモコンの詳細設定



プログラム調整

[プログラム調整]をタップすると、詳細な音の設定を用いて、選択したプログラムを変更することができます。



プログラム設定

様々な方法で選択したプログラムを調整することができます。スライダーを用いて、イコライザー自動設定、ボリュームコントロール、ノイズリダクション、ことばの指向性、ダイナミック制御の各設定をそれぞれ調整します。



イコライザー自動設定

イコライザー自動設定により、現在の音響環境に応じて音の高さをすばやく調整することができます。より高度な調整をするには、イコライザー アイコンをタップします。



音の高さを調整

スライダーを使って音の高さ(周波数)を変更します。設定に戻るには [閉じる]を押します。


ホーム - リモコンの詳細設定 - プログラムの新規作成または既存のプログラムのアップデート*




カスタマイズされた調整
既存プログラムの調整後、[**アップデート**]をタップして既存プログラムをアップデートするか、[**新規に保存**]をタップして新規プログラムとして保存するかを選択することができます。



カスタマイズされた調整の命名
カスタマイズされた調整の内容を新規プログラムとして保存し、自由に命名することができます。

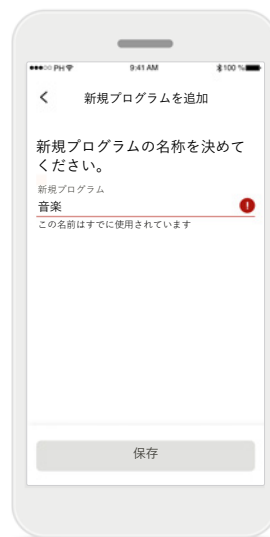

無効なプログラム名
既存の名称を使用したり空白のままにしたりすることはできません。22文字を超える名称や空白のみの名称は無効になります。

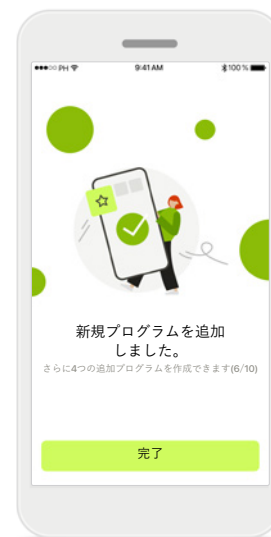

保存プログラム
新規プログラムの保存に成功すると、プログラムリストに追加され、リストの使用可能なスロット数が通知されます。リモコンのホーム画面に戻るには[**完了**]を押します。

*特定の補聴器のみで有効

リモコンの詳細設定 - トラブルシューティング



プログラム限度数に到達 - 同一のベースプログラムの最大数

プログラムは、同一のベースプログラムに最大4つ保存できます。限度数に達した場合、**[管理]**をタップして既存のプログラムを新規プログラムに置き換えることができます。



プログラム限度数に到達 - プログラムの最大数

カスタマイズプログラムは、プログラムリストに最大10個保存することができます。限度数に達した場合、**[管理]**をタップして既存のプログラムを新規プログラムに置き換えることができます。

ヘルス - 設定

ここで説明するヘルス セクションの機能の一部は、特定の補聴器のみで使用可能です。詳細は、phonak.com をご覧ください。



登録

ヘルス機能にアクセスするには、マイフォナックアカウントに登録する必要があります。



位置情報サービスの有効化

データの頻繁な同期を許可してヘルス データ追跡の質を高めるため、お客様の iPhone の位置情報サービスを有効にします。アクセスを拒否すると、ヘルス データを追跡できません。



ヘルス データの入力

登録が完了すると、ヘルス ダッシュボード(ヘルスのホーム画面)を表示することができます。

ヘルス



ヘルス ダッシュボードのコンテンツ

ヘルス ダッシュボードでは以下を行うことができます。

- 補聴器が対応するヘルス機能にアクセスし、リアルタイムに変化する数値を確認*
- 目標の進捗状況を確認(設定済みの場合)
- 健康に関するヒントにアクセス(他の推奨ヘルス アプリ)

* オーデオ パラダイス R を装着されている場合、ヘルス セクションの活動時の歩数にアクセスするには、互換性のあるファームウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。ナイーダ P-PR では、装用時間がリアルタイムで表示され、歩数グラフが1時間ごとにアップデートされます。

ヘルス セクションに表示される情報は、教育および情報提供のみを目的とします。当該情報を医療専門家のアドバイスに代わるもの、またはすでに得たアドバイスに取って代わるものとして使用しないでください。

運動プログラムを始める前に、健康について尋ねたいことがある場合、医師などの医療専門家に必ず相談してください。

目標の進捗状況の表示例

目標を設定済みの場合、各機能のアイコンを囲むグリーンの円に進捗状況が表示されます。

目標の最大値を超えると、アイコンの周囲に円がもう一つ表示されます。

補聴器への接続

リアルタイムに変化するヘルス機能関連の数値を確認するには、補聴器に接続する必要があります。アプリが補聴器と頻繁に同期することにより、時間情報の精度が上がります。接続に失敗したりデータが同期できなかったりした場合、その旨が通知され、対処法について説明しているウェブサイトの「よくあるご質問」に誘導されます。

ヘルス機能の詳細画面 – 装用時間、歩数、活動レベル*、歩行距離・走行距離**



装用時間

ダッシュボードの[装用時間]をクリックすると、日単位の装用時間のグラフが表示されます。週、月、年単位の表示に切り替えるには、表示したいタブをタップします。タップすると、タブがグリーンに変わります。

左右の補聴器をご使用の場合、両方の補聴器の数値がグラフに表示されます。下部に現在の値(日単位の表示の場合)または平均値(日単位の表示以外)に加え、音環境別の装用時間の内訳が表示されます。

*すべてのオーデオパラダイス充電式補聴器、フォナック オーデオ フィット補聴器およびフォナック オーデオ ルミティ補聴器で使用可能。

**フォナック オーデオ フィット補聴器およびフォナック オーデオ ルミティ補聴器で使用可能。


歩数、活動レベル、距離

ダッシュボードの[歩数]をクリックすると、日単位の歩数のグラフが表示されます。週、月、年単位の表示に切り替えるには、表示したいタブをタップします。タップすると、タブがグリーンに変わります。

下部に現在の値(日単位の表示の場合)または平均値(日単位の表示以外)に加え、概算の歩行距離・走行距離が表示されます**。

その時間の活動レベルとして、なし、低(何らかの動きを感知)、中(歩行を感知)、または高(走行を感知)と表示されます。

ヘルス機能の詳細画面 – 心拍数*

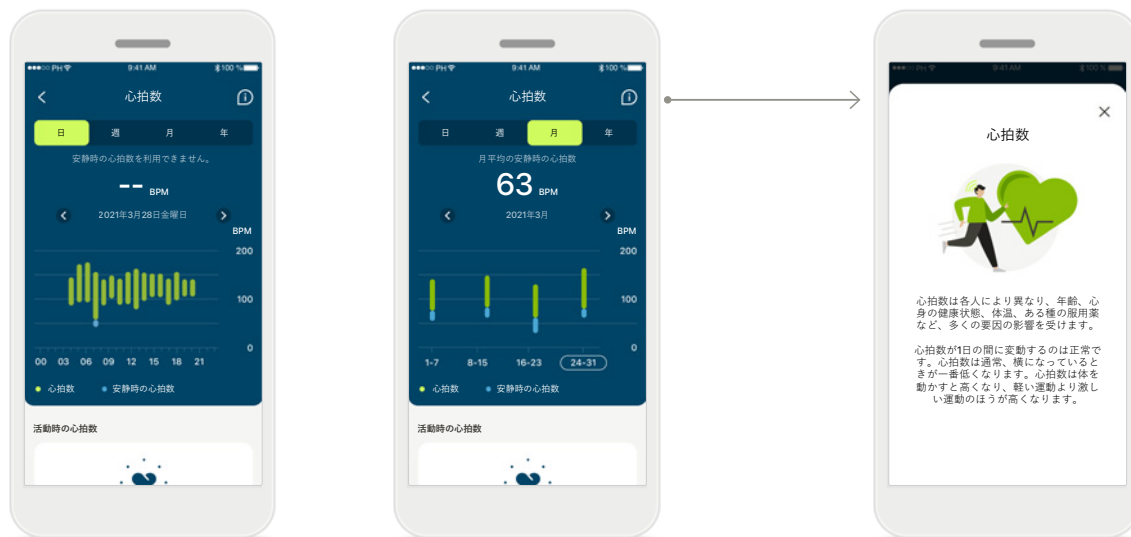

心拍数(HR)の追跡

活動時の心拍数(HR)がすべて表示されます。日単位の表示には、もっとも低い安静時の心拍数(RHR)と1時間ごとのHR範囲が含まれます。週単位の表示には、1日ごとのもっとも低い安静時の心拍数(RHR)、活動時の心拍数(HR)、1日ごとのHR範囲が含まれます。

週、月、年単位の表示では以下の内容が含まれます。

- 日単位の表示 - 時間別の分析(1時間ごとの周期的なりアルタイムのHR範囲、1日ごとのもっとも低い安静時のHR)
- 週/月/年の表示 - 日/週/月別に分析したHR範囲とRHR範囲

詳細情報

詳細情報、心拍数に関する参考文献、安静時の心拍数を追跡することが重要な理由を確認するには、画面右上の(i)アイコンをクリックします。

*フォナック オーデオ フィット補聴器のみに該当

ヘルス - 他の機能*



目標の設定、変更、削除*

歩数と装用時間の目標設定は任意です。目標はヘルス機能の設定時に、ヘルス ダッシュボードまたはヘルス機能の詳細画面で設定できます。

[目標の設定]または[目標を変更]ボタンをクリックし、上記の例に倣い一連の画面を操作します。装用時間または歩数に有効な数字を入力し、[目標の設定]をタップして変更内容を保存します。削除する場合は[目標の削除]をタップします。

ツールチップ

白いバナー(ツールチップ)に正確な数値を表示するには、グラフのバーの任意の点をクリックします。

*オーディオ パラダイス充電式補聴器、フォナック オーディオ フィット補聴器およびフォナック オーデオ ルミティ補聴器で使用可能。



機器のホーム画面

機器セクションでは、プログラム管理や機器設定など、補聴器に関連したすべての項目にアクセスすることができます。充電式モデルをご使用の場合、電池の状態を確認することもできます。



機器を削除

機器を削除するには、お使いの補聴器カードを表示します。[機器を削除] ボタンをクリックするとポップアップメッセージが表示され、削除を確定する必要があります。削除を確定すると、アプリを使用するにはお使いの補聴器を再度ペアリングする必要があります。



プログラム管理

補聴器プログラムをタップすると、利用可能なすべてのプログラムが表示されます。名称を編集または削除するには、プログラムをタップします。プログラムには、自動プログラム、聴覚専門家が作成したプログラム、カスタマイズプログラムの3種類があります。プログラム名の隣にアイコンが表示されている場合、お使いの補聴器のプログラムスイッチを押すと有効になることを意味します。



補聴器プログラム

プログラム名を編集したりプログラムを削除したりすることができます。プログラムが、どのベースプログラムとリンクしているかを確認することもできます。プログラムを削除するには[プログラム削除]をタップします。ポップアップメッセージが表示され、削除を確定する必要があります。

サポートおよびリモートサポート セッション



サポート セクション

サポート画面から、FAQ*、取扱説明書、解説ビデオのウェブサイト、法的設定、フィードバックの共有にアクセスすることができます。[セッション開始]を押すと、リモートサポートにもアクセスできます。



リモートサポート

サポート画面の[セッション開始]を押すことにより、聴覚専門家からリモートサポートセッションを受けることができます。リモートセッションを受けるには、聴覚専門家と前もって予定を組む必要があります。

続行するには[リモートサポートを開始]を押します。



セッション開始

セッションを開始したら、[待合室に入る]を押す必要があります。その後、聴覚専門家が通話できるようになります。



マイクホンとカメラにアクセス

[OK]をタップして、マイフォナックアプリがマイクホンとカメラにアクセスするのを許可します。


*FAQ リンク: <https://product-support.phonak.com/>

リモートサポート セッションを開始




ビデオ通話に応答する

アプリで聴覚専門家に接続します。聴覚専門家が通話に応答するまでお待ちください。

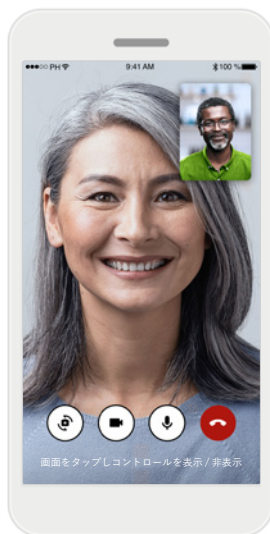

通話中

数秒後に、ビデオの映像がセットアップされて、聴覚専門家を見ながら声を聞くことができます。コントロールを使用すると、ミュート/ミュート解除、ビデオ非表示、カメラの切り替え、通話終了を操作できます。

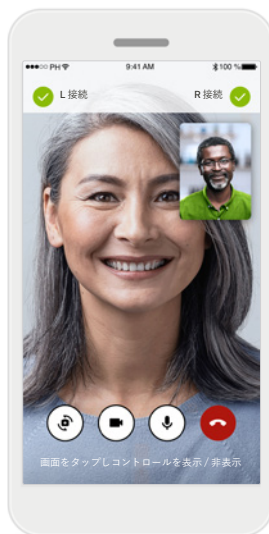

補聴器の接続

聴覚専門家がお客様の補聴器に接続する必要がある場合、スマートフォンを使用しリモートで接続することができます。聴覚専門家がお客様の補聴器に接続している場合は、その旨をお知らせします。



通話終了


通話の終了後、体験を評価することができます。フィードバックを送信するには、リンクを押します。ランディング画面に戻るには[完了]を押します。

リモートサポート セッションのトラブルシューティング



Wi-Fi 接続

リモートサポートはインターネットを使用して行われます。ビデオ通話の品質向上のため、Wi-Fiの使用をお勧めします。

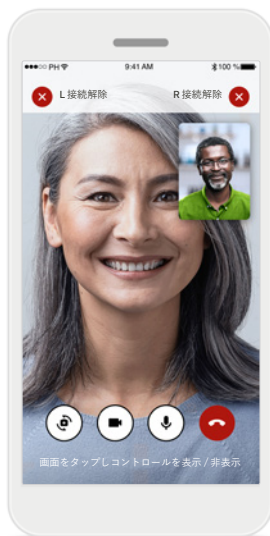

補聴器の接続の喪失

画面の上部で補聴器の接続状態を確認することができます。補聴器が接続されていない場合、シンボルの色が赤になります。その場合、聴覚専門家はお客様の補聴器に再接続する必要があります。



通話の失敗

通話に失敗した場合、[OK]を押してホーム画面に戻ると、通話を再度始めることができます。



通話中に終了

通話中に終了しようとすると、このポップアップメッセージが表示されます。


プロフィールとデータのプライバシー



プロフィール セクション

プロフィールの画面では、プロフィール情報を編集したり、ヘルスに関する環境設定を調整したりできます。

アプリからサインアウトするには、**[サインアウト]**をタップします。

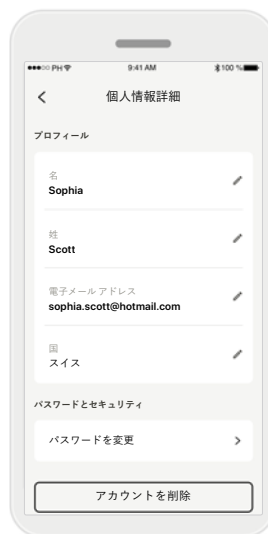

個人情報詳細

[個人情報詳細]の下部で、個人情報の編集やセキュリティ情報の修正を行うことができます。お客様のアカウントを削除するには**[アカウントを削除]**を押します。操作を確定するにはパスワードを入力する必要があります。



データのプライバシー

フォナックと共有するデータは、[サポート]>[データのプライバシー]からいつでも選択できます。

当社が処理するデータに関する詳細は、プライバシー通知に記載されています。この通知は、[サポート]>[法的文書]でいつでも読むことができます。

安全に関する重要な情報

アプリを使用する前に、以降のページに記載の安全に関する情報をお読みください。

使用目的:

本アプリは、補聴器を使用する対象ユーザーが、フィッティングソフトの許容範囲内で、補聴器設定を選択、構成、保存するために使用するスタンドアローンのソフトウェアです。本アプリの使用により、補聴器をリモートで調整するために、対象ユーザーが聴覚専門家と接続しコミュニケーションをとることも可能になります。

対象患者集団:

この機器は、17歳以上で、一側性および両側性の軽度から重度の難聴を抱える患者を対象としています。耳鳴り対応機能は、18歳以上で、慢性的な耳鳴りを抱える患者を対象としています。

対象ユーザー:

互換性のある機器を使用する難聴者

適応:

以下に示す適応は、アプリではなく互換性のある補聴器に適用されることに注意してください。補聴器と耳鳴り対応機能の使用に対する一般的な臨床的適応は、以下のとおりです。

- 難聴があること
 - > 一側性難聴または両側性難聴
 - > 伝音難聴、感音難聴、または伝音と感音の混合性難聴
 - > 軽度から重度難聴
- 慢性的な耳鳴りの存在(耳鳴り対応機能を備えた機器のみに適用)

禁忌:

以下に示す禁忌は、アプリではなく互換性のある補聴器に適用されることに注意してください。補聴器と耳鳴り対応機能の使用に対する一般的な臨床的禁忌は、以下のとおりです。

- 難聴レベルが補聴器のフィッティングレンジ(利得、周波数レスポンス)の範囲外である
- 急性耳鳴り
- 耳の異形(外耳道の閉塞、耳介の欠損)
- 神経性難聴(欠損した/機能しない蝸牛神経などの後迷路性難聴障害)

医療または他の専門家の意見や処置を求めて患者を紹介する際の主な基準は次の通りです。

- 先天性または外傷性による明確な耳の異形。
- 90日以内における耳漏の病歴。
- 90日以内における片耳または両耳の急性または急速進行性の難聴の罹患歴。
- 急性または慢性のめまい。
- 気導と骨導の差が500 Hz、1000 Hz、2000 Hzで15 dB以上。
- 外耳道の過度な耳垢の蓄積、または異物による明確な証拠。
- 耳の痛みまたは不快感。

- 以下のような、鼓膜や外耳道の異常:
 - > 外耳道の炎症
 - > 鼓膜穿孔
 - > 聴覚専門家が医学的問題であると考えられる他の異常

聴覚専門家が、紹介が不適切か、患者に最適ではないと考えるのは、以下に該当する場合があります。

- 医療の専門家が症状を徹底的に調査し、可能な治療が施されたという十分な証拠がある場合。
- 前回の調査や治療以降、症状が悪化していない、または大幅に変化していない場合。
- 医学的な意見を求め、患者自身がアドバイスを受け入れないという適切な意思決定と説明を受けた上での決断を示す場合は、以下の項目を検討した上で、適切な補聴器システムを推奨することは許容されます。
 - > 推奨することが、患者の健康や全般的な患者のウェルビーイングに悪影響を及ぼさない場合。
 - > 患者の最善の利益に関して必要な全項目を検討したことが、記録により確認されている場合。

法的に必要な場合に、患者自身が紹介に関するアドバイスを承認しておらず、説明を受けた上での決断に基づく判断であると確認できる免責事項に患者が署名している場合。

安全に関する重要な情報

アプリを使用する前に、以降のページに記載の安全に関する情報をお読みください。

臨床的利益:

本アプリは、初回フィッティングの許容範囲内で、個人のニーズに合わせて補聴器設定を調整・保存できるため、対象ユーザーの利益となります。

本アプリは、補聴器をリモートで調整するために、聴覚専門家と接続しコミュニケーションをとることができ、対象ユーザーに利便性の高い方法を提供します。

副作用:

以下に示す副作用は、アプリではなく互換性のある補聴器に適用されることに注意してください。

補聴器による身体上の副作用(耳鳴り、めまい、耳垢の蓄積、血圧上昇、発汗や湿気、水膨れ、痒みや湿疹、閉塞感や膨満感、これらを原因とする頭痛や耳痛など)は、聴覚専門家によって解消または軽減できる可能性があります。

以前の補聴器では、患者をより大きいレベルの音に暴露する場合があります、その音響外傷によって影響を受けた周波数帯で閾値が変化する可能性があります。

使用上の制限:

本アプリは、互換性のある機器の機能に応じて使用上の制限があります。

本アプリが関係する重大事故が発生した場合は、製造元の担当者および居住地域の関係当局まで必ずお知らせください。重大事故とは、以下のいずれかに至ったか、至る可能性があった、または至る可能性のある、あらゆる直接的事故や間接的事故を指します。

- a. 患者、ユーザー、または他の人の死亡
- b. 患者、ユーザー、または他の人の健康状態の一時的または永久的な著しい低下
- c. 公衆衛生に関する重大な脅威

予期しない動作や事態を報告する場合は、製造業者または販売代理店にお問い合わせください。

安全に関する重要な情報

アプリを使用する前に、以降のページに記載の安全に関する情報をお読みください。

どのバージョンのアプリの取扱説明書も、電子文書形式かつ該当するすべての言語でウェブページからアクセスできます。取扱説明書にアクセスするには、以下のステップに従ってください。

- <https://www.phonak.com/com/en/about-us/countries.html> をクリックし、目的の国を選択します。
- [サポート] または各言語でそれに対応する用語に移動します。
- [取扱説明書] または各言語でそれに対応する用語に移動します。
- [アプリ] または各言語でそれに対応する用語に移動します。
- [マイフォナック アプリ] を選択します。

または、アプリのサポート セクションに移動し、[取扱説明書] という名称のカードをタップすると、現在のバージョンのマイフォナック アプリの取扱説明書に直接アクセスすることができます。取扱説明書が外部のブラウザ ウィンドウに開きます。

セキュリティに関する通知

患者のデータは個人に属するデータなので、適切に保護することが重要です。

- スマートフォンは、最新のオペレーティングシステムのセキュリティ アップデートで、必ず最新の状態にしてください。自動アップデートを有効にしてください。
- インストールしたアプリは、必ず最新のバージョンにアップデートしてください。
- 補聴器には、公式ストアからダウンロードした純正の Sonova アプリのみを使用してください。
- 公式ストアからダウンロードした定評のあるアプリのみをインストールしてください。
- 強固なパスワードを使用し、認証情報が漏洩しないようにしてください。
- スマートフォンは PIN および/または生体認証(指紋や顔など)でロックをかけ、操作していない状態が数分続いたら自動的にロックがかかるよう設定してください。
- インストールしたアプリでは、必要な権限のみが許可されていることを確認してください。
- 公共の場では、お使いの補聴器を Bluetooth ペアリングしないでください。第三者による不必要な干渉が発生するリスクがあります。Bluetooth ペアリングは自宅で実施することを推奨します。
- ルート化またはジェイルブレイクされたスマートフォンは絶対に使用しないでください。

常にデータを安全な状態に保つようにしてください。ここに示した内容は全てを網羅したものではないことに、注意してください。

- 安全でない経路でデータを転送する場合は、匿名データにして送信するか、データを暗号化してください。
- スマートフォンのデータをバックアップすることにより、データの損失だけでなく盗難からも保護されます。
- スマートフォンを今後使用しない場合や処分する場合、データをすべて削除してください。

ソフトウェア メンテナンス:

フォナックは、常に市場からのフィードバックをモニタリングしています。最新バージョンのアプリで問題が生じた場合、最寄りの販売代理店に連絡および/または Appstore あるいは Google Play Store のフィードバックを提供してください。

安全に関する重要な情報

アプリを使用する前に、以降のページに記載の安全に関する情報をお読みください。



音量を下げたりノイズ キャンセルを上げたりするなどの設定変更をした場合、接近してくる車の音が聞こえなくなるなどの危険が生じるおそれがあります。



取扱説明書の書面コピー(無料)を入手するには、最寄りの Sonova 代理店にお申し付けください。7日以内にコピーをお送りします。



過度な磁場の障害により補聴器が機器に反応しない場合は、その強い磁場から離れてください。



補聴器が応答しない場合は、補聴器のスイッチが入っているか、および電池が切れていないか確認してください。



Bluetooth を有効にしてください。補聴器を接続するには、Bluetooth を有効にする必要があります。

コンプライアンス情報

欧州: 適合宣言

Sonova AG は、本製品が医療機器規則(EU)2017/745に準拠していることを宣言します。

記号の説明



この記号は、ユーザーがこの取扱説明書の関連情報を読んで考慮することの重要性を示しています。




この記号は、ユーザーがこの取扱説明書の関連する警告内容に注意を払うことの重要性を示しています。



製品の安全性および取り扱いに関する重要な情報です。




CE マークは、Sonova AG が医療機器規則(EU)2017/745を遵守していることを示します。CE マークに続く番号は、上記の規則に基づき評価を行った公認機関のコードを表します。

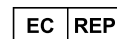

欧州共同体における認定代理人であることを示しています。EC REP は欧州連合への輸入業者でもあります。



本機器が医療機器であることを示しています。

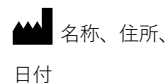

EU 医療機器規則(EU)2017/745に定義される記号の組み合わせで、「医療機器の製造業者」および「製造日」を示しています。



電子取扱説明書がご利用いただけることを示しています。取扱説明書は、www.phonak.com/myphonakapp から取得できます。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany

オーストラリアの出資者:
Sonova Australia Pty Ltd
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153 · Australia

