



A Sonova brand

“瑞士峰力”氣導式助聽器(未滅菌)
“PHONAK” Air Conduction Hearing Aid (Non-Sterile)

Phonak Terra™ and Terra™ + RIC ●

使用者指南

Phonak Terra RIC-312
Phonak Terra+ RIC-312



本使用者指南適用於：

藍牙助聽器

Phonak Terra RIC-312
Phonak Terra+ RIC-312





您的助聽器

助聽器型號

- ☐ Phonak Terra RIC-312
☐ Phonak Terra+ RIC-312

電池型號

312

耳件

- ☐ 耳塞
☐ SlimTip
☐ cShell

耳垢檔板

- ☐ CeruStop
☐ CeruShield™

助聽器序號

左側： _____

右側： _____

充電器： _____

購買日期： _____

授權聽力保健專業人員
(印章/簽名)：

您的助聽器和充電器是由峰力研發 – 峰力是全球聽力解決方案的領導者，總部位於瑞士蘇黎世。

這些優質產品是數十年研究和專業知識的成果，在設計時充分考慮了您的福祉。我們感謝您做出如此明智的選擇，並祝福您擁有長久的聆聽樂趣。

請仔細閱讀使用者指南，以確保您瞭解並充分利用您的設備。操作此設備不需要培訓。在驗配諮詢期間，聽力保健專業人員將根據您的個人喜好協助設定此設備。

有關助聽器和配件的功能、優點、設定、使用、維護或維修的更多資訊，請聯繫您的聽力保健專家或製造商代表。更多資訊，請參閱產品資料表。

峰力-啟動生活

www.phonak.com.tw

內容

您的助聽器

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 快速指南 | 6 |
| 2. | 助聽器部件 | 8 |

助聽器使用說明


- | | | |
|-----|---------|----|
| 3. | 助聽器左右標記 | 9 |
| 4. | 開機/關機 | 10 |
| 5. | 電池 | 11 |
| 6. | 配戴助聽器 | 15 |
| 7. | 取下助聽器 | 17 |
| 8. | 多功能按鍵 | 18 |
| 9. | 連接概述 | 18 |
| 10. | 首次配對 | 19 |
| 11. | 通話 | 20 |
| 12. | 飛行模式 | 23 |

更多資訊


- | | | |
|-----|--------------|----|
| 13. | 環境條件 | 25 |
| 14. | 維護與保養 | 26 |
| 15. | 更換耳件 | 28 |
| 16. | 更換訂製型耳塞的耳垢檔板 | 30 |
| 17. | 服務與保固 | 32 |
| 18. | 合規資訊 | 33 |
| 19. | 符號資訊和說明 | 38 |
| 20. | 疑難排解 | 41 |
| 21. | 重要安全資訊 | 43 |

1. 快速指南


更換電池

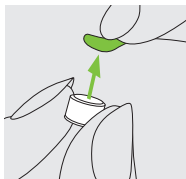

1.
撕下新電池的貼紙並等待兩分鐘。

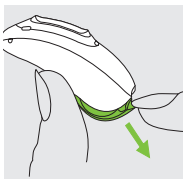


2.
打開電池蓋。

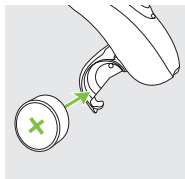


3.
將電池放置在電池蓋中，使其平面朝上。

助聽器左右標記

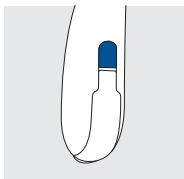


左側助聽器
為藍色標記。

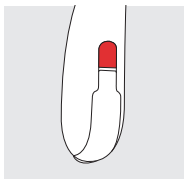


右側助聽器
為紅色標記。

開/關

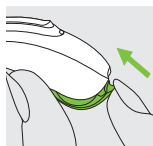


打開

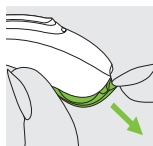

關閉


多功能按鍵

此按鍵有多種功能。根據助聽器的程式設計，它既可以用來控制音量，也可以用來更換程式。個人化「助聽器說明」中有相關說明。如果與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的手機配對，短按為接聽，長按將拒絕來電。

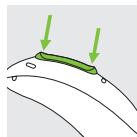

飛行模式

要進入飛行模式，請在關閉電池蓋的同時按下下方按鍵 7 秒鐘。如要退出飛行模式，只需打開電池蓋，然後再次關閉即可。

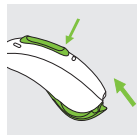


2. 助聽器部件

以下圖片顯示了本使用指南中介紹的助聽器型號和相容耳件。

您可以透過以下方式確認自己的型號：

- 查看第 3 頁上的「您的助聽器詳細資訊」。
- 將您的耳件和助聽器與以下型號進行比較。


相容耳件

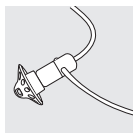

通用型耳塞




訂製式耳塞
SlimTip

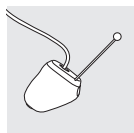




訂製式耳塞
cShell

Terra and Terra+ RIC-312

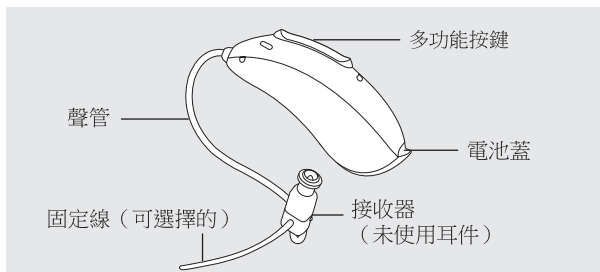


3. 助聽器左右標記

助聽器背面和喇叭上有紅色或藍色的標記。可以幫助您辨認左助聽器或者是右助聽器。

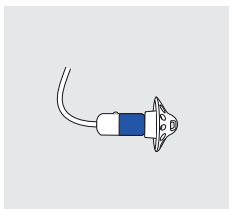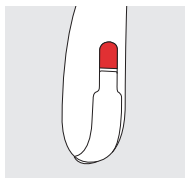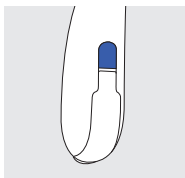

左側助聽器為藍色標記。

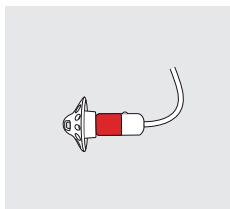


右側助聽器為紅色標記。


4. 開機/關機

電池蓋也是電源的開關。

1.
電池蓋關閉=助聽器**開機**

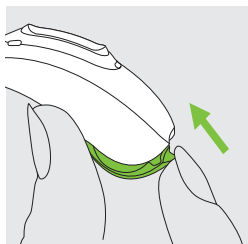


2.
電池蓋打開=助聽器**關機**

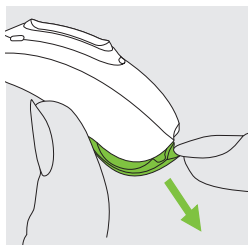


① 當您開啟助聽器時，可能會聽到啟動旋律。


5. 電池

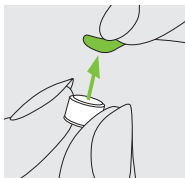

1.
撕下新電池的貼紙並等待兩分鐘。

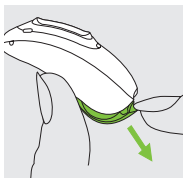

2.
打開電池蓋。

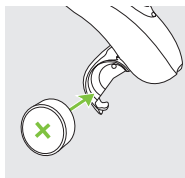

3.
將電池放置在電池蓋中，使其平面朝上。

❶ 如果難以合上電池蓋：請檢查電池是否正確放入，並且平面朝上。如果未正確放入電池，助聽器將無法啟動且電池蓋可能會損壞。平坦的一面在貼紙或電池上會標有“+”符號。



低電量：電池電量低時，您會聽到兩聲提示音。您大概有 30 分鐘的時間來更換電池（此時間可能有所不同，取決於助聽器設定和電池）。建議您手邊常備一顆新電池。

更換電池


這款助聽器需要使用 312 號鋅空電池。

型號	鋅空電池型號	包裝上的顏色標記	IEC 代碼	ANSI 代碼
Phonak Terra and Terra+ RIC-312	312	棕色	PR41	7002ZD


① 請確保將正確類型的電池用於助聽器（鋅空電池）。請閱讀第 21.2 章，以獲取有關產品安全的更多資訊。

6. 配戴助聽器


1.
將助聽器放於耳後。

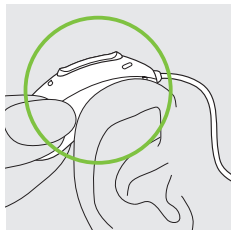

2.
將耳塞放入耳道。

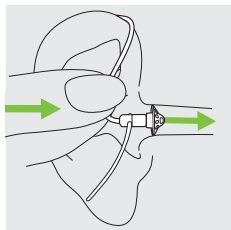


3.
若有安裝固定線，請將其放入耳甲腔以固定助聽器。

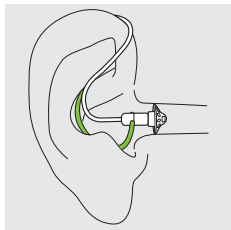

7. 取下助聽器


1. 拉住聲管彎曲處，並將助聽器從耳後取下。

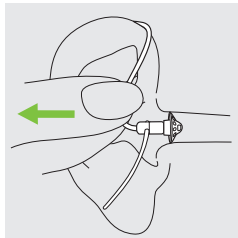

8. 多功能按鍵

多功能按鍵有多種功能。


根據助聽器的程式設計，它既可以用來控制音量，也可以用來更換程式。個人化「助聽器說明」中有相關說明。如需影印相關資料，請諮詢您的聽力保健專業人員。

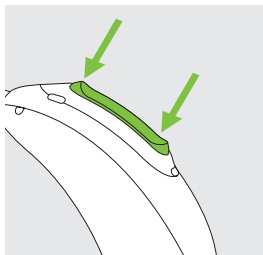

如果助聽器與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的手機配對，短按按鍵的上方或下方將接聽來電，長按將拒接來電 - 請參照第 11 章。

9. 連接概述

下圖顯示的是助聽器的可用連接選項。

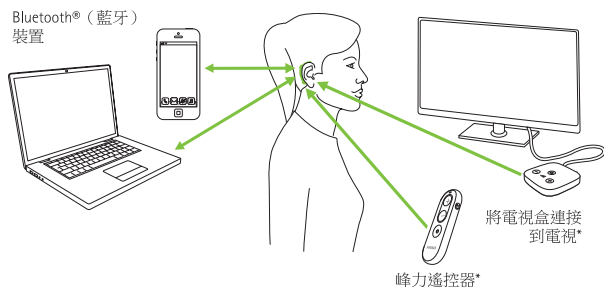

電視盒可以連接到任何音源，例如電視、PC 或高傳聲系統。

* 僅適用於 Terra+ RIC-312

10. 首次配對

10.1 與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的裝置首次配對


- ① 只需要對每個採用 Bluetooth®（藍牙）無線技術的裝置執行一次配對程序。首次配對後，您的助聽器將自動與裝置連接。首次配對最多可能需要 2 分鐘。

1.

在裝置（例如手機）上，確保啟用了 Bluetooth®（藍牙）無線技術，然後在連接設定功能表中搜尋啟用了 Bluetooth®（藍牙）的裝置。

2.

將助聽器開機。
您現在有 3 分鐘的時間將助聽器與裝置進行配對。

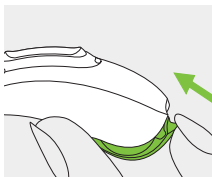

3.

您的裝置將顯示啟用 Bluetooth®（藍牙）的裝置清單。從清單中選擇助聽器以同時配對兩個助聽器。嗶聲確認配對成功。

- ① 有關 Bluetooth®（藍牙）無線技術的配對說明（尤其是受大眾歡迎的手機製造商），請訪問：
<https://www.phonak.com/en-int/support> 了解詳細資訊


10.2 連接裝置

與裝置配對後，助聽器將在打開時自動重新連接。

- ① 只要裝置處於開機狀態並在一定範圍內，就會一直保持連接。
- ① 助聽器最多可以同時連接到兩個裝置，最多可以與八個裝置配對。

11. 通話

您的助聽器可以直接與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的手機相連。配對並連接到手機後，您將直接在助聽器中聽到通知和來電者的聲音。通話是「免持」的，這表示助聽器的麥克風會接收您的聲音並將其傳回手機。

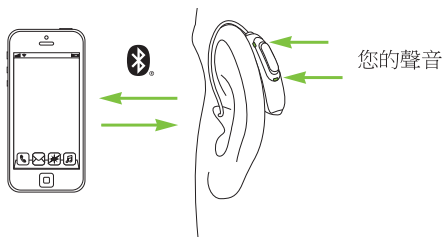


11.1 撥打電話

輸入電話號碼並按下撥號按鍵。您將透過助聽器聽到撥號音。助聽器麥克風會接收您的聲音，然後將其傳送至手機。

11.2 接聽電話

接到電話時，會在助聽器中聽到來電通知。

短按助聽器多功能按鍵的上方或下方（小於 2 秒）或在手機上正常操作可接聽電話。

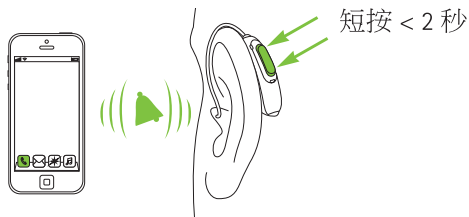


11.3 結束通話

長按助聽器多功能按鍵的上方或下方（大於 2 秒）
或在手機上正常操作可結束通話。



11.4 拒接電話

長按助聽器多功能按鍵的上方或下方（大於 2 秒）
或在手機上正常操作可拒接來電。

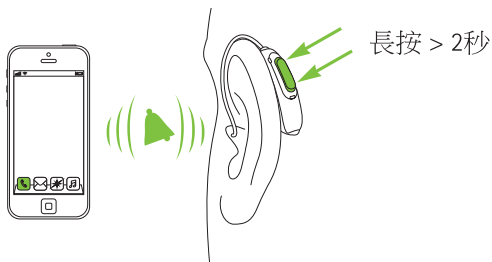


12. 飛行模式

您的助聽器在 2.4 GHz-2.48 GHz 頻率範圍內運行。飛行時，有些空服人員會要求將所有裝置切換到飛行模式。進入飛行模式不會停止正常的助聽器功能，只會停用 Bluetooth®（藍牙）功能。


12.1 進入飛行模式

關閉無線功能並進入助聽器飛行模式：

1.
打開電池蓋。

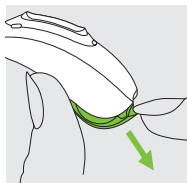

2.
在關閉電池蓋的同時，按住助聽器的多功能按鍵下部 7 秒鐘。

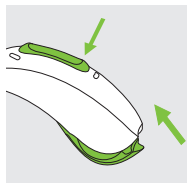


在飛行模式下，您的助聽器無法直接與手機連接。


12.2 退出飛行模式

退出助聽器的飛行模式並重啟藍牙功能：

1.
打開電池蓋。

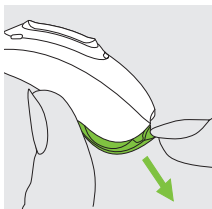

2.
再次關閉電池蓋。

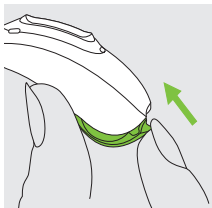

13. 環境條件

產品用於預期用途時，功能不會存在問題或限制，除非本使用者指南另有說明。

請確保根據以下條件使用、運輸和存放助聽器：

	操作	運輸	存放
溫度	+5° 至 +40°C (+41° 至 +104°F)	-20° 至 +60°C (-4° 至 +140°F)	-20° 至 +60°C (-4° 至 +140°F)
濕度 (無冷凝)	0% 至 85%	0% 至 93%	0% 至 93%
氣壓	500 至 1060 hPa	500 至 1060 hPa	500 至 1060 hPa

在運輸和存放期間，溫度和濕度不得長時間超過上表所述的範圍。

如果長時間不使用助聽器，請取出電池。在低於 10°C 和高於 30°C 的溫度下長時間存放可能會對產品的電池性能產生負面影響。

這些助聽器的分類為 IP68。這意味著助聽器防水防塵，可以承受日常生活中的各種情況。這些助聽器可以在雨中配戴，但不應完全浸入水中或在洗澡、游泳或進行其他水上活動時使用。

切勿讓助聽器接觸氯化水、肥皂水、鹽水或其他具有化學成分的液體。

如果裝置的存放和運輸條件超出了建議的使用條件，請等待 15 分鐘，然後在恢復建議的環境條件後再啟動裝置。

14. 維護與保養

預期使用壽命：

助聽器的預期使用壽命為五年。在此期間可安全使用這些裝置。

商業服務期：

在裝置的預期使用壽命內，對助聽器進行日常和細緻的維護將有助於實現卓越性能。

Sonova AG 將在相應的助聽器和基本元件從產品組合中逐步淘汰後，提供至少五年的維修服務期。

請按照本說明書的要求進行使用。

有關產品安全的進一步資訊，請參閱第 21.2 章。

一般資訊

使用髮膠或化妝品之前，請取下助聽器，因為這些東西可能損害助聽器。

當您不使用助聽器時，可以打開電池蓋，便於濕氣蒸發。使用後，請確保始終對助聽器進行乾燥處理。將助聽器存放在安全、乾燥、清潔的地方。

在以下條件下，您的助聽器在抗水、抗汗和防塵性能上表現更佳：

- 電池蓋已完全關閉。關閉電池蓋時，請確保不要有任何異物（例如頭髮）夾在電池蓋中。

- 在接觸式暴露在水、汗、塵之後，請及時擦乾和清潔助聽器。
- 按照本使用者指南使用和保養助聽器。

① 在接觸水的地方使用助聽器會限制空氣流向電池，導致其停止運作。如果您的助聽器在接觸水後停止工作，請參閱第 20 章中的疑難排解步驟。

每日

檢查耳件是否有耳垢和水分沉積物。使用無絨布清潔表面。切勿使用清潔劑清潔助聽器，如家用洗滌劑、肥皂等。不建議用水清洗。如果需要對助聽器進行徹底清潔，請諮詢聽力保健專業人員，以獲取有關耳垢檔板或乾燥劑的建議和資訊。

每週

使用一個柔軟的、微濕潤的布或特製的清潔布清潔您的耳件。對於全面的保養說明請諮詢您的聽力保健專家。

15. 更換耳垢檔板

您的助聽器配備了耳垢檔板，可以避免喇叭受耳垢損壞。

請定期檢查耳垢檔板，如果表面看起來很髒或助聽器音量或音質下降，請更換耳垢檔板。應該每隔四週至八週更換一次耳垢檔板。


如要更換接收器上的耳垢檔板，請僅使用聽力保健專家推薦的耳垢檔板（請參見第 3 頁）。

就耳垢檔板的可用性問題諮詢聽力保健專家。

15.1 將耳塞從喇叭上取出


1.

用一隻手拿住喇叭，另一隻手拿住耳塞，將耳塞從喇叭上取下。

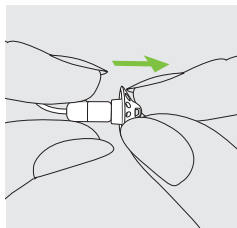


2.

輕輕拉動耳塞，將其取出。

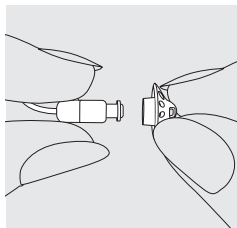

3.

使用無絨布清潔喇叭。

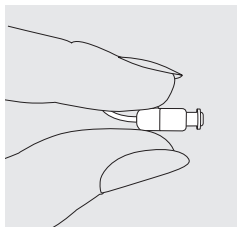


15.2 更換耳垢檔板 CeruStop


如要更換接收器上的耳垢檔板，請僅使用聽力保健專家推薦的耳垢檔板（請參見第 3 頁）。

1.


將更換工具的取出側插入用過的耳垢檔板。固定裝置的握軸應該接觸耳垢檔板的邊緣。

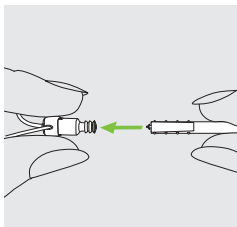


- 2.**
小心拉動，將耳垢檔板從接收器筆直取出。取下時，請勿扭動耳垢檔板。

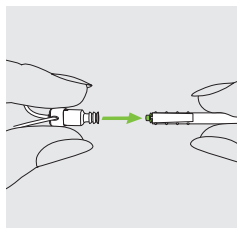

- 3.**
如要插入新的耳垢檔板，請將更換工具的插入側輕輕推入接收器孔中，直至外環完全對準。

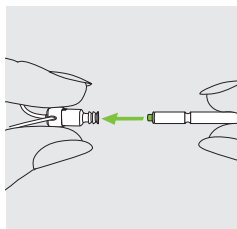


- 4.**
將工具筆直拉出。
新的耳垢檔板將會就位。
現在，將耳模與接收器連接在一起。

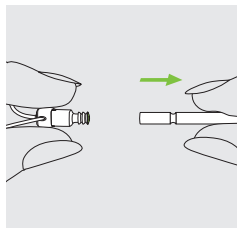

15.3 更換耳垢檔板 CeruShield™


1.

按照箭頭所示方向輕輕轉動耳垢檔板轉盤，直到垃圾桶圖示下出現開口。

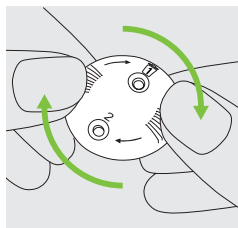

2.

若要取下用過的耳垢檔板，小心將喇叭插入垃圾桶圖示下顯示的開口中，直至出現卡噠聲。當您拔出喇叭時，使用過的耳垢檔板將留在圓盤中。

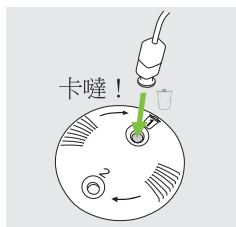


3.

如果要插入一個新的耳垢檔板，小心將喇叭插入垃圾桶圖示對面顯示的新耳垢檔板中，直至出現卡噠聲。將喇叭拔出圓盤，此時新的耳垢檔板已放入喇叭內。




15.4 將耳塞連接到接收器


1.
用一隻手拿著喇叭，另一隻手
拿住耳塞。

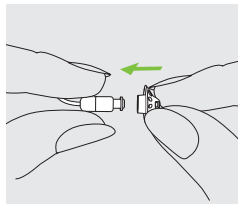

2.
將耳塞滑動到喇叭出音口。

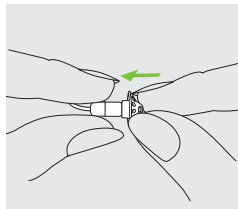

3.
喇叭和耳塞應完美組裝在
一起。

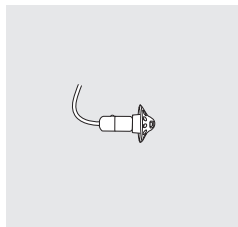



16. 服務和保固

當地保固

請向聽力保健專家、您購買助聽器的商家詢問有關當地保固期限的資訊。

全球保固

Sonova AG 提供助聽器從購買之日起生效的一年全球保固期限。本保固期限包含了助聽器製造過程和材料缺陷引發的問題，但不包括電池、聲管、耳件和外接接收器等配件。保固僅在具備購買證明時才有效。

全球保固並不影響您依照適用的消費品銷售國家管轄法律而可能享有的任何法定權利。

保固限制

本保固不涵蓋因操作或照護不當、接觸化學品或承受過大外力而造成的損壞。

由第三方或未經授權服務中心導致的損壞將使保固作廢失效。本保固不包括由聽力保健專家在其辦公室內執行的任何維修。

17. 合規資訊

歐洲：

助聽器符合性聲明

Sonova AG 特此聲明，本產品符合醫療器械法規 (EU) 2017/745 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。EU 符合性聲明全文可向製造商或當地的峰力代表索要，可在 www.phonak.com/en-int/certificates 上的清單（世界各分公司）中獲得後者的地址。

澳大利亞/紐西蘭：



表明裝置符合適用的無線電頻譜管理 (RSM) 和澳大利亞通訊和媒體管理局 (ACMA) 監管安排，可以在紐西蘭和澳大利亞合法銷售。合規標籤 R-NZ 針對的是在紐西蘭市場以合規性等級為 A1 提供的無線電產品。

第 2 頁上列出的無線型號獲得了以下認證：

Phonak Terra and Terra+ RIC-312

USA	FCC ID: KWC-MZP
Canada	IC: 2262A-MZP

型號: Terra RIC-312



型號: Terra+ RIC-312



取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注釋 1：

本裝置符合 FCC 規定第 15 部分和加拿大工業部的 RSS-210。運作要滿足以下兩個條件：

- 1) 本裝置不會產生有害干擾，以及
- 2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

注釋 2：

如果對本裝置的變更或改裝未經 Sonova AG 明示核准，則可能會使 FCC 針對運作本裝置的授權無效。

注釋 3：

該裝置已經進行過測試，符合 B 類數位裝置的限制，符合 FCC 規定第 15 部分和加拿大工業部 ICES-003 的要求。

這些限制旨在提供合理的保護，防止在住宅區安裝時產生有害干擾。該裝置會產生、使用和發射射頻能量，如果未按照指令安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是，不保證在特定安裝環境下不會產生干擾。如果該裝置確實對無線電或電視接收產生有害干擾（透過開關設備確定），則建議使用者透過採取以下一項或多項措施來儘量消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向和位置。
- 增加裝置和喇叭之間的間隔。
- 將該裝置連接到與喇叭所連接的插座不同的電路插座上。
- 如果需要幫助，請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員。

無線助聽器的射頻資訊

天線類型	諧振環形天線
工作頻率	2.4 GHz – 2.48 GHz
輻射	GFSK
功率 (EIRP)	< 2.5 mW
Bluetooth® (藍牙)	
範圍	~1m
藍牙	4.2 雙模
支援的規範	HFP (免持規範), A2DP

電磁相容性 (EMC)

峰力助聽器經過 EMC 測試，符合 IEC 60601-1-2:2014 或 IEC 60601-1-2:2014 A1 2020 的要求。

18. 符號資訊和說明



Sonova AG 透過 CE 標誌確認此產品 – 包括配件 – 符合醫療器械法規 (EU) 2017/745 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。CE 符號後的數字與根據上述條例和指令進行諮詢的認證機構的代碼一致。



此符號表明這些使用者指令中描述的產品符合 EN 60601-1 的 B 類適用部件的要求。助聽器的表面指定為 B 類適用部件。



表示醫療器械法規 (EU) 2017/745 中定義的醫療器械製造商。



指示醫療器械的製造日期。



表示歐盟的授權代表。EC REP 也是歐盟進口商。



此符號表示，使用者必須閱讀這些使用者指南內的相關資訊並將其考慮在內。



此符號表示使用者務必要注意這些使用者指南中的相關警告通知。



此符號表示使用者務必要注意這些使用者指南中與電池相關的相關警告通知。



處理和產品安全性方面的重要資訊。



這一符號表明，該裝置的電磁干擾在美國聯邦傳播委員會核准的限額之內。



表明裝置符合適用的無線電頻譜管理 (RSM) 和澳大利亞通訊和媒體管理局 (ACMA) 監管安排，可以在紐西蘭和澳大利亞合法銷售



Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。其他商標和品名是歸其各自所有者所有。



日本認證電波設備標誌。



表示製造商的序列號，以便識別特定醫療器械。



表示製造商的目錄號，以便識別醫療器械。



表示裝置是醫療器械。



此符號表示可以使用電子說明。



該符號表示設備在磁共振 (MR) 環境中（例如 MRI 掃描時）無法安全使用。

IP68

異物防護等級。IP68 防護等級表示助聽器防水、防塵。根據 IEC60529 標準，在 1 公尺水下連續浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。



表示醫療器械可以安全暴露的溫度限值。



表示醫療器械可以安全暴露的濕度範圍。



表示醫療器械可以安全暴露的氣壓範圍。



運輸期間，請保持乾燥。



打叉的垃圾桶符號表示不得將助聽器以及電池當作普通生活垃圾丟棄。請將舊的或不用的助聽器交給廢品處理站，作為電子產品廢品處理或者交給您的聽力保健專業人員處理。合理的處理方式會保護環境和健康。

19. 疑難排解

原因	可能的解決方法
問題：助聽器回饋音	
助聽器未正確配戴	正確配戴助聽器（第 6 章）
耳道內有耳垢	聯絡聽力保健專家
問題：助聽器音量過高	
音量過高	若音量控制可用，請降低音量（第 8 章）
問題：助聽器聲音不夠大或聲音失真	
音量過低	若音量控制可用，則提高音量（第 8 章）
電池電量低	更換電池（第 5 章）
耳件/接收器被堵住	清潔接收器開口/耳件（第 16 章）
您的聽力狀況發生改變	聯絡聽力保健專家
問題：助聽器發出兩聲提示音	
提示電池電量低	在 30 分鐘內更換電池（第 5 章）

原因	可能的解決方法
----	---------

問題：助聽器無法正常工作（未做放大處理）	
-----------------------------	--

耳件/接收器被堵住	清潔接收器開口/耳件（第 16 章）
助聽器已關閉	按下多功能按鍵的下方 3 秒鐘（第 8 章）
電池完全沒電	更換電池（第 5 章）
電池未正確放入	正確放入電池（第 5 章）

問題：助聽器無法開機	
-------------------	--

電池沒有電	更換電池（第 5 章）
-------	-------------

問題：手機通話功能無法正常工作	
------------------------	--

助聽器處於飛行模式	關閉助聽器，再次開啟（請參見第 12.2 章）
助聽器未與手機配對	將其與手機配對（第 10 章）

問題：助聽器時開時關（斷斷續續）	
-------------------------	--

電池或助聽器上的水分	用乾布擦拭電池和助聽器
------------	-------------

① 若問題仍然存在，請聯絡聽力保健專家尋求協助。

請查看 <https://www.phonak.com/en-int/support> 獲取更多資訊。

20. 重要安全資訊

使用助聽器前，請閱讀以下頁面上的相關安全資訊和使用限制資訊。

預期用途

助聽器的預期用途是放大聲音並將聲音傳輸到耳朵，進而為聽力損失病患進行聽力補償

預期使用者

預期用途：

- 存在聽力損失的族群
- 聽損者的照顧者
- 負責調整助聽器的聽力保健專家

預期醫學適應症

使用助聽器的臨床適應症包括：

存在聽力損失：

- 單側或雙側
- 傳導性、感音神經性或混合性
- 輕度至極重度

醫學禁忌症

使用助聽器的醫學禁忌症包括：

- 耳朵畸形（即耳道閉鎖、耳廓缺失）
- 神經性聽力損失（耳蝸後病變，如聽覺神經缺損/發育不良）

目標病患群體

該裝置適用於 8 歲以上符合本產品臨床適應症的病患。

臨床效益：

言語理解度改進

副作用

您的聽力保健專業人員可能會解決或減少助聽器的生理副作用，例如耳鳴、眩暈、耳垢堆積、壓力過大、發汗或出汗、水泡、瘙癢和/或皮疹、堵塞或發脹及其引發的頭痛和/或耳痛等。

傳統助聽器有可能使病患暴露在更大的聲音中，這可能會導致受聲外傷影響的頻率範圍發生閾值偏移。

尋求醫學或其他專家意見和/或治療的轉診病患的主要標準如下：

- 可見的先天性耳部畸形或耳部外傷；
- 過去 90 天內做過耳部主動引流；
- 過去 90 天內單側或雙側耳朵發生突發性或快速漸進性聽力損失；
- 急性或慢性眩暈；
- 在 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 時，聽力測定的氣骨導差等於或大於 15 dB；
- 目視發現耳道內有過多的耳垢或異物
- 耳朵疼痛或感覺不適；
- 耳膜和耳道的外觀異常，例如：
 - 外耳道發炎
 - 耳膜穿孔

- 聽力保健專業人員認為需要進行醫療檢查的其他異常情況。

在以下情況下，聽力保健專業人員可能會將不合適的病患轉診或為了病患的最大利益而轉診：

- 當有足夠的證據表明醫學專家已對病情進行了全面調查，並提供了任何可能的治療方法；
- 自上次檢查和/或治療以來，病情沒有惡化或明顯變化。

如果病患已知情且有能力決定不接受尋求醫療意見的建議，則可以繼續推薦合適的助聽器，但需考慮以下因素：

- 該建議不會對病患的健康或整體生活品質產生任何不利影響；
- 記錄確認已對病患的最大利益進行了所有必要的考慮。

如果法律要求，病患已簽署免責聲明，以確認轉診建議未被接受並且是在知情的情況下做出的決定。

助聽器適用於家庭保健環境，由於其攜帶便利性，可能在專業醫療設施環境中，如醫生辦公室、牙科診所等使用。

助聽器不會讓聽力恢復正常並且不會阻止或改善由於器質性病變導致的聽力損失。助聽器選配後不經常使用，您將無法充分受益。使用助聽器是聽能復健的一部分，並可能需要輔以聽覺訓練和讀唇技巧。

如果有迴響、音質差、聲音過大或過於柔和、配戴不當或咀嚼或吞咽時出現問題，可由您的聽力保健專業人員在調整程序的微調過程中解決或改善。

如果出現與助聽器有關的嚴重事故，應該報告製造商代表和所在國家的主管部門。嚴重事故指的是已經或可能直接或間接導致以下情況的事件：

- a) 病患、使用者或其他人員死亡
- b) 病患、使用者或其他人員的健康狀況暫時或永久性嚴重惡化
- c) 嚴重的公共衛生威脅

如果要報告意外的操作或事件，請聯絡製造商或代表。

20.1 危險警告

- ⚠ 您的助聽器在 2.4 GHz-2.48 GHz 頻率範圍內運行。飛行時，請確認航班操作人員是否要求將裝置切換到飛行模式，具體參見第 12 章。
- ⚠ 助聽器（對不同聽力損失進行差異化設定）僅限特定使用者使用。任何人不得使用他人的助聽器，避免損害聽力。
- ⚠ 未經 Sonova AG 明示核准，不得變更或改裝助聽器。這些變更可能會損壞您的聽力或助聽器。
- ⚠ 請勿在易燃易爆區域（存在爆炸危險的礦區或工業區、含氧量高的環境或處理易燃麻醉劑的區域）使用助聽器。本裝置未經 ATEX 認證。
- ⚠ 如果您感覺耳內或耳後疼痛、發炎或出現皮膚過敏和耳垢堆積加速的情況，請諮詢聽力保健專業人員或醫生。
- ⚠ 方向性麥克風模式下的聆聽程式可以降低背景噪音。請注意，來自後方的警告訊號或噪聲（如汽車聲）可能會被部分或全部消除。
- ⚠ 該助聽器不適用於年齡小於 36 個月的兒童。兒童和認知障礙人士需在監護下使用該裝置，以確保他們的安全。助聽器體積較小，並包含有微小零件。請勿讓兒童和認知障礙人士在沒有監護的情況下使用助聽器。如不慎吞咽，請立即就醫，以避免助聽器或其零件造成窒息！



警告：電池是危險的，如果吞下或放入身體的任何部位，無論電池是舊的還是新的，都會造成嚴重的傷害！請放在兒童、有認知障礙的人或寵物接觸不到的地方。如果您懷疑電池被吞下或遺留在身體任何部位，請立即諮詢您的醫生，不得延誤！



以下內容僅適用於使用具有植入醫療裝置（即心律調節器、除顫器等）的人：

- 無線助聽器與植入裝置保持距離至少 15 公分（6 英寸）。如果遇到干擾，請勿使用助聽器並聯絡植入器械的製造商。請注意，電源線、靜電放電、機場金屬探測器等也可能引發干擾。
- 磁鐵（即電池移除工具、自動電話磁鐵等）與植入裝置保持距離至少 15 公分（6 英寸）。



請使用由製造商指定或提供的配件、感測器和線材，否則可能會導致不當操作，增加電磁輻射或降低電磁抗擾度。



使用可攜式射頻通訊設備（包括週邊設備，如天線線材和外部天線）時，與助聽器或配件保持超過 30 公分以上距離（12 英寸），包括由製造商指定的線材。否則，可能會導致該設備的性能下降。



配戴搭配訂製式耳模的助聽器時，避免耳朵遭受強烈的外力衝擊。訂製式耳模的穩定性是因應正常使用狀況下設計的。與耳朵產生強烈的物理衝擊（例如運動期間）可能會導致訂製式耳模破裂。這可能會導致耳道或耳膜穿孔。

- ⚠ 助聽器產生機械應力或撞擊後，請確保助聽器外殼完好，然後再將其放到耳朵中。
- ⚠ 該設備應避免與其他設備共同使用或堆放在一起，以免導致無法正常使用。如果必須要進行使用，則應觀察該設備和其他設備以確認正常使用。
- ⚠ 大多數助聽器使用者患有聽力損失，日常情況下經常使用助聽器不會導致聽力下降。只有一小部分聽力受損的助聽器使用者在長期使用後可能有聽力下降的風險。
- ⚠ 耳膜穿孔、耳道發炎或中耳腔裸露的病患使用助聽器時，不應安裝通用型耳塞/耳垢檔板。在這種情況下，建議使用標準耳模。產品零件遺留在耳道中的情況很罕見，如果出現這種情況，強烈建議您立即就醫，以便安全取出。
- ⚠ 在極少數情況下，如果耳塞與助聽器未牢固連接，則取下助聽器後，耳塞或其組成部分有可能遺留在耳道內。如發生，建議立即就醫。
- ⚠ 請勿從助聽器取下喇叭線材。如果需要取下或更換，建議聯絡聽力保健專家。
- ⚠ 訂製式助聽器和耳塞的鈦金屬外殼可能含有來自粘合劑的少量丙烯酸鹽。對這些物質敏感的人可能會出現過敏性皮膚反應。如果出現這種反應，請立即停止使用本裝置，並諮詢您的聽力保健專業人員或醫生。

- ⚠ 植入磁性外部可編程腦脊液分流閥的病患在暴露於強磁場時，可能存在閥門設定發生意外變化的風險。助聽器的接收器（喇叭）、Lyric SoundLync、Lyric programming wand 和 MiniControl 含有靜態磁鐵。磁鐵與分流閥植入部位之間應保持 2 英寸（約 5 公分）或更遠的距離。
- ⚠ 下面描述的特殊醫學或牙科檢查（包括放射）可能會對助聽器的正常運行產生不利影響。進行以下檢查期間，請將助聽器取下並放在檢查室/區域外：
- 使用 X 射線進行醫學或牙科檢查（包括電腦斷層）。
 - 利用 MRI/NMRI 掃描進行醫學檢查，會產生磁場。
- 在進行安全檢查時（如機場安檢）無需刻意取下助聽器。如果使用 X 射線，則會一直保持極低劑量，不會對助聽器產生影響。

20.2 產品安全資訊

- ❶ 這些助聽器抗水，但不防水。助聽器可以在正常活動中使用，也可在偶爾意外暴露於極端環境時使用。請不要將您的助聽器浸入水中！助聽器並非設計用於連續長期浸入水中的情況下使用，如游泳、淋浴。因此，請您在游泳或淋浴之前，務必取下助聽器，因為助聽器包含敏感的電子零件。
- ❶ 請勿清洗麥克風收音口。否則會導致其聲學特性的改變，影響助聽效果。
- ❶ 保護您的助聽器免受高溫和陽光照射（切勿將其放在窗戶附近或車內）。切勿使用微波爐或其他加熱裝置對助聽器進行除溼。您可以諮詢聽力保健專家了解正確的除溼方法。
- ❶ 當您不使用助聽器時，可以打開電池蓋，便於濕氣蒸發。使用後，請確保始終對助聽器進行乾燥處理。將助聽器存放在安全、乾燥、清潔的地方。
- ❶ 助聽器切勿摔落！摔落到堅硬的表面可能會造成助聽器損壞。
- ❶ 始終為助聽器使用新電池。一旦電池漏液，請立即更換新電池，以免刺激皮膚。您可以將用過的電池退還給聽力保健專家。
- ❶ 如果長時間不使用助聽器，請取出電池。

- ① 如果長時間不使用助聽器，請將其存放在帶有乾燥劑的盒子中或通風良好的地方。這樣可使水分從助聽器中蒸發，並防止對性能產生潛在影響。
- ① 不要在禁止使用電子設備的區域使用助聽器。
- ① 耳塞應每隔三個月更換一次，或在變硬脆化時更換。此是為了防止在插入耳朵或從耳朵取出期間，耳塞與聲管分離。
- ① 這些助聽器中使用的電池不應超過 1.5 伏特。請不要使用銀鋅或鋰離子可充電電池，它們可能會嚴重損壞助聽器。

備註

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



您的聽力保健專家：



EC REP

Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

德國

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

瑞士

www.phonak.com

衛部醫器輸壹字 第018490號

衛部醫器陸輸壹字 第003566號

029-1333-441/1.00/2023-07/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

