

myPhonak Junior 1.2

Руководство пользователя



A Sonova brand

PHONAK
life is on

С чего начать

myPhonak Junior — это приложение, разработанное компанией Sonova, мировым лидером по созданию решений для коррекции слуха, штаб-квартира которой находится в Цюрихе, Швейцария. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы научиться эффективно использовать все функции приложения.



В данном руководстве пользователя описаны функции приложения myPhonak Junior и их применение. В нем также описывается, как заблокировать определенные функции для детей с помощью родительской блокировки, чтобы ребенок мог использовать их только вместе с родителем. Перед началом использования приложения ознакомьтесь с данным руководством пользователя.



Дети даже одного возраста различаются по степени развития познавательных способностей. Для оценки возможности использования ребенком приложения myPhonak Junior нужно оценить зрелость его суждений и восприятие риска. При этом можно руководствоваться следующими рекомендациями.



Независимое использование дистанционного управления
Ребенку должно быть 10 или более лет, и он должен уметь принимать осознанное решение о настройках приложения, которые влияют на его слух и восприятие окружающих звуков.



Критически важна способность прочесть и понять предупреждающие сообщения.



Использование дистанционного управления с посторонней помощью
Дети в возрасте 7 лет и старше, которые способны дать четкую обратную связь о результате изменений настроек через приложение, сделанных другим человеком. В этом случае родители/воспитатели могут вносить изменения от имени ребенка.



ПРИМЕЧАНИЕ. Крайне важно, чтобы родители/воспитатели вносили изменения только в случае, если ребенок может дать четкую обратную связь.



Информация о совместимости

С приложением myPhonak Junior можно использовать только слуховые аппараты Phonak с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth®.

Приложение myPhonak Junior можно использовать на телефонах с функцией Bluetooth® с низким энергопотреблением (LE). Оно совместимо с устройствами с операционной системой iOS® версии 14.0 или более поздней. myPhonak Junior можно использовать на устройствах Android™ с Google Mobile Services (GMS), технологией Bluetooth® 4.2 и ОС Android 8.0 и более поздней версии.

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Sonova AG осуществляется на основании лицензии.

iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Android является товарным знаком компании Google LLC.

iOS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и некоторых других странах.

Содержание

Краткий обзор	4
Установка приложения myPhonak Junior	6
Сопряжение с совместимыми слуховыми аппаратами	7
Родительский контроль	9
Индивидуальная настройка	10
Поиск и устранение неполадок при сопряжении	11
Дистанционное управление	12
Сеанс дистанционной поддержки	13
Мои слуховые аппараты	15
Информация о безопасности и описание символов	16
Используемые символы	20


Краткий обзор – Дистанционное управление




* AutoSense™ Sky OS для слуховых аппаратов Sky. AutoSense™ OS для слуховых аппаратов Bolero, Naída и Audéo.

** Доступно только для перезаряжаемых слуховых аппаратов

Краткий обзор – Дистанционная поддержка*

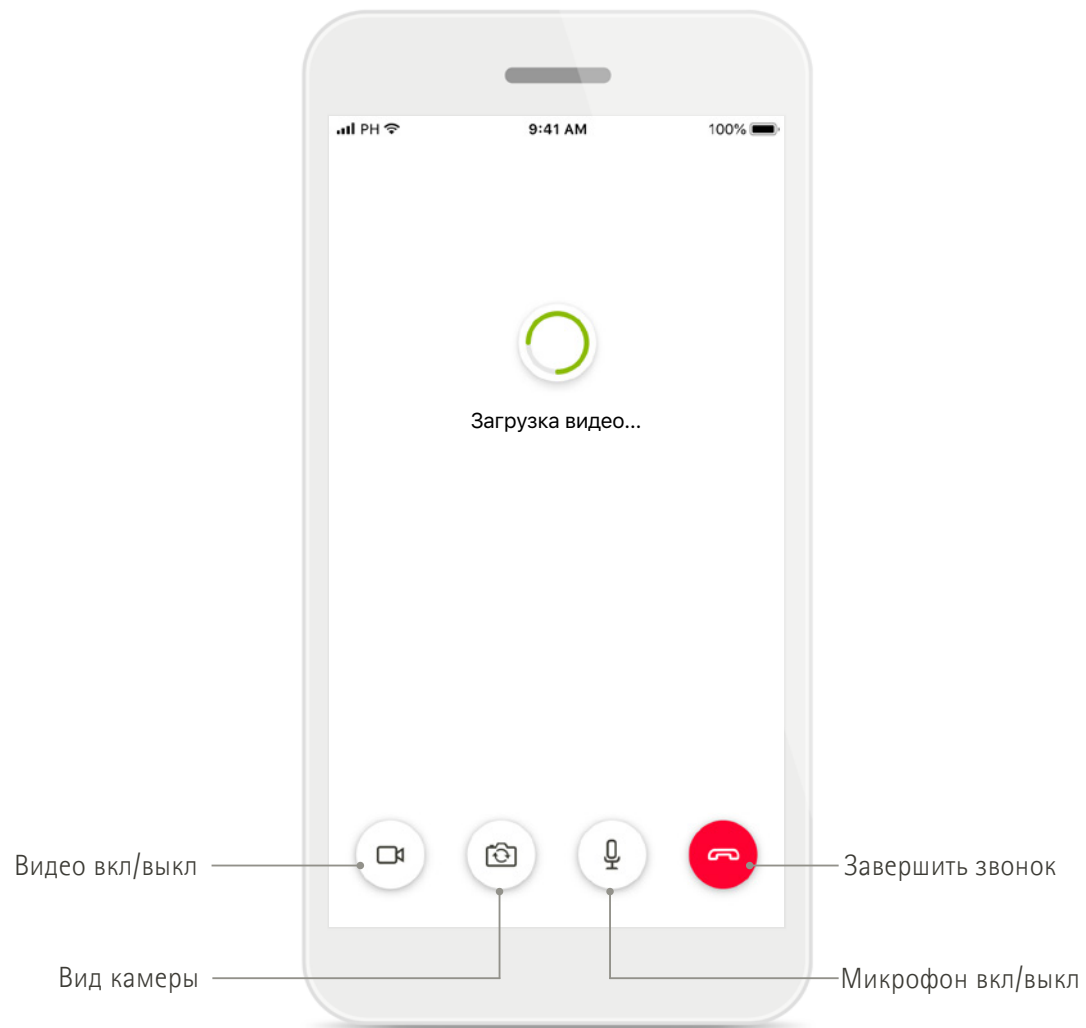

Звонок для дистанционной поддержки

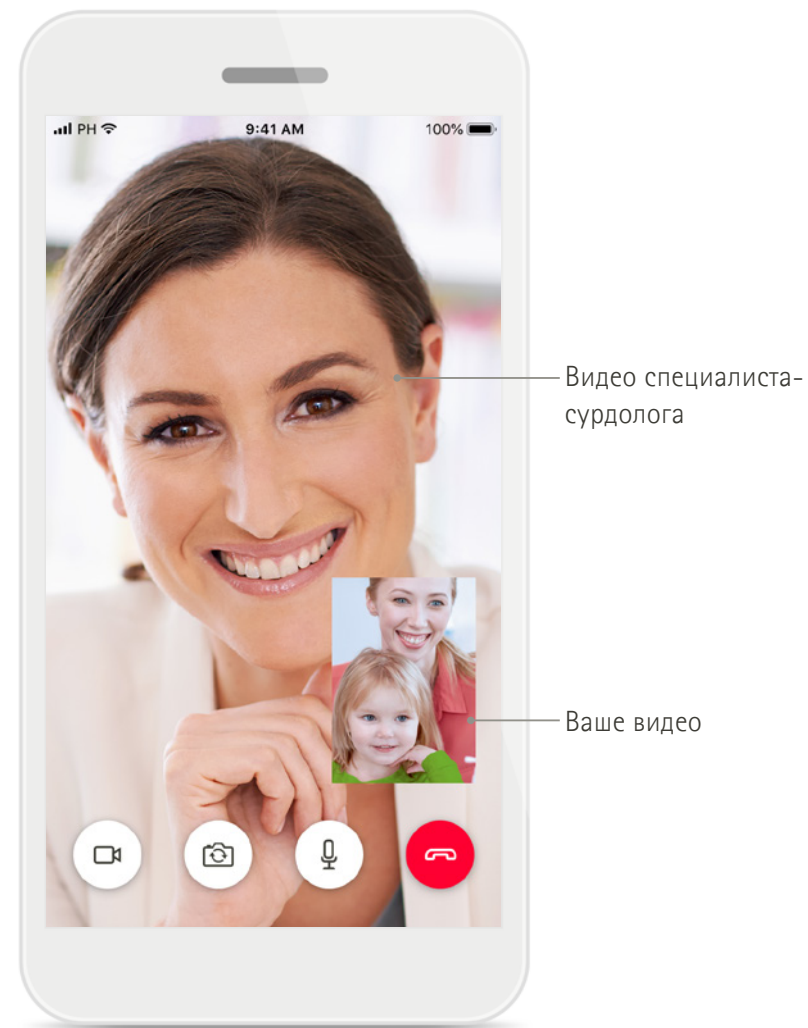


Звонок для дистанционной поддержки


* Функция доступна только в определенных странах и у отдельных специалистов-сурдологов

Установка приложения myPhonak Junior

- Подключите свой смартфон к Интернету по Wi-Fi или сети для мобильной передачи данных
- Включите на смартфоне функцию Bluetooth

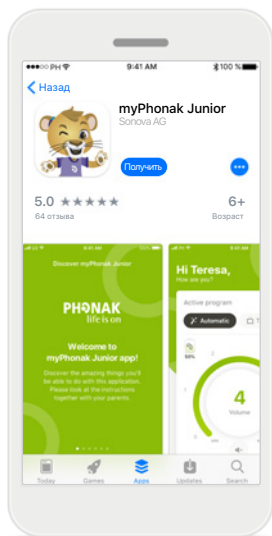


Скачайте приложение myPhonak Junior
Скачайте приложение из магазина. Откройте myPhonak Junior после установки

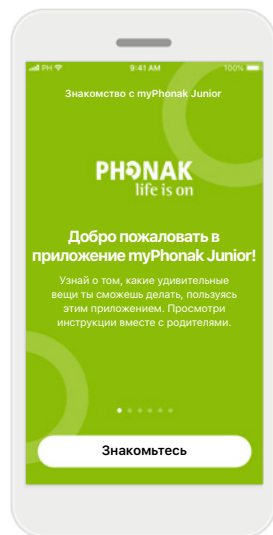


Открыть myPhonak Junior
Откройте приложение и нажмите кнопку **[Знакомьтесь]**.



Заявление о конфиденциальности
Для использования этого приложения вы должны нажать **[Принимаю]**, чтобы принять Заявление о конфиденциальности и продолжить работу.

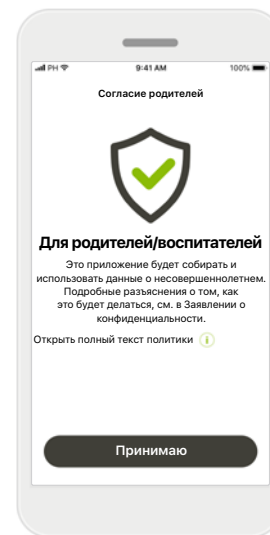


Согласие родителей
Как родитель или воспитатель, вы должны дать согласие родителей для использования приложения. Приложение myPhonak Junior собирает и использует данные о несовершеннолетнем в соответствии с информацией, приведенной в Заявлении о конфиденциальности.

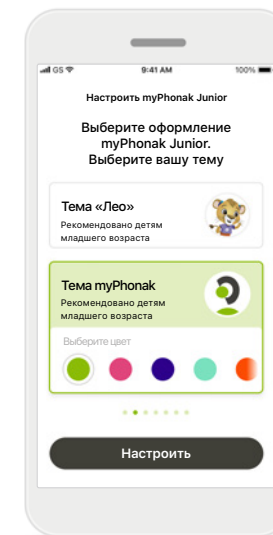

Выберите тему
Родители, воспитатели или пользователи приложения могут выбрать тему «Лео» или «myPhonak». В обеих темах приложение имеет одинаковые функции. Тему можно выбрать при регистрации или в разделе «Мой профиль».


Сопряжение с совместимыми слуховыми аппаратами*

Для подключения слуховых аппаратов с поддержкой Bluetooth к приложению myPhonak Junior следуйте приведенным ниже инструкциям**.

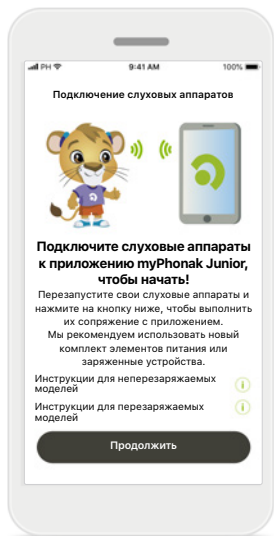


Инструкции по сопряжению

Нажмите **[Продолжить]** и следуйте инструкциям для ваших слуховых аппаратов

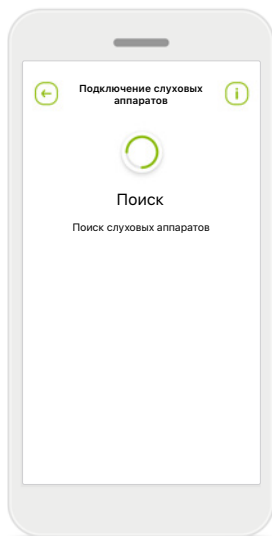


Поиск

Приложение выполняет поиск совместимых слуховых аппаратов, и, когда таковые будут обнаружены, они отобразятся на дисплее. Это может занять несколько минут.

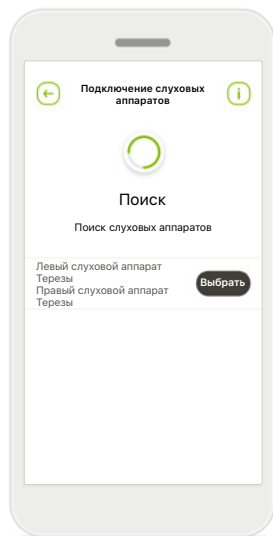


Выбор

Нажмите **[Выбрать]**, когда ваши слуховые аппараты отобразятся в списке.

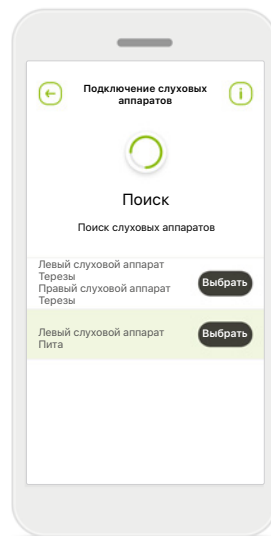

Несколько устройств

В случае обнаружения нескольких слуховых аппаратов все они отобразятся на дисплее. Чтобы выделить слуховой аппарат, нажмите кнопку на слуховом аппарате.

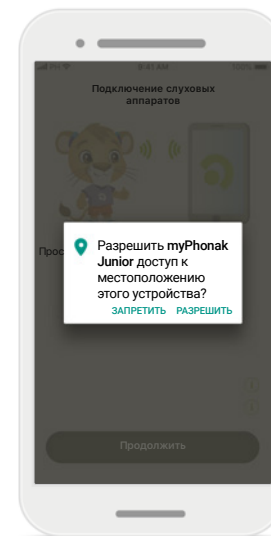

Местоположение


На устройствах Android вы должны включить определение местоположения при первом сопряжении устройств Bluetooth. После начальной настройки вы можете снова отключить определение местоположения.

*Совместимо со Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P и Audéo P.

**Потоковая передача по Bluetooth: для потоковой передачи музыки или приема телефонных звонков на слуховые аппараты перейдите в [Настройки] > [Bluetooth] и добавьте слуховые аппараты в список подключенных устройств. Затем вернитесь в приложение для продолжения процедуры сопряжения.

Сопряжение с совместимыми слуховыми аппаратами*

Для подключения слуховых аппаратов с поддержкой Bluetooth к приложению myPhonak Junior следуйте приведенным ниже инструкциям.

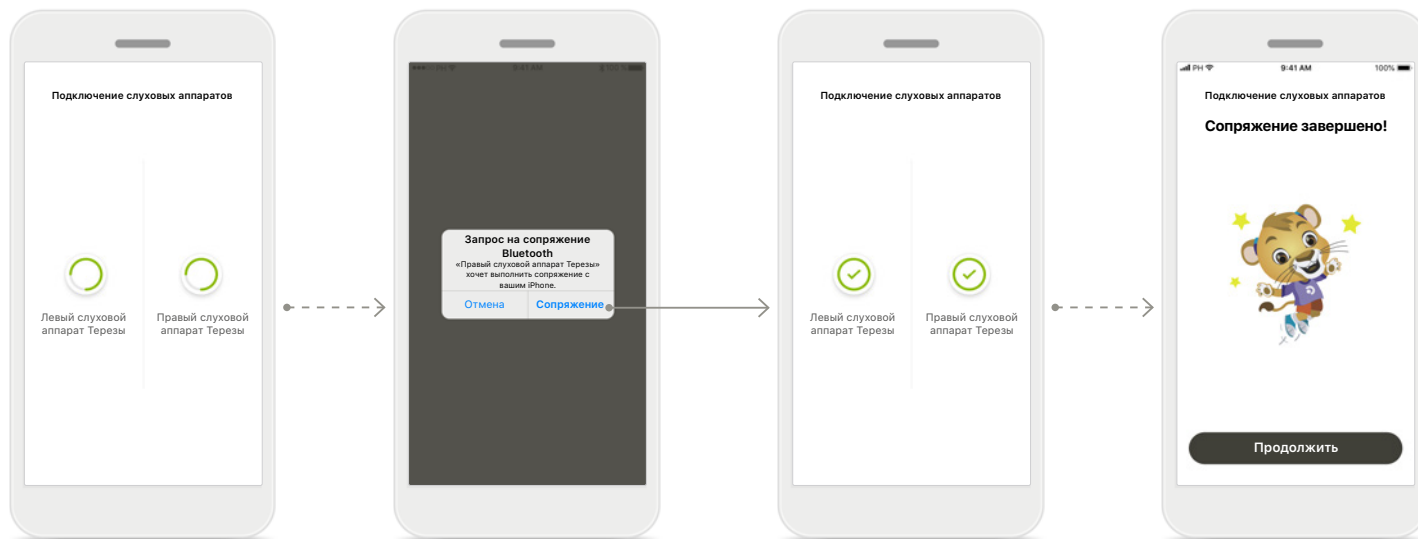

Выполнение сопряжения слуховых аппаратов

Приложение установит соединение с каждым слуховым аппаратом отдельно.

Подтвердить для всех слуховых аппаратов

При запросе подтвердите сопряжение, нажав **[Сопряжение]** во всплывающем меню, отдельно для каждого устройства.

Сопряжение завершено

Теперь сопряжение с обоими слуховыми аппаратами установлено. Приложение автоматически перейдет к следующему шагу.


Настройка завершена

Теперь все готово для использования всех совместимых функций в приложении. Нажмите **[Продолжить]**, чтобы перейти на главный экран.

*Совместимо со Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Naida P, Audéo P, Sky L, Naida L и Audéo L.

Родительский Контроль

Для включения родительского контроля в приложении myPhonak Junior следуйте приведенным ниже инструкциям.

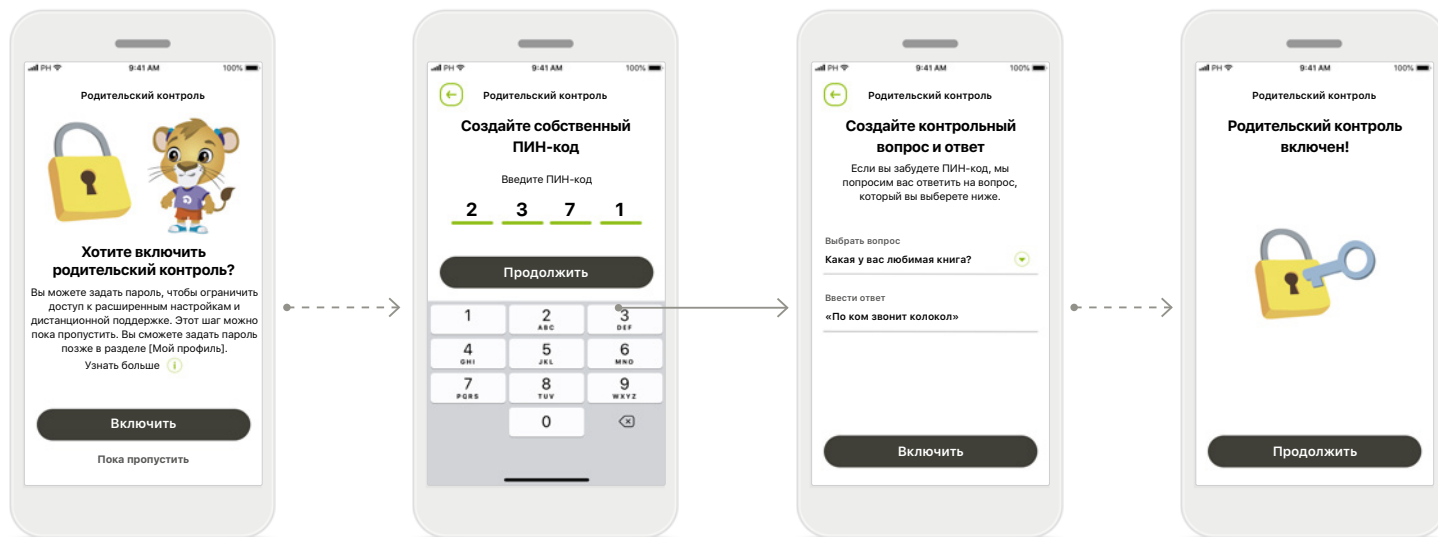

Включение родительского контроля

Родительский контроль можно включить во время регистрации/первого запуска приложения или позже по выбору родителя/воспитателя в разделе «Ваш профиль». Эта функция обеспечивает ограничение доступа к дистанционной поддержке, автовключению перезаряжаемых слуховых аппаратов и выбору полосы пропускания Bluetooth для телефонных звонков.

Создайте собственный ПИН-код

Задайте 4-значный ПИН-код для активации родительского контроля. Родитель/воспитатель может изменить или сбросить этот ПИН-код в любое время.

Контрольный вопрос


Выберите контрольный вопрос и введите правильный ответ. Этот вопрос будет использоваться для доступа к ограниченным функциям, если вы забудете свой 4-значный ПИН-код.

Родительский контроль включен

После выбора контрольного вопроса и ввода ответа можно включить родительский контроль. Родительский контроль также можно отключить в меню приложения, если в нем нет необходимости.


Индивидуальная настройка

Для использования опций индивидуальной настройки в приложении myPhonak Junior следуйте приведенным ниже инструкциям.

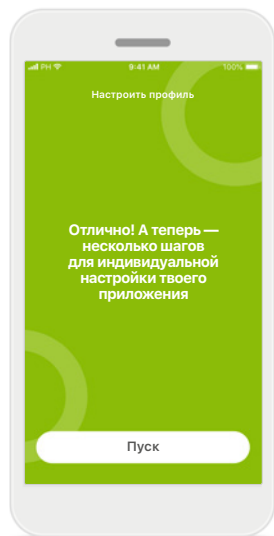


Начать индивидуальную настройку

Вы можете начать индивидуальную настройку во время регистрации или позже в разделе «Ваш профиль» на главном экране

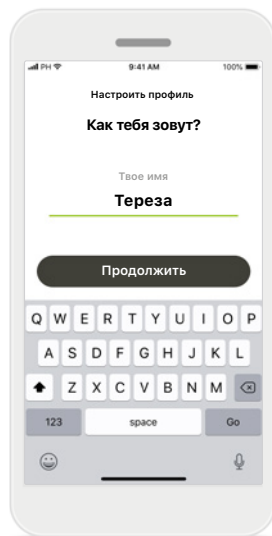


Имя профиля пользователя

Задайте имя пользователя.

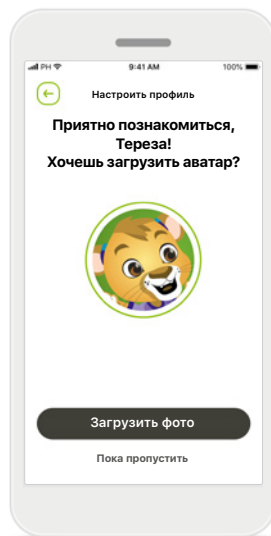

Аватар профиля

Выберите аватар. Этот шаг можно пропустить и настроить его позже в разделе «Ваш профиль».

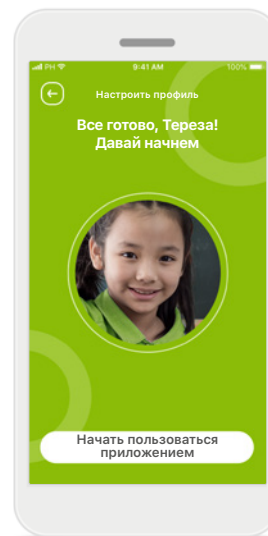


Другие опции

Другие опции — это изменение цветовой темы фона приложения и изменение цвета виртуального отображения слуховых аппаратов и рожка.

Поиск и устранение неполадок при сопряжении


Возможные ошибки в ходе процедуры настройки.

Для получения дополнительной информации о поиске и устранении неисправностей посетите страницу поддержки Phonak.

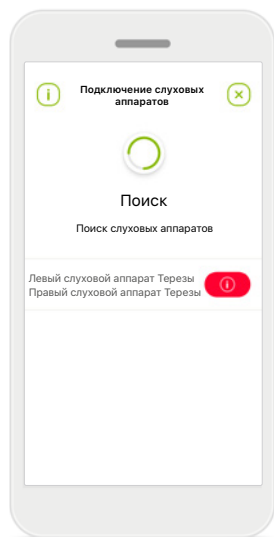

Несовместимые устройства


Приложению не удастся подключиться к устройствам, поскольку они несовместимы с ним. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему специалисту-сурдологу.

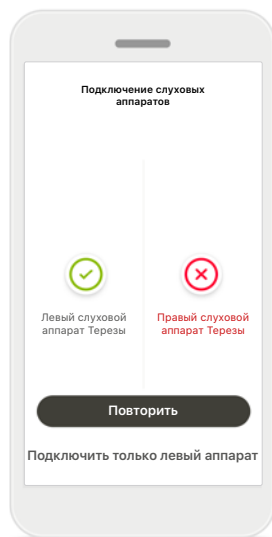

Ошибка подключения слухового аппарата

Если не удастся выполнить сопряжение с одним из слуховых аппаратов, вы можете:

1. Нажать **[Повторить]** для перезапуска процесса сопряжения.
2. Продолжить работу только с одним из двух слуховых аппаратов.

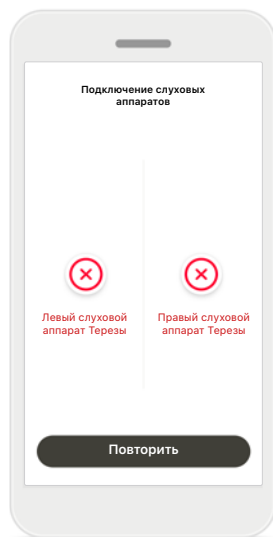


Не удастся подключить ни один из слуховых аппаратов

Нажмите **[Повторить]** для перезапуска процесса сопряжения и следуйте инструкциям.

Основной экран дистанционного управления устройствами

Функциональные возможности, доступные для всех слуховых аппаратов.

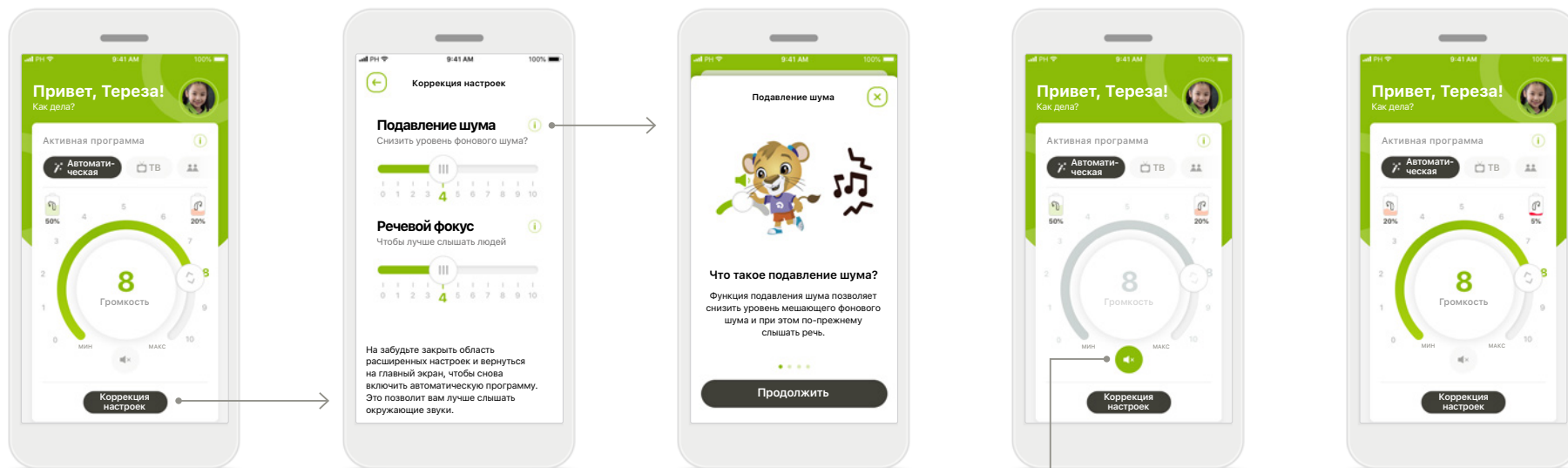

Настройка громкости слухового аппарата

Для изменения громкости передвигайте круговой ползунок.

Изменить активную программу


Нажмите на список доступных программ, чтобы настроить аппараты под конкретную ситуацию. Содержимое списка доступных программ зависит от того, как слуховые аппараты настроены специалистом-сурдологом.

Коррекция настроек

На экране настроек можно перейти к следующим функциям:

- Подавление шума
- Речевой фокус

Информация

Для получения дополнительной информации о различных функциях нажмите на пиктограмму .

Выключить звук

Звук на слуховом аппарате (слуховых аппаратах) можно отключить нажатием на пиктограмму **[Выключить звук]**.


Низкий уровень заряда элемента питания

Если уровень заряда элемента питания ниже 20%, пиктограмма отображается в красном цвете. В этом случае нужно позаботиться о перезарядке слуховых аппаратов в ближайшее время.

Сеанс дистанционной поддержки


При использовании мобильной сети передачи данных возможно взимание комиссии оператором. Прежде чем начинать сеанс дистанционной поддержки Phonak, обратитесь к своему оператору.

Для 10-минутного видеовызова в сеансе дистанционной поддержки требуется около 56 МБ, в то время как для голосового вызова используется около 30 МБ.

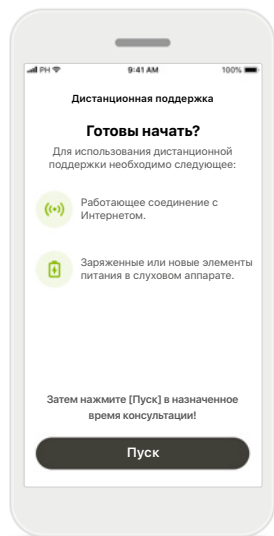


Запуск сеанса дистанционной поддержки

В назначенное время консультации откройте приложение myPhonak Junior и нажмите **[Пуск]**, чтобы ваш специалист-сурдолог узнал, что вы готовы к сеансу дистанционной поддержки Phonak.

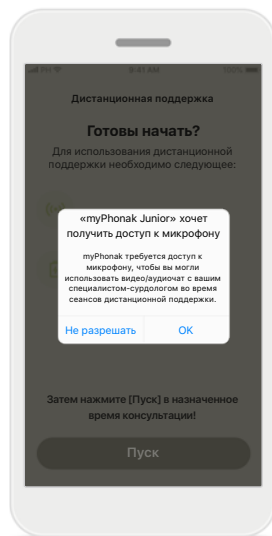


Доступ к камере и микрофону

Нажмите **[OK]**, чтобы разрешить приложению myPhonak Junior доступ к камере и микрофону.

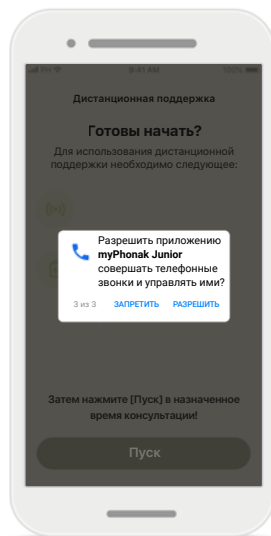

Доступ к звонкам myPhonak

Если вы используете смартфон Android, нажмите на кнопку **[РАЗРЕШИТЬ]**, чтобы разрешить приложению myPhonak Junior совершать телефонные звонки и управлять ими.

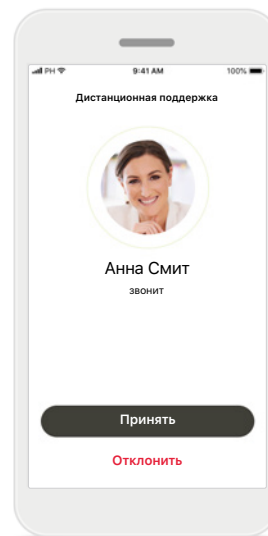


Прием видеозвонков

Приложение соединит вас со специалистом-сурдологом. Нажмите **[Принять]**, чтобы принять вызов от вашего специалиста-сурдолога.


Сеанс дистанционной поддержки

Во время сеанса дистанционной поддержки вы можете выбрать удобный для вас режим общения, переключаясь при желании на видео или аудиовызовы.

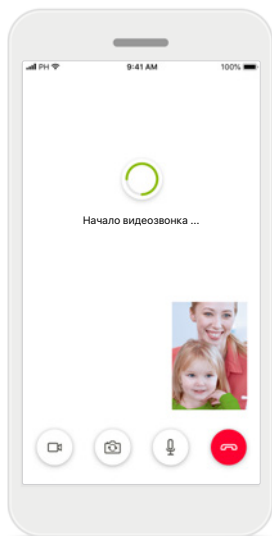


Начало видеозвонка

Через несколько секунд видеоизображение будет настроено, и вы увидите своего специалиста-сурдолога.

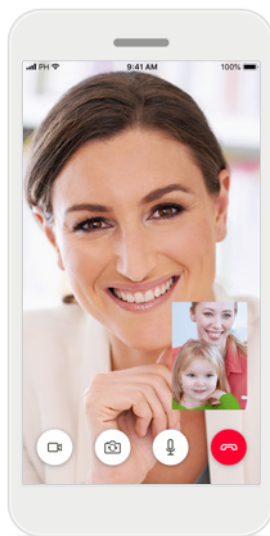


Текущий звонок

Теперь вы соединены с вашим специалистом-сурдологом.

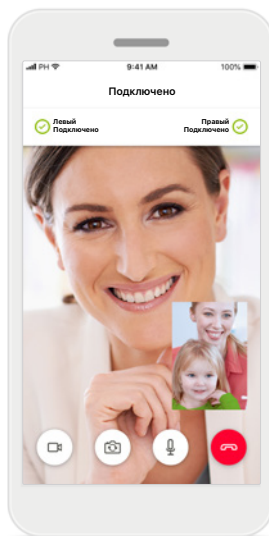


Подключенные слуховые аппараты

Если вашему специалисту-сурдологу необходимо подключиться к вашим слуховым аппаратам, это можно сделать удаленно с помощью смартфона. Ваш специалист-сурдолог сообщит вам, когда он подключится к вашим слуховым аппаратам.

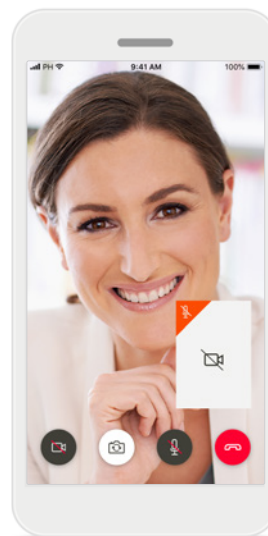

Без видеоизображения

Если вы хотите скрыть видеоизображение, вы можете отключить его нажатием кнопки.


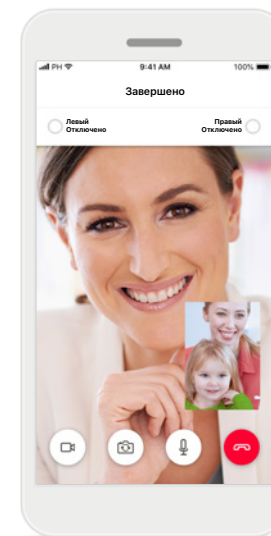


Новые настройки сохранены


Звук в ваших слуховых аппаратах будет отключен на короткое время в процессе подключения и во время сохранения настроек для ваших слуховых аппаратов. Вы сможете увидеть состояние этого процесса на экране.

Мои слуховые аппараты


Функциональные возможности, зависящие от того, как запрограммированы слуховые аппараты и какие имеются беспроводные аксессуары.

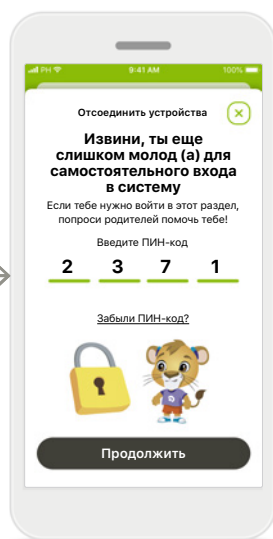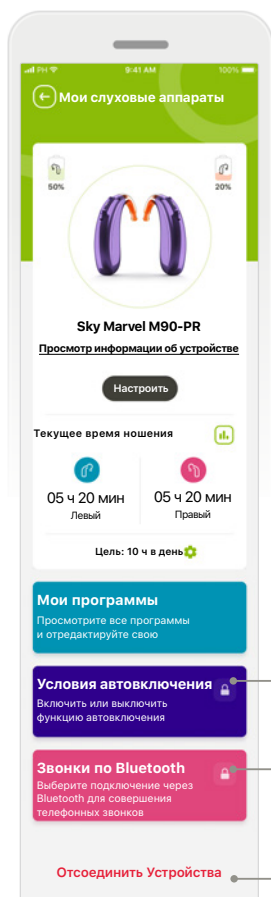

Родительская блокировка
Родительский контроль предотвращает случайное отключение слуховых аппаратов маленькими детьми.

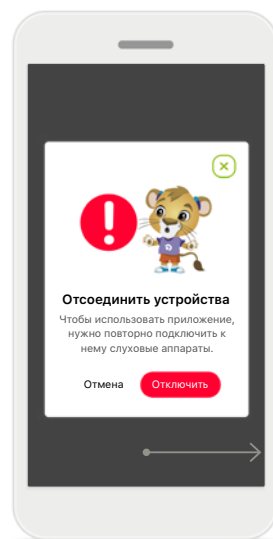

Отсоединить устройства
Вы можете прервать соединение со слуховыми аппаратами, нажав кнопку **Отключить**. Обратите внимание, что для использования приложения после выполнения этого действия нужно будет повторно осуществить сопряжение ваших слуховых аппаратов.

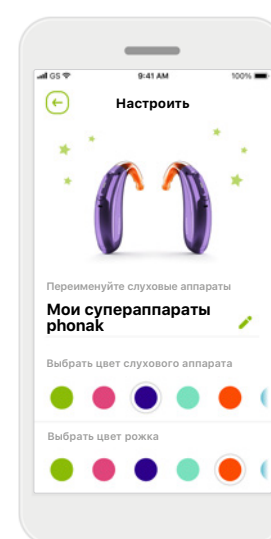

Индивидуальная настройка*
Можно изменить отображаемые в приложении цвет слухового аппарата, цвет рожка и название устройства.



Время ношения*
Время ношения показывает, сколько времени используется каждый слуховой аппарат за день и месяц. Слуховые аппараты с перезаряжаемыми аккумуляторами позволяют увидеть наиболее полную информацию о времени ношения.

Мои слуховые аппараты

На экране «Мои слуховые аппараты» отображается важная информация о состоянии аккумулятора (для устройств с перезаряжаемыми аккумуляторами), типе слухового аппарата, установленных лицензиях Roger, времени ношения, ваших программах, условиях автовключения и звонках по Bluetooth. Здесь также можно отредактировать то, как отображаются ваши слуховые аппараты.

* Доступно только на определенных слуховых аппаратах

Важная информация о безопасности

Перед использованием приложения прочитайте соответствующую информацию о безопасности, приведенную на следующих страницах.

Назначение

Приложение предназначено для выбора, настройки и сохранения существующих функций слухового аппарата, доступа к информации о состоянии и беспроводной визуализированной связи между Конечным пользователем и Специалистом-сурдологом.

Предполагаемая категория пациентов

Предполагаемая категория пациентов для этого продукта — Конечные пользователи (неспециалисты), которые ценят удобство, проявляющееся, например, в возможности оптимизировать слуховые аппараты относительно актуальных для них реальных ситуаций, и возможности не приходить в клинику для настройки, а также хотят участвовать в обмене опытом.

- Необходимые условия использования
- Подробную информацию см. на стр. 2

Руководство пользователя для всех версий приложения на всех доступных языках представлено в электронной форме на веб-сайте. Для получения доступа к руководствам пользователя выполните следующие шаги.

- Нажмите на ссылку <https://www.phonak.com/en-int/support> и выберите нужную страну
- Откройте страницу Support (на английском языке) или ее эквивалент на соответствующем языке
- Откройте страницу User Guides (на английском языке) или ее эквивалент на соответствующем языке

- Перейдите в раздел Apps (на английском языке) или его эквивалент на соответствующем языке
- Выберите «Приложение myPhonak Junior»

Кроме того, доступ к действующей версии руководства пользователя myPhonak Junior можно получить через приложение. Для этого в разделе «Помощь» необходимо нажать на карточку «Руководство пользователя». Руководство пользователя откроется во внешнем окне браузера.

Уведомление о безопасности

Данные пациентов представляют собой конфиденциальную информацию, и их защита чрезвычайно важна.

- Убедитесь, что на смартфоне установлены последние обновления безопасности операционной системы. Включите автоматическое обновление.
- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
- Используйте для слуховых аппаратов только оригинальное приложение Sonova из официальных магазинов.
- Устанавливайте только проверенные приложения из официальных источников.
- Обязательно используйте надежный пароль и храните данные входа в тайне.

- Блокируйте доступ к телефону с помощью ПИН-кода и/или биометрических данных (например, отпечатка пальца, лица), а также установите автоматическую блокировку телефона через несколько минут бездействия.
 - Убедитесь, что установленные приложения имеют только необходимые разрешения.
 - Старайтесь избегать сопряжения ваших слуховых аппаратов с использованием Bluetooth в публичных местах. Это может создать риск нежелательного вмешательства со стороны третьих лиц. Мы рекомендуем выполнять сопряжение с использованием Bluetooth дома.
 - НЕ используйте телефон со снятой защитой или с административным доступом.
- Всегда обеспечивайте защиту данных. Имейте в виду, что данный перечень рекомендаций не является исчерпывающим.
- При передаче данных по небезопасным каналам выполняйте обезличивание или шифрование данных.
 - Защищайте резервные копии данных смартфона не только от потери данных, но и от кражи.
 - Удаляйте все данные со смартфона, который вы больше не используете или который будет утилизирован.

Важная информация о безопасности

Перед использованием приложения прочитайте соответствующую информацию о безопасности, приведенную на следующих страницах.

Сопровождение программного обеспечения

Мы постоянно отслеживаем обратную связь от пользователей. Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании последней версии приложения, свяжитесь с местным представителем производителя и/или оставьте отзыв в Appstore или Google Play Store.

Показания

Следует иметь в виду, что показания относятся не к мобильному приложению, а к совместимым слуховым аппаратам. Общими клиническими показаниями к использованию слуховых аппаратов и «Баланса тиннитуса» являются следующие факторы

- Тугоухость
 - односторонняя или двухсторонняя;
 - кондуктивная, нейросенсорная или смешанная;
 - от легкой до тяжелой степеней.
- Хронический тиннитус (только для слуховых аппаратов с функцией «Баланс тиннитуса»).

Противопоказания

Следует иметь в виду, что противопоказания относятся не к мобильному приложению, а к совместимым слуховым аппаратам. Общими клиническими противопоказаниями к использованию слуховых аппаратов и «Баланса тиннитуса» являются

- тугоухость, не вмещающаяся в диапазон подбора слухового аппарата (т. е. в его амплитудно-частотную характеристику);
- острый тиннитус;

- деформация уха (например, закрытый слуховой проход, отсутствие ушной раковины);
- невральная тугоухость (ретрокохлеарные патологии, такие как отсутствие/нефункционирование слухового нерва).

Основными критериями для направления пациента к врачу или другому специалисту за консультацией и/или назначением лечения являются:

- заметная врожденная или травматическая деформация уха; активные выделения из уха в предыдущие 90 дней;
- внезапное или быстро прогрессирующее ухудшение слуха на одно или оба уха в течение предыдущих 90 дней;
- острое или хроническое головокружение;
- определенное с помощью аудиометрии значение костно-воздушного интервала, равное или превышающее 15 дБ на частотах 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц;
- визуально заметные признаки значительного скопления серы или наличия инородного тела в слуховом проходе;
- боль или дискомфорт в ухе;
- внешний вид барабанной перепонки и слухового прохода, отличный от нормального, например:
 - воспаление наружного слухового прохода;
 - перфорация барабанной перепонки;
 - другие отклонения, которые, по мнению специалиста-сурдолога, являются тревожными сигналами с медицинской точки зрения.

Специалист-сурдолог может решить, что направление на дополнительную консультацию нецелесообразно или неоптимально для пациента в следующих случаях:

- при наличии достаточных доказательств того, что врач полностью обследовал пациента в отношении этой проблемы, а также были предоставлены все возможные виды лечения;
- состояние не ухудшилось или существенно не изменилось с момента предыдущего обследования и/или лечения;
- если пациент принял осознанное и информированное решение о том, что он не будет следовать рекомендации обратиться за медицинским заключением, можно перейти к рекомендации соответствующих систем слуховых аппаратов с учетом следующих факторов:
 - рекомендация не окажет неблагоприятного воздействия на здоровье или общее состояние пациента;
 - были учтены все необходимые факторы наиболее оптимального решения для пациента, о чем свидетельствуют соответствующие записи, пациент подписал отказ от ответственности, чтобы подтвердить, что он не будет следовать рекомендации обратиться к врачу и это решение является осознанным, если такой отказ требуется по закону.

Важная информация о безопасности

Перед использованием приложения прочитайте соответствующую информацию о безопасности, приведенную на следующих страницах.

Ограничения по использованию

Использование приложения ограничено возможностями совместимого устройства/устройств.

Побочные эффекты

Следует иметь в виду, что побочные эффекты относятся не к мобильному приложению, а к совместимым слуховым аппаратам. Уменьшить или устранить проявления физиологических побочных эффектов от использования слуховых аппаратов, таких как тиннитус, головокружение, скопление серы, слишком сильное давление, потоотделение или влажность, волдыри, зуд и/или сыпь, закупорка или заложенность, и их последствия, такие как головная боль и/или боль в ушах, может ваш специалист-сурдолог. При использовании стандартных слуховых аппаратов пациенты могут подвергаться звуковому воздействию более высокого уровня, что может привести к сдвигу пороговых значений в частотном диапазоне, подверженном акустической травме.

Польза

Данное приложение приносит пользу целевой группе пользователей, предоставляя возможность настройки в диапазоне, установленном при первичном подборе слухового аппарата.

Приложение предоставляет целевой группе пользователей удобный способ связи со специалистом-сурдологом для осуществления дистанционной настройки слуховых аппаратов. Описать совместимые слуховые аппараты, обозначить платформу, в отношении конструктивного решения: перечислить все конструктивные решения.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с приложением, необходимо сообщать представителю производителя и в компетентные органы страны проживания. Серьезным считается инцидент, который прямо или косвенно привел, мог либо может привести к любому из следующих событий:

- а. смерть пациента, пользователя или другого лица;
- б. временное или постоянное серьезное ухудшение состояния здоровья пациента, пользователя или другого лица;
- в. серьезная угроза общественному здоровью.

Важная информация о безопасности

Перед использованием приложения прочитайте соответствующую информацию о безопасности, приведенную на следующих страницах.



Вы отвечаете за использование личного смартфона. Пожалуйста, соблюдайте осторожность в обращении со смартфоном и при пользовании приложением.



Уменьшение усиления или увеличение шумоподавления может снизить слышимость предупреждающих или связанных с безопасностью сигналов. Это может привести к опасным ситуациям.



За бесплатным бумажным экземпляром инструкции по эксплуатации обращайтесь к региональному представителю компании Sonova. Экземпляр инструкции будет направлен вам в течение 7 дней.



Если слуховые аппараты не реагируют на устройство из-за необычных помех, отойдите от источника помех.



Если слуховые аппараты не реагируют, проверьте, включены ли они и не разряжен ли элемент питания.



Включите Bluetooth. Необходимо включить Bluetooth для подключения слуховых аппаратов.

Используемые символы



Этот символ указывает, что пользователю следует прочитать и принять во внимание соответствующую информацию в данном руководстве пользователя.




Этот символ указывает, что пользователю следует обратить внимание на соответствующие предупреждения в руководстве пользователя.



Важная информация по обращению с изделием и безопасности.




С помощью маркировки CE Sonova AG подтверждает, что данное изделие Phonak отвечает требованиям Директивы по медицинским устройствам 93/42/ЕЕС. Маркировка CE присвоена в 2021 г. Номер после символа CE соответствует коду сертифицированных учреждений, проводивших консультации, предусмотренные вышеуказанной директивой.

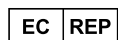

Обозначает уполномоченного представителя в Европейском сообществе. Представитель в ЕС также является импортером в Европейский союз.



Обозначает, что изделие является медицинским изделием.

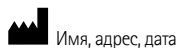

Комбинированный символ «Производитель медицинского изделия» и «Дата производства» согласно требованиям нормативного акта ЕС (ЕС) 2017/745.



Указание на наличие электронных инструкций по эксплуатации. Инструкции доступны на веб-сайте phonak.com/junior/userguide.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Швейцария



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Германия

V3.00/2023-06/NLG © 2021-2023 Sonova AG All rights reserved

Это руководство пользователя применимо к tuPhonak Junior 1.2 и более поздним версиям приложения tuPhonak Junior 1.

Для получения предыдущей версии руководства пользователя приложения обратитесь к местному представителю или посетите веб-сайт.

