

# Phonak Naída™ L.

## Informations sur le produit

Phonak Naída Lumity est un portefeuille de BTE complet pour les pertes auditives légères à profondes.

Bénéficiant de la technologie Phonak SmartSpeech™, les aides auditives Naída L représentent la solution idéale pour les patients qui ont besoin de solutions puissantes sur notre plateforme la plus avancée, Phonak Lumity.



# Description des produits



**Naída L-UP**  
Naída L-UP Trial  
L90/L70/L50



**Naída L-SP**  
Naída L-SP Trial  
L90/L70/L50




**Naída L-PR**  
Naída L-PR Trial  
L90/L70/L50

Taille de la pile		675	13	batterie rechargeable intégrée	
Bobine d'induction		•	•		
Compatibilité avec CROS L				•	
Bluetooth®		•	•	•	
Revêtement hydrophobe		•	•	•	
Indice de protection		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	
Dimensions	L x l x P	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 po)	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 po)	
	Poids	4,60 g / 0,162 oz	4,40 g / 0,155 oz	3,68 g / 0,130 oz	
Durées de charge <sup>2</sup>	0 % à 100 %			3 h	
	0 % à 80 %			1,5 h	
	30 min d'appareillage			10 min	

		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11 680	Tube fin 4.0
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	141	134	139	133	130	129
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	84	78	81	75	68	69
Bande passante (Hz)		< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 900	< 100 - > 5 700	< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100
Courant de fonctionnement (mA)		3,3	2,8	2,1	2,2		

## Plage d'application

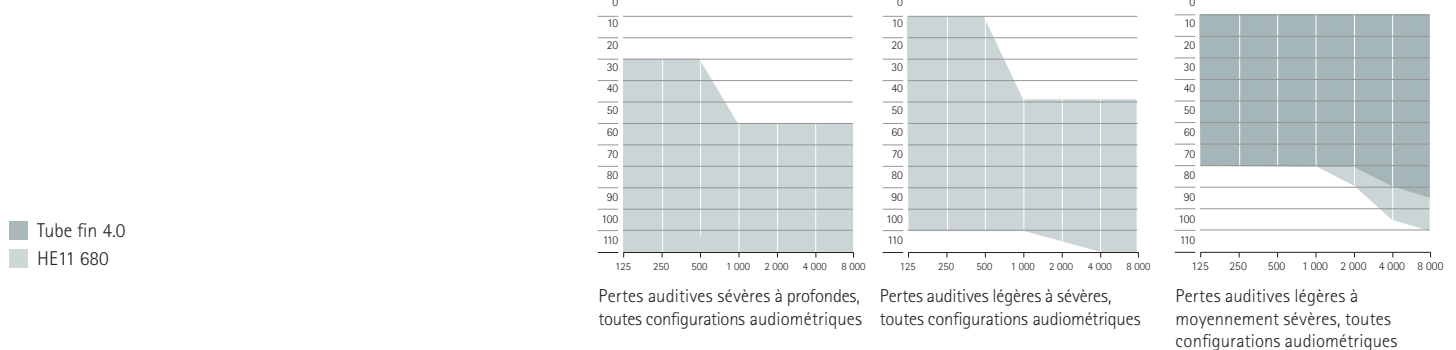

## Couleurs des boîtiers



**H0**  
Beige



**P1**  
Dune de Sable



**P3**  
Santal



**P4**  
Noisette



**P5**  
Champagne



**P6**  
Gris Argenté



**P7**  
Gris Carbone



**P8**  
Velours Noir

<sup>1</sup> IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

<sup>2</sup> La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excèdera pas 3 heures.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.

# Niveaux de performances

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
Parole dans le bruit intense	•		
Parole en voiture	•		
Situation réverbérante	•		
Musique	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Parole média + mic	•	•	•
Musique média + mic	•	•	•
AutoSense OS™ 5.0			
Programmes supplémentaires max.	4	4	4
Situation réverbérante	•		
Parole dans le bruit intense	•	•	
Parole à 360°	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•
Musique	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•
Téléphone via Capteur-T ± mic <sup>1</sup>	•	•	•
Boucle publique ± mic <sup>1</sup>	•	•	•
Programmes de diffusion			
RogerDirect™ + mic	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•

Fonctions	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
SpeechSensor	•		
Renforcement de la parole	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Suppression dynamique du bruit	•	•	
Directivité avec capteur de mouvements <sup>2</sup>	•	•	
RogerDirect™	•	•	•
EchoBloc	•		
Contrôle tactile <sup>2</sup>			
- Assistant Siri/Google	•	•	
- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•	
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Roger™ et paramètres directionnels	•	•	•
Booster large bande <sup>3</sup>	•	•	•
Fonctionnalités de santé <sup>2,4</sup>	•	•	•
WindBloc	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•
Tinnitus Balance <sup>5</sup>	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16

Technologie SmartSpeech

- 1 Indisponible pour Phonak Naída L-PR  
 2 Disponible pour Phonak Naída L-PR uniquement  
 3 Disponible pour Phonak Naída L-UP uniquement  
 4 Disponible avec myPhonak  
 5 Indisponible pour Phonak Naída L-UP

# Programmation

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
Phonak Target	9.0 ou supérieur	9.1 ou supérieur	9.0 ou supérieur
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHlink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

# Couplage acoustique

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
Signal acoustique de sortie	Coude	Amorti (HE11 680), transparent	•	•	•
	Coude	Non amorti (HE11), transparent	•	•	•
	Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)		•	•
Adaptation tube fin	Dôme	Dôme cap		•	•
		Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)		•	•
		Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)		•	•
		Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)		•	•
	SlimTip	Acrylique		•	•
Silicone			•	•	
Adaptation coude	Embout		•	•	•

## Phonak Naída L Trial

Les aides auditives Phonak Naída L Trial peuvent être configurées rapidement pour offrir le niveau de performances requis afin de répondre à votre recommandation. Cela vous permet de proposer à votre patient la meilleure solution auditive dès le premier rendez-vous, ou de fournir une aide auditive à titre de remplacement lorsque celle du patient est en réparation. Les appareils Naída L Trial comprennent également un récepteur Roger pré-installé pour faciliter la présentation et l'essai de tout microphone Roger.

# Options de charge de Phonak Naída L-PR

## Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR est dotée de toutes les fonctions Lumity que vous adorez, ainsi que de l'avantage d'être rechargeable. Les patients peuvent profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil\*.

\*Durée d'autonomie prévue de la batterie de 16 heures, dont 4 heures de diffusion BT classique et 4 heures de diffusion par TV Connector.



## Versions Bluetooth® pour Phonak Naída L

Diffusion sans fil des appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

## Gamme de communication sans fil

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
<b>Accessoires sans fil</b>			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
<b>Roger</b>			
Microphones Roger	•	•	•
<b>Application</b>			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Pour en savoir plus, consultez [www.phonak.com/naida-lumity](http://www.phonak.com/naida-lumity)

Pour en savoir plus sur les microphones Roger, consultez [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

Pour en savoir plus sur myPhonak et myPhonak Junior, consultez [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# life is on\*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. \*la vie s'exprime

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0699-04/V3.02/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés 7 16 1 3 3 8 9 17 0 2 1 7 0 1

