

Phonak Slim™

Informacje o produkcie

Phonak Slim rozszerza ofertę aparatów RIC Lumity o stylowe rozwiązanie dla osób z ubytkami słuchu od lekkich i ciężkich. Phonak Slim jest kompatybilny z czterema zewnętrznymi słuchawkami, w tym ze słuchawką ActiveVent™.

Dzięki innowacyjnej technologii platformy Phonak Lumity urządzenia Phonak Slim są rozwiązaniem dla tych, którzy preferują eleganckie i unikalne aparaty słuchowe.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Opis produktu



Aparaty słuchowe: Slim L-R

L90/L70/L50*/L30*/Trial

Przycisk wielofunkcyjny		•
Cewka indukcyjna (T-cewka)		
Bluetooth®		•
Powłoka hydrofobowa		•
Stopień ochrony IP		IP68 ¹
Czasy ładowania ²	Od 0% do 100%	3 godziny
	30 min. dopasowania	15 min

Słuchawka S

Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	sprzęgacz 2 cm ³	111
Maks. wzmocnienie (dB)	sprzęgacz 2 cm ³	47
Pasma przenoszenia (Hz)		<100 - >8000

Słuchawka M

Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	sprzęgacz 2 cm ³	114
Maks. wzmocnienie (dB)	sprzęgacz 2 cm ³	51
Pasma przenoszenia (Hz)		<100 - >8000

Słuchawka MAV

Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	sprzęgacz 2 cm ³	119
Maks. wzmocnienie (dB)	sprzęgacz 2 cm ³	50
Pasma przenoszenia (Hz)		<100 - >8000

Słuchawka P

Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	sprzęgacz 2 cm ³	122
Maks. wzmocnienie (dB)	sprzęgacz 2 cm ³	59
Pasma przenoszenia (Hz)		<100 - 6300

* dostęp w zależności od kraju

Kolory obudowy



2A

Srebrny/Czarny



3A

Grafitowy/Czarny



4A

Miedziany/Czarny



6A

Drzewo
sandałowe/Czarny

¹ IP68 oznacza, że aparat słuchowy jest wodo- i pyłoodporny. Przeszedł testy na zanurzenie w słodkiej wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.

² Rzeczywisty czas ładowania zależy od stopnia naładowania akumulatora, ale nie przekroczy 3 godzin.

Poziomy możliwości

	Klasa pierwsza	Klasa biznes	Klasa ekonomiczna*	Klasa podstawowy*
AutoSense OS™ 5.0				
Komfort w pogłosie	•			
Mowa w samochodzie	•			
Mowa w dużym hałasie	•			
Muzyka	•	•		
Komfort w hałasie	•	•	•	
Mowa w hałasie	•	•	•	•
Spokojne sytuacje	•	•	•	•
Media-mowa + mik	•	•	•	•
Media-muzyka + mik	•	•	•	•
Programy dodatkowe				
Maks. liczba dodatkowych prog.	4	4	4	4
Komfort w pogłosie	•			
Mowa w dużym hałasie	•	•		
Mowa z 360°	•	•		
Mowa w hałasie	•	•	•	•
Spokojne sytuacje	•	•	•	•
Komfort w hałasie	•	•	•	•
Muzyka	•	•	•	•
Telefon akustyczny	•	•	•	•
Program indywidualny	•	•	•	•
Programy strumieniowe				
RogerDirect + mik	•	•	•	•
PartnerMic + mik	•	•	•	•
Rozmowa telefoniczna + mik	•	•	•	•

	Klasa pierwsza	Klasa biznes	Klasa ekonomiczna*	Klasa podstawowy*
Funkcje				
SpeechSensor	•			
Udoskonalenie Mowy	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamiczna Redukcja Szumu	•	•		
Słyszenie z Czujnikiem Ruchu	•	•	•	
Słuchawka ActiveVent	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger i ustawienia kierunkowe – przesyłanie strumieniowe	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Kontrola Tapnięciem				
- Siri / Asystent Google	•	•		
- Wstrzymanie/wznowienie przesyłania strumieniowego	•	•		
- Odbiór/zakończenie połączenia telefonicznego	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Funkcje dot. zdrowia	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Dopasowanie do Preferencji Użytkownika	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto aklimatyzacja	•	•	•	•
Balans środowiskowy	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanał dokładnego strojenia	20	20	16	12

* dostępna w wybranych krajach


Dopasowanie

	Aparaty słuchowe: Slim L-R
Phonak Target	Wersja 8.1 lub nowsza
Noahlink Wireless	•


Połączenia akustyczne

	Słuchawka S	Słuchawka M	Słuchawka MAV	Słuchawka P
Długość				
Dostępne w czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3), lewa/prawa	•	•	•	•
Nakładka				
Nakładka typu kapturek	•	•		•
Nakładka otwarta Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•
Nakładka wentylowana Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•
Nakładka typu Power Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•
SlimTip*				
Akrylowy	•	•		•
Silikonowy	•	•		•
Tytanowy SlimTip AV			•	
Uniwersalny SlimTip AV Dostępny w czterech kształtach (A, B, C, D)			•	
Zakresy dopasowania				


* Dostępna z opcją dłuższego trzpienia

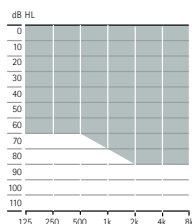


Ubytek słuchu od lekkiego do średnio ciężkiego.

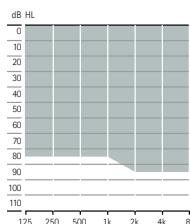

Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.

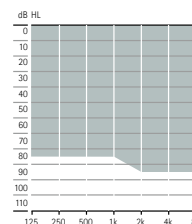

Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.

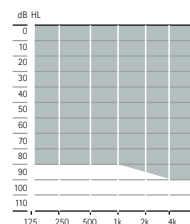

Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.

Unikalny. Elegancki. Połączony. Phonak Slim!

Phonak Slim został zaprojektowany z myślą o **stylu życia i komforcie** Twoich pacjentów. Dzięki naszej najnowocześniejszej technologii SmartSpeech™ Twój pacjent może doświadczyć **lepszego zrozumienia mowy** w trudnych sytuacjach¹ akustycznych.

Uniwersalna łączność rozwiązań marki Phonak umożliwia bezproblemowe połączenie Twoich pacjentów ze światem wokół nich. Aplikacja myPhonak umożliwia im kontrolę słyszenia, rejestrowanie danych dotyczących zdrowia i zdalne łączenie się z protetykiem słuchu, dzięki czemu mogą mieć swój gabinet protetyki słuchu w zasięgu ręki.

¹ Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. *Phonak Field Study News*, dane pozyskane ze strony www.phonak.com/evidence.

Latzel, M., & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, dane pozyskane ze strony www.phonak.com/evidence.

Thibodeau, L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. *Phonak Field Study News*, dane pozyskane ze strony www.phonak.com/evidence.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. *Phonak Field Study News*, dane pozyskane ze strony www.phonak.com/evidence.

Opcje ładowania do aparatów słuchowych Phonak Slim



Ładowarka do aparatu słuchowego Phonak Slim Charger

Phonak Slim Charger to kompaktowa ładowarka z magnesami w gniazdach ładowania, które ułatwiają wkładanie i wyjmowanie aparatów Phonak Slim. Wyposażona w port ładowania USB-C i kompaktową konstrukcję, ładowarka Phonak Slim Charger oferuje poręczne rozwiązanie do przechowywania i ładowania.

Wersje Bluetooth® w aparatach słuchowych Phonak Slim

Bezpośrednie połączenia / strumieniowa transmisja dźwięku

Telefony z technologią bezprzewodową Bluetooth® 4.2 oraz większość telefonów ze starszymi wersjami technologii Bluetooth

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Portfolio urządzeń do komunikacji bezprzewodowej

Aparaty słuchowe: Slim L-R L90/L70/L50*/L30*/Trial

Aksesoria bezprzewodowe	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Pilot do aparatów słuchowych Phonak RemoteControl	•
Roger	RogerDirect™	•
Aplikacje	myPhonak	•

* dostępny w wybranych krajach

Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/slim

Więcej informacji na temat mikrofonów Roger znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/roger

Więcej informacji na temat e-rozwiązań można znaleźć na stronie www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Od 1947 roku Phonak angażuje się w ochronę jakości życia poprzez otwieranie nowych możliwości akustycznych. Od początku działalności, kierowaliśmy się głębokim przekonaniem, że dobre słyszenie jest równoznaczne z dobrym samopoczuciem i dlatego ma ono zasadnicze znaczenie dla doświadczania życia w pełni. W istocie zmysł słuchu jest bezpośrednio powiązany z samopoczuciem emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym. Nieustannie dziś, jak i w przyszłości, zamierzamy dążyć do jak najszerzej oferty innowacyjnych rozwiązań słuchowych. Wraz z naszymi protetykami słuchu nieustannie skupiamy się na tym, co najważniejsze: poprawie rozumienia mowy, ulepszaniu życia ludzi i wywieraniu pozytywnego wpływu na całe społeczeństwo.


www.phonak.com



027-0633-16\14\00\2023-02\nd © 2023 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o. Producent: Sonova AG.
Upoważniony przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH.

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria

