

Accessori wireless Phonak Marvel™

Informazioni sul prodotto



Phonak TV Connector è una soluzione plug&play facile da usare per gli apparecchi acustici Marvel. Dotato dell'esclusiva tecnologia AirStream™ Phonak, offre la massima qualità sonora durante lo streaming da qualunque televisore o impianto stereo. Inoltre, grazie alla connettività diretta ai telefoni iOS e Android, la Phonak Remote app di facile utilizzo permette agli utenti di sfruttare al meglio i loro apparecchi acustici Marvel.

TV Connector – Il dispositivo di streaming facile da usare per sentire la TV e la musica



Il **TV Connector** è l'interfaccia plug&play con il televisore e le altre sorgenti audio, che supporta la connettività diretta con gli apparecchi acustici Phonak Marvel. È stato progettato per semplificare la configurazione e l'utilizzo ed offrire una qualità sonora stereo eccellente grazie alla tecnologia AirStream™. Il TV Connector è in grado di trasmettere segnali audio fino a 15 metri di distanza, ad un numero illimitato di ascoltatori collegati nello stesso momento.


Panoramica delle funzionalità

- Trasmissione ad entrambi gli apparecchi acustici in stereo
- Tecnologia AirStream per una migliore qualità sonora, una bassissima latenza di trasmissione ed un metodo di connessione più facile
- "Un solo clic" per collegarsi a tutti gli apparecchi acustici della gamma senza dover far nulla sull'apparecchio
- Trasmissione simultanea ad un numero illimitato di utenti contemporaneamente
- Per maggiore discrezione, può essere montato dietro il televisore

Compatibilità

- Il TV Connector è compatibile con tutti gli apparecchi acustici wireless a connettività diretta.

Come si usa

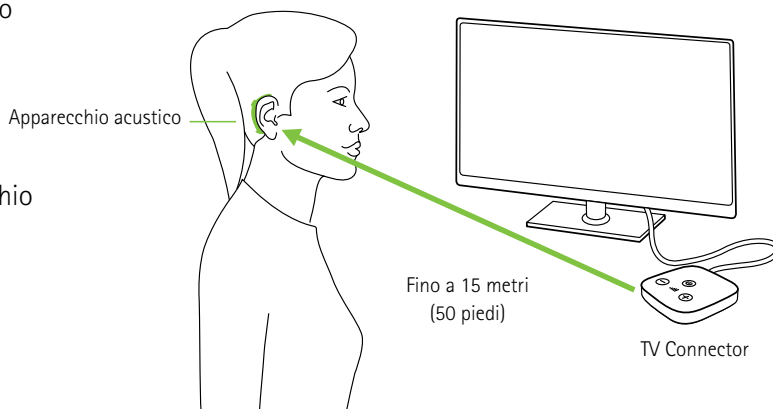

Per i video esplicativi sull'uso e sulla configurazione del TV Connector, visitare il sito www.phonakpro.com/tvconnector

Caratteristiche tecniche



- 1 Pulsante di connessione
- 2 Indicatore LED
- 3 Presa di alimentazione micro-USB
- 4 Presa audio per cavo ottico (Toslink) o cavo analogo per jack da 3,5 mm
- 5 Pulsante alimentazione
- 6 Pulsanti aumento e diminuzione volume

Involucro di piccole dimensioni (lunghezza: 63 mm x larghezza: 63 mm x altezza: 12 mm)

Phonak Remote – L'applicazione semplificata per telecomando




La **Phonak Remote app** è stata progettata per migliorare l'utilizzo e per una maggiore praticità nell'uso di un telecomando. È un modo facile di controllare le funzioni degli apparecchi acustici visualizzate sullo smartphone, senza la necessità di un dispositivo intermedio da indossare.


Panoramica delle funzionalità

- Regolazione del volume degli apparecchi acustici per entrambi i lati o per ogni lato singolarmente
- Elenco dei programmi disponibili con selezione diretta degli stessi
- Possibilità di personalizzare il nome dei programmi per apparecchi acustici disponibili nell'applicazione
- Selezione delle sorgenti audio disponibili collegate agli apparecchi acustici
- Facile regolazione della funzionalità di bilanciamento ambientale dell'apparecchio acustico durante una trasmissione da una sorgente audio
- Regolazione separata dell'intensità del generatore di rumore per la gestione dell'acufene, se disponibile sull'apparecchio acustico
- Verifica del tempo medio di utilizzo degli apparecchi acustici collegati sull'applicazione
- Stato di carica della batteria (apparecchi acustici ricaricabili)
- Configurazione di modalità automatica accesa se fuori dal caricatore (apparecchi acustici ricaricabili)


Per i video esplicativi sull'uso e sulla configurazione dell'applicazione Phonak Remote, visitare il sito www.phonakpro.com/remoteapp

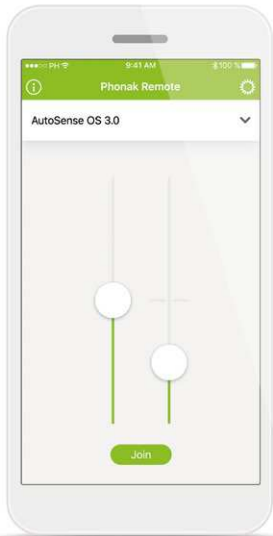


Regolazione del volume per ogni lato

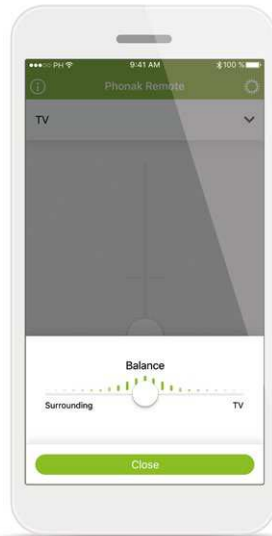

Bilanciamento ambientale dello streaming audio

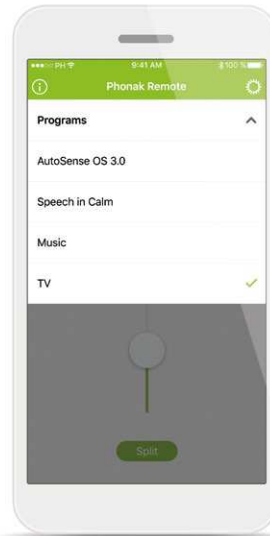

Selezione e personalizzazione dei programmi

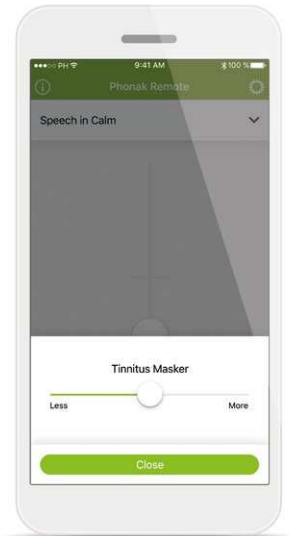

Intensità generatore di rumore per la gestione dell'acufene

Compatibilità

- L'applicazione Phonak Remote è compatibile con tutti gli apparecchi acustici Phonak con connettività Bluetooth®.
- La Phonak Remote può essere usata su telefoni con funzionalità Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) ed è compatibile con gli iPhone 5s e i più recenti modelli che utilizzano la versione iOS 10.2 o successive.
- La Phonak Remote può essere usata su dispositivi Android certificati Google Mobile Services (GMS) che supportino Bluetooth 4.2 e Android OS 6.0 e versioni successive.

Apple, il logo Apple, iPhone e iOS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

L'identità grafica ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per vivere la vita al meglio. Da oltre 70 anni ci dedichiamo a questa missione sviluppando soluzioni uditive all'avanguardia che cambiano la vita delle persone, permettendo loro di esprimere il proprio potenziale emotivo e sociale. Life is on.

www.phonak.it