


Inaugurazione del nuovo capitolo di Paradise



Ricevitore Phonak ActiveVent™
Nulla è come il suono di Paradise

Benvenuti al
nuovo capitolo di
Paradise

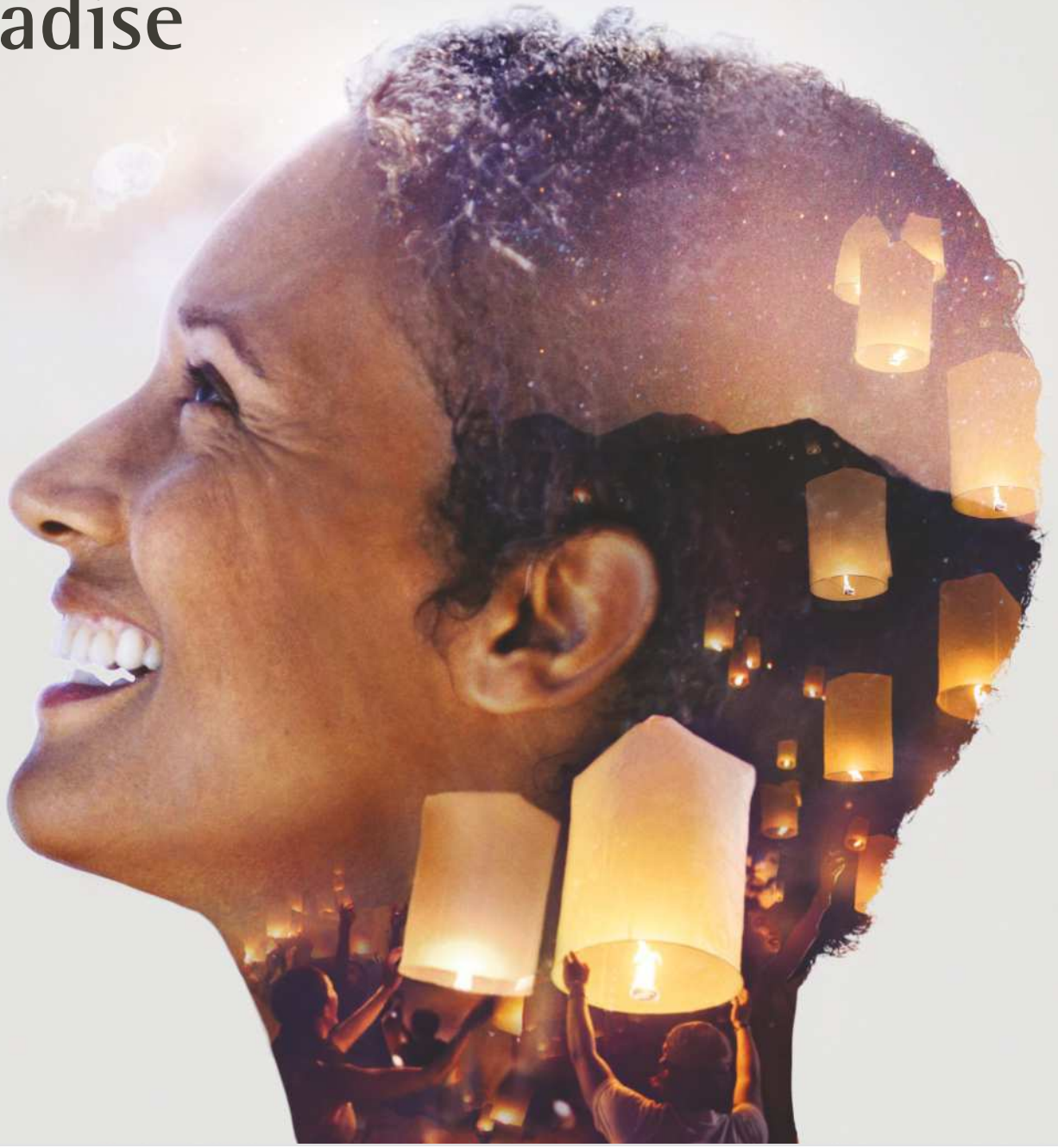

Socio-em



Físico

Con l'introduzione di Phonak Audéo™ Paradise, abbiamo sviluppato degli apparecchi acustici che offrono ai clienti un'esperienza acustica senza pari¹. Il primo capitolo è iniziato dodici mesi fa e da allora, sono stati apportati notevoli cambiamenti alla nostra vita quotidiana. Indossare le mascherine è ora considerato "assolutamente normale". Per alcuni utenti di apparecchi acustici, questo implica un ulteriore livello di difficoltà perché è ancora più complesso distinguere le parole che vengono pronunciate.

Gli apparecchi acustici Phonak Paradise con AutoSense OS™4.0 possono adattarsi facilmente a una molteplicità di situazioni di ascolto, permettendo ai clienti di muoversi in diversi ambienti. I clienti non devono regolare gli apparecchi acustici, pertanto viene eliminato un potenziale fattore di complessità. In questo modo è possibile ottenere un impatto diretto sul benessere degli utenti di apparecchi acustici. Consentendo a un maggior numero di clienti ipoacusici di comunicare più facilmente, è possibile che restino connessi socialmente e che crescano mentalmente ed emotivamente.

Phonak è orgogliosa di presentare il successivo capitolo di Paradise. Integrando il suono naturale e nitido Paradise offre un'esperienza uditiva impareggiabile¹ in ancora più situazioni.



Presentazione del ricevitore ActiveVent™

Il primo ricevitore intelligente al mondo per apparecchio acustico

Paradise è rinomato per la sua impareggiabile¹ qualità sonora⁴ con comprensione del parlato eccezionale^{3,4,5} e cancellazione del rumore personalizzata. Ora, inauguriamo un nuovo capitolo con l'introduzione del ricevitore ActiveVent.


Il nuovissimo ricevitore ActiveVent™ è il primo ricevitore intelligente al mondo per apparecchi acustici, in grado di bilanciare in modo straordinario la chiarezza del parlato nel rumore e il comfort di ascolto² per rafforzare ulteriormente l'impareggiabile¹ qualità sonora⁴ di Phonak Paradise per i clienti con ipoacusie da lievi a medie.

Questa innovativa tecnologia del ricevitore è dotata di una ventilazione a commutazione meccanica che viene comandata da AutoSense OS 4.0. Combina in modo intelligente la performance uditiva di un apparecchio chiuso con il comfort di un apparecchio aperto² In questo modo si ottiene una soluzione uditiva senza compromessi per i clienti, che permette loro di apprezzare la consapevolezza di ciò che li circonda e la naturalezza della propria voce nonché di sperimentare una migliore intelligibilità del parlato nel rumore⁶.




Come funziona il ricevitore ActiveVent?

ActiveVent è un ricevitore che include una ventilazione incorporata in combinazione con un microdisco che viene spostato tra due posizioni: aperto e chiuso. Tutto questo è controllato in modo intelligente da AutoSense OS 4.0. Uno scatto rassicurante segnala al cliente che il microdisco ha cambiato posizione.

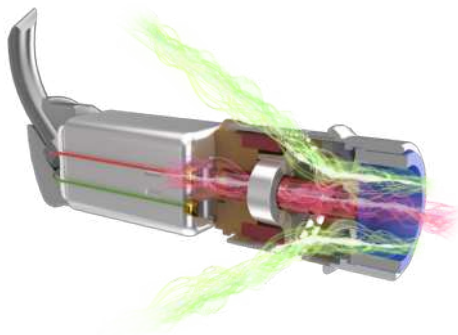

Quando il microdisco è in posizione aperta, il suono diretto è in grado di passare attraverso la ventilazione integrata del ricevitore e fornisce quindi il comfort di un fitting aperto, la naturalezza della propria voce e la consapevolezza dei suoni ambientali².

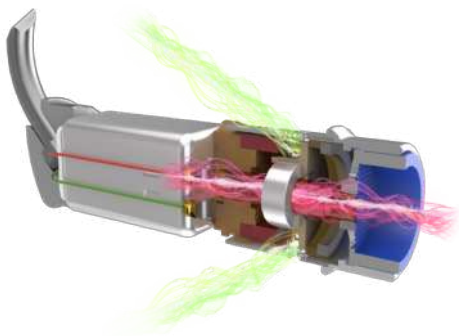

In situazioni di ascolto impegnative con parlato con rumore di fondo elevato, o durante lo streaming multimediale, il microdisco si sposta in posizione chiusa, bloccando il suono ambientale che entra direttamente nell'orecchio, aumentando così l'attenzione sul discorso frontale o sui contenuti in streaming.

Opzioni di accoppiamento acustico ActiveVent

1. Universal SlimTip AV

È possibile presentare facilmente il ricevitore ActiveVent ai clienti grazie alla nuova Universal SlimTip AV. Le Universal SlimTip sono state progettate sulla base di dati raccolti da migliaia di scansioni dell'orecchio che hanno permesso agli sviluppatori di realizzare quattro modelli in grado di fornire un alto tasso di adattamento. Le Universal SlimTip sono una soluzione temporanea ideale per le demo e le prove in attesa che il cliente riceva le SlimTip Titanium AV personalizzate.

2. SlimTip Titanium AV personalizzata

Per ottenere una performance acustica ottimale, il ricevitore ActiveVent è stato progettato per un uso a lungo termine con SlimTip Titanium e dotato di un guscio completamente personalizzato in un materiale durevole e confortevole.

Aspetti principali

- Chiarezza del parlato bilanciata in modo intelligente nel rumore e comfort di ascolto²
- Offre qualità sonora superiore nello streaming multimediale^{6,7}
- Tutto questo è controllato in modo intelligente da AutoSense OS 4.0.
- Compatibile con tutti gli apparecchi acustici ricaricabili Audéo Paradise⁸

Considerazioni sul fitting di ActiveVent

- Per una performance ottimale i ricevitori dovrebbero essere sostituiti ogni sei mesi. Questo viene eseguito facilmente in studio
- I candidati ideali sono quelli con cerume minimo e una buona mobilità delle mani
- È necessario pulirlo e cambiare il filtro anticerume regolarmente
- Non è indicato per coloro che soffrono di gravi acufeni e iperacusia



ActiveVent Performance + vantaggi per i clienti

Il ricevitore ActiveVent è compatibile con tutti gli apparecchi acustici ricaricabili Audéo Paradise, e offre vari tipi di benefici a seconda del livello di performance dell'apparecchio acustico. ActiveVent Performance + rappresenta l'insieme dei vantaggi che i clienti possono aspettarsi di ottenere dal ricevitore ActiveVent negli apparecchi acustici.


Chiarezza del parlato bilanciata in modo intelligente nel rumore e comfort di ascolto²

I ricevitori ActiveVent sono ideali per i clienti che conducono uno stile di vita attivo e trascorrono tempo in ambienti rumorosi come ristoranti, ritrovi sociali o luoghi pubblici caratterizzati da molto rumore esterno. Questo tipo di luoghi può rendere ancora più difficile l'ascolto. Grazie ai ricevitori ActiveVent, non appena il livello di rumore aumenta, AutoSense OS 4.0 chiude automaticamente la ventilazione consentendo all'utente dell'apparecchio acustico di beneficiare delle performance ottimizzate di un fitting chiuso (disponibile nel livello di performance Premium). Quando il livello di rumore scende, la ventilazione si apre in modo che i clienti possano godere del comfort di una protesi aperta. Inoltre, gli utenti dei ricevitori ActiveVent possono accedere ai programmi manuali con ventilazione chiusa. (Disponibile nei livelli di performance Premium, Avanzata, Standard).

Qualità sonora superiore nello streaming multimediale^{6,7}

I clienti ora possono anche godere di una qualità sonora superiore in caso di streaming multimediale grazie alla ventilazione chiusa. L'elemento veramente particolare di questi ricevitori consiste nel fatto che se il cliente desidera passare dallo streaming alla conversazione, un semplice doppio tocco mette in pausa il contenuto dello streaming e il ricevitore ActiveVent si apre per consentire una transizione senza sforzo (disponibile in tutti i livelli di performance).

Vantaggi

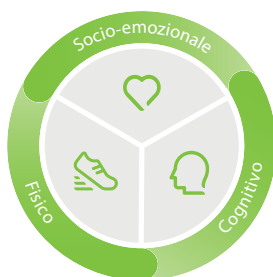

- Il ricevitore ActiveVent fornisce in media il 10% in più di comprensione del parlato nel rumore garantendo un suono naturale in varie situazioni d'ascolto⁶
- La Universal SlimTip semplifica la prova e la dimostrazione istantanea del ricevitore ActiveVent
- Il ricevitore ActiveVent permette ai clienti di rimanere connessi sia nel rumore sia nella quiete, assicurando loro di poter socializzare con la famiglia e gli amici e di mantenere connessioni straordinarie



Nulla è come il suono di Paradise

Con l'introduzione di Paradise, Phonak ha rafforzato la sua posizione in qualità di uno dei leader del settore di eccellenza audiologica. Sulla base di un hardware di punta sul mercato, Paradise ora incorpora ancora più funzioni per consentire ai clienti di riscoprire la meraviglia del suono in un numero ancora maggiore di situazioni, migliorando il loro benessere generale. Grazie alle comprovate performance del chip PRISM™, queste funzioni si integrano perfettamente per offrire un'esperienza uditiva senza pari¹.

Qualità del suono senza precedenti

- **Nuovo ricevitore ActiveVent**
 - Nuova ActiveVent Performance +
- **Sensore dinamico**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Ottimizzazione del Parlato
 - Cancellazione Dinamica del Rumore
 - Sensore Uditivo Dinamico



Affidabile tecnologia ricaricabile



Soluzioni digitali su misura

- **Aggiornamento myPhonak app**
 - Sensibilità personalizzata del Tap Control - Controllo a tocco
 - AudiogramDirect (tramite Supporto Remoto)
 - Telecomando
- **Nuovo Target 7.1.9**

Connettività universale

- Connessione a smartphone, TV e molto altro
- RogerDirect™
- Made for all
- Connessioni Bluetooth® multiple
- Tap Control - Controllo a tocco per un facile accesso alle funzioni Bluetooth



life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "Life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale.

www.phonakpro.it

