

Phonak Sky™ L.

Produktinformasjon

Phonak Sky Lumity er en omfattende portefølje av BTE-høreapparater for barn med lett til svært stort hørselstap.

Sky L-høreapparater har Phonak SmartSpeech™ Technology og er valget for barn som ønsker å oppleve taleoppfattelse på vår mest avanserte plattform, Phonak Lumity.



Produktbeskrivelse



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30


Batteristørrelse		innebygd, oppladbart		675
LED-mønstre for barn		•		•
Telespole				•
Kompatibilitet med CROS L		•		
Bluetooth® ¹		•		•
Vannavstøtende belegg		•		•
IP-rangering		IP68 ²		IP68 ²
Mål	L x B x D	36,7 x 16,4 x 8,5 mm		42,6 x 18,8 x 8,6 mm
	Vekt	3,68 g		4,60 g
Ladetider ³	0 til 100 %	3 t		
	0 til 80 %	1,5 t		
	30 min tilpasning	10 min		
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 HE11 680
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	130	129	141 134
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	68	69	84 78
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4700 <100 - >4700
Strømforbruk (mA)				3,3 2,8

Tilpasningsområder

- DSL-tilpasningsområde for barn
- APD/NAL-tilpasningsområde

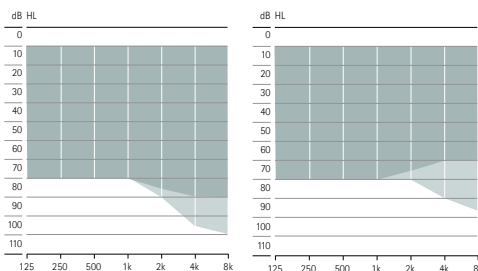

Lett til moderat til stort hørselstap,
alle audiometriske konfigurasjoner

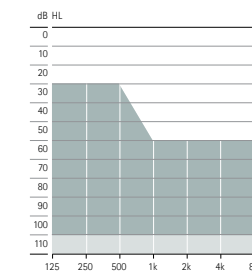

Stort til svært stort hørselstap,
alle audiometriske konfigurasjoner

¹ Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

² IP68 indikerer at høreapparatet er vann- og støvavstøtende. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

³ Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid og kan påvirkes av temperaturforholdene.

Funksjonsnivåer

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Tale i høy støy	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Musikk	•	•		
Komfort i støy	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Media tale + mikrofon	•	•	•	•
Media musikk + mikrofon	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i høy støy	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Offentlig telespole ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™+ mikrofon	•	•	•	•
Telefonsamtale + mikrofon	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Funksjoner				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri / Google-assistent	•	•		
- Sett streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•		
- Ta imot / avslutte telefonanrop	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ and Directional-innstilling	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Bredbånd-booster ¹	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
SoundRecover ²	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Fininnstilling av kanaler	20	20	16	12

SmartSpeech-teknologi

¹ Kun tilgjengelig for Phonak Sky L-UP

² Kun tilgjengelig for Phonak Sky L-PR

Tilpasning

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 eller nyere	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Akustisk sammenkobling

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30	
Lyduttak	Standard ørehenger	Dempet (HE11 680), transparent og 6 ekstra farger for barn	•	•	
		Ikke dempet (HE 11), kun i transparent farge		•	
	Ørehenger med barnesikring (mini)	Dempet (HE11 680), transparent og 6 ekstra farger for barn	•	•	
		Ikke dempet (HE 11), kun i transparent farge		•	
	SlimTube 4.0	Leveres for venstre og høyre og i fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)	•		
Ørepropp for SlimTube	Dome	Cap dome	•		
		Åpen dome	Leveres i tre størrelser (S, M, L)	•	
		Ventilert dome	Leveres i tre størrelser (S, M, L)	•	
		Power-dome	Leveres i tre størrelser (S, M, L)	•	
		SlimTip	Akryl	•	
		Silikon	•		
Ørepropp for ørehenger	Ørepropp		•	•	

Kasse- og ørehengerfarger

Kasse



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Ørehenger



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



Q7
Purple



13
Transparent

Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial-høreapparatene kan raskt settes til ønsket funksjonsnivå for å passe til din anbefaling. Dette gir deg muligheten til å utstyre brukeren med den optimale hørselsløsningen allerede ved første avtale, eller å tilby en erstatning mens brukersens høreapparat blir reparert. Sky L Trial-høreapparatene har også forhåndsinstallert Roger-mottaker, som gjør det enkelt å demonstrere og prøve en hvilken som helst Roger-mikrofon.

Phonak Sky L-PR-lademuligheter

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR har alle Lumity-funksjonene du liker, samt fordelene med oppladbarhet. Brukere kan få en hel dag med hørsel inkludert streaming*.

* Forventet batterilevetid på 16 timer, inkludert 10 timer med Roger eller streaming av lyd.



Phonak Sky L Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger-mikrofoner	•	•
App		
Roger-mikrofoner	•	•

Du finner mer informasjon på www.phonak.com/sky-lumity

Du finner informasjon om Roger-mikrofoner på www.phonak.com/roger-for-education

Du finner mer informasjon om myPhonak Junior på www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. Siden 1947 har vi jobbet for å skape en verden hvor «life is on» for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for mennesker i alle aldre og for alle grader av hørselstap, slik at alle kan bygge sosiale relasjoner, trives mentalt og oppleve velvære.

phonak.no



027-0697-10V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved