

Phonak Sky™ Marvel



Kjærlighet ved første lyd

Få mer informasjon på www.phonakpro.com

Sky Marvel har avansert teknologi for optimal lydteknologi og sikrer komfort, sikkerhet og robusthet i alle aspekter av et barns liv.

Med den nye Sky Marvel-porteføljen introduserer vi en unik kombinasjon av verdens første teknologiske innovasjoner og viktige funksjoner spesifikt for barn. Vi jobber for å gi barn kun de beste løsningene for tale- og språkutvikling, taleforståelse og brukervennlighet. Sky Marvel er utviklet for å maksimere både mengden og kvaliteten på lydinnangssignaler og støtter et barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling med kjærighet fra første lyd.

Klar og fyldig lyd

Verdens første operativsystem utviklet spesielt for barn

AutoSense Sky OS 3.0 er utviklet for å gjenkjenne de utfordrende lyttesituasjonene som barn opplever hver dag og gi den riktige kombinasjonen av adaptiv støystyring for bedre komfort og redusert tretthet.¹ Med Sky Marvel introduserer vi AutoSense Sky OS 3.0, som nå også klassifiserer streamede lydsignaler. Takket være dette kan barn få klar og fyldig lyd når de streamer tale, og optimalisert lyd kvalitet når de streamer musikk.

Kan kobles til smarttelefoner, Roger™-mikrofoner og mer

Direktestreaming fra både iOS® og Android™

Til forskjell fra alle andre høreapparater for barn, kan Sky Marvel kobles direkte til så godt som alle smarttelefoner og Bluetooth®-aktiverte enheter. Det støtter doble sammenkoblinger og streamer lyd til begge ørene. I en verden der moderne enheter er en sentral del av et barns sosiale liv og utdanning, gir Sky Marvel intuitiv tilgang til og stereolydkvalitet for tale, apper, musikk, e-bøker og mye mer.




Produktbeskrivelse



Sky M-M
M90

Batteri	312
Flerfunksjonsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth®	•
Nano-belegg	•
IP-rangering	IP68
Mål (L x B x D)	mm 31,3 x 14,1 x 7,3
	inch 1,23 x 0,56 x 0,29"
Vekt	g/oz 2,18 / 0,077
Ladetid	0 % til 100 % 0 % til 80 % 30 min tilpasning
Maks. utgangseffekt (2 cc coupler)	SlimTube 4.0 HE11 680
	dB SPL 122 128
	dB 58 63
Frekvensområde	Hz <100–6500 <100–8000
Strømforbruk	mA 1,5 1,6

Tilpasningsområder

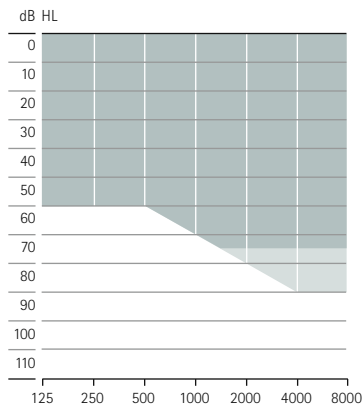


Lett til moderat til stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



Sky M-PR*
M90

Batteri	innebygd oppladbart
Flerfunksjonsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth®	•
Nano-belegg	•
IP-rangering	IP68
Mål (L x B x D)	mm 36,7 x 16,4 x 8,5
	inch 1,44 x 0,65 x 0,33"
Vekt	g/oz 3,71 / 0,131
Ladetid	3 t 1,5 t 10 min
Maks. utgangseffekt (2 cc coupler)	SlimTube 4.0 HE11 680
	dB SPL 127 130
	dB 60 66
Frekvensområde	Hz <100–7000 <100–6800
Strømforbruk	mA 2,1 2,0

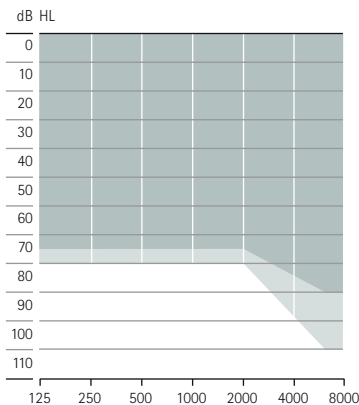


Lett til stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



Sky M-SP
M90

Batteri	13
Flerfunksjonsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth®	•
Nano-belegg	•
IP-rangering	IP68
Mål (L x B x D)	mm 40 x 16,9 x 8,5
	inch 1,57 x 0,67 x 0,33"
Vekt	g/oz 4,4 / 0,155
Ladetid	0 % til 100 % 0 % til 80 % 30 min tilpasning
Maks. utgangseffekt (2 cc coupler)	HE11 HE11 680
	dB SPL 139 133
	dB 81 75
Frekvensområde	Hz <100–5000 <100–5000
Strømforbruk	mA 2,1 2,0

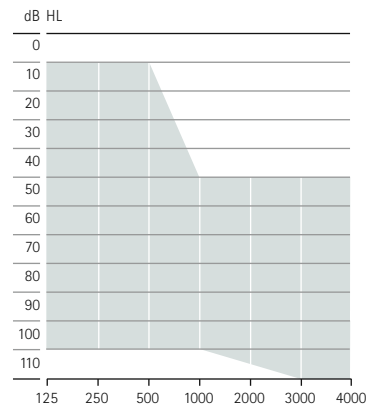

Lett til svært stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

* Sky M-PR er ikke på avtale med NAV, men kan søkes utenfor avtale ved særskilt behov.

Kasse- og hookfarger

Kasse



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3*
Sandalwood



P4*
Chestnut



P5*
Champagne



P6
Silver Gray



P8
Velvet Black



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink



T7
Alpine White



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple

Hook



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



Q6
Blue



I3
Transparent



Q7
Purple



R4
Orange

* Fargene P3, P4 og P5 er ikke tilgjengelig for funksjonsnivå M30.

Funksjonsnivåer

	Premium M90
AutoSense Sky OS 3.0	
Stille situasjon	•
Tale i støy	•
Komfort i støy	•
Musikk	•
Tale i høy støy ³	•
Tale i bil	•
Komfort i ekko	•
Medietale + mikrofon	•
Mediemusikk + mikrofon	•
Tilleggsprogrammer	
Maks. tilleggsprogrammer	3
Komfort i ekko	•
Tale i høy støy	•
Tale i 360°	•
Tale i støy	•
Stille situasjon	•
Komfort i støy	•
Musikk	•
Akustisk telefon	•
Tilpasset program	•
Streamingprogrammer	
RogerDirect + mikrofon	•
PartnerMic + mikrofon	•
Telefonsamtale + mikrofon	•

	Premium M90
Funksjoner	
UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Brukerbasert fininnstilling	•
Real Ear Sound	•
Fininnstillingskanaler	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustisk optimalisert ventilasjon	•
auto Acclimatization	•
Environmental balance	•
RogerDirect™	•
Roger og retningsmikrofon-innstilling	•

Tilpasning

	Sky M-M M90	Sky M-PR M90	Sky M-SP M90
Phonak Target	6.1 eller nyere	6.1 eller nyere	6.2 og nyere
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO og HI-PRO 2			•

Akustisk sammenkobling

Lydduttak	Standard hook	Dempet (HE 11 680) transparent og seks ekstra farger for barn (se side 4) for Sky M-M og Sky M-PR Ikke-dempet (HE 11) kun i transparent farge for Sky M-SP	
	Barnesikret hook	Mini dempet (HE 11 680) transparent og seks ekstra farger for barn (se side -4) for Sky M-M og Sky M-PR Mini ikke-dempet (HE 11) kun i transparent farge for Sky M-SP	
	SlimTube 4.0	Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)	
	Ørepropp for Slim Tube	Dome	Cap dome
Åpen dome			tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
Ventilert dome			tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
Power dome			tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
SlimTip™		Akryl	
		Silikon	
		Titanium	
Ørepropp for hook	Ørepropp		
	Universell ørepropp		

Phonak Charger BTE RIC

Denne laderen passer til alle oppladbare Marvel BTE- og RIC-høreapparater. Den har en plass for store ørepropper, en USB-C-ladeinngang og et indikatorlys.



Phonak Sky M Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler/lydavspilling

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikasjonsportefølje

		Sky M-M M90	Sky M-PR M90	Sky M-SP M90
Trådløst tilbehør	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Roger-mikrofoner	•	•	•

Ytterligere informasjon finner du på:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger



Streamer direkte fra Roger-mikrofoner

Med RogerDirect™ kan barn nå få tilgang til Roger-teknologi uten å koble til en ekstern mottaker. Roger-mottakere kan installeres trådløst i Sky Marvel-høreapparater, og mottakerkompatibilitet er derfor ikke det minste kompleks. Denne uslåelige kombinasjonen tilbys nå i den minste utgaven noensinne, og gir barn enklere tilgang til flere ord og flere samtaler.² Sky med Roger er nå opptil 42 % mindre og 32 % lettere enn forrige generasjon.*

Oppladbart

Sky M-PR kan fullades på bare 3 timer, og gir en hel dag med hørsel inkludert 10 timer Roger eller streaming av media.** Foreldre, omsorgspersoner, lærere og barn kan slappe helt av, vel vitende om at høreapparatet vil fungere hele dagen.

Designet spesifikt for barn

Mer robust

Med Sky Marvel har barn friheten til å utforske og leke, selv når livet er litt vått. Marvel høreapparater er bygget med robuste kasser som gjør dem vannavvisende og støvavvisende (IP68-klassifisering).***

Barnesikre funksjoner

Unge lyttere er sikret takket være den barnesikre hook og den nye barnesikre batteriskuffen – som trygt holder batteriene i høreapparatet og ute av små hender og munn. Med Sky M-PR kan ikke det innebygde, oppladbare litiumion-batteriet tas ut og svelges.

Nytt indikatorlys

Sky Marvel tilbyr et helt nytt indikatorlys som er intuitivt og diskret og som tydelig bekrefter statusen til høreapparatet.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, Vol. 61, 399-409.

* Sammenligning av Sky M-M og Sky B-P + Roger 18 (designintegrert mottaker)

** Faktisk ladetid er avhengig av gjenværende batteritid, men vil ikke overstige 3 timer.

*** IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett. I henhold til standarden IEC 60529, tålte det å ligge i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i støvkammer.

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi holdt oss til vår misjon om å utvikle banebrytende hørselsløsninger som endrer menneskers liv slik at de utvikler seg sosialt og emosjonelt. Life is on.

www.phonakpro.com