




Phonak Sky L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standard- och minislangfäste HE11


2 cm³ couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå

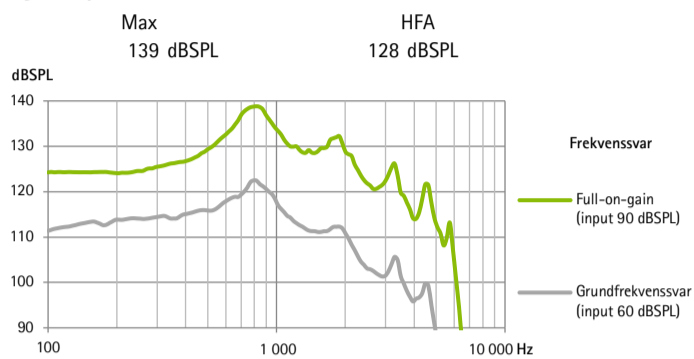


Akustisk förstärkning

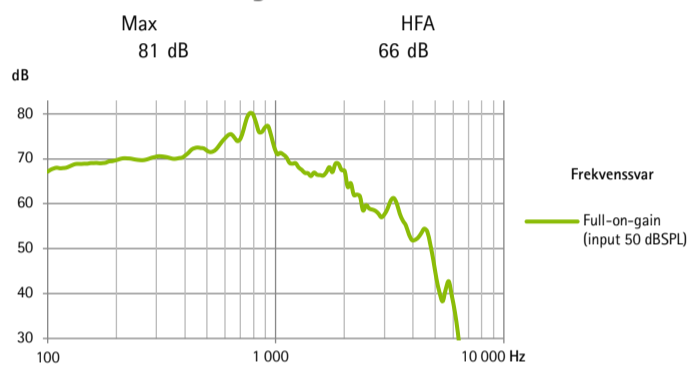

Frekvensområde	<100 Hz till >4 900 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Strömförbrukning	2,1 mA			
Föväntad drifttid*	143 tim			
Ekvivalent egenbrus	19 dB SPL			

Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dB SPL

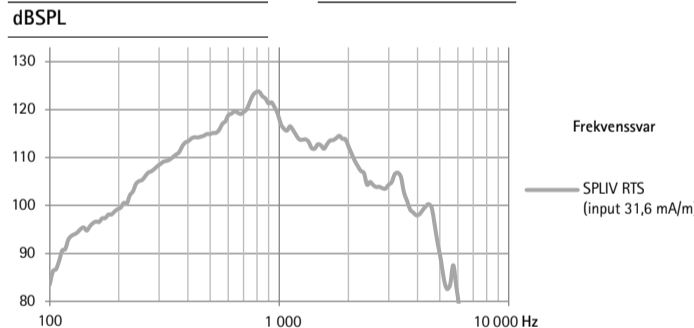


Standard- och minislangfäste HE11 680


2 cm³ couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå

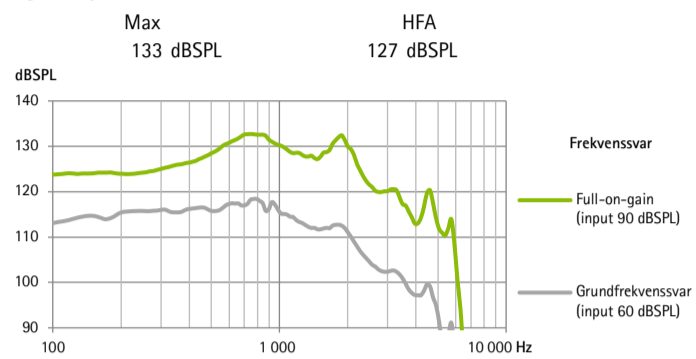


Akustisk förstärkning

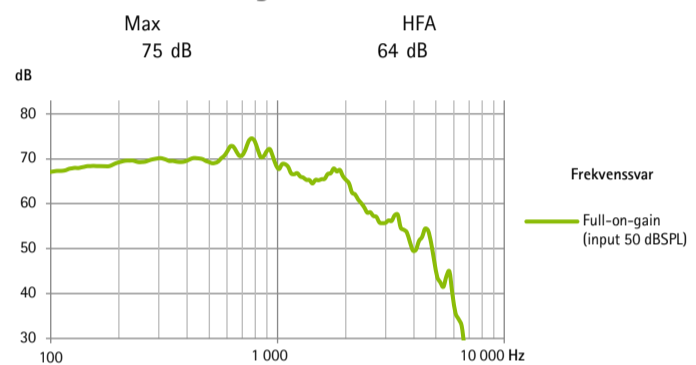

Frekvensområde	<100 Hz till >5 700 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Strömförbrukning	2,2 mA			
Föväntad drifttid*	136 tim			
Ekvivalent egenbrus	19 dB SPL			

Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dB SPL

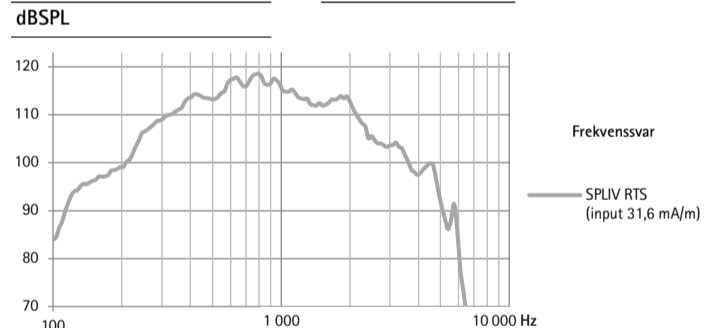

Allmän testinformation

- Matningsspänning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har uppmätts med mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard

Varningar

- ⚠ Denna hörapparat har en ljudtrycksnivå som kan överskrida 132 dB SPL. Särskild försiktighet bör iaktas vid anpassning av denna apparat, eftersom det finns en risk för att användarens återstående hörsel försämras.
- ⚠ Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren är ej tillåtna. Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.
- ⚠ Den SPL som utvecklas i barns öron kan vara markant högre än genomsnittet för vuxna. RECD uppmätt för att korrigera målet för audionomen OSPL90 rekommenderas.

* Batteriets prestanda beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder, ljudmiljö och öroninsats. Observera att drifttiden för icke-uppladdningsbara zink-/luftbatterier kan variera beroende på batterimodell



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on