

Phonak Sky™ L.

Produktinformation

Phonak Sky Lumity är vårt sortiment av bakom-örat apparater för barn med lätt till mycket grav hörselnedsättning.

Sky L innehåller Phonak SmartSpeech™ Technology och är det bästa valet för yngre användare på vår plattform Phonak Lumity.



Produktbeskrivning



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50


Batteristorlek		inbyggt uppladdningsbart		675	
LED-ljus		•		•	
Telespole		•		•	
Kompatibel med CROS L		•		•	
Bluetooth® ¹		•		•	
Hydrofobisk yta		•		•	
IP-klass		IP68 ²		IP68 ²	
Mått	L x B x D	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 tum)		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 tum)	
	Vikt	3,68 g		4,60 g	
Laddningstider ³	0 % till 100 %	3 timmar			
	0 % till 80 %	1,5 timmar			
	30 min. anpassning	10 min.			
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680
Max utnivå (dB SPL)	2cc coupler	130	129	141	134
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	68	69	84	78
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4700	<100 - >4700
Strömförbrukning (mA)				3,3	2,8

Anpassningsområden

■ DSL pediatrikt Anpassningsområde
■ APD/NAL Anpassningsområde

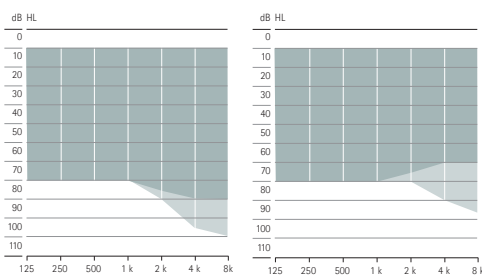

Lätt till måttligt grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

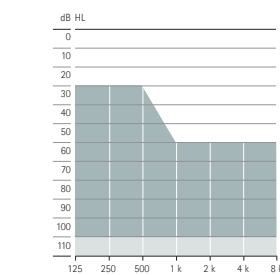

Grav till mycket grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

¹ Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

² IP68 anger att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

³ Faktisk laddningstid beror på kvarvarande batteritid och kan påverkas av temperaturförhållanden.

Funktionsnivåer

	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
AutoSense Sky OS 5.0			
Tal i starkt buller	•		
Tal i bil	•		
Komfort i eko	•		
Musik	•	•	
Komfort i buller	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugn situation	•	•	•
Mediatalk + mikrofon	•	•	•
Mediamusik + mikrofon	•	•	•
Övriga program			
Max. antal övriga program	4	4	4
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugn situation	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Telefon via t-spole ± mikrofon ¹	•	•	•
Offentlig t-spole ± mikrofon ¹	•	•	•
Streamingprogram			
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•
Phonak PartnerMic™+ mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

SmartSpeech Technology

	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
Funktioner			
SpeechSensor	•		
Speech Enhancer	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Dynamic Noise Cancellation	•	•	
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•
RogerDirect	•	•	•
EchoBlock	•		
Tryckkontroll ²			
- Siri/Google Assistant	•	•	
- Pausa/återuppta streaming	•	•	
- Ta emot/avsluta telefonsamtal	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Inställningar för Roger™ och riktmiik	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Bredbandsförstärkare ¹	•	•	•
WindBlock	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Auto-acklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	20	16

¹ Endast tillgänglig för Phonak Sky L-UP

² Endast tillgänglig för Phonak Sky L-PR

Anpassning

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50
Phonak Target	9.0 eller senare	9.0 eller senare
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Akustisk koppling

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Ljudutgång	Standardslangfäste	Dämpad (HE11 680), transparent och 6 ytterligare pediatrika färger	•	•
		Ej dämpad (HE 11) endast i transparent färg		•
	Barnsäkert slangfäste (mini)	Dämpad (HE11 680), transparent och 6 ytterligare pediatrika färger	•	•
		Ej dämpad (HE 11) endast i transparent färg		•
	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)	•	
Öroninsats för SlimTube Dome	Cap dome	Öppen dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	
		Ventilerad dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	
		Power dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	
		SlimTip	Akryl	•
		Silikon	•	
Öroninsats för slangfäste	Öroninsats		•	•

Färger på höljet och slangfästet

Hölje



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Slangfäste



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



Q7
Purple



13
Transparent

Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Det innebär att du kan optimera dina klienters hörapparater redan vid det första besöket eller ge dem en ersättningshörapparat när deras hörapparat repareras. Sky L Trial har även en förinstallerad Roger-mottagare för enkel demonstration och test av Roger-mikrofoner.

Laddare till Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR har alla Lumity-funktionerna samt fördelen att vara laddningsbar.

Dina klienter får en hel dag av lyssnande, inklusive streaming*.

* Förväntad batteritid på 16 timmar, inklusive 10 timmar Roger eller ljudstreaming.



Phonak Sky L Bluetooth®-versioner

Direktstreaming av ljud/samtal

Trådlös Bluetooth 4.2-teknik och de flesta äldre telefoner med Bluetooth

Trådlöst kommunikationssortiment

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Trådlösa tillbehör		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger-mikrofoner	•	•
App		
Roger-mikrofoner	•	•

Mer information finns på www.phonak.se/sky-lumity

Information om Roger-mikrofoner finns på www.phonak.se/roger-for-education

Mer information om myPhonak Junior finns på www.phonak.se/myphonak-junior

life is on

Vår drivkraft har sedan 1947 varit att förbättra livskvaliteten för alla med nedsatt hörsel genom att öppna nya akustiska världar. Vi på Phonak är övertygade om att höra bättre bidrar till att man mår bättre och att god hörsel därmed är väsentlig för att leva livet fullt ut. Hörseln är direkt kopplad till socialt, känslomässigt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda ett brett utbud av innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast – att förbättra taluppfattning, påverka människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

www.phonak.com



027-0697-09/V1.01/2023-06/ko © 2023 Sonova AG All rights reserved