

Audéo YES

Produktinformation



Audéo YES är diskret och elegant och gjord för personer med lätt till grav hörselnedsättning. Audéo YES innehåller de absolut senaste funktionerna, inkluderande alla CORE-

egenskaper och trådlösa funktioner. Audéo YES finns i tre funktionsnivåer med val av standard- eller power-hörtelefon, olika domer och insatser.

Funktioner/Tillval

	Audéo YES IX	Audéo YES V	Audéo YES III
SoundFlow	Premium	Avancerad	Standard
WhistleBlock-teknologi	■	■	■
ZoomControl	■		
Riktmikrofon	■	■	■
Riktverkan	VoiceZoom (33 kanaler)	VoiceZoom (12 kanaler)	Adaptive digital AudioZoom
Real Ear Sound	■	■	
SoundRelax	■		
EchoBlock-system	■		
WindBlock-hantering	■	■	
NoiseBlock-behandling	20 kanaler	16 kanaler	6 kanaler
DataLogging	■	■	■
Självinläring	■	■	
Kabelfri anpassning via iCube	■	■	■
Tillbehör			
iCom	■	■	■
myPilot	■	■	■
iView	■	■	■

Programvara

- iPG 2.3 eller högre, NOAH-kompatibel


Hårdvara

- PC (IBM-kompatibel) med NOAHlink och/eller HI-PRO




PHONAK life is on

Kabelfri anpassning med iCube

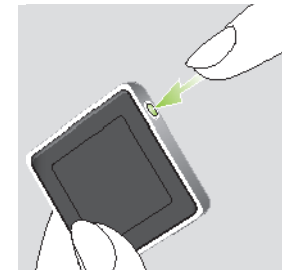


1. Koppla på iCube och kontrollera Bluetooth-anslutningen till datorn.

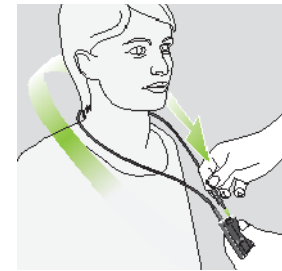


2. Placera iCube runt patientens hals och anslut halsslingan till iCube.

Programmering

Ansluta programmeringskabeln till en Audéo YES

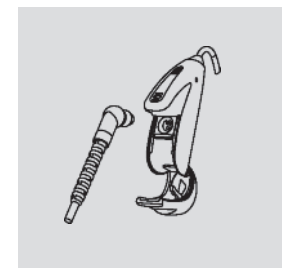

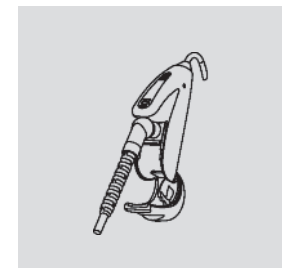


1. Öppna batterifacket.



2. Sätt i programmeringskabeln i kontakten. Använd endast programmeringskabel CS-44 A (Phonak-version).


Tekniska data

Datablad finns på www.phonak.se (på engelska).


		Audéo YES IX	Audéo YES V	Audéo YES III
				
Extern hörtelefon standard				
Profil				
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	112	112	112
	Öronsimulator	121	121	121
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	44	44	44
	Öronsimulator	56	56	56
Frekvensområde		<100 Hz – 8300 Hz	<100 Hz – 8300 Hz	<100 Hz – 8300 Hz
Strömförbrukning (mA)		1.0 mA	1.0 mA	1.0 mA
Extern hörtelfon power				
Profil				
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	125	125	125
	Öronsimulator	132	132	132
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	55	55	55
	Öronsimulator	62	62	62
Frekvensområde		<100 Hz – 7000 Hz	<100 Hz – 7000 Hz	<100 Hz – 7000 Hz
Strömförbrukning (mA)		1.1 mA	1.1 mA	1.1 mA
Extern hörtelefon standard och power				
Batteristorlek		312	312	312
VoiceZoom 33 kanaler		✓		
VoiceZoom 12 kanaler			✓	
digital AudioZoom				✓

Anpassningsområden



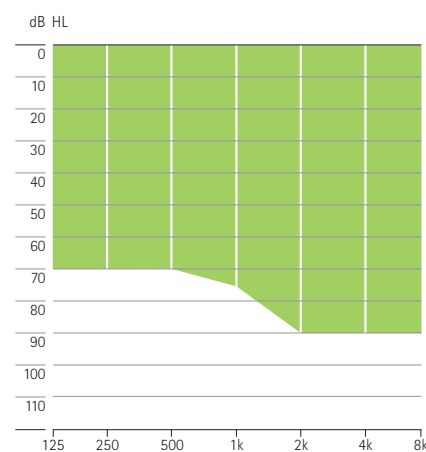

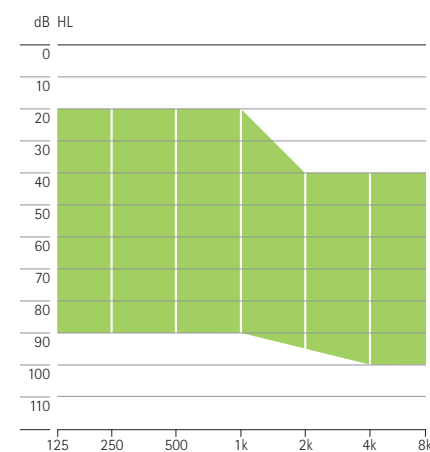

Extern hörtelefon standard



Extern hörtelefon power






Tillval

	Audéo YES IX	Audéo YES V	Audéo YES III
Extern hörtelefon standard (4 olika längder till vänster och höger: 0 – 3)	S	S	S
Extern hörtelefon power (4 olika längder till vänster och höger: 0 – 3)	T	T	T
 Öppen dome (3 olika storlekar: 5/7/10, två längder)	xS	xS	xS
 "Stängd" dome (två längder)	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 Power dome (3 olika storlekar: 9/10/11, två längder)	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 SlimTip	xS	xS	xS
 cShell	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 xShell	xP	xP	xP
17 olika färger: Blue Jeans (C4), Beige (01), Tabac (35), Back in Black (84), Classic Caddy (92), Lunar Eclipse (85), Snowblade (93), Precious Metal (86), Royal Velvet (79), Creme Brulee (89), Antique Mahogany (87), Raku Glaze (91), Fery Temper (90), Flower Power (88), Pure Passion (83), Pinot Noir (80), Green with Envy (81)	T	T	T

Note:
En del tillval är landsspecifika. Se beställningsblanketten.

S = standard
T = tillval
xS = Extern hörtelefon standard
xP = Extern hörtelefon power

Tillbehör

	Audéo YES IX	Audéo YES V	Audéo YES III
myPilot 	✓	✓	✓
iCom med EasyAudio och EasyBluetooth 	✓	✓	✓
iView 	✓	✓	✓

Teknisk beskrivning

- 1 Dubbla mikrofoner med mikrofonfilter
- 2 Batterifack med AV/PÅ
- 3 Serienummer (inuti batterifacket)
- 4 Extern hörtelefon
- 5 Dome/SlimTip/xShell

