

Tillval

SuperPower/UltraPower	Junior		Junior		Junior		Junior		Junior	
	Naida III SP	Naida III SP Jr	Naida V SP	Naida V SP Jr	Naida IX SP	Naida III UP	Naida V UP	Naida V UP Jr	Naida IX UP	
Slangfästen										
HE7 680	S	T	S	T	S	S	T	S	T	S
HE7	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
minislangfäste HE7 680	T	S	T	S	T	T	S	T	S	T
minislangfäste HE7	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Volymkontrollvariationer										
standard	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
låst (för barn)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Telespole	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barnsäkert batterifack	T	S	T	S	T	T	S	T	S	T

Anmärkning:
Vissa tillval är landsberoende. Mer information finns i beställningsformuläret.
S = Standard T = Tillval

Produktinformation

Naida III, Naida V, Naida IX





Naida

Naida är en enastående produktserie med en mängd funktioner. Naida UltraPower är gjord för mycket grava hörselnedsättningar och Naida SuperPower är gjord för måttliga till grava hörselnedsättningar. De är baserade på den senaste trådlösa teknologin, CORE, från Phonak, som ger kabelfri anpassning, QuickSync-kordinering och trådlös anslutning.

Den unika kombinationen av SoundRecover, WhistleBlock, PowerProcessing och BassBoost ger mycket goda nivåer av hörbarhet och tydlighet. Med SoundRecover (olinjär frekvenskompression), kommer brukaren att höra mer av hörfrekventa ljud, som är viktiga för talupfattningen. Återkoppling undertrycks effektivt utan att förstärkning förloras, tack vare den nya WhistleBlock-teknologin.

Anpassningsområden

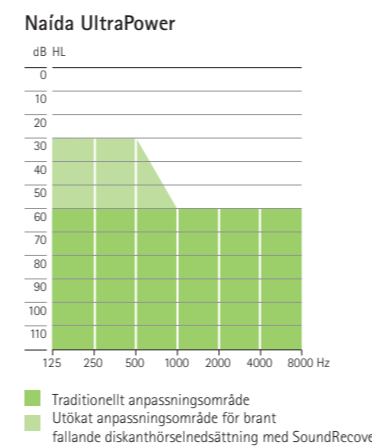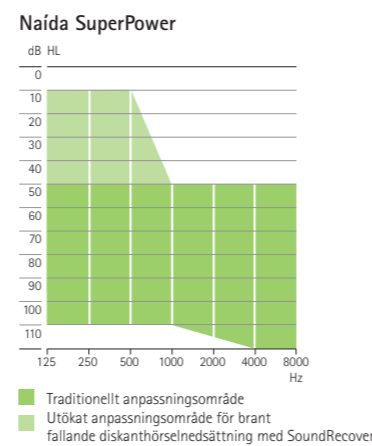

Teknisk beskrivning

- 1 Transparent slangfäste
- 2 Ljudutgång
- 3 Mikrofoner med mikrofonfilter (vattenskyddat)
- 4 Programomkopplare
- 5 Programmeringskontakt
- 6 Digital volymkontroll
- 7 Serienummer
- 8 Batterifack med PÅ/AV
- 9 Batteriskydd (vattenskyddat)
- 10 Designintegrerad FM



PHONAK life is on



Översikt över funktioner och tillbehör

Funktioner	Beskrivning	Naida III SP Naida III SP Jr Naida III UP Naida III UP Jr	Naida V SP Naida V SP Jr Naida V UP Naida V UP Jr	Naida IX SP Naida IX UP
Mer hörsel				
SoundFlow	Anpassar hörapparatens inställningar i real-tid till ljudmiljön genom att blanda 2, 3 eller 4 basprogram	Standard	Avancerad	Premium
Kanaler	Fullt programmerbar digital hörapparat	6	16	20
PowerProcessing	Väljer signalbehandling från olinjär till linjär, beroende på audiometrisk konfiguration och hörselnedsättning	■	■	■
BassBoost	Ger extra basförstärkning och utnivå för förbättring av subjektiv ljudstyrkeupplevelse	■	■	■
Manuella program	Upp till 5 manuellt åtkomliga lyssningsprogram	2 valbara och 2 FM- och/eller telespoleprogram	4 (fritt konfigurerbara)	5 (fritt konfigurerbara)
SoundRecover	Komprimerar och flyttar höga frekvenser till ett område med användbar hörsel	■	■	■
WhistleBlock-teknologi	Den nya normen när det gäller eliminering av återkoppling	■	■	■
Riktverkan	Så mycket riktverkan du behöver	Rundupptagande	digital AudioZoom	VoiceZoom (33 kanaler)
Real Ear Sound	Återställer ytterörats effekt		■	■
NoiseBlock	Analyserar och känner igen ljud som inte är tal och dämpar dem automatiskt	■	■	■
EchoBlock-system	Adaptivt system för dämpning av efterklang och eko			■
WindBlock	Maximal komfort vid vindbrus		■	■
SoundRelax	Eliminerar irriterande impulsjud		■	■
ZoomControl	Binauralt balanserat nätverk med fyra mikrofoner för brukarstyrd riktverkan			■
QuickSync	Binauralt volym- och programkontroll		■	■
DataLogging	Loggar, lär och anpassar ljudstyrkan efter brukarens önskemål	■	■	■
Sjävinläring	Telefonsignalen streamas från en hörapparat till den andra			■
Anslutningsmöjligheter				
DuoPhone	Telefonsignalen streamas från en hörapparat till en annan			■
EasyFM, EasyPhone, EasyAudio, EasyBluetooth	Fyra automatiska program för FM, telefon, binaural streaming av ljud och handsfree binaural användning av mobiltelefon	■	■	■
FM	AS11/ML111 till alla SP-modeller AS10/ML101 till alla UP-modeller	■	■	■
iCom	Enkel, binaural, handsfree anslutning till kommunikations- och nederhållningsutrustning	■	■	■
Click'nTalk	Intuitiv mobiltelefonlänk	■	■	■
myPilot	En fjärrkontroll med fullfärgsdisplay som ger full kontroll över hörapparatens	■	■	■
iView	Visar hörapparatens batteriladdning, aktuellt lyssningsprogram och volyminställningar	■	■	■
Pålitlighet				
Vattenskyddad	Går att lita på överallt i alla väder	■	■	■
Mikrofonskydd	Skyddar mikrofonerna från fukt och smuts	■	■	■
Secure 'n Stay	Secure 'n Stay till alla SP-modeller Secure 'n Stay till alla UP-modeller	■	■	■
Färger	Beige (01), Brun (03), Tabac (35), Benvit (04), Svart (06), High-tech grå (12), Grå (23), Blond (49), Kastanjebrun (50), Ofärgad transparent (13), Röd transparent (36), Blå transparent (37), Lila transparent (38), Palladium/Svart (70), Safariränder (B3), Savann (B4), Ljusrosa (33), Ljusblå (34)	■	■	Blue Moon (C9)
Batteristorlek		Naida SP 13 Naida UP 675	13 675	13 675
Anpassning				
Kabelfri anpassning	Inga mer trassliga programmeringskablar	■	■	■
Hårdvara	PC, iCube eller NOAHlink eller HI-PRO	■	■	■
Anpassningsprogram	iPFG-version som krävs	2.1a	2.1a	2.4

Funktioner

Samtliga produktblad finns tillgängliga på www.phonak.se

		Junior		Junior		
SuperPower		Naída III SP	Naída III SP Jr	Naída V SP	Naída V SP Jr	Naída IX SP
Funktioner		HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680
Max. utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	140/133	140/133	140/133	140/133	140/133
	Öronsimulator	141/138	141/138	141/138	141/138	141/138
Max. förstärkning (dB)	2 cc coupler	75/68	75/68	75/68	75/68	75/68
	Öronsimulator	80/73	80/73	80/73	80/73	80/73
Frekvensområde – 2 cc coupler (Hz)		<100 – 6400	<100 – 6400	<100 – 6400	<100 – 6400	<100 – 6400
Frekvensområde – Öronsimulator (Hz)		<100 – 6900	<100 – 6900	<100 – 6900	<100 – 6900	<100 – 6900
Batteristorlek		13	13	13	13	13
Arbetsström (mA)		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Barnmodeller med minislangfäste och barnsäker batterilucka			✓		✓	

		Junior		Junior		
UltraPower		Naída III UP	Naída III UP Jr	Naída V UP	Naída V UP Jr	Naída IX UP
Funktioner		HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680	HE7/HE7 680
Max. utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	142/135	142/135	142/135	142/135	142/135
	Öronsimulator	144/139	144/139	144/139	144/139	144/139
Max. förstärkning (dB)	2 cc coupler	82/75	82/75	82/75	82/75	82/75
	Öronsimulator	85/80	85/80	85/80	85/80	85/80
Frekvensområde – 2 cc coupler (Hz)		<100 – 4900	<100 – 4900	<100 – 4900	<100 – 4900	<100 – 4900
Frekvensområde – Öronsimulator (Hz)		<100 – 5000	<100 – 5000	<100 – 5000	<100 – 5000	<100 – 5000
Batteristorlek		675	675	675	675	675
Arbetsström (mA)		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Barnmodeller med minislangfäste och barnsäker batterilucka			✓		✓	

Tillbehör

SuperPower/UltraPower	Naída III SP	Naída V SP	Naída IX SP	Naída III UP	Naída V UP	Naída IX UP
	Naída III SP Jr	Naída V SP Jr		Naída III UP Jr	Naída V UP Jr	
Digitala trådlösa tillbehör						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CROSLink	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secure 'n Stay- håller hörapparaten på plats	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secure 'n Stay- håller hörapparaten på plats				✓	✓	✓
Glasögonsadapter	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FM

SuperPower/UltraPower	Naída III SP	Naída V SP	Naída IX SP	Naída III UP	Naída V UP	Naída IX UP
	Naída III SP Jr	Naída V SP Jr		Naída III UP Jr	Naída V UP Jr	
Designintegrerad FM-mottagare (vattenskyddad)						
				✓	✓	✓
	✓	✓	✓			
Universella FM-mottagare						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FM-sändare						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Designintegrerad FM-mottagare (vattenskyddad)

² Kroppsburen FM-mottagare


FM-mottagarnas färger:

ML10i/ML11i:
Beige (01), Brun (03), Tabac (35), Bervit (04), Svart (06), Grå (23), Kastanjebrun (50), Ljusrosa (33), Ljusblå (34)

AS10/AS11:
Beige (01), Brun (03), Svart (06), Tabac (35)

Programmering

Kabelfri anpassning med iCube

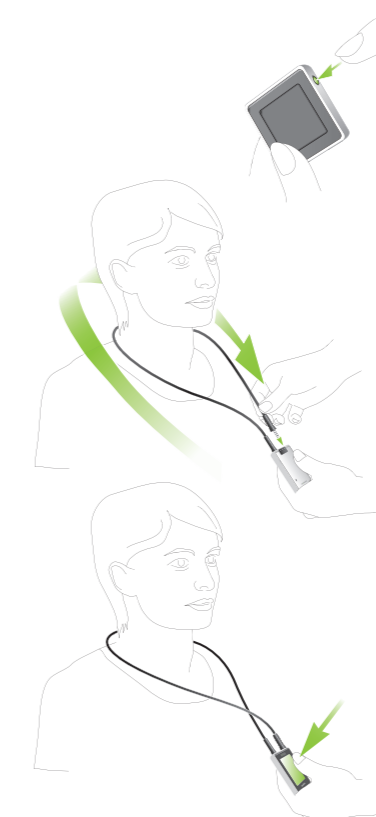


1. Slå på iCube och kontrollera Bluetooth-anslutningen till datorn (den blå lysdioden blinkar långsamt).

2. Placera halsslingan runt brukarens hals och anslut till iCube.

3. Kontrollera anslutningen mellan hörapparaterna och iCube genom att trycka på iCube-knappen (den mittersta lysdioden lyser i tre sekunder)

Via kabel (NOAHlink, HI-PRO)

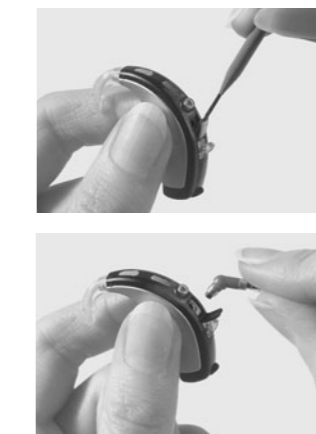

1. Öppna luckan över programmeringskontakten.

2. Sätt i programmeringskabeln i kontakten. Använd endast programmeringskabel CS-44 A (Phonak-version).