

# Audéo MINI

## Produktinformation



Audéo MINI är liten och smidig och gjord för personer med lätt till grav hörselnedsättning. Audéo MINI innehåller marknadsledande CORE-funktioner och SoundRecover. Audéo

MINI finns i tre funktionsnivåer med val av standard- eller power-hörtelefon, olika domer och insatser.

### Funktioner/Tillval

|                        | Audéo MINI IX          | Audéo MINI V           | Audéo MINI III    |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| SoundFlow              | Premium                | Avancerad              | Standard          |
| WhistleBlock-teknologi | ■                      | ■                      | ■                 |
| SoundRecover           | ■                      | ■                      | ■                 |
| Riktverkan             | VoiceZoom (33 kanaler) | VoiceZoom (12 kanaler) | digital AudioZoom |
| Real Ear Sound         | ■                      | ■                      |                   |
| SoundRelax             | ■                      |                        |                   |
| EchoBlock-system       | ■                      |                        |                   |
| WindBlock-hantering    | ■                      | ■                      |                   |
| NoiseBlock-behandling  | 20 kanaler             | 16 kanaler             | 6 kanaler         |
| DataLogging            | ■                      | ■                      | ■                 |

### Programvara


- iPGF 2.5 eller högre, NOAH-kompatibel

### Hårdvara


- PC (IBM-kompatibel) med iCube, NOAHlink och/eller HI-PRO

## Programmering

### Ansluta programmeringskabeln till en Audéo MINI

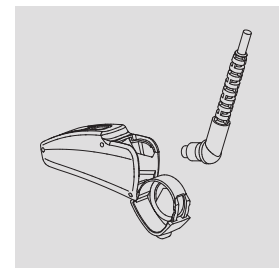

1. Öppna batterifacket.

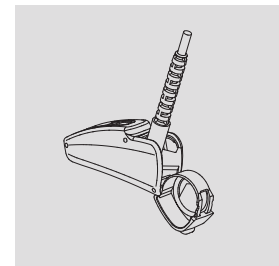




2. Sätt i programmeringskabeln i kontakten.  
Använd endast programmeringskabel CS-44 A (Phonak-version).




## Tekniska data

Datablad finns på [www.phonak.se](http://www.phonak.se) (på engelska).


|   |               | Audéo MINI IX  | Audéo MINI V  | Audéo MINI III  |
|---|---------------|--|---|---|
|   |               |  |  |  |
| <b>Extern hörtelefon standard</b>           |               |  |   |   |
| <b>Profil</b>                               |               |  |   |   |
| Max utnivå (dB SPL)                         | 2 cc coupler  | 112  | 112   | 112   |
|   | Öronsimulator | 121  | 121   | 121   |
| Max förstärkning (dB)                       | 2 cc coupler  | 45   | 45  | 45  |
|   | Öronsimulator | 56   | 56  | 56  |
| Frekvensområde                              |               | <100 Hz - 8800 Hz  | <100 Hz - 8800 Hz   | <100 Hz - 8800 Hz   |
| Strömförbrukning (mA)                       |               | 1.0 mA   | 1.0 mA  | 1.0 mA  |
| <b>Extern hörtelfon power</b>               |               |  |   |   |
| <b>Profil</b>                               |               |  |   |   |
| Max utnivå (dB SPL)                         | 2 cc coupler  | 126  | 126   | 126   |
|   | Öronsimulator | 132  | 132   | 132   |
| Max förstärkning (dB)                       | 2 cc coupler  | 55   | 55  | 55  |
|   | Öronsimulator | 65   | 65  | 65  |
| Frekvensområde                              |               | <100 Hz - 7200 Hz  | <100 Hz - 7200 Hz   | <100 Hz - 7200 Hz   |
| Strömförbrukning (mA)                       |               | 1.1 mA   | 1.1 mA  | 1.1 mA  |
| <b>Extern hörtelefon standard och power</b> |               |  |   |   |
| Batteristorlek                              |               | 10   | 10  | 10  |
| VoiceZoom 33 kanaler                        |               | ✓  |   |   |
| VoiceZoom 12 kanaler                        |               |  | ✓   |   |
| digital AudioZoom                           |               |  |   | ✓   |

## Anpassningsområden



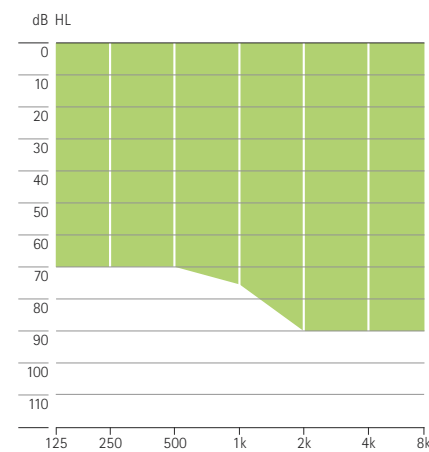

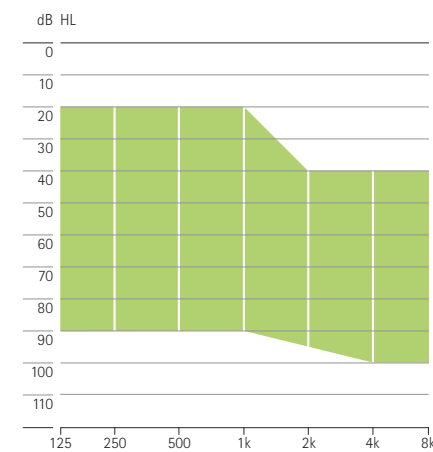

### Extern hörtelefon standard



### Extern hörtelefon power



## Tillval

|   | Audéo MINI IX | Audéo MINI V | Audéo MINI III |
|---|---------------|--------------|----------------|
| Extern hörtelefon standard<br>(4 olika längder till vänster och höger: 0 - 3)   | S             | S            | S              |
| Extern hörtelefon power<br>(4 olika längder till vänster och höger: 0 - 3)  | T             | T            | T              |
|  Öppen dome<br>(3 olika storlekar: 5/7/10, två längder)  | xS            | xS           | xS             |
|  "Stängd" dome (två längder)   | xS/xP         | xS/xP        | xS/xP          |
|  Power dome<br>(3 olika storlekar: 9/10/11, två längder)   | xS/xP         | xS/xP        | xS/xP          |
|  SlimTip   | xS            | xS           | xS             |
|  cShell  | xS/xP         | xS/xP        | xS/xP          |
|  xShell  | xP            | xP           | xP             |
| <b>11 olika färger:</b><br>Beach Beige (F6), Mocha Taupe (F7), Chocolate Brown (F8), Midnight Black (F9),<br>Dark Cliff Gray (F0), Mid Cloud Gray (G1), Glacier Ice Gray (G2), Silver Shadow (C0),<br>Ocean Blue (G3), Olive Green (G4), Chili Red (G5) | T             | T            | T              |

**Notera:**  
En del tillval är landsspecifika. Se beställningsblanketten.

S = standard  
T = tillval  
xS = Extern hörtelefon standard  
xP = Extern hörtelefon power

## Teknisk beskrivning

- 1 SlimTip/xShell/cShell/Dome
- 2 Extern hörtelefon
- 3 Mikrofon med mikrofonskydd
- 4 Batterifack med AV/PÅ
- 5 Serienummer (inuti batterifacket)

