

Audéo SMART

Produktinformation



Audéo SMART är diskret och flexibel och gjord för personer med lätt till grav hörselnedsättning. Audéo SMART har nya externa kontroller och innehåller alla de marknadsledande

CORE- och trådlösa funktionerna. Audéo SMART finns i tre funktionsnivåer med val av standard- eller power-hörtelefon, olika domer och insatser.

Funktioner/Tillval

	Audéo SMART IX	Audéo SMART V	Audéo SMART III
SoundFlow	Premium	Avancerad	Standard
WhistleBlock-teknologi	■	■	■
ZoomControl	■		
Riktmikrofon	■	■	■
Riktverkan	VoiceZoom (33 kanaler)	VoiceZoom (12 kanaler)	digital AudioZoom
Real Ear Sound	■	■	
SoundRelax	■		
EchoBlock-system	■		
WindBlock-hantering	■	■	
NoiseBlock-behandling	20 kanaler	16 kanaler	6 kanaler
DataLogging	■	■	■
Självinläring	■	■	
QuickSync	■	■	■
Kabelfri anpassning via iCube	■	■	■
Tillbehör			
iCom	■	■	■
myPilot	■	■	■
Click'n Talk	■	■	■

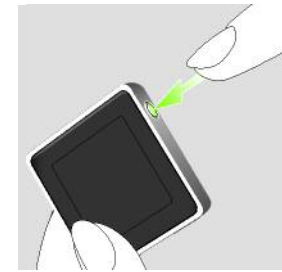
Programvara

- iPFG 2.5 eller högre, NOAH-kompatibel

Hårdvara

- PC (IBM-kompatibel) med iCube, NOAHlink och/eller HI-PRO

Kabelfri anpassning med iCube




1. Koppla på iCube och kontrollera Bluetooth-anslutningen till datorn.




2. Placera iCube runt patientens hals och anslut halsslingan till iCube.

Programmering

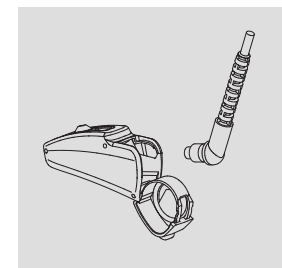Ansluta programmeringskabeln till en Audéo SMART



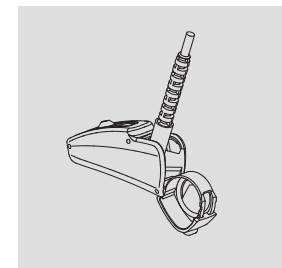1. Öppna batterifacket.






2. Sätt i programmeringskabeln i kontakten. Använd endast programmeringskabel CS-44 A (Phonak-version).



PHONAK life is on


Tekniska data

Datablad finns på www.phonak.se
(på engelska).


		Audéo SMART IX	Audéo SMART V	Audéo SMART III
				
Extern hörtelefon standard				
Profil				
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	112	112	112
	Öronsimulator	121	121	121
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	45	45	45
	Öronsimulator	56	56	56
Frekvensområde		<100 Hz – 8800 Hz	<100 Hz – 8800 Hz	<100 Hz – 8800 Hz
Strömförbrukning (mA)		1.1 mA	1.1 mA	1.1 mA
Extern hörtelfon power				
Profil				
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	126	126	126
	Öronsimulator	132	132	132
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	55	55	55
	Öronsimulator	65	65	65
Frekvensområde		<100 Hz – 7200 Hz	<100 Hz – 7200 Hz	<100 Hz – 7200 Hz
Strömförbrukning (mA)		1.1 mA	1.1 mA	1.1 mA
Extern hörtelefon standard och power				
Batteristorlek		312	312	312
VoiceZoom 33 kanaler		✓		
VoiceZoom 12 kanaler			✓	
digital AudioZoom				✓

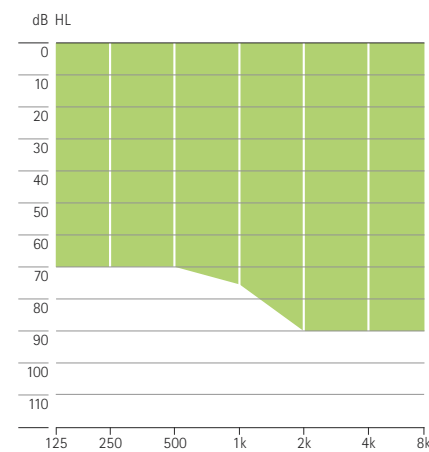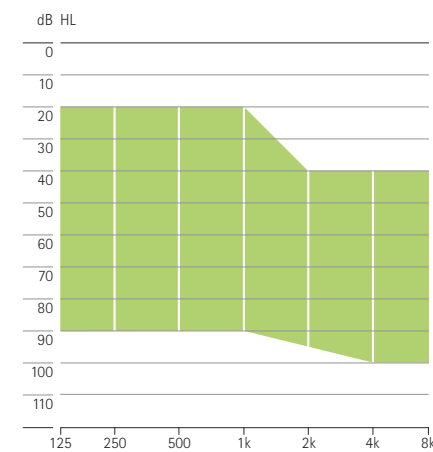Anpassningsområden






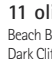
Extern hörtelefon standard



Extern hörtelefon power






Tillval

	Audéo SMART IX	Audéo SMART V	Audéo SMART III
Extern hörtelefon standard (4 olika längder till vänster och höger: 0 – 3)	S	S	S
Extern hörtelefon power (4 olika längder till vänster och höger: 0 – 3)	T	T	T
 Öppen dome (3 olika storlekar: 5/7/10, två längder)	xS	xS	xS
 "Stängd" dome (två längder)	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 Power dome (3 olika storlekar: 9/10/11, två längder)	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 SlimTip	xS	xS	xS
 cShell	xS/xP	xS/xP	xS/xP
 xShell	xP	xP	xP
11 olika färger: Beach Beige (F6), Mocha Taupe (F7), Chocolate Brown (F8), Midnight Black (F9), Dark Cliff Gray (F0), Mid Cloud Gray (G1), Glacier Ice Gray (G2), Silver Shadow (C0), Ocean Blue (G3), Olive Green (G4), Chili Red (G5)	T	T	T

Notera:
En del tillval är landsspecifika. Se
beställningsblanketten.

S = standard xS = Extern hörtelefon standard
T = tillval xP = Extern hörtelefon power

Tillbehör

	Audéo SMART IX	Audéo SMART V	Audéo SMART III
myPilot 	✓	✓	✓
iCom med EasyAudio och EasyBluetooth 	✓	✓	✓
Click'nTalk 	✓	✓	✓

Teknisk beskrivning

- 1 SlimTip/xShell/cShell/Dome
- 2 Extern hörtelefon
- 3 Mikrofon med mikrofonskydd
- 4 Tryckknapp
- 5 Batterifack med AV/PÅ
- 6 Serienummer (inuti batterifacket)

