

Witamy w świecie Dynamic FM

Dziękujemy, że znaleźliście Państwo czas na zapoznanie się z nowymi nadajnikami Dynamic FM firmy Phonak: SmartLink+, ZoomLink+ oraz EasyLink+.

Gdy Państwo zaczniecie używać tych wysokiej klasy produktów i odpowiednich bezprzewodowych odbiorników firmy Phonak, lepiej zrozumiecie mowę w wielu różnych sytuacjach i każdy dzień będzie się naprawdę pięknie zapowiadać.

Prezentowane tutaj 3 nowe nadajniki po raz pierwszy umożliwiają dorosłym korzystanie z technologii Dynamic FM, zapewniającej krystalicznie czysty dźwięk i współdziałającej z odbiornikami FM tak, by użytkownicy z ubytkami słuchu mogli odbierać bezpośrednio wyraźny głos rozmówcy albo te dźwięki, które chcą usłyszeć.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się na naszą wiedzę, pomysły i troskę. A dzięki twórczemu pokonywaniu wyzwań technologii wprowadzamy innowacje, które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać całego bogactwa dźwięków, w które obfituje życie.

**Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.**

www.phonak.pl

SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Rozwiązania Dynamic FM dla dorosłych

Dzisiaj jest
piękny dzień

028-0442-16 / V1.00 2010-08 / visur1 / Wydrukowano w Polsce, © Phonak AG, wszystkie prawa zastrzeżone.

PHONAK life is on



Twoje aparaty słuchowe mogą się doskonale sprawdzać, gdy wokół panuje cisza, ale co się dzieje w głośnym otoczeniu? W takich okolicznościach pomocne mogą okazać się systemy Dynamic FM firmy Phonak.

Kiedy nadajnik Dynamic FM może być pomocny?

Rozmowy w głośnym otoczeniu

W trakcie rozmowy odgłosy otoczenia, takie jak dźwięki dochodzące z kuchni lub telewizora, mogą rozpraszać i dezorientować. Nadajnik Dynamic FM pomaga skupić się na słowach osoby mówiącej, zamiast na towarzyszących dźwiękach.




W samochodzie

Nielatwo jest rozmawiać przez telefon prowadząc samochód, nawet z zestawem głośnomówiącym. SmartLink+ oferuje bezprzewodowe połączenie z każdym telefonem komórkowym wyposażonym w funkcję Bluetooth i korzystanie z telefonu bez potrzeby użycia rąk.



Oglądanie telewizji

Dostosowanie głośności dźwięku telewizora do Twoich potrzeb nie zawsze jest wygodne. Dzięki trzem nadajnikom FM firmy Phonak możesz używając wyjścia audio, połączyć się z odbiornikiem TV i cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem.

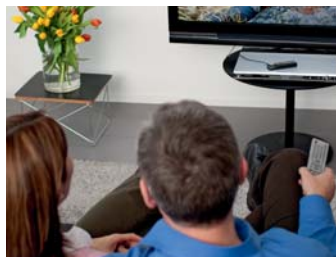

SmartLink+

Tylko to, co najlepsze

Stworzony z myślą o najbardziej wymagających, ten łatwo współpracujący z różnymi urządzeniami nadajnik Dynamic FM udostępnił wyjątkowe, najlepsze w swojej klasie rozwiązania, takie jak:

- Łączy Bluetooth umożliwiające swobodne, nie zajmujące rąk, używanie telefonu komórkowego.
- Zaawansowane możliwości łącza Bluetooth w zakresie efektywnej współpracy z odtwarzaczami MP3.
- Zdalne sterowanie aparatami słuchowymi.

Nadajnik SmartLink+ jest ponadto wyposażony w trzy inteligentne funkcje ustawienia mikrofonu (przedstawione poniżej), technologię SoftLanding firmy Phonak (dzięki której nie słychać rozpraszającego huczenia, gdy nadajnik jest umieszczony na twardej powierzchni), użyteczne wejście audio, umożliwiające podłączenie telewizora, komputera czy innych urządzeń bezprzewodowych i przyjemne korzystanie z nich, oraz szybko ładującą się baterię.

Ustawienia mikrofonu dla nadajników SmartLink+ i ZoomLink+



SuperZoom

Ustawienie optymalne w bardzo głośnym otoczeniu, takim jak restauracja. Mikrofon wychwytuje dźwięk mowy dochodzący z przodu i tłumi szum płynący ze wszystkich innych kierunków.



Zoom

Standardowe ustawienie odpowiednia w codziennych sytuacjach, takich jak bezpośrednie rozmowy i dyskusje.

ZoomLink+

Dostarczanie pożądanych dźwięków bezpośrednio do Twoich uszu

Wielofunkcyjny, bezprzewodowy mikrofon Dynamic FM daje możliwość poprawy słyszenia i rozumienia w wielu różnorodnych sytuacjach - od spotkań rodzinnych i towarzyskich przez jazdę samochodem aż po pobyt w restauracji czy centrum handlowym.

To eleganckie urządzenie o atrakcyjnym wyglądzie jest wyposażone w technologię Dynamic FM, umożliwiającą słuchanie w bardzo głośnym otoczeniu, 3 inteligentne funkcje ustawienia mikrofonu (przedstawione poniżej), nową zabezpieczającą technologię SoftLanding firmy Phonak, wejście audio, pozwalające na efektywne i bezprzewodowe korzystanie z telewizora, komputera i urządzeń audio oraz w szybko ładującą się baterię.



Omni

Stworzony z myślą o spokojniejszych sytuacjach, ten wszechkierunkowy tryb wychwytuje dźwięki dobiegające ze wszystkich stron nadajnika.

EasyLink+

Łatwiejsze śledzenie toku każdej rozmowy

Niezwykle łatwy do opanowania i używania nadajnik EasyLink+ jest efektywnym mikrofonem Dynamic FM, obsługiwany za pomocą jednego przycisku.

Wymagający tylko jednego naciśnięcia przycisku w celu włączenia lub wyłączenia i mający stałe ustawienie mikrofonu i niezwykle szybko ładującą się baterię, nadajnik EasyLink+ zapewnia krystalicznie czysty dźwięk dzięki zastosowaniu technologii Dynamic FM w połączeniu z zabezpieczającą technologią SoftLanding firmy Phonak. Można go podłączyć do telewizora, komputera i innych urządzeń audio, co umożliwia efektywne, bezprzewodowe słuchanie.

Ustawienia mikrofonu dla nadajnika EasyLink+



Zoom

Domyślne ustawienie nadajnika EasyLink+ doskonale sprawdza się w codziennych sytuacjach, takich jak bezpośrednie rozmowy i dyskusje. Ustawienie to może zostać przeprogramowane na tryb SuperZoom lub Omni przez protetyka słuchu.