

Phonak Audéo™ L.

Informations sur le produit

Phonak Audéo L est un portefeuille de RIC complet destiné aux pertes auditives légères à profondes. Phonak Audéo L comprend 4 designs, 3 niveaux de performances et 5 écouteurs externes, y compris l'écouteur ActiveVent™.

Fonctionnant avec la technologie innovante de la plateforme Phonak Lumity, les aides auditives Phonak Audéo L sont idéales pour les patients qui préfèrent l'utilisation de boîtiers RIC flexibles et discrets.



Description des produits

| | |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| | | Audéo L-R Audéo L-R Trial L 90/L 70/L 50 | Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L 90/L 70/L 50 | Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L 90/L 70/L 50 | Audéo L-312 Audéo L-312 Trial L 90/L 70/L 50 |
| Taille de pile | | batterie rechargeable intégrée | batterie rechargeable intégrée | batterie rechargeable intégrée | 312 |
| Bouton multifonctions | | • | • | • | • |
| Bobine d'induction | | | • | | |
| Bluetooth® | | • | • | • | • |
| Revêtement hydrophobe | | • | • | • | • |
| Indice de protection | | IP68 ¹ | IP68 ¹ | IP68 ¹ | IP68 ¹ |
| Dimensions | L x l x P | 27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 po) | 30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32 po) | 29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35 po) | 26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 po) |
| | Poids | 2,2 g (0,08 oz) | 2,6 g (0,09 oz) | 2,8 g (0,1 oz) | 1,1 g (0,04 oz) |
| Temps de charge ² | 0 % à 100 % | 3 h | 3 h | 3 h | |
| | 0 % à 80 % | 1,5 h | 1,5 h | 2 h | |
| | 30 min d'appareillage | 15 min | 15 min | 20 min | |
| Écouteur S | Coupleur 2 cm ³ | | | | |
| Niveau max. max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Gain max. (dB) | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 |
| Écouteur M | Coupleur 2 cm ³ | | | | |
| Niveau de sortie max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Gain max. (dB) | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 |
| Écouteur MAV | Coupleur 2 cm ³ | | | | |
| Niveau de sortie max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 119 | 119 | 119 | |
| Gain max. (dB) | | 50 | 50 | 50 | |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | |
| Écouteur P | Coupleur 2 cm ³ | | | | |
| Niveau de sortie max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Gain max. (dB) | | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 |
| Écouteur UP | Coupleur 2 cm ³ | | | | |
| Niveau de sortie max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Gain max. (dB) | | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 |

Couleurs des boîtiers

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | H0 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Q2 | Q3 | T3 |
| Dune de Sable | Beige | Santal | Noisette | Champagne | Gris Argenté | Gris Carbone | Velours Noir | Vert Electrique | Bleu Caraïbes | Rose Poudré |

¹ IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.

Niveaux de performances

| | Premium | Avancé | Standard |
|-----------------------------------|---------|--------|----------|
| AutoSense OS™ 5.0 | | | |
| Situation réverbérante | • | | |
| Parole en voiture | • | | |
| Parole dans le bruit intense | • | | |
| Musique | • | • | |
| Confort dans le bruit | • | • | • |
| Parole dans le bruit | • | • | • |
| Situation calme | • | • | • |
| Parole média + mic | • | • | • |
| Musique média + mic | • | • | • |
| Programmes supplémentaires | | | |
| Programmes supplémentaires max. | 4 | 4 | 4 |
| Situation réverbérante | • | | |
| Parole dans le bruit intense | • | • | |
| Conversation à 360° | • | • | |
| Parole dans le bruit | • | • | • |
| Situation calme | • | • | • |
| Confort dans le bruit | • | • | • |
| Musique | • | • | • |
| Téléphone acoustique | • | • | • |
| Programme personnalisé | • | • | • |
| Programmes de diffusion | | | |
| RogerDirect + mic | • | • | • |
| PartnerMic + mic | • | • | • |
| Appel téléphonique + mic | • | • | • |

| | Premium | Avancé | Standard | |
|---------------------------|---|--------|----------|---|
| Fonctions | | | | |
| Technologie SmartSpeech | SpeechSensor | • | | |
| | Renforcement de la parole | • | | |
| | StereoZoom 2.0 | • | • | |
| | Suppression dynamique du bruit | • | • | |
| | Directivité avec capteur de mouvements | • | • | • |
| | RogerDirect™ | • | • | • |
| | ActiveVent™ ¹ | • | • | • |
| | UltraZoom | • | • | • |
| | EchoBloc | • | | |
| | Contrôle tactile ¹ | | | |
| | - Assistant Siri/Google | • | • | |
| | - Mettre en pause/repandre la diffusion | • | • | |
| | - Accepter/mettre fin à un appel téléphonique | • | • | |
| | SoundRelax | • | • | |
| | DuoPhone | • | • | • |
| | Real Ear Sound | • | • | • |
| | Fonctionnalités de santé ^{1,2} | • | • | • |
| | WindBloc | • | • | • |
| | Correction de sonie | • | • | • |
| | Générateur de bruit Tinnitus Balance | • | • | • |
| | Auto Acclimatation | • | • | • |
| | Balance environnementale | • | • | • |
| SoundRecover ² | • | • | • | |
| LarsenBloc | • | • | • | |
| NoiseBloc | • | • | • | |
| QuickSync | • | • | • | |
| AOV | • | • | • | |
| Canaux d'adaptation fine | 20 | 20 | 16 | |

¹ Disponible uniquement pour les modèles rechargeables

² Disponible avec myPhonak


Programmation

| | Audéo L-R Audéo L-R Trial | Audéo L-RT Audéo L-RT Trial | Audéo L-RL Audéo L-RL Trial | Audéo L-312 Audéo L-312 Trial |
|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Phonak Target | 8.0 ou version ultérieure | 8.0 ou version ultérieure | 8.0 ou version ultérieure | 9.1 ou version ultérieure |
| Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2 | • | • | • | • |

Couplage acoustique

| Longueur | Écouteur S | Écouteur M | Écouteur MAV ¹ | Écouteur P | Écouteur UP |
|---|------------|------------|---------------------------|------------|-------------|
| Disponibles dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), en version gauche et droite | • | • | • | • | • |
| Dôme | | | | | |
| Dôme cap | • | • | | • | |
| Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| SlimTip² | | | | | |
| Acrylique | • | • | | • | |
| Silicone | • | • | | • | |
| Titane AV | | | • | | |
| Universel AV Disponible en quatre formes (A, B, C, D) | | | • | | |
| cShell | | | | | |
| Acrylique | • | • | | • | • |
| Titane | • | • | | • | • |
| Plages d'application | | | | | |

¹ Combinaison non disponible avec l'Audéo L-312
² Disponible avec conduit extra long en option

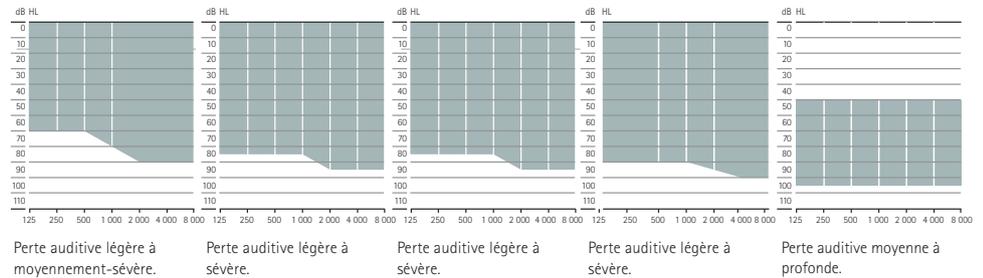

Technologie Phonak SmartSpeech™

La technologie Phonak SmartSpeech traduit notre engagement de concevoir des fonctions qui améliorent la compréhension vocale et qui réduisent l'effort d'écoute dans différents environnements auditifs³. Parmi nos fonctions reconnues, on trouve le renforcement de la parole, la suppression dynamique du bruit et la directivité avec capteur de mouvements. Grâce à Phonak Audéo Lumity, nous proposons deux nouvelles fonctions : StereoZoom 2.0 et SpeechSensor, en plus des avantages existants qu'offrent l'écouteur ActiveVent et la technologie RogerDirect.

Phonak Audéo L Trial

Les aides auditives Phonak Audéo L Trial peuvent être configurées rapidement au niveau de performances souhaité, afin de répondre à votre besoin. Tous les niveaux de technologie dans une même aide auditive Phonak Audéo L Trial vous offrent de nombreuses options afin de garantir une solution auditive dès le premier rendez-vous ou de combler un besoin pendant des réparations.

³ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 – significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence
 Latzel, M. et Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence
 Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411
 Latzel, M., Lesimple, C. et Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Options de charge de Phonak Audéo L



Phonak Charger Ease et Charger Ease Go

Le Phonak Charger Ease est un chargeur compact doté d'aimants dans les socles de charge, facilitant ainsi l'insertion et le retrait des aides auditives Audéo L-R et RT. Phonak Charger Ease Go comprend également une batterie intégrée qui peut charger 3 fois les 2 aides auditives. Les deux chargeurs sont dotés d'un port de charge USB-C standard qui s'allume lorsqu'il est mis sous tension.



Phonak Charger Case Go et Phonak Life Charger

Deux options sont disponibles pour l'Audéo L-RL. Le Phonak Charger Case Go est doté d'une batterie intégrée qui peut charger 3 fois les 2 aides auditives. Les deux chargeurs sont dotés d'un port de charge USB-C standard qui s'allume lorsqu'il est mis sous tension.

Versions Bluetooth® Phonak Audéo L

Diffusion sans fil d'appels directs / audio Technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Gamme de communication sans fil

| | Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50 | Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50 | Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50 | Audéo L-RL Audéo L-312 Trial L90/L70/L50 |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| Compléments d'écoute | | | | |
| TV Connector | • | • | • | • |
| Phonak PartnerMic | • | • | • | • |
| Phonak RemoteControl | • | • | • | • |
| Roger | | | | |
| RogerDirect™ | • | • | • | • |
| Application | | | | |
| myPhonak | • | • | • | • |
| myPhonak Junior | • | • | • | • |

Pour en savoir plus, consultez www.phonak.com/audeo-lumity

Pour en savoir plus sur les microphones Roger, consultez www.phonak.com/roger

Pour en savoir plus sur myPhonak et myPhonak Junior, consultez www.phonak.com/apps

life is on*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

www.phonak.com



7 613389 582840

027-0667-04/V5-02/2024-10/NLG © 2023-2024 Sonova AG Tous droits réservés

